Manuel d'utilisation

DeepUnity PACSonWEB

3.4.300

SSN : DOC-4249895

Dedalus Group © Copyright 2026

Types de notification

Les exemples suivants montrent comment les messages d'avertissement, les consignes de sécurité et les autres instructions et notes sont représentés dans ce document. Le texte explique leur utilisation prévue.

AVERTISSEMENT :

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner une blessure potentiellement grave pour un utilisateur, un technicien, un patient ou tout autre utilisateur.

ATTENTION :

Indique un danger avec un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure légère ou modérée.

Instruction :

Indique une information importante qui doit être lue, comprise, maintenue et/ou respectée par l'utilisateur dans la demande pour assurer un fonctionnement sûr du logiciel.

Remarque :

Les remarques donnent des conseils et mettent l'accent sur des points inhabituels. Ces remarques ne sont pas des instructions.

Important !

Attire l'attention de l'utilisateur sur une information dont il a besoin pour garantir un fonctionnement adéquat du logiciel, par exemple l'attribution des droits ou la disponibilité des licences.

Restriction :

Indique une limitation du logiciel ou une condition qui doit être remplie pour le faire fonctionner de manière sûre.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Conseil :

Communique des astuces à l'utilisateur qui lui permettent d'exécuter une tâche d'une autre manière, par exemple en utilisant un raccourci clavier.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Table des matières

1 Introduction 8

1.1 Usage prévu 8
1.2 Avertissements et précautions 13
1.2.1 Avis de sécurité 13
1.2.2 Divulgation du risque résiduel 16
1.2.3 Signalement d'incidents graves 18
1.3 Plaintes et commentaires sur les produits 18
1.4 Configuration requise 19

2 Général 20

2.1 Conditions générales - Patient 20
2.2 Conditions générales - Utilisateur enregistré 27
2.3 La langue de l'interface 35
2.4 Dates et heures dans DeepUnity PACSonWEB 36

3 S'enregistrer pour un compte 38

3.1 S'inscrire via e-ID (uniquement BE) 39
3.2 Demander un compte via le Service Desk 45

4 Se connecter 48

4.1 Connexion avec un numéro de référence 51
4.2 Connexion à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe 53
4.2.1 Authentification à deux facteurs 55
4.2.1.1 Authentification à deux facteurs via l'application Authenticator 56
4.3 Connexion à l'aide d'un e-ID (uniquement BE) 60
4.4 Se connecter en tant que délégué 63
4.5 Connexion par le biais d'un répertoire actif 64
4.6 Connexion à l'aide du DME 66
4.7 Visualisation des tentatives de connexion 66
4.8 Modifier ou réinitialiser votre mot de passe 67
4.9 Déconnexion 68

5 La liste d'examens 70

5.1 Configurer la liste d'examens 73
5.2 Utilisation des filtres 78
5.3 Ajout d'un examen 84
5.4 Portail de téléchargement 85

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

5.4.1 Sélection des images/fichiers médicaux à télécharger 88
5.4.2 Vérifier les informations relatives au patient et à l'examen et télécharger les images/fichiers 93
5.4.3 Restrictions et messages d'erreur 102
5.4.4 Utilisation du portail de téléchargement en tant qu'utilisateur de la source/ administrateur de la source 104
5.5 Paramètres utilisateur 107
5.5.1 Mon compte 109
5.5.2 Préférences 112
5.5.2.1 Configuration des touches de raccourci personnelles 120
5.5.2.2 Transfert DICOM 122
5.5.3 Favoris 122
5.5.4 Mes groupes 125
5.5.5 Mes appareils 128
5.5.6 Blocs de texte 129
5.6 Conditions d'accès supplémentaires 136
5.6.1 Authentification forte 136
5.6.2 Break-The-Glass 137
5.6.3 Paiement requis 139
5.7 Partager des examens à partir de la liste d'examens 140
5.7.1 Partage d'examens avec un utilisateur 141
5.7.2 Partage d'examens avec un groupe 147
5.7.3 Partage d'examens avec un service de radiologie 155
5.7.4 Partage d'examens avec un destinataire autodéfini 164
5.7.5 Imprimer un numéro de référence de la liste d'examens 174
5.7.6 Anonymiser des examens 178
5.7.6.1 Anonymisation par défaut 179
5.7.6.2 Utiliser des modèles d'anonymisation 180
5.8 Mise en ligne et partage d'examens 184
5.9 Statut du transfert 187
5.9.1 Aperçu des partagés 187
5.9.2 Aperçu de la progression 189
5.10 Téléchargement des examens à partir de la liste d'examens 192
5.10.1 Importation d'examens dans le système PACS 197
5.11 Page d'aperçu des anomalies 199
5.12 Page de présentation des paiements 204
5.13 Mémoire cache locale des images 206
5.14 Règles sources 207
5.15 Ajouter des étiquettes à des examens 208

6 DeepUnity PACSonWEB page d'examens 211

6.1 Histoire 211
6.2 sélecteur de série 215
6.2.1 Sélecteur de série étendu 227
6.3 Barre d'outils 232

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

6.3.1 Contrôle d'image 234
6.3.1.1 Transformations d'image 238
6.3.2 Annotations 240
6.3.3 Autres outils d’édition d’image 250
6.3.4 Partager 254
6.3.5 Administration 257
6.3.5.1 Information de l'examen 259
6.3.5.2 Compte-rendu 272
6.3.5.3 Images et séries 274
6.3.5.4 Accès à l’examen 280
6.3.5.5 Calendrier de l'examen 282
6.3.5.6 Anomalies 288
6.3.5.7 Journalisation de l’examen 292
6.3.5.8 Journalisation de patient 293
6.3.5.9 Journalisation des accès 293
6.3.5.10 Étiquettes 294
6.3.6 MPR et outils connexes 295
6.3.6.1 Vue disponibles 299
6.3.6.2 MIP - MINIP - MPVR 301
6.3.6.3 Interactions de l’utilisateur 303
6.3.7 Ouvrir l'examen dans une application externe 306
6.3.8 Rendu des volumes 307
6.4 Écran d’affichage d’images 310
6.4.1 Marqueurs CAD 320
6.5 Affichage du compte-rendu 321

7 Notifications dans DeepUnity PACSonWEB 326

8 Home Reading 327

8.1 Appariement avec l’application Home Reading 330
8.2 Créer un compte-rendu via Home Reading 335
8.3 Désappariement de l’application Home Reading 342

9 DeepUnity PACSonWEB liste de travail 345

9.1 Configuration de la liste de travail 345
9.1.1 Spécialité 352
9.1.2 Délai de l'ANS 354
9.2 Fonctions de la page de la liste de travail 357
9.3 Flux de travail de lecture 360
9.3.1 RSDK 369
9.3.1.1 Aide à la dictée RSDK 376
9.3.2 Reconnaissance vocale Dragon 417
9.3.3 Flux de travail du transcripteur 423
9.3.4 Interne - Flux de travail Superviseur 424
9.3.5 Flux de travail de l'addendum 428

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

9.4 L'établissement de rapports multi-procédure 431

10 Administrateur PACS 433

10.1 Appareils DICOM 434
10.2 Sites, départements et salles d’examen 444

11 L'application Multi Monitor 452

11.1 Configuration Multi Monitor 452

12 Version et aide à distance 459

12.1 Release notes 462
12.2 Known bugs 587
12.3 Version PDF du mode d’emploi 589

Informations juridiques et réglementaires 590

Ressources d’aide 592

Version 592

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Introduction

1

Merci d’utiliser DeepUnity PACSonWEB. Le but de ce mode d’emploi est de vous aider à vous familiariser avec le fonctionnement du système et avec ses instructions d’utilisation de la manière la plus efficace possible. Veuillez d’abord lire les conditions générales d’utilisation (Page 20) avant d’utiliser DeepUnity PACSonWEB.

1.1 Usage prévu

Usage prévu

Logiciel PACS basé sur le web comprenant des fonctions d'amélioration de l'image (nivellement de la fenêtre, préréglages, inversion, MIP et MPR), un localisateur spatial et des fonctions de mesure pour le domaine de la radiologie diagnostique.

Objectif médical

DeepUnity PACSonWEB aide au diagnostic et à la gestion clinique en assistant les radiologues (nucléaires) dans le processus de diagnostic par la visualisation et le traitement (y compris la manipulation d'images) des images DICOM, en fournissant des informations pertinentes et des outils pour la mesure, l'analyse et le calcul des caractéristiques de l'image (par exemple géométrique, annotation, niveau de fenêtre, analyse ROI, lien entre des images radiologiques) qui sont potentiellement liées aux résultats du diagnostic.

DeepUnity PACSonWEB est destiné à examiner toute anatomie du corps humain visible dans l'imagerie médicale à des fins de visualisation, de détection ou de mesure d'anomalies/maladies/conditions médicales.

DeepUnity PACSonWEB est également destiné à une utilisation pour le diagnostic des blessures. Il peut être utilisé pour toute blessure pouvant être diagnostiquée à l'aide de l'imagerie médicale.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Objectif non médicale

DeepUnity PACSonWEB permet aux professionnels de la santé de visualiser les images des patients, les documents médicaux et les comptes-rendus provenant de plusieurs départements et d'effectuer des manipulations et des mesures d'images.

Le dispositif est utilisé par les professionnels de la santé chaque fois qu'ils ont besoin d'accéder à des images médicales et à des informations démographiques sur les patients.

Le dispositif est utilisé par les patients pour accéder à leurs images médicales (principalement) et pour lire le compte-rendu associé (s'il est disponible).

Indications d'utilisation

En tant que support de distribution, DeepUnity PACSonWEB est utilisé pour mettre les images et les comptes-rendus médicaux, réalisés dans un hôpital ou un centre de radiologie, à la disposition du médecin demandeur et/ou du patient sur Internet.

En tant qu'outil diagnostique, DeepUnity PACSonWEB peut être utilisé par un radiologue (nucléaire) pour visualiser et traiter des images, et effectuer des mesures afin de pouvoir établir un diagnostic.

Contre-indications

- Il n'est pas indiqué de créer des comptes pour les prestataires de soins de santé qui ne sont pas autorisés (éligibles) à demander un examen radiologique. Prestataires de soins de santé non éligibles : kinésithérapeutes, ostéopathes, personnel infirmier, patients.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé à des fins médicales (c.-à-d. de diagnostic) par des utilisateurs qui ne sont pas des diagnosticiens d'imagerie qualifiés.
- Tous les outils utilisant des images basées sur le volume, tels que le MPR, le rendu 3D, les reformations et autres, ne sont pas destinés à un usage diagnostique primaire. Ces outils fournissent des informations supplémentaires, mais ne doivent pas être considérés comme des moyens primaires de diagnostic.
- Le dispositif peut être utilisé sur des appareils mobiles, tels que des tablettes, à des fins d'examen d'images. Toutefois, les appareils mobiles ne doivent pas être utilisés pour l'interprétation primaire des images.

Utilisateurs prévus

DeepUnity PACSonWEB est destiné à être utilisé par les types d'utilisateurs suivants :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Utilisateur prévu	Objectif non médicale Oui/Non	Objectif médical Oui/Non	Compétences/besoins de formation/ commentaires
Professionnels de la santé, p. ex., médecins ou infirmiers/infirmières	Oui	Non	Utilisé par le biais d'une intégration dans un portail destiné aux patients ou aux médecins référents/ demandeurs à des fins non diagnostiques. Aucune formation spécifique n'est nécessaire. Le manuel d'utilisation est intégré au produit.
Radiologue	Oui	Oui	Formation des utilisateurs
Technologue	Oui	Non	-
Administrateur IT	Oui	Non	Capacité à configurer la solution, formation des administrateurs
Patient	Oui	Non	Utilisé par le biais d'une intégration dans un portail destiné aux patients ou aux médecins référents/ demandeurs à des fins non diagnostiques. Aucune formation spécifique n'est nécessaire. Le manuel d'utilisation est intégré au produit.
Personnel DH Healthcare : production, R&D, service	Oui	Non	-
Personnel vétérinaire	Oui	Oui	Le personnel vétérinaire utilise également le logiciel pour

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Utilisateur prévu	Objectif non médicale Oui/Non	Objectif médical Oui/Non	Compétences/besoins de formation/ commentaires
			diagnostiquer les maladies et les blessures des animaux, même si cela ne relève pas de la médecine humaine.

Environnement d’usage prévu

DeepUnity PACSonWEB est utilisé dans un environnement clinique où des données d'images, des documents médicaux et des comptes-rendus doivent être visualisés. En outre, les patients et les médecins peuvent également y accéder en dehors de l'environnement clinique, ce qui permet une récupération pratique et efficace des informations.

DeepUnity PACSonWEB étant une solution cloud native, il n'y a pas de restriction quant à l'environnement d'utilisation à condition que la qualité du moniteur et la lumière ambiante soient adaptées à l'usage clinique prévu en cas d'utilisation à des fins médicales (c'est-à-dire de diagnostic).

Voici une liste indicative des environnements d'utilisation prévus :

Environnement d’usage prévu	Oui/Non	Commentaire
À l'intérieur de salles de radiographie, d'IRM, etc	Oui	-
À l’extérieur de salles de radiologie, d'IRM, etc	Oui	-
Locaux de radiologues privés	Oui	-
Clinique	Oui	-
Centre d'imagerie	Oui	-
Départements spécialisés	Oui	-

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Environnement d'usage prévu	Oui/Non	Commentaire
Environnement domestique	Oui	Utilisé par les patients en dehors de l'environnement médical.
Salle d'urgence	Oui	-
Unité de soins intensifs	Oui	-
Environnement militaire	Oui	-
Cabinet médical	Oui	-
Lieu de travail de la télémédecine	Oui	À utiliser avec un moniteur et des conditions d'éclairage ambiant adéquats pour l'usage clinique prévu lors de la réalisation d'un diagnostic.
Hôpital et installation vétérinaires	Oui	Aucune différence dans les données sources par rapport à l'utilisation humaine.

DeepUnity PACSonWEB peut également être utilisé dans les environnements vétérinaires. L'évaluation de l'utilisation de ce logiciel dans les hôpitaux et les établissements vétérinaires s'est fondée sur sa fonctionnalité prévue et sur la nature des environnements vétérinaires. Les fonctionnalités du logiciel sont alignées sur celles qui sont généralement utilisées dans les environnements médicaux humains et vétérinaires. Aucune différence significative de risque n'a été identifiée entre ces environnements, car le logiciel n'implique pas d'interaction directe avec le patient. L'évaluation réglementaire réalisée en fonction de l'utilisation prévue et des environnements vétérinaires a conclu qu'aucune réglementation spécifique ne s'applique aux logiciels utilisés dans les hôpitaux vétérinaires sur les marchés cibles. Par conséquent, le dispositif peut être utilisé en milieu vétérinaire sans présenter de risques supplémentaires.

Population de patients prévue et conditions médicales

DeepUnity PACSonWEB L'utilisation n'est pas limitée à une population de patients ou à une condition médicale spécifique.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1.2 Avertissements et précautions

Cette section contient des informations de sécurité importantes destinées à garantir une utilisation correcte et sûre du logiciel. Elle comprend des avertissements sur les dangers potentiels, des précautions d'utilisation et une description des risques résiduels connus qui pourraient affecter l'utilisateur, le patient ou l'intégrité des données.

Veuillez lire attentivement cette section avant d'utiliser le logiciel. Le non-respect des avertissements et des précautions peut entraîner un fonctionnement incorrect, des dommages au patient ou la perte de données.

1.2.1 Avis de sécurité

Catégorie	Description
MPR en supplément	**AVERTISSEMENT :** Tout diagnostic et toute décision médicale basés sur des images générées par MPR (MPR, MIP, MinIP, MPVR) doivent toujours faire l'objet d'une double vérification avec la série originale. **Référence interne de l'entreprise :** SN0001

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Catégorie	Description
Fonctions de mesure	**ATTENTION :** Les fonctions de mesure DeepUnity PACSonWEB incluent les mesures de longueurs, d'angles et de densité, sur la base des informations fournies par la modalité originale. Les mesures de longueur sont exprimées en millimètres (mm). Les mesures d'angle sont exprimées en degrés (°). Les mesures de densité sont exprimées dans l'unité prévue par la modalité : Hounsfield Unit (HU), Optical Density (OD) ou UnSpecified (US). Pour la précision des mesures au sein de l'environnement DeepUnity PACSonWEB, DeepUnity PACSonWEB se fie à la précision des informations fournies par cette modalité. Si une mesure affiche « N/A » en tant que résultat, cela signifie que les images DICOM originales ne contiennent pas les informations nécessaires pour réaliser une mesure quantitative. **Référence interne de l'entreprise :** SN0002
Limites à des fins de diagnostic	**AVERTISSEMENT :** Il**N'EST PAS**permis d'utiliserDeepUnity PACSonWEBpour le diagnostic si vous êtes connecté avec un numéro de référence. **Référence interne de l'entreprise :** SN0003

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Catégorie	Description
Résultats de l’IA	**ATTENTION :** Les résultats de l’IA doivent être utilisés comme un outil de soutien, et les diagnostics et décisions médicales doivent toujours être revérifiés à l’aide des images originales. **Référence interne de l'entreprise :** SN0004
Précision et résolution du rendu des volumes	**AVERTISSEMENT :** La précision des images de rendu de volume calculées dépend de la qualité, de l'espacement des pixels et de l'espacement des coupes (position relative de l'image pour chaque image de la série) des images originales. En fonction de la vue (zoom, épaisseur de la coupe choisie, mode de rendu, orientation, etc.), les espaces entre les pixels originaux peuvent être calculés en pixels nouvellement affichés, et/ou les pixels individuels peuvent être un recalcul de plusieurs pixels originaux. L'utilisateur doit toujours en être conscient et vérifier les données et les résultats des images de rendu de volume par rapport à la série originale avant de prendre des décisions ou de poser des diagnostics médicaux. **Référence interne de l'entreprise :** SN0005

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1.2.2 Divulgation du risque résiduel

Catégorie	Description
Calculs MIP, MinIP et MPVR	**ATTENTION :** À l'utilisation de calculs MIP, MinIP et MPVR, un seul pixel est affiché pour toute l'épaisseur de la tranche. L'utilisateur doit savoir que seules les données sélectives sont affichées sur la base de ces calculs et qu'il lui incombe de procéder à une double vérification des données avec la série originale. **Référence interne de l'entreprise :** DRR001
Précision et résolution MPR	**ATTENTION :** La précision d'images générées par MPR dépend de la qualité de la série originale (espacement des pixels, épaisseur de coupe, etc.). Les images sont calculées sur la base des données disponibles dans la série originale. Les écarts de données pixels seront calculés pour afficher une image lisse. Il sera encore de la responsabilité de l'utilisateur de garder à l'esprit l'épaisseur de la tranche et l'espacement des pixels de la série originale. Si l'épaisseur de la tranche est supérieure à l'espacement des pixels, le chevauchement entre les tranches n'est pas pris en compte. L'espacement des pixels utilisé est calculé sur la base de l'emplacement des images originales. L'utilisateur doit être conscient de la visualisation de données perdues pendant l'auscultation et la pose de diagnostic du patient. L'utilisateur doit également être conscient que la série qui a perdu des données pixels lors de la compression ou qui présente une épaisseur de tranche inappropriée ne convient pas à une génération MPR appropriée. **Référence interne de l'entreprise :** DRR002

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Catégorie	Description
Enregistrement du volume	**AVERTISSEMENT :** L'enregistrement du volume ne sera pas parfaitement correct dans tous les scénarios. L'utilisateur reste responsable de vérifier le résultat de l'outil et d'apporter d'éventuelles corrections. **Référence interne de l'entreprise :** DRR003
Texte reconnu	**ATTENTION :** Le texte reconnu n'est pas toujours 100 % correct. Il est de la responsabilité du radiologue de vérifier l'exactitude du compte rendu avant de le valider. **Référence interne de l'entreprise :** DRR004
Les informations de l'examen	**AVERTISSEMENT :** Modifier les informations de l'examen sur DeepUnity PACSonWEB n'est souvent qu'une solution temporaire. Ces informations doivent être adaptées dans les systèmes PACS et RIS. Sinon, l'information initiale risque d'être synchronisée et donc réinitialisée. **Référence interne de l'entreprise :** DRR005
Résultats de l'IA	**ATTENTION :** Les résultats de l'IA ne sont pas toujours corrects à 100 %. Lorsque des diagnostics ou des décisions médicales sont fondés sur des résultats d'IA, il incombe au radiologue de vérifier le résultat par rapport à la série originale. **Référence interne de l'entreprise :** DRR006

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

1.2.3 Signalement d'incidents graves

Dans le cas où un dysfonctionnement du produit a causé ou failli causer un dommage grave à un patient, DH Healthcare doit être immédiatement informé via le portail client à l'adresse https://my.dedalusportal.com/ et l'incident doit également être signalé à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

1.3 Plaintes et commentaires sur les produits

Tout professionnel de santé (par exemple, un client ou un utilisateur) qui a une plainte à formuler ou qui n'est pas satisfait de la qualité, de la durabilité, de la sécurité fonctionnelle, de la sécurité opérationnelle, de l'efficacité ou des performances de ce produit doit le signaler à DH Healthcare, par téléphone, par télécopie ou par écrit à l'adresse suivante :

Konrad-Zuse-Platz 1-3

53227 Bonn

Allemagne

Tel.:+49 228 266 800 0

Fax: +49 228 266 800 1

D'autres coordonnées de DH Healthcare sont disponibles sur le site web suivant :

https://www.dedalus.com

Sauf accord contraire avec le détaillant, la communication doit être effectuée via le portail client de DH Healthcare GmbH.

https://my.dedalusportal.com

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1.4 Configuration requise

Important !

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de ce qui suit :

- **Qualité du moniteur :** La qualité du moniteur, la lumière ambiante et la compression d'image utilisée correspondent à l'utilisation clinique prévue
- **Compatibilité des navigateurs :** DeepUnity PACSonWEB doit être utilisé sur un navigateur pris en charge. Les utilisateurs doivent également vérifier la compatibilité du navigateur en cas de mise à jour du navigateur ou du système d'exploitation du dispositif utilisé pour exécuter DeepUnity PACSonWEB.
- **Connexion Internet :** Une connexion Internet suffisamment performante
  - Consulter : 3G ou plus, 0,5 Mb/s ou plus.
  - Télécharger : 4G ou plus, 15 Mb/s ou plus.
- **Connexion au réseau :** Une connexion réseau suffisamment performante de LAN 100 Mo ou plus ou Wi-Fi 802.11 g ou plus.

Navigateurs pris en charge

Navigateurs pris en charge et validés pour une utilisation diagnostique :

- Google Chrome : version 119 et supérieure
- Microsoft Edge : version 119 et supérieure

Navigateurs pris en charge pour une utilisation non diagnostique :

- Google Chrome : version 119 et supérieure
- Microsoft Edge : version 119 et supérieure
- Safari : version 17.4 et supérieure
- Firefox : version 121 et supérieure

Restriction :

L'utilisation de navigateurs ou de versions de navigateurs ne figurant pas dans la liste ci-dessus n'est pas recommandée, car elle peut entraîner la désactivation de certaines fonctions ou une baisse des performances.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Général

2

Pour savoir comment changer la langue de l'interface DeepUnity PACSonWEB, voir :

- La langue de l'interface (Page 35)

Si vous souhaitez utiliser DeepUnity PACSonWEB, vous devez accepter les conditions d'utilisation applicables :

- Conditions générales - Utilisateur enregistré (Page 27)
- Conditions générales - Patient (Page 20)

2.1 Conditions générales - Patient

Les présentes conditions d'utilisation (ci-après les « Conditions ») réglementent la relation contractuelle entre (1) DH Healthcare GmbH, dont le siège social est situé à Konrad-Zuse-Platz 1-3, Allemagne, numéro d'entreprise 0745.461.727 (ci-après « DH Healthcare GmbH ») et (2) la personne qui utilise DeepUnity PACSonWEB via un numéro de référence (ci-après l'« Utilisateur »).

En utilisant DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur déclare avoir pris connaissance du contenu des Conditions et accepter explicitement l'application de celles-ci. Si l'Utilisateur n'accepte pas ces Conditions, il est prié de ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB.

Le cas échéant, DH Healthcare GmbH peut apporter des modifications aux Conditions à sa seule discrétion. Dès lors que DH Healthcare GmbH apporte des modifications importantes aux Conditions, elle enverra préalablement à l'Utilisateur une notification claire et appropriée aux circonstances. La poursuite de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB par l'Utilisateur après qu'il/elle aura reçu la notification, vaut acceptation explicite des modifications. C'est pourquoi l'Utilisateur est tenu de lire très attentivement de telles notifications. Si l'Utilisateur n'accepte pas les modifications, il est prié de ne pas continuer à utiliser DeepUnity PACSonWEB.

1. Responsabilités et garantie limitée

1.1. DH Healthcare GmbH s'efforcera de prendre des mesures raisonnables pour que l'Utilisateur puisse utiliser DeepUnity PACSonWEB sur une base régulière pour consulter des images médicales et/ou des comptes rendus à titre de référence. Les

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

comptes rendus ne sont consultables que si et dans la mesure où le service de radiologie émetteur décide que l'Utilisateur y a accès.

1.2. L'Utilisateur est conscient que DeepUnity PACSonWEB est un système permettant de fournir des données médicales à des parties externes et d'échanger ces données dans un environnement sûr, et que DH Healthcare GmbH est seule responsable de la bonne exécution technique de celui-ci conformément aux normes les plus élevées. Cela signifie, entre autres, que DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des données médicales qui sont traitées par l'établissement ou l'organisation de soins de santé et/ou les utilisateurs sur DeepUnity PACSonWEB.

1.3. DH Healthcare GmbH ne garantit pas que DeepUnity PACSonWEB (en ce compris l'accès au portail, son utilisation et/ou les services proposés) est entièrement exempt de bogues, erreurs ou défaillances techniques, ou que l'utilisation est assurée à tout moment. Ainsi, la disponibilité et les services de DeepUnity PACSonWEB peuvent à tout moment être interrompus entièrement ou partiellement, entre autres pour des travaux de maintenance. DH Healthcare GmbH se réserve le droit périodiquement et à n'importe quel moment, avec ou sans notification, de modifier ou d'arrêter de façon temporaire ou permanente des fonctions et/ou des caractéristiques de DeepUnity PACSonWEB, et ce sans être responsable à l'égard de l'Utilisateur d'une quelconque interruption, modification ou d'un quelconque arrêt de DeepUnity PACSonWEB ou d'une des fonctions ou caractéristiques de DeepUnity PACSonWEB, quelle qu'elle soit.

1.4. Par ailleurs, certaines difficultés techniques peuvent entraîner de temps en temps des interruptions temporaires. DH Healthcare GmbH n'est en aucun cas responsable si les services réguliers sont entravés par des erreurs ou des défaillances techniques au niveau du réseau de DH Healthcare GmbH, qui échappent à son contrôle ou qui sont une conséquence de l'évolution de systèmes, techniques, etc.

1.5. L'Utilisateur est seul responsable du choix, des coûts et de l'entretien de l'infrastructure informatique sur laquelle DeepUnity PACSonWEB est utilisé et reconnaît entre autres par la présente que la quantité de détails et d'informations pouvant être extraite des images disponibles dépend de la qualité de l'écran et de l'appareil de reproduction.

2. Sécurité, identification et accès aux données

2.1. DH Healthcare GmbH fournira les efforts nécessaires pour fournir des méthodes de sécurité et d'identification adaptées pour l'accès à et l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB dans un environnement sûr.

2.2. L'Utilisateur bénéficie de l'accès à DeepUnity PACSonWEB par le biais d'un numéro de référence et sa date de naissance fourni par DH Healthcare GmbH ou l'établissement ou l'organisation de soins responsable. Toute personne qui octroie à l'utilisateur l'accès à DeepUnity PACSonWEB transmet le risque lié à la modification des données à l'Utilisateur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

2.3. Les données de connexion (notamment le numéro de référence en combinaison avec la date de naissance) sont strictement personnelles et ne peuvent être transmises et l'Utilisateur est tenu à la plus stricte confidentialité à cet égard. L'utilisateur est tenu d'être prudent avec les données à partir du moment où il les aura reçues. L'Utilisateur est seul responsable de leur utilisation, y compris toute utilisation par des tiers. En cas d'infraction ou d'infraction présumée au présent paragraphe, DH Healthcare GmbH est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires, à bloquer ou supprimer des données, à bloquer l'accès de l'Utilisateur et/ou à suspendre ou résilier la licence, sans que l'Utilisateur ait un quelconque droit à indemnisation.

2.4. Si l'Utilisateur a connaissance de la perte ou de l'utilisation non autorisée de son numéro de référence par des tiers ou s'il soupçonne une telle perte ou utilisation non autorisée, il doit immédiatement le signaler à DH Healthcare GmbH par l'intermédiaire du service d'assistance. DH Healthcare GmbH prendra dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires et raisonnables et bloquera si besoin le compte de l'Utilisateur.

2.5. L'établissement ou l'organisation de soins et/ou l'Utilisateur responsable se portent garants de l'octroi de droits d'accès aux données médicales aux bons Utilisateurs, selon les méthodes prévues à cet effet par DeepUnity PACSonWEB.

3. Utilisation de DeepUnity PACSonWEB

3.1. DeepUnity PACSonWEB est une solution basée sur le Web pour la distribution et l'affichage d'images médicales et, le cas échéant, de comptes rendus via Internet pour les médecins demandeurs, patients et entre les hôpitaux.

En tant que moyen de distribution, DeepUnity PACSonWEB est utilisé pour mettre à la disposition des médecins demandeurs via Internet des images médicales et des comptes-rendus des hôpitaux et cabinets de radiologie connectés.

Les images sont également mises à la disposition du patient à titre de référence. Le service de radiologie émetteur décide si le patient a accès au compte-rendu ou non

Dans le cadre de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur s'engage à :

- être connecté via un numéro de référence combiné à la date de naissance;
- ne pas essayer d'accéder à des éléments réservés ou protégés de DeepUnity PACSonWEB, auxquels il n'a pas expressément l'accès. ne pas utiliser PACSonWEB à des fins illégales ou pour un comportement répréhensible d'une manière ou d'une autre, ni de manière illégale, frauduleuse ou nuisible pour DeepUnity PACSonWEB, DH Healthcare GmbHou des tiers ;
- ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB pour traiter du contenu (i) qui est illégal, illégitime, menaçant ou préjudiciable, ou répréhensible d'une manière ou d'une autre, (ii) qu'il n'est pas habilité à traiter conformément à toute règlementation applicable ou en raison de relations contractuelles, ou (iii) qui représente une

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

violation des droits d'un tiers, y compris mais de manière non limitative, le droit à la protection de la vie privée ;

- ne pas utiliser ou reproduire des ressources, logiciels ou processus susceptibles de porter atteinte ou de surcharger de manière disproportionnée l'accès, la sécurité ou le bon fonctionnement de DeepUnity PACSonWEB ;
- ne pas copier, redistribuer, louer, vendre, céder, allouer, rétro-concevoir ou décompiler de quelque manière que ce soit DeepUnity PACSonWEB ou un élément de DeepUnity PACSonWEB ou ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB ou son contenu d'une autre manière, quelle qu'elle soit, qui n'a pas été expressément autorisée par les Conditions ou la législation en vigueur ou qui constitue d'une autre manière une infraction aux droits de propriété intellectuelle concernant DeepUnity PACSonWEB ou un élément de celui-ci ;
- ne pas essayer d'accéder à des éléments réservés ou protégés de DeepUnity PACSonWEB, auxquels il n'a pas expressément l'accès.

3.2. En cas de violation ou de soupçon de violation du paragraphe 3.1, DH Healthcare GmbH est habilitée à adopter toutes les mesures nécessaires, à bloquer ou éliminer les données, à bloquer l'accès à l'Utilisateur et/ou à suspendre ou arrêter la licence, sans que l'Utilisateur ne puisse prétendre à aucun droit à une indemnisation.

3.3. Des données démographiques et d'autres données peuvent être inexactes ou incomplètes lorsque l'établissement ou la structure de soins responsable ne les a pas saisies correctement, ce qui implique un affichage erroné et/ou une inadéquation. DH Healthcare GmbH n'a aucun contrôle sur la saisie de ces données et n'en est en aucun cas responsable.

3.4. Le manuel d'utilisation de DeepUnity PACSonWEB est proposé au format numérique et peut être consulté via https://secure.pacsonweb.com/.

4. Responsabilités

4.1. Dans la mesure autorisée par la législation en vigueur, la responsabilité maximale de DH Healthcare GmbH quant à d'éventuels dommages directs résultant de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB par l'Utilisateur est limitée à 1000,00 € par sinistre, indépendamment du fait que la responsabilité de DH Healthcare GmbH résulte de dispositions contractuelles, d'un acte illicite (en ce compris négligence ou non-respect d'une obligation légale) ou d'une quelconque autre cause. Sauf fraude ou faute intentionnelle, DH Healthcare GmbH ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects, imprévisibles ou immatériels, en ce compris notamment manque à gagner, dégradation de l'image de marque, perte de données, perte d'informations, perte de chiffre d'affaires, perte de clients, dommage subi par des tiers et/ou interruption des activités de l'Utilisateur.

4.2. L'Utilisateur accepte, si l'un de ses actes commis intentionnellement ou par négligence et en violation des présentes Conditions nuit au fonctionnement de DeepUnity PACSonWEB ou endommage DeepUnity PACSonWEB, d'indemniser intégralement DH Healthcare GmbH de tous les frais engagés pour réparer les

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

systèmes concernés, ainsi que de tous les dommages subis tant directement qu'indirectement (en ce compris mais sans que cela soit limitatif manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clients et de goodwill) par DH Healthcare GmbH en raison de tels actes ; l'Utilisateur est tout au moins tenu de garantir DH Healthcare GmbH contre toutes les pertes, tous les frais et tous les dommages et intérêts éventuels, de quelque nature que ce soit, qui résultent de tels actes.

4.3. DH Healthcare GmbH n'est pas responsable de l'inexécution ou d'un retard au niveau de l'exécution de ses engagements à l'égard de l'Utilisateur, si la situation est due directement ou indirectement à des circonstances indépendantes de la volonté de DH Healthcare GmbH et qui échappent raisonnablement au contrôle de DH Healthcare GmbH (« Force majeure »), en ce compris mais sans que cela soit limitatif grèves, coupures d'électricité ou panne de courant ou temps d'arrêt qui est causé par le fournisseur d'énergie ou le réseau d'énergie ou l'infrastructure externe, attaques de hackers, virus, émeutes, soulèvements, attaques terroristes, guerre, incendie, inondations, tempête, explosion, séisme, catastrophe naturelle, mesures du gouvernement, conditions de travail ou toute autre cause échappant raisonnablement au contrôle de DH Healthcare GmbH.

5. Droits de propriété intellectuelle

5.1. L'Utilisateur reconnaît et accepte que DeepUnity PACSonWEB, y compris le logiciel, est protégé par les droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit de marque, etc.) dont DH Healthcare GmbH et ses fournisseurs tiers sont respectivement les détenteurs. L'Utilisateur reconnaît ces droits de propriété de DH Healthcare GmbH et/ou des donneurs de licence de DH Healthcare GmbH et admet qu'il n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur la marque commerciale, le logiciel et/ou DeepUnity PACSonWEB.

5.2. L'Utilisateur n'acquiert qu'un droit personnel, révocable, non transférable et non exclusif d'utiliser DeepUnity PACSonWEB conformément aux finalités énoncées dans les Conditions et sur www.pacsonweb.com.

5.3. Aucune disposition des présentes Conditions n'interdit d'une quelconque manière à DH Healthcare GmbH et/ou au donneurs de licence de DH Healthcare GmbH d'utiliser partout dans le monde, de perfectionner, de commercialiser, de concéder en sous-licence ou de mettre d'une autre manière à disposition DeepUnity PACSonWEB ou tout élément de celui-ci, en ce compris son contenu. De même, les présentes Conditions ne seront pas interprétées comme une reconnaissance à l'Utilisateur de certains droits sur DeepUnity PACSonWEB ou une quelconque autre plateforme existante ou future de DH Healthcare GmbH ou de ses donneurs de licence, qu'elle soit comparable ou non à DeepUnity PACSonWEB.

6. Durée et résiliation

Le présent contrat entre DH Healthcare GmbH et l'Utilisateur est conclu pour une durée pendant laquelle l'Utilisateur est autorisé à utiliser DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DH Healthcare GmbH peut suspendre l'accès de l'Utilisateur à DeepUnity PACSonWEB à n'importe quel moment, en ce compris en cas d'utilisation non autorisée effective ou présumée de DeepUnity PACSonWEB et/ou de son contenu ou de non-respect des Conditions par l'Utilisateur. Si l'Utilisateur ou DH Healthcare GmbH résilie le contrat ou si DH Healthcare GmbH suspend l'accès de l'Utilisateur à DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur consent à ce que DH Healthcare GmbH n'ait aucune responsabilité civile ou pénale à l'égard de l'Utilisateur, et que DH Healthcare GmbH ne sera pas tenu de payer une quelconque indemnité.

7. Loi applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions sont régies par le droit belge. En cas de litige relatif aux Conditions, seuls les tribunaux de la division Antwerp en Belgique seront compétents. Si l'Utilisateur est un consommateur, la compétence reviendra au tribunal du domicile de l'Utilisateur.

8. Dispositions finales

8.1. DH Healthcare GmbH mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel des Utilisateurs contre des traitements non autorisés ou illicites et contre une perte ou un dommage (fortuit).

DH Healthcare GmbH respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel, notamment :

Pays	Règlement sur la protection des données
EEE	Le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD »).
Argentine	Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (LPD) y Decreto reglamentario n° 1558/2001
Brésil	Lei General de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) n° 13.709/2018
Chili	Ley N° 19.628, sobre la protección de la vida privada ("LPVP")
Colombie	Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pays	Règlement sur la protection des données
Costa Rica	Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968 y Reglamento a la Ley de Protección de Datos N° 37554-JP
El Salvador	Decreto N° 144 de 2024 – Ley para la Protección de Datos Personales
Mexique	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de 5 de julio de 2010
Nicaragua	Ley N° 787 de Protección de Datos Personales
Panama	Ley N° 81 Sobre Protección de Datos 26 de marzo de 2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021
Pérou	Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales (“LPDP”) y Decreto Supremo 003-2013-JUS
Suisse	Federal Act on Data Protection 2020 (FADP)

8.2. La nullité ou la non-validité d’une quelconque disposition des présentes Conditions ou d’une partie de celle-ci n’entraînera pas la nullité ou la non-validité des Conditions dans leur intégralité. En cas de nullité ou de non-validité d’une quelconque disposition des présentes Conditions, la disposition concernée sera remplacée de plein droit par une disposition valable ou une partie valable, qui se rapprochera le plus possible de l’intention initiale de DH Healthcare GmbH. L’impossibilité de procéder à un tel remplacement souhaité n’affectera en rien la validité des autres dispositions des présentes Conditions. Si une disposition des présentes Conditions est invalidée ou déclarée inopposable, les autres dispositions des présentes Conditions demeurent pleinement en vigueur et exécutoires.

« En utilisant DeepUnity PACSonWEB, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions d’utilisation de DeepUnity PACSonWEB, qui énoncent les obligations de l’utilisateur et limitent la responsabilité du fournisseur de DeepUnity PACSonWEB, et je déclare accepter ces Conditions. »

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2.2 Conditions générales - Utilisateur enregistré

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des dysfonctionnements et des dommages résultant de l'installation, de la configuration, du déplacement, du remodelage, de l'entretien et de la réparation effectués par des parties autres que DH Healthcare GmbH ou le personnel autorisé de DH Healthcare GmbH.

DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des dysfonctionnements et des dommages aux produits de DH Healthcare GmbH qui sont attribuables à des produits d'autres fabricants qui n'ont pas été fournis par DH Healthcare GmbH.

DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des dysfonctionnements et des dommages dus au non-respect des mesures de précaution et des méthodes opérationnelles spécifiées dans ce manuel d'utilisation.

DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des dysfonctionnements et des dommages résultant de l'utilisation du produit dans des conditions ambiantes qui ne correspondent pas aux conditions d'utilisation spécifiées dans ce manuel d'utilisation, telles que l'alimentation électrique, l'environnement d'installation, etc.

Les présentes conditions d'utilisation (ci-après les « Conditions ») réglementent la relation contractuelle entre (1) DH Healthcare GmbH, dont le siège social est situé à Konrad-Zuse-Platz 1-3, Allemagne, numéro d'entreprise 0745.461.727 (ci-après « DH Healthcare GmbH ») et (2) la personne qui utilise DeepUnity PACSonWEB via un compte régistré (ci-après l'« Utilisateur »).

En utilisant DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur déclare avoir pris connaissance du contenu des Conditions et accepter explicitement l'application de celles-ci. Si l'Utilisateur n'accepte pas ces Conditions, il est prié de ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB.

Le cas échéant, DH Healthcare GmbH peut apporter des modifications aux Conditions à sa seule discrétion. Dès lors que DH Healthcare GmbH apporte des modifications importantes aux Conditions, elle enverra préalablement à l'Utilisateur une notification claire et appropriée aux circonstances. La poursuite de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB par l'Utilisateur après qu'il/elle aura reçu la notification, vaut acceptation explicite des modifications. C'est pourquoi l'Utilisateur est tenu de lire très attentivement de telles notifications. Si l'Utilisateur n'accepte pas les modifications, il est prié de ne pas continuer à utiliser DeepUnity PACSonWEB.

1. Responsabilités et garantie limitée

1.1. DH Healthcare GmbH s'efforcera de prendre des mesures raisonnables pour que l'Utilisateur puisse utiliser sur une base régulière les services et fonctionnalités de DeepUnity PACSonWEB figurant sur www.pacsonweb.com.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1.2. DeepUnity PACSonWEB est une aide à la présentation des images et des comptes-rendus pour les patients et les médecins, à l'échange d'examens, etc. L'Utilisateur est et reste responsable des résultats dérivés ou obtenus avec cette ressource. Dans toute la mesure autorisée par la loi, la garantie d'aptitude à un emploi ou un but spécifique est expressément exclue par les présentes.

1.3. L'Utilisateur est conscient que DeepUnity PACSonWEB est un système permettant de fournir des données médicales à des parties externes et d'échanger ces données dans un environnement sûr, et que DH Healthcare GmbH est seule responsable de la bonne exécution technique de celui-ci conformément aux normes les plus élevées. Cela signifie, entre autres, que DH Healthcare GmbH n'est pas responsable des données médicales qui sont traitées par l'établissement ou l'organisation de soins de santé et/ou les utilisateurs sur DeepUnity PACSonWEB.

1.4. DH Healthcare GmbH ne garantit pas que DeepUnity PACSonWEB (en ce compris l'accès au portail, son utilisation et/ou les services proposés) est entièrement exempt de bogues, erreurs ou défaillances techniques, ou que l'utilisation est assurée à tout moment. Ainsi, la disponibilité et les services de DeepUnity PACSonWEB peuvent à tout moment être interrompus entièrement ou partiellement, entre autres pour des travaux de maintenance. DH Healthcare GmbH se réserve le droit périodiquement et à n'importe quel moment, avec ou sans notification, de modifier ou d'arrêter de façon temporaire ou permanente des fonctions et/ou des caractéristiques de DeepUnity PACSonWEB, et ce sans être responsable à l'égard de l'Utilisateur d'une quelconque interruption, modification ou d'un quelconque arrêt de DeepUnity PACSonWEB ou d'une des fonctions ou caractéristiques de DeepUnity PACSonWEB, quelle qu'elle soit.

1.5. Par ailleurs, certaines difficultés techniques peuvent entraîner de temps en temps des interruptions temporaires. DH Healthcare GmbH n'est en aucun cas responsable si les services réguliers sont entravés par des erreurs ou des défaillances techniques au niveau du réseau de DH Healthcare GmbH, qui échappent à son contrôle ou qui sont une conséquence de l'évolution de systèmes, techniques, etc.

1.6. L'Utilisateur est seul responsable du choix, des coûts et de l'entretien de l'infrastructure informatique sur laquelle DeepUnity PACSonWEB est utilisé et reconnaît entre autres par la présente que la quantité de détails et d'informations pouvant être extraite des images disponibles dépend de la qualité de l'écran et de l'appareil de reproduction.

2. Sécurité, identification et accès aux données

2.1. DH Healthcare GmbH fournira les efforts nécessaires pour fournir des méthodes de sécurité et d'identification adaptées pour l'accès à et l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB dans un environnement sûr.

2.2. L'Utilisateur bénéficie de l'accès à DeepUnity PACSonWEB par le biais d'un compte ou numéro de référence fourni par DH Healthcare GmbH ou l'établissement ou l'organisation de soins responsable. Toute personne qui octroie à l'utilisateur

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

l'accès à DeepUnity PACSonWEB transmet le risque lié à la modification des données à l'Utilisateur.

2.3. Les données du compte sont strictement personnelles et ne peuvent être transmises et l'Utilisateur est tenu à la plus stricte confidentialité à cet égard. L'utilisateur est tenu d'être prudent avec les données à partir du moment où il les aura reçues. L'Utilisateur est seul responsable de leur utilisation, y compris toute utilisation par des tiers. En cas d'infraction ou d'infraction présumée au présent paragraphe, DH Healthcare GmbH est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires, à bloquer ou supprimer des données, à bloquer l'accès de l'Utilisateur et/ou à suspendre ou résilier la licence, sans que l'Utilisateur ait un quelconque droit à indemnisation.

2.4. Si l'Utilisateur a connaissance de la perte ou de l'utilisation non autorisée de son compte par des tiers ou s'il soupçonne une telle perte ou utilisation non autorisée, il doit immédiatement le signaler à DH Healthcare GmbH par l'intermédiaire du service d'assistance. DH Healthcare GmbH prendra dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires et raisonnables et bloquera si besoin le compte de l'Utilisateur.

2.5. L'établissement ou l'organisation de soins et/ou l'Utilisateur responsable se portent garants de l'octroi de droits d'accès aux données médicales aux bons Utilisateurs, selon les méthodes prévues à cet effet par DeepUnity PACSonWEB.

3. Utilisation de DeepUnity PACSonWEB

3.1. DeepUnity PACSonWEB est une solution web pour la distribution et l'affichage d'images et de comptes-rendus médicaux via Internet pour le médecin prescripteur et le patient, et entre les hôpitaux.

Le visionneur intégré contient des outils d'optimisation pour l'affichage d'images (réglage du niveau de fenêtre, inversion, localisation spatiale, lignes de référence, etc.) et la fonctionnalité de mesure (mesure de longueur, mesure d'angle, mesure de hauteur verticale, etc.), ce qui fait de DeepUnity PACSonWEB un outil de diagnostic ou un instrument de travail pour la pose de diagnostics.

En tant que support de distribution, DeepUnity PACSonWEB est utilisé pour mettre les images et les comptes-rendus médicaux, réalisés dans un hôpital ou chez un radiologue privé, à la disposition du médecin prescripteur sur Internet. En guise de référence, les images sont également mises à disposition du patient. Le service de radiologie émetteur décide si le patient a accès ou non au compte-rendu. Au moyen du code de référence d'un examen, en possession du patient, l'examen et le compte-rendu sont facilement accessibles à tout médecin possédant un propre compte DeepUnity PACSonWEB. Les images sont mises à disposition en ligne pour une période d'1 à 5 ans, tel que stipulé contractuellement avec le service de radiologie émetteur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

En tant que moyen diagnostique, DeepUnity PACSonWEB peut être utilisé par un radiologue pour visualiser et traiter des images, et effectuer des mesures afin de pouvoir établir un diagnostic.

Le compte-rendu peut être enregistré directement dans DeepUnity PACSonWEB. Dans le cadre de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur s'engage à :

- être connecté avec un compte DeepUnity PACSonWEB si DeepUnity PACSonWEB est utilisé à des fins diagnostiques ;
- ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB comme une archive. L'Utilisateur ou l'établissement ou organisation responsable doit lui-même archiver les données dans un autre système ;
- ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB à des fins illégales ou pour un comportement répréhensible d'une manière ou d'une autre, ni de manière illégale, frauduleuse ou nuisible pour DeepUnity PACSonWEB, DH Healthcare GmbH ou des tiers ;
- ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB pour traiter du contenu (i) qui est illégal, illégitime, menaçant ou préjudiciable, ou répréhensible d'une manière ou d'une autre, (ii) qu'il n'est pas habilité à traiter conformément à toute règlementation applicable ou en raison de relations contractuelles, ou (iii) qui représente une violation des droits d'un tiers, y compris mais de manière non limitative, le droit à la protection de la vie privée ;
- ne pas utiliser ou reproduire des ressources, logiciels ou processus susceptibles de porter atteinte ou de surcharger de manière disproportionnée l'accès, la sécurité ou le bon fonctionnement de DeepUnity PACSonWEB ;
- ne pas copier, redistribuer, louer, vendre, céder, allouer, rétro-concevoir ou décompiler de quelque manière que ce soit DeepUnity PACSonWEB ou un élément de DeepUnity PACSonWEB ou ne pas utiliser DeepUnity PACSonWEB ou son contenu d'une autre manière, quelle qu'elle soit, qui n'a pas été expressément autorisée par les Conditions ou la législation en vigueur ou qui constitue d'une autre manière une infraction aux droits de propriété intellectuelle concernant DeepUnity PACSonWEB ou un élément de celui-ci ;
- ne pas essayer d'accéder à des éléments réservés ou protégés de DeepUnity PACSonWEB, auxquels il n'a pas expressément l'accès.

3.2. En cas de violation ou de soupçon de violation du paragraphe 3.1, DH Healthcare GmbH est habilitée à adopter toutes les mesures nécessaires, à bloquer ou éliminer les données, à bloquer l'accès à l'Utilisateur et/ou à suspendre ou arrêter la licence, sans que l'Utilisateur ne puisse prétendre à aucun droit à une indemnisation.

3.3. Il convient d'être particulièrement prudent lorsque des décisions concernant les patients sont prises sur la base de données démographiques et d'autres informations du patient disponibles dans DeepUnity PACSonWEB. Des données démographiques et d'autres données peuvent être inexactes ou incomplètes lorsque l'établissement ou la structure de soins responsable ne les a pas saisies

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

correctement, ce qui implique un affichage erroné et/ou une inadéquation. DH Healthcare GmbH n'a aucun contrôle sur la saisie de ces données et n'en est en aucun cas responsable.

3.4. Le manuel d'utilisation de DeepUnity PACSonWEB est proposé au format numérique et peut être consulté via https://secure.pacsonweb.com/Manuals.A. Un utilisateur enregistré a la possibilité de demander le manuel sur papier via le guichet de service de DH Healthcare GmbH. La société s'efforcera de répondre à cette demande dans un délai de 7 jours.

3.5. L'utilisation de DeepUnity PACSonWEB est soumise à la loi sur les soins de santé et des patients ainsi qu'à ses règles en matière de confidentialité. Toutes les images de patients sont considérées comme des données de santé et doivent être utilisées uniquement à des fins de diagnostic et/ou de traitement dans le cadre de la loi sur la santé. Une mauvaise utilisation des images peut être liée à une responsabilité civile et pénale. Si vous choisissez de télécharger des images de DeepUnity PACSonWEB localement, veillez à ce que votre traitement de l'image soit conforme à la législation sur la santé en vigueur ainsi qu'à la « norme en matière de sécurité de l'information, de la santé et des services de soins » de la Direction de la santé ou d'autres réglementations locales compétentes. Vous êtes responsable de l'image, de son traitement et de son utilisation ultérieurs conformément à la législation sur la santé et la protection de la vie privée en vigueur. Sachez que les images sont protégées par des droits d'auteur et appartiennent à l'institution où de telles images sont prises (par ex. l'hôpital, le radiologue privé ou leurs concédants).

4. Responsabilités

4.1. Dans la mesure autorisée par la législation en vigueur, la responsabilité maximale de DH Healthcare GmbH quant à d'éventuels dommages directs résultant de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB par l'Utilisateur est limitée à 1000,00 € par sinistre, indépendamment du fait que la responsabilité de DH Healthcare GmbH résulte de dispositions contractuelles, d'un acte illicite (en ce compris négligence ou non-respect d'une obligation légale) ou d'une quelconque autre cause. Sauf fraude ou faute intentionnelle, DH Healthcare GmbH ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects, imprévisibles ou immatériels, en ce compris notamment manque à gagner, dégradation de l'image de marque, perte de données, perte d'informations, perte de chiffre d'affaires, perte de clients, dommage subi par des tiers et/ou interruption des activités de l'Utilisateur.

4.2. L'Utilisateur accepte, si l'un de ses actes commis intentionnellement ou par négligence et en violation des présentes Conditions nuit au fonctionnement de DeepUnity PACSonWEB ou endommage DeepUnity PACSonWEB, d'indemniser intégralement DH Healthcare GmbH de tous les frais engagés pour réparer les systèmes concernés, ainsi que de tous les dommages subis tant directement qu'indirectement (en ce compris mais sans que cela soit limitatif manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clients et de goodwill) par DH Healthcare GmbH en raison de tels actes ; l'Utilisateur est tout au moins tenu de garantir DH

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Healthcare GmbH contre toutes les pertes, tous les frais et tous les dommages et intérêts éventuels, de quelque nature que ce soit, qui résultent de tels actes.

4.3. DH Healthcare GmbH n'est pas responsable de l'inexécution ou d'un retard au niveau de l'exécution de ses engagements à l'égard de l'Utilisateur, si la situation est due directement ou indirectement à des circonstances indépendantes de la volonté de DH Healthcare GmbH et qui échappent raisonnablement au contrôle de DH Healthcare GmbH (« Force majeure »), en ce compris mais sans que cela soit limitatif grèves, coupures d'électricité ou panne de courant ou temps d'arrêt qui est causé par le fournisseur d'énergie ou le réseau d'énergie ou l'infrastructure externe, attaques de hackers, virus, émeutes, soulèvements, attaques terroristes, guerre, incendie, inondations, tempête, explosion, séisme, catastrophe naturelle, mesures du gouvernement, conditions de travail ou toute autre cause échappant raisonnablement au contrôle de DH Healthcare GmbH.

5. Droits de propriété intellectuelle

5.1. L'Utilisateur reconnaît et accepte que DeepUnity PACSonWEB, y compris le logiciel, est protégé par les droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit de marque, etc.) dont DH Healthcare GmbH et ses fournisseurs tiers sont respectivement les détenteurs. L'Utilisateur reconnaît ces droits de propriété de DH Healthcare GmbH et/ou des donneurs de licence de DH Healthcare GmbH et admet qu'il n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur la marque commerciale, le logiciel et/ou DeepUnity PACSonWEB.

5.2. L'Utilisateur n'acquiert qu'un droit personnel, révocable, non transférable et non exclusif d'utiliser DeepUnity PACSonWEB conformément aux finalités énoncées dans les Conditions et sur www.pacsonweb.com.

5.3. Aucune disposition des présentes Conditions n'interdit d'une quelconque manière à DH Healthcare GmbH et/ou au donneurs de licence de DH Healthcare GmbH d'utiliser partout dans le monde, de perfectionner, de commercialiser, de concéder en sous-licence ou de mettre d'une autre manière à disposition DeepUnity PACSonWEB ou tout élément de celui-ci, en ce compris son contenu. De même, les présentes Conditions ne seront pas interprétées comme une reconnaissance à l'Utilisateur de certains droits sur DeepUnity PACSonWEB ou une quelconque autre plateforme existante ou future de DH Healthcare GmbH ou de ses donneurs de licence, qu'elle soit comparable ou non à DeepUnity PACSonWEB.

6. Durée et résiliation

Le présent contrat entre DH Healthcare GmbH et l'Utilisateur est conclu pour une durée pendant laquelle l'Utilisateur est autorisé à utiliser DeepUnity PACSonWEB. DH Healthcare GmbH peut suspendre l'accès de l'Utilisateur à DeepUnity PACSonWEB à n'importe quel moment, en ce compris en cas d'utilisation non autorisée effective ou présumée de DeepUnity PACSonWEB et/ou de son contenu ou de non-respect des Conditions par l'Utilisateur. Si l'Utilisateur ou DH Healthcare

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

GmbH résilie le contrat ou si DH Healthcare GmbH suspend l'accès de l'Utilisateur à DeepUnity PACSonWEB, l'Utilisateur consent à ce que DH Healthcare GmbH n'ait aucune responsabilité civile ou pénale à l'égard de l'Utilisateur, et que DH Healthcare GmbH ne sera pas tenu de payer une quelconque indemnité.

7. Loi applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions sont régies par le droit belge. En cas de litige relatif aux Conditions, seuls les tribunaux de la division Antwerp en Belgique seront compétents. Si l'Utilisateur est un consommateur, la compétence reviendra au tribunal du domicile de l'Utilisateur.

8. Dispositions finales

8.1. DH Healthcare GmbH mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel des Utilisateurs contre des traitements non autorisés ou illicites et contre une perte ou un dommage (fortuit).

DH Healthcare GmbH respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel, notamment :

Pays	Règlement sur la protection des données
EEE	Le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD »).
Argentine	Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (LPD) y Decreto reglamentario n° 1558/2001
Brésil	Lei General de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) n° 13.709/2018
Chili	Ley N° 19.628, sobre la protección de la vida privada ("LPVP")
Colombie	Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos
Costa Rica	Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales N° 8968 y Reglamento a la Ley de Protección de Datos N° 37554-JP

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Pays	Règlement sur la protection des données
El Salvador	Decreto N° 144 de 2024 – Ley para la Protección de Datos Personales
Mexique	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de 5 de julio de 2010
Nicaragua	Ley N° 787 de Protección de Datos Personales
Panama	Ley N° 81 Sobre Protección de Datos 26 de marzo de 2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021
Pérou	Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales ("LPDP") y Decreto Supremo 003-2013-JUS
Suisse	Federal Act on Data Protection 2020 (FADP)

8.2. La nullité ou la non-validité d'une quelconque disposition des présentes Conditions ou d'une partie de celle-ci n'entraînera pas la nullité ou la non-validité des Conditions dans leur intégralité. En cas de nullité ou de non-validité d'une quelconque disposition des présentes Conditions, la disposition concernée sera remplacée de plein droit par une disposition valable ou une partie valable, qui se rapprochera le plus possible de l'intention initiale de DH Healthcare GmbH. L'impossibilité de procéder à un tel remplacement souhaité n'affectera en rien la validité des autres dispositions des présentes Conditions. Si une disposition des présentes Conditions est invalidée ou déclarée inopposable, les autres dispositions des présentes Conditions demeurent pleinement en vigueur et exécutoires.

« En utilisant DeepUnity PACSonWEB, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions d'utilisation de DeepUnity PACSonWEB, qui énoncent les obligations de l'utilisateur et limitent la responsabilité du fournisseur de DeepUnity PACSonWEB, et je déclare accepter ces Conditions. »

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2.3 La langue de l'interface

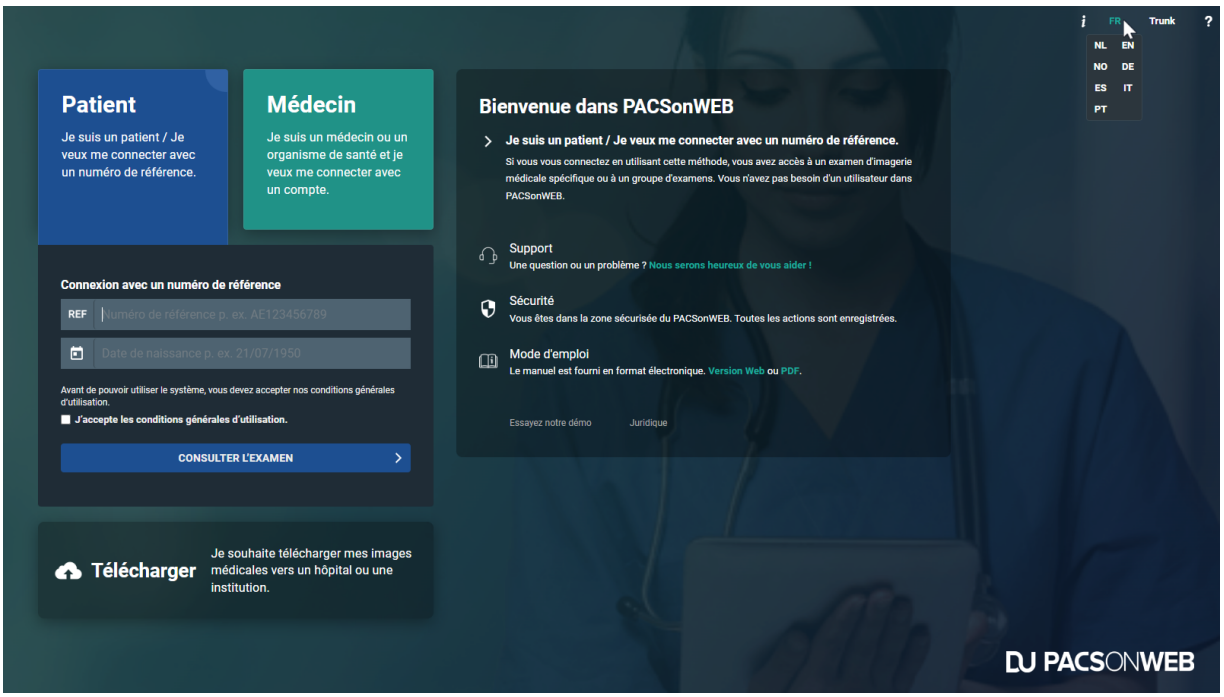

Langue par défaut : Lors de la première utilisation, l'interface DU POW s'affiche dans la langue par défaut de votre navigateur.

Sélection de langue : Vous pouvez changer de langue à tout moment en utilisant la sélection de langue, situé en haut à droite de la barre d'outils du menu.

La sélection de la langue permet de choisir parmi les langues prises en charge :

- Anglais
- Néerlandais
- Français
- Allemand
- Italien
- Norvégien
- Portugais
- Espagnol

Mémorisation des préférences : La langue sélectionnée est stockée dans un cookie de sorte que votre préférence est retenue pour la prochaine fois que vous vous connecterez à DeepUnity PACSonWEB à partir du même appareil.

Effacer les cookies : Si vos cookies sont effacés, la langue par défaut du navigateur est de nouveau appliquée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2.4 Dates et heures dans DeepUnity PACSonWEB

À propos des dates et heures dans DeepUnity PACSonWEB

DeepUnity PACSonWEB est une application dans laquelle les dates et les heures sont fréquemment utilisées (dates d'examen, dates d'enregistrement, etc.). Avec une base mondiale d'utilisateurs et de clients, tous potentiellement situés dans des fuseaux horaires différents, nous devons gérer ces dates et heures avec précaution.

En tant qu'utilisateur, vous verrez toutes les dates et heures dans votre propre fuseau horaire. Vous devrez également indiquer toutes les dates et heures dans votre propre fuseau horaire. Voici quelques exemples de ces instances :

- Affichage des dates et heures d'examen dans la visionneuse,
- liste d'examens,
- en utilisant des filtres dans l'examen ou la liste de travail,
- la saisie de dates et d'heures dans l'administration de l'examen.

L'avantage est qu'en tant qu'utilisateur, vous ne devez pas prendre en compte les différences de fuseaux horaires des examens ou calculer vous-même les différences de temps potentielles.

- Toutes les dates et heures reçues par DeepUnity PACSonWEB de la part des clients seront interprétées dans le fuseau horaire de ce client.
- Toutes les données relatives à la date et à l'heure que nous exportons vers un utilisateur ou un système seront interprétées en fonction du fuseau horaire du client.

Cela signifie que si vous avez une liste d'examens contenant des examens provenant de différents fuseaux horaires, les examens datant d'il y a une minute dans n'importe quel fuseau horaire apparaîtront toutes comme les plus récentes.

Deux examens créés exactement à la même heure, dans deux fuseaux horaires différents, apparaîtront dans DeepUnity PACSonWEB comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

L'examen a été créé	Date et heure dans DeepUnity PACSonWEB
Examen créé à Sao Paulo le 15 janvier à 22 h 00 heure locale de Sao Paulo (UTC -3 heures)	15 janvier 22 h 00 à Sao Paulo

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

L'examen a été créé	Date et heure dans DeepUnity PACSonWEB
Examen créé à Bruxelles le 16 janvier à 02 h 00 heure locale de Bruxelles (UTC + 1 heure),	16 janvier 02 h 00 à Bruxelles

Ce principe s'applique à toute date ou heure utilisée dans DeepUnity PACSonWEB, à quelques exceptions près :

- La **date de naissance** ne sera jamais convertie à partir de n'importe quel fuseau horaire.
- Les **balises DICOM brutes affichées dans la boîte de dialogue des balises DICOM** seront affichées en tant qu'informations brutes et ne seront pas converties (par exemple, date de l'examen = « 20240115 » et heure de l'examen = « 2200 »), mais le décalage UTC sera ajouté dans les balises DICOM.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

S’enregistrer pour un compte

3

Important !

Les utilisateurs belges peuvent créer un compte en s'enregistrant via e-ID ou en demandant un compte via l'instruction ci-dessous.

Les utilisateurs dans d'autres pays doivent contacter l'imagerie médicale dont ils veulent consulter les examens.

Important !

DH Healthcare GmbH ne peut octroyer des comptes qu'à des prestataires de soins habilités à demander un examen radiologique.

Concrètement :

Éligibles : médecins généralistes, spécialistes et dentistes

Non éligibles: kinésithérapeutes, ostéopathes, personnel soignant, patients (la connexion n’est possible qu’en cliquant sur « Je suis un patient ou un prestataire de soins de santé qui souhaite se connecter avec le numéro de référence »).

Conseil :

Si vous travaillez dans un cabinet de groupe, DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité d’accorder automatiquement à tous les membres du groupe l’accès à tous les examens qui ont été demandés par l’un des membres.

Cela n’est toutefois possible que si tous les membres de la pratique de groupe disposent d’un compte DeepUnity PACSonWEB personnel.

La demande de liaison de différents comptes dans un cabinet de groupe peut être soumise au Service Desk.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

3.1 S’inscrire via e-ID (uniquement BE)

Pour créer votre compte via l’e-ID, veuillez visiter la page https://secure.pacsonweb.com et suivre les étapes suivantes.


Pour créer votre compte

1. Cliquez sur **Je suis un médecin ou un organisme de santé et je veux me connecter avec un compte.** Cliquez ensuite sur **Connexion avec Itsme ou eID**.




©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2. Sur l'écran suivant, cliquez sur **Identification avec un lecteur de cartes eID**.

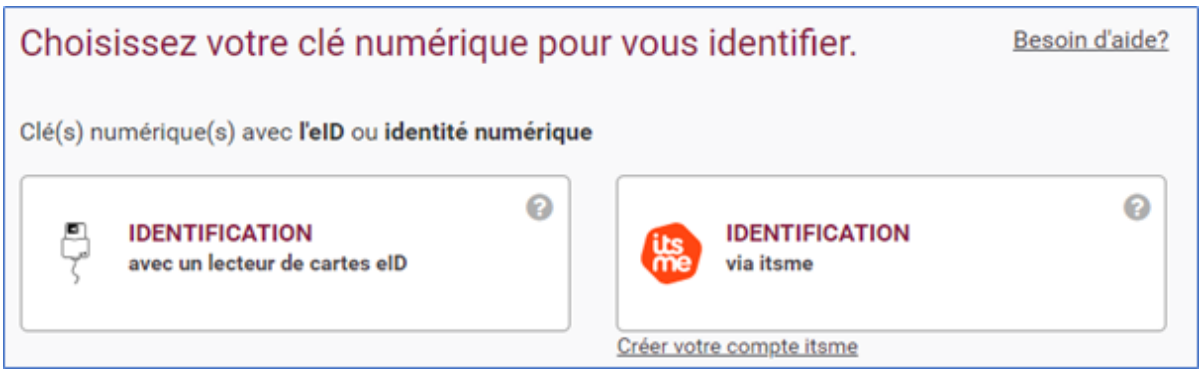

3. Suivez les étapes à l'écran et cliquez sur **S'identifier**.

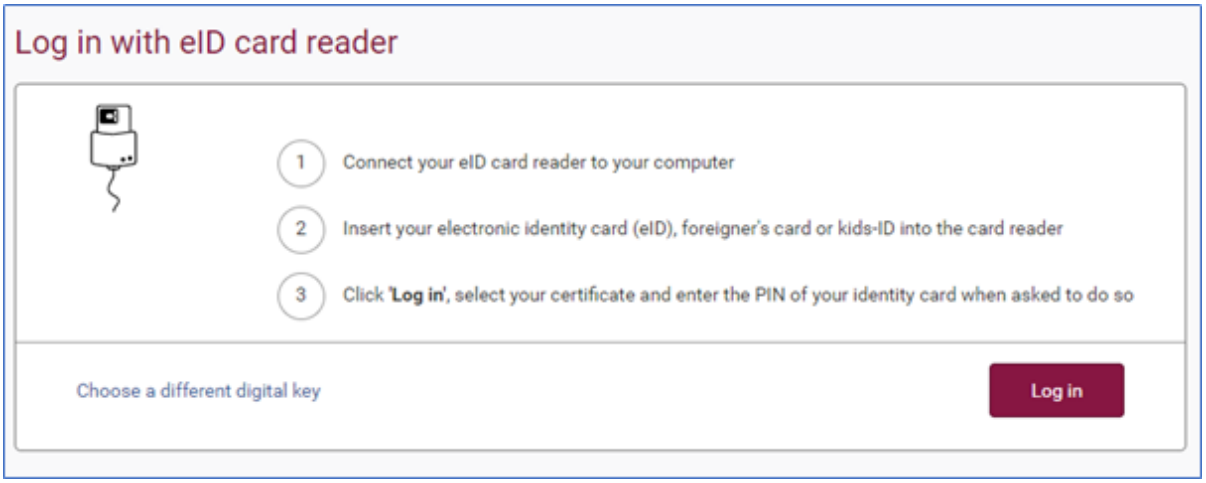


4. Sélectionnez le certificat avec lequel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur **OK**.


   Assurez-vous que votre carte d'identité électronique est bien insérée dans votre lecteur e-ID.

   Selon le navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) que vous utilisez, la capture d'écran ci-dessous peut être légèrement différente.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

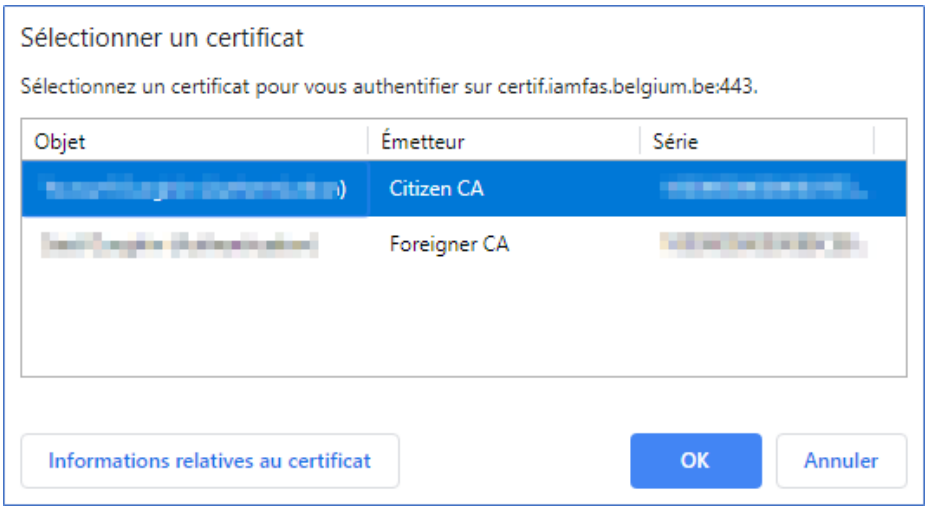


5. Entrez le code PIN de votre carte d'identité et cliquez sur **OK**

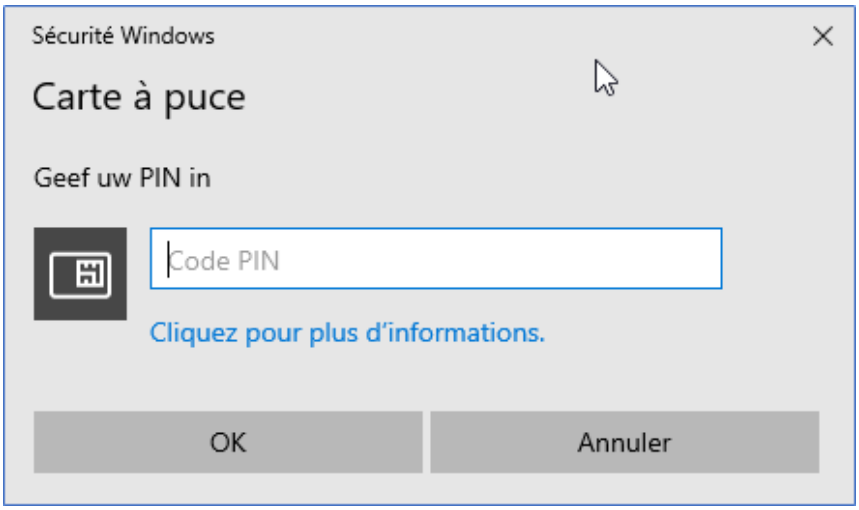

6. Contrôlez votre nom, choisissez de vous connecter comme « Citoyen » et cliquez sur **Confirmer le profil**.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

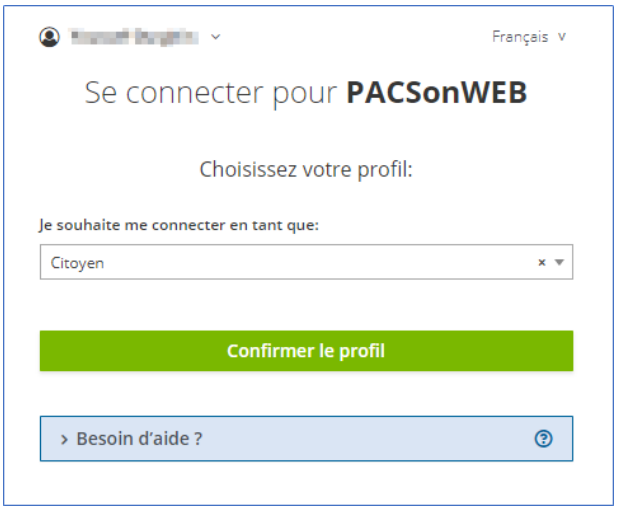

7. Après identification et vérification, un écran apparaît où vous devez remplir les données pour votre utilisateur.
   a. Après avoir rempli les données, cliquez sur**Créer et se connecter**.

      Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

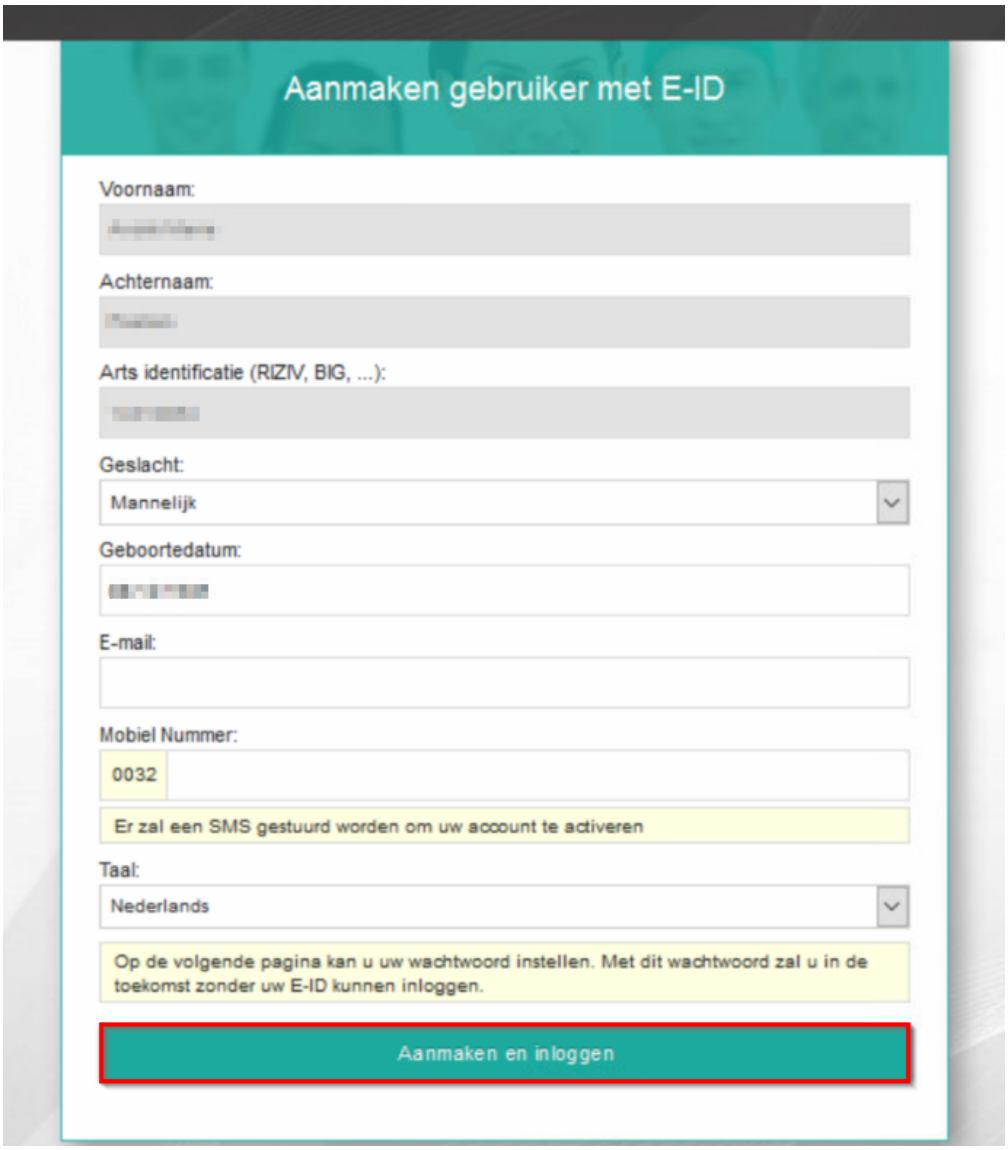


La création du compte peut prendre plusieurs minutes.

Pour activer votre compte

Après avoir créé votre compte, l'écran suivant apparaît.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

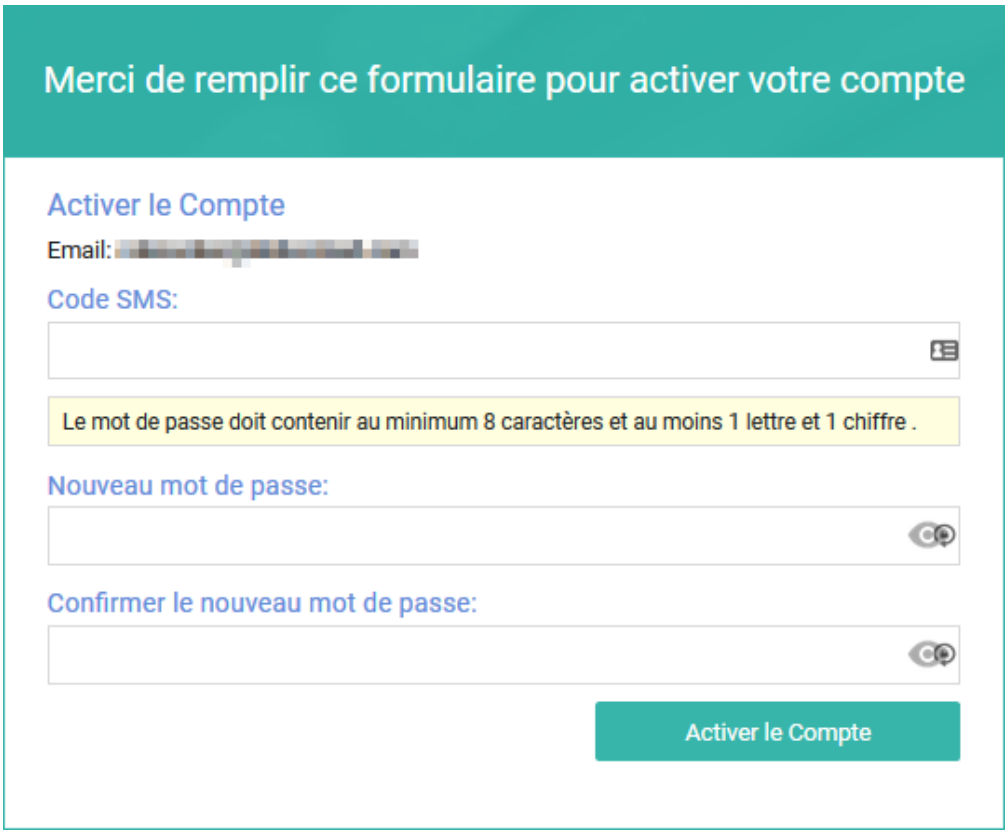

Vous recevrez un message texte sur le numéro de portable enregistré à l'étape précédente.

1. Saisissez le code figurant dans le SMS et choisissez et confirmez un mot de passe de votre choix.

   Si un code SMS incorrect est saisi, le mot de passe ne sera pas modifié. Si un code SMS incorrect est saisi cinq fois, le compte sera bloqué.
2. Cliquez sur **Activate** et la création du compte est terminée.

Important !

Le mot de passe choisi doit avoir une longueur minimale de 8 caractères et comporter au moins 1 caractère numérique et 1 caractère alphabétique.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

Connexion à l'aide du nom d'utilisateur et mot de passe

Une fois enregistré avec l'eID, vous pouvez également vous connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- Votre nom d'utilisateur est l'adresse e-mail qui a été utilisée lors de la création du compte (étape 7)
- Votre mot de passe est le mot de passe que vous avez choisi lors de l'activation du compte.

Une fois activé, le compte est prêt à être utilisé. Vous serez redirigé(e) vers l'écran de connexion où vous pourrez vous connecter en utilisant l'e-ID ou votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Pour plus d'informations, voir Connexion à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe (Page 53) & Connexion à l'aide d'un e-ID (uniquement BE) (Page 60)

3.2 Demander un compte via le Service Desk

Si vous choisissez de ne pas vous enregistrer pour un compte DeepUnity PACSonWEB via eID (voir S'inscrire via e-ID (uniquement BE) (Page 39)), vous pouvez déposer une demande de compte auprès de notre Service Desk.

Pour demander un compte

1. Cliquez sur **Je suis un médecin ou un organisme de santé et je veux me connecter avec un compte**
2. Cliquez sur **Pas encore de compte ?**


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



3. Remplissez les champs énumérés dans la boîte de dialogue et cliquez sur **ENVOYER**.

   Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

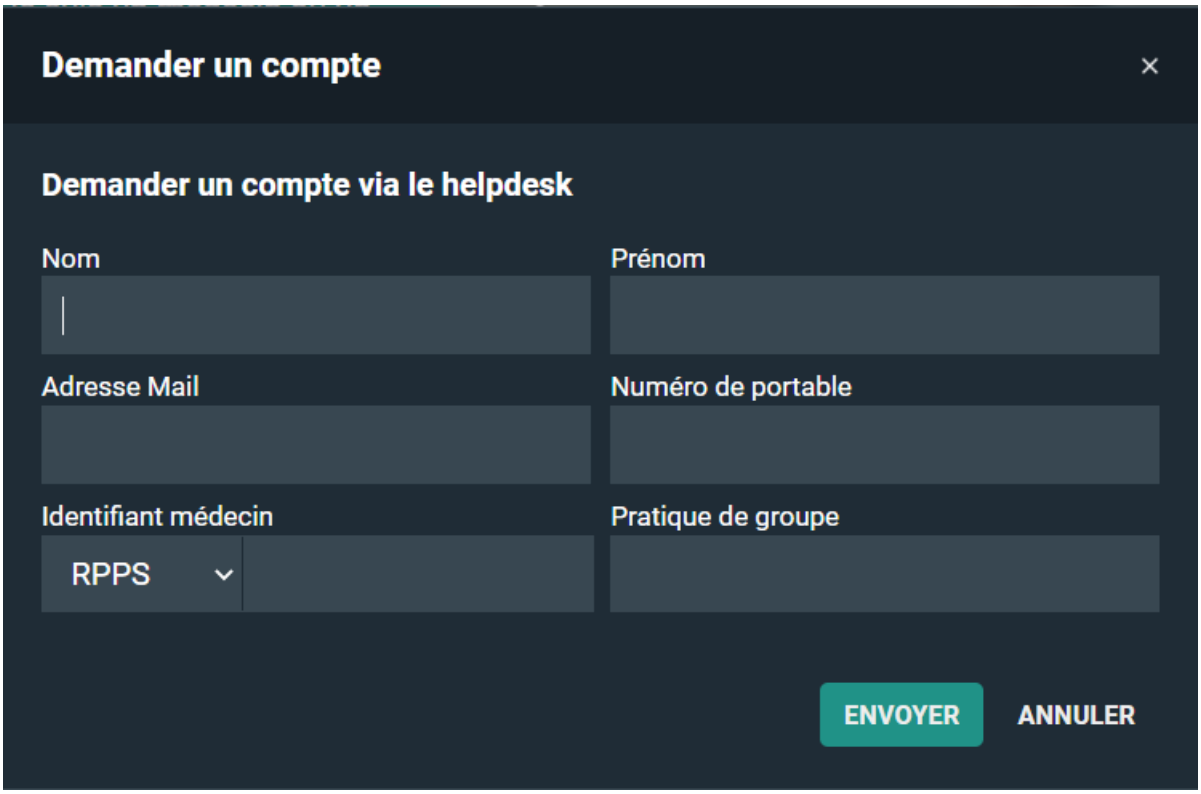

Cela enverra une demande de compte auprès de notre Service Desk. Vous serez contacté dès que possible par un employé de DH Healthcare GmbH pour la vérification de votre demande de compte.

Remarque :

Comme DeepUnity PACSonWEB donne accès à des informations sensibles, le compte ne peut être accordé jusqu'à ce que la demande n'ait été vérifiée.

Un compte peut également être demandé en envoyant un e-mail au Service Desk avec les informations suivantes :

- Nom et prénom
- Adresse e-mail
- Nombre médecin (RIZIV / INSEE / HIN / UCGN / PNB)
- Numéro de portable
- Le cabinet de groupe auquel vous appartenez (facultatif)

Ces demandes seront traitées de la même manière que celles soumises via le formulaire Web détaillé dans les étapes ci-dessus.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Se connecter

4

Se connecter

Il existe plusieurs manières de se connecter à DeepUnity PACSonWEB. Vous pouvez vous connecter :

- à l'aide d'un numéro de référence (Page 51)
- avec un nom d'utilisateur et un mot de passe (Page 53)
- avec e-ID (Page 60) (Belgique uniquement)
- en tant que délégué (Page 63)
- par le biais d'un répertoire actif (Page 64)
- en utilisant le DME (Page 66)

Patients

Les patients peuvent se connecter à l'aide d'un code, de leur date de naissance et en option d'un OTP (mot de passe de la session) ou un SMS Token après paiement si nécessaire.

Les patients peuvent alors accéder aux images de la demande et au compte rendu, si l'instance médicale (hôpital ou radiologue) leur en donne l'autorisation.

Utilisateurs enregistrés

Les médecins, dentistes et spécialistes peuvent ouvrir un compte (Page 38) auprès de DH Healthcare GmbH, après quoi ils peuvent se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ou par le biais de l'e-ID (Belgique uniquement).

Se connecter avec son propre compte

- Après la connexion avec un compte propre, vous arrivez sur la liste d'examens/la liste de travail regroupant tous les examens que vous êtes habilité(e) à consulter.
- Cliquez sur un examen dans la liste pour accéder à toutes les images et au compte rendu, si l'instance médicale (hôpital ou radiologue) l'autorise.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

Pratiques de groupe

DeepUnity PACSonWEB prend en charge les pratiques de groupe afin que vous puissiez voir les examens de vos collègues.

Si vous faites partie d'un cabinet collectif, vous devez confirmer une fois par trimestre que vous faites encore partie du/des cabinet(s) collectif(s) listé(s).

- Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous montre tous les groupes dont vous êtes membre ou administrateur.
- Pour chaque groupe, la composition actuelle est affichée, sachant que la personne de contact primaire est affichée en haut et que tous les administrateurs sont affichés en gras.
- Si la composition du groupe affichée ne correspond plus à la situation réelle, vous devez le signaler à l'administrateur du groupe ou au DeepUnity PACSonWEB support desk pour correction.
- Pour modifier la composition d'un groupe, consultez l'explication détaillée dans Mes groupes (Page 125).

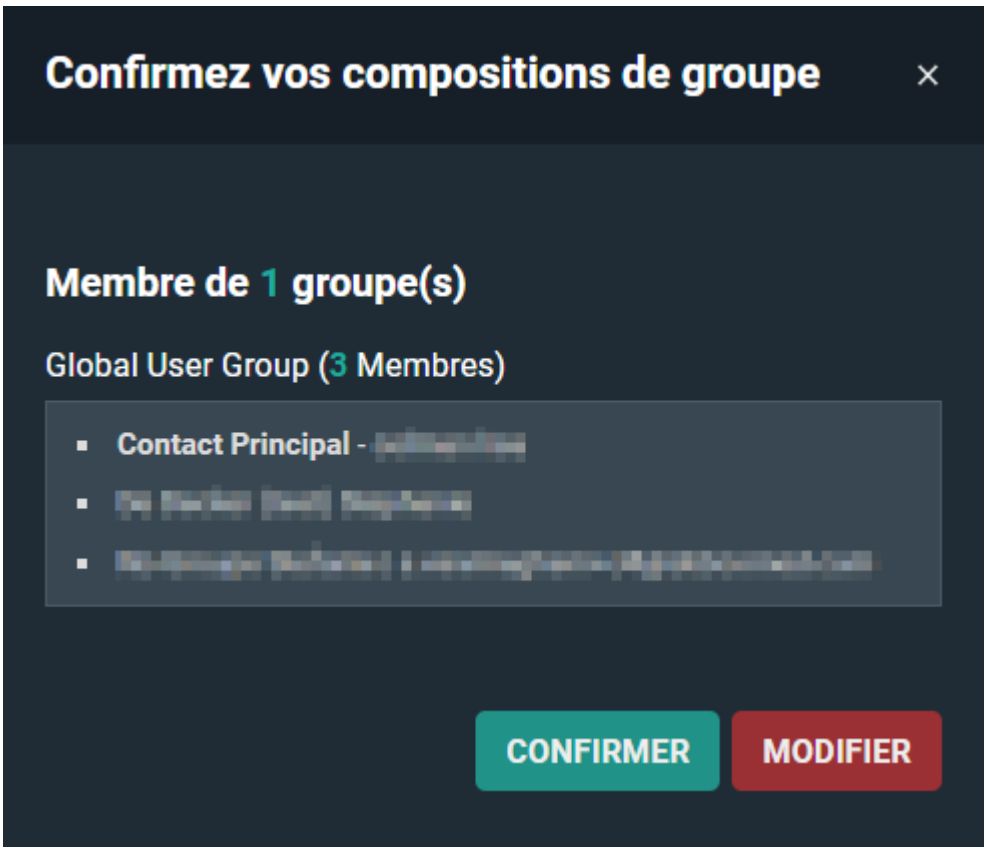

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Votre environnement DU POW

Comme DeepUnity PACSonWEB est utilisé dans plusieurs pays, vous pouvez vous retrouver sur le portail de l'environnement d'un autre pays.

Votre nom d'utilisateur ou votre code de sécurité ne seront pas reconnus dans cet environnement.

- Si vous ouvrez un portail (par exemple http://secure.pacsonweb.com), mais vous vous trouvez dans un autre pays, une boîte de dialogue vous demandera de choisir votre environnement.
  - Vous pouvez choisir d'être redirigé(e) vers le portail de votre pays ou de rester sur le portail actuel.

    Remarque :


    Les examens ne sont disponibles que sur l'environnement spécifique au pays

  - Vous pouvez mémoriser votre choix en cochant la case **Se souvenir de l'environnement que j'ai choisi**.
- Vous pouvez revenir à l'environnement d'origine via le menu disponible dans le coin supérieur gauche. Les options suivantes vous sont proposées :
  - Retourner une fois
  - Retourner et effacer mes préférences

Cookies

DeepUnity PACSonWEB utilise des cookies pour tenir les sessions à jour.

La loi nous oblige à afficher chaque mois l'avertissement ci-dessous.

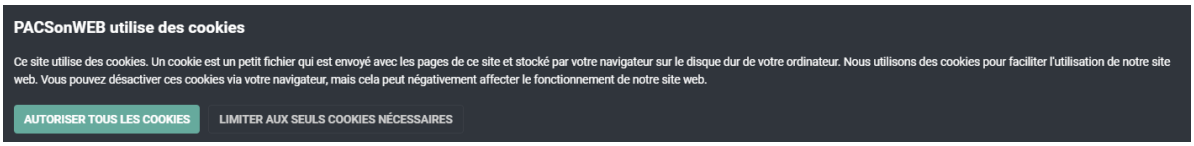

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Navigateur Web

Important !

Internet Explorer 10 plus pris en charge.

À partir d'aujourd'hui, Internet Explorer 10 et les versions antérieures ne sont plus pris en charge.

Via DeepUnity PACSonWEB, vous serez dirigé vers les sites Web appropriés pour installer un navigateur plus récent.

4.1 Connexion avec un numéro de référence

AVERTISSEMENT :

Il **N'EST PAS** permis d'utiliser DeepUnity PACSonWEB pour le diagnostic si vous êtes connecté avec un numéro de référence.

Se connecter en tant que patient

Pour visualiser vos images en tant que patient,

1. accédez au site Web de l'imagerie médicale, tel qu'indiqué dans le courrier/l'e-mail contenant votre code de référence.
2. Cliquez sur la case **Patient**.
3. Saisissez votre code de référence et votre date de naissance dans les champs correspondants.
   a. Vous trouverez votre code de référence dans la lettre/l'e-mail de radiologie.
4. Cliquez sur le bouton **Aller à l'examen**.
   a. Si votre code de référence donne accès à une demande comportant plusieurs examens, le premier examen sera ouvert et les autres examens sont accessibles par le biais du sélecteur de série (Page 215) et de la barre d'historique (Page 211).

Important !

Vous n'avez accès au compte-rendu que si cela est autorisé par l'imagerie médicale.

Si le numéro de référence associé à la date de naissance est enregistré dans DeepUnity PACSonWEB, mais qu'aucun compte-rendu ou cliché n'a encore été

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

reçu, le message « Vos résultats ne sont pas encore disponibles, veuillez réessayer ultérieurement » s'affiche.

Tentatives de connexion infructueuses

Si vous entrez des données de connexion incorrectes, un message d'erreur s'affichera pour vous avertir que votre tentative de connexion a échoué.

Important !

Si vous saisissez plusieurs fois une combinaison erronée, votre compte sera bloqué et vous ne pourrez plus faire de tentatives de connexion.

Authentification

Selon la méthode de vérification choisie par l'imagerie médicale, votre examen s'affiche ou vous êtes redirigé vers l'une des deux pages suivantes :

1. **Mot de passe à usage unique requis**

   Si la page **Sécurité supplémentaire : saisir le mot de passe temporaire à usage unique** s'affiche, vous devez saisir l'OTP (mot de passe à usage unique) que vous avez reçu par e-mail ou SMS.

   Après avoir saisi l'OTP et cliqué sur **Continuer**, vous pouvez accéder à vos images et au compte-rendu.

2. **Paiement requis**

   Si le service de radiologie exige le paiement de l'examen avant de permettre l'accès, vous devrez d'abord valider votre numéro de téléphone portable.

   La fenêtre contextuelle affiche la date de l'examen, l'hôpital où il a été réalisé et le numéro de téléphone portable (partiellement masqué) enregistré à l'hôpital pour le patient concerné.

   - Si le numéro de téléphone portable n'est pas correct, cliquez sur **Non**.
     - Une fenêtre contextuelle apparaît, indiquant les coordonnées du service de radiologie que vous pouvez contacter pour faire corriger votre numéro de téléphone portable.
   - Si le numéro de téléphone portable est correct, cliquez sur **Oui**.
     - Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de choisir le mode de paiement que vous préférez.

Une fois le paiement traité, vous recevrez un SMS Token dont vous avez besoin pour accéder à l'examen.

Une fois qu'un examen a été payé, vous pouvez à tout moment l'ouvrir à nouveau à l'aide du numéro de référence, de la date de naissance et du code PIN.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :


Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, n'hésitez pas à contacter notre Service Desk.

4.2 Connexion à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe

La page de connexion propose deux options pour se connecter :

- En tant que patient (voir Connexion avec un numéro de référence (Page 51))
- En tant que médecin

Se connecter en tant que médecin

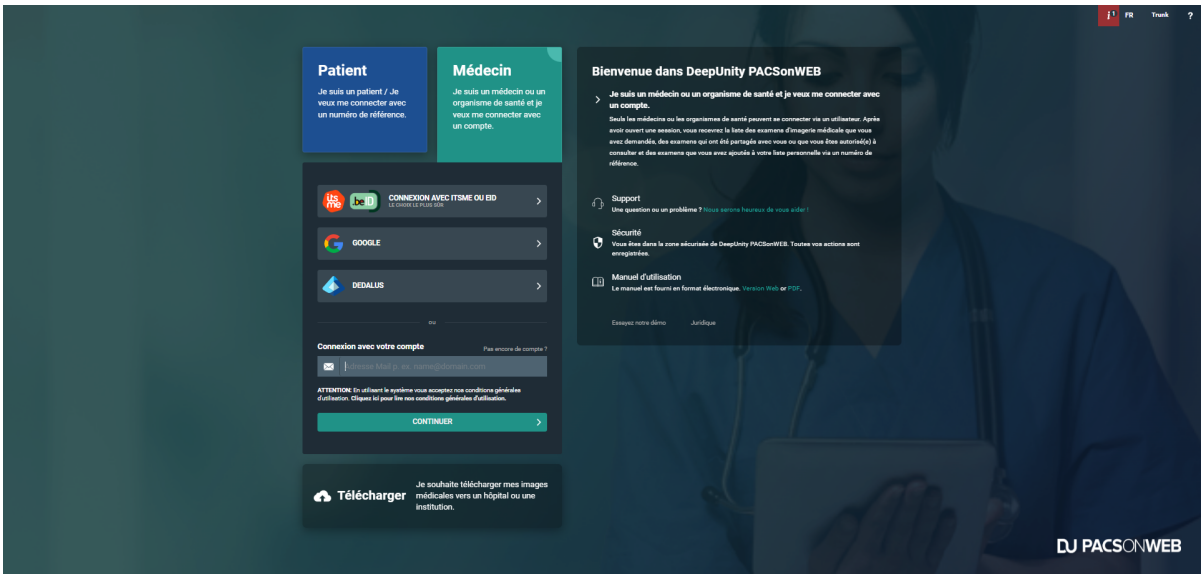

Pour vous connecter en tant que médecin avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :

1. Cliquez sur la case **Médecin**.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et cliquez sur **Continuer**.
   - Votre nom d'utilisateur est l'adresse e-mail que vous avez utilisée lors de votre inscription.
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur **Connexion**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Connexion par le biais d'un compte répertoire actif

Si vous tentez de vous connecter à DeepUnity PACSonWEB avec un compte active directory qui utilise des services fédérés pour l'authentification, vous serez redirigé vers une page Web de l'hôpital qui vous invite à saisir votre mot de passe.

Fenêtre contextuelle sur la complexité du mot de passe

Si votre mot de passe ne répond pas aux règles de complexité requises, une fenêtre contextuelle vous en informera et vous dirigera vers la page des Paramètres de l'utilisateur (Page 107) pour modifier votre mot de passe actuel.

Important !

Si votre établissement utilise l'intégration à Active Directory, vous devez modifier votre mot de passe de domaine conformément aux règles de complexité de DeepUnity PACSonWEB, de sorte que vous puissiez toujours vous connecter après la date indiquée.

Si votre compte nécessite une authentification forte pour vous connecter, vous recevrez un code temporaire (mot de passe à usage unique) par SMS ou par e-mail, ou vous devrez confirmer votre connexion par l'intermédiaire de l'application d'authentification (Page 56).

Pour plus d'informations, voir Authentification à deux facteurs (Page 55).

Première connexion

La première fois que vous vous connectez, une fenêtre contextuelle s'affiche pour activer votre compte.

1. Saisissez le code que vous avez reçu par SMS.
   - Si un code SMS incorrect est saisi, le mot de passe ne sera pas modifié.
   - Si un code SMS est saisi cinq fois de manière incorrecte, le compte sera bloqué.
2. Entrez un mot de passe.
3. Confirmez votre mot de passe en le saisissant à nouveau dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe**.
4. Cliquez sur **Activer le compte.**

Cette procédure n'est requise qu'une seule fois. À chaque tentative de connexion suivante, vous pourrez vous connecter à l'aide de votre nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez créé.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Conseil :

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser vous-même en cliquant sur **Mot de passe oublié ?** sur la page de connexion. Pour une explication plus détaillée sur la façon de réinitialiser votre mot de passe, consultez Modifier ou réinitialiser votre mot de passe (Page 67).

Veuillez noter que la réinitialisation de votre mot de passe n'est possible que si votre numéro de téléphone portable est enregistré sur DH Healthcare GmbH).

4.2.1 Authentification à deux facteurs

Après la connexion, votre compte peut nécessiter une authentification à deux facteurs. Vous pouvez utiliser l'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator ou saisir un code supplémentaire (One-Time-Password ou OTP) pour confirmer votre connexion. Nous vous conseillons d'utiliser l'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator (Page 56) pour l'authentification à deux facteurs, car c'est l'option la plus sécurisée.

Une fois que vous avez reçu votre code,

1. entrez le code à 6 chiffres dans le champ **One-Time-Password (mot de passe à usage unique)** de la boîte de dialogue OTP.

   Votre OTP est envoyé à votre téléphone portable ou à votre adresse électronique, en fonction de vos paramètres d'utilisateur (Page 107).

   Conseil :

   Si vous cochez l'option **Mémoriser ce navigateur pendant 30 jours**, vous pourrez vous connecter depuis le même ordinateur et le même navigateur sans avoir à saisir de mot de passe à usage unique pendant 30 jours.

2. Cliquez sur **Continuer**.

Vous avez maintenant accès à tous les examens que vous avez demandés et qui ont été partagés avec vous.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Le code OTP n'est valable que pendant 20 minutes.

Vous pouvez demander l'envoi d'un nouveau code à partir de cet écran, en cliquant sur **Renvoyer un mot de passe à usage unique**. Seul le dernier code reçu peut être utilisé.

En cas de saisie incorrecte du mot de passe à usage unique, vous ne serez pas connecté(e).

Si un mot de passe à usage unique incorrect est saisi 5 fois consécutivement, le compte sera verrouillé.

Configuration de la méthode d'authentification à deux facteurs

Si vous n'avez pas encore configuré votre méthode d'authentification à deux facteurs, lorsque vous vous connectez, une fenêtre de dialogue vous demandera de choisir votre méthode d'authentification à deux facteurs. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- **Mot de passe temporaire à usage unique de l'application :** S'authentifier à l'aide de l'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator (Authentification à deux facteurs via l'application Authenticator (Page 56)).
- **Mot de passe à usage unique par SMS :** Le code sera envoyé sur votre téléphone portable si votre numéro de téléphone portable est enregistré sur votre compte.
  - Si votre numéro de téléphone portable n'a pas été enregistré dans votre compte, vous recevrez le code à une reprise sur votre adresse e-mail. Après la connexion, vous aurez la possibilité d'enregistrer votre numéro de téléphone portable.
- **Mot de passe à usage unique par e-mail :** Le code sera envoyé à votre e-mail.

Vous pouvez modifier votre méthode d'authentification à deux facteurs à partir de votre Paramètres utilisateur (Page 107) (**Paramètres utilisateur**> **Mon compte** > **Sécurité**).

4.2.1.1 Authentification à deux facteurs via l'application Authenticator

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

L'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator constitue une manière sécurisée et conviviale de sécuriser votre compte.

- Cette application remplace les mots de passe à usage unique, envoyés par e-mail ou SMS, par une notification sur l'application et vous permet de confirmer votre tentative d'identification en touchant simplement votre application.
- Vous pouvez lier jusqu'à 5 appareils différents à votre compte, depuis lesquels vous pouvez confirmer votre tentative de connexion.

Vous pouvez également utiliser des applications d'authentification tierces telles que Lastpass Authenticator, Google Authenticator, Duo...

Télécharger l'app DeepUnity PACSonWEB Authenticator

Important !

Si votre appareil mobile ne respecte pas les spécifications techniques, il ne sera pas possible d'installer l'application.

iOS

Pour télécharger l'application à partir de l'Apple App Store,

1. recherchez « DeepUnity PACSonWEB » et sélectionnez la bonne application.
2. Cliquez sur **Installer**.

L'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator nécessite iOS 10 ou une version plus récente.

Remarque :

Pour iOS, l'application d'authentification a été fusionnée avec l'application Home Reading.

L'application Home Reading est toujours disponible séparément.

Android

Pour télécharger l'application depuis le Google Play Store :

1. Recherchez « DeepUnity PACSonWEB Authenticator » et sélectionnez l'application correcte.
2. Appuyez sur **Installer**.


L'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator nécessite Android 5.0 ou une version plus récente (API 21 – Lollipop).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

Pour Android, l'application authenticator et l'application Home Reading sont uniquement disponibles séparément.

Lier votre appareil mobile à DeepUnity PACSonWEB

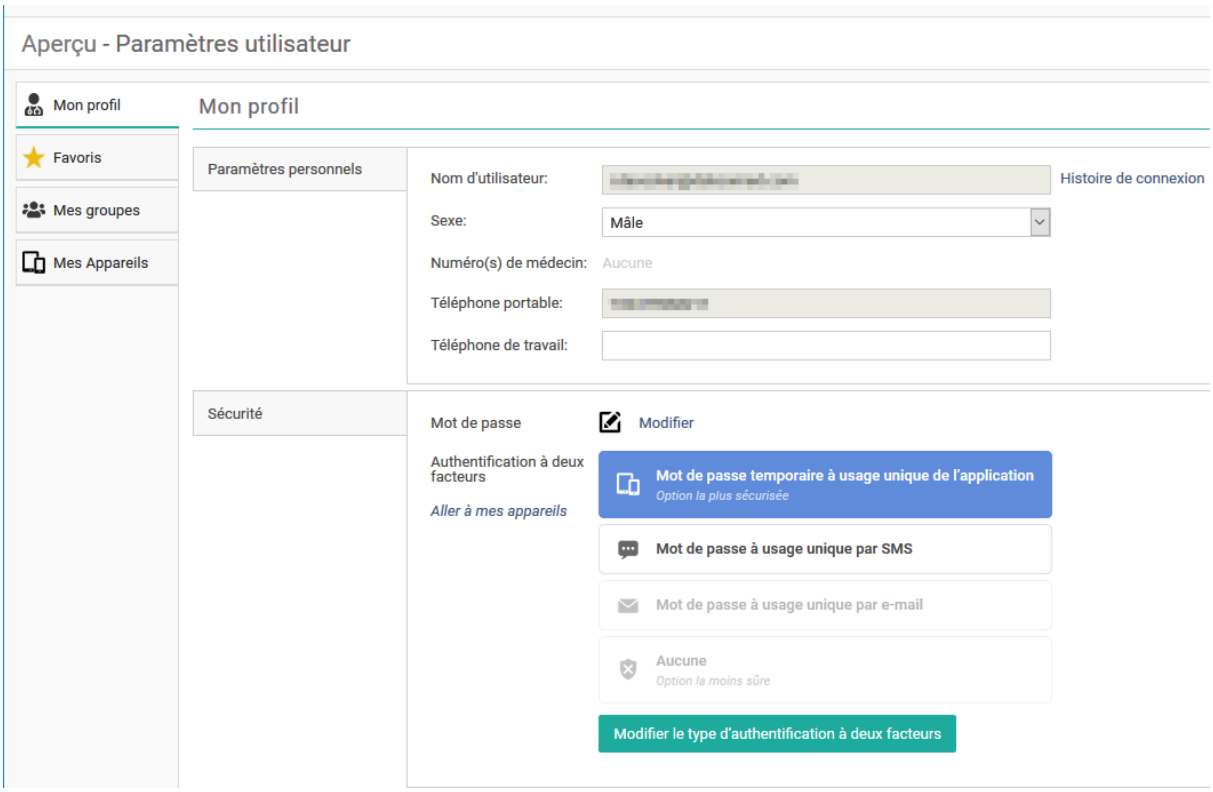

Pour lier votre appareil mobile :

1. Connectez-vous à DeepUnity PACSonWEB.
2. Naviguez vers **Paramètres de l'utilisateur** > **Mon compte** > **Sécurité.**
3. Sélectionnez l'option **Mot de passe unique basé sur le temps dans l'application.**

   Un écran apparaît pour lier un appareil.
4. Ouvrez votre application d'authentification sur votre appareil mobile et scannez le code QR.
   - Pour DeepUnity PACSonWEB Authenticator, confirmez la liaison avec votre appareil en appuyant sur **Connexion** sur votre appareil mobile.
   - Pour les applications d'authentification tierce, confirmez l'appairage avec votre appareil en saisissant un code numérique issu de l'application.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Après avoir lié votre appareil, il sera listé comme appareil de confiance dans l'onglet **Mes appareils** dans les paramètres utilisateur de DeepUnity PACSonWEB.

Se connecter à l'aide de l'application Authenticator

Pour se connecter à l'aide de l'application Authenticator :

1. connectez-vous à DeepUnity PACSonWEB à l'aide de vos nom d'utilisateur et mot de passe.

   Une notification confirmant ou rejetant votre tentative d'identification apparaîtra sur tous les appareils connectés sur lesquels vous avez installé l'application DeepUnity PACSonWEB Authenticator.

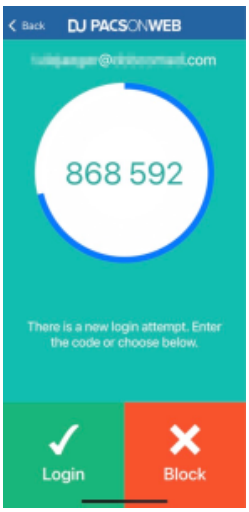

2. Terminez votre connexion en appuyant sur **Connexion** à partir de l'application ou entrez le code qui s'affiche dans le champ « Mot de passe à usage unique basé sur le temps ».

Vous êtes maintenant connecté à DeepUnity PACSonWEB.

Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre appareil mobile ou si vous utilisez une application d'authentification tierce, vous devez saisir le code numérique depuis l'application et cliquer sur**Continuer**dans votre navigateur pour finaliser votre connexion.

Désappairer votre appareil

Vous pouvez désappairer un appareil de confiance des manières suivantes :

- De DeepUnity PACSonWEB
  1. Allez dans Paramètres de l'utilisateur > **Mes appareils.**
  2. Cliquez sur l'icône « X » (**Supprimer**) à côté du dispositif que vous souhaitez dissocier.
- Depuis l'application Authenticator

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1. Appuyez sur le menu hamburger .

2. Sélectionnez **Dissocier**.

4.3 Connexion à l'aide d'un e-ID (uniquement BE)

Important !


Pour pouvoir vous connecter via une eID, le logiciel eID doit être installé sur votre ordinateur et le service Certificate Propagation de Windows doit tourner sur votre ordinateur.

Pour se connecter avec l'eID

1. Cliquez sur la case **Médecin**.
2. Cliquez sur le bouton **Connexion avec Itsme ou eID**.




3. Dans l'écran qui suit, cliquez sur **Identification avec un lecteur de cartes eID**.

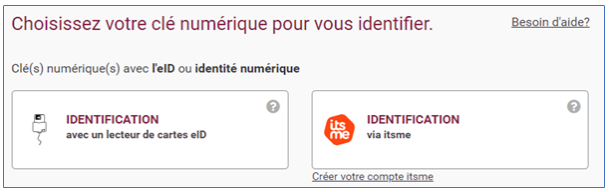


4. Suivez ensuite les étapes à l'écran et choisissez **S'identifier**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

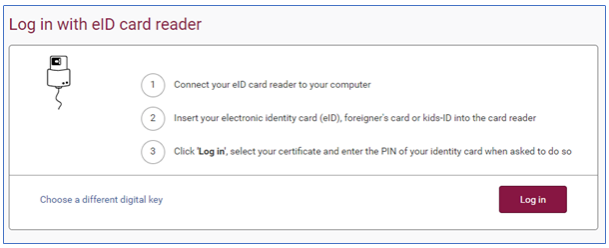


5. Sélectionnez le certificat avec lequel vous souhaitez vous identifier et cliquez sur **OK**.

   Assurez-vous que votre carte d'identité électronique est bien insérée dans votre lecteur e-ID.

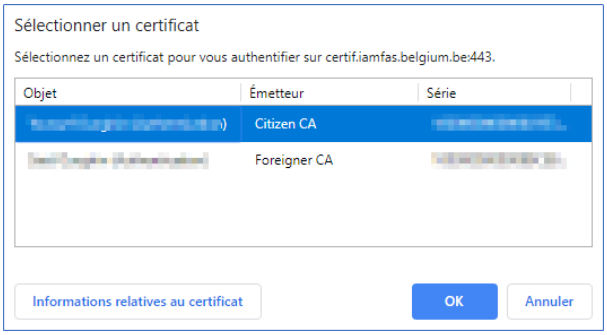


   Les captures d'écran peuvent avoir un aspect différent en fonction du navigateur sélectionné (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.).

6. Entrez le code PIN de votre carte d'identité et cliquez sur **OK**

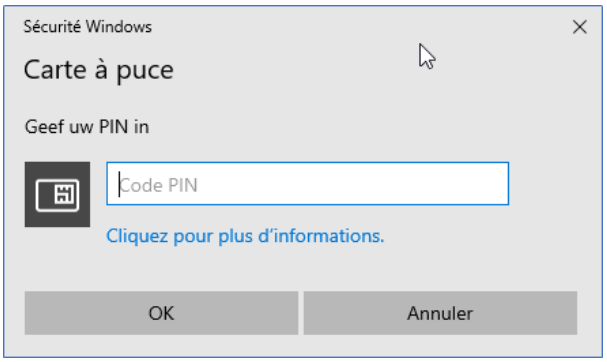

7. Vérifiez votre nom et, dans le menu déroulant, sélectionnez Civil (« burger »).
8. Cliquez sur **Log in** (« Profiel bevestigen »).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

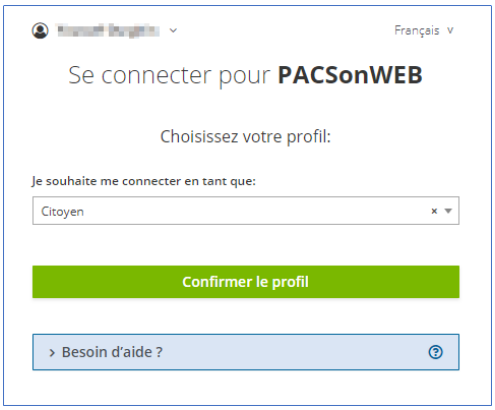


Pas encore de compte ?

- Si vous n'avez pas encore de compte, vous serez guidé pour saisir vos coordonnées (cf. S'inscrire via e-ID (uniquement BE) (Page 39)).

Vous avez déjà un compte ?

- Si vous avez déjà un compte reprenant toutes les coordonnées nécessaires, vous avez maintenant un accès immédiat à tous les examens que vous avez demandés et qui ont été partagés avec vous.
- Si vous avez déjà un compte, mais que toutes les informations requises ne sont pas disponibles dans DeepUnity PACSonWEB, une boîte de dialogue s'affichera pour vous permettre de compléter les informations manquantes :
  - Les coordonnées de compte qui sont déjà enregistrées, mais qui ne peuvent être modifiées pour des raisons de sécurité sont affichées, mais apparaissent grisées.

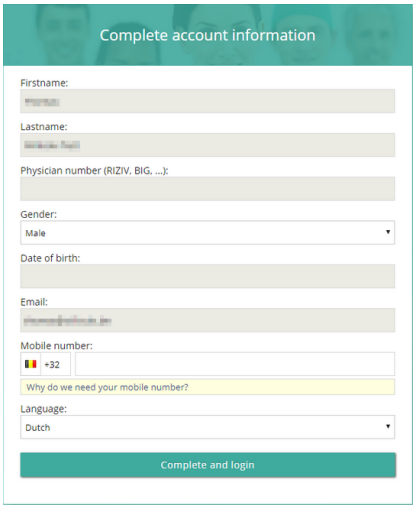

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

4.4 Se connecter en tant que délégué

Important !

Cette fonction est optionnelle. Si vous êtes intéressé(e), contactez le service d'imagerie médicale de l'hôpital.

La connexion en tant que délégué vous permet de vous connecter à l'aide d'une adresse électronique partagée (groupe) tout en identifiant l'utilisateur qui se connecte. La connexion des utilisateurs se fait via la liste déroulante **Délégués**.

Si cette caractéristique vous intéresse, contactez le service d'imagerie médicale dont vous souhaitez consulter l'examen. Indiquez ici l'adresse e-mail générale qui sera utilisée pour vous connecter et l'adresse e-mail du délégué qui administrera le groupe. Le service de radiologie vous fournira vos informations de connexion.

Se connecter en tant que délégué

1. Rendez-vous sur le site Web de l'hôpital dont vous souhaitez consulter les images.

   Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte général.

   Sélectionnez votre adresse électronique dans la liste déroulante des délégués.

   Indiquez l'OTP (One Time Password ou mot de passe à usage unique) qui a été envoyé à votre adresse e-mail cliquez sur **Continuer**.

Vous avez dorénavant accès aux examens que vous avez demandés et qui ont été partagés avec vous.

Ajout ou suppression de délégués

L'ajout et la suppression de délégués sur un compte utilisé par un groupe ne peuvent être effectués que par l'administrateur du groupe.

Pour ajouter un délégué

1. Connectez-vous à l'aide du compte général.
2. Sélectionnez l'adresse e-mail de l'administrateur.

   Indiquez l'OTP (One Time Password ou mot de passe à usage unique) qui a été envoyé à l'adresse e-mail et cliquez sur **Continuer**.

   Vous avez dorénavant accès à tous les examens qui ont été partagés avec l'adresse e-mail générale.
4. Passez sur l'**icône Paramètres** dans le coin supérieur droit de la page d'aperçu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur l'onglet **Mes groupes**.

   Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter un délégué dans la liste **Administrateur du (des) groupe(s) {x}**.
8. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet **Délégués**
9. Cliquez sur **Ajouter délégué**.
10. Indiquez l'adresse e-mail du délégué que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **Ajouter**.

    Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

    Si une personne se connecte avec le compte général, elle peut également sélectionner les adresses e-mail récemment ajoutées.

Pour supprimer un délégué

1. Suivez les étapes 1 à 8 décrites dans l'instruction précédente (Pour ajouter un délégué).
2. Recherchez dans la liste le délégué que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône de suppression  .
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

4.5 Connexion par le biais d'un répertoire actif



Conseil :

La connexion à l'aide d'un répertoire actif signifie qu'un utilisateur peut se connecter avec le compte de domaine ou l'adresse e-mail de l'hôpital et le mot de passe associé.

Il s'agit d'une intégration optionnelle et cela ne peut être configuré que pour des services de radiologie. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour plus d'informations.

Se connecter via un répertoire actif

1. Accédez à la page de connexion de l'hôpital et cliquez sur la case **Médecin**.
2. Dans le champ « Nom d'utilisateur », saisissez le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail de l'hôpital, puis cliquez sur **Continuer**.
3. Saisissez le mot de passe enregistré auprès de l'hôpital pour le compte associé et cliquez sur **Connexion**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Active Directory Federation Services

Si l'intégration de répertoire actif a été configurée à l'aide d'ADFS, vous serez redirigé vers une page distincte, hébergée par l'hôpital, pour saisir le mot de passe.

Mot de passe à usage unique

Après avoir réussi à vous connecter à DeepUnity PACSonWEB pour la première fois, vous recevrez un mot de passe à usage unique (OTP) par SMS sur le téléphone portable enregistré du compte.

Saisissez le code que vous avez reçu dans le cadre de la **sécurité supplémentaire : Entrez un mot de passe à usage unique** et cliquez sur **Continuer**.

- En cas de saisie incorrecte du code OTP, vous ne serez pas connecté(e).
- Si un mot de passe à usage unique incorrect est saisi 5 fois consécutivement, le compte sera verrouillé.
- Si tout a été saisi correctement, la liste d'examens/la liste de travail s'affiche.

Fenêtre contextuelle sur la complexité du mot de passe

- Si vous vous êtes connecté avec un mot de passe qui n'est pas conforme à la politique de DeepUnity PACSonWEB en matière de mot de passe, une fenêtre contextuelle vous en informera et vous demandera de modifier votre mot de passe actuel.
- Modifiez votre mot de passe dans la page Paramètres utilisateur (Page 107), conformément au niveau de complexité exigé pour la création du mot de passe, afin de pouvoir continuer à vous connecter à DeepUnity PACSonWEB après la fenêtre contextuelle indiquée.
  - Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de modifier votre mot de passe, consultez Modifier ou réinitialiser votre mot de passe (Page 67)

Important !

La complexité de mot de passe n'est pas vérifiée à l'utilisation d'ADFS.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

4.6 Connexion à l'aide du DME

Conseil :

L'ouverture d'un examen sur DeepUnity PACSonWEB directement depuis le système de dossier médical électronique (DME) est uniquement possible pour les départements de radiologie après la configuration.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour plus d'informations.

- Si vous avez ouvert un examen depuis le DME, « (EMR) » ((DME)) s'affiche à côté de votre nom d'utilisateur sur la barre d'outils du haut.
- Étant donné que vous n'êtes pas connecté à l'aide d'un compte DeepUnity PACSonWEB standard, l'authentification est considérée comme insuffisante pour rendre toutes les fonctions disponibles.
  - Si vous essayez d'utiliser une fonction qui a été rendue inaccessible, la notification suivante s'affiche : « Vous êtes connecté via le DME et avez un accès limité. Afin d'utiliser toutes les fonctionnalités utilisateur, vous devrez vous connecter via DeepUnity PACSonWEB avec votre compte. Cliquez ici pour vous connecter. »

4.7 Visualisation des tentatives de connexion

Toutes les tentatives de connexion à DeepUnity PACSonWEB sont journalisées.

- Votre dernière connexion réussie avec votre nom d'utilisateur est affichée dans le menu en haut de la page d'aperçu.
  - Vous la trouverez à côté de votre nom d'utilisateur, affichée comme **Dernière connexion : jj/mm/aaaa 00:00:00**)
- En cas de tentative de connexion incorrecte avec votre nom d'utilisateur, vous recevrez un avertissement lors de votre prochaine connexion.

Pour voir une liste détaillée de toutes les tentatives de connexion enregistrées

1. passez sur l'icône des Paramètres utilisateur (Page 107).
2. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.
3. Dans l'onglet **Mon compte**, sous **Nom d'utilisateur**, cliquez sur **Historique de connexion**.

L'aperçu indique à quelle heure et depuis quelle adresse IP chaque tentative de connexion a été enregistrée et si celle-ci était réussie ou non.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

4.8 Modifier ou réinitialiser votre mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe pour des raisons de sécurité ou le réinitialiser si vous l'avez oublié ou s'il a expiré.

Important !

La modification de votre mot de passe est disponible uniquement si vous êtes connecté(e) avec un compte DeepUnity PACSonWEB. Pour les personnes connectées avec un compte Active Directory, il n'est pas possible de changer de mot de passe à partir de cette page.

La réinitialisation de votre mot de passe n'est possible que si votre téléphone portable est enregistré auprès de DH Healthcare GmbH

Modifier votre mot de passe

1. Connexion à votre compte DeepUnity PACSonWEB.
2. Dans la barre d'outils supérieure, passez sur l'**icône des paramètres** .
3. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans le menu déroulant.

   La page s'ouvre sur l'onglet **Mon compte**
4. Sous **Sécurité**, cliquez sur **Modifier**.
5. Saisissez votre mot de passe actuel dans le champ **Ancien mot de passe**.
6. Saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe.**
7. Confirmez votre nouveau mot de passe en le saisissant à nouveau dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Modifier le mot de passe** pour mettre à jour votre mot de passe.

   Lorsque vous cliquez sur **Modifier le mot de passe**, votre ancien mot de passe est remplacé par le nouveau.
9. Pour annuler vos modifications, cliquez sur **Annuler la modification du mot de passe**.

Votre mot de passe DeepUnity PACSonWEB expire systématiquement au bout de 1 an.

Réinitialiser votre mot de passe

1. Sur la page de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et cliquez sur **Continuer**.
2. Sous le champ du mot de passe, cliquez sur **« Mot de passe oublié ?** »

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Une fenêtre de dialogue s'affiche avec l'adresse électronique que vous avez saisie sur la page de connexion.

3. Vérifiez que l'adresse e-mail est correcte et cliquez sur **Réinitialiser**.

   Un message de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur **Ok**.

   Vous recevrez un e-mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

5. Dans le courriel, cliquez sur le lien de **réinitialisation du mot de passe**. Le lien ouvrira une page Web.

6. Entrez le code SMS que vous avez reçu au numéro de portable connu de DH Healthcare GmbH (le numéro de portable auquel le code est envoyé est également indiqué dans l'e-mail)

   Si un code SMS est saisi de manière incorrecte, le mot de passe ne sera pas modifié.

   Si un code SMS est saisi cinq fois de manière incorrecte, le compte sera bloqué.

7. Saisissez un nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe.**

8. Confirmez le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe**.

9. Cliquez sur **Réinitialiser le mot de passe**.

Si tout a été saisi correctement, vous serez redirigé vers la page de connexion où vous pourrez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre nouveau mot de passe.

Important !

Le lien pour réinitialiser votre mot de passe est valable pendant 48 heures. Après 48 heures, le lien ouvrira une boîte de dialogue vous informant que le lien a expiré et vous demandant de répéter la procédure de réinitialisation de votre mot de passe. Vous recevrez un nouvel e-mail avec un lien mis à jour.

4.9 Déconnexion

Déconnectez-vous de DeepUnity PACSonWEB à partir de n'importe quelle page en cliquant sur le bouton **Déconnexion** situé dans le coin supérieur droit de chaque page.

Pour des raisons de sécurité, votre session DeepUnity PACSonWEB expirera automatiquement dans les cas suivants :

- Si votre session est inactive pour 30 minutes
- 4 heures après la connexion DeepUnity PACSonWEB

  Pour adapter ces délais, envoyez une demande à notre Service Desk.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Votre session DeepUnity PACSonWEB sera également interrompue si vous fermez toutes les fenêtres du navigateur.

Important !

Si vous avez encore une fenêtre du même navigateur ouverte (même sans DeepUnity PACSonWEB), la session reste ouverte et il est possible de se reconnecter sur DeepUnity PACSonWEB sans entrer vos données de connexion.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

La liste d’examens

5

Patients : Si vous vous êtes connecté(e) en tant que patient(e) avec un numéro de référence, vous serez dirigé(e) vers la demande respective (voir Page d’examen DeepUnity PACSonWEB (Page 211)).

Utilisateurs enregistrés : Si vous vous connectez avec un compte, vous accédez directement à la liste d’examens. Vous y trouverez une liste de tous les examens que vous avez le droit de consulter.

Vous pouvez avoir des droits d'accès sur un examen, car :

- vous êtes le médecin demandeur (ou le médecin des soins intensifs),
- un collègue de votre pratique de groupe est le médecin demandeur et les examens sont partagés au sein de la pratique de groupe,
- vous avez ajouté l’examen à votre liste, en utilisant le numéro de référence (voir Ajout d’un examen (Page 84)),
- l’examen a été partagé avec votre utilisateur, votre groupe ou votre service médical (voir Partager des examens à partir de la liste d’examens (Page 140)) ou
- vous êtes membre du groupe d'utilisateurs ou du groupe d'administration d'un service de radiologie.

Par défaut, la liste d’examens ne contient que les examens disponibles dans l'environnement central du cloud DeepUnity PACSonWEB.

- Un service d’imagerie médicale peut choisir de traiter les images également localement par un cache d’images local (voir Mémoire cache locale des images (Page 206)) pour rendre les images disponibles plus rapidement au sein du réseau local.
- Si votre utilisateur a des droits d’accès à un tel cache d’images local, la liste d’examens contiendra également tous les examens qui sont disponibles par le biais du cache d’images local.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

Conseil :

Pour les mammographies, les images seront conservées sur DeepUnity PACSonWEB pendant une période de trois ans par défaut. Pour les autres examens, les images resteront sur DeepUnity PACSonWEB pendant un an.

Pour consulter un examen plus ancien, contactez l'imagerie médicale.

La liste d'examens

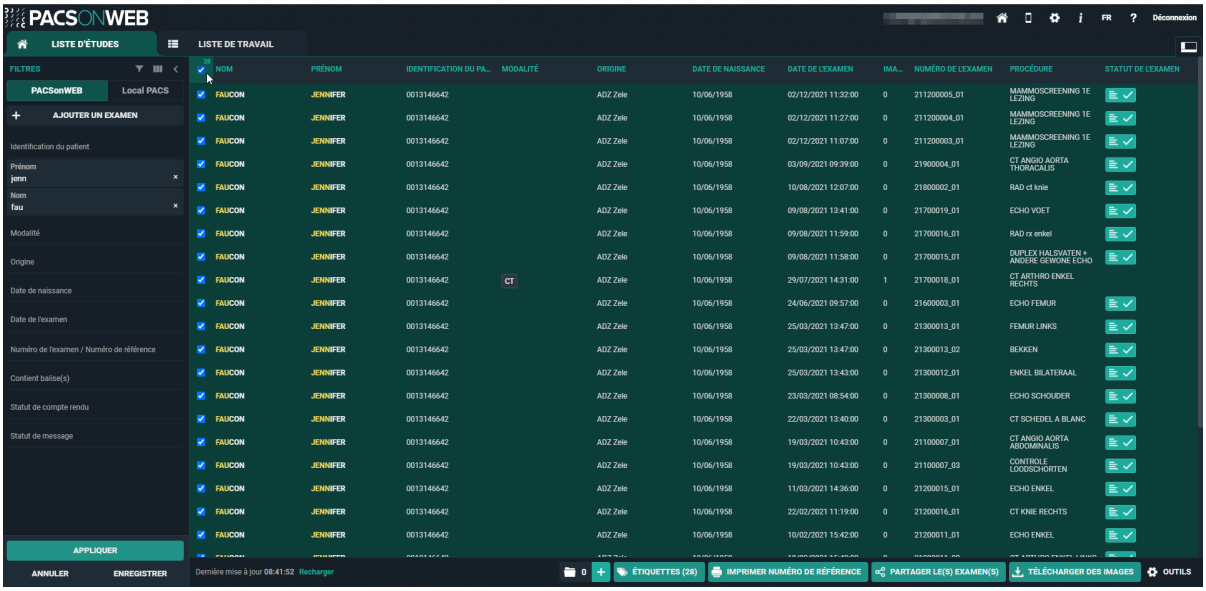


- La liste se recharge automatiquement toutes les cinq minutes.
  - Pour actualiser la liste manuellement, cliquez sur **Recharger** en bas de la page.
- La liste se limite aux 100 examens les plus récents.
  - Pour afficher des résultats plus spécifiques ou rechercher des examens plus anciens, vous pouvez utiliser des filtres (Page 78).
- Vous pouvez sélectionner tous les examens qui figurent dans votre liste d'examens.
  - Pour sélectionner tous les examens, cochez la case supérieure de la première colonne.
  - Cette case affiche également le nombre d'examens sélectionnés.

Ouvrir un examen à partir de la liste d'examens

La liste d'examens présente la liste de tous les examens auxquels vous avez accès. Lorsque vous cliquez sur un examen de cette liste, l'examen s'ouvre par défaut dans l'onglet actif.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

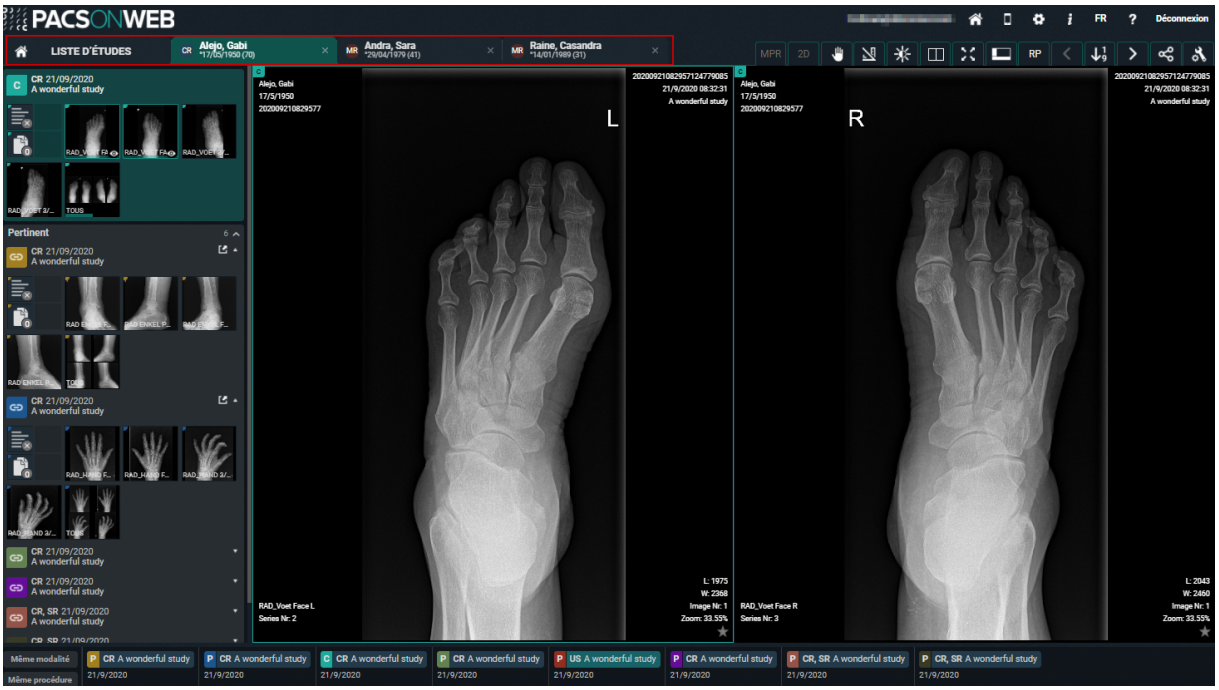

Conseil :


Si le paramètre correspondant a été activé pour votre compte, vous pouvez ouvrir différents examens dans le même onglet du navigateur. En cliquant sur un examen à partir de la liste d'examens, vous ouvrez cet examen dans la fenêtre et l'onglet actifs.

Pour ouvrir un examen dans un nouvel onglet à partir de la liste d'examens, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

- Ctrl + Maj + clic gauche sur l'examen
- Ctrl + clic gauche sur l'examen
- Cliquer sur l'examen en utilisant la molette de défilement

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5.1 Configurer la liste d’examens

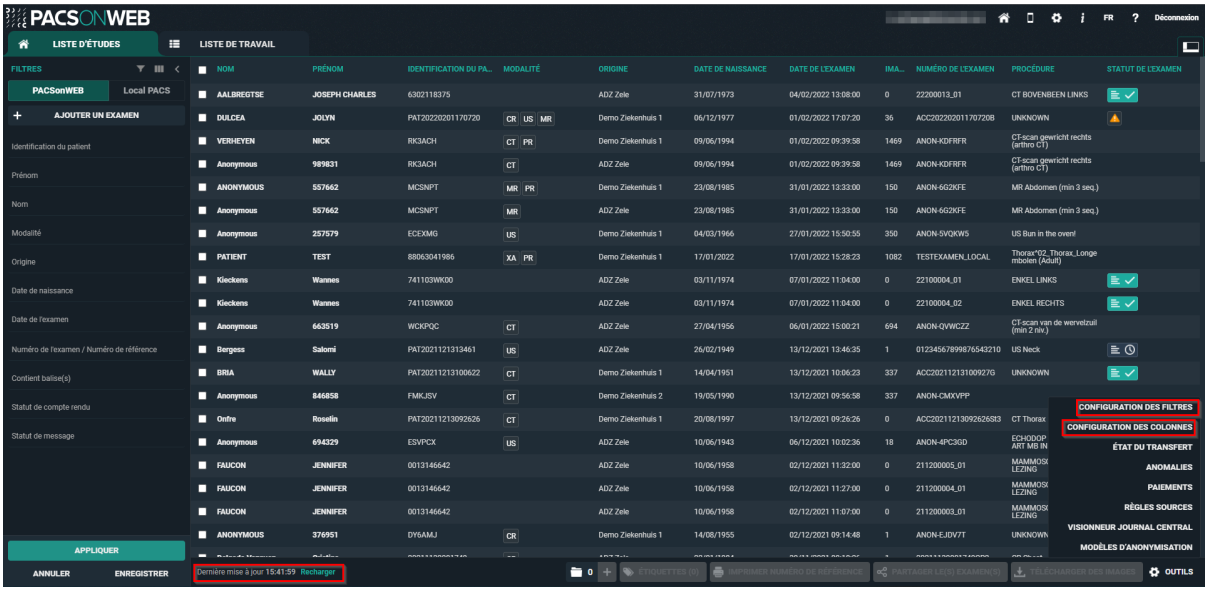

Conseil :

Actualiser la liste d’examens

La liste d’examens s'actualise automatiquement toutes les 5 minutes.

Configurer la liste d’examens


Vous pouvez configurer la liste d’examens en fonction de vos préférences en modifiant les champs de filtre dans **Configuration des filtres** et les colonnes dans **Configuration des colonnes**.

Il y a deux façons de naviguer vers **Configuration des filtres** et **Configuration des colonnes** :

1. Cliquez sur l’icône correspondante dans le panneau des filtres.
   - Configuration des filtres
   - Configuration des colonnes
2. Cliquez sur **Outils** et sélectionnez **Configuration des filtres** ou **Configuration des colonnes** dans la liste.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Configuration des filtres

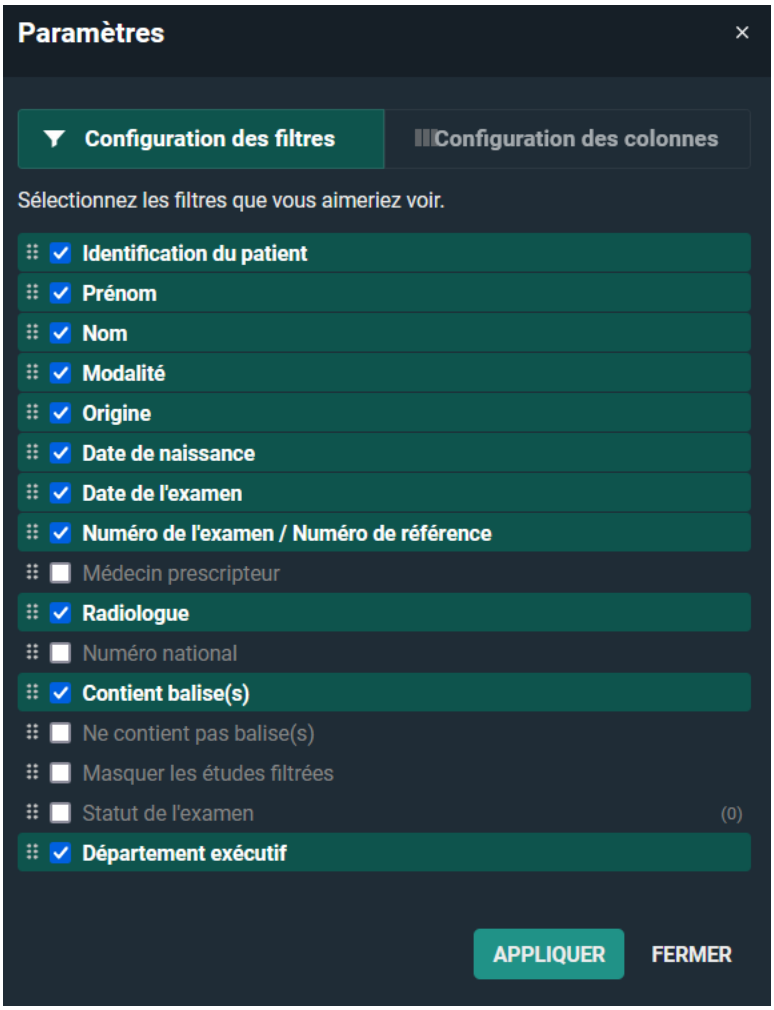

Dans configuration des filtres, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier l'ordre d'affichage des champs dans le panneau du filtre.

- Pour afficher un champ de filtre, cochez la case correspondante.
- Pour masquer un champ de filtre, décochez la case correspondante.
- Pour modifier l'ordre d'un champ de filtre, cliquez et faites-le glisser vers une position souhaitée dans la liste.

Après avoir apporté les modifications souhaitées, cliquez sur **Appliquer**.

Si une valeur est déjà introduite pour un filtre, cette valeur est affichée derrière entre parenthèses.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Champs de filtrage

Le tableau ci-dessous répertorie les champs de filtrage disponibles et le type de saisie (texte, liste déroulante, calendrier).

Champ	**Type d'entrée**
Numéros/référence d'accès	Champ de texte
Contient étiquette(s)	Liste déroulante multisélection
Date de naissance	Champ de texte
Ne contient pas étiquette(s)	Liste déroulante multisélection
Prénom	Champ de texte
Prénom de naissance	Champ de texte
Masquer les examens filtrées	Case à cocher
Nom de famille	Champ de texte
Nom de naissance	Champ de texte
Modalité	Liste déroulante multisélection
Numéro national	Champ de texte
ID du patient	Champ de texte
Département exécutif	Champ de texte
Lieu de naissance	Champ de texte
Radiologue	Champ de texte
Médecin prescripteur	Champ de texte
Source	Champ de texte


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Date d’examen	Calendrier
Statut de l’examen (État du rapport / État du message)	Liste déroulante multisélection

Pour plus de détails sur les champs **Date de l’examen**, **État du compte-rendu** et **État du message**, consulter Configurer la liste d’examens (Page 73)Utilisation des filtres.

Configuration des colonnes

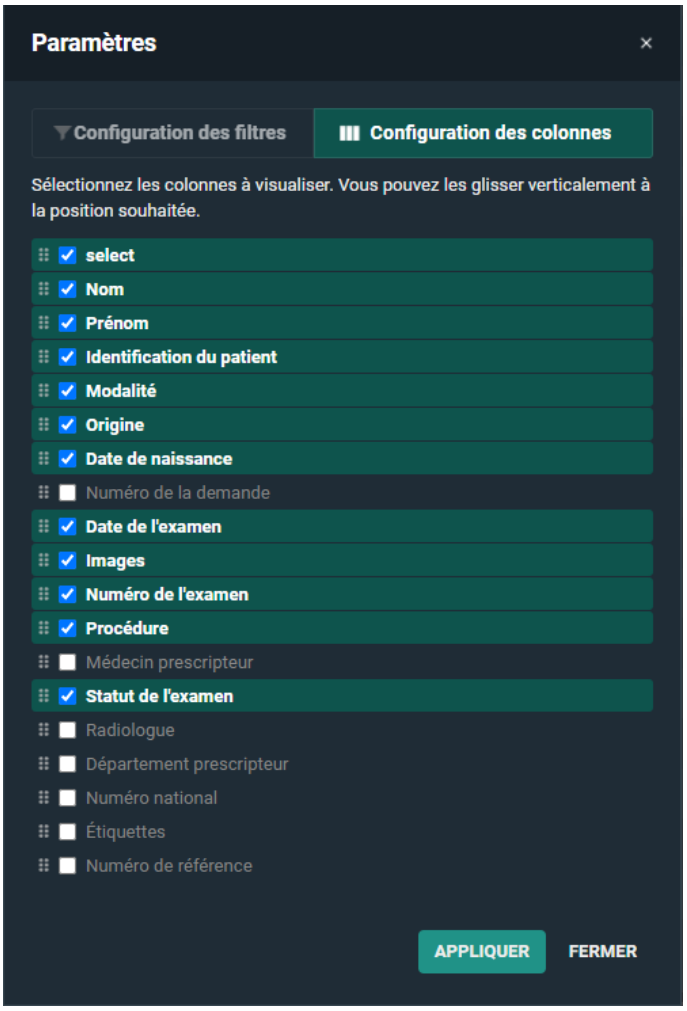

Les paramètres des colonnes permettent d’ajouter, de supprimer ou de modifier l’ordre d’affichage des colonnes dans la liste d’examens.

- Pour afficher une colonne dans la liste d’examens, cochez la case correspondante.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Pour masquer une colonne de la liste d'examens, décochez la case correspondante.
- Pour modifier l'ordre d'une colonne, cliquez et faites-la glisser vers position souhaitée dans la liste.

Après avoir apporté les modifications souhaitées, cliquez sur **Appliquer**.


Champs de colonnes

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les champs de colonnes disponibles sur la liste d'examens.

- Numéro d'accès
- Date de naissance
- Prénom
- Prénom de naissance
- Images
- Étiquettes
- Nom de famille
- Nom de naissance
- Modalité
- Numéro national
- Numéro de demande
- ID du patient
- Département exécutif
- Lieu de naissance
- Procédure
- Radiologue
- Numéro de référence
- Département prescripteur
- Médecin prescripteur
- Sélectionnez
- Source
- Date de l'examen
- Statut de l'examen
  - Statut du compte-rendu
  - Statut de message

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5.2 Utilisation des filtres

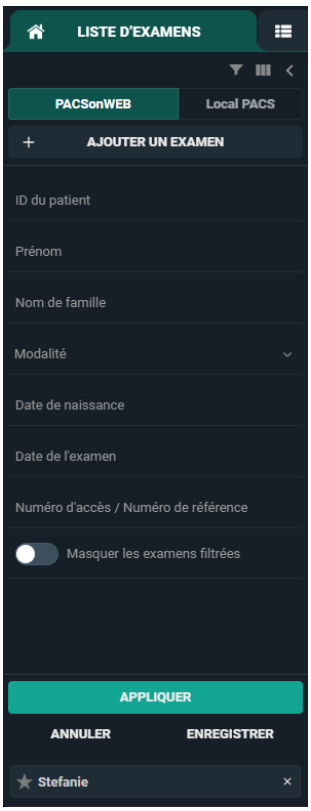

Les filtres vous permettent de retrouver plus aisément un examen dans votre liste. Cliquez sur la flèche grise en haut à gauche pour afficher ou masquer les champs de filtrage.

Mémoriser des filtres de la liste d'examens

Vous pouvez configurer DeepUnity PACSonWEB pour qu'il mémorise les valeurs saisies dans les champs de filtrage lorsque vous ouvrez un examen ou que vous vous déconnectez.

Pour configurer ce paramètre :

1. Cliquez sur l'icône **Paramètres de l'utilisateur** et sélectionnez **Paramètres de l'utilisateur** dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur l'onglet **Préférences**.
3. Sous **Général** > **Paramètres généraux**
   - Pour mémoriser les filtres, activez l'icône à bascule **Mémoriser les filtres de la liste d'examens**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Pour effacer les filtres, désactivez l'icône à bascule **Mémoriser des filtres de la liste d'examens**.

4. Cliquez sur **ENREGISTRER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX**.

Important !

Si vous utilisez un filtre au cours de votre session DeepUnity PACSonWEB et ne le supprimez pas à la fermeture de votre session, le filtre s'ouvre automatiquement au démarrage d'une nouvelle session.

Comment effectuer une recherche à l'aide d'un filtre

Pour lancer une recherche :

1. Saisissez les critères de recherche dans les champs de filtrage souhaités.

   Les champs de filtrage sont en gras et en gris lorsqu'ils contiennent des critères de recherche.


2. Cliquez sur **APPLIQUER**.

Lorsque la recherche est en cours, tous les champs du filtre sont verrouillés et ne peuvent être modifiés qu'une fois la recherche terminée.

Pour une liste des champs de filtrage disponibles, voir Configurer la liste d'examens (Page 73).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Utiliser le filtre de la date de l'examen

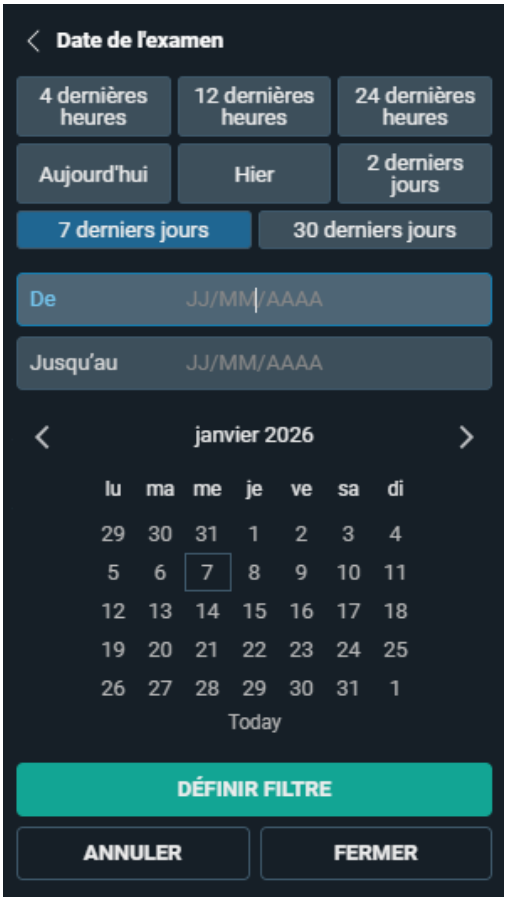

Le champ **Date de l'examen** affiche un calendrier qui vous permet de sélectionner un jour précis ou une plage de jours.

Pour utiliser le filtre de la date de l'examen :

1. Cliquez sur la **date de l'examen** dans les **FILTRES**
2. Sélectionnez vos dates.
   - Vous pouvez sélectionner les dates à l'aide d'un filtre prédéfini, saisir les dates souhaitées dans le calendrier ou les saisir manuellement à l'aide de votre clavier.
   - Vous pouvez sélectionner un jour spécifique ou une plage de dates.
3. Cliquez sur **DÉFINIR LE FILTRE**.
4. Cliquez sur **APPLIQUER**.

Utilisation de filtres prédéfinis

Vous pouvez choisir parmi une liste de filtres prédéfinis :

- 4 dernières heures

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

- 12 dernières heures
- 24 dernières heures
- Aujourd'hui
- Hier
- 2 derniers jours
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours

Saisir les dates manuellement

- Sélectionnez les dates manuellement à l'aide de votre clavier :

  Saisissez les dates souhaitées dans les champs **Du** et **Jusqu'au** (en respectant le format jj/mm/aaaa) à l'aide de votre clavier.
- Sélectionnez une date à l'aide du calendrier :

  Naviguez jusqu'au jour/mois/année souhaité à l'aide du calendrier et cliquez sur les jours que vous souhaitez saisir.
  - La première date sur laquelle vous cliquez sera automatiquement inscrite dans le champ **Du**.
  - La deuxième date sur laquelle vous cliquez sera inscrite dans le champ **Jusqu'au.**
- Utilisez les champs **Du** et **Jusqu'au** pour obtenir des résultats différents :
  - Pour rechercher les examens d'un jour spécifique, indiquez la même date dans les champs **Du** et **Jusqu'au**.
  - Pour rechercher des examens à partir d'une date spécifique jusqu'à aujourd'hui, saisissez la date dans le champ **Du** uniquement.
  - Pour rechercher des examens jusqu'à une date spécifique, saisissez la date dans le champ **Jusqu'au** uniquement.
  - Pour rechercher des examens dans une période spécifique, remplissez les champs **Du** et **Jusqu'au**.

Pour effacer les dates de l'examen

Pour effacer les dates de l'examen que vous avez saisies dans les champs **Du** et **Jusqu'au** :

1. Cliquez sur le champ de filtrage de **Date de l'examen**.
2. Cliquez sur le bouton **ANNULER** en dessous du calendrier.
3. Cliquez sur **APPLIQUER** en bas de la fenêtre **FILTRES**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Vous pouvez également effacer les dates de l'examen en cliquant sur le **x** à droite du champ dans le panneau filtre.

Utilisation du filtre d'état des comptes-rendus

Le filtre **État du compte-rendu** vous permet de filtrer à partir d'un ou plusieurs des statuts figurant ci-dessous :

Icônes	Statut
-	Sans compte rendu
	Projet de compte rendu
	Compte rendu préliminaire
	Validated report (compte-rendu validé)

Utilisation du filtre d'état des messages

Le filtre **État de message** vous permet de filtrer sur un ou plusieurs des statuts suivants :

Icônes	Statut
	Lu
	Non lu

Vous pouvez aussi sélectionner les deux options (lu/non-lu) pour afficher une liste de tous les examens avec un message.

L'utilisation du filtre contient des étiquettes

DeepUnity PACSonWEB permet aux utilisateurs de filtrer les examens qui contiennent et excluent certaines étiquettes.

Vous pouvez également filtrer en utilisant des étiquettes prédéfinies qui sont liées aux examens sur la base des valeurs des messages HL7.

- Pour l'utilisation des étiquettes prédéfinies, veuillez contacter DH Healthcare GmbH.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Si certains examens pour un service de radiologie sont filtrés, sur la base de valeurs de messages HL7 telles que le service prescripteur, la modalité,... les examens sont toujours répertoriés dans la liste d'examens des administrateurs source pour référence.

Ces examens sont marquées par l'icône suivante dans le champ du statut de l'examen : 

En tant qu'administrateur de source, vous avez la possibilité de masquer les examens filtrés en activant l'icône à bascule  **Masquer les examens filtrés**.

Les études filtrées ne sont jamais visibles pour les non-administrateurs; ce filtre n'est dès lors pas disponible pour les utilisateurs standards.

Comment enregistrer un filtre

Vous pouvez enregistrer un filtre que vous utilisez régulièrement.

Pour enregistrer un filtre :

1. Saisissez les critères dans les champs souhaités.
2. Cliquez sur **ENREGISTRER**.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche,
   a. saisissez un nom pour votre filtre.
   b. Sélectionnez un groupe dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur **ENREGISTRER LE FILTRE**.

 **Conseil :**

Si vous êtes l'administrateur d'un cabinet de groupe, vous pouvez choisir d'enregistrer le filtre uniquement pour vous-même ou pour tous les membres du cabinet de groupe.

Seul l'administrateur peut supprimer un filtre créé pour tous les membres du groupe.

Le filtre sera enregistré en bas du panneau filtre. Vous pouvez appliquer le filtre à tout moment en cliquant dessus.

Pour supprimer votre filtre enregistré, cliquez sur le **x** à droite du filtre.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

5.3 Ajout d’un examen

Si vous souhaitez consulter une examen dont vous n’êtes pas le médecin prescripteur, vous pouvez ajouter cet examen à votre liste, à condition que le patient vous ait donné le numéro de référence et sa date de naissance.

Ajouter l’examen :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter examen** dans le coin supérieur gauche.

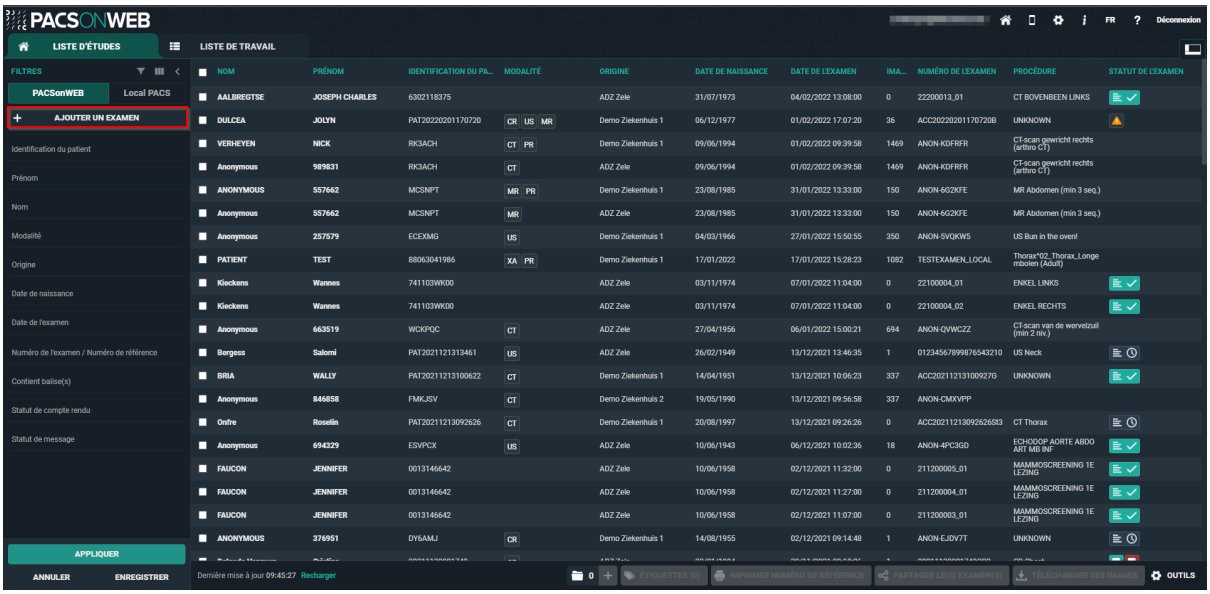

2. Saisissez le numéro de référence de l’examen et la date de naissance du patient dans la boîte de dialogue affichée.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter examen**.

L'examen correspondant s'ouvre instantanément.

Si un ou plusieurs examens ont été partagés avec un utilisateur non-DeepUnity PACSonWEB, il n’y a pas de numéro de référence mais seulement un code DU POW (DU POW…).

Vous pouvez ajouter cet examen de manière similaire en saisissant le code DU POW dans le champ du numéro de référence et la date de naissance d’un des patients concernés.

Conseil :

Après avoir ajouté un examen, cet examen reste également disponible dans votre propre liste pour une consultation future.

Si vous êtes administrateur d’un groupe, vous aurez l’option supplémentaire d’ajouter l’examen pour l’ensemble du groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Après avoir ajouté l'examen, il sera accessible à tous les membres du groupe.



Ajouter un examen unique :

Lors de l'ajout d'un examen unique, vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Ajouter examen** : l'examen sera ajouté à la liste d'examens de l'utilisateur
- **Ajouter et ouvrir examen** : l'examen sera ajouté à la liste d'examens de l'utilisateur, puis ouvert dans la visionneuse
- **Ajouter et ouvrir examen dans liste** : l'examen sera ajouté à la liste d'examens avec archivage du numéro de référence comme filtre pour montrer l'examen ajouté

Ajouter un ensemble (plus d'un examen) :

Lors de l'ajout d'un ensemble, vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Ajouter examens** : les examens seront ajoutés à la liste d'examens de l'utilisateur.
- **Ajouter et ouvrir examens dans liste** : l'examen sera ajouté à la liste d'examens avec archivage du numéro de référence comme filtre pour montrer l'examen ajouté

5.4 Portail de téléchargement

Le portail de téléchargement vous permet de télécharger vos images médicales et documents associés vers votre hôpital/institution.


Pour télécharger avec succès vos images médicales et les documents associés vers l'hôpital/institution :

1. Ajoutez vos images/fichiers médicaux au portail de téléchargement.
2. Vérifiez que vous avez ajouté les bonnes images/bons fichiers au portail de téléchargement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

3. Acceptez la politique de confidentialité et consentez à partager vos images médicales et vos données personnelles avec l'hôpital via le portail de téléchargement.
4. Cliquez sur **Démarrer le téléchargement**.

Vue d'ensemble de la page du portail de téléchargement

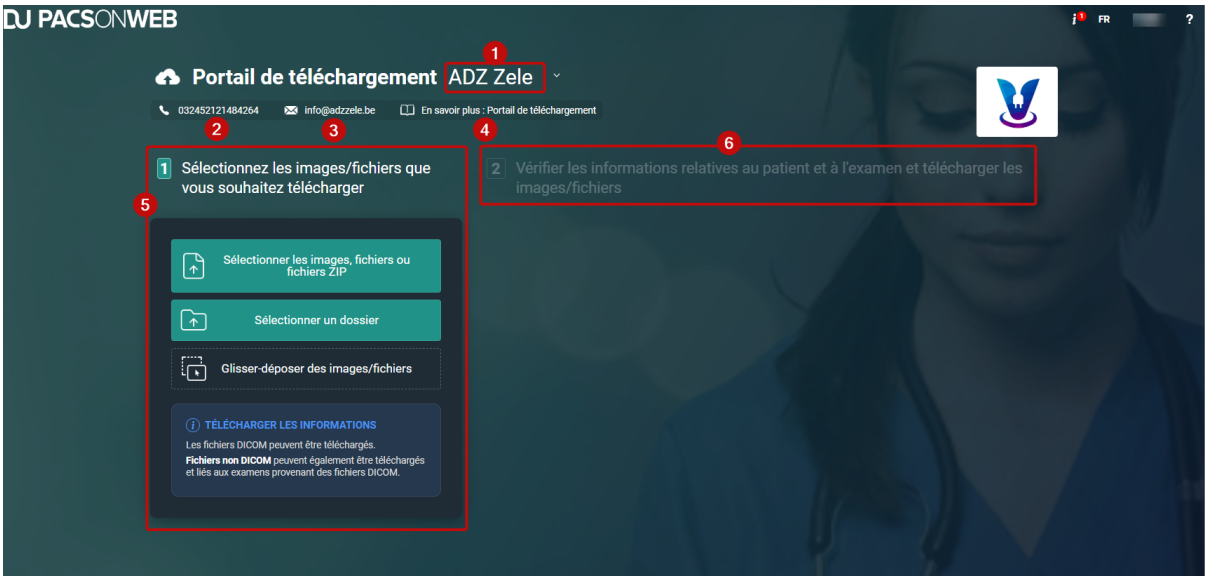

Numéro	Désignation	Description
1	Source	L'hôpital/l'institution qui vous a fourni le code de chargement.
2	Numéro téléphone	Le numéro de téléphone de votre hôpital/ institution.
3	Adresse e-mail	L'adresse électronique de votre hôpital/institution.
4	Lien hypertexte	Un lien vers le chapitre « Portail de téléchargement » du manuel d'utilisation.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
5	Partie 1 (sélectionnez les images/fichiers que vous souhaitez télécharger)	Ajoutez vos images médicales et documents associés au portail de téléchargement en utilisant l'une des trois options disponibles : • Sélectionner les images, fichiers ou fichiers ZIP • Sélectionner un dossier • Glisser-déposer des images/fichiers Les types de fichiers suivants sont pris en charge : • Fichiers DICOM • Fichiers non DICOM : pdf, png, jpg, jpeg, tif **Remarque :** La quantité de données pouvant être téléchargées est limitée à un certain nombre de Go par session. La limite en Go est configurable.
6	Partie 2 (vérifiez les informations relatives au patient et à l'examen et téléchargez les images)	Vérifiez les informations relatives au patient et à l'examen et téléchargez les images/fichiers.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
		Remarque : La partie 2 ne sera disponible que lorsque vous aurez ajouté des images au portail de téléchargement.

Voir aussi

Restrictions et messages d'erreur (Page 102)


Sélection des images/fichiers médicaux à télécharger (Page 88)

Utilisation du portail de téléchargement en tant qu'utilisateur de la source/ administrateur de la source (Page 104)

Vérifier les informations relatives au patient et à l'examen et télécharger les images/ fichiers (Page 93)

5.4.1 Sélection des images/fichiers médicaux à télécharger

La première étape du téléchargement de vos images/fichiers sur le portail Upload consiste à sélectionner les images/fichiers que vous souhaitez télécharger. Il existe trois manières d'ajouter vos images médicales au portail de téléchargement.

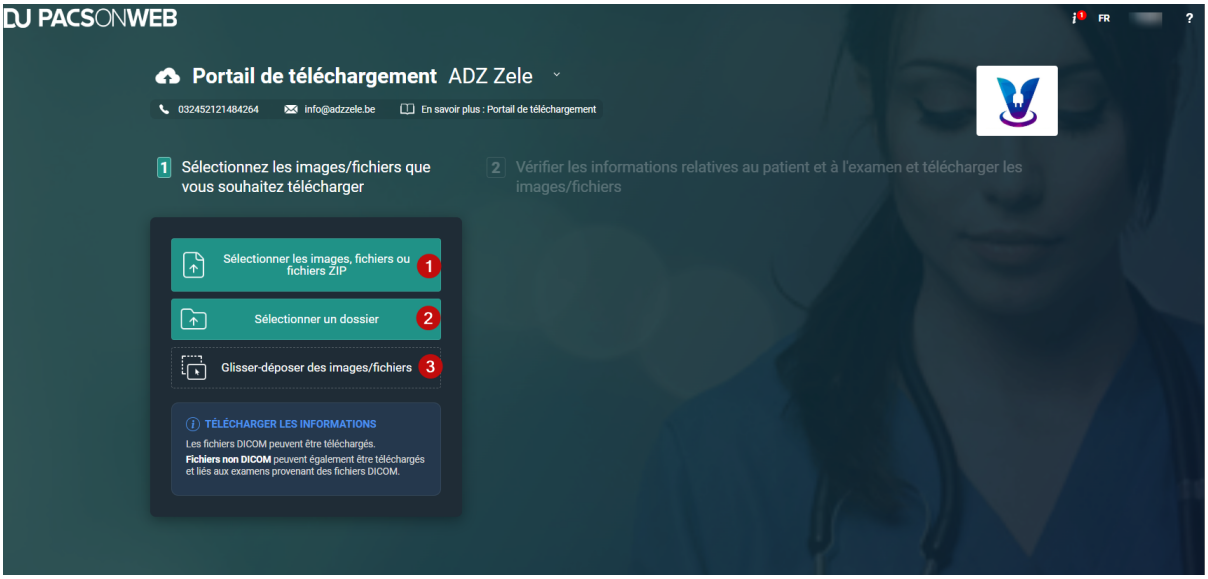

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
1	Sélectionner les images/ fichiers ou fichiers ZIP	Ce bouton permet de sélectionner une image ou plusieurs images, fichiers ou fichiers ZIP.
2	Sélectionner un dossier	Ce bouton permet de sélectionner un dossier entier.
3	Glisser-déposer des images/fichiers	Utilisez cette option de glisser-déposer pour faire glisser les images ou les fichiers sélectionnés depuis un gestionnaire de fichiers vers le portail de téléchargement.

Remarque :


Si les images, fichiers ou fichiers ZIP sélectionnés contiennent un fichier non DICOM pris en charge (pdf, png, jpg, jpeg et tif), il sera téléchargé et ajouté à cet examen.

Sélectionner les images, fichiers ou fichiers ZIP

Vous pouvez utiliser le bouton **Sélectionner des images, des fichiers ou des fichiers ZIP** pour ajouter vos images médicales et les documents connexes. Vous pouvez télécharger plusieurs images ou fichiers à la fois ou sélectionner un fichier ZIP à télécharger.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sélection de plusieurs images

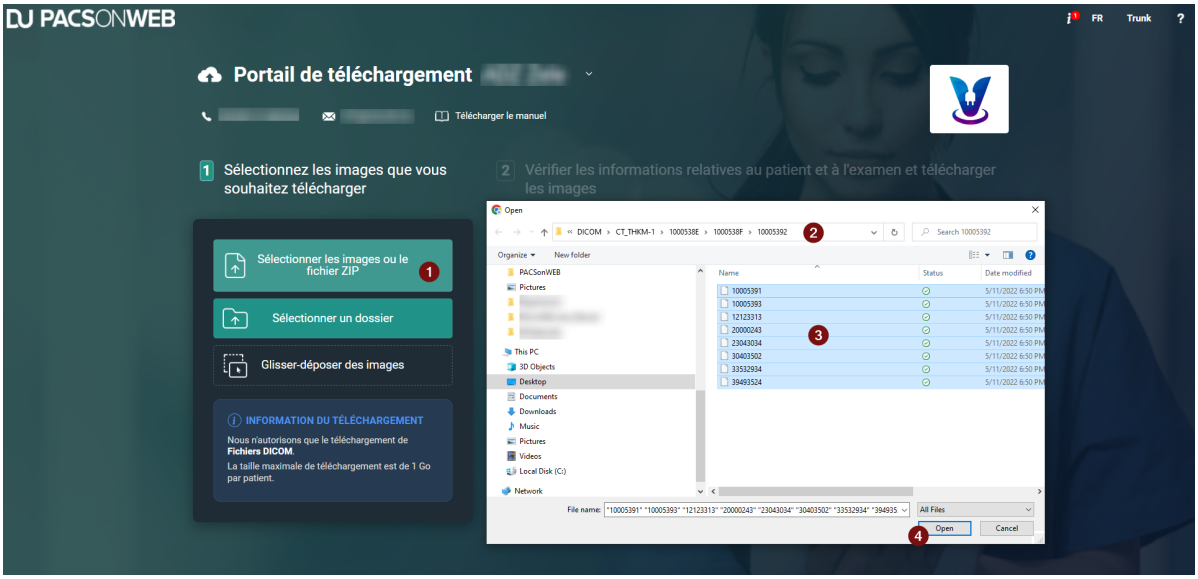

1. Cliquez sur le bouton **Sélectionner des images ou un fichier ZIP**.
2. Dans le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre, naviguez jusqu'au dossier où se trouvent vos images/fichiers.
3. Dans le dossier, sélectionnez tous les fichiers.


> **Conseil :**
>
> Vous pouvez sélectionner tous les fichiers en sélectionnant un fichier et en appuyant sur **Ctrl + A** ou en sélectionnant le premier fichier du dossier, en défilant vers le bas jusqu'à la fin des fichiers, en appuyant sur **SHIFT + souris gauche** et en cliquant sur le dernier fichier.

4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans le gestionnaire de fichiers.

Les images/fichiers sélectionnés seront ajoutés au portail de téléchargement et prêts à être vérifiés et téléchargés.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sélectionner un fichier ZIP.

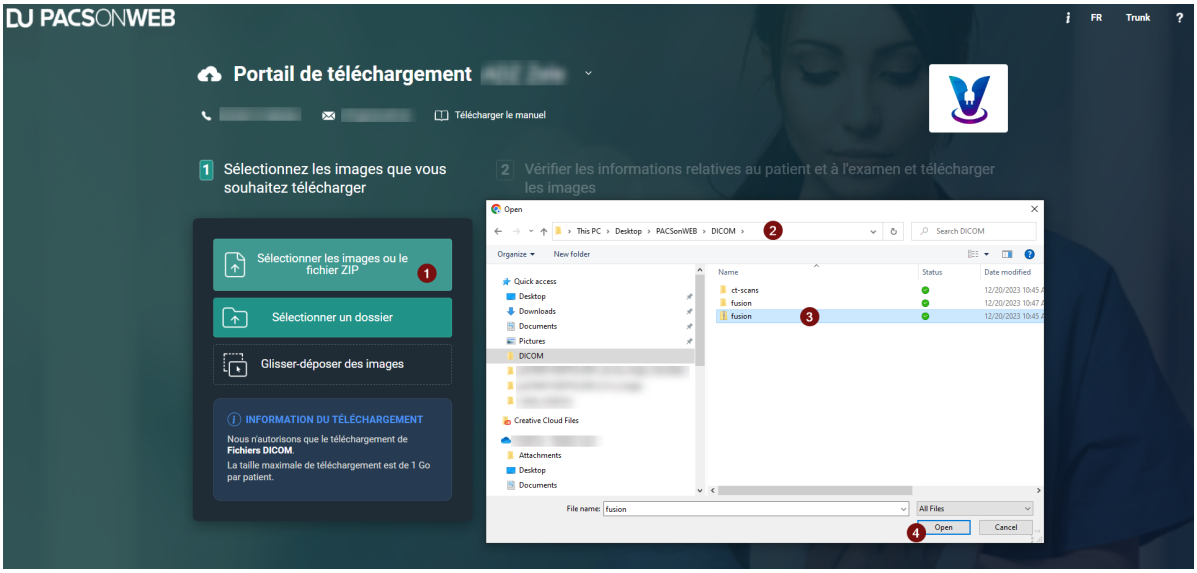


1. Cliquez sur le bouton **Sélectionner des images ou un fichier ZIP**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, naviguez jusqu'au fichier ZIP qui contient vos images.
3. Sélectionnez le fichier ZIP.
4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans la boîte de dialogue.

Les images/fichiers contenus dans le fichier ZIP seront ajoutés au portail de téléchargement. Pour terminer le téléchargement, vérifiez les informations et cliquez sur **Démarrer le téléchargement**.

Sélection d'un dossier ou d'un CD/DVD

Vous pouvez utiliser le bouton **Sélectionner un dossier** pour ajouter un dossier entier contenant vos images médicales et les documents connexes.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

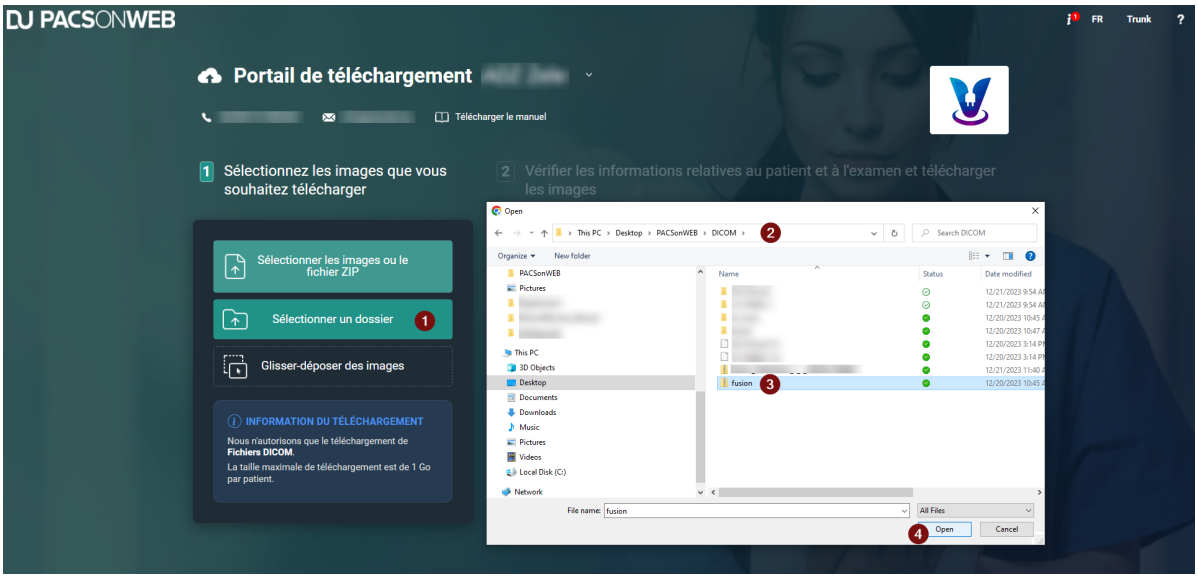

Pour sélectionner un dossier entier ou un CD/DVD à ajouter au portail de téléchargement :

1. Cliquez sur le bouton **Sélectionner un dossier**.
2. Dans le gestionnaire de fichiers, naviguez jusqu'au dossier ou au lecteur de CD/DVD où se trouvent vos images/fichiers.
3. Sélectionnez le dossier qui contient vos images
4. Cliquez sur le bouton **Télécharger** dans le gestionnaire de fichiers.

Les images/fichiers contenus dans le dossier seront ajoutés au portail de téléchargement. Pour terminer le téléchargement, vérifiez les informations et cliquez sur **Démarrer le téléchargement**.


Conseil :

Votre navigateur peut afficher un message contextuel supplémentaire lorsque vous sélectionnez un dossier. Si cela se produit, cliquez à nouveau sur **Télécharger**.

Glisser-déposer des images/fichiers

Vous pouvez glisser-déposer vos images/fichiers pour les ajouter au portail de téléchargement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

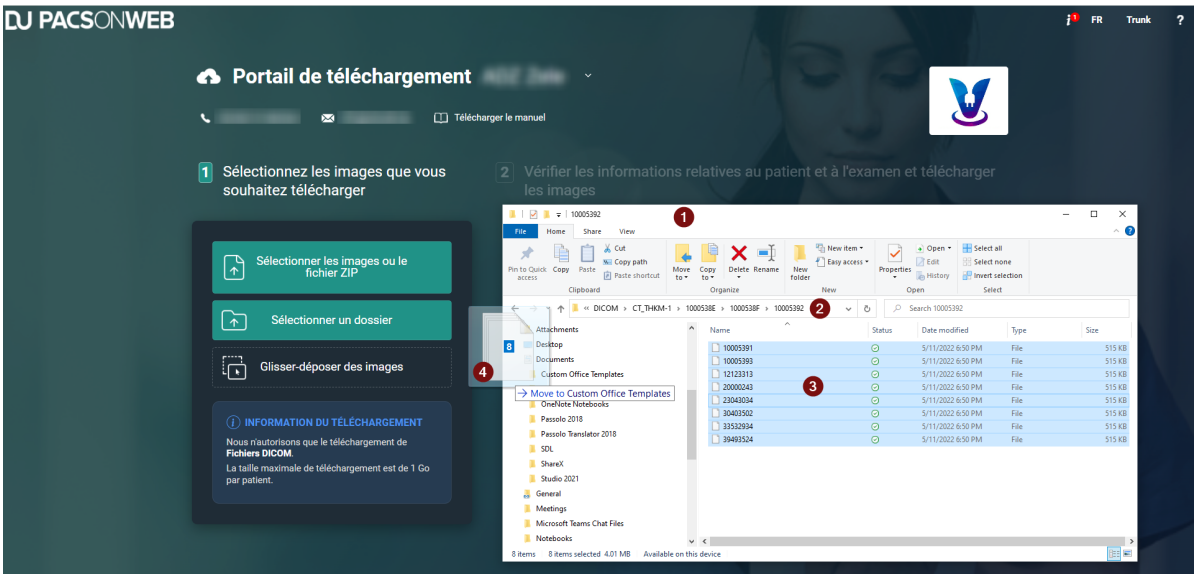

Remarque :

La fonction glisser-déposer n'est pas un bouton.

Pour sélectionner un dossier ou un CD/DVD entier :

1. Ouvrez votre gestionnaire de fichiers.
2. Naviguez jusqu'au dossier où se trouvent vos images et ouvrez le dossier.
3. Dans le dossier, sélectionnez tous les fichiers.
4. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
    a. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez votre souris vers le portail de téléchargement et relâchez le bouton de la souris.


Les images/fichiers contenus dans le dossier seront ajoutés au portail de téléchargement. Pour terminer le téléchargement, vérifiez les informations et cliquez sur **Démarrer le téléchargement**.

5.4.2 Vérifier les informations relatives au patient et à l'examen et télécharger les images/fichiers

Après avoir sélectionné vos images/fichiers, vous devez vérifier les informations relatives au patient et à l'examen avant de télécharger les images/fichiers vers le portail de téléchargement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Vue d'ensemble de la vérification et du téléchargement

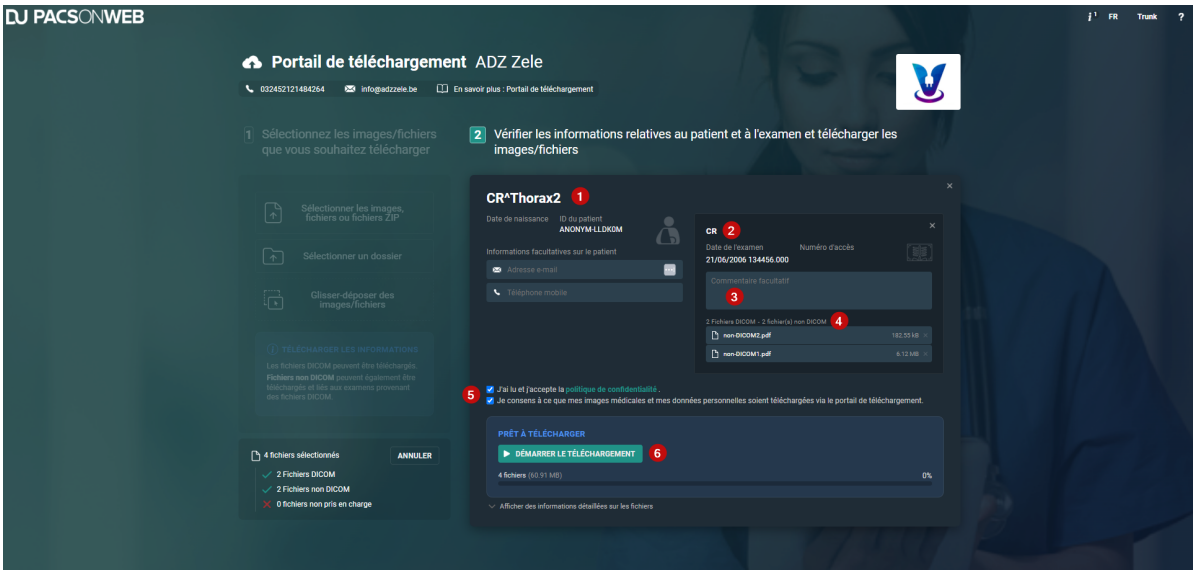

Numéro	Désignation	Description
1	Informations sur le patient	Les informations sur le patient (date de naissance, numéro d'identification du patient) des images/ fichiers sélectionnés pour le téléchargement. L'adresse électronique et le numéro de téléphone du patient sont des champs facultatifs. Ces coordonnées pourront être utilisées comme référence ou si l'hôpital a besoin de vous contacter.
2	Information sur l'examen	Les informations sur l'examen (date de l'examen, numéro d'accès).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
3	Commentaire facultatif	Vous pouvez ajouter un **commentaire facultatif** pour chaque examen que vous téléchargez. Ici, vous pouvez ajouter une raison pour télécharger l'examen spécifique ou fournir des informations supplémentaires.
4	Informations sur les documents	Affiche le nombre de fichiers DICOM et non DICOM ajoutés à l'examen.
5	Politique de confidentialité et consentement du patient	Ces champs sont obligatoires. Vous devez accepter la politique de confidentialité et consentir à partager vos images médicales et vos données personnelles avec l'hôpital via le portail de téléchargement.
6	Démarrer le téléchargement	Ce bouton lance le téléchargement. Il n'est pas disponible tant que vous n'avez pas accepté la politique de confidentialité et le consentement du patient.


Ajouter des fichiers non DICOM

Remarque :

Pour télécharger des fichiers non DICOM, il faut télécharger au moins un fichier DICOM. Un message d'erreur s'affiche si un fichier non DICOM est sélectionné sans fichier DICOM. L'ajout d'un fichier DICOM résoudra l'erreur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ajout de fichiers non DICOM à un examen unique

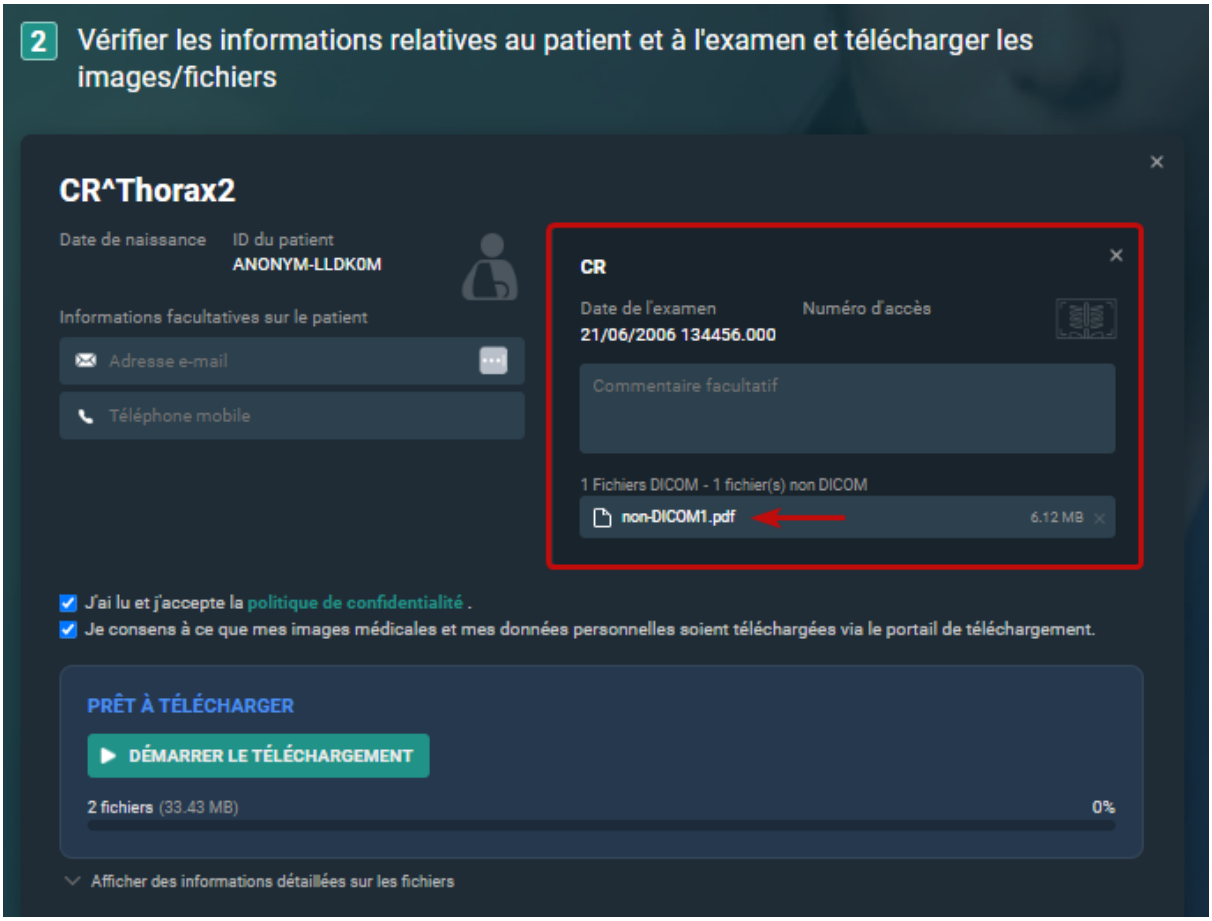


Lorsque vous téléchargez des fichiers non DICOM vers un seul examen, ils sont automatiquement associés à l'examen.

Ajout de fichiers non DICOM à des examens multiples

Lorsque vous téléchargez des fichiers non-DICOM avec plusieurs examens, les fichiers non-DICOM ne seront pas liés automatiquement aux examens. Les documents sont affichés en haut de la page et doivent être reliés manuellement à l'examen correspondant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

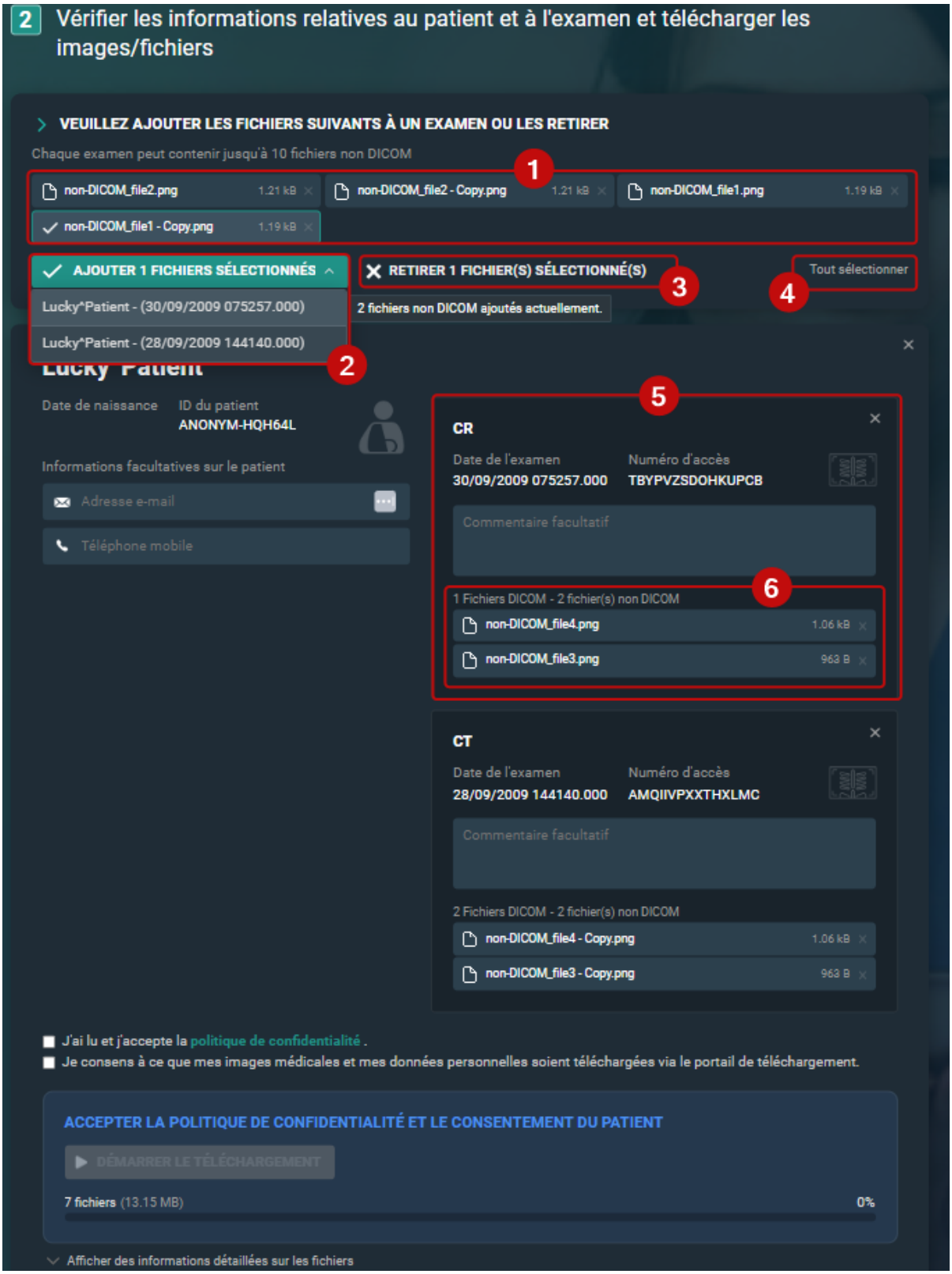

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
1	Veuillez ajouter les fichiers suivants à un examen ou les retirer	Les fichiers non-DICOM qui ont été ajoutés au portail de téléchargement, mais qui ne sont pas encore liés à un examen, sont affichés ici. Pour que ces fichiers soient téléchargés, ils doivent être ajoutés à un examen ou retirés. Cliquez sur un fichier pour le marquer comme sélectionné. L'icône passe d'un document à une coche. Le nombre de fichiers non-DICOM sélectionnés est affiché dans la liste déroulante **Ajouter les fichiers sélectionnés à l'examen**.
2	Fichiers non DICOM sélectionnés pour être ajoutés à un examen	Cette liste déroulante énumère les examens disponibles auxquels les fichiers non-DICOM peuvent être ajoutés. En cliquant sur un examen dans la liste déroulante, le fichier non-DICOM sélectionné est ajouté à l'examen (visible dans la section des informations sur l'examen) et retiré de la liste des fichiers non-DICOM non attribués. Répétez le processus d'ajout des fichiers non

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
		DICOM à un examen jusqu'à ce que tous les fichiers non DICOM aient été ajoutés à un examen ou supprimés et que l'en-tête **Veuillez ajouter les fichiers suivants à un examen ou les retirer** ait disparu du panneau 2.
3	Retirer les fichiers sélectionnés	Vous pouvez supprimer les fichiers sélectionnés du portail de téléchargement en cliquant sur **Retirer le(s) {0} fichier(s) sélectionné(s)**. Pour supprimer tous les fichiers en même temps, cliquez sur **Sélectionner tout**, puis sur **Retirer le(s) {0} fichier(s) sélectionné(s).**
4	Sélectionner tout / Désélectionner tout	Ce bouton permet de sélectionner tous les fichiers non DICOM. Une fois que tous les fichiers sont sélectionnés, vous pouvez : ● Retirer tous les fichiers du portail de téléchargement. ● Ajouter tous les fichiers à un examen en utilisant le menu déroulant. Si tous les fichiers ont été sélectionnés, ce bouton

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
		devient **Désélectionner tout.**
5	Examen	Le panneau de l'examen affiche des informations sur l'examen. Les fichiers non-DICOM ajoutés à l'examen sont également listés.
6	Informations sur les fichiers	Les fichiers non DICOM liés avec succès à l'examen sont affichés dans le panneau de l'examen. Le nombre de fichiers DICOM et non DICOM ajoutés à l'examen est indiqué.

Comment sélectionner et ajouter des fichiers non DICOM à un examen spécifique ?

1. Sous **Veuillez ajouter les fichiers suivants à un examen ou les retirer**, cliquez sur les fichiers non DICOM souhaités pour les marquer comme sélectionnés.
2. Cliquez sur la liste déroulante **Ajouter x fichiers sélectionnés à l'examen** et sélectionnez l'examen souhaité.
   a. Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les fichiers non DICOM aient été ajoutés à un examen ou retirés.
3. Passez aux instructions de vérification et de téléchargement.

Pour télécharger les images/fichiers sélectionnés

1. Vérifier les informations sur le patient :
   a. Vérifiez que vous avez ajouté le bon patient au portail de téléchargement.
   b. En option, entrez votre adresse électronique personnelle ou votre numéro de téléphone portable.
2. Vérifier les informations relatives à l'examen :
   a. Vérifiez que vous avez ajouté le bon examen au portail de téléchargement.
   b. En option, ajoutez un **commentaire facultatif** pour chaque examen que vous téléchargez.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

c. Examinez les documents liés à l'examen ou ajoutez des fichiers non DICOM supplémentaires.

3. Acceptez la politique de confidentialité et consentez à partager vos images médicales et vos données personnelles avec l'hôpital via le portail de téléchargement.
4. Cliquez sur le bouton **Commencer le téléchargement**.

Important !

Ne fermez pas votre navigateur pendant le téléchargement.

Résultat : L'état **Téléchargement** s'affiche. Une fois le téléchargement terminé, un message de réussite s'affiche et vous avez la possibilité de commencer un nouveau téléchargement.

Remarque :

Les numéros d'accès et les identifiants des patients seront anonymisés lors du téléchargement. Il s'agit d'éviter les incohérences dans DeepUnity PACSonWEB

Statuts du téléchargement de fichiers

- **Téléchargement** : le téléchargement est en cours. Au cours de ce processus, vous pouvez interrompre ou annuler le téléchargement.
  - **Pause téléchargement** : cliquez sur ce bouton pour interrompre le téléchargement.
  - **Reprendre téléchargement** : cliquez sur ce bouton pour reprendre un téléchargement interrompu.
  - **Annuler le téléchargement** : cliquez sur ce bouton pour annuler le téléchargement.

Remarque :

Cliquez sur **réinitialiser** ou **commencer un nouveau téléchargement** pour revenir à la page principale et commencer un nouveau téléchargement.

- **Validation des fichiers** : Le portail de téléchargement recherche des logiciels malveillants. Nous effectuons une recherche de logiciels malveillants dans les images afin de nous assurer qu'aucun virus susceptible d'infecter l'hôpital ou l'institution n'a été téléchargé.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- **Téléchargement réussi** : Le téléchargement est terminé. Tous les fichiers ont été téléchargés avec succès vers l'hôpital/l'institution.
- **Démarrer un nouveau téléchargement** : Après un téléchargement réussi, vous pouvez commencer un nouveau téléchargement en cliquant sur **Démarrer un nouveau téléchargement**.

Une fois que le message **Téléchargement réussi** apparaît dans le panneau, vous pouvez fermer le navigateur en toute sécurité ou commencer un nouveau téléchargement.

Voir aussi

Restrictions et messages d'erreur (Page 102)

Sélection des images/fichiers médicaux à télécharger (Page 88)

5.4.3 Restrictions et messages d'erreur

Le portail de téléchargement présente certaines limites.

- Les fichiers non DICOM ne peuvent pas être téléchargés sans fichier DICOM.
- Les fichiers non DICOM doivent être liés à un examen.
- Un maximum de 10 fichiers DICOM peut être téléchargé en même temps.
- La limite de téléchargement de fichiers est configurée par l'hôpital.

Le tableau ci-dessous répertorie les messages d'erreur possibles que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du portail de téléchargement, ainsi que leur description et leur solution.

Message d'erreur	Description	Solution
Vous ne pouvez télécharger des fichiers non DICOM que si vous téléchargez aussi au moins un fichier DICOM	Le portail de téléchargement exige que les fichiers non DICOM soient téléchargés avec au moins un fichier DICOM. Ce message d'erreur s'affiche si vous tentez d'ajouter un fichier non DICOM sans fichier DICOM.	Vous n'avez pas besoin de réinitialiser ou de recommencer depuis le début, il vous suffit de sélectionner un fichier DICOM à télécharger. Les fichiers non DICOM seront automatiquement liés au fichier DICOM nouvellement ajouté, ce qui vous permettra de commencer votre téléchargement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Message d'erreur	Description	Solution
La taille totale du fichier dépasse la limite	Le nombre de fichiers téléchargés peut être limité par l'hôpital. La quantité de fichiers (en Go) est limitée par session. Cette limite est configurée par l'hôpital/ institution et se situe entre 0 et 10 Go. Si vous dépassez cette limite, vous devrez retirer des examens du portail de téléchargement jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre maximal de Go souhaité.	Si vous avez plusieurs examens qui dépassent la limite, demandez un nouveau code de téléchargement pour télécharger le reste des examens. Si un examen dépasse la limite, l'hôpital/institution devra autoriser des examens plus importants.
Veuillez ajouter les fichiers suivants à un examen ou les retirer	Les fichiers non DICOM doivent être liés à un examen. Lorsque plusieurs examens DICOM sont ajoutés au portail de téléchargement, les fichiers non DICOM ne peuvent pas être automatiquement liés. Vous devrez lier manuellement les fichiers non DICOM à un examen.	Sélectionnez les fichiers en cliquant dessus. L'icône de ce document se transforme en icône de coche. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à lier à un examen. Cliquez sur le bouton **Ajouter {0} fichiers sélectionnés à l'examen**. Sélectionnez l'examen souhaité dans la liste déroulante. Les fichiers non DICOM seront ajoutés à l'examen spécifié et ne seront plus affichés au-dessus de l'examen.
'x' fichiers non DICOM ajoutés actuellement	Il n'est pas possible d'ajouter plus de	Pour procéder au téléchargement, réduisez

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Message d'erreur	Description	Solution
L'ajout de ces fichiers dépasserait le maximum de 10 fichiers non DICOM pouvant être ajoutés à un examen.	10 fichiers non-DICOM à un examen. Si plusieurs examens DICOM ont été ajoutés au portail de téléchargement et qu'un ou plusieurs fichiers non DICOM ont été ajoutés, tous les fichiers non DICOM doivent être liés à un examen ou retirerés.	le nombre de fichiers non DICOM sélectionnés à 10.

Voir aussi

Sélection des images/fichiers médicaux à télécharger (Page 88)

Vérifier les informations relatives au patient et à l'examen et télécharger les images/fichiers (Page 93)

5.4.4 Utilisation du portail de téléchargement en tant qu'utilisateur de la source/administrateur de la source

En tant qu'utilisateur/administrateur de source DeepUnity PACSonWEB, vous pouvez accéder aux examens téléchargés avec succès via la liste de travail ou la liste d'examens.

- Tous les examens téléchargés porteront la mention **Téléchargés**.
- Les fichiers non DICOM qui ont été téléchargés seront ajoutés aux examens et se trouveront dans l'onglet **Documents.**

Numéros d'accès et identifiants des patients

Restriction :

Vous **ne pouvez pas** rechercher un examen par le **Numéro d'accès** ou l'**ID du patient** car ces champs ont été anonymisés lors du téléchargement.

Les numéros d'accès et les identifiants des patients ne sont pas générés par DeepUnity PACSonWEB, mais par les hôpitaux. Étant donné que le portail de téléchargement reçoit des examens provenant de différents hôpitaux et régions, nous ne pouvons pas garantir qu'un numéro d'accession ou un numéro d'identification de patient est unique et ne peut donc pas être utilisé pour relier

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

automatiquement un examen à un patient. Pour éviter les anomalies et les examens non concordants, tous les examens téléchargés sur le portail de téléchargement sont anonymisés.

Remarque :

Anonymisation et regroupement des données d'ID patients

- Pendant le téléchargement, tous les ID patients sont automatiquement rendus anonymes.
- Tous les examens appartenant au même patient initial se voient attribuer le même numéro d'identification anonyme.

Un patient, des examens différents liés à des demandes différentes

Si plusieurs examens liés à des demandes différentes sont téléchargées pour le même patient au cours d'une session, ils ne sont pas regroupés, mais répertoriés comme des demandes différentes avec un seul numéro d'ID patient.



Un patient, différents examens liés à la même demande

Si plusieurs examens liés à la même demande sont téléchargés pour le même patient au cours d'une session, ils sont regroupés et affichés comme une seule demande avec un seul numéro d'ID patient.



Ce processus devrait inciter l'administrateur de la source à lier les examens au bon patient via la fusion des patients afin de les rendre disponibles en tant qu'examens antérieurs.

Filtrage des examens téléchargés via le portail de téléchargement

Vous pouvez filtrer tous les examens qui ont été téléchargés via le portail de téléchargement.

1. Cliquez sur **Contient des labels** dans le panneau des filtres.
2. Sélectionnez **Téléchargé** dans la liste déroulante ou saisissez-le en tant que texte.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

L'état du flux de travail des examens téléchargés est automatiquement réglé sur **Finalisé** pour éviter d'encombrer la liste de travail de lecture des radiologues.

Informations dans la visionneuse

Dans le sélecteur de série, les examens qui ont été téléchargées via le portail de téléchargement sont indiqués par une icône de nuage .

En survolant l'icône, une info-bulle s'affiche et contient les informations suivantes :

- Si l'examen a été téléchargé par un utilisateur ou via un code de téléchargement (patient/médecin référent).
  - Si le contenu est téléchargé par un utilisateur, l'adresse électronique de l'utilisateur est affichée.
  - Si l'examen a été téléchargé par un patient ou un médecin référent, le code de téléchargement est affiché.
- La date et l'heure du téléchargement (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)
- S'il a été ajouté pendant le téléchargement, tout commentaire.

Les mêmes informations se trouvent également dans le **panneau d'information sur l'examen**, dans le champ **Examen téléchargé**.

Propriétés supplémentaires

- Document(s)
  - Comme tout autre document reçu par DU POW, ils peuvent être consultés dans l'onglet Documents.
- Commentaire(s)
  - Les commentaires sont visibles aux endroits suivants dans DU POW :
    - **Sélecteur de série :** Survolez l'icône Téléchargé.
    - **Panneau d'informations sur l'examen :** Se trouve dans le champ de l'examen téléchargé.
    - **DICOM tag 0032,4000 StudyComments :** Cela permet de s'assurer que le(s) commentaire(s) est (sont) envoyé(s) lors du transfert de l'examen.

Vérification du contenu de l'examen téléchargé

En tant qu'administrateur de source DeepUnity PACSonWEB, vous pouvez modifier l'étiquette liée à un examen téléchargé.

Vous pouvez retirer l'étiquette **Téléchargé** et lier la nouvelle étiquette **Téléchargé-vérifié**. Cette fonction est disponible par défaut dans le système.

En outre, l'ensemble des options pour les autres examens dans DeepUnity PACSonWEB sont disponibles ici également, par exemple la fusion avec un patient existant, ou le transfert DICOM de l'examen vers un autre système PACS.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Transfert automatique des examens téléchargés

Remarque :

Cette fonction doit être configurée par un administrateur général. Pour activer cette fonction, veuillez contacter DH Healthcare GmbH.

Si le paramètre Source **AutoTransferUploadedStudiesToPacs** est activé, les examens téléchargés seront automatiquement transférés vers le serveur QR dont le paramètre **Auto-transfer Uploaded studies** est activé.

Voir aussi

Information de l'examen (Page 259)
sélecteur de série (Page 215)
Utilisation des filtres (Page 78)

5.5 Paramètres utilisateur

Depuis les paramètres utilisateur, vous pouvez :


- modifier vos informations d'utilisateur
- ajoutez des favoris à votre liste
- gérer vos groupes
- gérer vos appareils liés pour l'authentification à deux facteurs

Pour accéder à la page **Paramètres de l'utilisateur** :

1. En haut à droite de la page, passez sur l'engrenage .
2. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.


En cliquant sur votre nom d'utilisateur dans le menu supérieur, vous accéderez également aux paramètres de l'utilisateur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

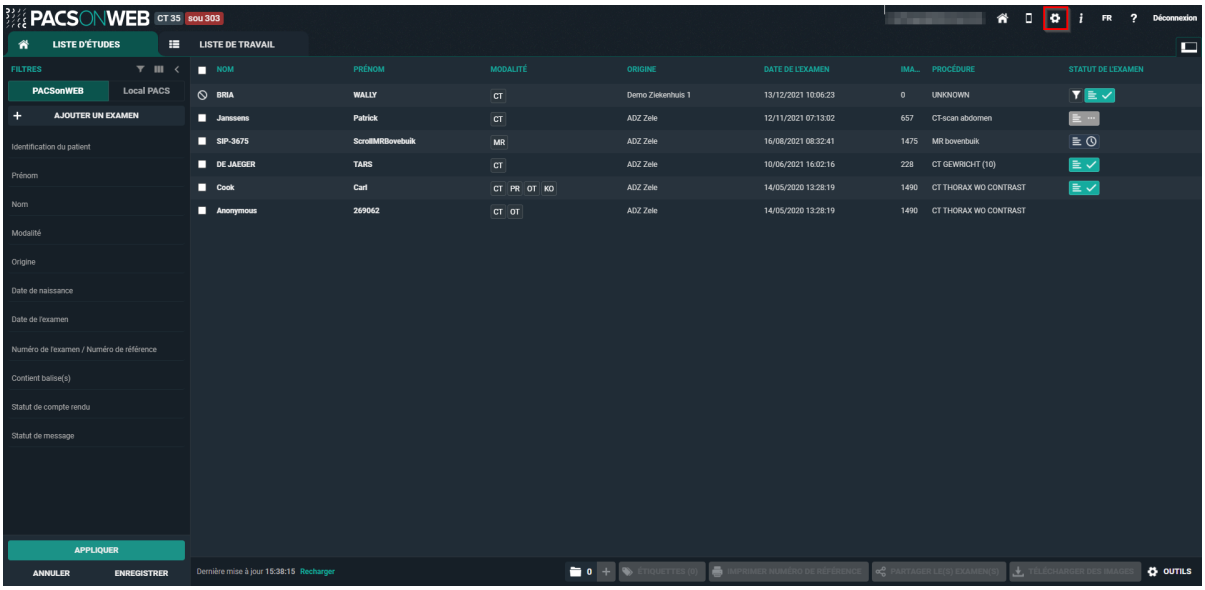

Il existe plusieurs façons de revenir à la page d'aperçu à partir des **Paramètres utilisateur** :

- Cliquez sur **Aperçu** dans le coin supérieur gauche.
- En haut à droite de la page, cliquez sur l'icône maison .
- Cliquez sur le logo DeepUnity PACSonWEB en haut à gauche.

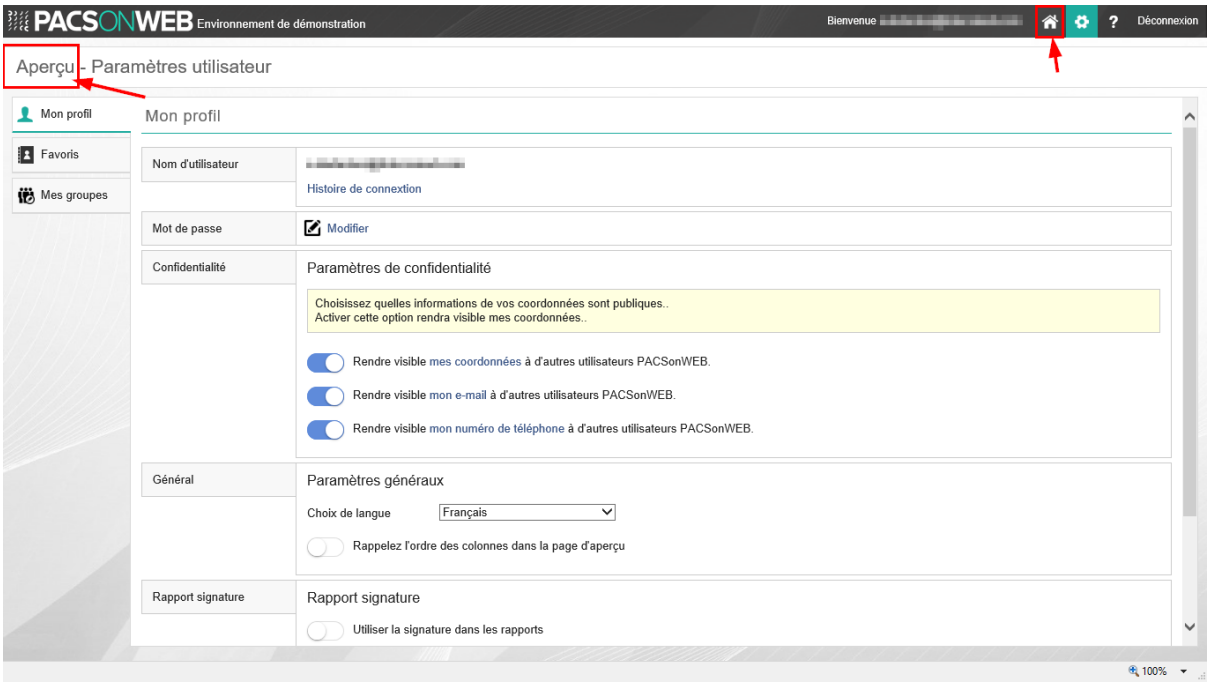

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5.5.1 Mon compte

Cliquez sur l'engrenage dans le coin supérieur droit de la page et vous serez redirigé vers **Paramètres utilisateur**.

Cette page vous permet de consulter les informations relatives à votre compte.

Paramètres personnels

Champ	Description
***Nom d'utilisateur**	Votre nom d'utilisateur est votre adresse e-mail
Histoire de connexion	Affiche une vue d'ensemble des 100 dernières tentatives de connexion
Sexe	Utilisé pour s'adresser correctement dans les e-mails automatisés
***Numéro(s) de médecin**	Numéros du ou des médecins, liés au compte
***Téléphone mobile**	Utilisé pour envoyer des messages OTP pour l'activation, la réinitialisation du mot de passe et l'authentification forte
Téléphone de travail	Peut être utilisé pour vous contacter en cas de problème

Conseil :

Les champs identifiés par * sont en lecture seule. Pour modifier , veuillez contacter le service desk.


Sécurité

Modification du mot de passe

Si votre compte n'est pas lié à un domaine avec Active Directory, vous pouvez changer votre mot de passe en cliquant sur le bouton **Modifier**.

Si vous disposez d'une intégration Active Directory pour votre domaine, cette option ne sera pas visible et vous devrez contacter votre administrateur de domaine pour changer votre mot de passe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

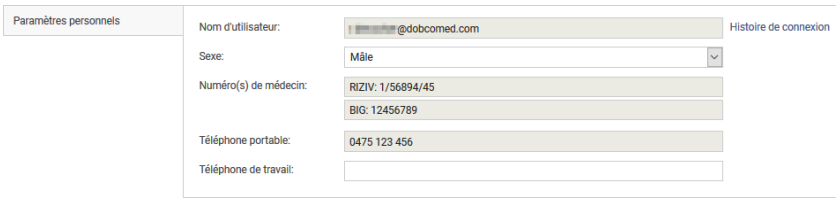

Pour modifier votre mot de passe :


1. Cliquez sur **Modifier**.
2. Saisissez votre ancien mot de passe et saisissez deux fois votre nouveau mot de passe dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier le mot de passe**.

Après avoir cliqué sur **Modifier le mot de passe**, votre ancien mot de passe ne fonctionnera plus et vous devrez toujours saisir votre nouveau mot de passe.

Permettre l'authentification à deux facteurs

Pour une meilleure sécurité, vous pouvez activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte.

Pour plus d'informations, consulter Authentification à deux facteurs (Page 55)

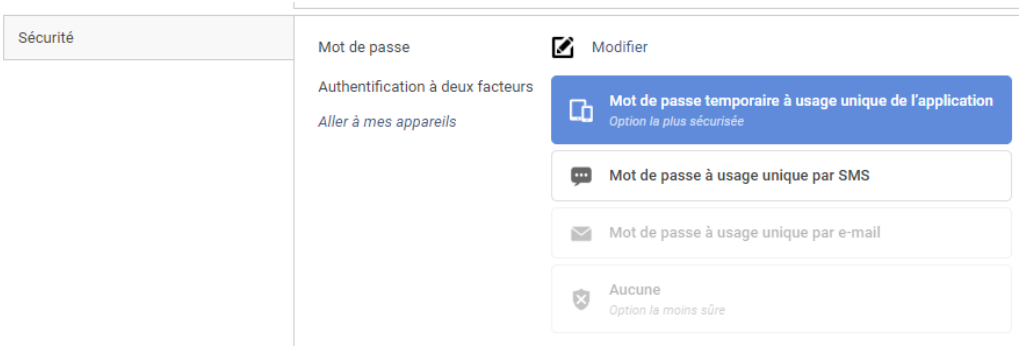

Si l'authentification forte est obligatoire dans votre région, vous devez sélectionner une méthode d'authentification à 2 facteurs. Dans ce cas, l'option **None** (Aucune) ne sera pas disponible.

Paramètres de confidentialité

Ici, vous pouvez déterminer quelles informations seront rendues publiques sous **Favoris**.

- **Rendre mes coordonnées visibles pour les autres utilisateurs de DeepUnity PACSonWEB** : Si elle est activée,

  seuls votre nom et votre numéro RIZIV seront visibles lorsqu'un utilisateur vous recherchera à l'aide du bouton **Trouver des utilisateurs** sous l'onglet **Favoris**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Ce paramètre est activé par défaut.

- **Rendre mon adresse e-mail visible pour les autres utilisateurs de DeepUnity PACSonWEB** : Si cette option est activée, votre adresse électronique sera visible.
- **Rendre visible mon numéro de téléphone à d'autres utilisateurs de DeepUnity PACSonWEB** : Si cette option est activée, votre numéro de téléphone portable sera visible.

Si tous les paramètres de confidentialité sont désactivés, votre compte ne sera pas consultable sur DeepUnity PACSonWEB.

Cliquez sur **Enregistrer les modifications** pour enregistrer vos modifications.

Mappings


Les cartes donnent un aperçu des sources sur lesquelles vous recevez automatiquement des examens, sous quel nom, ainsi que sur le numéro de médecin qui y est associé et le groupe avec lequel ils sont partagés.

Les commutateurs situés à l'avant de chaque ligne déterminent si vous recevez automatiquement ou non un e-mail

- lorsqu'un nouvel examen est disponible pour la source en question
- lorsque le compte-rendu est disponible pour un examen de la source concernée

Le paramètre **Envoyer un e-mail en cas de nouvel examen pour les nouvelles correspondances** détermine le comportement par défaut pour recevoir un e-mail lorsque des examens avec des images sont disponibles pour une nouvelle source.


Le paramètre **Envoyer un e-mail sur la disponibilité du compte-rendu pour les nouvelles correspondances** détermine le comportement par défaut pour recevoir un e-mail lorsque des examens avec un compte-rendu sont disponibles pour une nouvelle source.

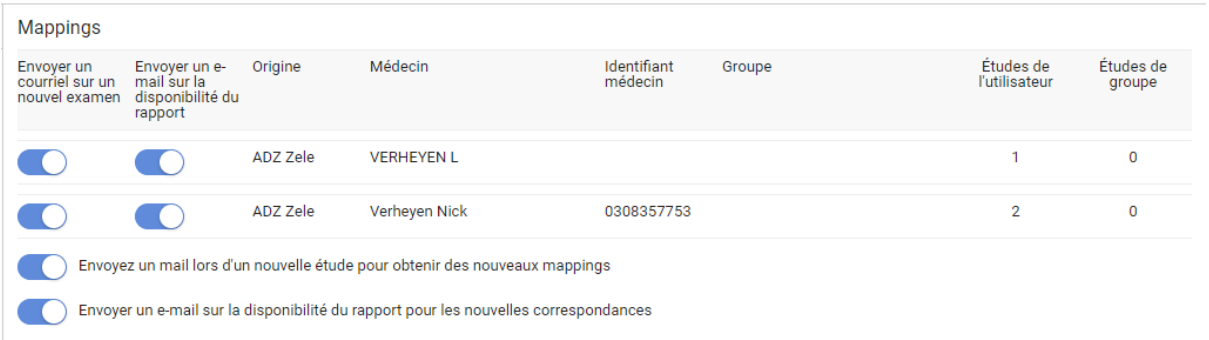

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5.5.2 Préférences

Paramètres généraux

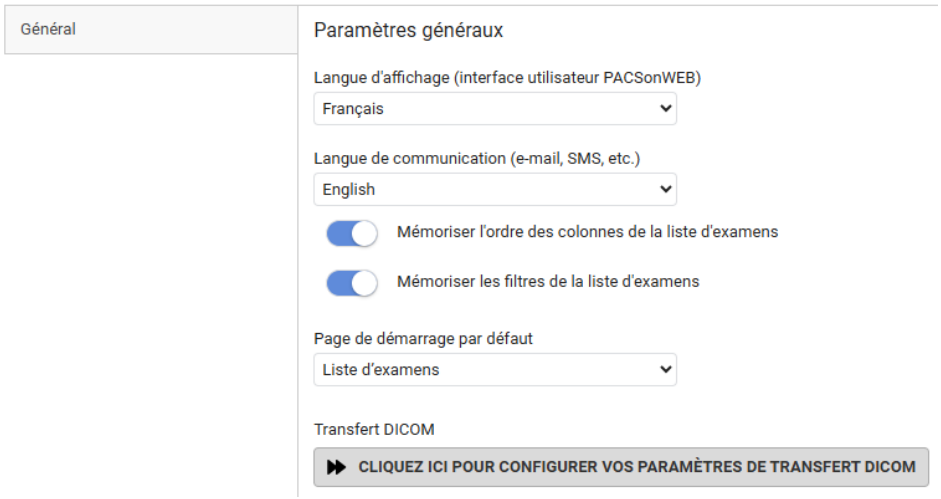


Vous pouvez personnaliser les paramètres généraux suivants :

Paramètre	Description
Langue d'affichage (interface utilisateur DeepUnity PACSonWEB)	Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur dans la liste déroulante. La langue de votre navigateur est utilisée par défaut lors de la première connexion. Si la langue de votre navigateur n'est pas une langue prise en charge par DeepUnity PACSonWEB, la langue par défaut est l'anglais.
Langue de communication (e-mail, SMS, etc.)	Sélectionnez la langue des communications que vous recevez.
Mémoriser l'ordre des colonnes de la liste d'examens	Activez ce paramètre pour enregistrer le tri des colonnes de la liste d'examens (Configurer la liste d'examens (Page 73)).
Mémoriser les filtres de la liste d'examens	Activez ce paramètre pour mémoriser les filtres de la liste d'examens.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Paramètre	Description
Page de démarrage par défaut	Ce paramètre détermine si l'utilisateur est redirigé vers la liste d'examens ou la liste de travail après avoir effectué l'une des actions suivantes : • Se connecter à DeepUnity PACSonWEB • Cliquer sur le bouton d'aperçu • Cliquer sur le logo DeepUnity PACSonWEB **Remarque :** Si la page de démarrage par défaut est définie sur **Liste de travail** alors que l'utilisateur n'a pas l'autorisation d'accéder à la liste de travail, il est redirigé vers la liste d'examens à la place.
Paramètres de transfert DICOM	Voir Transfert DICOM (Page 122) pour une explication détaillée.

Paramètres du visualiseur

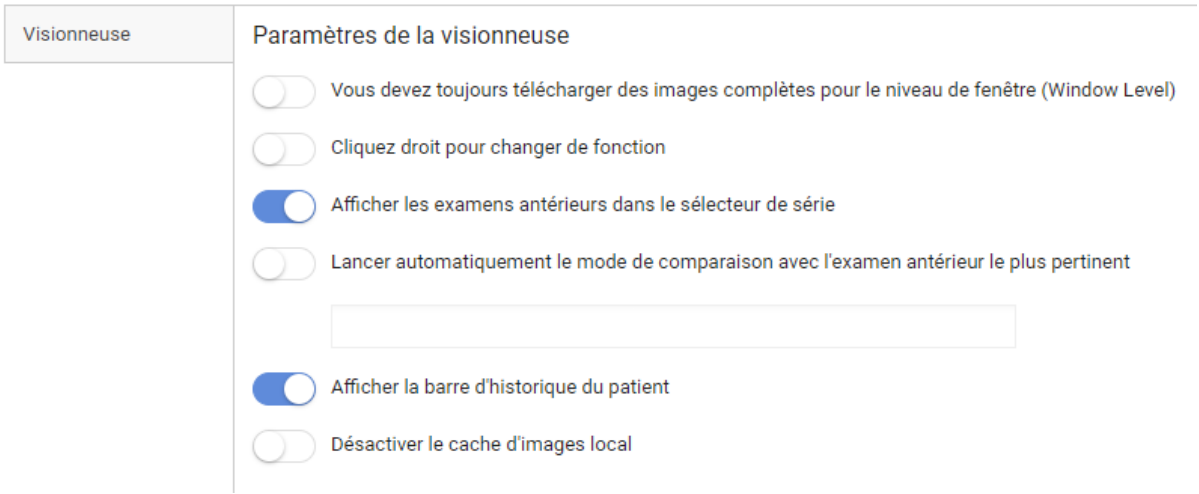


Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants du visualiseur :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Paramètre	Description
Vous devez toujours télécharger des images complètes pour le niveau de fenêtre (Window Level)	Si cette option est activée, la page de l'examen chargera par défaut les images complètes en 16 bits, au lieu des images en échelle de gris de 8 bits. Cela vous permet d'utiliser instantanément la fonctionnalité du niveau de la fenêtre.
Cliquez droit pour changer de fonction	Lorsque cette option est permise, vous pouvez passer d'une fonctionnalité à l'autre en cliquant avec le bouton droit de la souris : ● Niveau de la fenêtre ● Défilement ● Stepless zoom ● Panoramique Pour plus d'informations : Écran d'affichage d'images (Page 310)
Afficher les examens antérieurs dans le sélecteur de série	Lorsque cette option est permise, tous les examens antérieurs pour le patient actuel qui vous sont accessibles seront automatiquement mis à disposition dans le sélecteur de série.
Afficher des examens pertinents dans une section distincte du sélecteur de série	Lorsque cette option est permise, trois sections sont disponibles : ● Examen courant, examens pertinents et autres examens. Lorsque cette option est désactivée, deux sections sont disponibles : ● Examen courant et autres examens. Les deux options trient les examens dans l'ordre chronologique.
Lancer automatiquement le mode de comparaison avec l'examen antérieur le plus pertinent	Cette option n'est disponible que si l'option **Afficher les examens antérieurs dans le sélecteur de série** a été activée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

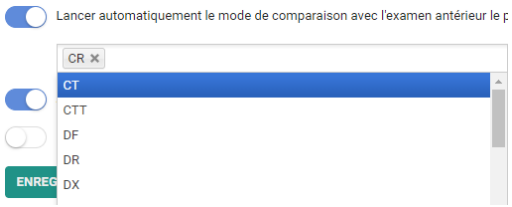Paramètre	Description
	• Lors de l'ouverture d'un examen, l'examen en cours et l'examen antérieur le plus pertinent seront ouverts automatiquement en mode de comparaison. • Vous pouvez choisir de le faire uniquement pour une sélection de types de modalités ou, dans le cas où aucun type de modalité spécifique n'a été sélectionné, cela sera appliqué pour tous les types de modalités. 
Afficher la barre d'historique du patient	Lorsque cette option est permise, la barre d'historique du patient s'affiche en bas. Voir Histoire (Page 211) pour plus d'informations.
Désactiver le cache d'images local	Votre établissement peut utiliser l'option Mémoire cache locale des images (Page 206) pour rendre les images disponibles plus rapidement au sein du réseau local. Si vous utilisez DeepUnity PACSonWEB en dehors du réseau local, le cache d'images local n'est pas accessible, il est donc préférable de désactiver cette option.
Publier automatiquement de nouvelles annotations	Lorsque cette option est permise, toutes les annotations ajoutées sont publiées immédiatement et sont visibles par toute personne ayant accès à l'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Paramètre	Description
Normaliser le niveau de la fenêtre à l'intérieur de la série	Lorsque cette option est activée, le niveau de fenêtre est appliqué à l'ensemble de la série, même si chaque image de la série a un niveau de fenêtre différent. Elle peut être appliquée manuellement ou par le biais de préréglages au niveau de la fenêtre. Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsqu'il est désactivé, le niveau de la fenêtre n'est appliqué qu'à l'image en question, et non à l'ensemble de la série.
Configuration des touches de raccourci personnelles	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'onglet et configurer vos touches de raccourci personnelles. Pour obtenir une explication détaillée de la manière de procéder : Configuration des touches de raccourci personnelles (Page 120)

Actions par défaut de la souris

Les actions par défaut de la souris peuvent être personnalisées pour chaque type de modalité.

Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier l'action par défaut pour le type de modalité répertorié. 

Cliquez sur l'icône plus pour ajouter l'action par défaut de la souris pour un nouveau type de modalité. 

Les 4 actions qui peuvent être choisies sont :

- Panoramique
- Défilement
- Stepless zoom
- Contraste/brillance

Lorsque vous avez terminé de personnaliser les actions de la souris, cliquez sur **Enregistrer les paramètres de la visionneuse**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

Pour rétablir les valeurs initiales par défaut, cliquez sur l'icône de l'engrenage 

Établissement de comptes-rendus

Paramètre	Description
Paramètres	Ce paramètre émet un bip sonore lors du basculement en reconnaissance vocale. Le bip n'est jamais enregistré dans le fragment audio.  **Émettre un son lors du basculement en reconnaissance vocale.**
Mise en forme du style	Vous pouvez prédéfinir la mise en forme de 6 niveaux d'en-tête différents qui peuvent être utilisés lors de la création d'un compte-rendu.
Signature du compte rendu **Important !** Cette fonction ne s'applique que si vous avez l'autorisation de modifier le compte-rendu dans DeepUnity PACSonWEB.	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

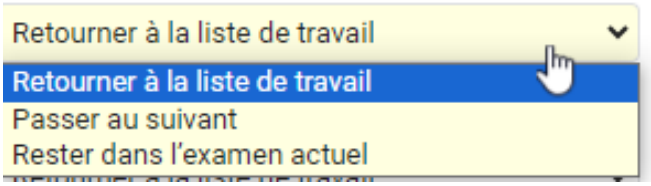Paramètre	Description
	Remarque : L'image de la signature doit être une signature sombre et très contrastée sur un fond entièrement blanc. Si vous modifiez un compte-rendu dans DeepUnity PACSonWEB, votre signature apparaît automatiquement lorsque vous cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et valider**.
Flux de travail	 Action par défaut sur « enregistrer le compte-rendu préliminaire » Cela déterminera ce qui se passe après l'enregistrement d'un compte-rendu préliminaire. Action par défaut sur le compte-rendu « Terminé » Cela déterminera ce qui se passe après l'enregistrement d'un compte-rendu : **Enregistrer et valider**, **Envoyer pour correction**, **Envoyer pour révision**, **Envoyer pour approbation** ou **Renvoyer à l'auteur**.

Comportement des paramètres du flux de travail :

- Enregistrer comme brouillon : **reste toujours dans l'examen**
- Enregistrer comme préliminaire : suivre le paramètre d'action par défaut pour le compte-rendu préliminaire (voir les exceptions ci-dessous)
- Enregistrer comme finalisé : suivre le paramètre d'action par défaut pour les comptes rendus finis (voir les exceptions ci-dessous)

  Exceptions :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Si les paramètres de l'utilisateur sont Rester dans l'examen en cours : toujours **rester dans l'examen**
- Si le paramètre utilisateur est réglé sur Retour à la liste de travail :
  - Si l'utilisateur n'utilise pas de sélection : toujours **revenir à la liste de travail**
  - Si l'utilisateur utilise une sélection : passer à l' **élément suivant de la sélection**
  - Sauf s'il s'agit de la dernière étude de la sélection : **retour à la liste de travail**
- Si le réglage de l'utilisateur est Passer au suivant :
  - Si l'étude n'est pas la dernière étude de la sélection : passer à l' **étude suivante de la sélection**
  - Si l'étude est la dernière étude de la sélection : **retour à la liste de travail**

Activer les raccourcis de compte rendu même lorsque le compte rendu n'est pas modifiable :

- Lorsqu'ils sont activés, les raccourcis pour l'enregistrement des comptes rendus F8, Ctrl + F8 ... (Voir Flux de travail de lecture (Page 360)) peuvent être utilisés pour modifier le statut de l'examen lorsque le compte rendu n'est pas en mode Édition.

Présélections personnalisées au niveau fenêtre :

Les utilisateurs peuvent créer des présélections personnelles au niveau de la fenêtre en fonction du type de modalité.

Les paramètres suivants doivent être remplis pour créer une présélection :

- Nom de la présélection
- Sélection de la source
- Modalité
- Largeur de la fenêtre
- Niveau de la fenêtre
- Touche de raccourci de 1 à 9

Cliquez sur l'icône plus pour ajouter la présélection + .

Lorsque la ou les présélections ont été ajoutées, cliquez sur **ENREGISTRER LES PRÉSÉLECTIONS AU NIVEAU FENÊTRE**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


5.5.2.1 Configuration des touches de raccourci personnelles

Accès à la page de configuration des touches de raccourci

Il existe deux façons d'accéder à la configuration des touches de raccourci personnelles.

1. Dans la section de visualisation, comme indiqué dans Préférences (Page 112).
2. En passant sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure et en cliquant sur **Raccourcis clavier** dans la liste déroulante.

Un nouvel onglet s'ouvre, dans lequel toutes les touches de raccourci sont répertoriées et peuvent être configurées.

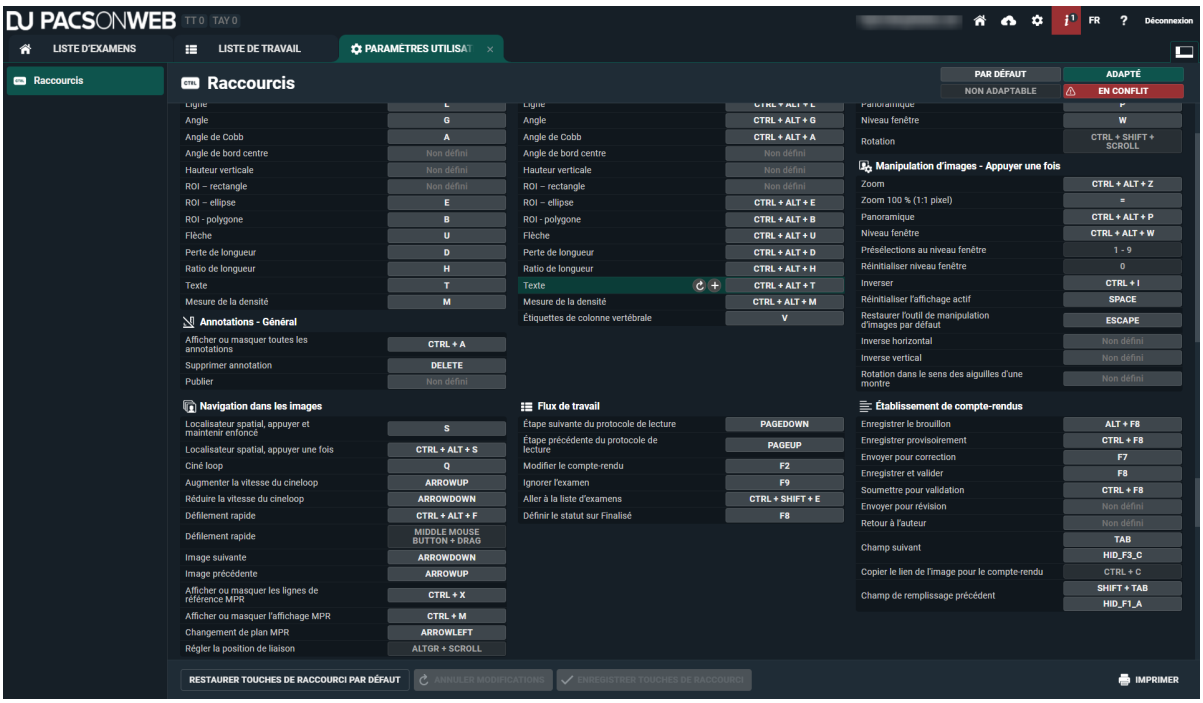

Légende des touches de raccourci

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, la légende codée par couleur définit les états des touches de raccourci suivants :

- **Défaut :** La touche de raccourci est la valeur par défaut pour cette action.
- **Adapté :** La touche de raccourci est personnalisée par l'utilisateur.
- **Non adaptable :** La touche de raccourci n'est pas adaptable.
- **En conflit :** Conflit entre une touche de raccourci et une autre action (une ou plusieurs actions utilisent la même touche de raccourci)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Ajout ou modification d'une touche de raccourci

Vous pouvez personnaliser une touche de raccourci ou ajouter une touche de raccourci supplémentaire à une touche existante. Vous pouvez avoir jusqu'à trois touches de raccourci pour une même fonction.

Modifier une touche de raccourci

1. Cliquez sur la touche de raccourci que vous souhaitez modifier.
2. Définissez une nouvelle touche de raccourci.

Ajouter une touche de raccourci

1. Passez la souris sur la fonctionnalité pour laquelle vous souhaitez ajouter un raccourci supplémentaire.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter nouveau**  . Une nouvelle ligne sera disponible.
3. Cliquez sur **Non défini** et définissez la touche de raccourci.

   Lorsque vous avez apporté des modifications à la configuration de vos raccourcis, l'avertissement suivant s'affiche en haut de l'écran : *« Vous avez des modifications non enregistrées. Ces modifications ne seront pas effectives aussi longtemps que la configuration ne sera pas enregistrée. »*
4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Enregistrer touches de raccourci**.

Restaurer les touches de raccourci par défaut :

Pour modifier la touche de raccourci par défaut d'un seul raccourci, passez sur la touche de raccourci et cliquez sur **Restaurer la valeur par défaut**  .

Pour restaurer toutes les touches de raccourci par défaut, cliquez sur le bouton **restaurer touches de raccourci par défaut**.

Attributs pris en charge :

- CTRL
- MAJ
- ALT

Boutons non pris en charge :

- Tous les chiffres (0 ... 9)
- F5
- F11
- F12

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895


5.5.2.2 Transfert DICOM

Il existe deux façons d'accéder à la configuration des paramètres personnels de Transfert DICOM

1. Comme mentionné au point Préférences (Page 112) dans la section Paramètres généraux.
2. En passant la souris sur l'icône des paramètres ⚙ et en cliquant sur **Transfert DICOM**.

Un nouvel onglet s'ouvre, dans lequel vous pouvez configurer tous vos paramètres personnels.

Lorsque vous avez effectué toutes les modifications souhaitées, cliquez sur **Enregistrer** en bas de page.

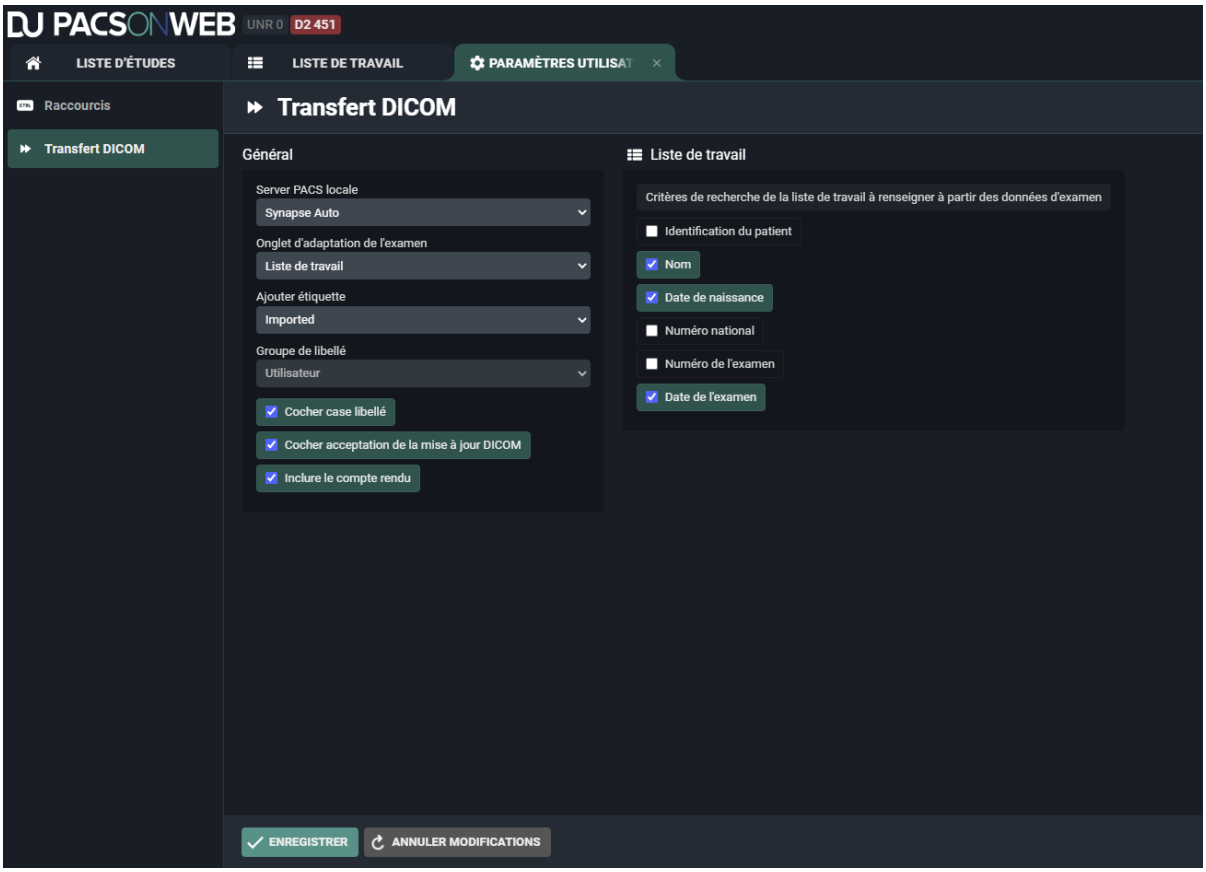

5.5.3 Favoris


Vous pouvez ajouter des utilisateurs DeepUnity PACSonWEB, des groupes et des destinataires autodéfinis fréquemment utilisés via l'onglet **Favoris**. L'avantage est que lorsque vous partagez un examen, vous disposez immédiatement des

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

informations de l'utilisateur ou du groupe. Il vous suffit de sélectionner l'utilisateur ou le groupe.

Pour ouvrir les **Favoris** :

1. Passez sur l'engrenage en haut à droite de la page d'aperçu.
   a. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.
2. Cliquez ensuite sur l'onglet **Favoris** sur le côté gauche de la page.

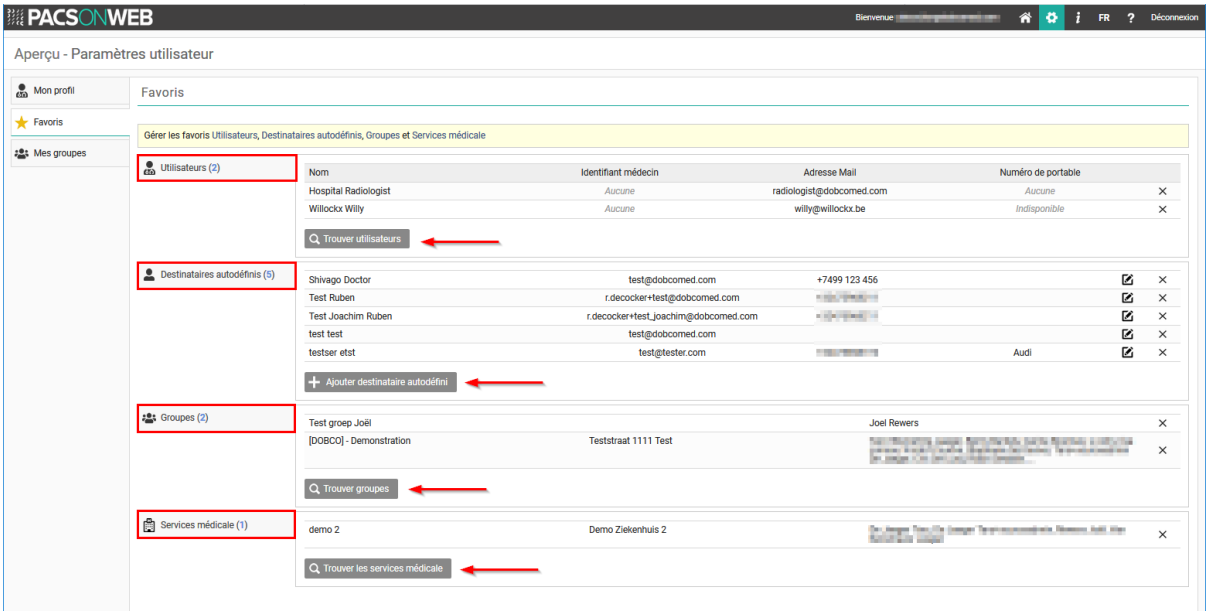

Pour supprimer un favori, cliquez sur l'icône **X** au bout de la ligne.

Ajouter un utilisateur DeepUnity PACSonWEB à vos favoris

Pour ajouter un utilisateur DeepUnity PACSonWEB à vos favoris favoris, cliquez sur :

1. Cliquez sur **Rechercher des utilisateurs**.
2. Dans la fenêtre contextuelle, recherchez un utilisateur.
   a. Vous pouvez effectuer une recherche par nom, par exemple.
3. Cliquez sur **Filtre**.
4. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Cet utilisateur est maintenant ajouté à vos favoris, sous **Utilisateurs**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ajout d’un destinataire autodéfini à vos favoris

Un destinataire autodéfini est un utilisateur qui n’est pas enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.

Pour ajouter un destinataire auto-défini à vos favoris :

1. Cliquez sur **Ajouter destinataire autodéfini**.
2. Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les champs obligatoires.

   Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque *.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

Ce destinataire a maintenant été ajouté à votre carnet d’adresses sous la rubrique **Destinataires autodéfinis**.

Ajouter un groupe à vos favoris

Pour ajouter un groupe à vos favoris :

1. Cliquez sur **Rechercher des groupes**.
2. Dans la fenêtre contextuelle, entrez vos critères de recherche.
3. Cliquez sur **Filtre**.

   Vous pouvez voir une liste des groupes qui répondent à vos critères de recherche.
4. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez ajouter.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Cette pratique de groupe figure dorénavant dans **Groupes**. Les membres du cabinet du groupe sont affichés dans le tableau **Groupes**.

Ajouter un service médical à vos favoris

Pour ajouter un service médical à vos favoris :

1. Cliquez sur **Trouver des services médicaux**.
2. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom du service.
3. Cliquez sur **Filtre**.

   Vous verrez une liste de services correspondant à votre critère de recherche.
4. Sélectionnez le service que vous souhaitez ajouter.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Le service a maintenant été ajouté à votre liste de **Services médicaux**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

5.5.4 Mes groupes

L'onglet **Mes groupes** donne un aperçu de tous les groupes auxquels vous êtes rattachés.


En tant que membre d'un groupe,en plus de vos propres examens demandés, vous pouvez également consulter les examens des autres membres du groupe.

Pour afficher vos groupes :

1. Passe sur l'**icône Paramètres** dans la barre d'outils supérieure.
2. Sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur l'onglet **Mes groupes.**

Cet onglet vous permet d'obtenir une vue d'ensemble des groupes auxquels vous appartenez :

- un administrateur,
- un membre.

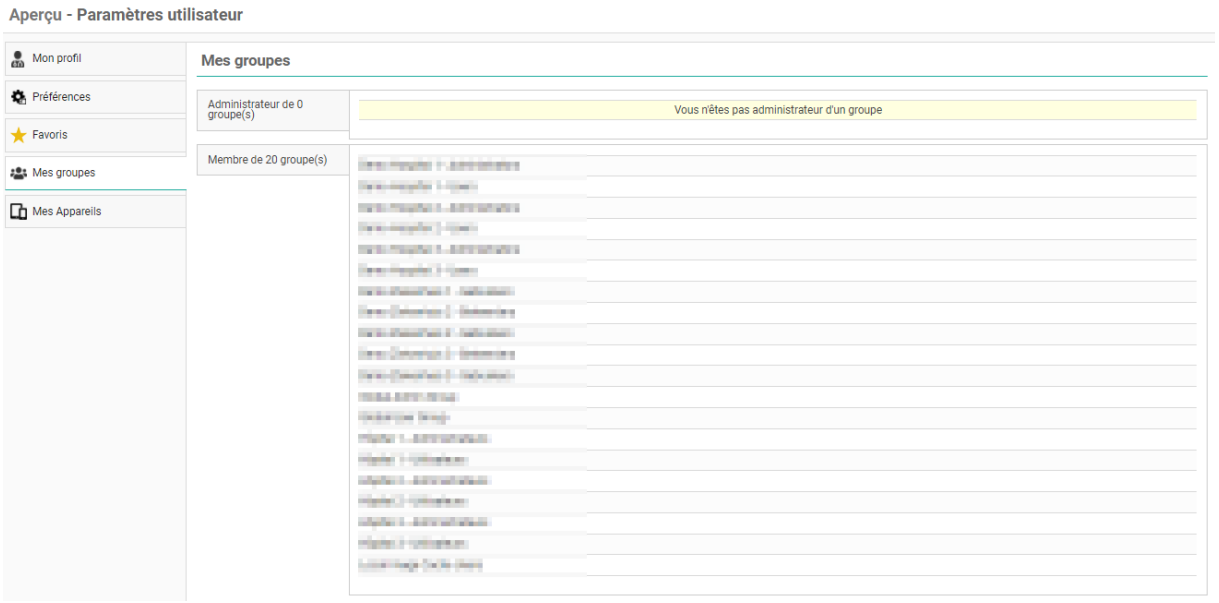

Administrateur de groupe(s)

En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier les informations du groupe ainsi que les membres du groupe et les délégués.

Apporter des modifications à votre groupe

Pour apporter des modifications à votre groupe :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1. Sélectionnez dans la liste le groupe que vous souhaitez modifier.
2. Mettez à jour ou modifiez les informations que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Gestion des informations du groupe

En tant qu'administrateur, vous pouvez :

- Fournir des informations sur la pratique de groupe.
  - Nom du groupe, description, adresse, etc.
- Rendre le groupe accessible au public
  - Lorsque cette option est activée, votre groupe peut être recherché, par exemple pour partager un examen avec le groupe, voir Partage d'examens à partir de la liste d'examens (Page 140)
- Notifier membres sur les mises à jour
  - Si cette option est activée, chaque membre du groupe recevra un e-mail lorsque quelque chose est modifié dans le groupe.
  - Pour les examens partagés avec le groupe, vous pouvez configurer les paramètres suivants
    - Informer le contact principal en cas de partage
    - Informer tous les membres en cas de partage
- Gérer et ajouter des membres et des délégués

Gérer les membres

Dans l'aperçu du groupe, il y a un onglet pour les **membres.**

Dans la liste, recherchez le membre souhaité et

1. cliquez sur le membre.
2. Permettre les modifications souhaitées
   a. Faire du membre un **administrateur**
   b. Faire du membre un **contact principal**
3. Cliquez sur le bouton **Modifier** pour enregistrer les modifications apportées à ce membre.
4. Pour supprimer le membre de la liste, cliquez sur **Supprimer.**
   a. En cliquant sur **Supprimer**, vous fermez la boîte de dialogue Gérer les membres et vous supprimez le membre sélectionné de la liste des membres du groupe.
5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** pour enregistrer toutes les modifications apportées au groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Du fait qu'il s'agit de votre propre compte, vous ne pouvez pas modifier le statut d'administrateur. Pour modifier votre statut d'administrateur, veuillez contacter votre service d'assistance local DeepUnity PACSonWEB.

Ajouter un membre

Dans l'aperçu du groupe, vous pouvez ajouter un membre. Pour ajouter un nouveau médecin à la pratique de groupe,

1. cliquez sur **Ajouter un membre**.
2. Saisissez des critères de recherche, puis cliquez sur **Filtrer.**
   - Les utilisateurs DeepUnity PACSonWEB qui correspondent à vos critères de recherche apparaissent.
3. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ajouter**.

L'utilisateur sera ajouté au groupe et sera visible dans la liste des **membres**.

Ajouter un délégué

Pour ajouter un délégué,

1. cliquez sur l'onglet **Délégués** et ensuite sur **Ajouter un délégué**.
2. Saisissez l'adresse e-mail du délégué, puis cliquez sur **Ajouter.**
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

L'utilisateur sera ajouté à la liste des délégués de ce groupe.

Membre de groupe(s)

Dans l'onglet Mes groupes, vous verrez une liste de tous les groupes dont vous êtes membre. Pour afficher des informations sur le groupe, cliquez sur le groupe souhaité.

Si vous n'appartenez plus à cette pratique de groupe et souhaitez vous en désabonner,

1. cliquez sur **Se désabonner**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez permettre ce qui suit :
   - **Le groupe conserve l'accès à mes anciens examens**

     Si cette option est activée, les membres de la pratique de groupe pourront continuer à consulter vos examens pendant la période où vous avez appartenu à la pratique de groupe.
   - **Maintenir l'accès aux anciens examens du groupe**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si permis, vous pourrez toujours consulter vos examens pour la période où vous avez appartenu à la pratique de groupe. Cette fonction est activée par défaut.

3. Cliquez sur **Se désabonner**.

Vous ne serez plus membre de la pratique de groupe à partir de ce moment.

5.5.5 Mes appareils

Passez la souris sur l'engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Paramètres utilisateur** dans la liste déroulante.

Cliquez alors sur **Mes appareils** sur le côté gauche de la page.

Un aperçu de tous les appareils liés à votre compte DeepUnity PACSonWEB apparaît pour l'authentification à deux facteurs grâce à une application d'authentification (Page 56)




Vous pouvez lier des appareils supplémentaires en cliquant sur **Ajouter un nouvel appareil**

Vous pouvez trouver comment lier un appareil au point Authentification à deux facteurs via l'application Authenticator (Page 56)

Conseil :

Vous pouvez lier jusqu'à 5 appareils simultanément.

Pour détacher un appareil, cliquez sur l'icône **X** à la fin de l'entrée concernée.

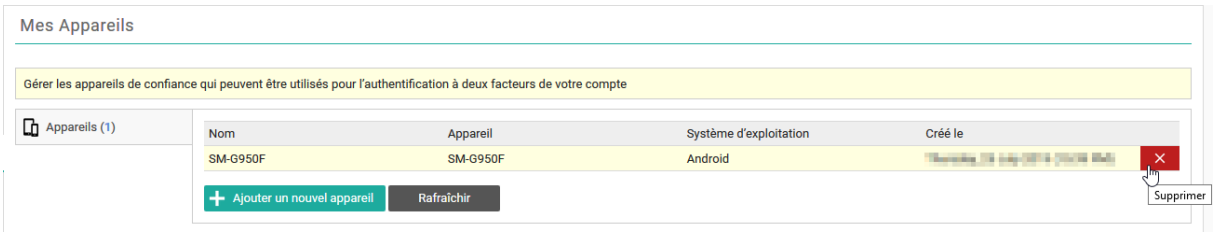

Si vous détachez le dernier appareil de confiance, votre méthode d'authentification forte sera automatiquement convertie en « OTP par SMS » ou, si vous n'avez pas enregistré de numéro mobile, en « OTP par e-mail ».

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

5.5.6 Blocs de texte

Créer un bloc de texte :


Les blocs de texte peuvent être créés de deux manières :

- Dans les **paramètres utilisateur**
- dans le panneau de visualisation de compte-rendu.

Création d'un bloc de texte à partir des paramètres utilisateur

Pour créer un nouveau bloc de texte à partir des paramètres utilisateur :

1. Ouvrez l'onglet **Blocs de texte**.
2. Cliquez sur **Ajouter nouveau bloc de texte** pour créer un nouveau bloc de texte.
   La fenêtre suivante s'affiche :

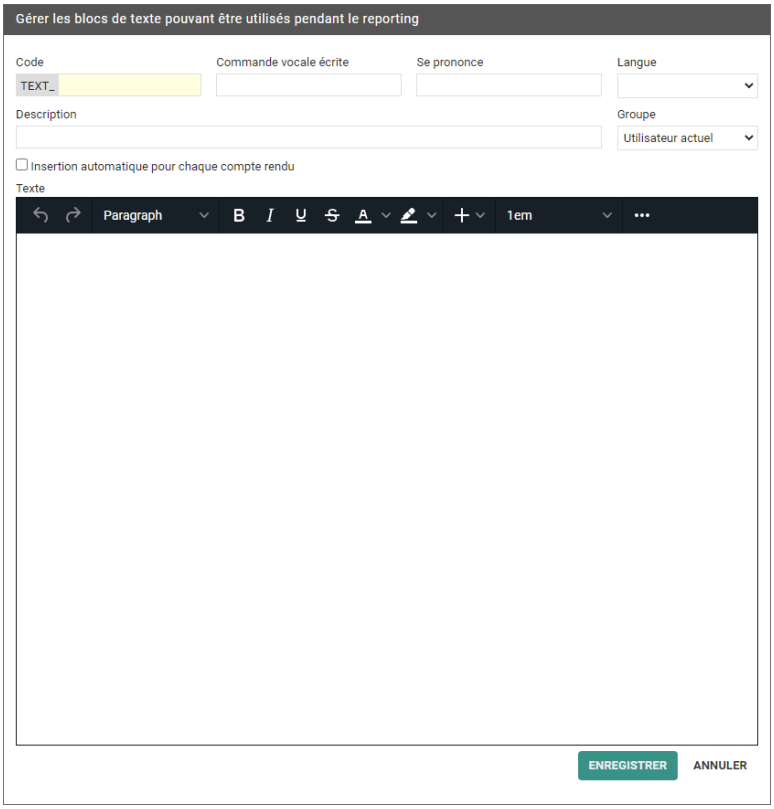


3. Remplissez les champs.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Création d'un nouveau bloc de texte à partir du panneau de compte-rendu du visualiseur

Pour créer un nouveau bloc de texte à partir de la fenêtre du compte-rendu dans le visualiseur :

1. Ouvrir un examen.
2. Cliquez sur la fenêtre du compte-rendu.
3. Cliquez sur l'icône **T]+** dans le coin du panneau de compte-rendu.

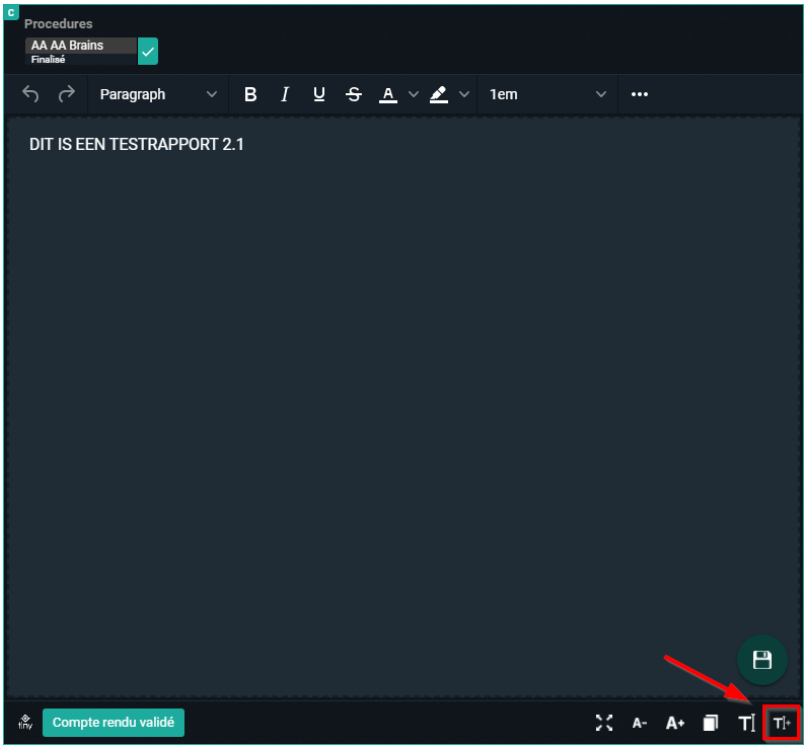

La fenêtre qui s'ouvre est la même que lorsque vous ajoutez un bloc de texte à partir des paramètres de l'utilisateur.

Champs à compléter

Les champs suivants doivent être remplis lorsque vous créez un nouveau bloc de texte dans les paramètres utilisateur ou dans le panneau de compte-rendu du visualiseur.

- **Code :** utilisé comme raccourci lors de la saisie du compte-rendu.
- **Commande vocale écrite :** commande vocale pour l'insertion d'un bloc de texte.
  - Pour la commande vocale écrite, seuls les caractères suivants sont autorisés : a-zßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöùúûüýþÿœšž.

    Si un caractère non pris en charge est utilisé, un avertissement s'affichera au bas de la page.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

- **Se prononce :** version écrite de la façon de prononcer la commande vocale
- **Description :** description du bloc de texte (facultatif).
- **Groupe :** enregistrer le bloc de texte pour l'utilisateur actuel ou un groupe (administrateurs seulement).
- **Texte :** le texte du compte-rendu.

Important !


Si un bloc de texte existe pour un utilisateur ET un groupe d'utilisateurs, le bloc de texte spécifique à l'utilisateur sera utilisé.

Si le même code existe pour plusieurs groupes d'utilisateurs, le premier bloc de texte sera utilisé.

Conseil :

Un bloc de texte spécifique peut être inséré pour chaque compte-rendu créé en cochant l'option **Insérer automatiquement pour chaque compte-rendu**.

Variables :

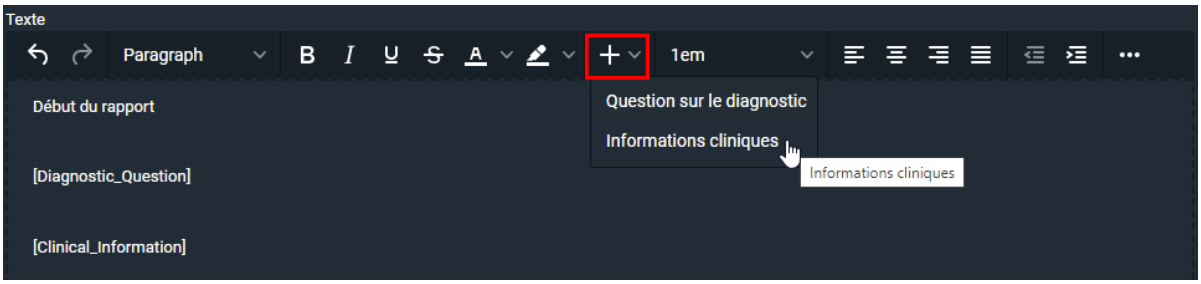


Les variables **Question sur le diagnostic** et **Informations cliniques** peuvent être ajoutées au compte rendu.

Elles seront mises à jour avec les informations actuelles de l'examen. Si aucune valeur ne peut être trouvée, rien n'est inséré dans le compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Champs à remplir

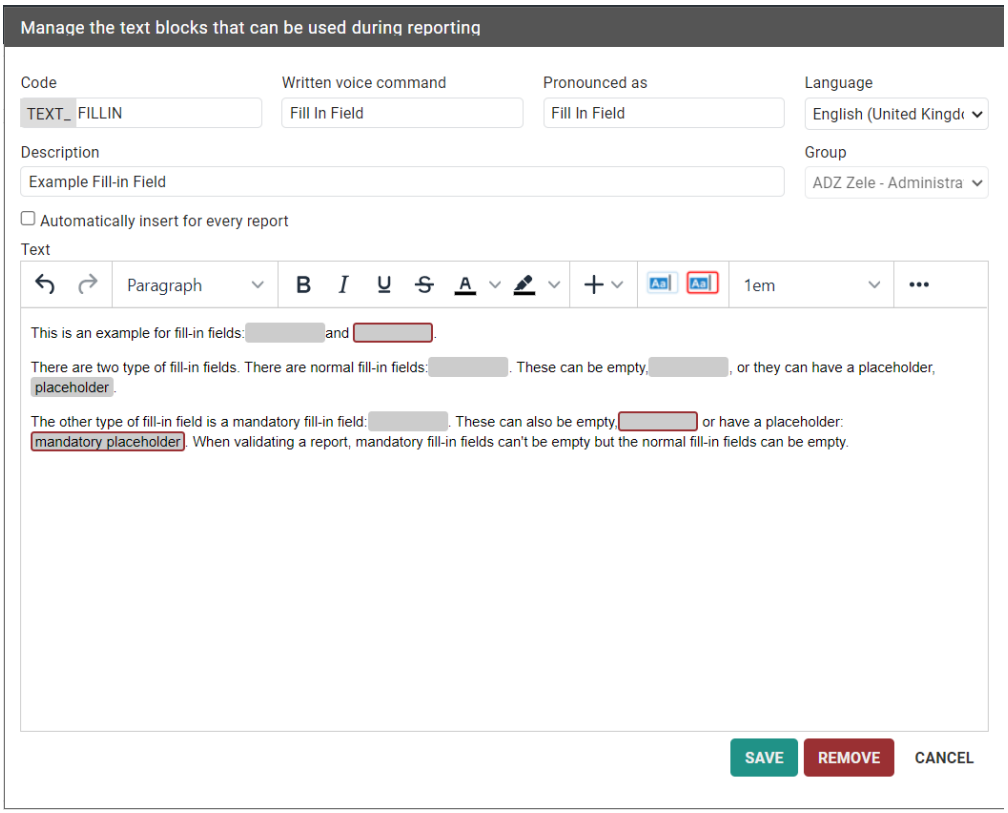

Les champs à remplir peuvent être insérés dans un **bloc de texte**.

- Ajouter un champ à remplir
- Ajouter un champ à remplir obligatoire


Les champs à remplir vous permettent de créer des comptes-rendus prédéfinis dans lesquels certaines valeurs ou certains textes doivent être ajoutés ultérieurement.

Créer un bloc de texte avec des champs à remplir

- Vous pouvez pré-remplir les champs avec un espace réservé ou les laisser vides.
- Vous pouvez facilement modifier la valeur d'un champ à remplir pendant la rédaction du compte-rendu si le contenu ne s'applique pas à cet examen particulier.
- Vous pouvez naviguer dans les champs à remplir à l'aide de commandes vocales, de raccourcis clavier et de boutons SpeechMike.

Pendant la création du compte-rendu

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

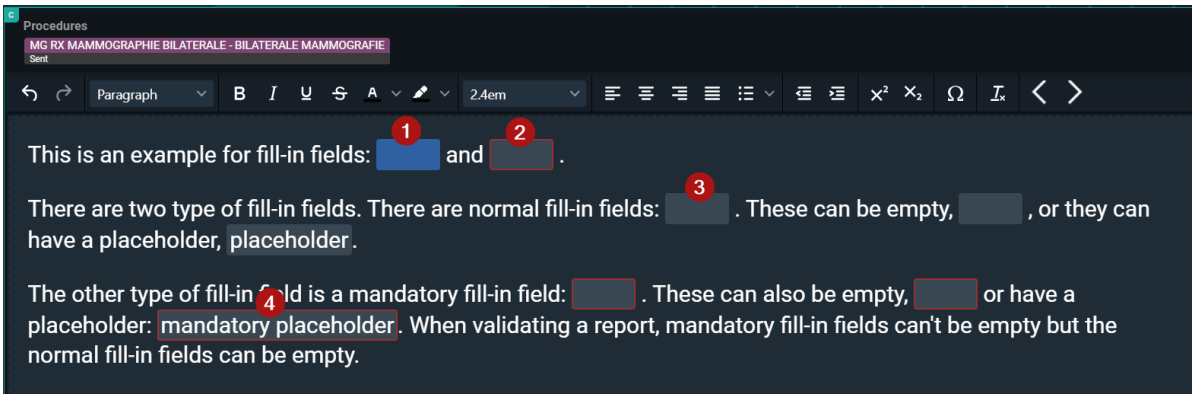

Numéro	Désignation	Description
1	Champ actif	Le champ actif est surligné en bleu. Cela indique qu'il est actuellement sélectionné et prêt à être saisi.
2	Champ à remplir obligatoire	Les champs à remplir obligatoires sont affichés avec une bordure rouge. **Remarque :** Les champs à remplir obligatoires ne peuvent pas être laissés vides. Vous ne pourrez pas valider un compte-rendu dont les champs obligatoires sont vides et un message d'erreur vous invitera à remplir tous les champs obligatoires avant de valider le compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
3	Champ non obligatoire	Les champs non obligatoires sont affichés en gris. **Remarque :** S'ils sont laissés vides, ces champs seront remplacés par des espaces blancs et vous permettront de valider le compte-rendu.
4	Champ pré-rempli	Pour les champs obligatoires et non obligatoires, le texte pré-rempli est affiché dans le champ de remplissage avec la même police et la même taille que le reste du texte.

Tous les champs à remplir seront convertis en texte brut à partir du moment où votre compte-rendu est enregistré. Les champs à remplir seront affichés lors de l'édition du compte-rendu.

Insérer un bloc de texte

Il existe différentes manières d'insérer des blocs texte dans un compte-rendu :

- En dictant la commande vocale (parole) ;
- En saisissant le code du bloc de texte dans le compte-rendu ;
- en sélectionnant un code de bloc de texte dans la liste.

Speech :


Commencez par dicter la commande **insérer** suivie du texte tel qu'il a été enregistré dans la section **Se prononce** du bloc de texte.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Saisie :


Tapez le préfixe TEXT_ suivi du code du bloc de texte et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier. Les cinq premiers résultats sont affichés par ordre alphabétique au bas de la fenêtre du compte-rendu.

- En appuyant sur Entrée, vous insérerez le premier bloc de texte de la liste.
- Les autres blocs de texte peuvent être sélectionnés en cliquant ou en saisissant plus de caractères du code de bloc de texte.

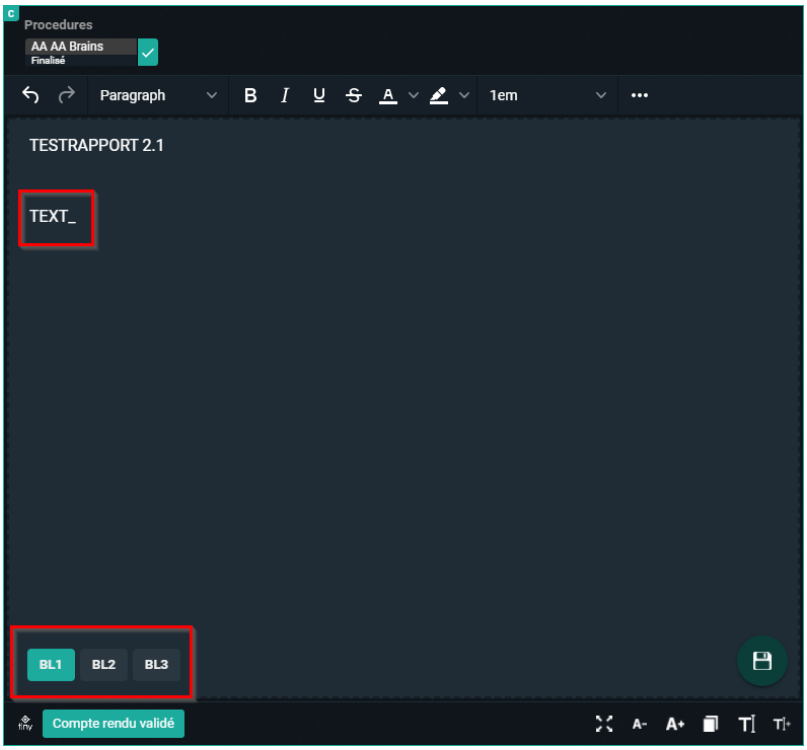

Bouton Text block :

Cliquez sur le bouton « Text block » pour ouvrir l'aperçu des blocs de texte auxquels l'utilisateur a accès.

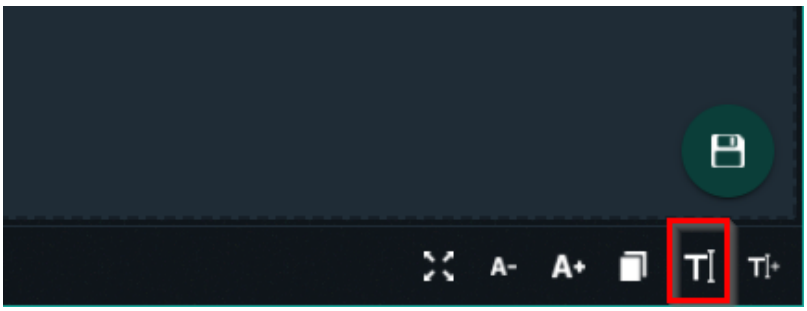

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pour rechercher un bloc de texte, saisissez trois caractères ou plus. Cliquez sur le bloc de texte pour l'insérer.

Si vous cliquez sur **Gérer les blocs de texte**, vous serez redirigé vers la page des **paramètres utilisateur**.

5.6 Conditions d'accès supplémentaires

Il se peut que certains examens de votre liste d'examens soient, par défaut, non accessibles.

Cela est lié à l'une des conditions d'accès supplémentaires suivantes :

- Authentification forte (Page 136)
- Break-The-Glass (Page 137)
- Paiement requis (Page 139)

La façon d'accéder à ces examens est expliquée sur la page correspondante dans le mode d'emploi.

5.6.1 Authentification forte

Les services de radiologie ont la possibilité d'exiger une authentification forte afin d'obtenir l'accès à l'examen (e-ID, à deux facteurs).


- Un indicateur en haut de la page s'illumine en rouge pour indiquer qu'une authentification forte est indispensable.

  En cliquant sur cet indicateur, il est possible de se connecter au moyen d'une authentification forte.

Si vous n'êtes pas connecté(e) à DeepUnity PACSonWEB via une authentification forte, ces examens ne seront pas accessibles/sélectionnables.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

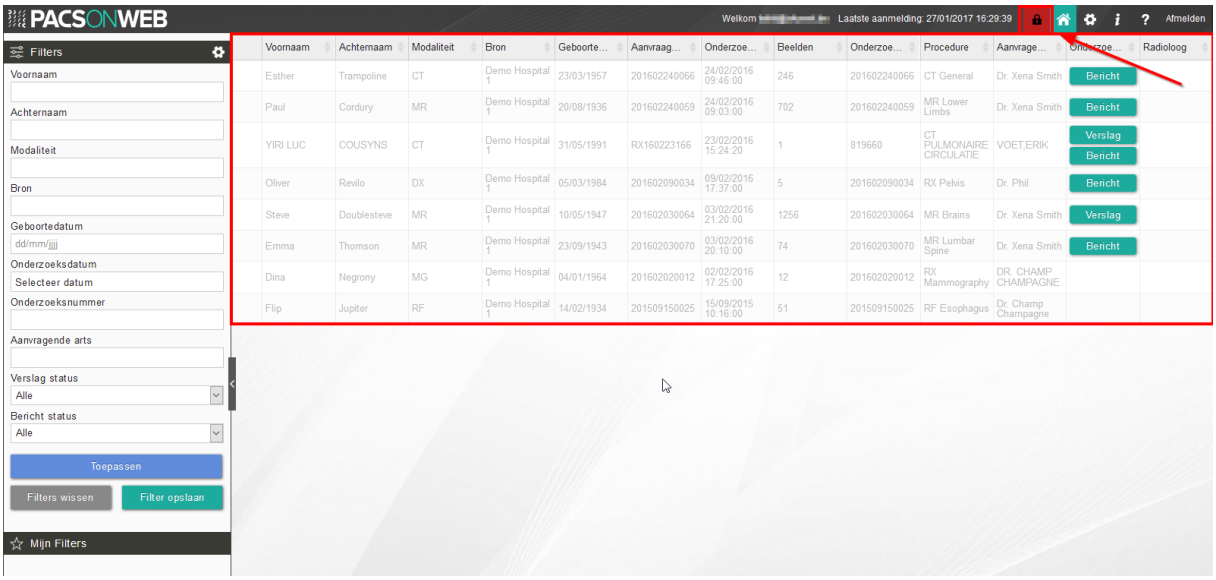

5.6.2 Break-The-Glass

Un service de radiologie peut également autoriser la visibilité de certains examens, par défaut, au médecin demandeur uniquement.

- Si vous faites partie d'un groupe d'utilisateurs ou d'un cabinet de groupe et que vous avez obtenu l'accès à un examen requis par un collègue, la ligne correspondante dans la liste d'examens sera grisée avec uniquement le nom du patient, sa date de naissance et la date de l'examen.
- Accéder à ce type d'examen est uniquement possible en spécifiant le motif de l'accès.

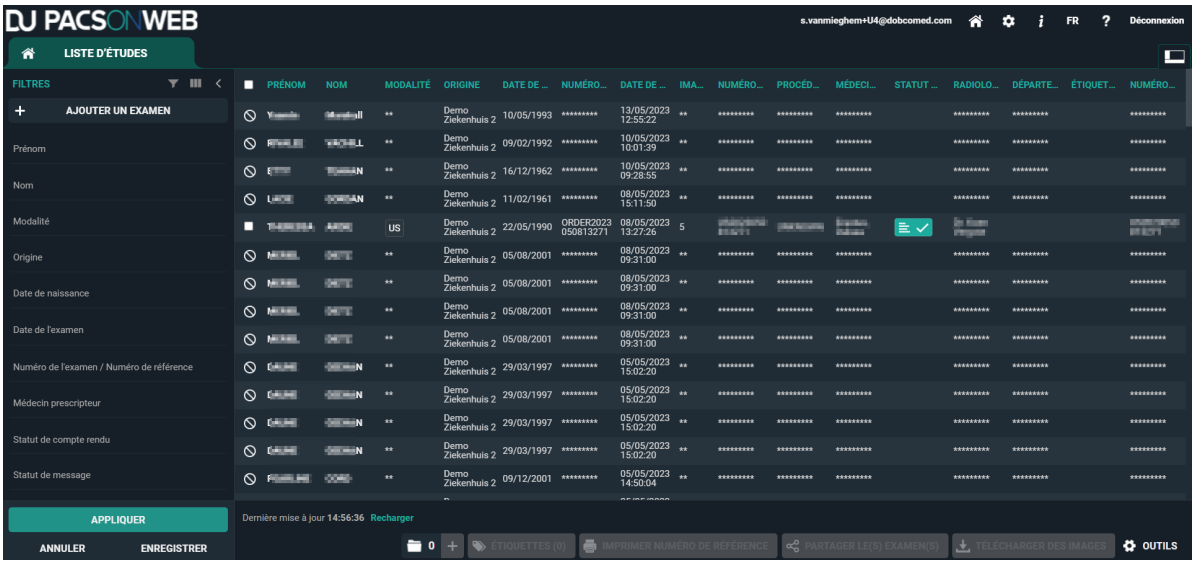

Pour accéder à l'examen :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


1. Cliquez sur la ligne correspondante dans votre liste.
2. Indiquez la raison pour laquelle vous avez besoin d'un accès.
3. Cliquez sur **Débloquer l'examen**

Conseil :

Après avoir saisi le motif, l'examen sera disponible pendant 7 jours, à moins qu'il en soit précisé autrement par le service de radiologie concerné.

Au bas de la page de l'examen, l' Histoire (Page 211) des examens pour le même patient sera affiché.


Vous y trouverez les examens pour lesquels vous avez déjà accès, mais aussi ceux dont l'accès requiert un motif.

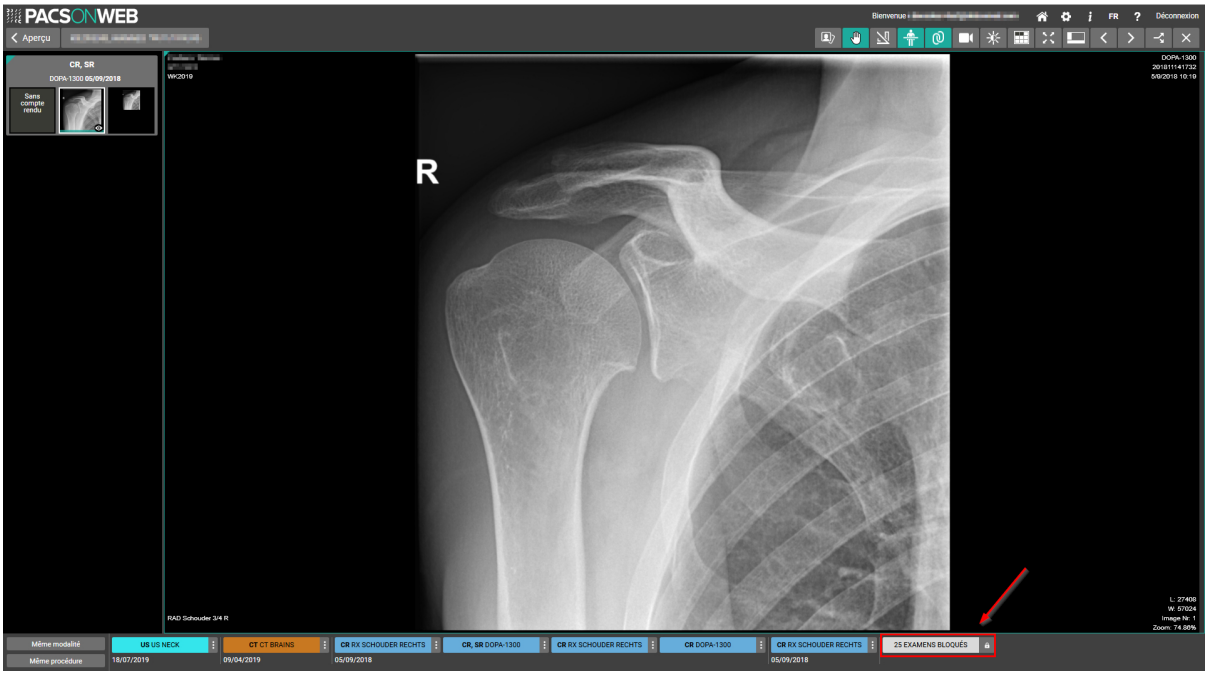

1. Cliquez sur l'étiquette **x examens verrouillés**.
2. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la raison pour laquelle vous avez besoin d'accéder à l'examen.
3. Cliquez sur **Débloquer l'examen**.

Une fois que vous avez saisi le motif de votre accès, les examens concernés s'afficheront.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

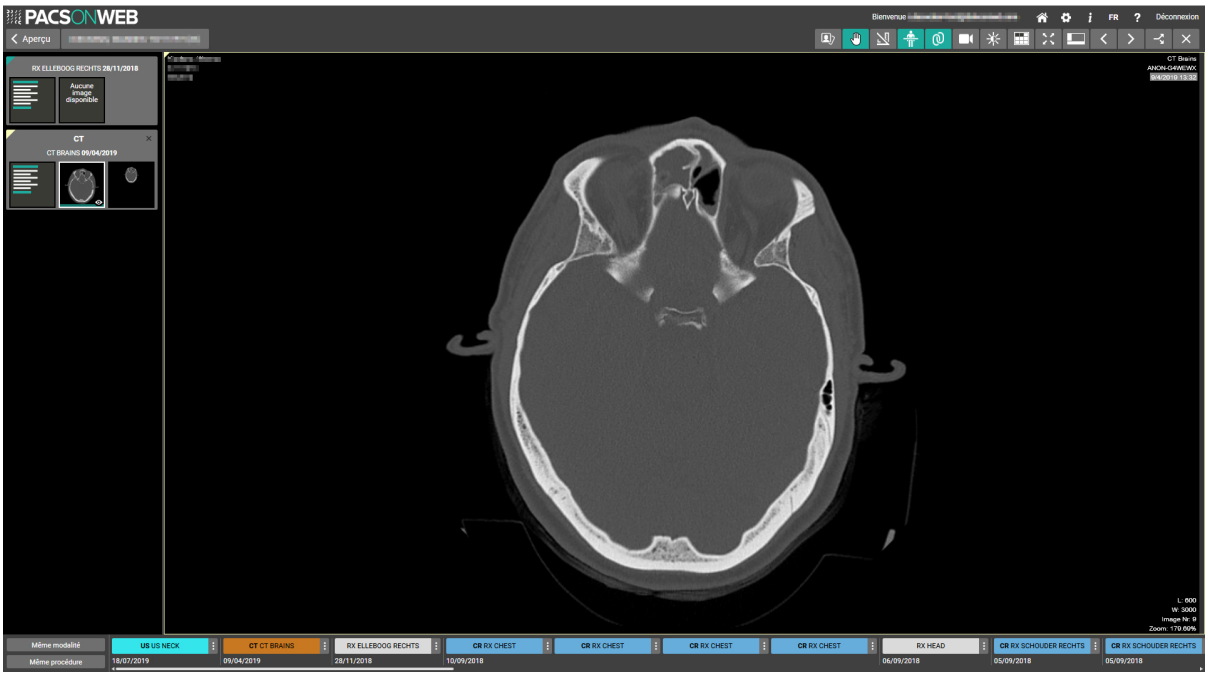


Important !

Si vous êtes un administrateur pour le service de radiologie concerné, vous pouvez voir qui a accédé à l'examen, quand on y a eu accès et pour quel motif.

Pour plus d'informations, voir Accès à l'examen (Page 280).

5.6.3 Paiement requis

Pour les patients qui sont connectés, mais qui doivent payer pour avoir accès à leurs études, toutes les études impayées seront grisées.

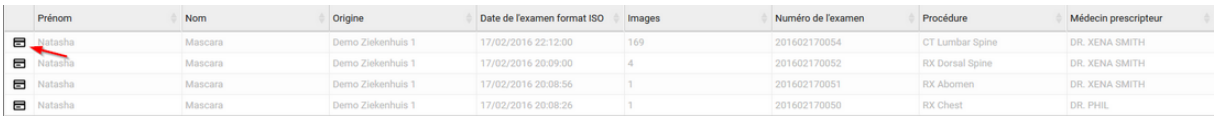

Pour initier un paiement :

1. Cliquez sur l'icône Carte bancaire.
2. Dans la fenêtre contextuelle **Paiement requis**, cliquez sur **Effectuer le paiement**. Vous serez redirigé(e) vers la page de paiement.
3. Choisissez de payer par carte de crédit (MasterCard ou VISA) ou par Vipps.


L'examen sera disponible pour vous une fois le paiement effectué.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Une fois le paiement effectué, vous êtes redirigé vers la liste d'examens et les examens sont désormais accessibles.

Un service de radiologie peut décider qu'un examen ne doit pas encore être accessible pour le patient.

Le cas échéant, l'examen est listé en gris dans la liste d'examens avec une icône d'horloge en avant.

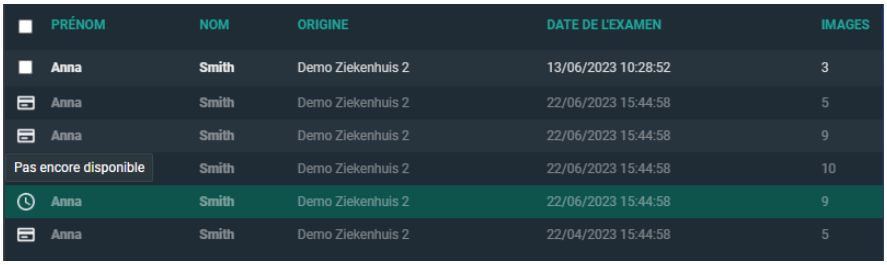


5.7 Partager des examens à partir de la liste d'examens

Depuis la liste d'examens, il est possible de partager un ou plusieurs examens.

Cochez les examens que vous souhaitez partager et cliquez sur **Partager des examens**.

Important !

Il n'est possible de partager plusieurs examens à la fois que si tous les examens proviennent de la même source.

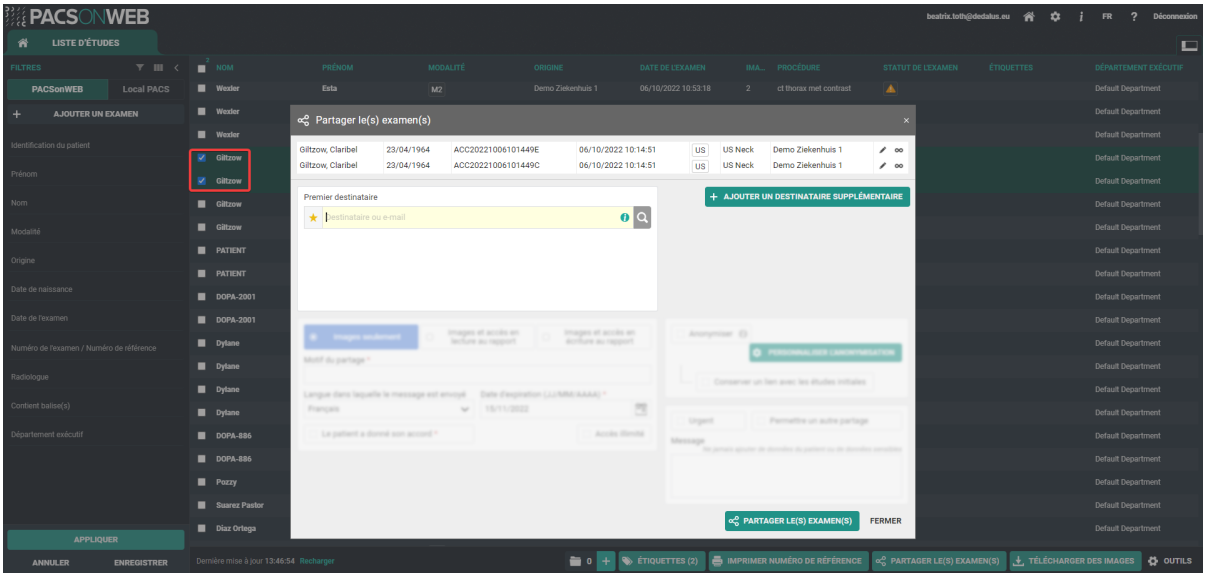

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Une fenêtre pop-up apparaît et affiche un aperçu des examens que vous souhaitez partager.

Vous pouvez :

- Partager des examens avec des utilisateurs (Page 141)
- Partager des examens avec des groupes (Page 147)
- Partage d'examens avec un service de radiologie (Page 155)
- Partage d'examens avec un destinataire autodéfini (Page 164)

Vous pouvez partager des études avec trois destinataires différents au maximum.

Si l'authentification à deux facteurs n'est pas utilisée pour partager l'examen, le nom du patient est masqué dans le message.

Seule la première lettre du nom et du prénom est affichée. Toutes les autres lettres sont remplacées par des astérisques « ***** »

Important !

Si vous partagez un examen plusieurs fois avec un même utilisateur, les droits les plus étendus sont applicables.

Cela vaut tant pour la validité des droits sur l'examen que pour les droits de pouvoir consulter uniquement les examens ou aussi de pouvoir les partager.

Conseil :

Tous les e-mails qui sont envoyés automatiquement lors du partage d'un examen peuvent être personnalisés par le service de radiologie expéditeur.

Veuillez contacter le Service Desk pour que cela soit configuré.

5.7.1 Partage d'examens avec un utilisateur

Le partage d'examens avec un utilisateur nécessite 3 étapes principales.


1. Sélection des examens à partager.
2. Ajouter le(s) destinataire(s).
3. Définition des paramètres de partage.

Sélection des examens à partager

Vous pouvez partager un ou plusieurs examens.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Dans la **liste d'examens**, sélectionnez l'examen ou les examens que vous souhaitez partager en cochant la case située à côté de chaque examen, puis en cliquant sur **partager examens**.

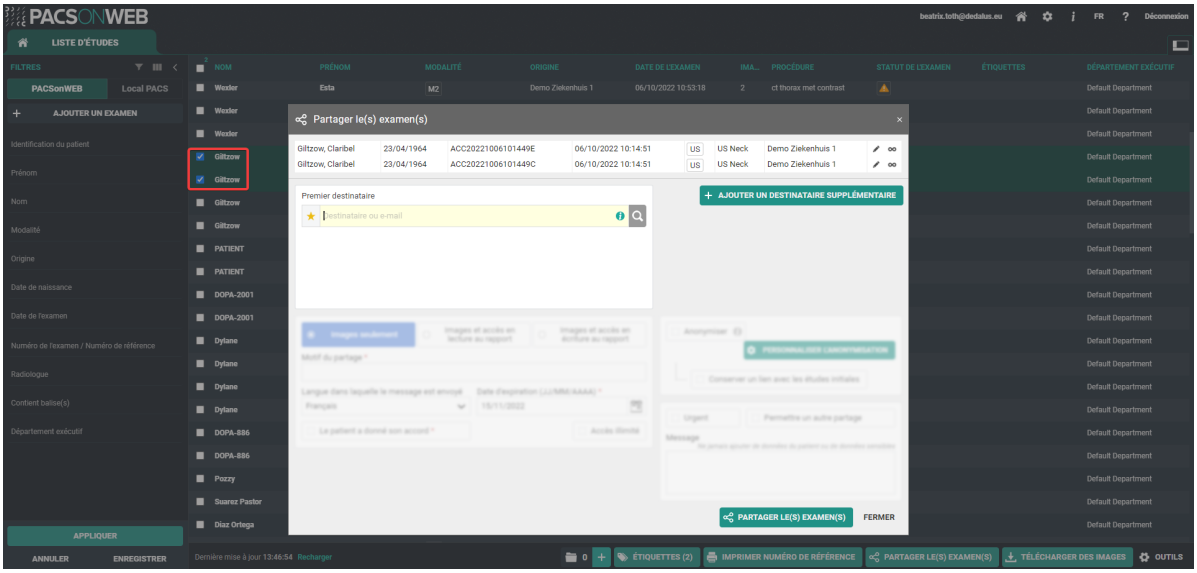

Sélectionnez votre/vos destinataire(s).

Il y existe différentes manières d'ajouter un destinataire.

- **Favoris :** Cliquez sur l'icône des favoris ★ pour charger vos favoris.
  - Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de favoris, cliquez sur le nom du destinataire souhaité.
- **Champ de texte du destinataire :** Tapez le nom ou l'e-mail du **destinataire** dans le champ correspondant.
  - Vous pouvez rechercher un utilisateur, un groupe ou un PACS existant ou définir un nouveau destinataire.
  - Vous pouvez rechercher un utilisateur par :
    - Prénom
    - Nom de famille
    - Nombre médecin (RIZIV / INSEE / HIN / UCGN / PNB))
    - Numéro de portable (si indiqué comme public)
    - Adresse e-mail (si indiqué comme public)
- **Recherche détaillée :** Cliquez sur l'icône de recherche pour effectuer une recherche détaillée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

- À partir de la boîte de dialogue de recherche détaillée, vous pouvez utiliser des critères spécifiques pour rechercher et sélectionner l'utilisateur, le groupe ou le service de radiologie souhaité comme destinataire.
- Si vous avez sélectionné un destinataire, vous pouvez ajouter les options suivantes :
  - Authentification à deux facteurs : Si le destinataire veut consulter l'examen partagé, un mot de passe à usage unique sera envoyé par SMS au numéro de téléphone portable enregistré et doit être saisi avant que l'accès ne soit donné.

    Important !

    Si l'utilisateur saisit un OTP incorrect 5 fois de suite, le seau est verrouillé.

    L'ensemble partagé peut être déverrouillé par le Service Desk ou par un utilisateur administrateur du service de radiologie expéditeur (voir Statut du transfert (Page 187))

  - Envoyer un e-mail : L'utilisateur avec lequel l'examen a été partagé recevra un e-mail avec les informations suivantes :
    - qui a partagé l'examen
    - qui a partagé l'examen
    - quel examen a été partagé (patient, description de l'examen, date de l'examen) + un lien pour ouvrir cet examen
    - le message si un message a été rempli lors du partage

Vous pouvez ajouter des destinataires supplémentaires en cliquant sur **+ Ajouter un destinataire supplémentaire**.

Conseil :

Vous pouvez ajouter un utilisateur à vos favoris à partir de la boîte de dialogue **Partager des examens**. Une fois que vous avez sélectionné un utilisateur comme destinataire, cliquez sur l'icône des favoris. L'utilisateur sera ajouté à votre liste de favoris une fois l'action de partage terminée.

Paramètres de partage

Avant de partager l'examen, certains paramètres doivent être définis.

1. Sélectionnez l'accès que vous souhaitez accorder au destinataire. Les options suivantes vous sont proposées :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Images et accès en lecture au compte-rendu
- Images et accès en écriture au compte-rendu
- Images seulement

Conseil :

L'option **Images seulement** n'est pas disponible lors du partage avec un utilisateur.

2. Enregistrer un **Motif de partage**.
   - Le motif n'est pas communiqué au destinataire, mais est un champ obligatoire et sera enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.
3. Sélectionnez la langue utilisée pour l'envoi du message.
   - Par défaut, la langue du premier destinataire est sélectionnée. Vous pouvez changer de langue en utilisant le menu déroulant.

Important !

Si vous sélectionnez plusieurs destinataires avec des langues différentes, le courrier est envoyé à tous les destinataires, en utilisant la langue des premiers destinataires. Toutefois, si la majorité des destinataires ont la même langue, cette langue sera sélectionnée automatiquement.

4. Déterminer la période de validité de l'accès.
   - Par défaut, la période de validité est fixée à 1 mois. Vous pouvez modifier cela de trois façons :
     - Saisir manuellement une nouvelle date.
     - Sélectionner une date à l'aide de l'icône de calendrier
     - Sélectionnez l'option **Accès illimité**.

Conseil :

La période de validité par défaut peut être configurée pour chaque service de radiologie destinateur. DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.


L'option **Accès illimité** peut également être désactivée à un niveau source. Si une configuration spécifique est souhaitée, veuillez contacter le service d'assistance.

5. Confirmer le consentement du patient.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- La case Patient accepté doit toujours être cochée. L'examen ne peut être partagé sans le consentement du patient.

6. Ajouter une étiquette.
   - Vous pouvez ajouter une étiquette à l'examen.
   - Pour ajouter une étiquette, cochez la case et sélectionnez une étiquette dans la liste. Vous pouvez ajouter l'étiquette pour l'utilisateur ou au niveau du groupe.

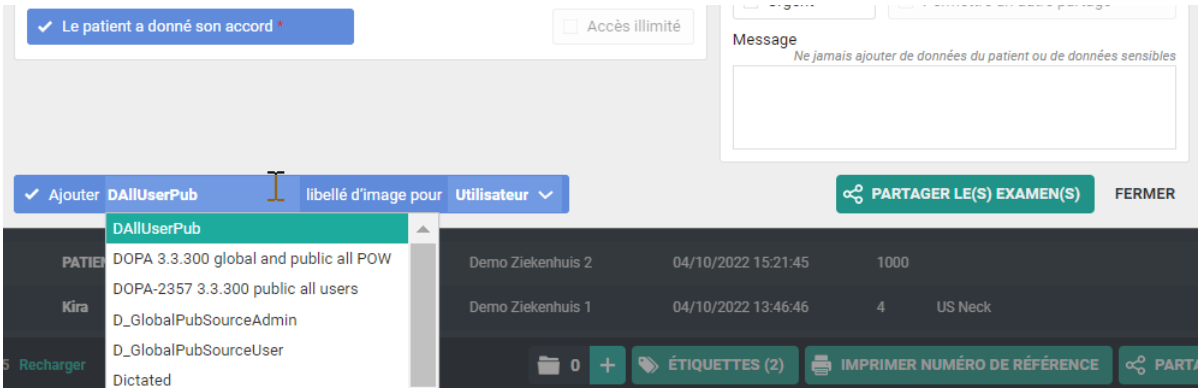

7. Paramètres facultatifs.
   - **Urgent :** ajoute « Urgent » à l'objet de l'e-mail correspondant.
   - **Anonymiser :** remplace le nom du patient :
     - Le prénom est remplacé par un nombre.
     - Le nom est remplacé par « Anonyme ».

> **Important !**
>
> Le compte-rendu d'un examen anonymisé ne sera jamais accessible, même si vous avez sélectionné l'option **Images et accès en lecture au compte-rendu** ou **Images et accès en écriture au compte-rendu**.

   - **Permettre un autre partage :** permet au destinataire de partager l'examen avec d'autres destinataires.
   - **Message :** Si vous ajoutez un message, il est ajouté à l'e-mail envoyé au destinataire. Il est visible pour le destinataire lorsqu'il ouvre l'examen dans DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Conseil :

Lors du partage d'un examen avec un utilisateur, les mêmes valeurs sont sélectionnées automatiquement pour les paramètres suivants lors de la prochaine opération de partage avec un utilisateur :

- Authentification à deux facteurs
- Envoyer un e-mail

Après avoir rempli toutes les informations obligatoires et facultatives souhaitées, cliquez sur **partager les examens.**

Une fenêtre pop-up s'affiche en indiquant les informations sur les examens partagés, confirmant que les examens ont été partagés.

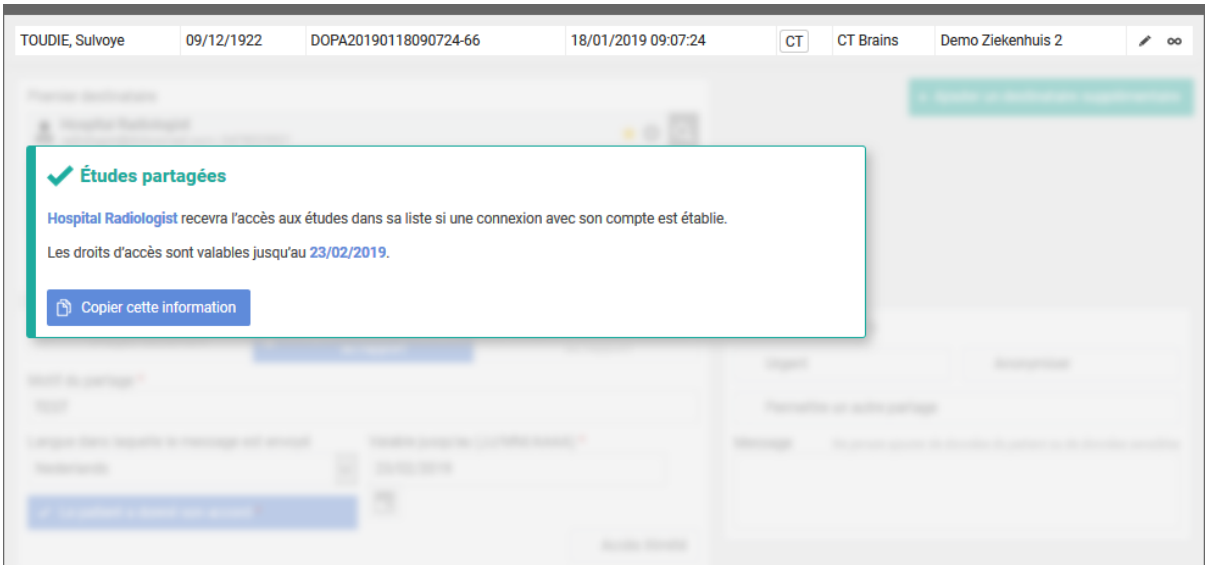

- **Copier cette information :** Ce bouton permet de copier le contenu de la fenêtre contextuelle dans votre presse-papiers. Vous pouvez coller le contenu dans votre propre e-mail.
- **Envoyer un e-mail :** Si cette option est cochée, le destinataire recevra un e-mail contenant un lien vers l'examen et un message l'informant que vous avez partagé un examen avec lui.
- L'examen sera disponible dans la liste d'examens du destinataire pendant la période indiquée par l'expéditeur.
- Si l'expéditeur a spécifié un message, celui-ci sera indiqué sur la la liste d'examens avec une étiquette séparée **Message**.
  - Si l'examen n'a pas encore été ouvert, l'étiquette sera rouge .
  - Une fois l'examen ouvert, l'étiquette devient verte.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Le message est disponible dans l'examen en tant que série séparée.



- En utilisant **Partager à nouveau**, vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'examens avec un autre destinataire.

Voir aussi

Favoris (Page 122)


Statut du transfert (Page 187)

5.7.2 Partage d'examens avec un groupe

Dans les instructions suivantes, vous découvrirez comment partager un examen avec un groupe DeepUnity PACSonWEB .

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

STEP 1 : Sélectionnez les examens que vous souhaitez partager

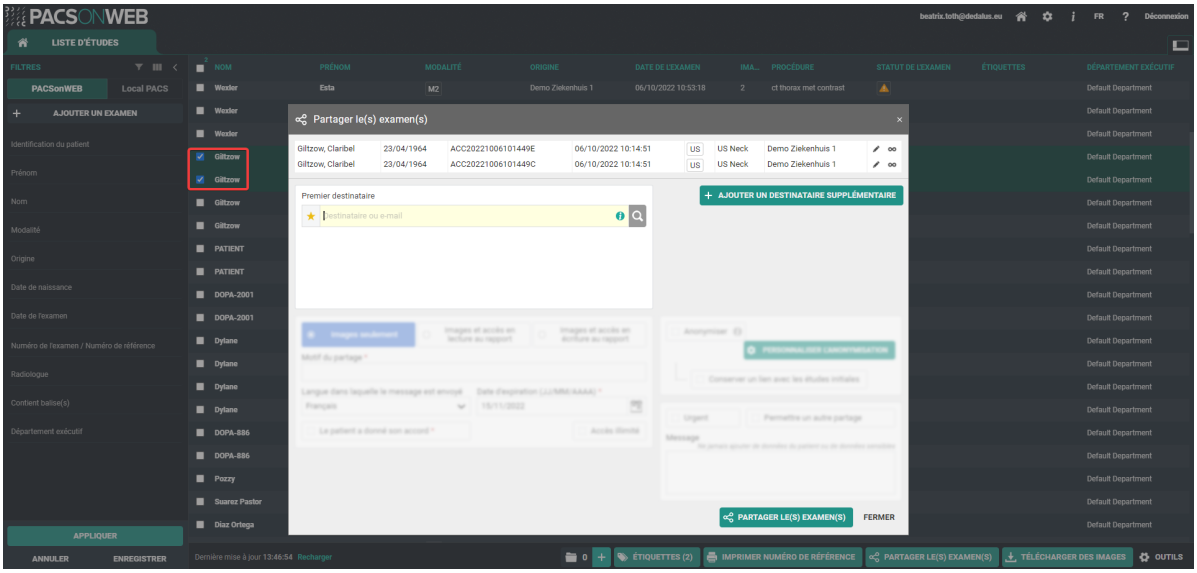


STEP 2 : Sélectionnez votre/vos destinataire(s)

Vous pouvez sélectionner un destinataire en :

- cliquant sur l'icône favoris ★
- remplissant les critères avec le champ « destinataire »
- cliquant sur l'icône « recherche ».

Vous pouvez ajouter des destinataires supplémentaires en cliquant sur le bouton**Ajouter un destinataire supplémentaire**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

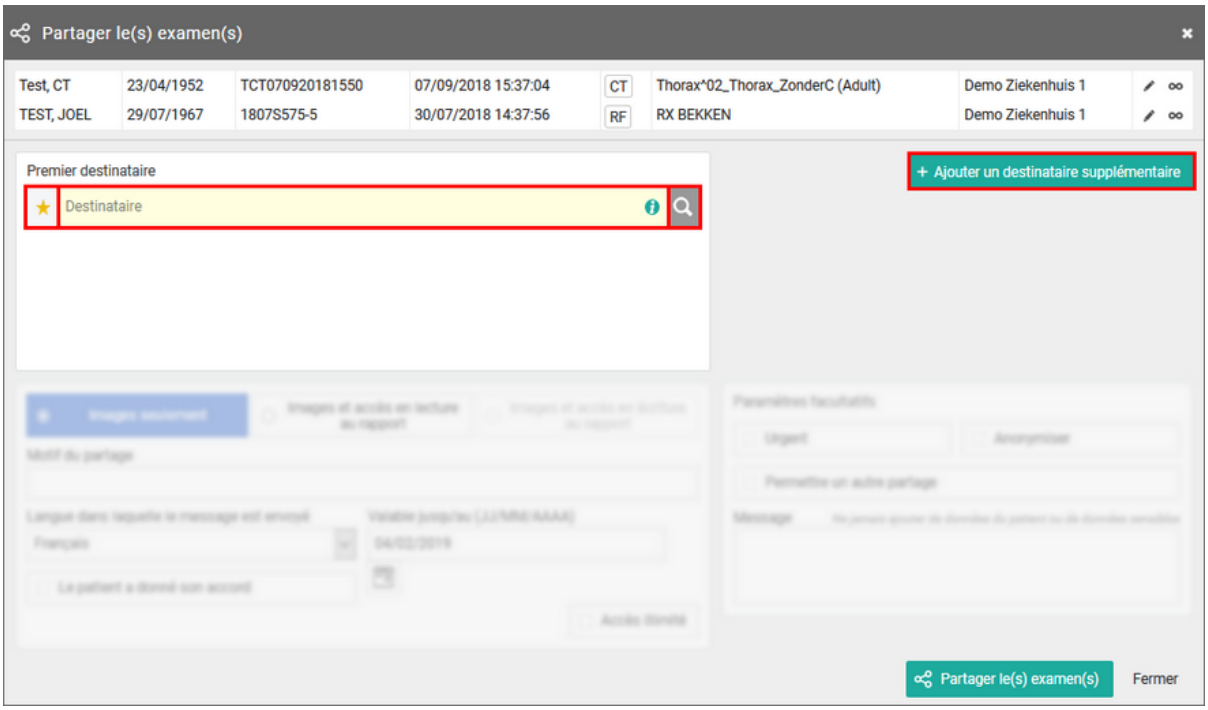


1. Favoris ★ :

En cliquant sur l'icône, votre liste de favoris s'affichera.

Un clic sur un favori ajoutera automatiquement ce groupe comme destinataire.

Vous pouvez ajouter des favoris à votre liste :

- à partir de votre carnet d'adresses (Page 122)
- en recherchant un groupe et en mettant en évidence l'icône étoile

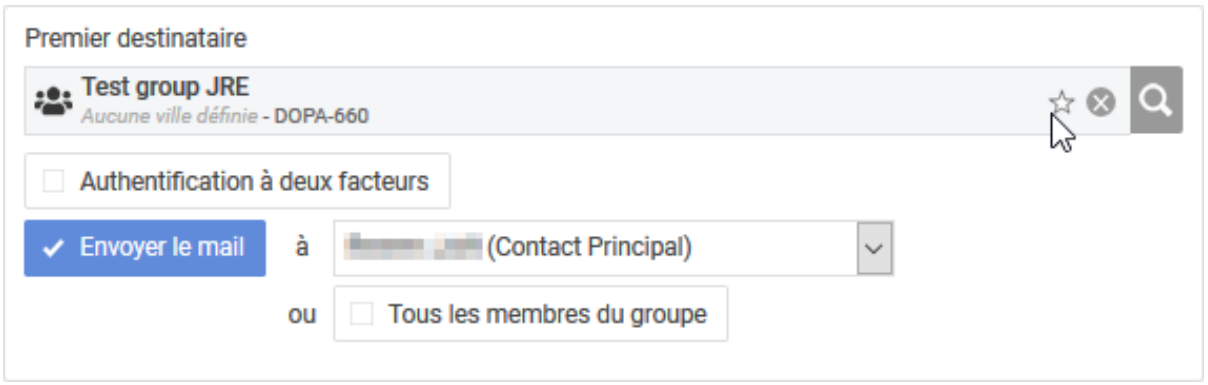

Important !

Attention : le groupe sera ajouté à votre liste de favoris une fois l'action de partage terminée.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

2. Rechercher un destinataire

Dans la barre de recherche, vous pouvez trouver des groupes en cherchant :


- le nom du groupe

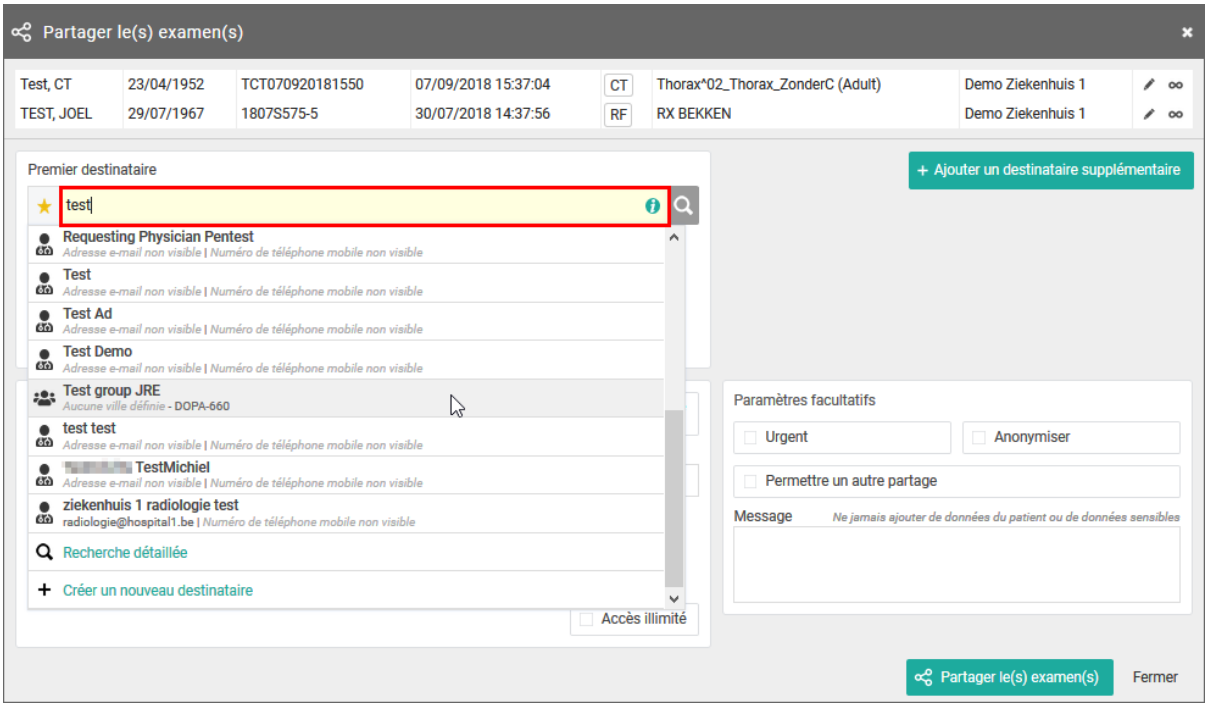

3. Recherche détaillée

À partir de cet écran, vous pouvez utiliser des critères de sélection spécifiques pour rechercher et sélectionner l'utilisateur, le groupe ou le service de radiologie souhaité comme destinataire.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

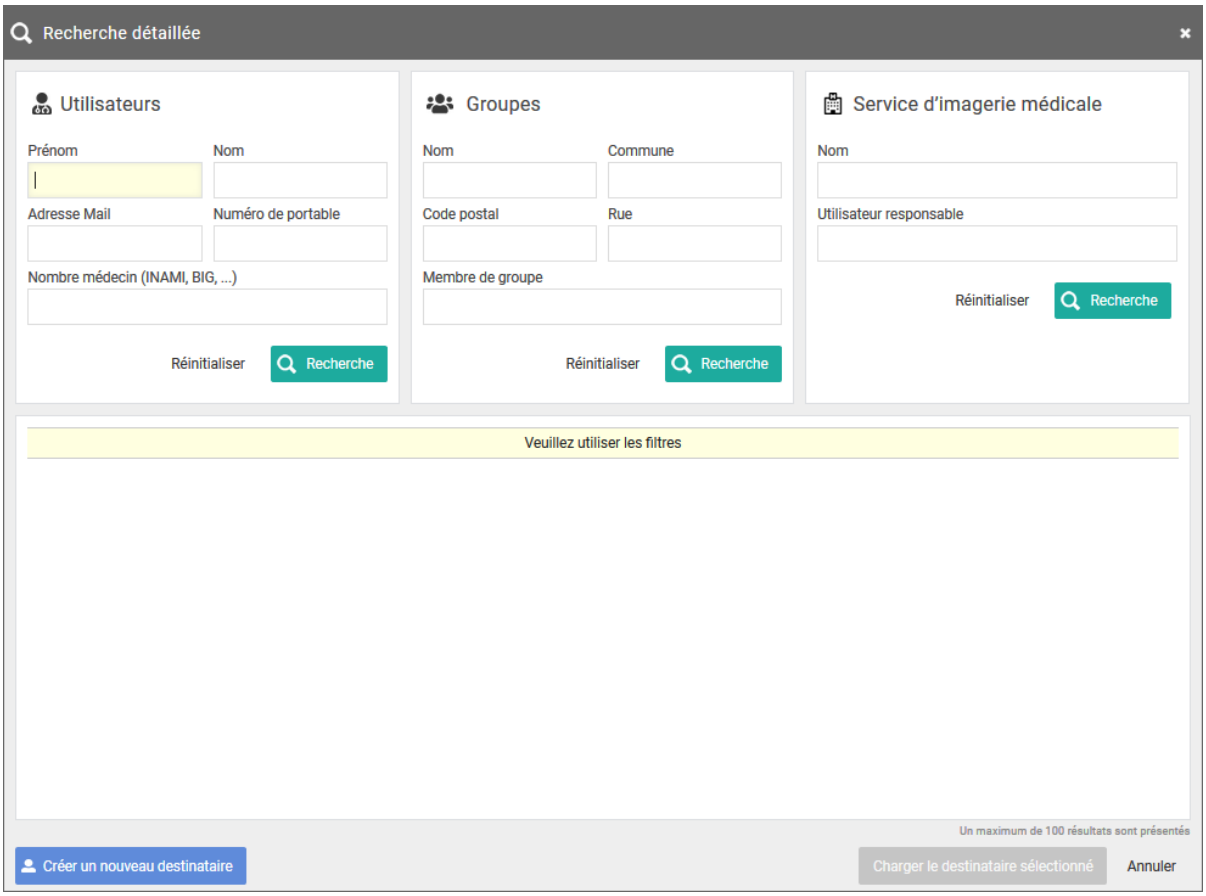

Si vous avez sélectionné un destinataire, vous pouvez ajouter les options suivantes :

- authentification à deux facteurs

  Si un membre du groupe veut consulter l'examen partagé, un mot de passe à usage unique sera envoyé au numéro de téléphone portable enregistré et doit être saisi avant que l'accès ne soit donné.

Important !

Si l'utilisateur fournit un mot de passe à usage unique (OTP) erroné 5 fois de suite, l'ensemble partagé est verrouillé.

L'ensemble partagé peut être déverrouillé par le Service Desk ou par un utilisateur administrateur du service de radiologie expéditeur (voir Statut du transfert (Page 187))

- Envoyer un e-mail

  Tous les utilisateurs ou seulement l'utilisateur sélectionné du groupe avec lequel l'examen a été partagé recevront un e-mail avec les informations suivantes :

  - qui a partagé l'examen

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- qui a partagé l'examen
- quel examen a été partagé (patient, description de l'examen, date de l'examen) + un lien pour ouvrir cet examen
- le message si un message a été rempli lors du partage

ÉTAPE 3 : Paramètres de partage

1. Lors du partage d'un examen avec un utilisateur, vous pouvez opter pour

- Images et accès en lecture au compte-rendu
- Images et accès en écriture au compte-rendu

Conseil :

L'option « Images seulement » n'est pas disponible lors du partage avec un groupe.

2. Vous devez enregistrer un « Motif de partage ». Le motif n'est pas communiqué au destinataire, mais il est obligatoire et sera enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.

3. La langue, utilisée pour l'envoi du message :

La langue du contact principal du groupe est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez changer la langue en utilisant le menu déroulant.

Important !

Si vous sélectionnez plusieurs destinataires avec des langues différentes, le courrier est envoyé à tous les destinataires, en utilisant la langue du premier destinataire.

Toutefois, si la majorité des destinataires ont la même langue, c'est la langue qui sera sélectionnée automatiquement.

4. Valable jusqu'au (JJ/MM/AAAA)

Par défaut, la période de validité est fixée à 1 mois, mais vous pouvez la modifier en :

- remplissant la période souhaitée manuellement
- sélectionnant une date, à l'aide de l'icône de calendrier
- sélectionnant l'option « Accès illimité ».

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

La période de validité par défaut peut être configurée pour chaque service de radiologie destinateur. DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.

L'option « Accès illimité » peut également être désactivée à un niveau source.

PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.


5. Le patient a donné son accord

La case à cocher « Le patient a donné son accord » doit toujours être activée, car sans le consentement du patient, l'examen ne peut être partagé.

6. Ajouter libellé

Cette option permet d'ajouter un libellé à l'examen.

Activez la case à cocher pour sélectionner un libellé. Le libellé peut aussi être configuré pour l'utilisateur ou pour un groupe.

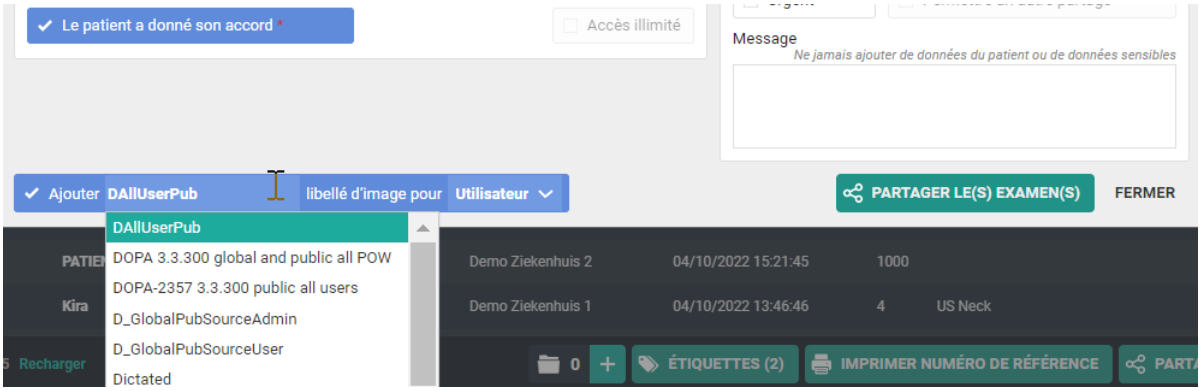

7. Paramètres facultatifs

- « Urgent » :

  Cela ajoute « Urgent » à l'objet de l'e-mail correspondant.

- « Anonymiser » :

  Cela remplace le nom du patient :

  - Le prénom est remplacé par un nombre.
  - Le nom est remplacé par « Anonyme ».

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Le compte-rendu d'un examen anonymisé ne sera jamais accessible, même si vous avez sélectionné l'option « Images et accès en lecture au compte-rendu » ou « Images et accès en écriture au compte-rendu ».

- Permettre un autre partage

  L'activation de cette option permet au destinataire de partager l'examen avec d'autres destinataires.
- Message

Important !

Contrairement au partage avec un utilisateur, le message n'est pas disponible en tant que série distincte dans l'examen et aucune étiquette « Message » n'est ajoutée.

Il est ajouté à l'e-mail, envoyé au destinataire.

Conseil :


Lors du partage d'un examen avec un groupe, les mêmes valeurs sont sélectionnées automatiquement pour les paramètres suivants lors de la prochaine opération de partage avec un groupe :

- Authentification à deux facteurs
- Envoyer un e-mail

STEP 4 : Confirmation

Une fenêtre pop-up s'affiche en indiquant les informations.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

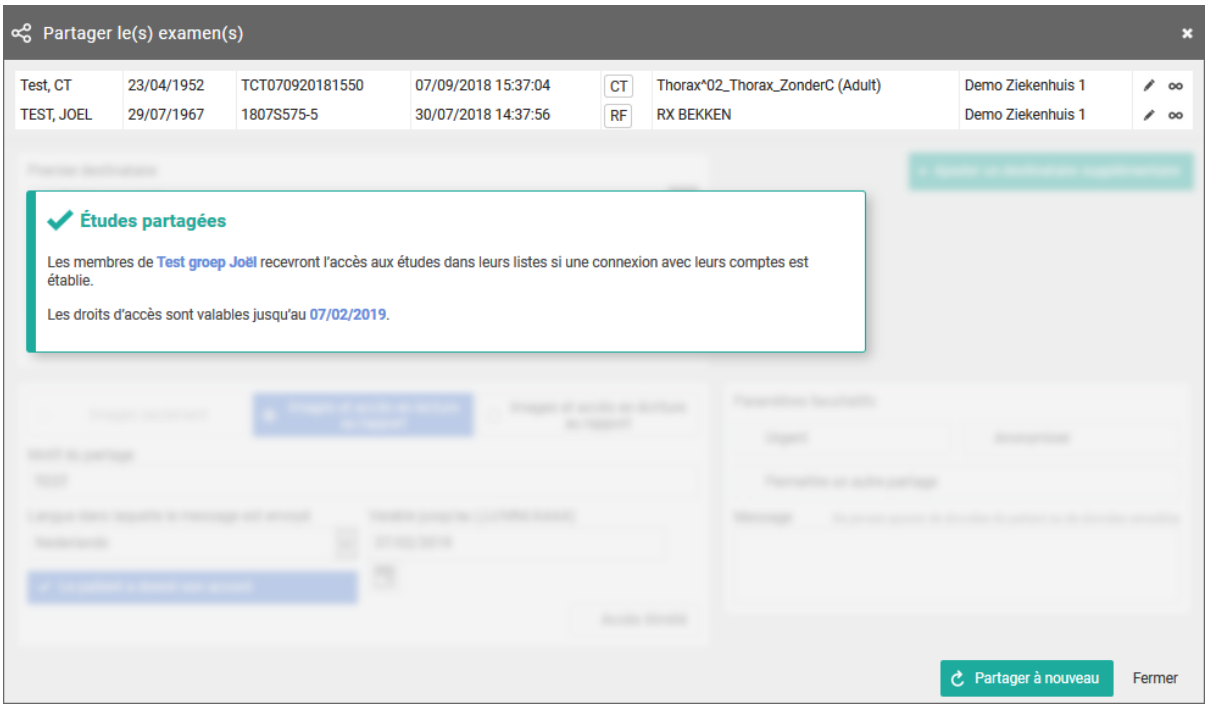


- Le bouton **Copier cette information** permet de copier le contenu de la fenêtre contextuelle dans le presse-papiers afin de pouvoir, par exemple, le coller dans votre propre e-mail.
- Si l'option « Envoyer le mail » a été cochée, selon le choix effectué, la personne sélectionnée ou tous les membres du groupe recevront un courrier électronique.
- l'examen est disponible dans la liste récapitulative pour tous les membres du groupe et ce jusqu'à expiration de la durée de validité
- En utilisant**Partager à nouveau**, vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'examens avec un autre destinataire.

5.7.3 Partage d'examens avec un service de radiologie

Dans les instructions suivantes, vous découvrirez comment partager un examen avec un service de radiologie

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

STEP 1 : Sélectionnez les examens que vous souhaitez partager

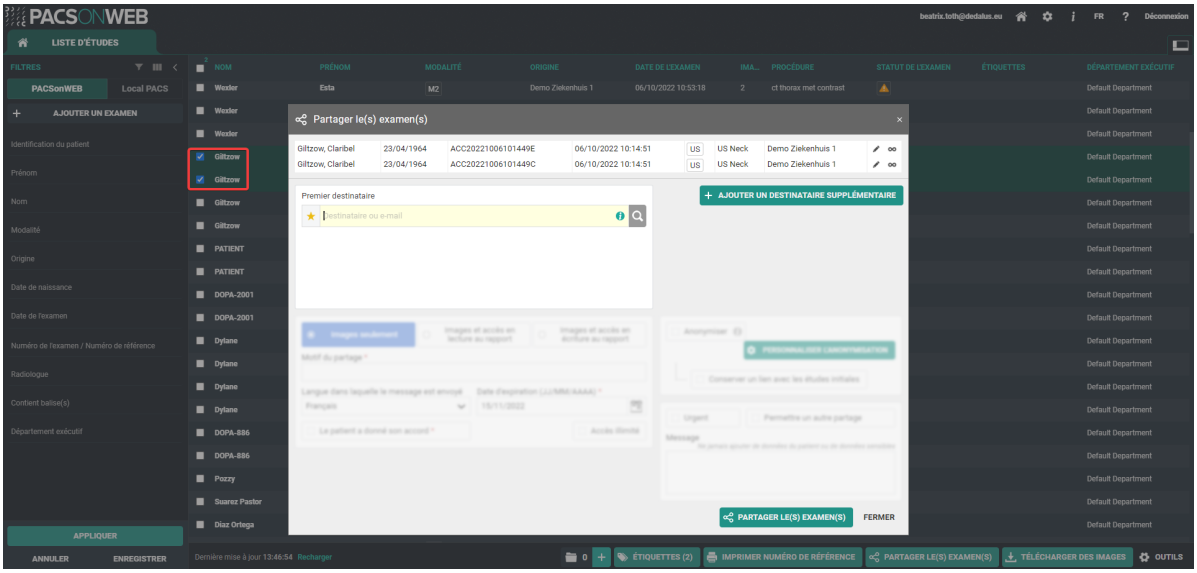

STEP 2 : Sélectionnez votre/vos destinataire(s)


Vous pouvez sélectionner un destinataire en :

- cliquant sur l'icône favoris ★
- remplissant les critères avec le champ « destinataire »
- cliquant sur l'icône rechercher

Vous pouvez ajouter des destinataires supplémentaires en cliquant sur le bouton**Ajouter un destinataire supplémentaire**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

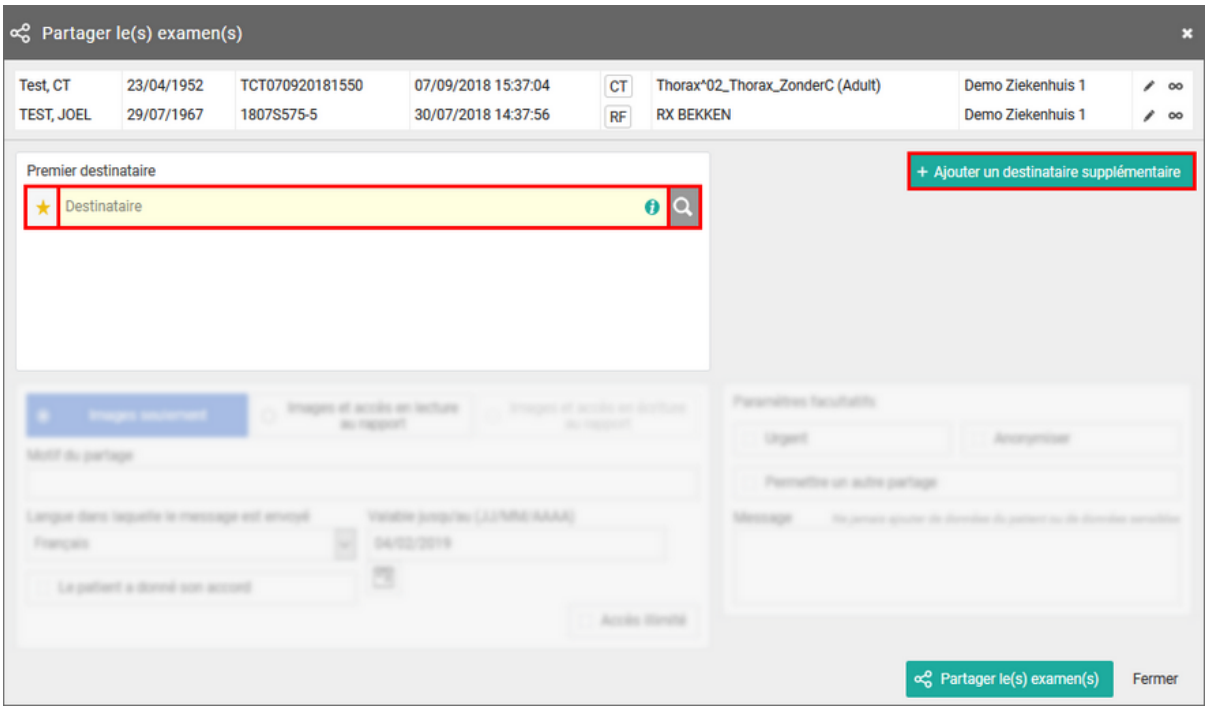

1. Favoris ★ :

En cliquant sur l'icône, votre liste de favoris s'affichera.


Un clic sur un favori ajoutera automatiquement ce groupe comme destinataire.

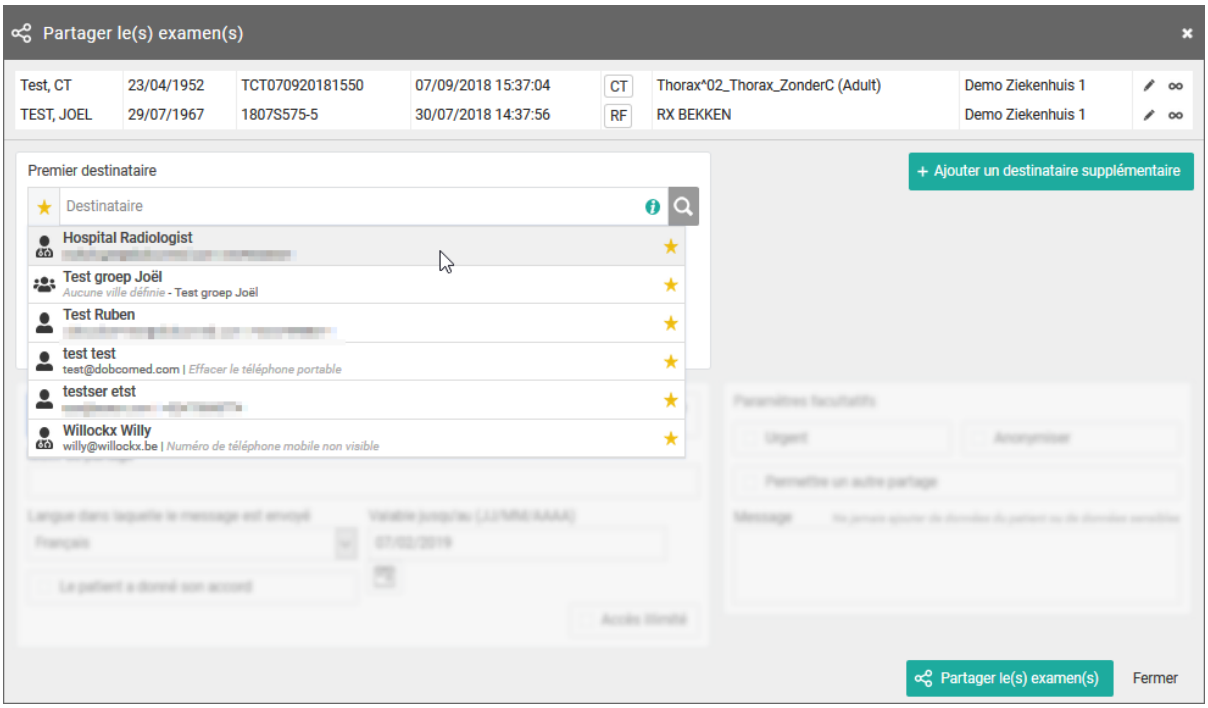

Vous pouvez ajouter des favoris à votre liste :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- à partir de votre carnet d'adresses (Page 122)
- en recherchant un utilisateur et en mettant en évidence l'icône étoile

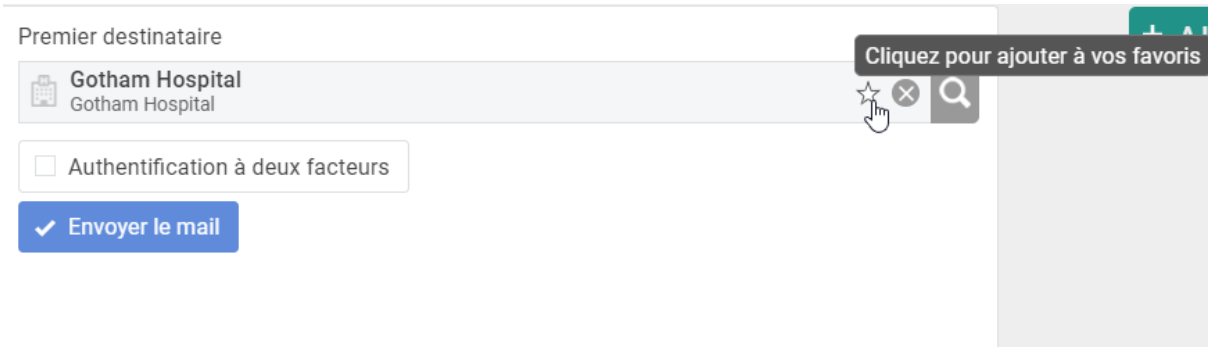


Important !

Attention : l'utilisateur sera ajouté à votre liste de favoris une fois l'action de partage terminée.

2. Rechercher un destinataire

Dans la barre de recherche, « destinataire », vous pouvez rechercher un service d'imagerie médicale en cherchant :

- le nom du service d'imagerie médicale

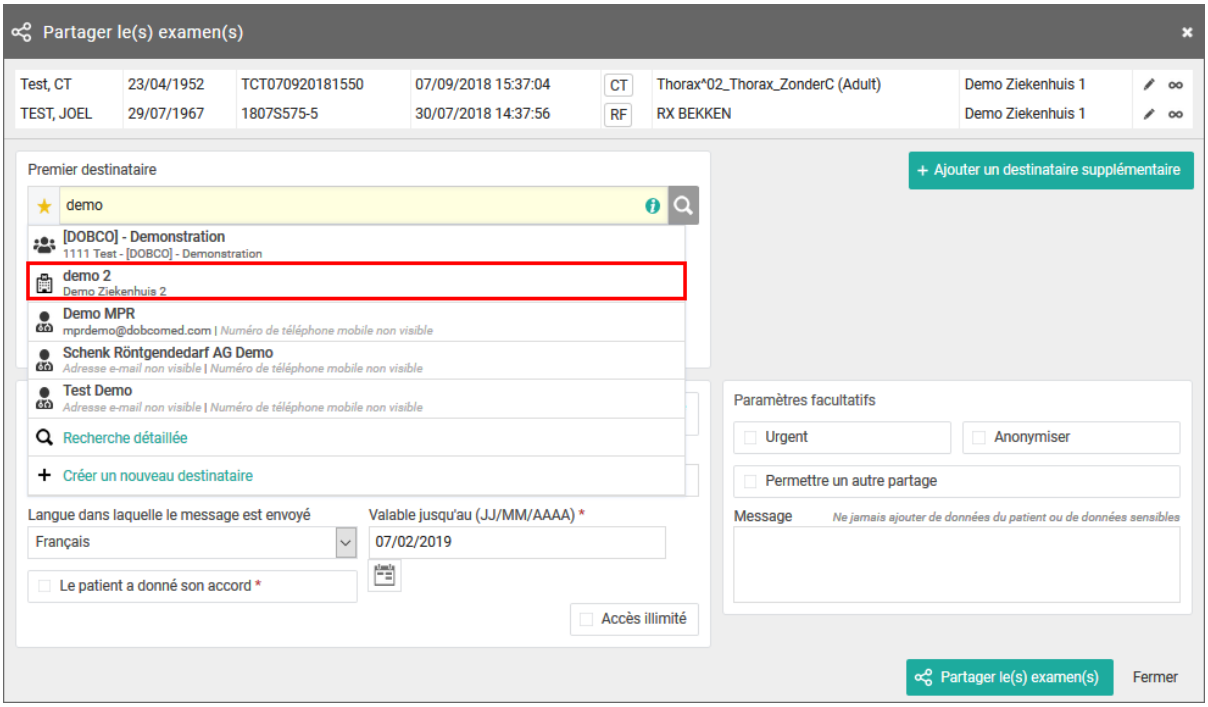


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Lorsque vous passez au-dessus de l'icône d'informations , des informations supplémentaires sur le service médical sélectionné s'affichent.

3. Recherche détaillée

À partir de cet écran, vous pouvez utiliser des critères de sélection spécifiques pour rechercher et sélectionner l'utilisateur, le groupe ou le service de radiologie souhaité comme destinataire.

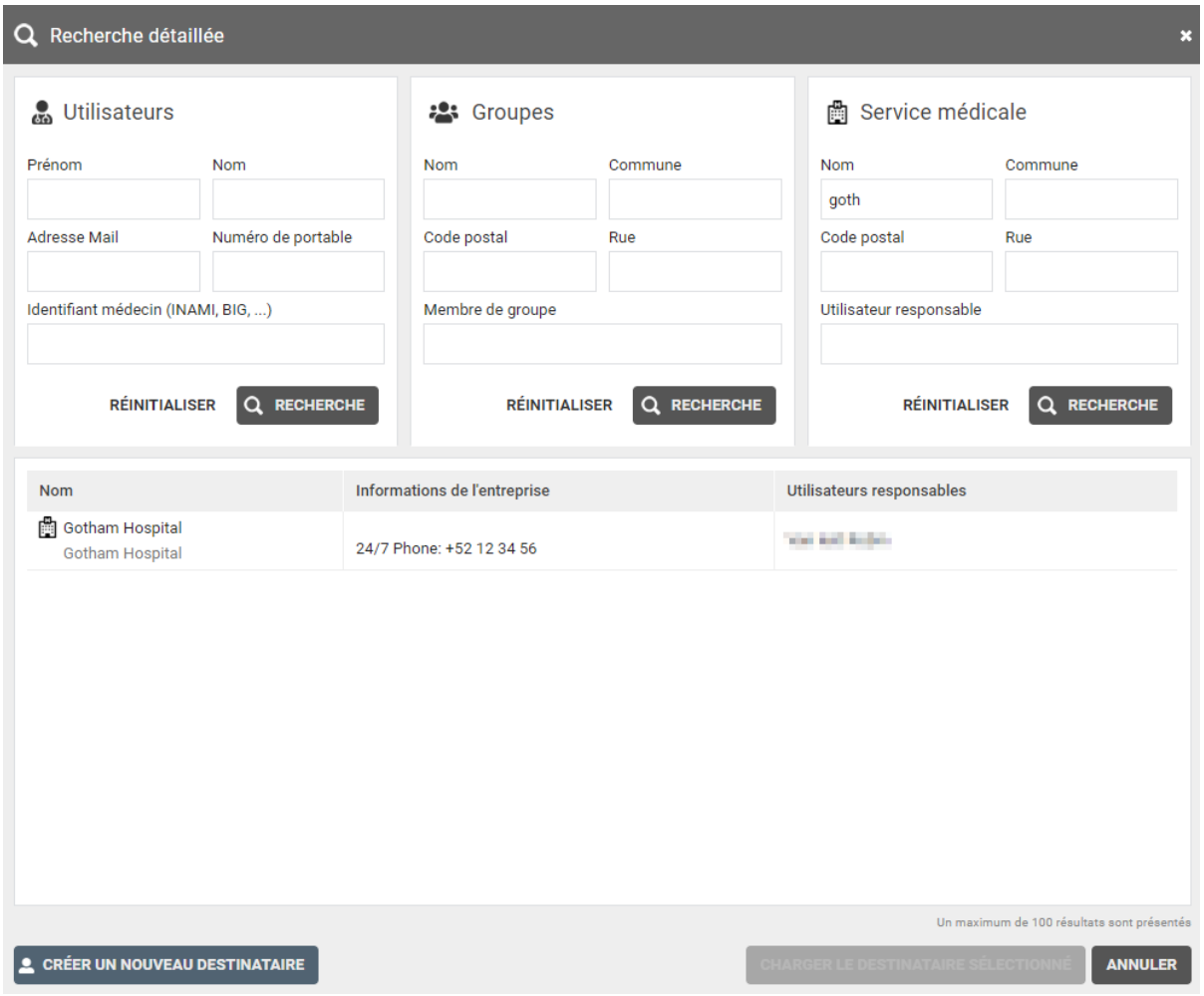

Si vous avez sélectionné un destinataire, vous pouvez ajouter les options suivantes :

- authentification à deux facteurs

  Si un membre du service de radiologie veut consulter l'examen partagé, un mot de passe à usage unique sera envoyé au numéro de téléphone portable enregistré et doit être saisi avant que l'accès ne soit donné

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Si l'utilisateur fournit un mot de passe à usage unique (OTP) erroné 5 fois de suite, l'ensemble partagé est verrouillé.

L'ensemble partagé peut être déverrouillé par le Service Desk ou par un utilisateur administrateur du service de radiologie expéditeur (voir Statut du transfert (Page 187))

- Envoyer un e-mail

  L'e-mail sera envoyé à tous les utilisateurs du service de radiologie qui sont marqués comme « responsables » et qui ont indiqué qu'ils souhaitaient recevoir ce type d'e-mails. l'indication qu'un examen a été partagé
  - qui a partagé l'examen
  - qui a partagé l'examen
  - quel examen a été partagé (patient, description de l'examen, date de l'examen) + un lien pour ouvrir cet examen
  - le message si un message a été rempli lors du partage

ÉTAPE 3 : Paramètres de partage

1. Lors du partage d'un examen avec un service de radiologie, vous pouvez opter pour

- Images et accès en lecture au compte-rendu
- Images et accès en écriture au compte-rendu

Conseil :

L'option « Images seulement » n'est pas disponible lors du partage avec un service d'imagerie médicale.

2. Vous devez enregistrer un « Motif de partage ». Le motif n'est pas communiqué au destinataire, mais il est obligatoire et sera enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.



3. La langue, utilisée pour l'envoi du message :

La langue du premier destinataire est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez changer la langue en utilisant le menu déroulant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Important !

Si vous sélectionnez plusieurs destinataires avec des langues différentes, le courrier est envoyé à tous les destinataires, en utilisant la langue du premier destinataire.

Toutefois, si la majorité des destinataires ont la même langue, c'est la langue qui sera sélectionnée automatiquement.

4. Valable jusqu'au (JJ/MM/AAAA)

Par défaut, la période de validité est fixée à 1 mois, mais vous pouvez la modifier en :

- remplissant la période souhaitée manuellement
- sélectionnant une date, à l'aide de l'icône de calendrier
- sélectionnant l'option « Accès illimité ».

Conseil :

La période de validité par défaut peut être configurée pour chaque service de radiologie destinateur. DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.

L'option « Accès illimité » peut également être désactivée à un niveau source.

PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.

5. Le patient a donné son accord

La case à cocher « Le patient a donné son accord » doit toujours être activée, car sans le consentement du patient, l'examen ne peut être partagé.


6. Ajouter libellé

Cette option permet d'ajouter un libellé à l'examen.

Activez la case à cocher pour sélectionner un libellé. Le libellé peut aussi être configuré pour l'utilisateur ou pour un groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

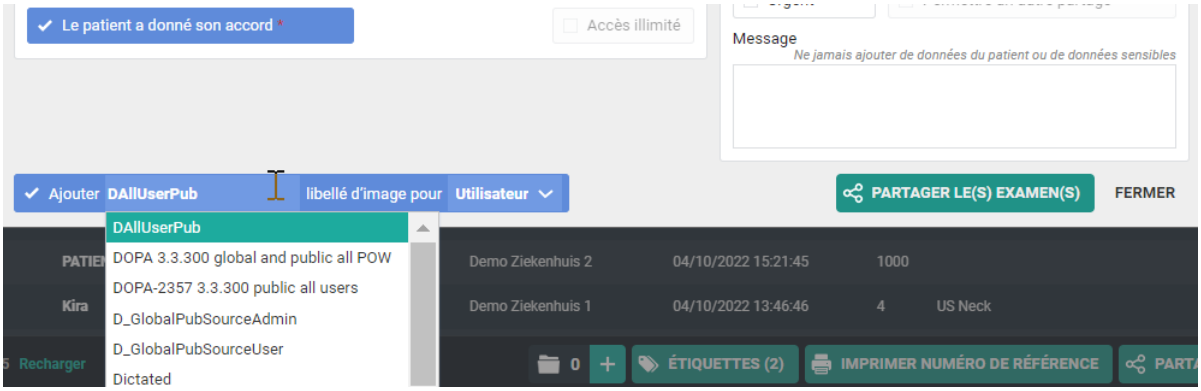

7. Paramètres facultatifs

- « Urgent »:

  Cela ajoute « Urgent » à l'objet de l'e-mail correspondant.

- « Anonymiser » :

  Cela remplace le nom du patient :

  - Le prénom est remplacé par un nombre.
  - Le nom est remplacé par « Anonyme ».

Important !

Le compte-rendu d'un examen anonymisé ne sera jamais accessible, même si vous avez sélectionné l'option « Images et accès en lecture au compte-rendu » ou « Images et accès en écriture au compte-rendu ».

- Permettre un autre partage

  L'activation de cette option permet au destinataire de partager l'examen avec d'autres destinataires.

- Message

Important !

Contrairement au partage avec un utilisateur, le message n'est pas disponible en tant que série distincte dans l'examen et aucune étiquette « Message » n'est ajoutée.

Il est ajouté à l'e-mail, envoyé au destinataire.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Conseil :

Lors du partage d'un examen avec un service d'imagerie médicale, les mêmes valeurs sont sélectionnées automatiquement pour les paramètres suivants lors de la prochaine opération de partage avec un service :

- Authentification à deux facteurs
- Envoyer un e-mail

STEP 4 : Confirmation

Une fenêtre pop-up s'affiche en indiquant les informations.

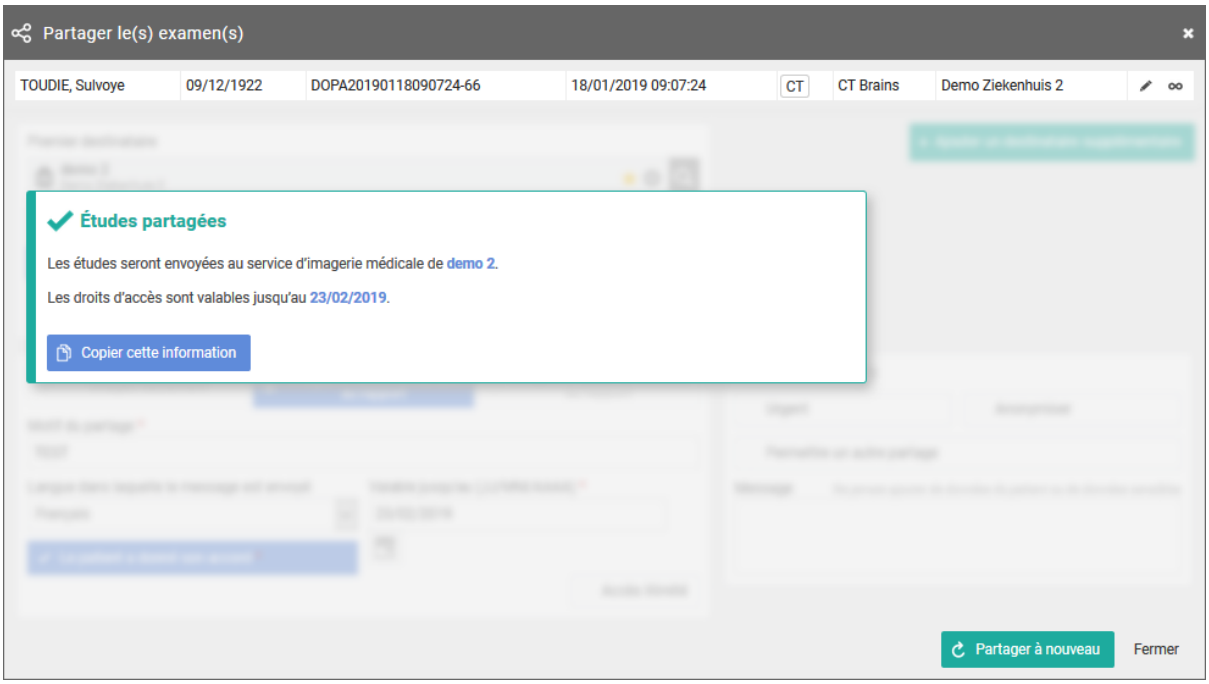

- Avec le bouton « Copier cette information », le contenu de la fenêtre pop-up est copié dans le presse-papiers afin qu'il puisse p.ex. être collé dans votre propre courrier électronique.
- Si l'option « Envoyer le mail » a été cochée, tous les utilisateurs, marqué en tant que responsable pour le département, recevront un courrier électronique.
- En utilisant « Partager à nouveau », vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'études avec un autre destinataire.
- En utilisant « Partager à nouveau », vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'études avec d'autres destinataires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


5.7.4 Partage d'examens avec un destinataire autodéfini

Dans les instructions suivantes, vous découvrirez comment partager un examen avec un destinataire autodéfini .

Conseil :

Un destinataire autodéfini est une personne qui n'a pas de compte sur DeepUnity PACSonWEB, par exemple un patient.

STEP 1 : Sélectionnez les examens que vous souhaitez partager.

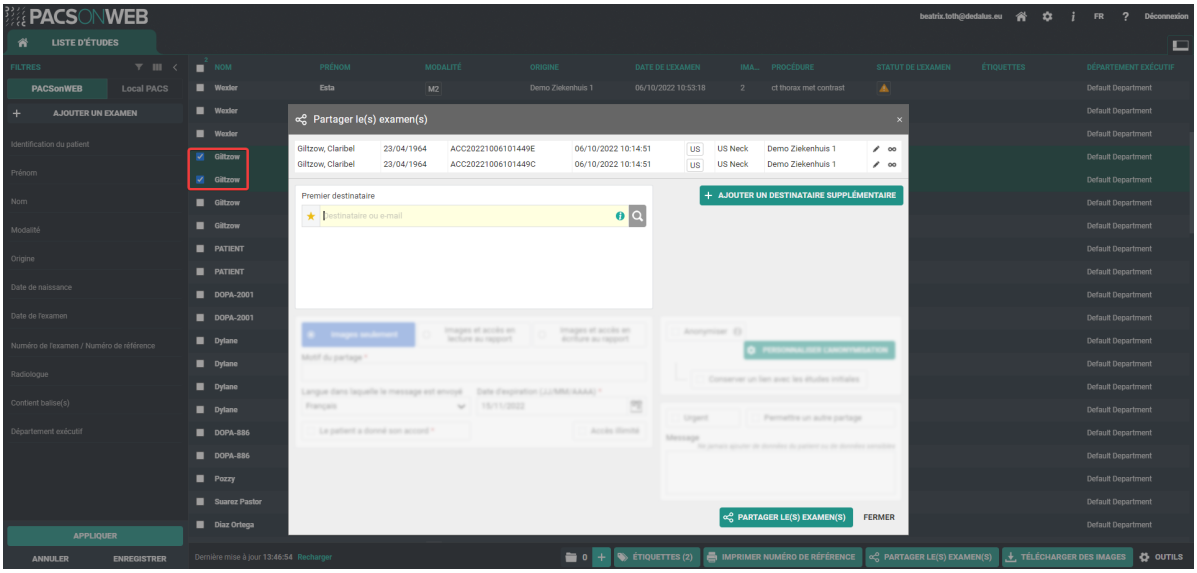


STEP 2 : Sélectionnez votre/vos destinataire(s).

Vous pouvez sélectionner un destinataire en :

1. cliquant sur l'icône favoris .
2. remplissant les critères avec le champ « destinataire ».
3. cliquant sur l'icône rechercher

Vous pouvez ajouter des destinataires supplémentaires en cliquant sur **Ajouter un destinataire supplémentaire**.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

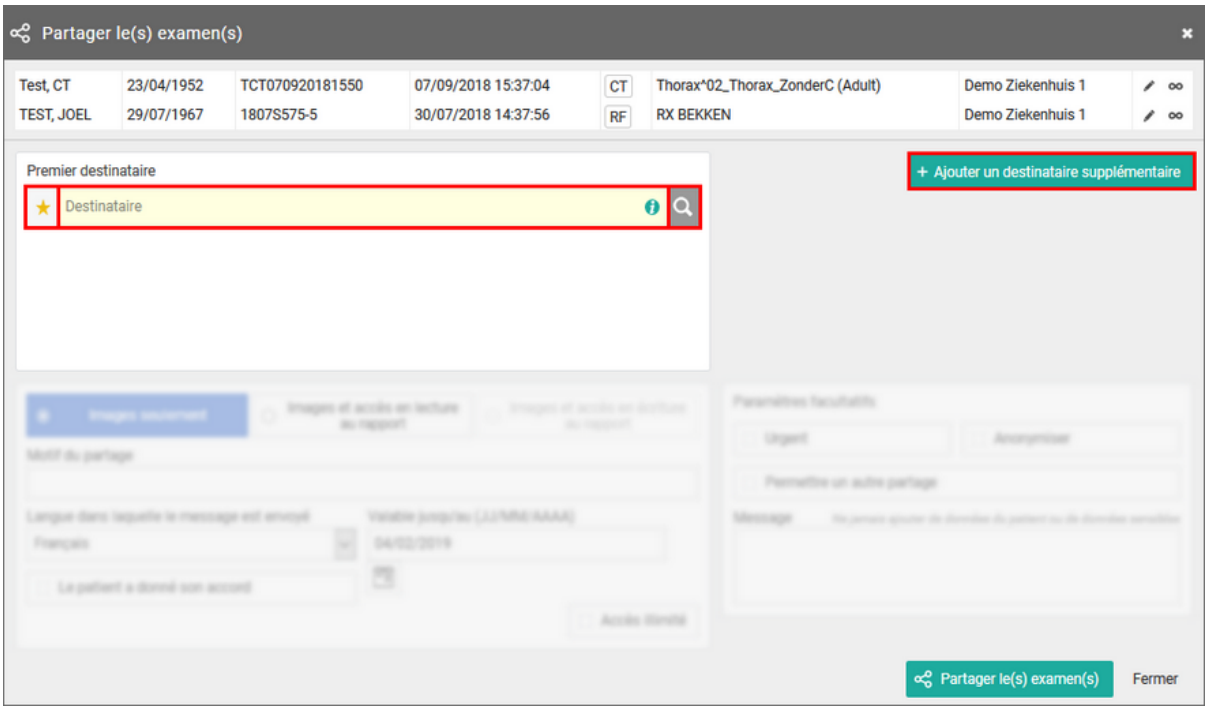

1. Favoris ★

En cliquant sur l'icône, votre liste de favoris s'affichera.

Un clic sur un favori ajoutera automatiquement cet utilisateur comme destinataire.

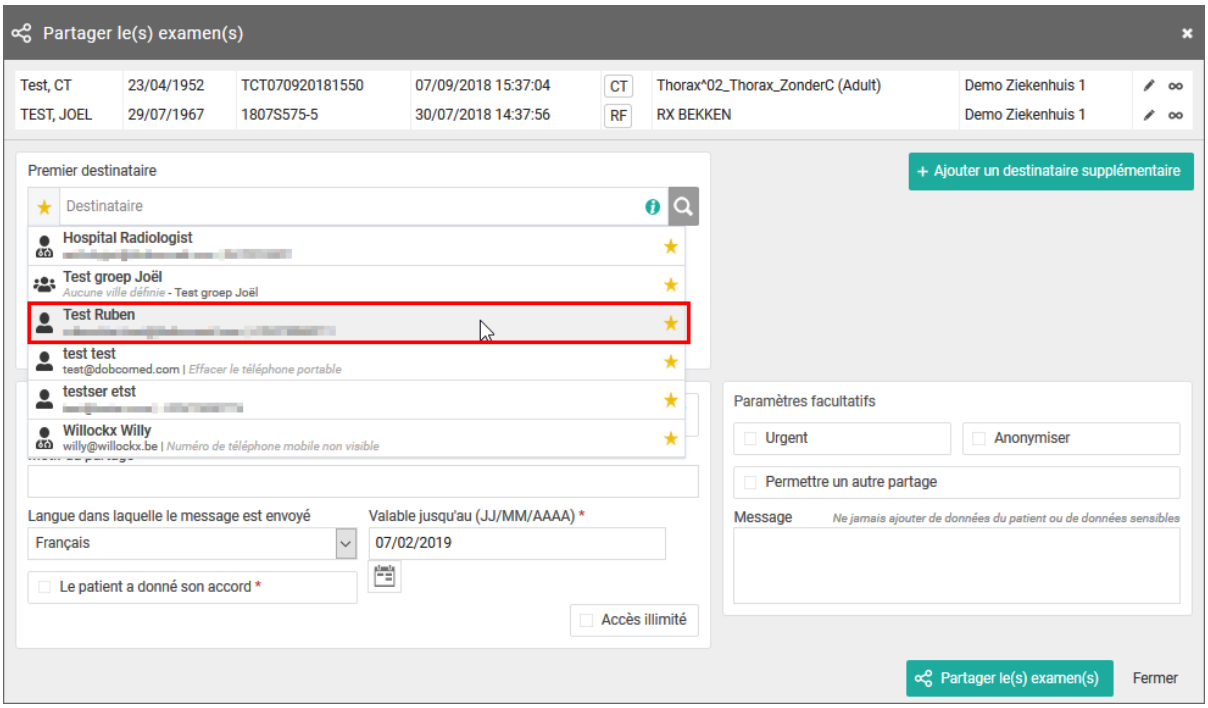

Vous pouvez gérer vos favoris par le biais de votre carnet d'adresses (Page 122).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

2. Rechercher un destinataire

Dans la barre de recherche, « destinataire », vous pouvez rechercher en cherchant :

- Prénom
- Nom de famille
- Numéro de portable
- Adresse e-mail


Si votre recherche ne donne pas le destinataire que vous recherchez, vous pouvez ajouter un nouveau destinataire autodéfini :

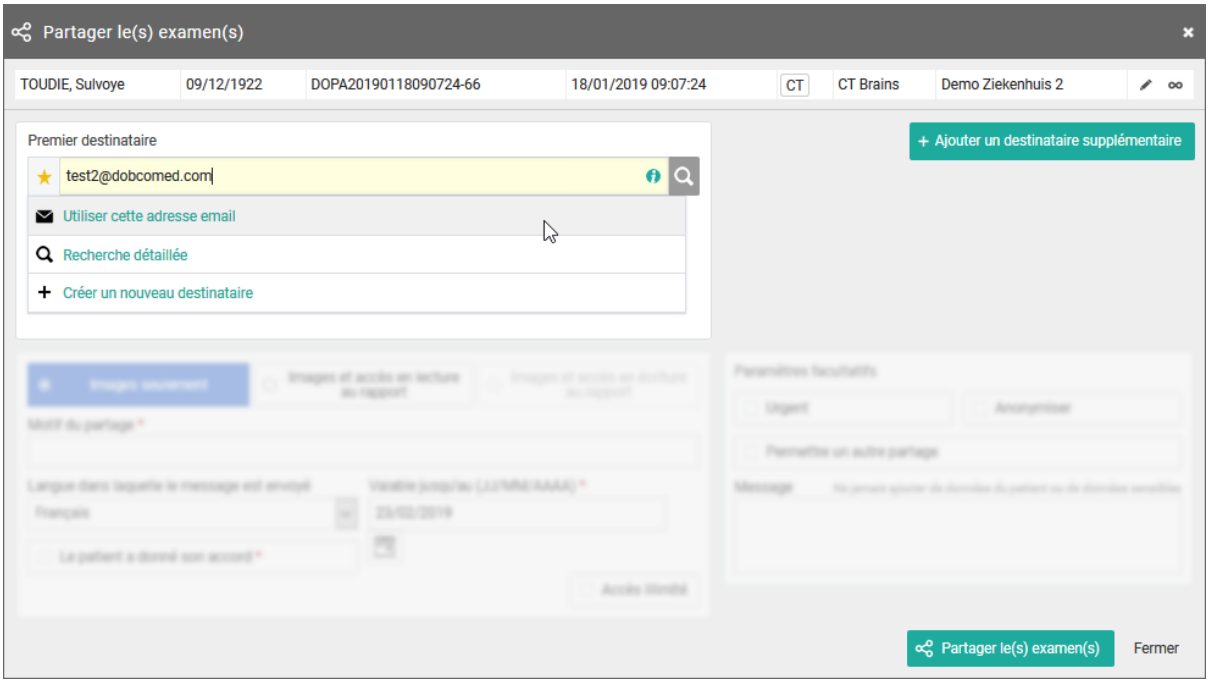

Si vous saisissez une adresse e-mail dans le champ de recherche, vous avez également la possibilité de transmettre un code de référence sans créer d'utilisateur autodéfini.

Pour partager les examens sélectionnés de cette manière, cliquez sur **Utiliser cette adresse e-mail**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

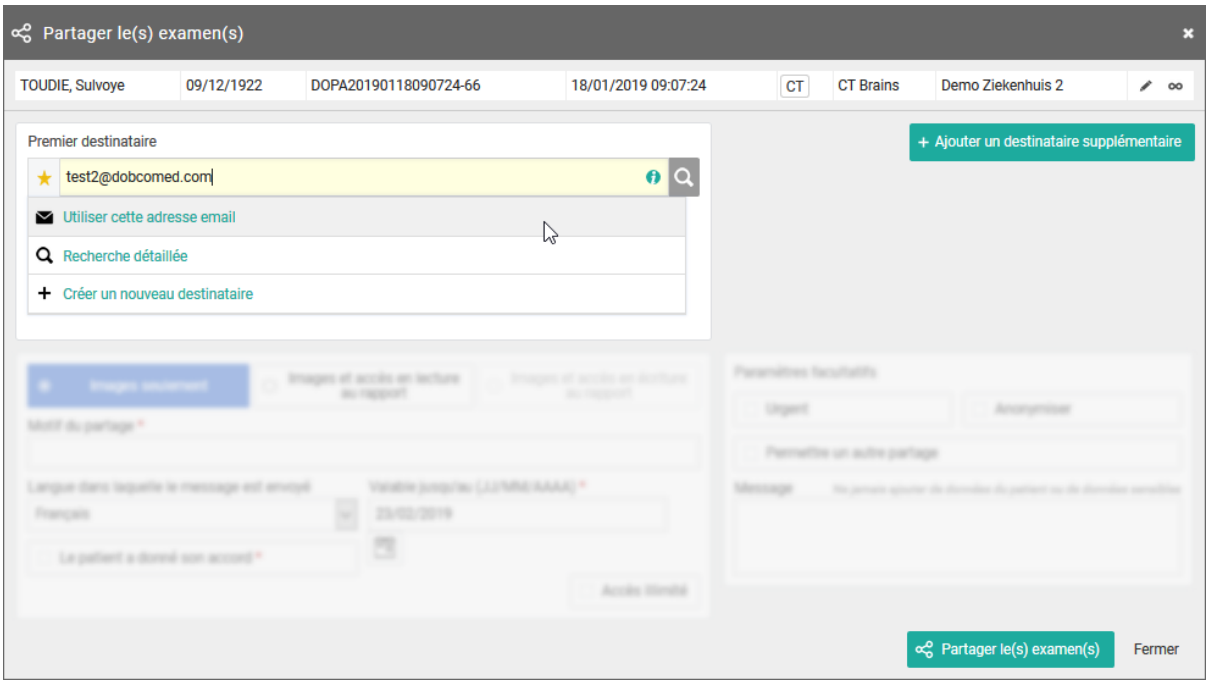


3. Recherche détaillée

À partir de cet écran, vous pouvez utiliser des critères de sélection spécifiques pour rechercher et sélectionner l'utilisateur, le groupe ou le service de radiologie souhaité comme destinataire.

Au bas de cet écran, vous avez la possibilité d'ajouter un destinataire autodéfini.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

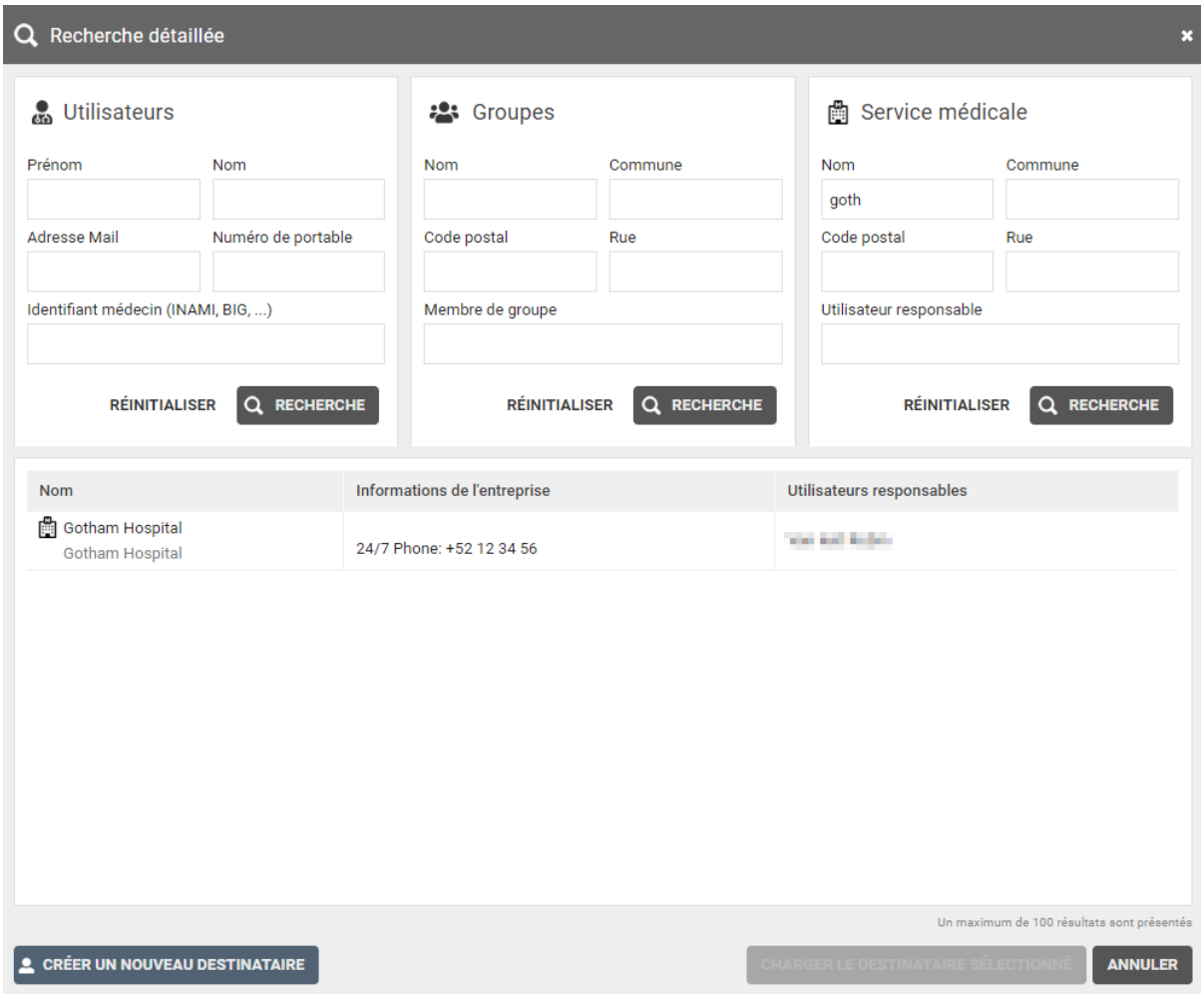

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, il est obligatoire d'enregistrer le nom de famille et l'adresse e-mail du destinataire.

Si vous souhaitez envoyer le code de référence ou le mot de passe à usage unique par SMS, vous devrez également indiquer le numéro de téléphone portable.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

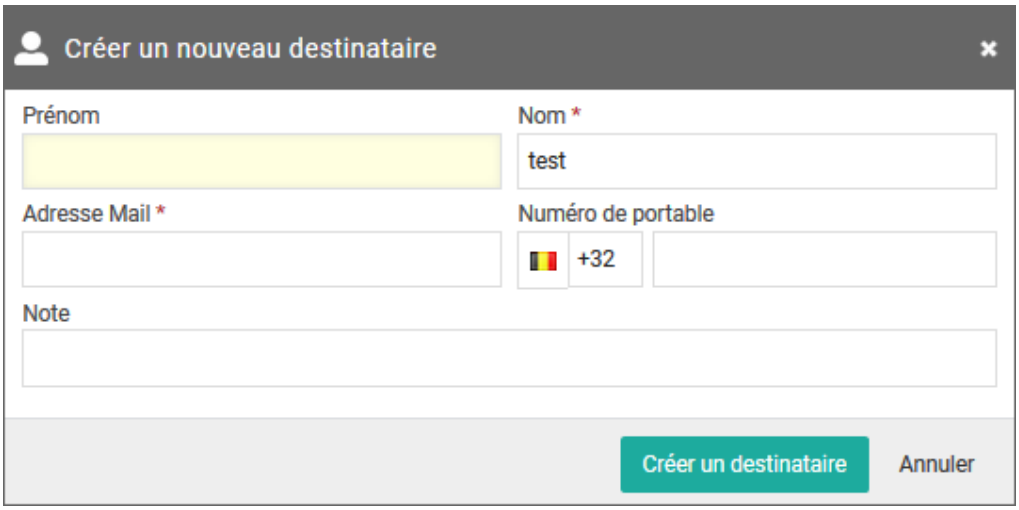

Le code pays + drapeau utilisé par défaut est déterminé selon la logique suivante :

- Lors de la saisie d'un numéro de téléphone dans une boîte de dialogue de partage ou d'impression de numéro de référence :
  - le dernier code pays utilisé pour cet ordinateur et ce navigateur (enregistré dans un cookie) ;
  - à défaut de cookie, le code pays le plus fréquemment utilisé à partir du carnet d'adresses personnel ;
  - si aucun contact n'a encore été enregistré, « +32 » est utilisé.
- Lors de l'ajout d'un nouveau contact au carnet d'adresses personnel :
  - le code pays le plus fréquemment utilisé à partir du carnet d'adresses personnel ;
  - si aucun contact n'a encore été enregistré, « +32 » est utilisé.

Conseil :

Lorsque vous créez un destinataire autodéfini, il est automatiquement ajouté à vos favoris.

Lorsque vous sélectionnez un destinataire autodéfini, vous pouvez choisir d'envoyer le numéro de référence par e-mail ou par SMS.

Si vous souhaitez appliquer une authentification à deux facteurs supplémentaire, un mot de passe à usage unique vous sera envoyé par e-mail ou par SMS lorsque vous saisirez le numéro de référence et la date de naissance sur le portail des patients.

Par défaut, si le numéro de référence est communiqué par e-mail, le mot de passe à usage unique sera transmis par message texte, et inversement.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

L'envoi des deux identifiants (numéro de référence + mot de passe à usage unique) par le même moyen (e-mail ou SMS) est uniquement possible sur autorisation explicite de la source de l'examen concerné.

Important !

Si l'utilisateur saisit un OTP incorrect 5 fois de suite, l'ensemble partagé est verrouillé.

L'ensemble partagé peut être déverrouillé par le Service Desk ou par un utilisateur administrateur du service de radiologie expéditeur (voir Statut du transfert (Page 187))

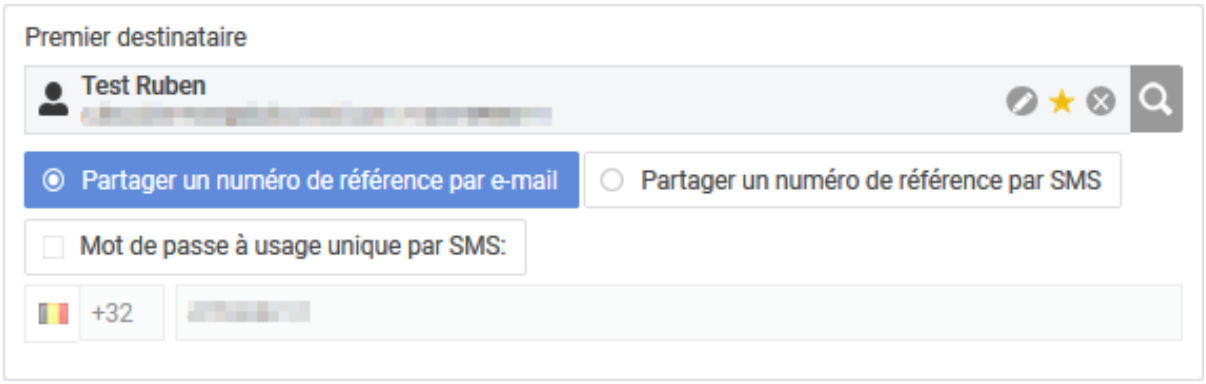

STEP 3 : Paramètres de partage

1. Lors du partage d'un examen avec un utilisateur, vous pouvez opter pour

- Images seulement
- Images et accès en lecture au compte-rendu

Conseil :

L'option **Images et accès en écriture au compte-rendu** n'est pas disponible lors du partage avec un destinataire autodéfini.

2. Vous devez enregistrer un « Motif de partage ». Le motif n'est pas communiqué au destinataire, mais il est obligatoire et sera enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.

3. La langue, utilisée pour l'envoi du message :

La langue du premier destinataire est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez changer la langue en utilisant le menu déroulant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Si vous sélectionnez plusieurs destinataires avec des langues différentes, le courrier est envoyé à tous les destinataires, en utilisant la langue du premier destinataire.

Toutefois, si la majorité des destinataires ont la même langue, c'est la langue qui sera sélectionnée automatiquement.

4. Valable jusqu'au (JJ/MM/AAAA)

Par défaut, la période de validité est fixée à 1 mois, mais vous pouvez la modifier en :

- remplissant la période souhaitée manuellement
- sélectionnant une date, à l'aide de l'icône de calendrier

Conseil :

La période de validité par défaut peut être configurée pour chaque service de radiologie destinateur. DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.

Dans le cas où une configuration spécifique est souhaitée, veuillez contacter le service d'assistance.

L'option « Accès illimité » n'est pas disponible pour un destinataire autodéfini.


5. Le patient a donné son accord

La case à cocher « Le patient a donné son accord » doit toujours être activée, car sans le consentement du patient, l'examen ne peut être partagé.

6. Ajouter libellé

Cette option permet d'ajouter un libellé à l'examen.

Activez la case à cocher pour sélectionner un libellé. Le libellé peut aussi être configuré pour l'utilisateur ou pour un groupe.

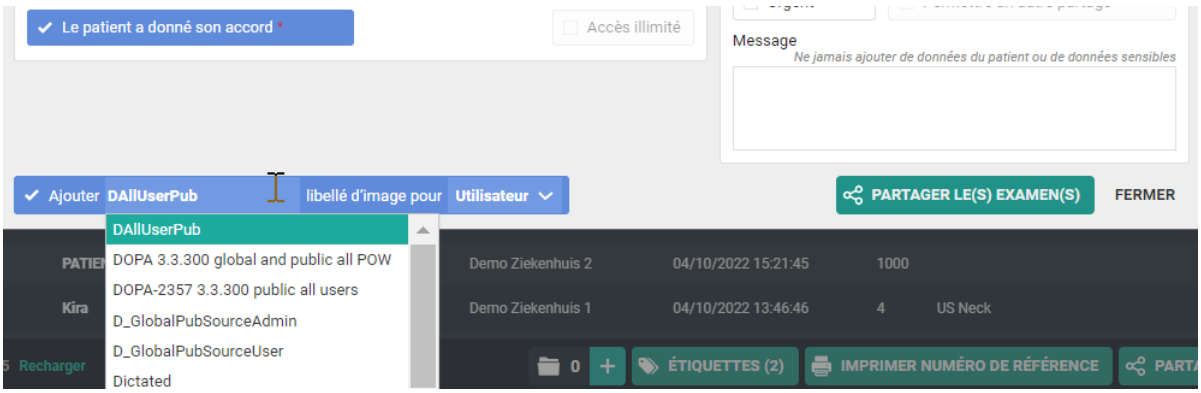

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

7. Paramètres facultatifs

- « Urgent » :

  Cela ajoute « Urgent » à l'objet de l'e-mail correspondant.

- « Anonymiser » :

  Cela remplace le nom du patient :

  - Le prénom est remplacé par un nombre.
  - Le nom est remplacé par « Anonyme ».
  - L'e-mail ne contient que les initiales du nom du patient. Toutes les autres lettres sont remplacées par « ***** »

Important !

Le compte-rendu d'un examen anonymisé ne sera jamais accessible, même si vous avez sélectionné l'option « Images et accès en lecture au compte-rendu » ou « Images et accès en écriture au compte-rendu ».

- Permettre un autre partage

  Cette option ne peut pas être utilisée pour les destinataires autodéfinis.

- Message

  Si vous ajoutez un message, il est ajouté à l'e-mail, envoyé au destinataire et est visible par le destinataire à l'ouverture de l'examen dans DeepUnity PACSonWEB.

Conseil :


Lors du partage d'un examen avec un destinataire auto-défini, les mêmes valeurs sont sélectionnées automatiquement pour les paramètres suivants lors de la prochaine opération de partage impliquant un destinataire auto-défini :

- Partager le numéro de référence par e-mail / message texte
- Mot de passe à usage unique
- Mot de passe à usage unique par e-mail / message texte
- Mot de passe à usage unique par message texte : préfixe du pays
- Langue

STEP 4 : Confirmation

Une fenêtre pop-up s'affiche en indiquant les informations.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

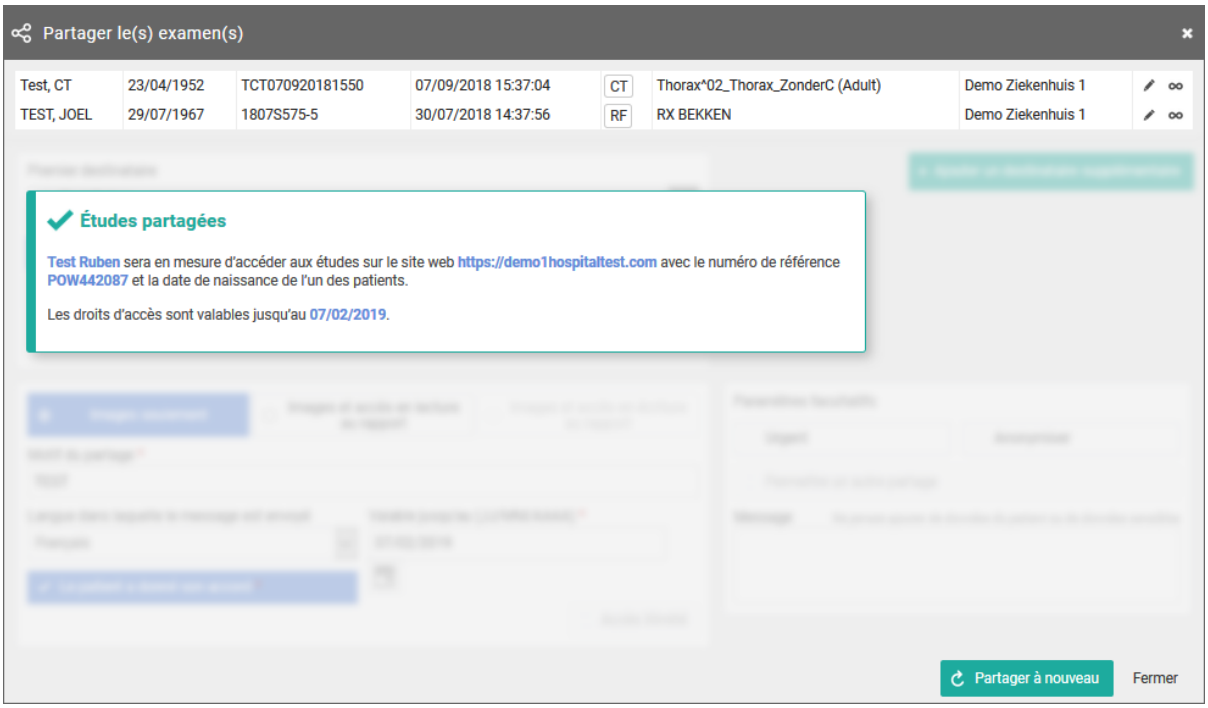

- Le bouton **Copier cette information** permet de copier le contenu de la fenêtre contextuelle dans le presse-papiers afin de pouvoir, par exemple, le coller dans votre propre e-mail.
- Un e-mail n'est envoyé que si l'option d'envoi du code de référence ou du mot de passe à usage unique (OTP) par e-mail a été cochée.

Conseil :

Pour des raisons de protection de la vie privée, le nom du patient est masqué dans le mail. Pour le prénom et le nom, seule la première lettre est affichée ; toutes les autres lettres sont remplacées par « *** ».

- Le message est disponible dans l'examen en tant que série séparée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés




- En utilisant « Partager à nouveau », vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'études avec un autre destinataire.

5.7.5 Imprimer un numéro de référence de la liste d'examens

Cette instruction explique comment générer un numéro de référence qui peut être utilisé pour accéder à un ou plusieurs examens en ligne.

STEP 1 : Sélectionnez les examens pour lesquels vous souhaitez imprimer un numéro de référence


Sélectionnez les examens pour lesquels vous souhaitez imprimer un numéro de référence et cliquez sur **IMPRIMER NUMÉRO DE RÉFÉRENCE**.

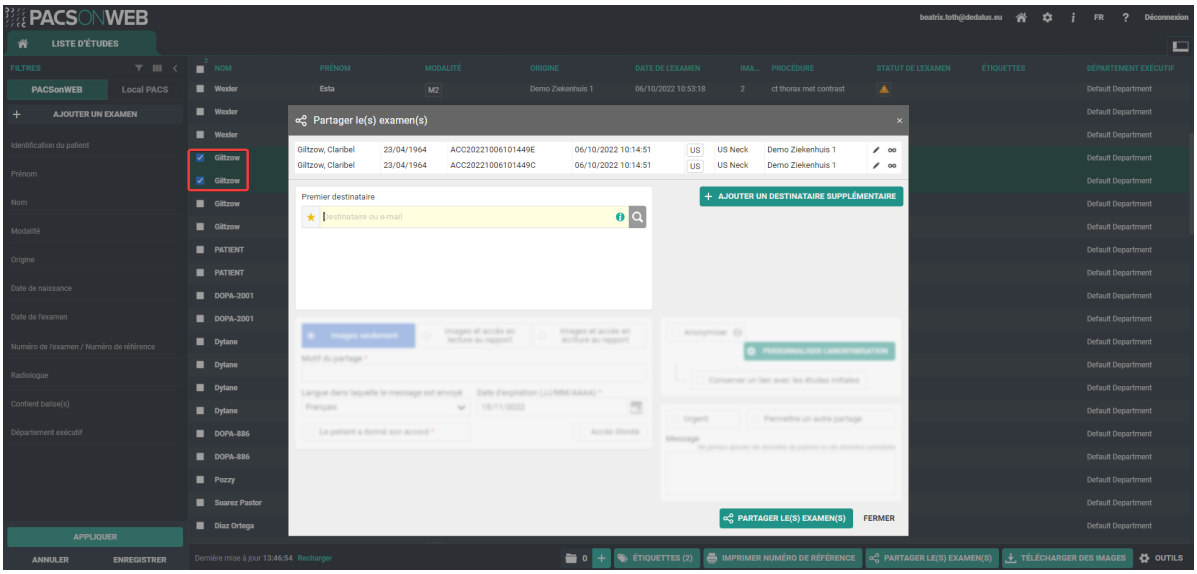

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

STEP 2 : Réglez les paramètres

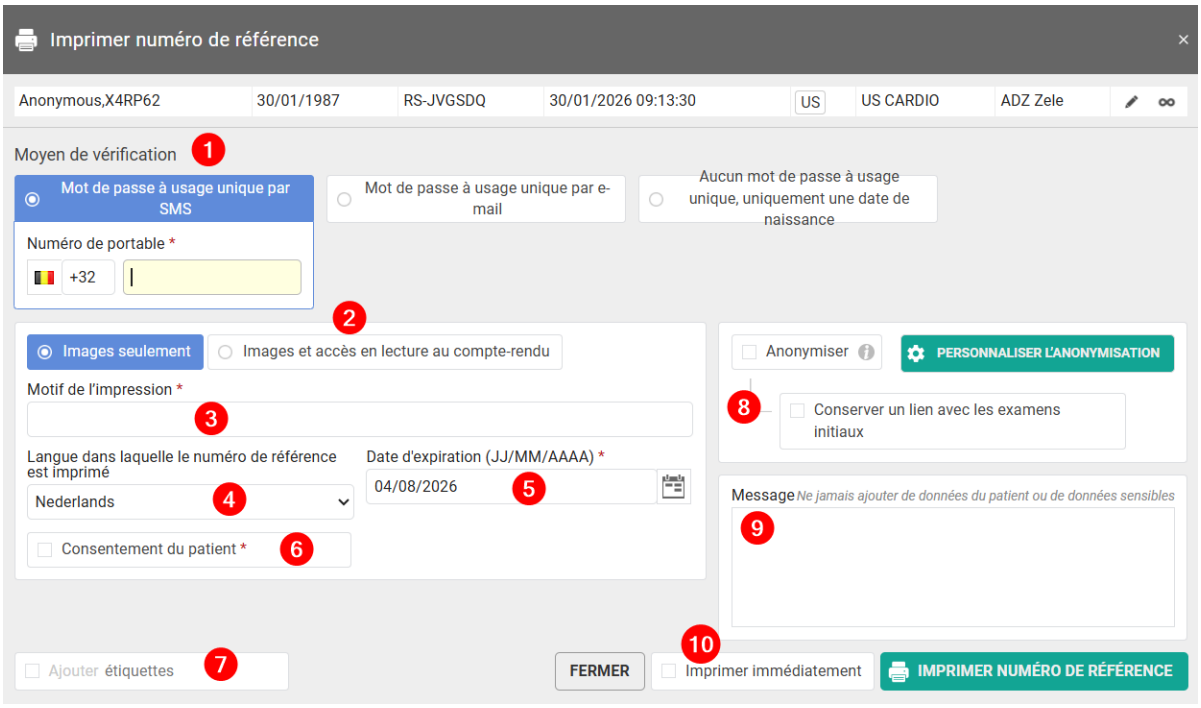

1. Sélectionnez un type de vérification :
   - **Mot de passe à usage unique par SMS**
   - **Mot de passe à usage unique par e-mail**
   - **Aucun mot de passe à usage unique, uniquement une date de naissance**

> **Important !**
>
> Si, en cas de vérification de type 1 ou 2, l'utilisateur fournit un OTP erroné 5 fois de suite, l'ensemble partagé est verrouillé.
>
> L'ensemble partagé peut être déverrouillé par le service d'assistance ou par un utilisateur administrateur du service de radiologie expéditeur (voir Statut du transfert (Page 187)).

2. Choisissez d'imprimer un numéro de référence pour :
   - **Images uniquement** ; ou
   - **Images et accès en lecture au compte-rendu**.

3. Renseignez un **Motif de l'impression**. Ce motif ne sera pas imprimé, mais est obligatoire et sera enregistré dans DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

4. Sélectionnez la langue du document qui sera créé. Il s'agit d'une lettre contenant des instructions pour le patient sur la manière d'utiliser le numéro de référence pour accéder aux examens. La langue d'affichage de DeepUnity PACSonWEB est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez changer la langue dans le menu déroulant.

5. Déterminez une date de validité pour les droits d'accès. Par défaut, la période de validité est fixée à 1 mois, mais vous pouvez la modifier en

- saisissant manuellement la date souhaitée ; ou
- sélectionnant une date, à l'aide de l'icône de calendrier

Conseil :

La période de validité par défaut peut être configurée pour chaque service de radiologie destinateur. DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité de définir une période de validité maximale ou par défaut.

Dans le cas où une configuration spécifique est souhaitée, veuillez contacter le service d'assistance.

6. Cochez la case **Consentement du patient**. Sans le consentement du patient, le numéro de référence ne peut pas être imprimé.

7. Vous pouvez ajouter une étiquette à l'examen en option. Cochez la case **Ajouter étiquette** pour ouvrir le menu déroulant permettant de sélectionner l'étiquette. Choisissez l'utilisateur ou le groupe pour lequel l'étiquette doit être définie.

8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rendre l'examen anonyme. Cela remplace le nom du patient :
   - Dans DeepUnity PACSonWEB, le prénom est remplacé par un numéro et le nom de famille par « Anonyme ».
   - Dans la lettre, seuls les « examens anonymisés » sont mentionnés.

Important !

Le compte-rendu d'un examen anonymisé ne sera jamais accessible, même si vous avez sélectionné l'option **Images et accès en lecture au compte-rendu**.

9. En option, vous pouvez ajouter un message.

   Dans le cas où un message est saisi lors de l'impression du numéro de référence, le message n'est pas disponible en tant que série distincte dans l'examen et

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

aucune étiquette « Message » n'est ajoutée. Elle est ajoutée à la lettre lors de la création.

10. En option, cochez la case **Imprimer immédiatement**.

    Si cette option est sélectionnée, lorsque vous cliquez sur **IMPRIMER NUMÉRO DE RÉFÉRENCE**, la lettre s'ouvre dans un nouvel onglet et peut être imprimée immédiatement.

    Sinon, seul le message de confirmation s'affiche.


Conseil :

Lors de l'impression d'un numéro de référence, les mêmes valeurs sont sélectionnées automatiquement pour les paramètres suivants lors de la prochaine impression d'un numéro de référence :

- Mot de passe à usage unique par sms/e-mail/aucun
- Mot de passe à usage unique par sms : préfixe du pays
- Langue

STEP 3 : Confirmer

Cliquez sur **IMPRIMER NUMÉRO DE RÉFÉRENCE**. Un message de confirmation apparaît reprenant toutes les informations pertinentes sur le numéro de référence imprimé.

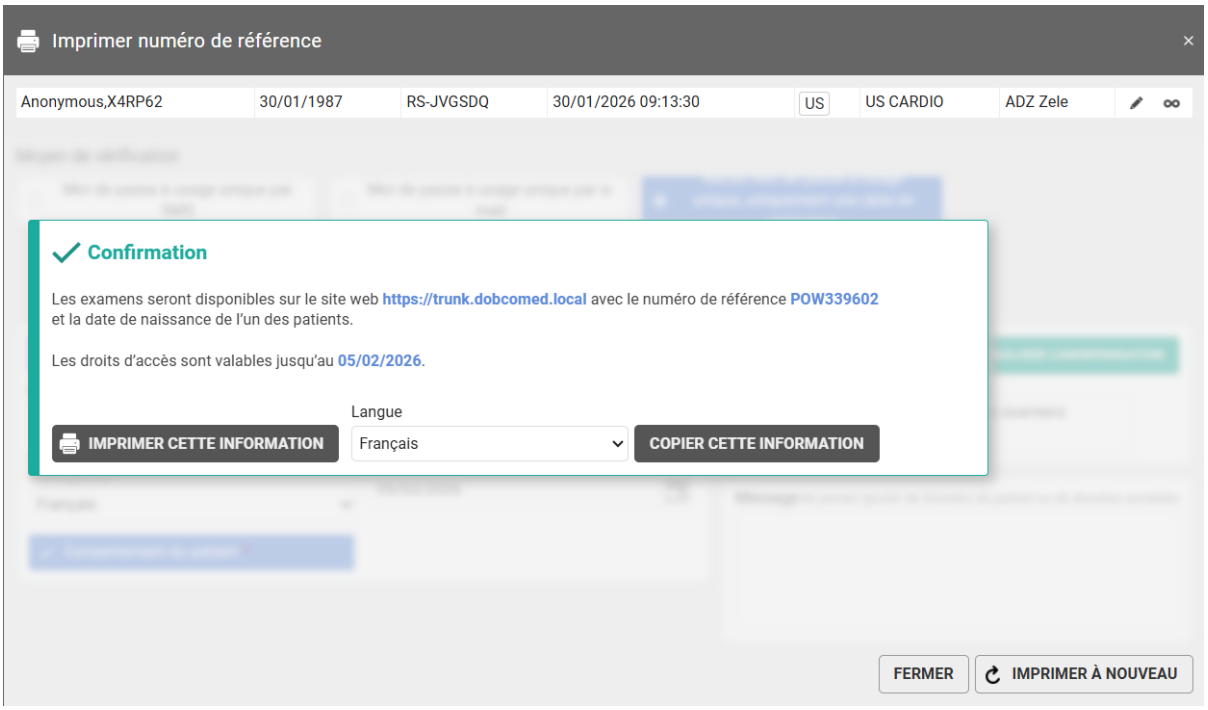

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Si vous souhaitez imprimer la même lettre avec le numéro de référence dans une autre langue, sélectionnez la langue dans le menu déroulant et cliquez sur **IMPRIMER CETTE INFORMATION**.

En cliquant sur **COPIER CETTE INFORMATION**, le contenu du message de confirmation est copié dans le presse-papiers afin de pouvoir, par exemple, le coller dans votre propre e-mail.

Cliquez sur **IMPRIMER À NOUVEAU** pour revenir aux paramètres et imprimer un autre numéro de référence.

5.7.6 Anonymiser des examens

Si vous cochez **Anonymiser**, les informations suivantes concernant le patient et l'examen seront adaptées :

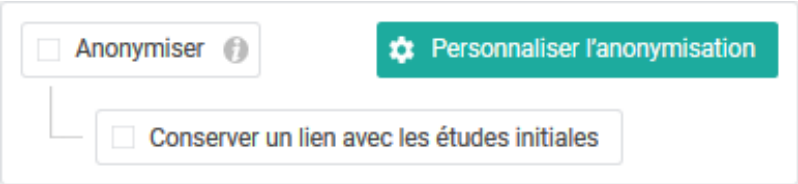

- Le nom du patient est adapté: le nom de famille est remplacé par « Anonyme » et le prénom est remplacé par 6 chiffres.
- Le numéro d'accès est adapté en : ANON + série Base29 (unique dans DeepUnity PACSonWEB).
- Le numéro de la demande est adapté en : ORD + série Base29 (unique dans DeepUnity PACSonWEB).
- L'UID d'instance d'examen est adapté en : un UID, commençant par 1.2.528.56.1006 (unique au monde, comme le UID est enregistré par DH Healthcare GmbH).

Si vous cochez l'option **Conserver un lien avec les examens initiaux (Pseudonymiser)**, un utilisateur dispose d'un lien entre l'examen pseudonymisé et l'examen original à condition d'avoir accès aux deux examens dans DeepUnity PACSonWEB.

Important !

Le compte-rendu ne sera jamais disponible, même si l'option **Images et accès en lecture au compte-rendu** ou **Images et accès en écriture au compte-rendu** a été sélectionnée.

Veuillez-vous référer aux pages suivantes pour plus d'informations sur les possibilités d'anonymisation personnalisée :

Anonymisation par défaut (Page 179)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Utiliser des modèles d'anonymisation (Page 180)

5.7.6.1 Anonymisation par défaut

Si vous avez accès à l'option payante permettant d'utiliser les modèles d'anonymisation, le bouton **PERSONNALISER L'ANONYMISATION** sera disponible.

Ceci vous permet d'adapter vous-même les données du patient et de l'examen, soit manuellement (voir ci-dessous), soit en utilisant un modèle d'anonymisation (voir Utiliser des modèles d'anonymisation (Page 180)).


Avec l'anonymisation par défaut, les données du patient et de l'examen seront adaptées comme suit :

- Le nom du patient est adapté: le nom de famille est remplacé par « Anonyme » et le prénom est remplacé par 6 chiffres.
- Le numéro d'accès est adapté en : ANON + série Base29 (unique dans DeepUnity PACSonWEB).
- Le numéro de la demande est adapté en : ORD + série Base29 (unique dans DeepUnity PACSonWEB).
- L'UID d'instance d'examen est adapté en : un UID, commençant par 1.2.528.56.1006 (unique au monde, comme le UID est enregistré par DH Healthcare GmbH).

En outre, vous aurez également la possibilité d'adapter manuellement tous les champs marqués.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

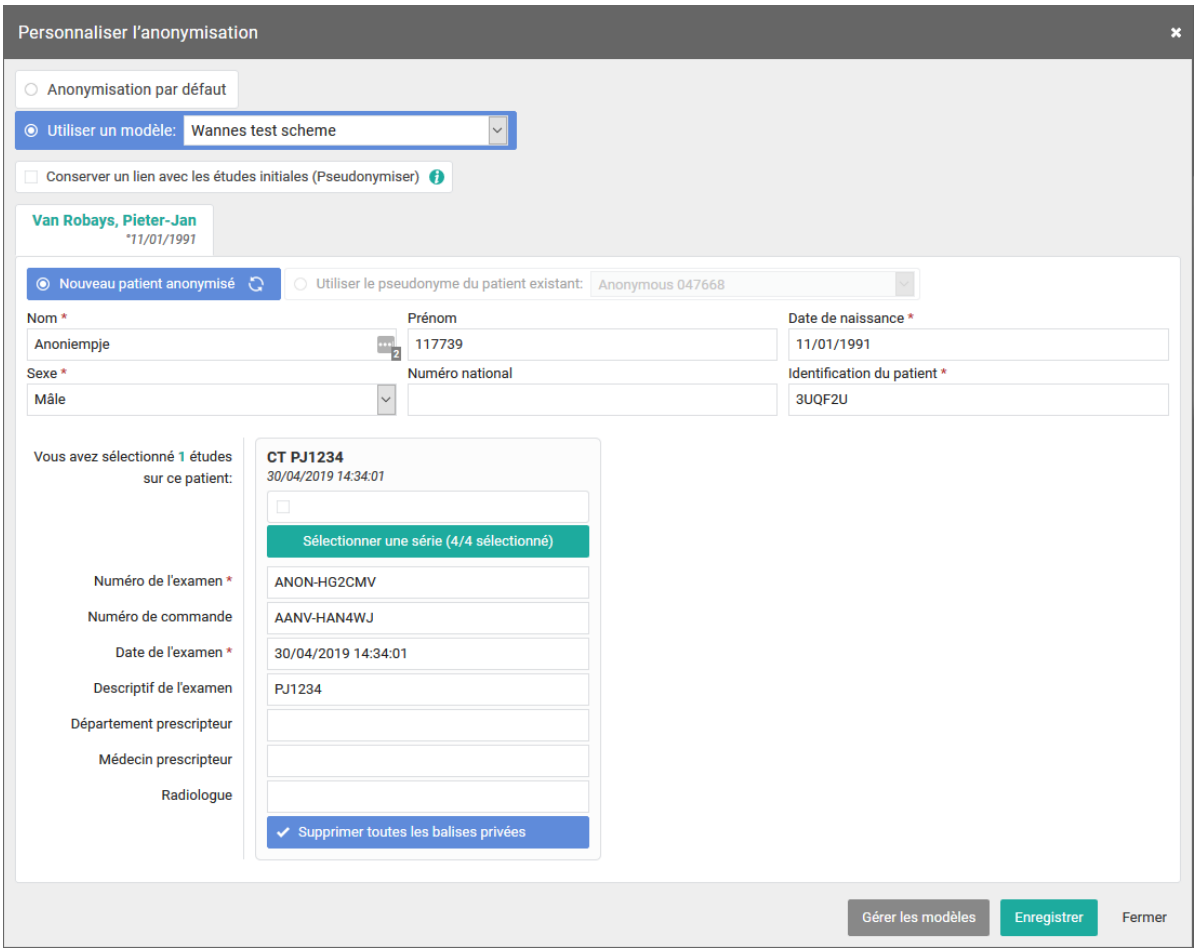


5.7.6.2 Utiliser des modèles d'anonymisation

Important !

Ceci une fonctionnalité optionnelle sur DeepUnity PACSonWEB. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter DH Healthcare GmbH pour plus d'informations.

Cette option peut être activée pour tous les examens issus d'une source spécifique.


Si vous souhaitez utiliser un modèle d'anonymisation, cliquez sur **Personnaliser l'anonymisation**.

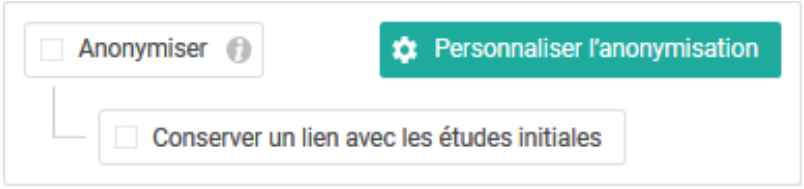

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Cliquez sur **Utiliser un modèle** et sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.

Ceci modifie les données du patient et de l'examen, comme défini dans le modèle sélectionné.

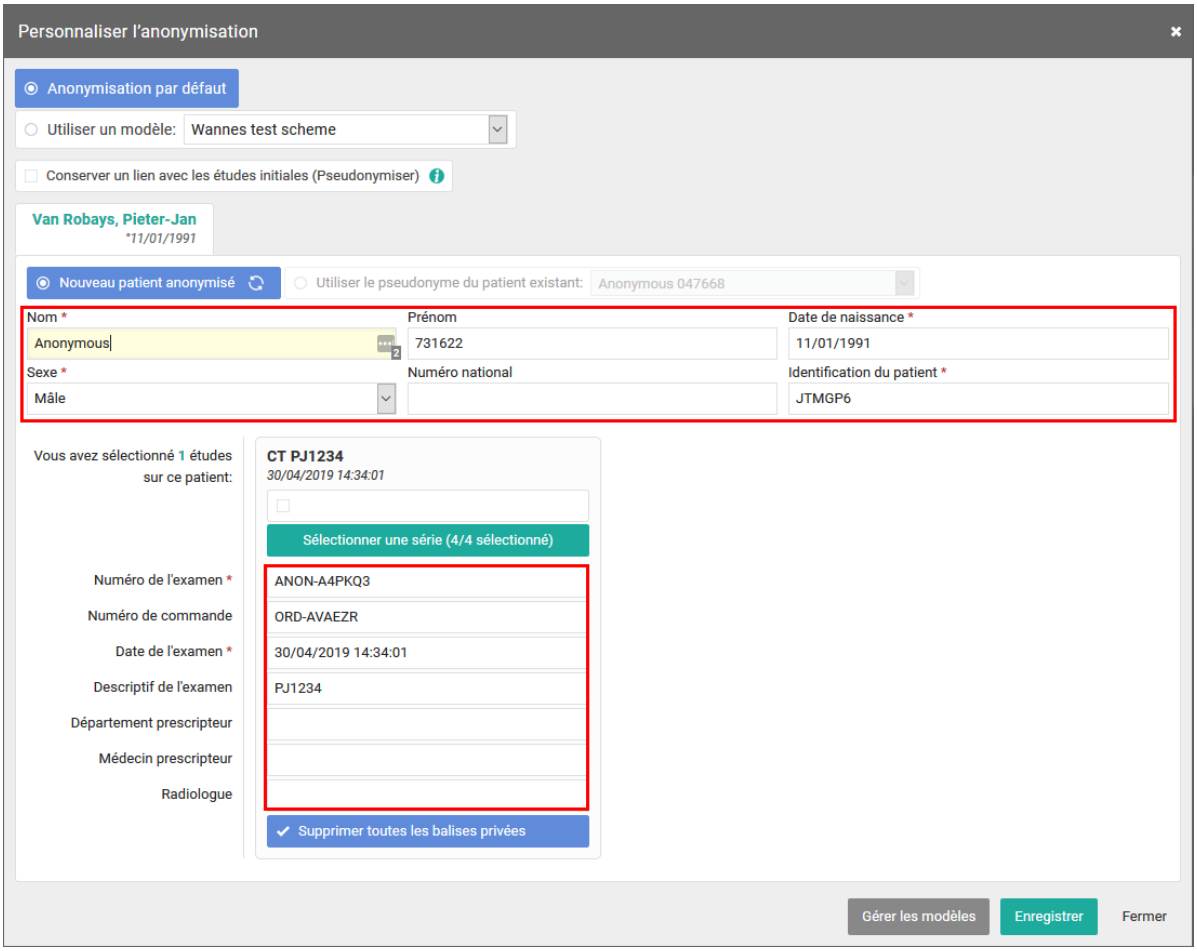


Cette option est disponible pour tous les utilisateurs qui ont accès à un examen depuis la source pour lequel cette option a été activé.

Gérer les modèles :

Important !

Cette option est uniquement disponible pour les administrateurs de la source.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

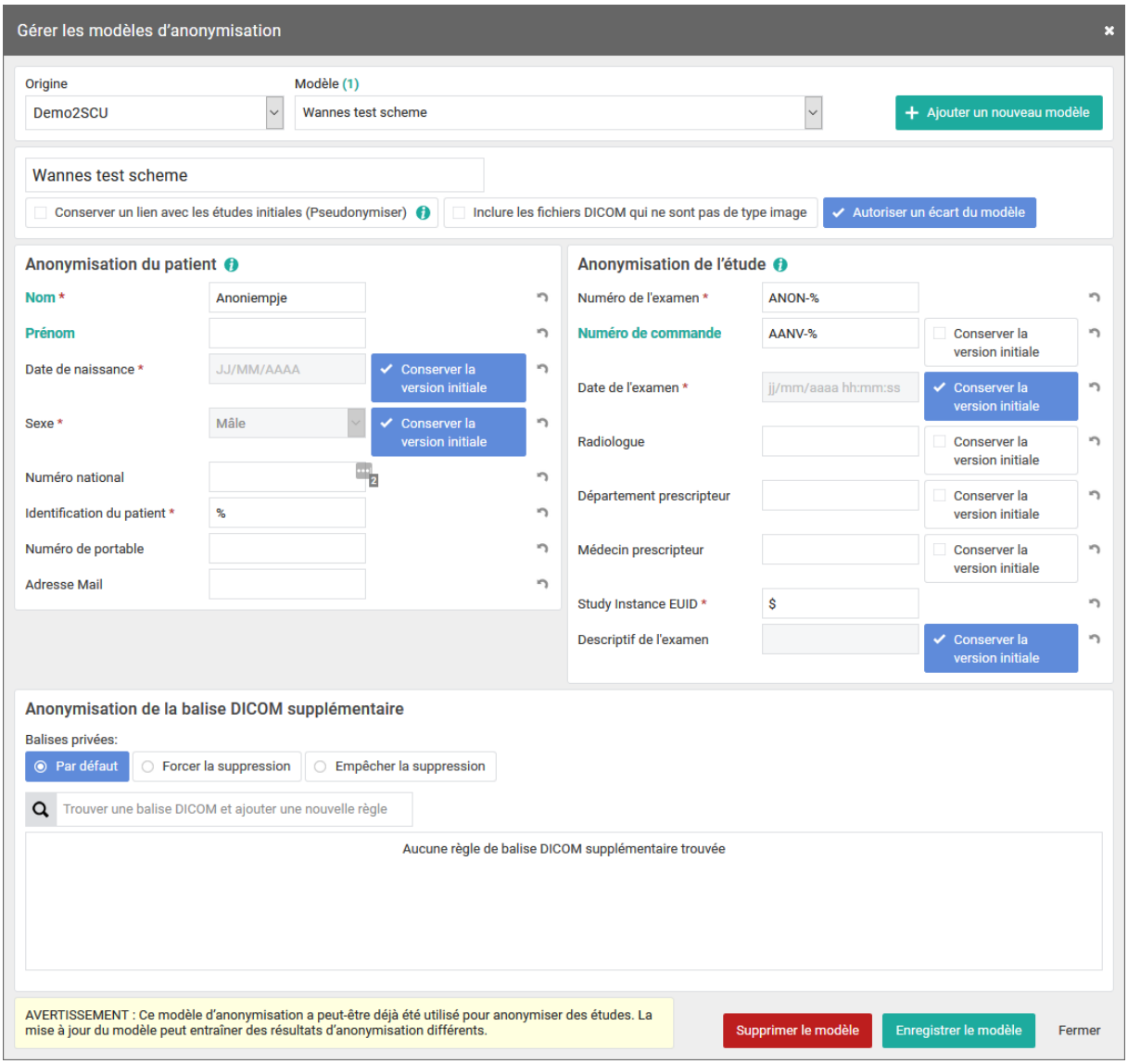

1. Sélectionnez le modèle que vous voulez modifier ou cliquez sur **Ajouter un nouveau modèle** :

2. Saisissez ou adaptez le nom du modèle :

Cochez les options suivantes si nécessaire :

- **Conserver un lien avec les examens initiaux (Pseudonymiser)** :

  Un utilisateur dispose d'un lien entre l'examen pseudonymisé et l'examen original à condition d'avoir accès aux deux examens dans DeepUnity PACSonWEB.

- **Inclure les fichiers DICOM qui ne sont pas de type image** :

  Détermine si les fichiers qui ne sont pas de type DICOM comme les comptes-rendus structurés, comptes-rendus de dose... sont mis à disposition dans l'examen anonymisé ou non.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- **Autoriser un écart du modèle** :

  Cette option détermine si la modification manuelle des données adaptées du patient ou de l'examen est autorisée ou non lors de l'utilisation du modèle.



3. Saisissez les adaptations souhaitées des données du patient et de l'examen pour le calendrier :

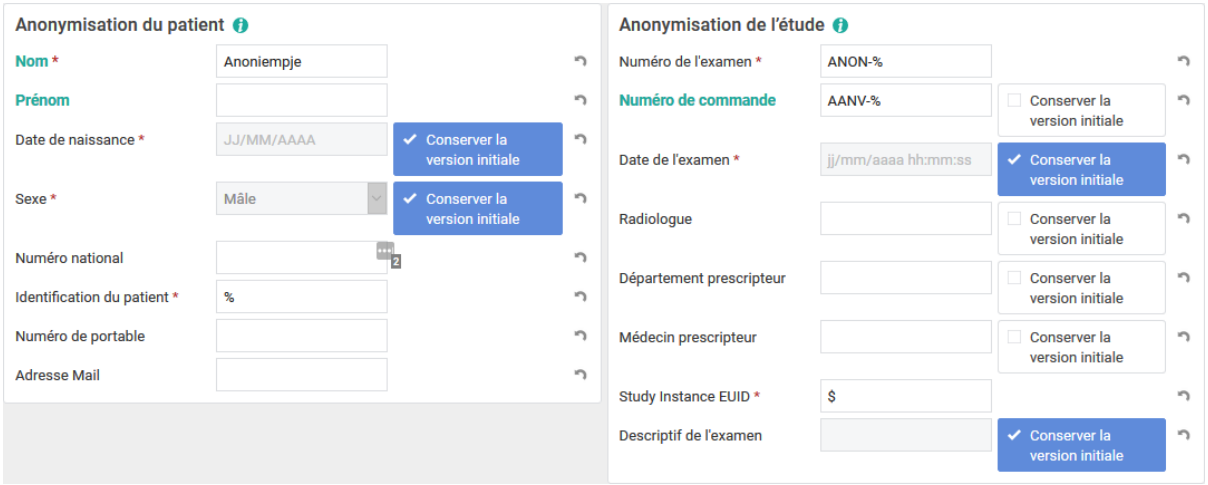


La date de naissance, le sexe, la date de l'examen et la description sont conservés par défaut, sauf configuration contraire explicite.

4. Spécifiez la manière dont les balises DICOM privées doivent être gérées :



- **Par défaut** :
- Si l'option **Autoriser un écart du modèle** est cochée, l'utilisateur peut tout de même choisir de supprimer ou non les balises privées.

  Par défaut, elles sont supprimées.

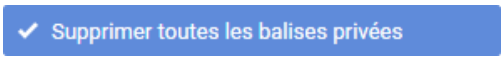

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


- **Forcer la suppression** :

  Cette option force la suppression des balises privées. L'utilisateur ne peut pas modifier cette option lors de l'utilisation d'un modèle.

- **Empêcher la suppression** :

  Lors de l'utilisation de ce modèle, l'utilisateur ne peut pas supprimer les balises privées.

- **Trouver une balise DICOM et ajouter une nouvelle règle** : Vous pouvez ajouter des balises DICOM supplémentaires au modèle.

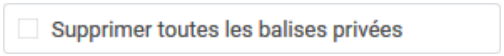5. Enfin, vous pouvez supprimer un modèle existant ou enregistrer un nouveau modèle ou un modèle modifié :

Retirer le modèleEnregistrer le modèleFermer

Sélectionnez le modèle que vous voulez modifier ou cliquez sur **Ajouter un nouveau modèle**.

5.8 Mise en ligne et partage d'examens

Important !

Pour pouvoir utiliser cette application, vous devez être administrateur et avoir implémenté cette application.

Pour transférer un examen du système PACS dans DeepUnity PACSonWEB, suivez les étapes ci-dessous :

1) Sélectionnez PACS (= disponible uniquement si le logiciel est installé).

2) Utilisez le filtre pour retrouver l'examen.

Remarque :

Les dates du filtre sont interprétées dans votre propre fuseau horaire et les heures des résultats sont affichées dans votre propre fuseau horaire, et non dans celui du PACS local.


3) Sélectionnez les examens que vous souhaitez partager. Une sélection d'examens partagés est appelée un ensemble.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

4) Cliquez sur le bouton « Partager des examens ». Un aperçu des examens que vous souhaitez partager s'affiche.

Vous pouvez ensuite choisir de partager l'examen avec

- un utilisateur (Page 141)
- un groupe (Page 147)
- un service d'imagerie médicale (Page 155)
- un destinataire autodéfini (Page 164)

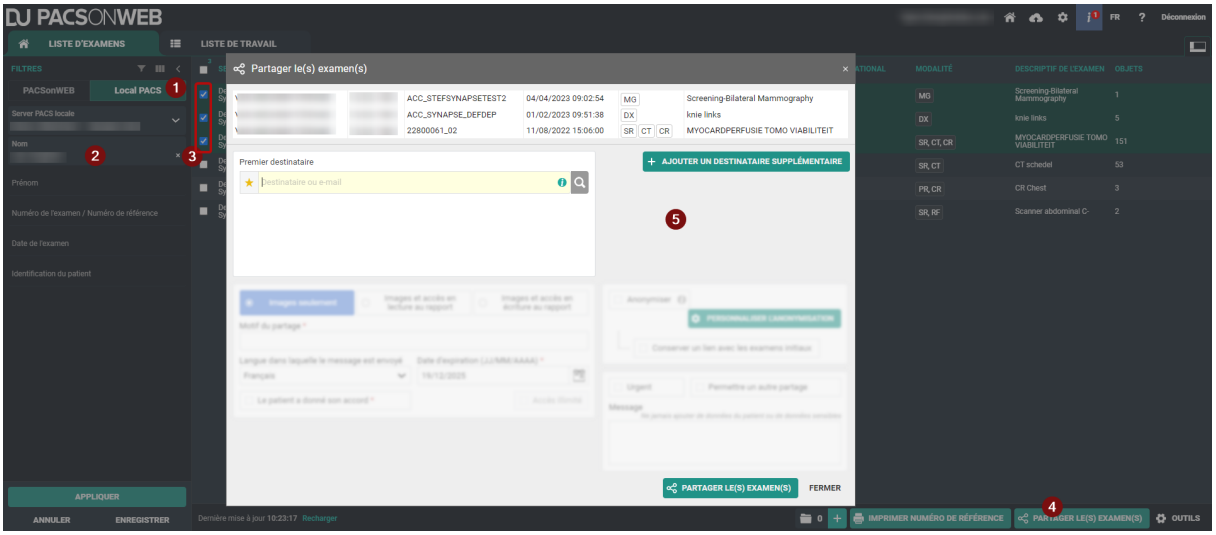


5) À la fin de la procédure de partage, une fenêtre pop-up s'affiche avec les informations des examens partagés.

Important !

Les informations contenues dans la confirmation peuvent différer, selon le type de destinataire.


6) En utilisant « Partager à nouveau », vous pouvez partager à nouveau le même jeu d'études avec d'autres destinataires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

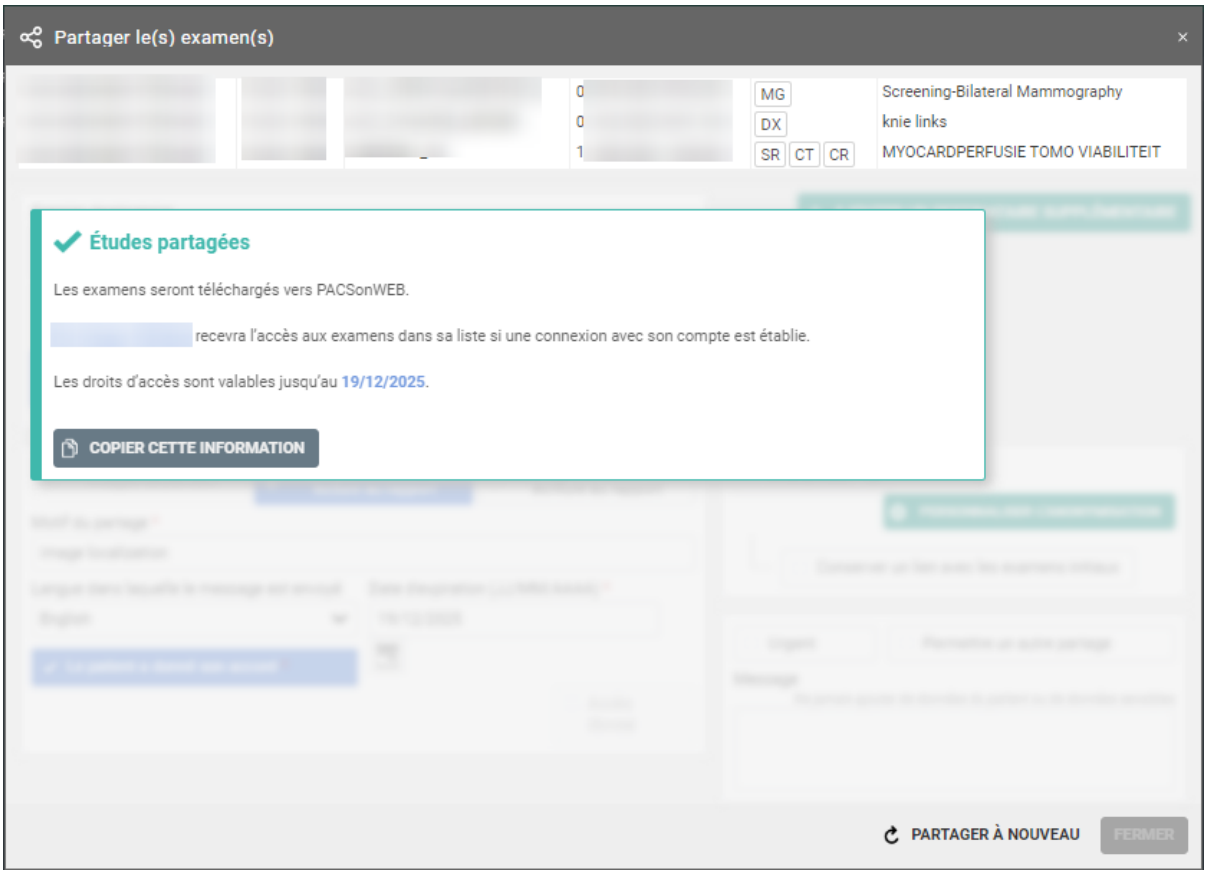

L'option « Imprimer numéro de référence » permet de télécharger les examens et d'imprimer un numéro de référence au lieu de l'envoyer par e-mail ou par SMS.

La procédure est similaire à Imprimer un numéro de référence de la liste d'examens (Page 174).

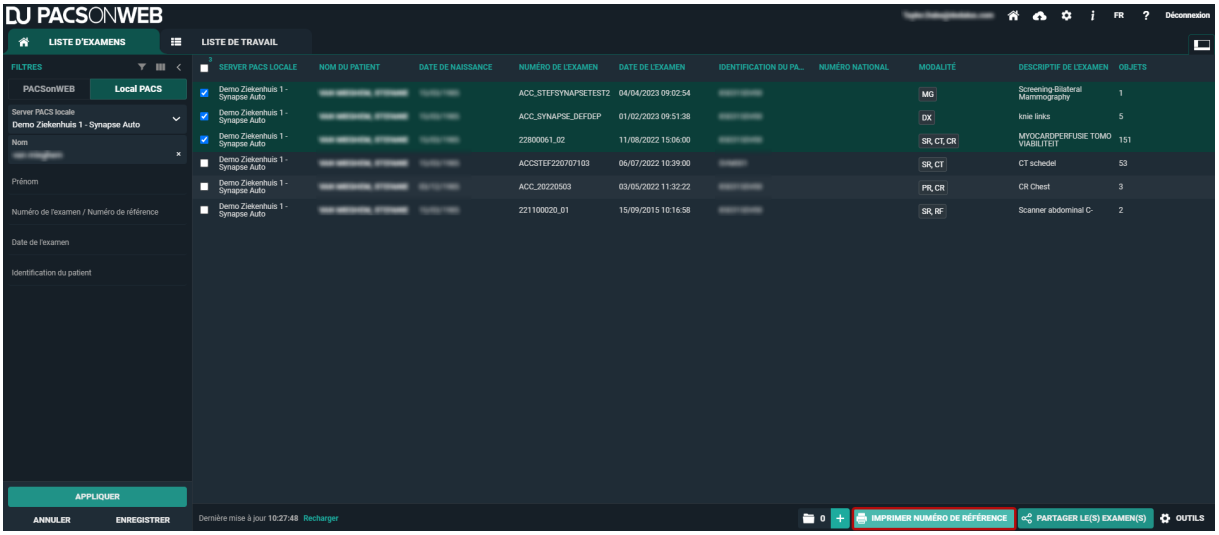


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895


5.9 Statut du transfert

Pour voir le statut de vos examens partagés, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton **Outils**, puis sur **Statut du transfert**

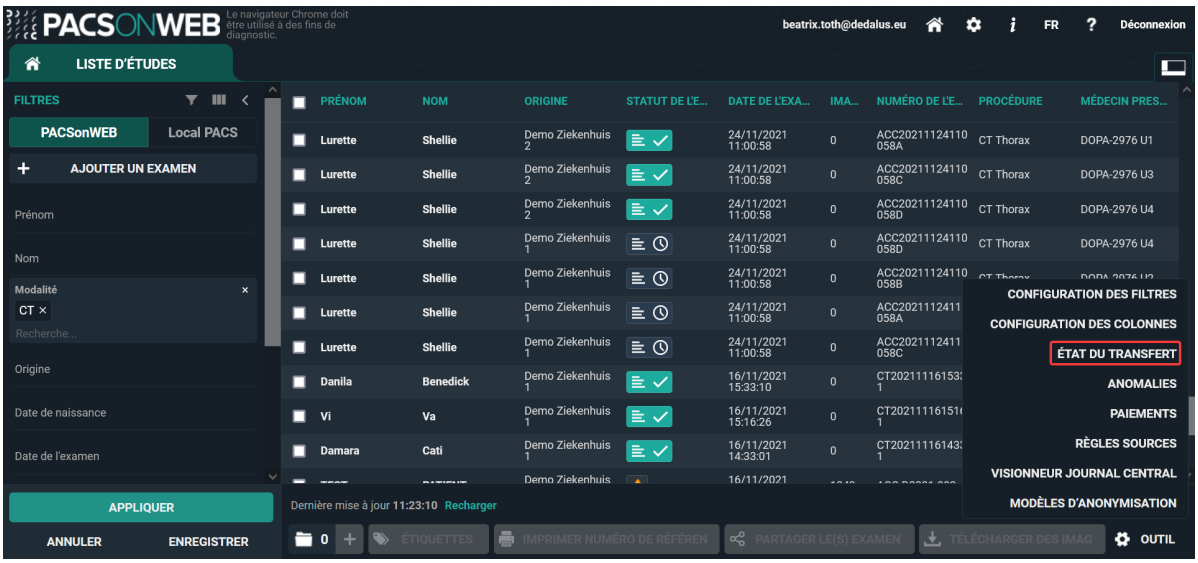

2. Un nouvel onglet s'ouvre en affichant **Liste des partagés** et **État des transferts**.

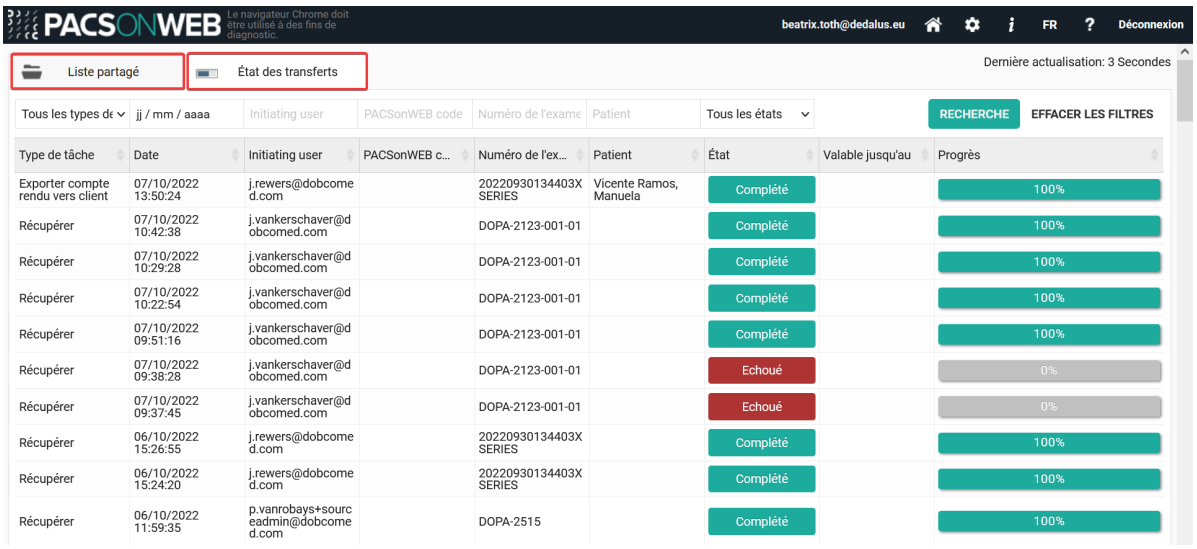

5.9.1 Aperçu des partagés

Cette page donne une liste de tous les ensembles partagés par l'utilisateur connecté avec un utilisateur non-DeepUnity PACSonWEB.


Si l'utilisateur connecté est également administrateur du groupe, il voit tous les ensembles qui ont été mis en ligne par le groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Les informations suivantes s'affichent pour les ensembles :

- La date à laquelle l'examen a été mis en ligne
- L'adresse e-mail de la personne ayant mis l'examen en ligne
- La date jusqu'à laquelle l'examen est disponible
- Les données du patient
- Les numéros d'examen en question
- La méthode de vérification
- Le numéro de référence
- L'adresse e-mail du destinataire
- Si le compte rendu complet a été partagé ou seulement les images (« non partagé »)

Parallèlement, vous pouvez utiliser le filtre pour trouver un examen/ensemble.

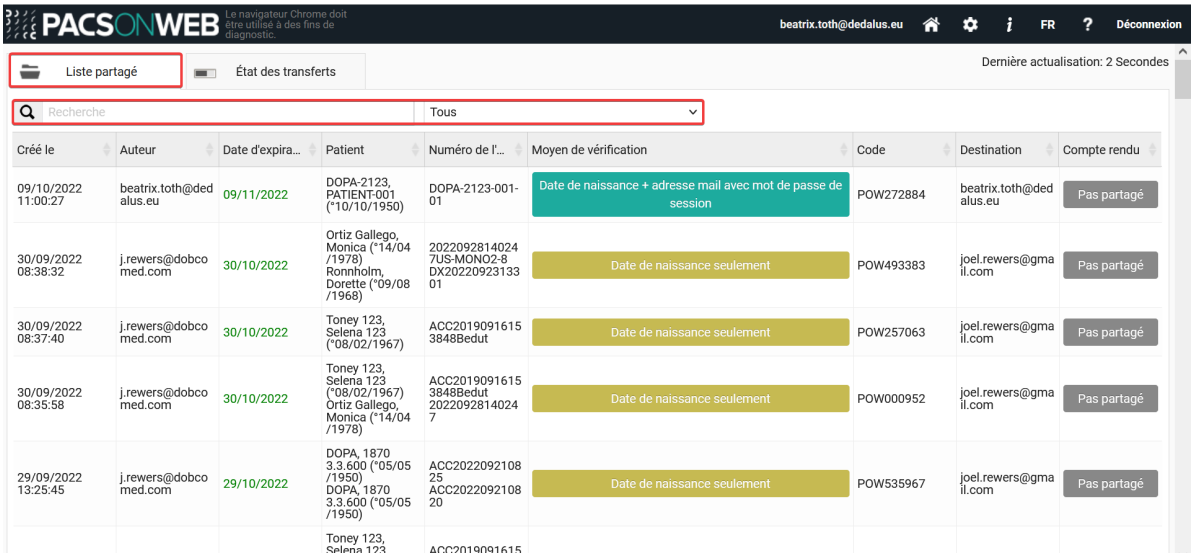


Lorsque vous cliquez sur un ensemble partagé, un pop-up s'affiche avec toutes les informations concernant le partage.

Si un mot de passe à usage unique est requis pour accéder au partagé et si le code de partagé et la date de naissance ont été saisis correctement, mais que le mot de passe à usage unique a été saisi de façon erronée, cela sera enregistré dans le champ « Tentatives de mot de passe à usage unique échouées ».

Après 5 tentatives incorrectes consécutives, l'accès de code de partagé est verrouillé. Il peut être débloqué en cliquant sur l'icône qui réinitialisera les tentatives de mot de passe à usage unique échouées.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

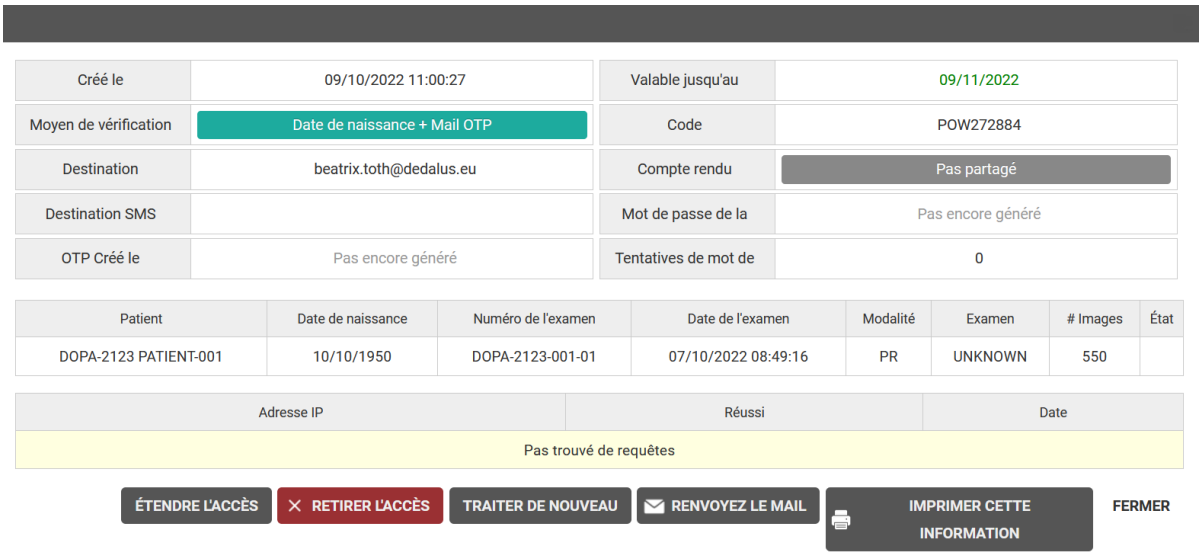

Différentes options apparaissent en bas :

- Étendre l'accès : Le prolongement de la durée de validité du code DU POW généré pour l'accès à l'examen.
- Retirer l'accès : Le code DU POW n'est plus valide à partir de maintenant.
- Traiter de nouveau : l'examen sera retraité.
- Renvoyer l'e-mail : Le destinataire reçoit à nouveau l'e-mail contenant le code DU POW.
- Imprimer cette information : les informations sur l'ensemble partagé s'affichent au format de page A4 que vous pouvez imprimer.
- Fermer : pour fermer la fenêtre.

5.9.2 Aperçu de la progression

Important !

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous administrez le placement en ligne des examens (Mise en ligne et partage d'examens (Page 184)).

Cette page fournit les informations d'état suivantes :

- Les examens mis en ligne via le PACS overlay.
- Les examens envoyés depuis DeepUnity PACSonWEB vers un système PACS local.
- Les examens importés depuis DeepUnity PACSonWEB via un import client.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ici, vous ne pouvez voir que les transferts pour lesquels vous disposez des droits nécessaires dans DeepUnity PACSonWEB.


Tout comme avec l'**Aperçu des ensembles**, vous pouvez utiliser le filtre pour trouver un examen spécifique. Vous pouvez filtrer par :

- Type de tâche
  - Partager examen Pacs
  - Retraiter ensemble
  - Transfert DICOM
  - Récupérer
  - Client d'importation locale
  - Anonymiser
  - Manipulations image et séries
  - Exporter compte rendu vers client
  - Exporter GSPS vers PACS
  - Surveiller tâche
- Date
- Utilisateur
- Code POW
- Numéro de l'examen
- Patient
- État
  - Tous les états
  - En attente
  - En cours
  - Complété
  - Annulé
  - Echoué
  - Obsolète
- Origine


Conseil :

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour classer les données par ordre alphabétique.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

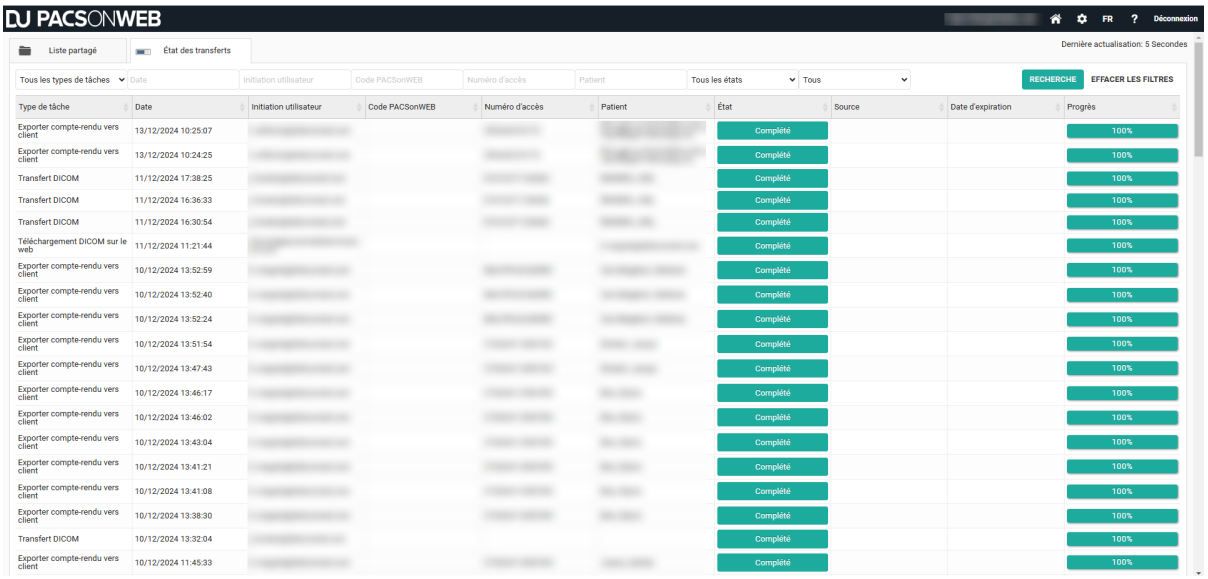

Cliquez sur l'examen. La fenêtre suivante s'affiche :

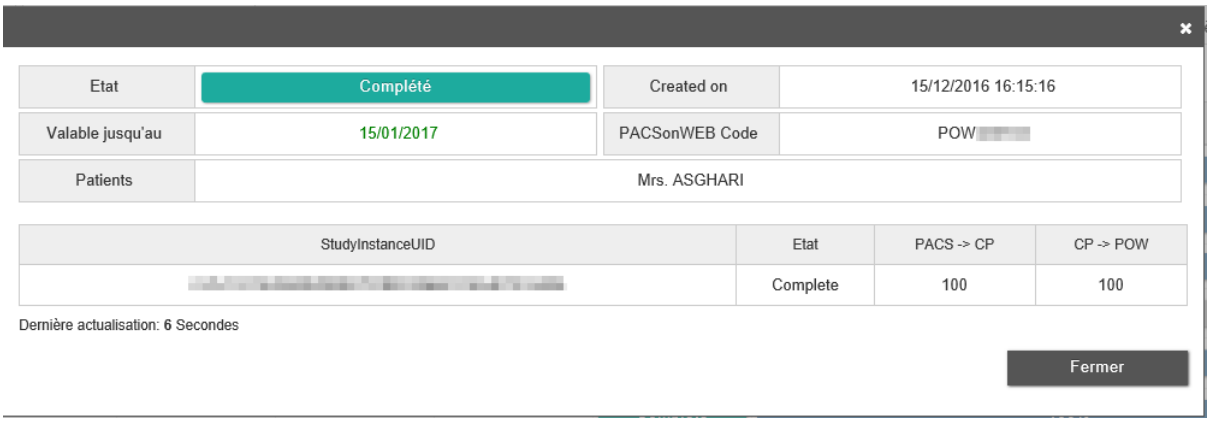


Vous pouvez voir plus d'informations détaillées sur l'examen. Les détails affichés dépendent du type de transfert.

Si l'examen n'est pas encore terminé, vous pouvez annuler la mise en ligne en cliquant sur **Annuler la tâche**.

Si un transfert d'examen a échoué, vous pouvez redémarrer le transfert en cliquant sur le bouton **Réessayer tâche**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

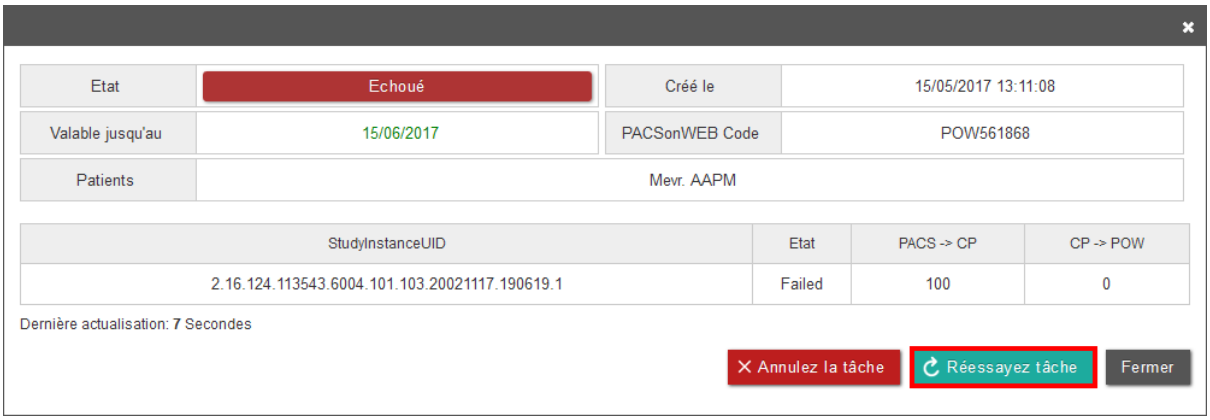

5.10 Téléchargement des examens à partir de la liste d'examens

Pour télécharger un examen à partir de la la liste d'examens, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les examens que vous souhaitez télécharger.
2. Cliquez sur **Télécharger des images**.
3. Une fenêtre pop-up apparaît pour vous permettre de choisir parmi plusieurs possibilités pour télécharger des images :
   - Télécharger un fichier ZIP contenant les images au format PNG (format d'image standard)
   - Télécharger un fichier ZIP contenant les images au format DICOM (standard médical)
   - Télécharger un fichier ZIP contenant les images au format DICOM d'origine, avec les tags DICOM fournies par la modalité ou le PACS local, sans prendre en compte les modifications apportées par les données RIS ou faites dans DeepUnity PACSonWEB
   - Télécharger un fichier ZIP contenant les images au format DICOM compressé
   - Charger directement les images dans Osirix

     Remarque :

     Vous ne pouvez utiliser cette option que si OsiriX a été installé.

     Afin de pouvoir charger les examens dans OsiriX, il est obligatoire que les fenêtres contextuelles du site Web DeepUnity PACSonWEB soient autorisées par votre navigateur.


   - transférer les images dans PACS

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Cette option a été déplacée dans une boîte de dialogue distincte Transfert DICOM. Consultez Importation d'examens dans le système PACS (Page 197)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

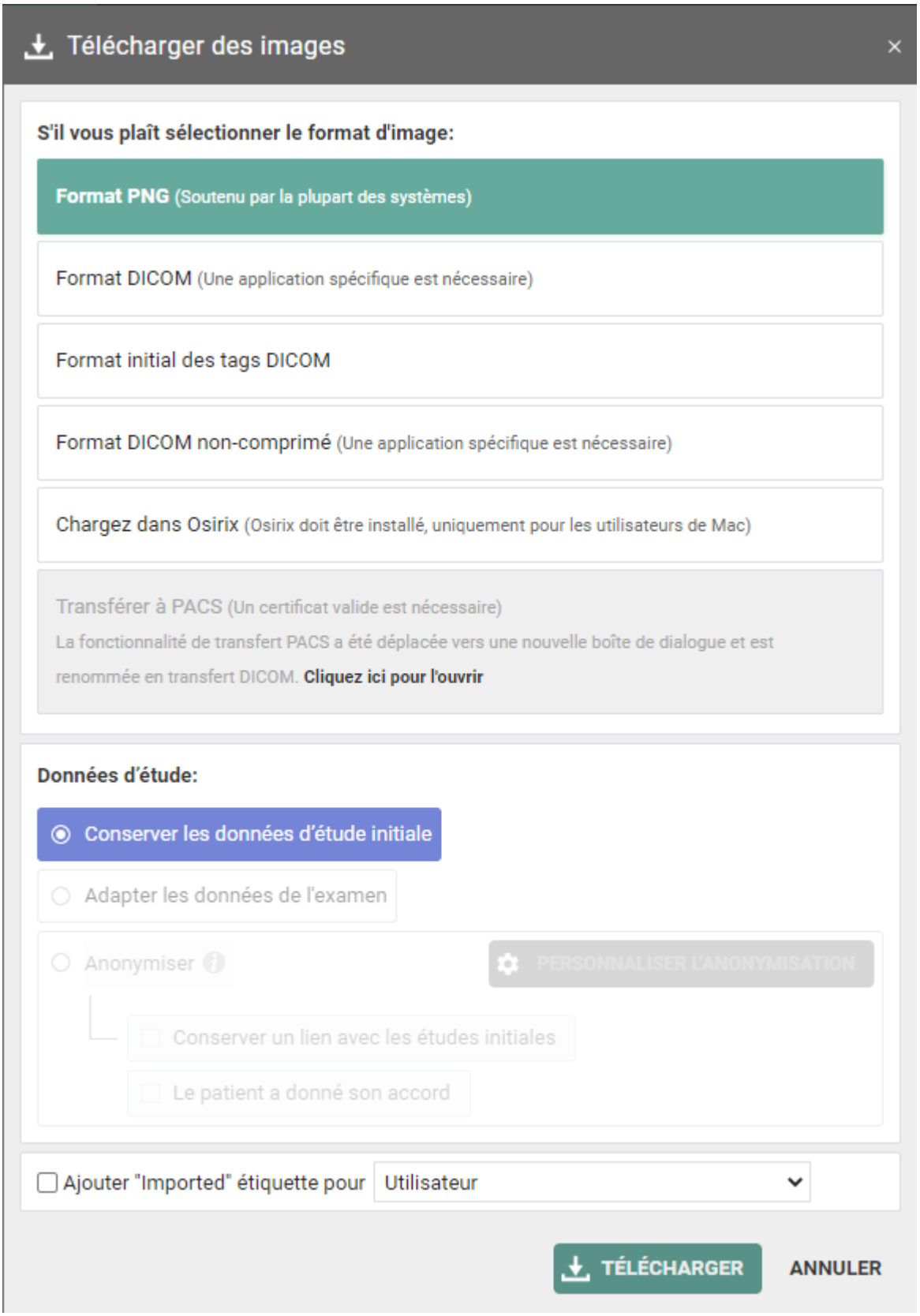

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

4. Cliquez sur le format que vous souhaitez télécharger, puis sur **TÉLÉCHARGER**.

   Pour les options suivantes, le compte-rendu est joint par défaut en tant que fichier SR (Structured Report :

   - Format DICOM
   - Format DICOM non-comprimé

   Remarque :

   L'option **inclure le rapport** n'est pas disponible si :

   - Il n'y a pas de rapport,
   - Le rapport est encore un projet et n'a pas le statut **préliminaire** ou **validé**.
   - Le rapport est au format PDF.
   - Vous n'avez pas accès au rapport.

   Pour les mêmes options, il est possible d'inclure un visualiseur hors ligne, qui vous permettra de visualiser les images en dehors de DeepUnity PACSonWEB.

   Remarque :

   La disponibilité du visualiseur hors ligne dépend de votre environnement, en raison des licences de visualiseur spécifiques à chaque région.

   Données d'examen

   Si vous téléchargez un seul examen et sélectionnez DICOM, DICOM non compressé ou Charger dans Osirix, vous avez la possibilité de modifier ou d'anonymiser les données de l'examen.

   Une explication complète sur l'anonymisation des données est disponible dans Anonymiser des examens (Page 178).

   Libellé

   Vous pouvez ajouter l'étiquette **Importée** à l'examen pour

   - votre utilisateur
   - un groupe d'utilisateurs

   Cette étiquette est visible sur la liste d'examens, dans la colonne **Étiquettes**.


   La configuration de vos colonnes est expliquée au point Configurer la liste d'examens (Page 73)

5. Si vous téléchargez un seul examen et sélectionnez DICOM ou DICOM non compressé, vous avez également la possibilité de modifier les données de l'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sélectionnez **Adapter les données de l'examen** et cliquez ensuite sur **Étape suivante**. Cette option est toujours sélectionnée pour **Charger dans OsiriX**.

Vous pouvez modifier ici les données de l'examen et du patient.

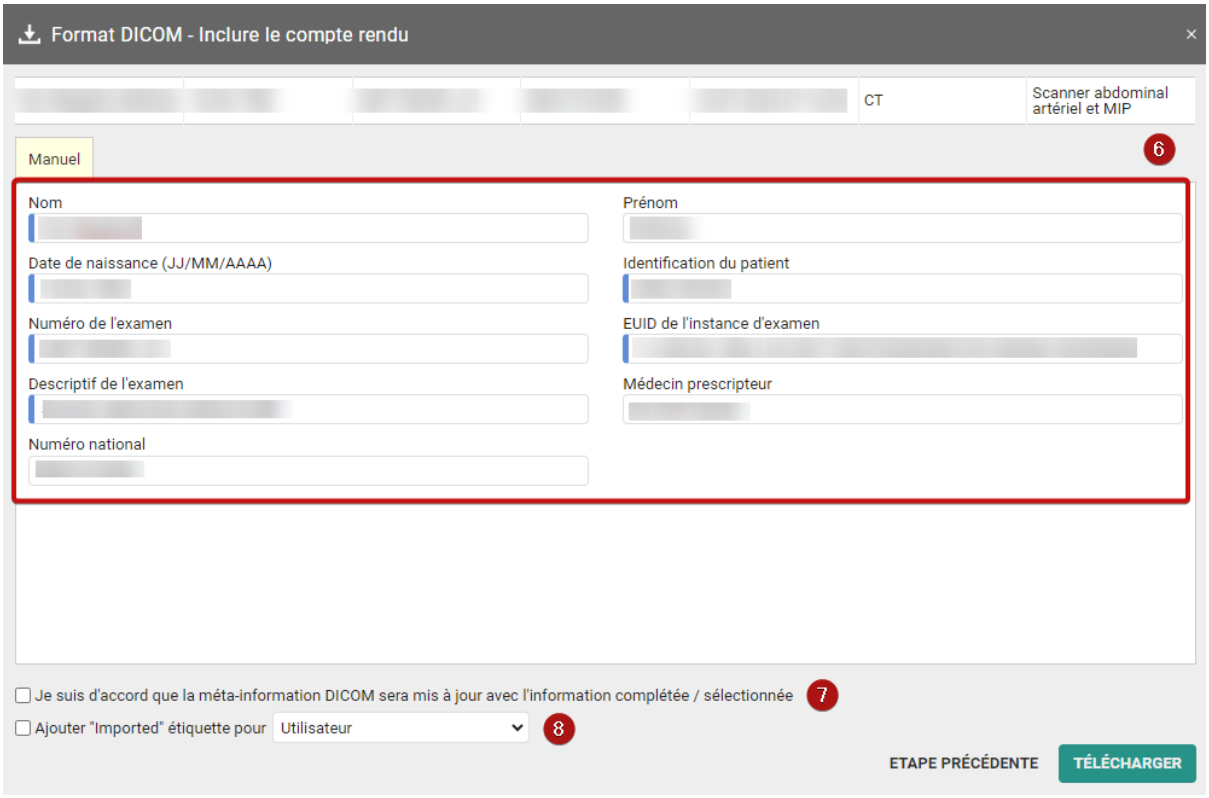

6. Vous pouvez ici modifier les données de l'examen et les informations sur le patient.
7. Vous devez toujours cocher la case à côté de **J'accepte que les méta-informations DICOM soient mises à jour avec les informations saisies/ sélectionnées** avant de pouvoir continuer.
8. Si vous souhaitez ajouter l'étiquette **importé** à cet examen, cochez **Ajouter l'étiquette « Importé »**.

Remarque :

Vous pouvez le configurer pour votre utilisateur et pour les groupes auxquels vous appartenez.

9. Un fichier ZIP apparaît.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

L'endroit auquel le fichier ZIP apparaît dépend de votre navigateur. Dans Google Chrome par exemple, il apparaît en bas à gauche.

10. Double-cliquez sur le fichier ZIP. Une fenêtre s'affiche avec un onglet intitulé **Extraire : Outils pour dossiers compressés**.
11. Plusieurs dossiers apparaissent. Chaque dossier correspond à un examen dont vous avez souhaité télécharger les images.
12. Cliquez sur **Tout extraire** pour extraire les fichiers ZIP et les enregistrer sur votre ordinateur.

5.10.1 Importation d'examens dans le système PACS

Important !

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si votre partenaire local de serviceDeepUnity PACSonWEBa installé un Import Client sur votre serveur (option payante).

Pour importer un examen dans votre système PACS, procédez comme suit :


1. Sélectionnez les examens que vous souhaitez importer.
2. Cliquez sur**Transfert DICOM**
3. Une fenêtre contextuelle apparaît, vous offrant diverses options, dont la plupart peuvent être configurées. Voir la section Transfert DICOM (Page 122).
4. Sélectionnez le système PACS souhaité dans le menu déroulant (QR serveur).

   Si un compte-rendu est disponible avec le statut « préliminaire » ou « validé », il est inclus par défaut dans un fichier SR (Structured Report ou compte-rendu structuré).

   Si le compte-rendu dispose encore du statut « projet » ou est stocké au format PDF, il ne sera pas possible de le transférer.


   L'option permettant d'ajouter le compte-rendu peut être cochée par l'utilisateur avant le transfert de l'examen.
5. Si une liste de travail DICOM a été configurée, vous pouvez maintenant rechercher et sélectionner le patient ou l'examen en utilisant les filtres.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

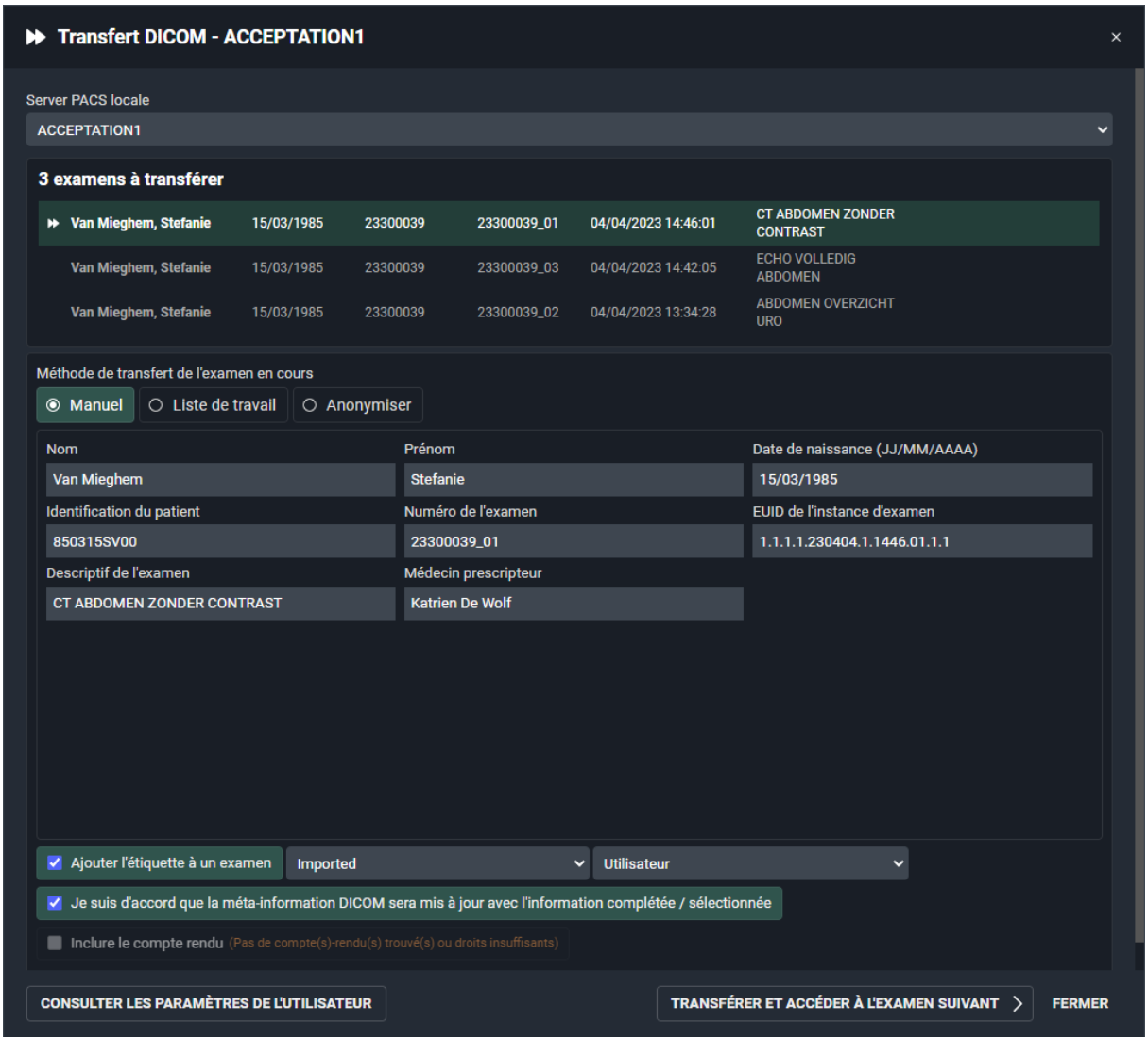


6. Si vous n'avez pas configuré de liste de travail ou si vous ne trouvez pas le patient ou l'examen, vous pouvez ajouter le patient « manuellement » en cliquant sur le bouton radio « Manuel ». Modifiez les champs souhaités et cliquez sur **Transférer l'examen**.
7. Une fenêtre contextuelle avec le statut s'affiche maintenant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

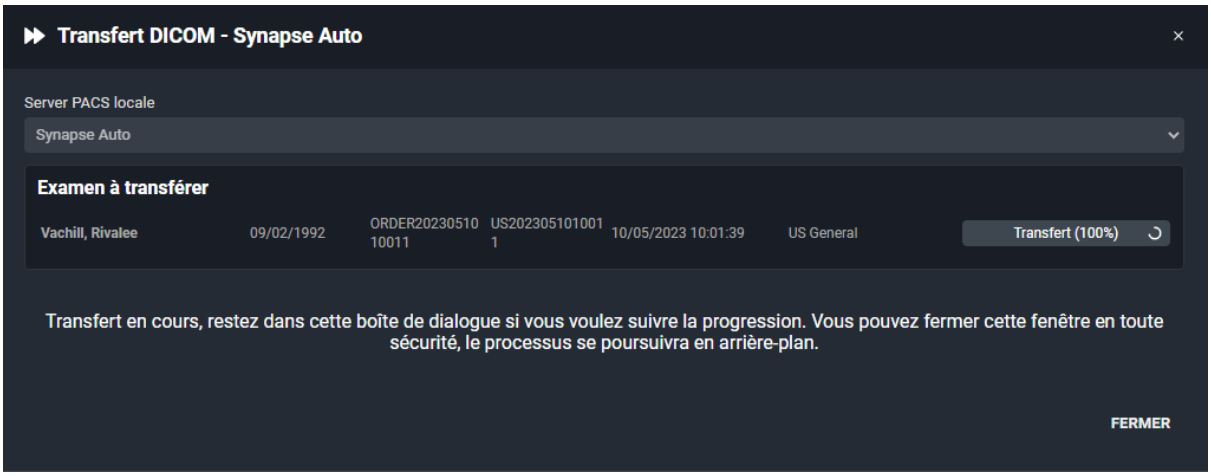

8. Une fois le transfert terminé, l'examen sera disponible dans le système PACS local et l'étiquette « Importé » sera ajoutée à l'examen dans DeepUnity PACSonWEB.

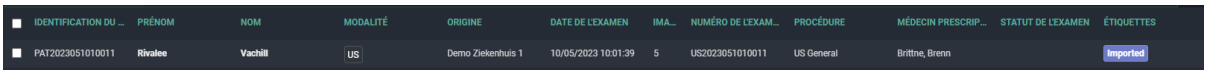

Conseil :

Vous pouvez filtrer par l'étiquette « Importé » si vous rendez les étiquettes disponibles sous Filtrage (Page 78). L'étiquette « Importé » sera affichée dans votre liste d'aperçu si vous avez configuré la colonne « Étiquettes » sous «Configuration des colonnes (Page 73)».


5.11 Page d'aperçu des anomalies

Important !

Cette fonctionnalité est disponible exclusivement aux administrateurs d'une service de radiologie.

Pour avoir un aperçu des anomalies qui ont été enregistrées pour votre service de radiologie, cliquez sur 'Fonctions', puis sur 'Anomalies'.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

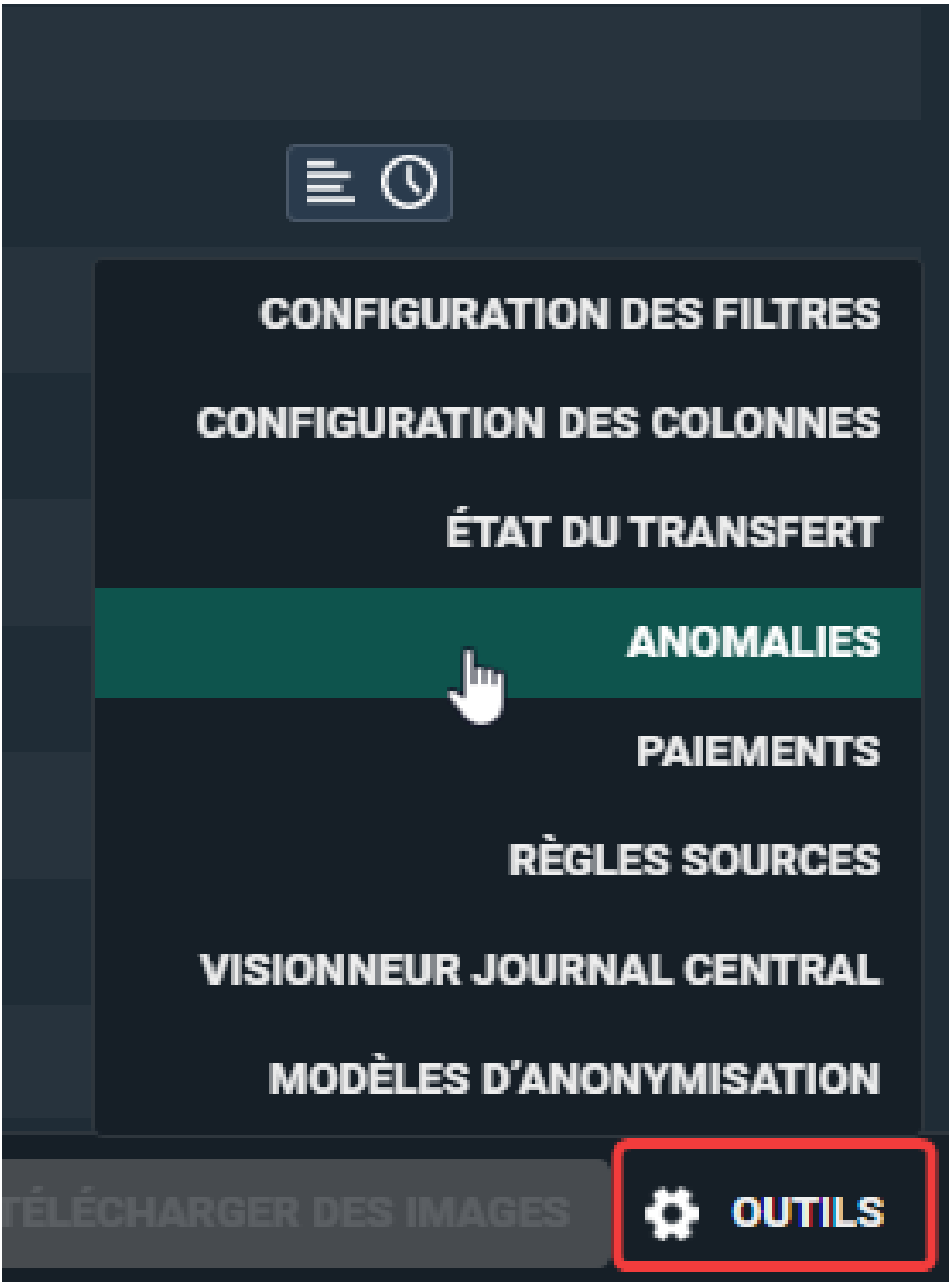

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Cette page répertorie toutes les anomalies, telles qu'enregistrées sur la page d'administration de l'examen (voir Anomalies (Page 288)) pour chaque examen individuel, regroupées en deux catégories :

- anomalies relatives à l'examen
- anomalies relatives au patient

Anomalies relatives à l'examen

Les anomalies suivantes sont enregistrées :

- numéro de sécurité sociale sur les images de DICOM différent de l'information de HL7
- date de naissance sur les images de DICOM différente de l'information de HL7
- date de naissance non reçu ou incorrecte
- nombre d'images dans DeepUnity PACSonWEB est différent de celui dans le PACS local (en tenant compte de l'application d'un filtre éventuel)
- numéro de sécurité sociale déjà reçu pour un(e) autre patient(e) via DICOM
- image ou message HL7 reçu avec le même Study Instance EUID ou numéro d'examen mais avec un autre numéro d'identification du patient
- l'examen avec un patient sans identification est changée en un patient avec l'identification par DICOM ou HL7
- incompatibilité avec les exigences du CvKO
- Les examens de différents patients ont été fusionnés
- Échec de l'opération de déplacement ou de suppression d'une image ou d'une série
- L'identité du patient a changé pour une procédure dans un compte-rendu

Anomalies relatives au patient

Les anomalies suivantes sont enregistrées :

- plusieurs ID en interne enregistrés pour le(la) même patient(e)
- le numéro de sécurité sociale reçu a déjà été relié à un(e) autre patient(e)
- réception d'une autre date de naissance
- numéro de sécurité sociale déjà reçu pour un(e) autre patient(e) via HL7
- Patient sans ID de DICOM (plus de détails en bas de page)
- Patient sans nom de DICOM : un nom de patient est généré (« UNK_ »+ [abréviation de la source]+numéro unique) et utilisé (de plus amples explications en bas de page)

Pour chaque anomalie enregistrée, les informations suivantes sont affichées :


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

- la source de l'examen
- un lien vers l'examen
- la date de l'examen
- la date et l'heure auxquelles l'anomalie a été enregistrée
- le type d'anomalie + le niveau d'accès requis d'un utilisateur pour pouvoir ouvrir l'examen
- une description de l'anomalie
- les mesures correctives possibles

Une fois que vous avez sélectionné une solution, celle-ci est surlignée en vert. En plaçant votre curseur au-dessus du tableau, vous pourrez voir qui et quand la solution a été sélectionnée.

Si un même numéro de sécurité sociale a été enregistré pour deux patient(e)s différent(e)s, vous pourrez attribuer ce numéro à l'un(e) des deux patient(e)s ou fusionner les deux patient(e)s.


Cette dernière option permet l'affichage suivant pour suivre de manière contrôlée le déroulement de la fusion.

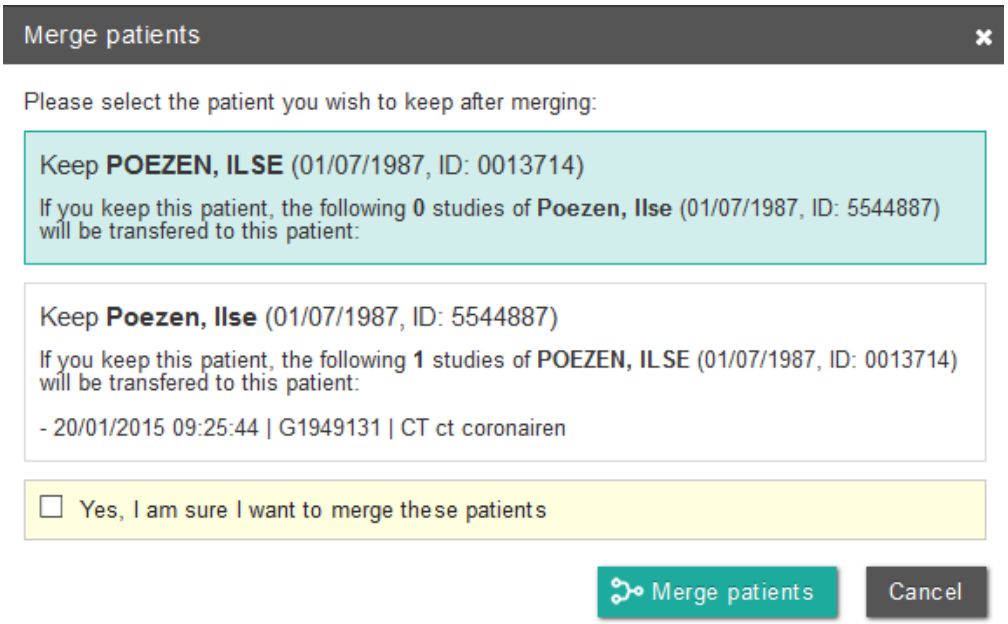

Important !

Une fois qu'une solution a été appliquée, il est impossible de l'annuler !

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

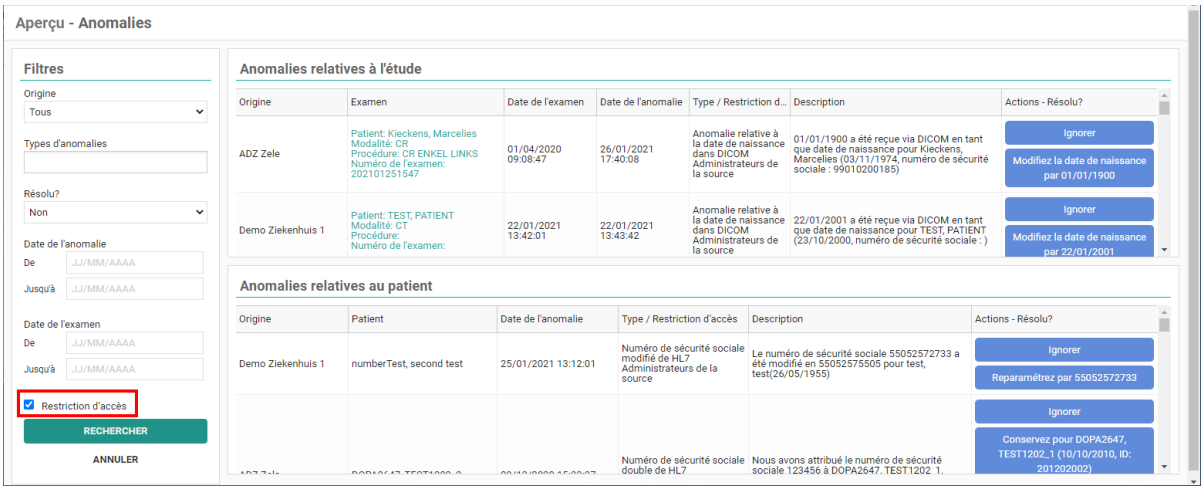

Règles en matière de rafraîchissement

La page d'aperçu de l'anomalie est rafraîchie après une action pouvant impacter d'autres anomalies :

Les règles suivantes s'appliquent :

Si une anomalie qui était enregistrée sur la base d'informations HL7 conflictuelles est résolue, la page se rafraîchira après les actions suivantes :

- Conserver le patient
- Fusionner
- Attribuer un numéro de sécurité sociale
- Retirer l'examen

Si une anomalie qui était enregistrée sur la base d'informations DICOM conflictuelles est résolue, la page se rafraîchira après les actions suivantes :

- Modifier
- Fusionner

Si un enregistrement est modifié via HL7, la page **ne se** rafraîchit pas après les actions suivantes :

- Ignorer
- Conserver le numéro de sécurité sociale
- Changer le patient
- Inverser la date de naissance

Si un enregistrement est modifié via DICOM, la page **ne se** rafraîchit pas après les actions suivantes :

- Ignorer

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Conserver

Important !

Seules les 100 anomalies les plus récentes sont affichées.

Pour afficher une sélection des anomalies qui ont été enregistrées, vous pouvez utiliser le filtre.

Vous pouvez appliquer un filtre à un ou plusieurs champs.

Les champs sont les suivants :

- Source
- Département exécutif


  Si Source est réglé sur « Tous », le service exécutant ne peut pas être sélectionné
- Types d'anomalies
- Statut
- Date de l'anomalie
- Date de l'examen (de = 0h00 ; à = 23h59)
- Restriction d'accès

5.12 Page de présentation des paiements

Important !

Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous êtes administrateur d'un service de radiologie expéditeur et les patients doivent payer pour pouvoir consulter les images.

Pour voir un aperçu de tous les paiements qui ont été enregistrés pour votre service de radiologie, cliquez su **Outils** dans le coin inférieur droit de l'écran et sélectionnez **Paiements**.

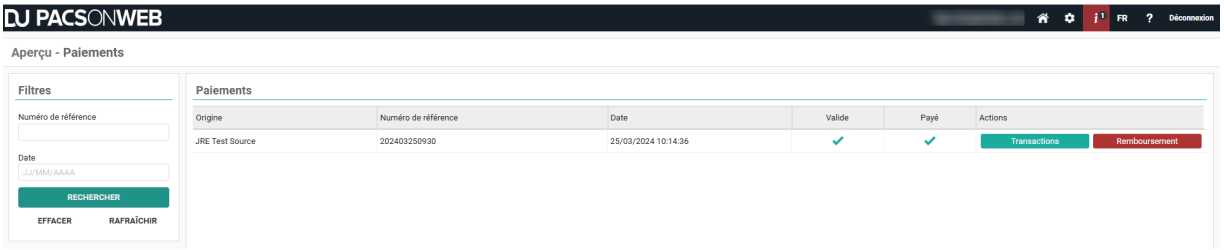


La page d'aperçu contient les 100 tentatives de connexion les plus récentes pour les examens qui nécessitent un paiement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Vous pouvez rechercher un examen spécifique en saisissant le numéro de référence ou la date d'examen et en cliquant sur **Filtrer**.

Chaque ligne comprend les éléments suivants :

- **Source** : La source qui a envoyé l'examen.
- **Numéro de référence** : Le numéro de référence qui a été utilisé pour ouvrir l'examen.
- **Date** : Le moment où l'accès à l'examen a été enregistré.
- **Valide** : Indique si un token a pu être demandé avec succès auprès de l'instance de paiement
- **Payé** : Indique que le paiement a été enregistré avec succès
- **Actions** : Contient deux boutons,**Transactions**et**Annulation**.
  - **Transactions** : En cliquant sur ce bouton, vous obtenez une boîte de dialogue affichant toutes les transactions relatives au paiement.

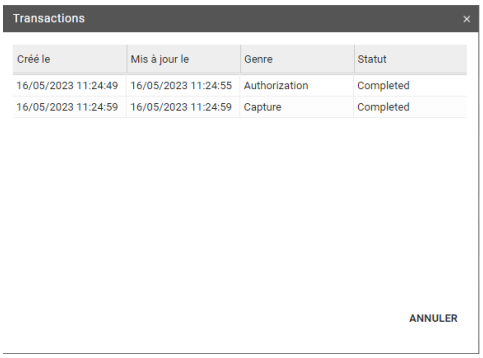

    - Types de transactions :
      - **Autorisation** : L'utilisateur a donné l'autorisation d'effectuer le paiement ; l'argent n'a pas encore été transféré
      - **Capture** : Le paiement a été effectué, c.-à-d. que l'argent a été transféré
      - **Remboursement** : Le paiement a été remboursé.
    - États de transaction :
      - a été initiée
      - est en cours
      - a été exécutée avec succès
      - a échoué
  - **Remboursement** : Cliquer sur ce bouton lance l'annulation du paiement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Important !

Lorsque vous annulez le paiement, un remboursement est effectué, mais l'examen reste marqué comme payé.

5.13 Mémoire cache locale des images

Outre le traitement des images dans l'environnement DeepUnity PACSonWEB central dématérialisé, un service d'imagerie médicale peut choisir de traiter les images localement dans un cache d'images local.

- Les utilisateurs ayant accès au cache d'images local peuvent accéder à ces images presque instantanément au sein du réseau local, plutôt que d'attendre que toutes les images soient transférées et traitées par l'environnement DeepUnity PACSonWEB central.
- Pour ces utilisateurs, la page d'aperçu contiendra tous les examens qui sont disponibles par le biais du cache d'images local, ainsi que ceux qui sont disponibles par le biais de l'environnement DeepUnity PACSonWEB central.
- Pour les examens disponibles dans le cache d'images local, la colonne **Images** contient le nombre d'images disponibles dans DeepUnity PACSonWEB / le nombre d'images disponibles dans le cache d'images local (L).

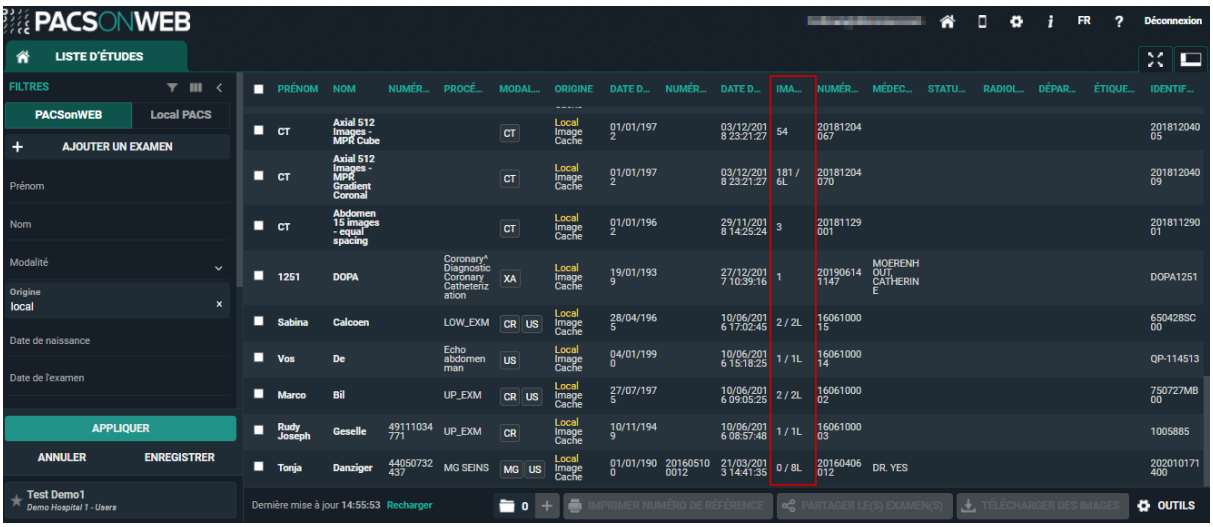

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour les images d'examen qui ne sont disponibles que via le cache d'image local :

- partage d'un examen (Partager des examens à partir de la liste d'examens (Page 140))
- téléchargement d'images (Téléchargement des examens à partir de la liste d'examens (Page 192))

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895


Ces fonctionnalités seront disponibles une fois que toutes les images seront disponibles dans l'environnement DeepUnity PACSonWEB central.

5.14 Règles sources

Des règles spécifiques fondées sur DICOM peuvent être configurées pour une source. Les règles doivent se voir attribuer un nom, un type de règle et des exigences de règle.

Configuration d'une règle


1. Cliquez sur le menu « Outils » dans la liste des examens, puis sur **Règles Sources**.

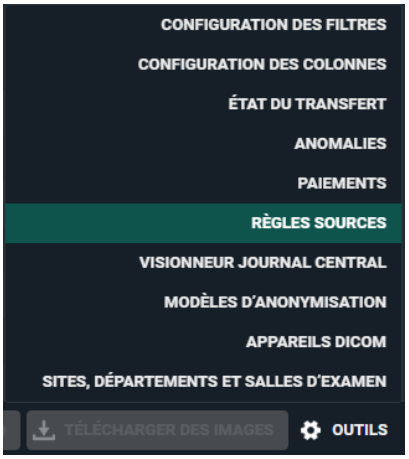

   Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de configurer de nouvelles règles.
2. Sélectionnez la source correcte (seules les sources pour lesquelles l'utilisateur dispose de droits administrateur s'afficheront) ;
3. Donnez un nom à la règle et sélectionnez le type de règle. Les types de règles suivantes peuvent être configurées :
   - Envoyer à CVKO
   - Envoyer à AI
4. Sélectionnez la balise DICOM, le critère de sélection et saisissez la bonne valeur pour la règle.
5. En option, vous pouvez ajouter une exigence supplémentaire à la règle. Pour ce faire, cliquez sur **Ajouter une nouvelle exigence.**
   - **Règles sources avec une règle et deux exigences :** Les images DICOM doivent répondre à ces deux exigences pour être conformes à la règle source et être envoyées au CVKO ou à l'IA.
   - **Règles sources avec deux règles, chacune avec une ou plusieurs exigences :** Les images DICOM doivent répondre à l'une des règles pour être conformes à la règle source et être envoyées au CVKO ou à l'IA.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

6. Cliquez sur **ENREGISTRER** quand vous avez terminé.

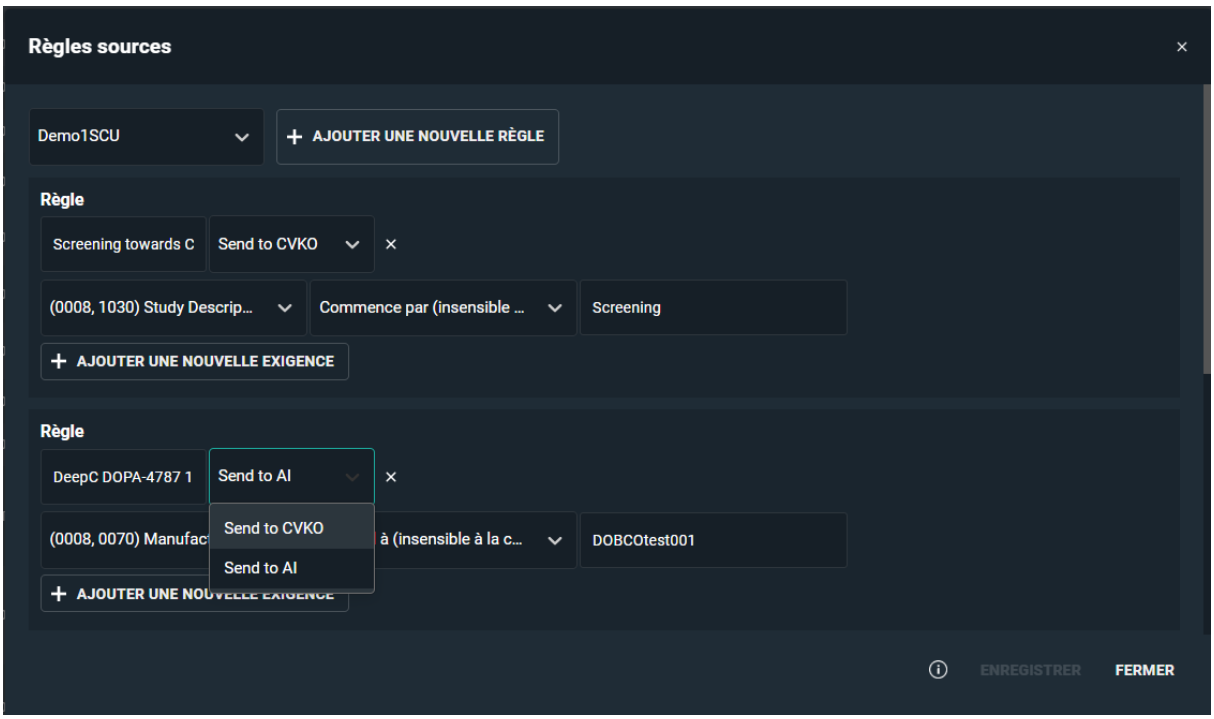

5.15 Ajouter des étiquettes à des examens

Vous pouvez ajouter des étiquettes aux examens à partir de la liste d'examens.


Pour lier une étiquette à un ou plusieurs examens de la liste :

1. Sélectionnez l'examen ou les examens auxquels vous souhaitez ajouter une étiquette.
2. Cliquez sur le bouton **ÉTIQUETTES** en bas de la page.
   a. Sélectionnez les étiquettes que vous souhaitez ajouter.

Les étiquettes seront ajoutées à l'examen ou aux examens sélectionnés et affichées dans la colonne **ÉTIQUETTES**.

- Si la colonne **ÉTIQUETTES** n'est pas visible dans votre liste, vous pouvez la configurer dans la **Configuration des colonnes**. Voir Configurer la liste d'examens (Page 73) pour une explication détaillée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

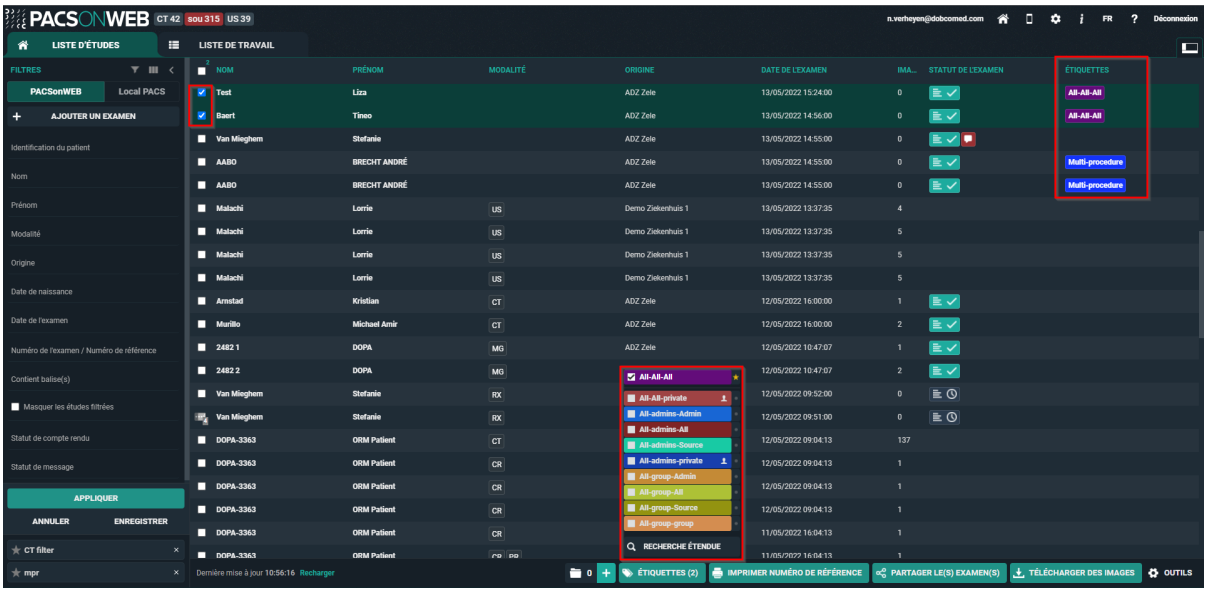

Icônes d'étiquettes	Description
★ Favoris	Marque une étiquette comme favorite. Ajouter ou supprimez une étiquette de vos favoris en cliquant sur l'icône en forme d'étoile à côté de l'étiquette souhaitée.
Privé	Marque une étiquette comme étant privée. Faites en sorte que l'étiquette ne soit visible que par vous en ajoutant une étiquette privée.
✓ Examens sélectionnés	Indique que l'étiquette est liée à tous les examens sélectionnés. Les examens sélectionnés sont affichés en haut de la liste des étiquettes.
■ Sous-ensemble d'examens sélectionnés	Indique que l'étiquette est liée à un sous-ensemble des examens sélectionnés, mais pas à tous les examens sélectionnés.

Par défaut, 10 étiquettes sont affichées lorsque vous cliquez sur le bouton **ÉTIQUETTES** .

- Les favoris, les examens sélectionnés et les sous-ensembles d'examens sélectionnés sont toujours visibles, le cas échéant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Si ces trois catégories ne cumulent pas 10 étiquettes, les autres étiquettes disponibles sont ajoutées à la liste par ordre alphabétique.

- Si vous avez accès à plus d'étiquettes que celles affichées dans la liste, vous pouvez cliquer sur **RECHERCHE ÉTENDUE** pour voir toutes les autres étiquettes.
  - Pour trouver une étiquette spécifique, vous pouvez faire défiler la liste ou taper le nom de l'étiquette dans la barre de recherche.

Conseil :

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des étiquettes à l'examen à partir de la page **Administration de l'examen**, sous l'onglet Étiquettes (Page 294).

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DeepUnity PACSonWEB page d'examens

6

Lorsque vous cliquez sur un examen dans la liste d'examens, vous accédez à la page de l'examen.

C'est également la page qui s'ouvre si vous vous connectez en utilisant un numéro de référence (je suis le patient...).



AVERTISSEMENT :

Il **N'EST PAS** permis d'utiliser DeepUnity PACSonWEB pour le diagnostic si vous êtes connecté avec un numéro de référence.


Dans ce cas, cela est également indiqué dans la page de l'examen :




6.1 Histoire

Une vue d'ensemble des examens du patient est disponible au bas de la page de l'examen. Seuls les examens auxquels vous avez accès sont affichés

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

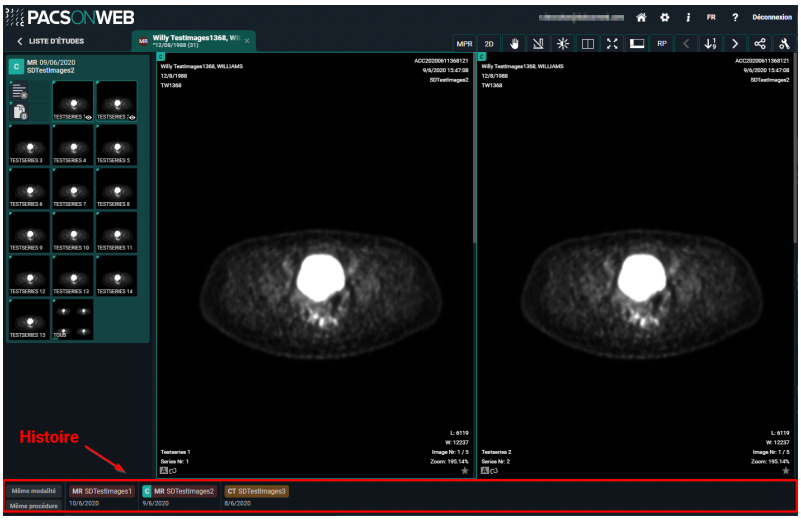

Pour afficher la vue d'ensemble des examens du patient :

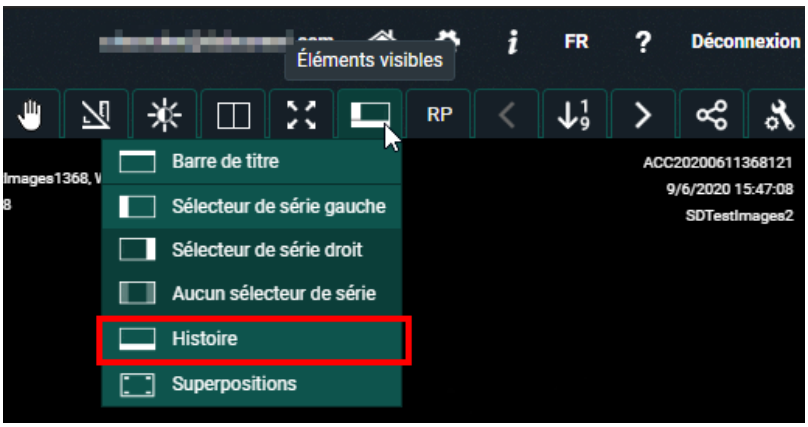

1. Cliquez sur **Éléments visibles**  dans la barre d'outils.

2. Sélectionnez **Historique** dans la liste déroulante.

- **Connexion avec un numéro de référence** : Les examens affichés sont liés au numéro de référence.
- **En vous connectant à votre compte :** Les examens affichés sont ceux qui vous ont été attribués ou qui ont été attribués à votre groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Uniquement en Belgique

En tant qu'utilisateur enregistré, vous avez également accès aux examens antérieurs du patient, si les conditions suivantes sont réunies :

- Le consentement du patient est enregistré,
- Vous faites partie d'un « cercle de confiance »,
- L'hôpital où l'examen antérieur a été réalisé autorise le partage de l'examen de cette manière (chronologie du patient).

Utilisation de la barre d'historique

Vous pouvez filtrer par type d'appareil ou type d'examen. Pour ce faire, cliquez sur les boutons **Même modalité** ou **Même procédure** en bas à gauche de la page de l'examen.

En passant sur un examen dans la barre d'historique, les options suivantes s'affichent :


- **Ouvrir examen**
- **Comparer l'examen**
- **Charger l'examen** +

  En passant sur l'examen actuellement ouvert, le message **Examen en cours** s'affiche. Aucune autre option n'est disponible.

Ouvrir examen


En cliquant sur **Ouvrir l'examen**, vous fermez l'examen en cours et vous ouvrez l'examen que vous souhaitez consulter.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

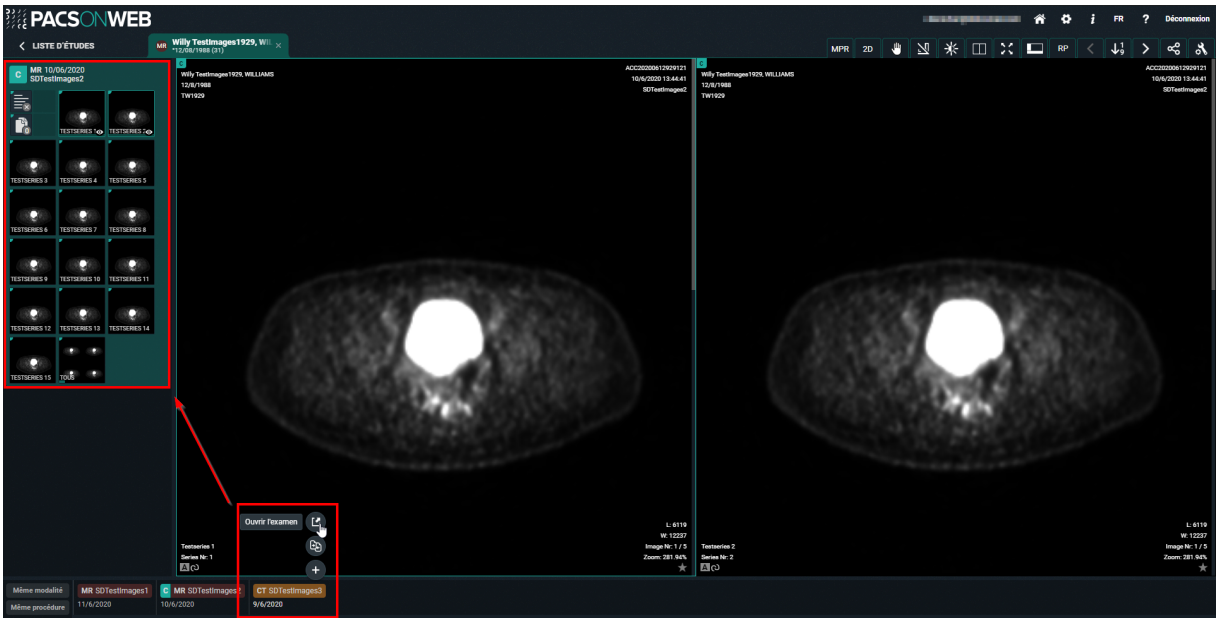

Comparer l'examen

En cliquant sur **Comparer l'examen**, l'examen s'affiche dans le sélecteur de série et dans l'écran d'image.

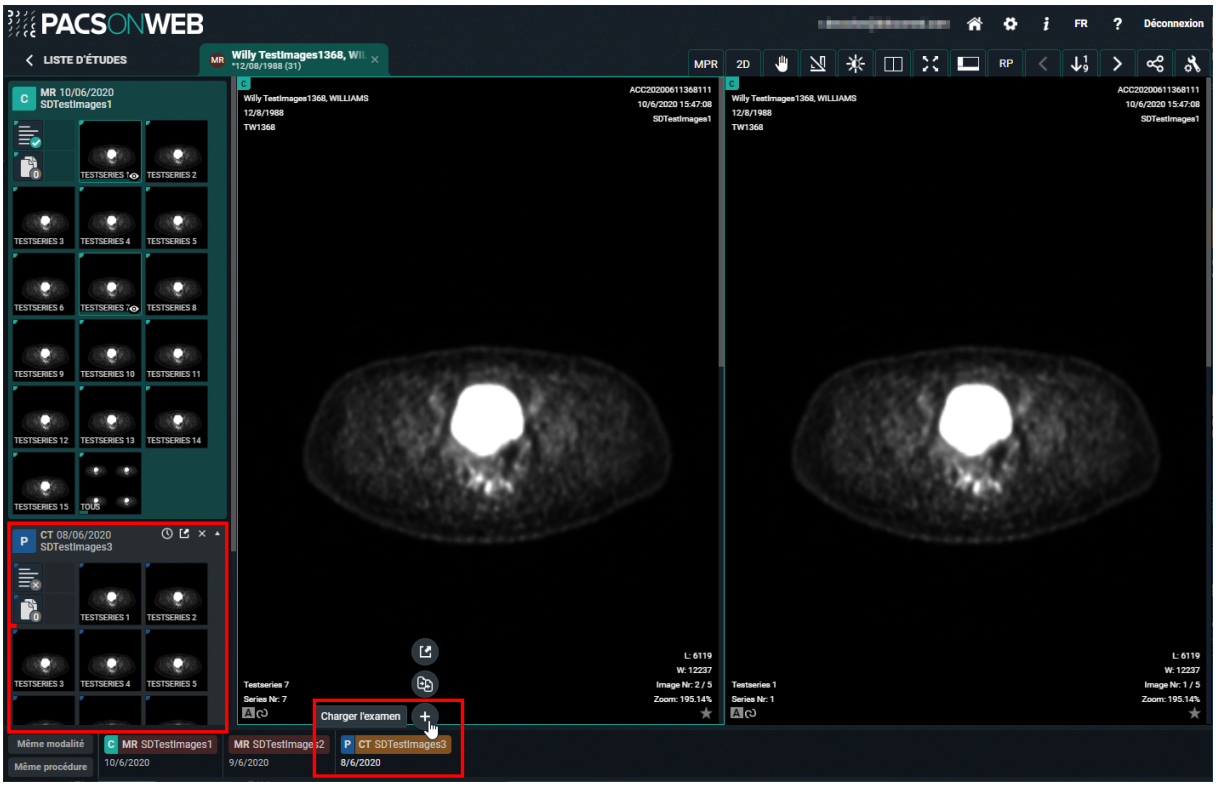


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Charger l'examen

En cliquant sur **Charger l'examen**, l'examen s'affiche dans le sélecteur de séries.

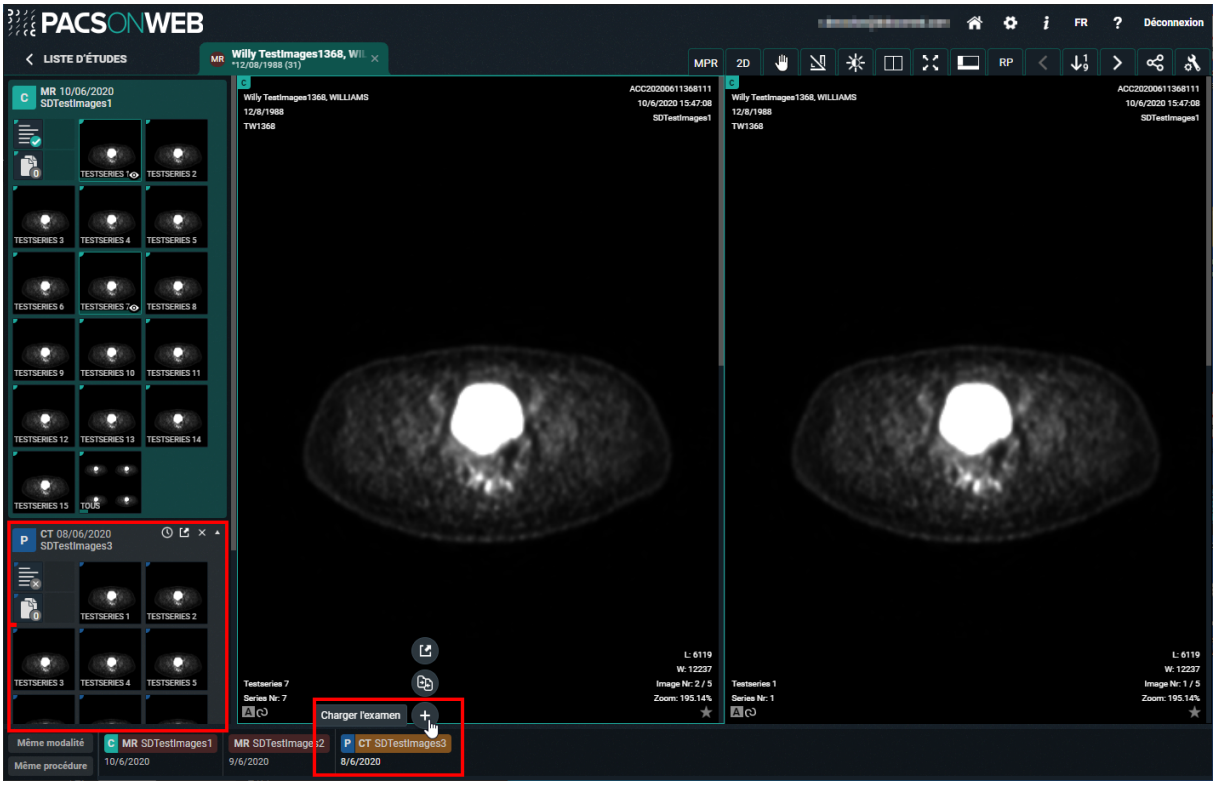

6.2 sélecteur de série

Séries disponibles

Dans le sélecteur de série, une liste des séries disponibles pour chaque examen est présentée.

Si le sélecteur de série n'est pas affiché, cliquez sur **Éléments visibles** dans la barre de menu

Vous pouvez choisir d'afficher le sélecteur de série à gauche ou à droite de l'écran ou de ne pas l'afficher du tout.


- **Sélecteur de série à gauche**
- **Sélecteur de série à droite**
- **Aucun sélecteur de série**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Comment les informations sont affichées

Le type d'examen, la date de l'examen et la description de la procédure de l'examen sont indiqués en haut de la série d'images.

Dans le coin supérieur droit du sélecteur de série, une icône est disponible pour recharger l'examen, par exemple dans le cas où des images supplémentaires ont été mises à disposition pour l'examen.

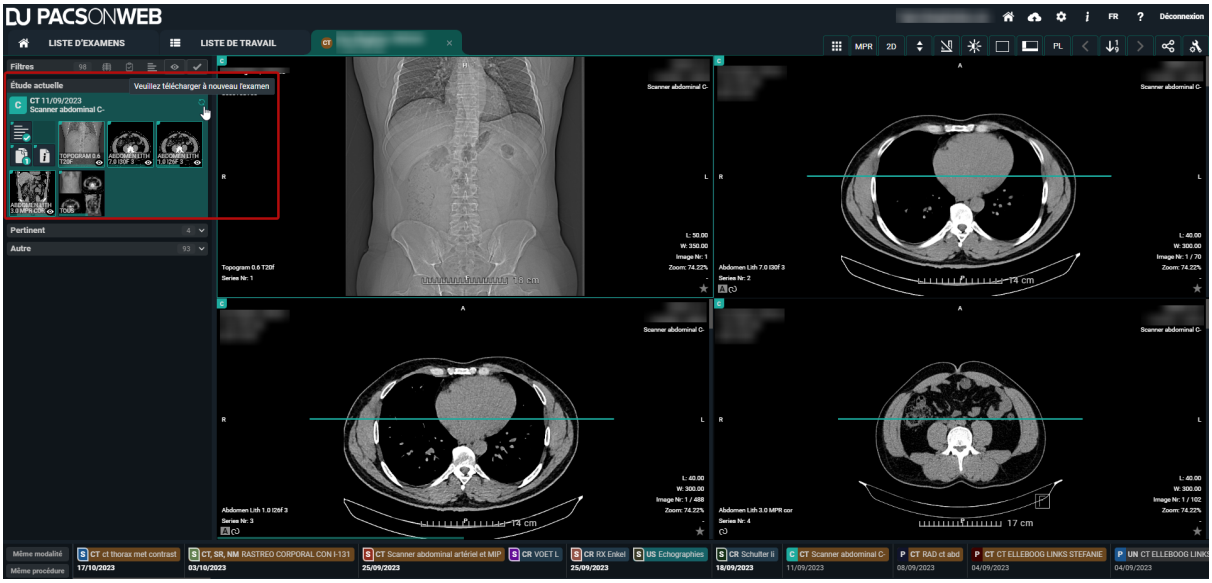

Compte-rendu, documents & demande

Le sélecteur de série contient également le compte-rendu, les documents complémentaires et les informations relatives à la demande. Vous pouvez les consulter, les télécharger, les imprimer, etc.

Important !

Ce n'est le cas que s'ils sont disponibles et si vous y avez accès.

Compte-rendu validé disponible

Compte-rendu préliminaire disponible

Projet de compte-rendu disponible

Aucun compte-rendu disponible

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Document(s) disponible(s) (3 pour cet exemple)

Aucun document disponible

Informations de demande disponibles


Important !

Seuls les administrateurs d'un examen peuvent créer un compte-rendu, ajouter des documents et ajouter des informations de demande.

- Créer un compte-rendu

  Consulter : Affichage du compte-rendu (Page 321)
- Ajouter des documents :

  Cliquez sur l'icône des documents et ensuite sur l'icône « plus » verte.

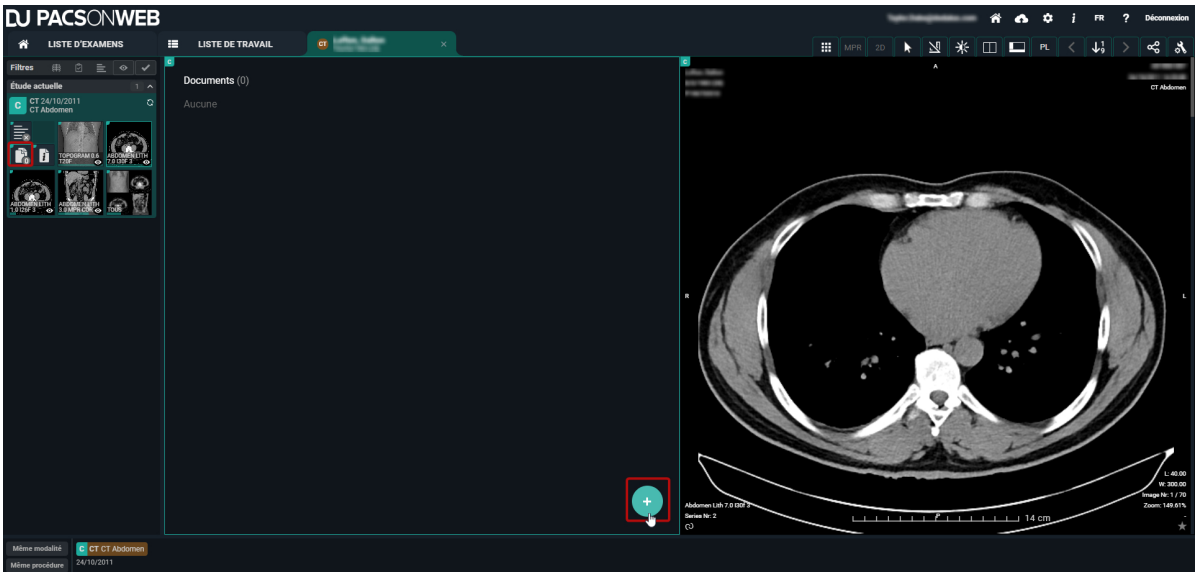


Sélectionnez le document approprié et cliquez sur Ouvrir.


Seuls les types de fichiers suivants peuvent être chargés :

- PDF
- RTF
- TXT
- PNG
- JPEG
- JPG

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

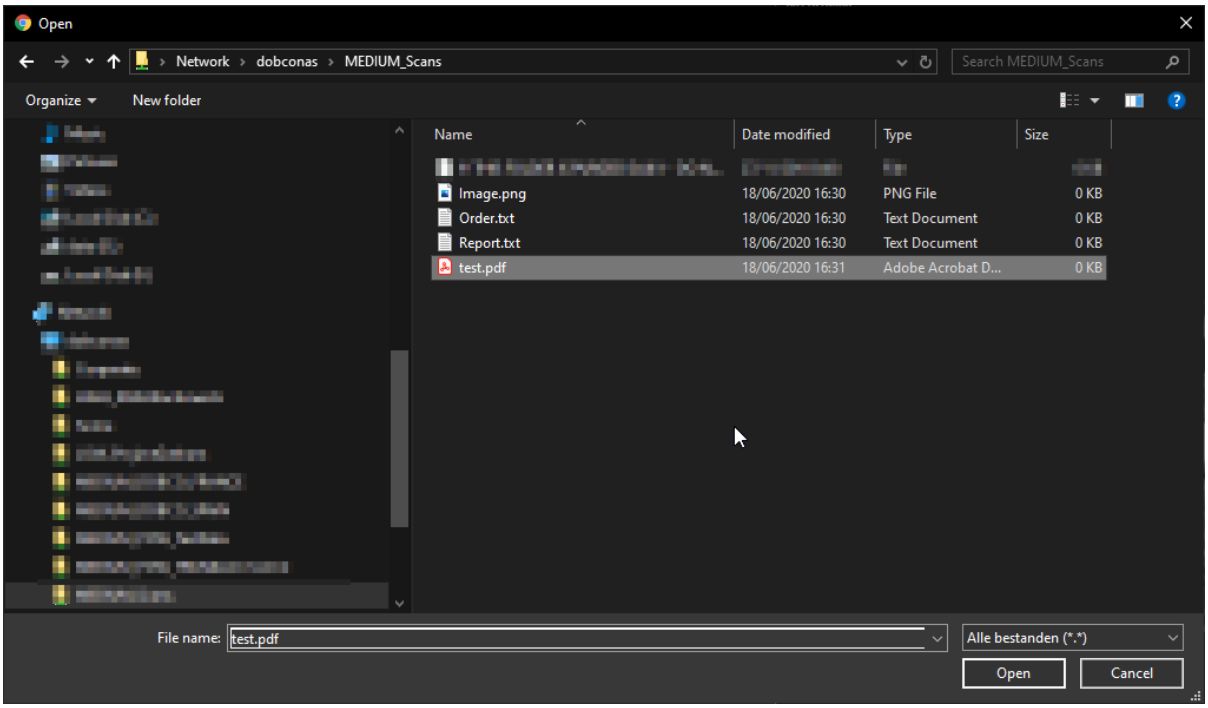


Le document sélectionné est téléchargé et affiché dans l'aperçu des documents.

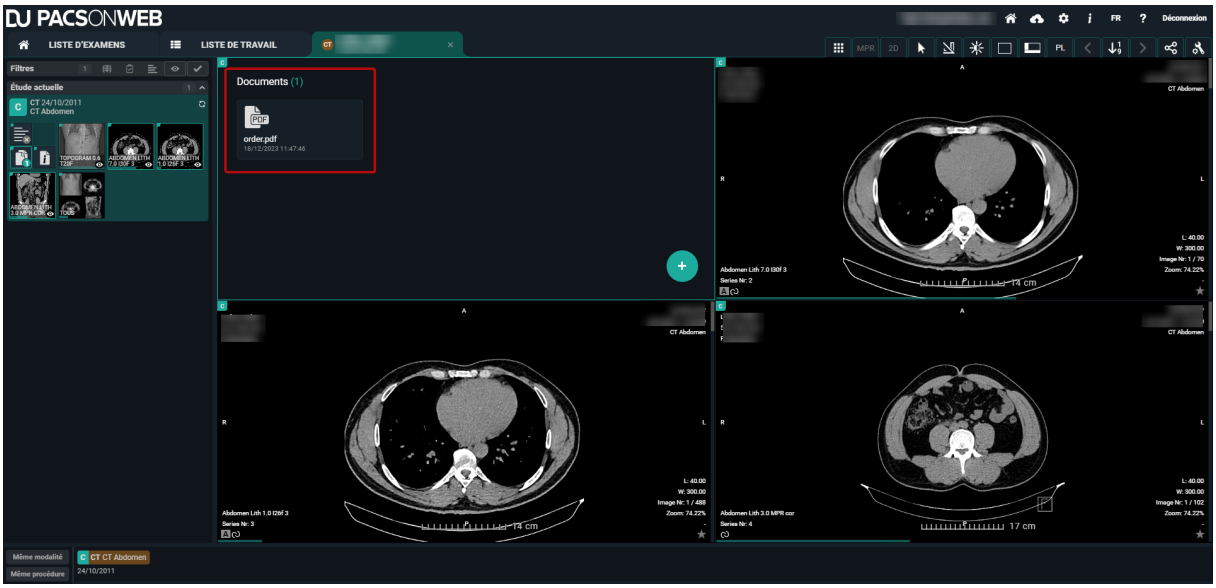



Glisser-déposer : Vous pouvez également ajouter un fichier en le faisant glisser directement de votre ordinateur vers la fenêtre Documents.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

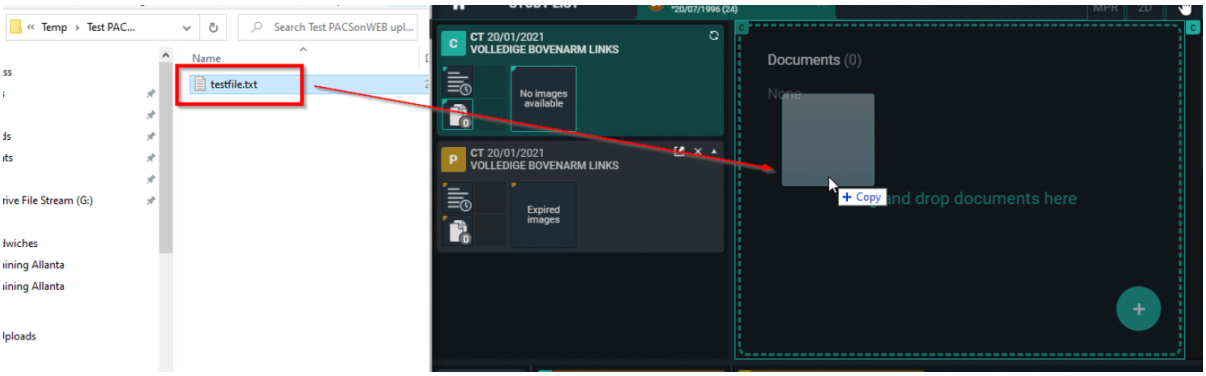

Lorsque vous cliquez sur le document, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger ou le supprimer.

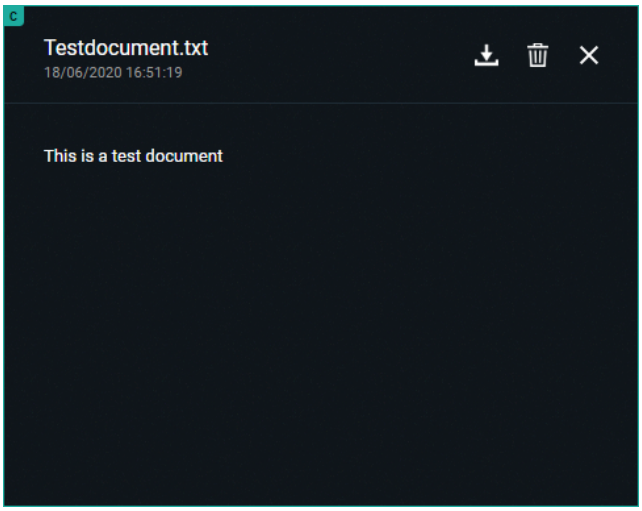


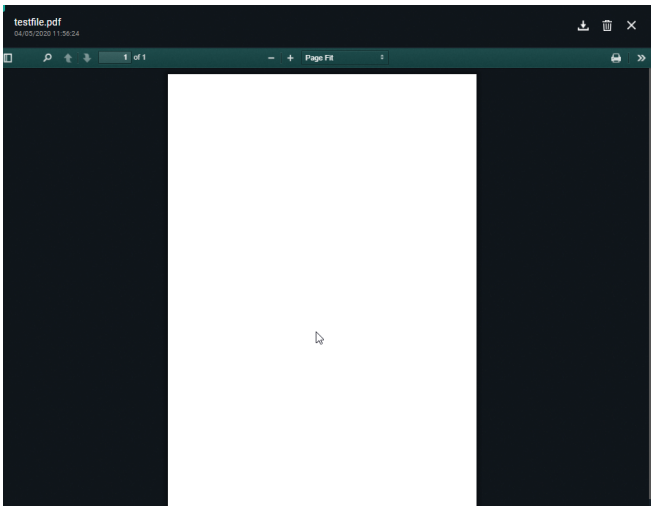


- Ajouter des informations de demande :

  Cliquez sur l'icône des documents et ensuite sur l'icône « plus » verte.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

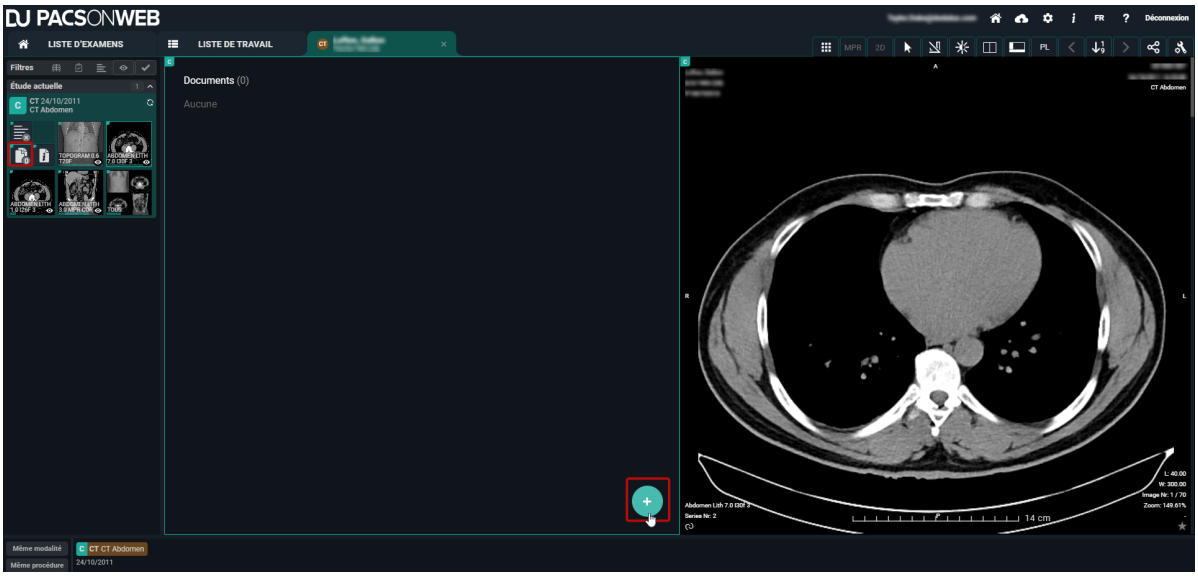


Glisser-déposer ou sélectionnez le document approprié et cliquez sur Ouvrir. Le fichier doit porter le nom « Demande » et le type de fichier doit être txt ou pdf.

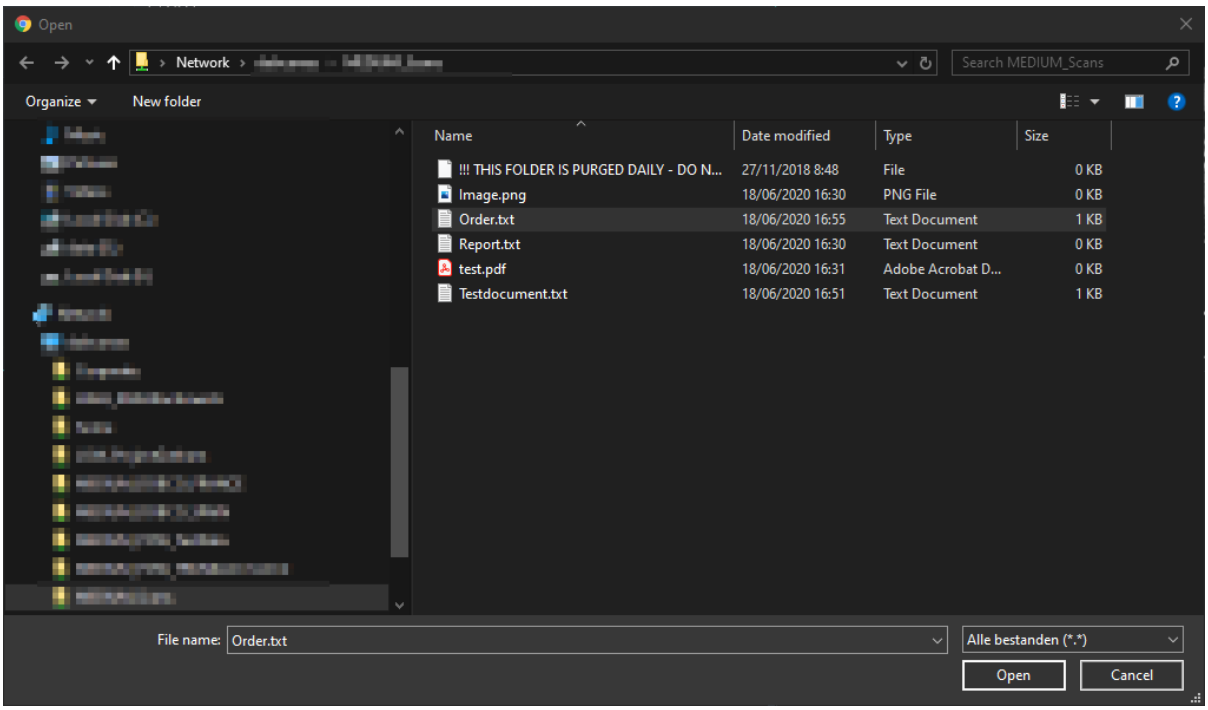

Le document téléchargé est affiché dans l'aperçu des documents et l'icône de demande devient visible dans le sélecteur de série.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

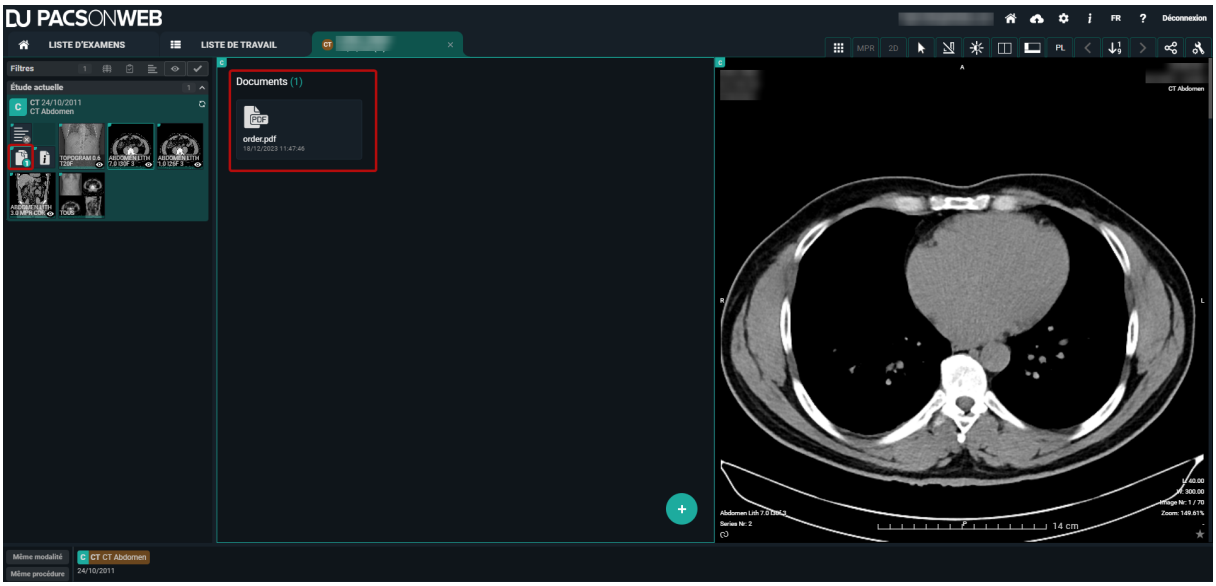

Les fichiers PDF encapsulés s'afficheront dans la zone d'affichage « Documents ».

Important !

Un PDF encapsulé existant, traité avantDeepUnity PACSonWEB3.3.300, s'affichera avec le titre de document « Inconnu ».

Afficher des informations de demande

Cliquer sur l'icône d'informations sur la demande  affichera la demande numérisée si elle est disponible et si vous disposez des droits d'accès requis.

Un deuxième onglet affiche les informations relatives à l'examen. Si aucune demande numérisée n'est disponible, les informations relatives à l'examen s'affichent immédiatement.


Le panneau d'information sur l'examen présente toutes les informations dont nous disposons sur le patient, l'examen, la commande et le médecin demandeur.

Si les champs sont remplis, ils seront surlignés, sinon ils seront grisés. Ce panneau est en lecture seule, aucun des champs ne peut être adapté ici. Si des modifications doivent être apportées à ces informations, veuillez consulter Administration (Page 257) pour obtenir des instructions.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Vue d'ensemble du panneau d'information sur l'examen

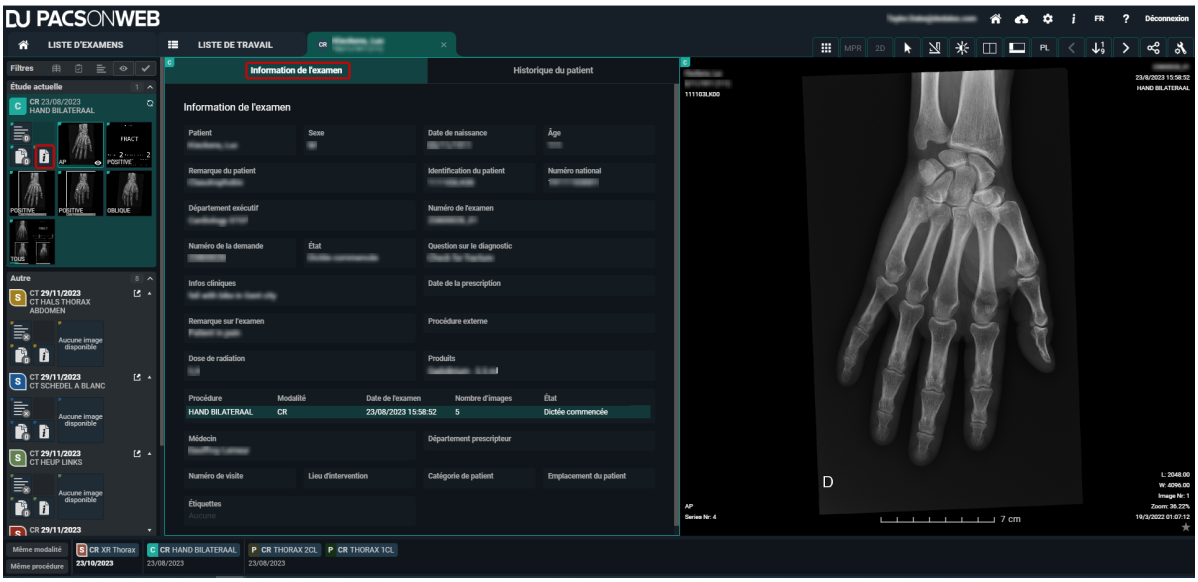


Un troisième onglet donne accès à l'historique du patient. Celui-ci contient une liste de toutes les études réalisées pour le patient, triées chronologiquement.

Les filtres de tri permettent de filtrer la liste pour obtenir un meilleur aperçu.

Un clic sur une icône de compte-rendu permet d'afficher le compte-rendu de l'examen concerné dans la section située sous la liste.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

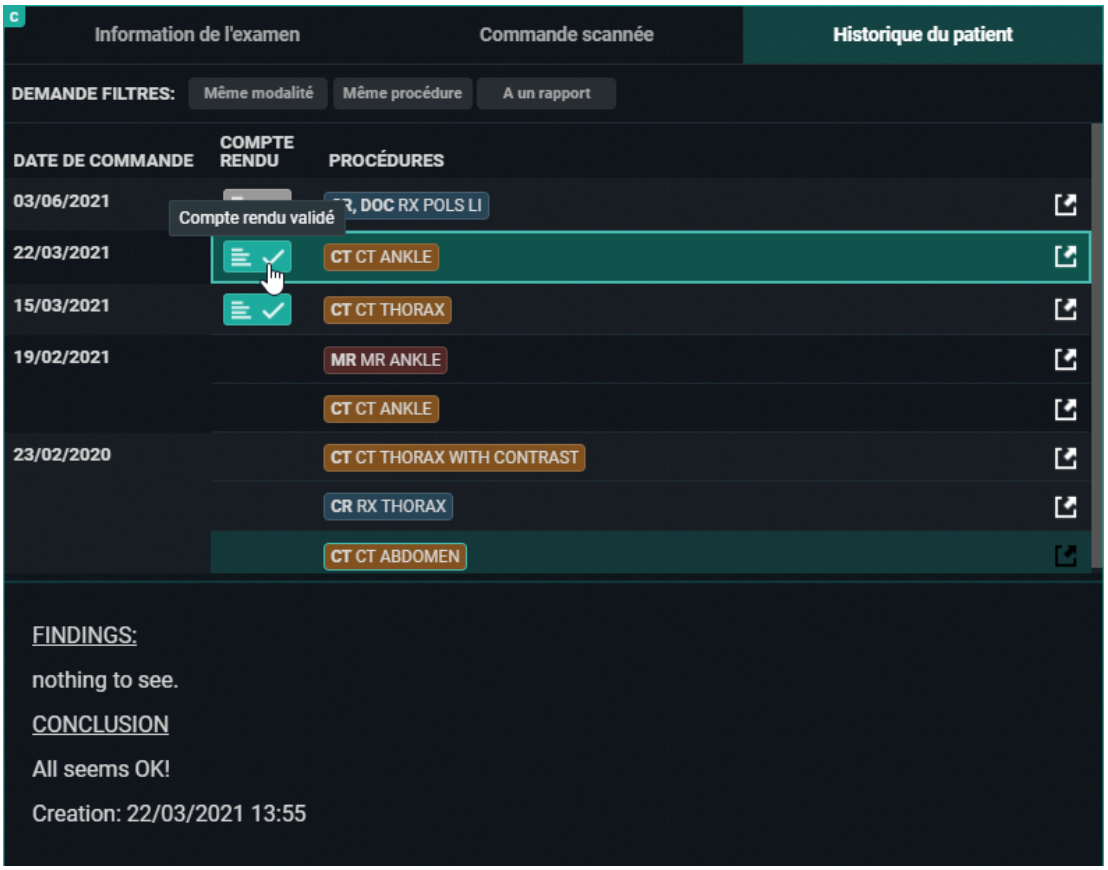

Un clic sur une description de procédure permet d'ouvrir automatiquement les images de l'examen concerné, pour comparaison avec votre examen actuel.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

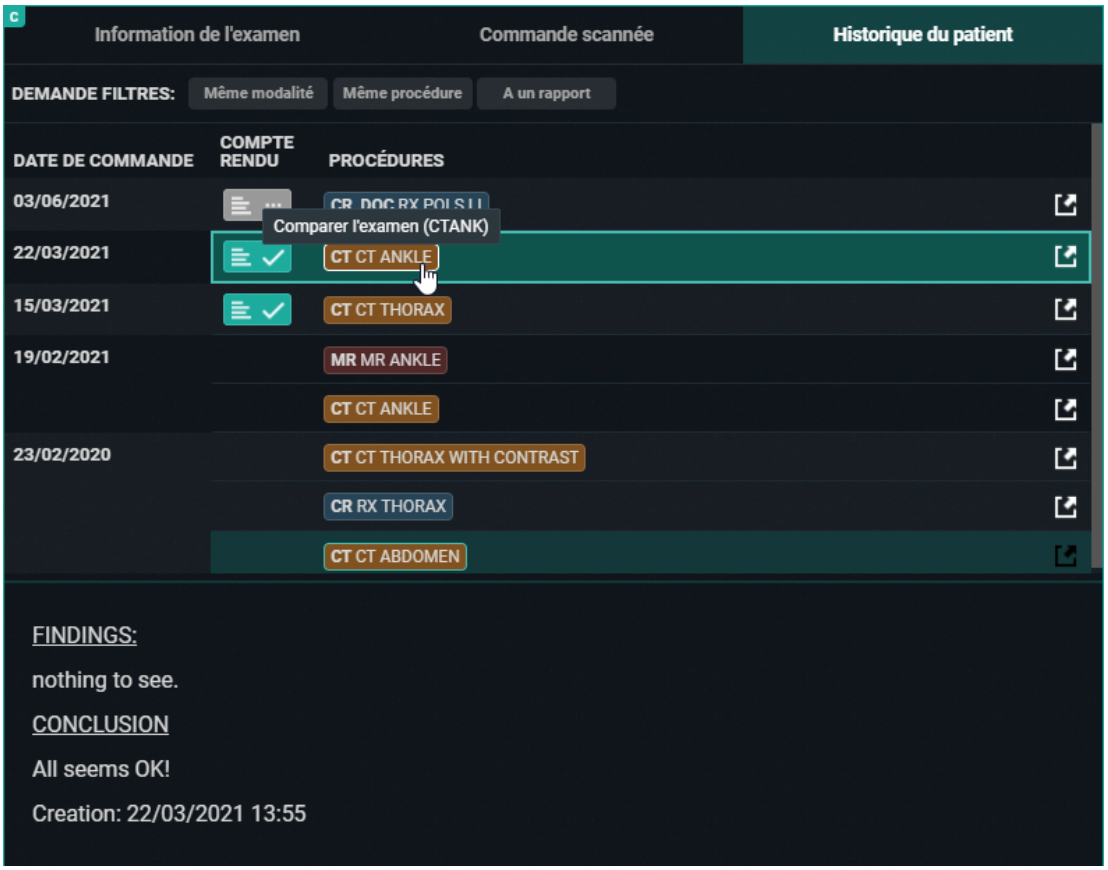

Remarque :


Les champs qui sont affichés dans les informations sur la demande peuvent être configurés au niveau de la source.

Si vous souhaitez modifier les champs affichés ou l'accès aux informations sur les demandes pour votre source, veuillez contacter notre centre d'assistance.

Affichage des séries

Vous pouvez ajouter des séries à l'écran d'affichage en les faisant glisser ou en cliquant dessus.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

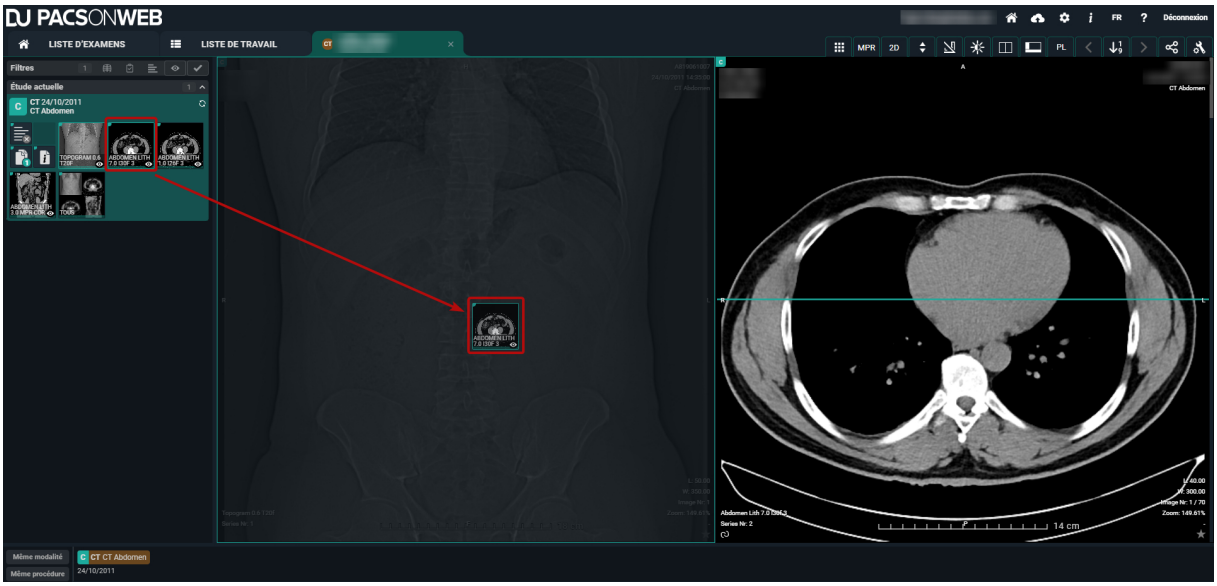


Les images sont conservées en ligne pour une période de 1 an par défaut et de 3 ans pour une mammo. Si le délai de rétention a expiré, les images sont supprimées de DeepUnity PACSonWEB et une série, marquée comme « Images expirées », est alors disponible dans le sélecteur de série.

La même série est également présentée si un examen est disponible pendant au moins 1 semaine et aucune image n'est encore disponible.

Selon le service de radiologie destinateur, vous pouvez avoir la possibilité de récupérer des images expirées/manquantes, à l'aide de la fonctionnalité Restituer.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

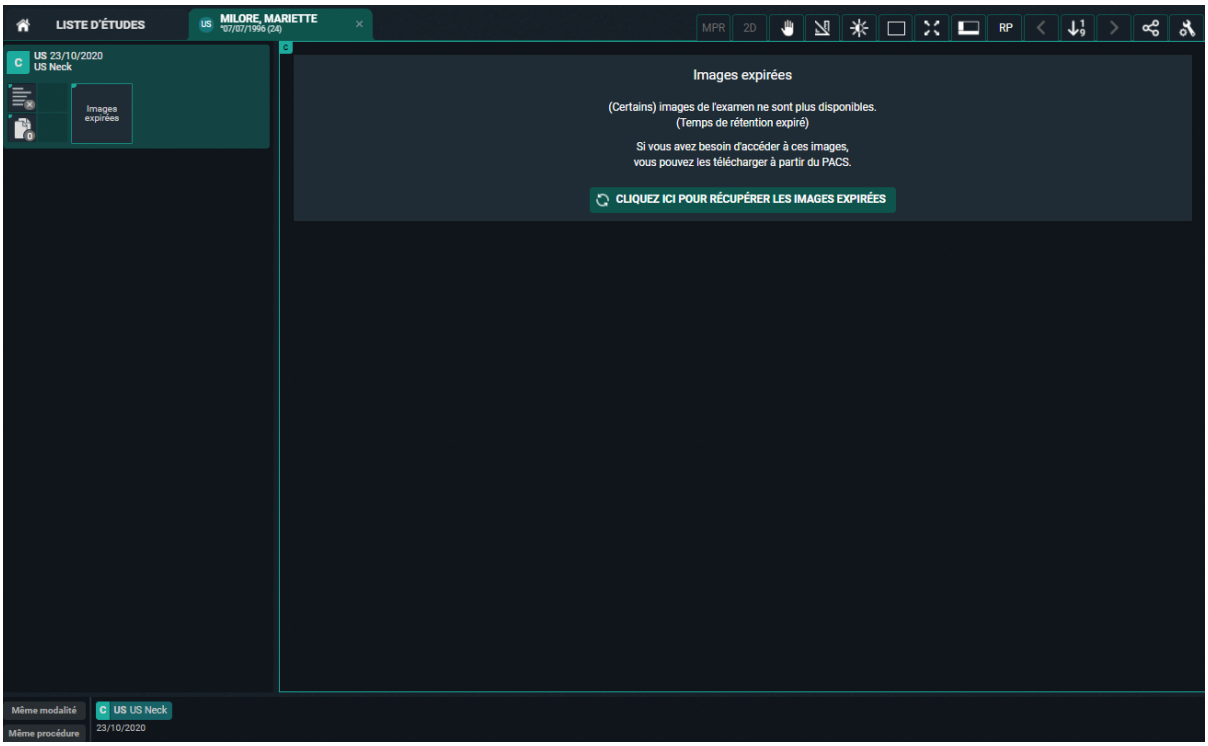

Si l'option est disponible, vous avez la possibilité de :

- **TÉLÉCHARGER LES IMAGES :** télécharger les images qui se trouvaient initialement en ligne (éventuellement filtrées)
- **TÉLÉCHARGER TOUTES LES IMAGES** : télécharger toutes les images de l'examen

Vous pouvez ajouter plusieurs examens à la liste en cliquant sur un examen dans l'historique (Page 211).

Même si vous vous êtes inscrite en tant que patient(e) avec un code de référence qui donne accès à une demande de plusieurs études, les différentes études pourront être consultées dans le sélecteur de séries.

Examens antérieurs et ultérieurs

Examens antérieurs et ultérieurs


Lorsqu'un examen est ouvert, DU POW indique par les symboles P et S si un examen plus ancien ou plus récent est également disponible pour être comparé à l'examen en cours.

P = Prior study - Examen antérieur : l'examen a une date d'examen plus ancienne que l'examen en cours.


S = Subsequent study - Examen ultérieur : l'examen a une date d'examen plus récente que l'examen en cours.

Lorsqu'une image d'un examen antérieur ou postérieur est affichée, la date est mise en évidence pour donner une indication supplémentaire.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

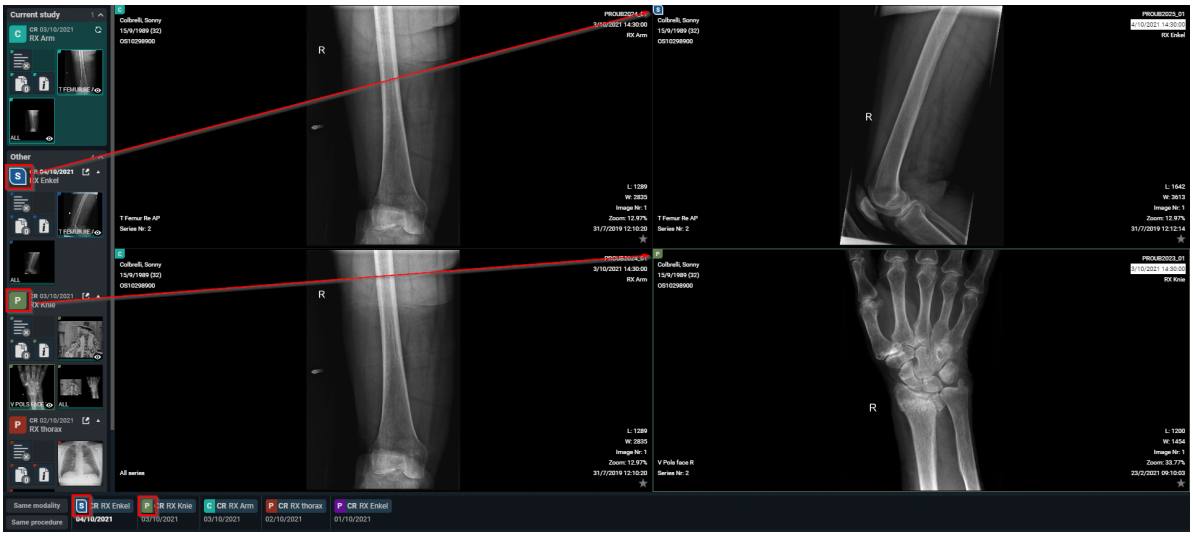

Si un problème est survenu lors du chargement d'une image, vous verrez l'icône suivante. Dans ce cas, veuillez contacter le centre de services.

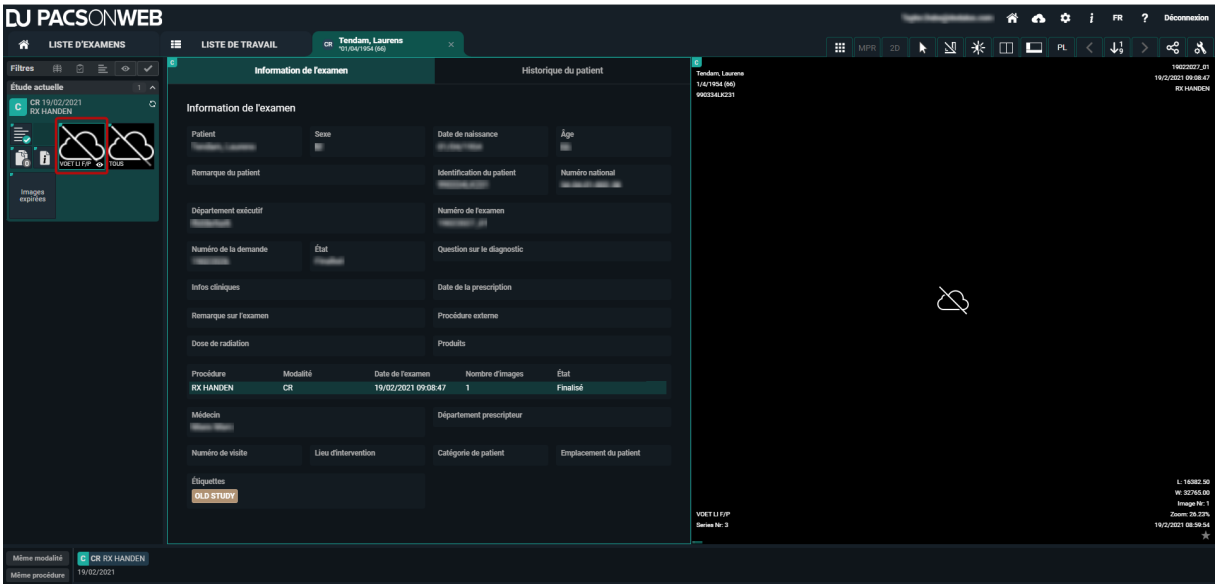

6.2.1 Sélecteur de série étendu

Le sélecteur de séries étendues fournit une vue d'ensemble détaillée des examens pour lesquels les utilisateurs peuvent :


- Voir les examens similaires
- Filtrer la liste des examens selon des critères spécifiques
- Relier les examens le cas échéant

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Pour activer le sélecteur de séries étendu, allez dans **Paramètres utilisateur** > **Préférences** > **Visionneuse** et activez la case à cocher **Afficher les examens antérieurs dans le sélecteur de séries**.

Groupement d'examens

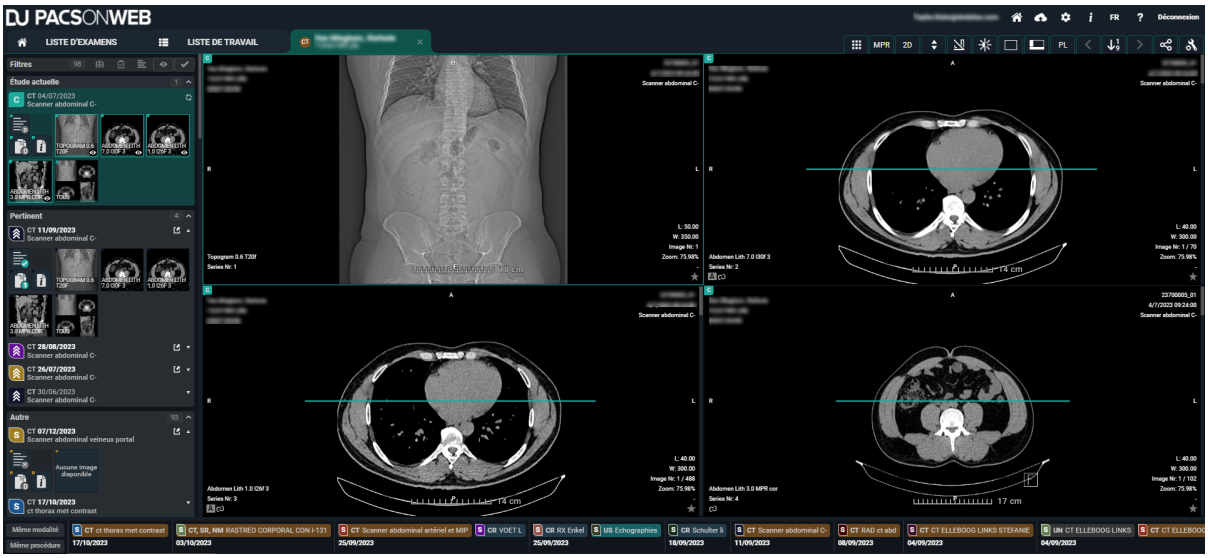


Dans le sélecteur de séries étendues, les examens sont regroupés en catégories :

- **Examen actuel :** Examen actuellement ouvert
- **Pertinent :** Examens antérieurs jugés pertinents pour l'examen ouvert
- **Autres :** Autres examens antérieurs

Tous les examens affichés dans le sélecteur de séries étendues appartiennent au même patient.

Gestion de plusieurs examens primaires

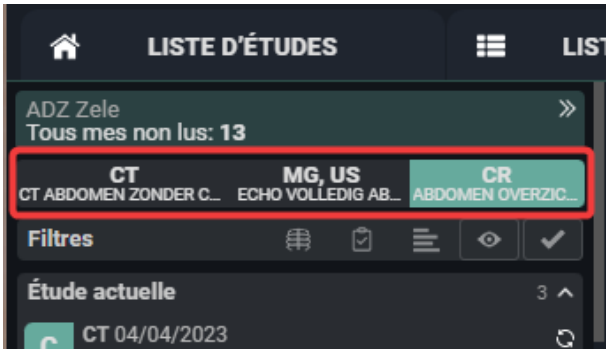

Pour les commandes comportant plus d'un examen primaire, l'utilisateur peut passer d'un examen à l'autre par le biais d'un onglet dans le sélecteur de séries étendu, affiché au-dessus de l'examen en cours.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Filtres de sélecteur de série

Dans le sélecteur de séries étendues, la liste des examens peut être filtrée à l'aide de filtres prédéfinis.

Pour appliquer ou retirer un filtre, cliquez sur l'icône.

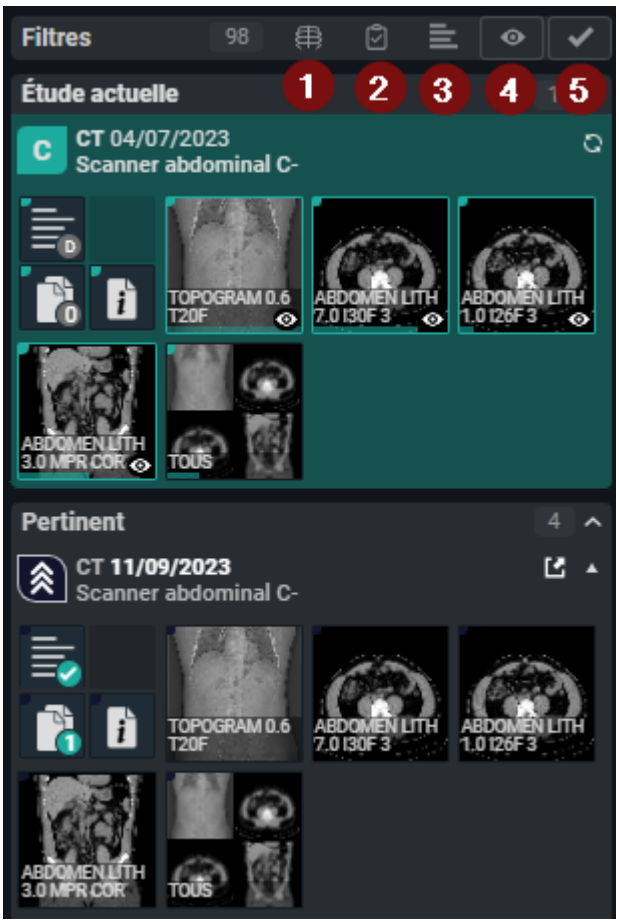

1. Même modalité
2. Même procédure
3. A un rapport
4. A des images
5. N'est pas annulé

Les filtres actifs sont verts et les filtres inactifs sont grisés.

Les filtres actifs sont mémorisés et appliqués lors de la navigation vers l'examen suivant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Lier et délier les examens pertinents

Le sélecteur de séries vous permet de voir si un examen est en cours, antérieur, subséquent ou lié avec une priorité élevée ou faible.

Icône	Examen
	Examen actuelle
	Examen antérieur
	Examen ultérieur
	Examen lié avec une priorité élevée
	Examen lié à une faible priorité

Il existe deux façons de lier différentes procédures, le cas échéant.

- Liaison manuelle à partir du sélecteur de séries
- Relier tout en comparant les examens

> **Remarque :**
>
> Les procédures liées pertinentes sont enregistrées au niveau de l'utilisateur et ne s'appliquent donc que dans le contexte d'un compte utilisateur.

Lier manuellement

Pour lier une procédure comme pertinente à partir du sélecteur de série, trouvez l'icône qui indique le type d'examen (c'est-à-dire P pour examen antérieur, S pour examen ultérieur).

- Cliquez une fois sur l'icône pour lier une procédure comme pertinente avec une priorité élevée.
- Cliquez une deuxième fois sur l'icône de la même procédure pour lier la procédure comme pertinente avec une faible priorité.

L'icône change pour indiquer que la procédure est liée comme pertinente avec une priorité élevée ou faible.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Lier lors de la comparaison

Vous pouvez également établir un lien avec une procédure lorsque vous comparez des examens. Il y a deux façons de comparer l'examen actuel avec un autre examen.


- À partir du sélecteur de série
- D'après les antécédents du patient

  Pour lier une procédure comme il convient à partir du sélecteur de série

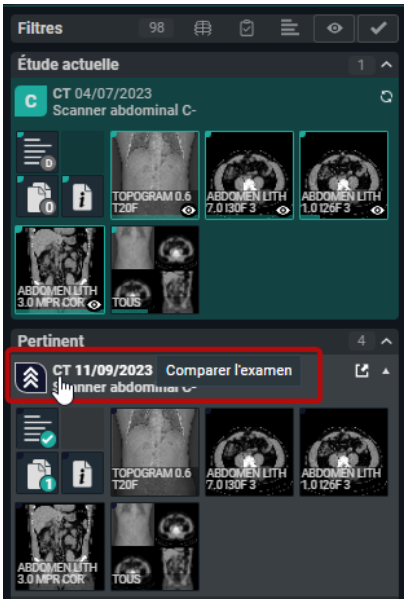

1. Cliquez sur la description de l'examen.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous demande si vous souhaitez lier la procédure comme pertinente, cliquez sur **Oui.**

Lier une procédure comme pertinenbte depuis l'historique du patient :

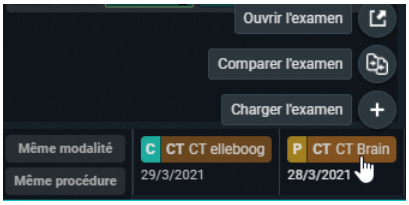

1. Survoler l'étiquette dans l'historique du patient et cliquez sur **Comparer l'examen**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous demande si vous souhaitez lier la procédure comme pertinente, cliquez sur **Oui.**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Les procédures sont liées, pas les examens.

Lorsque l'on relie des procédures comme pertinentes à des examens réalisés sur un patient, il en va de même pour d'autres patients qui ont fait l'objet des mêmes examens.

Annuler la liaison d'une procédure pertinente

Vous pouvez dissocier une procédure pertinente du sélecteur de séries étendues. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de la procédure liée...

- Pour les procédures marquées comme pertinentes avec une faible priorité, cliquez une fois sur l'icône pour dissocier la procédure.
- Pour les procédures marquées comme pertinentes avec une priorité élevée, cliquez deux fois sur l'icône pour dissocier la procédure (une fois pour changer la priorité en faible et une deuxième fois pour dissocier la procédure).

Important !

Une procédure pertinente ne peut être dissociée si l'examen comprend la même procédure que l'examen ouvert.

Comparaison auto

Si l'option utilisateur **Comparaison auto** a été activée, l'examen en haut de la liste **Antérieurs** sera automatiquement affichée dans la comparaison lors du chargement d'un examen.

La liste des examens antérieurs contient :


- Le premier examen de la même demande que l'examen en cours
- Le premier examen lié pertinent
- Tout autre examen de ce patient

  Un examen antérieur est automatiquement considéré comme pertinent s'il comprend la même procédure que l'examen en cours.

6.3 Barre d'outils

En haut à droite de la page de l'examen, vous pouvez voir une barre de menus comportant des outils de traitement de l'image et d'autres fonctions.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

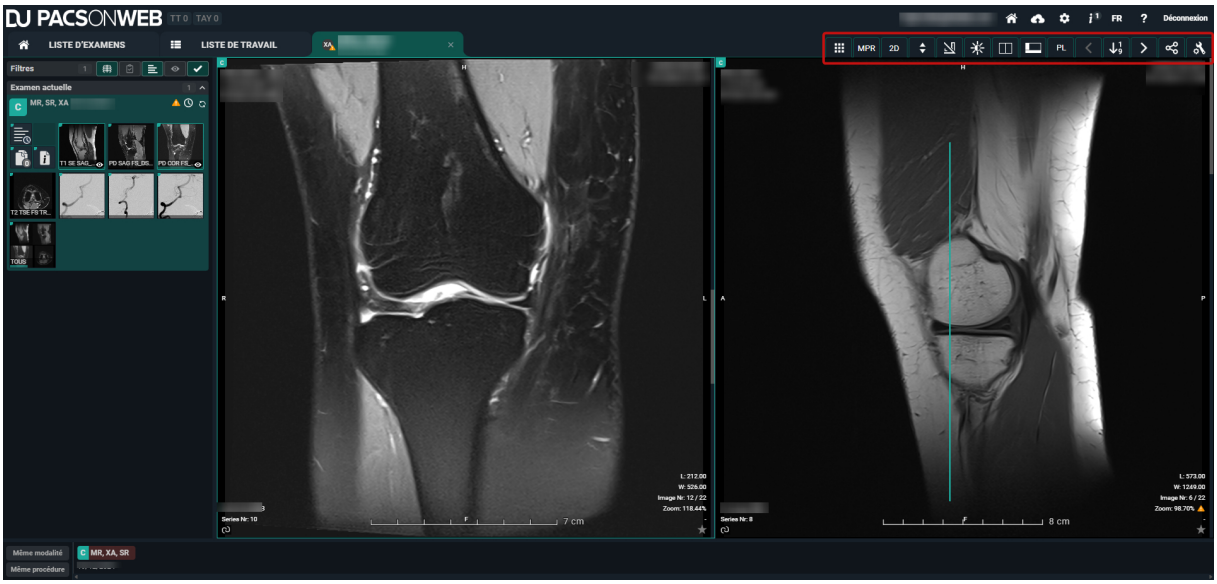

Outils du sous-menu

Icônes	Outil
.	Ouvrir l'examen dans une application externe
3D	Rendu des volumes
MPR	MPR : Reconstruction multiplanaire
2D	2D : Coupes épaisses
	Contrôle d'image **Remarque :** Les **Panoramique / Choisir** et **lignes de référence** sont activées par défaut.
	Annotations
	Contraste/brillance

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icônes	Outil
	Disposition
	Éléments visuels
RP	RP : Protocoles de lecture
	Etape précédente
	Étapes du protocole de lecture
	Etape suivante
	Partager
	Study administration

Par défaut, les fonctions **pan** et **lignes de référence** sont activées.

Voir aussi

Administration (Page 257)
Annotations (Page 240)
Autres outils d'édition d'image (Page 250)
Contrôle d'image (Page 234)
MPR et outils connexes (Page 295)
Ouvrir l'examen dans une application externe (Page 306)
Partager (Page 254)
Rendu des volumes (Page 307)
Transformations d'image (Page 238)

6.3.1 Contrôle d'image

Vous pouvez modifier les images comme bon vous semble via **Contrôle d'image**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Outil	Description
	Défilement	Fonction de la mollette de défilement. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur sur l'image. Vous pouvez maintenant faire défiler la série.
	Région zoom	Zoom avant sur une zone définie.
	Stepless zoom	Zoom avant sur l'image sans étapes intermédiaires.
	Dézoomer	Zoom arrière.
	Panoramique/ Sélectionner	Après avoir fait un zoom avant, vous pouvez encore faire glisser l'image.
	Mesure de la densité	Sélectionnez cette fonction et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour mesurer la densité en unités Hounsfield (HU), densité optique (OD) ou unités non-spécifié (US).
	Localisateur spatiale	Il s'agit d'une fonction servant à naviguer vers le même point de référence dans des séries. Fonctionne uniquement avec les images CT et RM.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Outil	Description
	Ciné loop	Grâce à cette fonction, vous pouvez parcourir toutes les images automatiquement sans utiliser la molette. Le débit d'images utilisé est la valeur spécifiée dans la balise DICOM RecommendedDisplayFrameRate. Si cette valeur n'est pas disponible, un débit d'images de 30 ips est utilisé par défaut. Vous pouvez également ajuster vous-même la vitesse de défilement.
	Série lien automatique	Différentes séries ayant le même « cadre de référence » sont automatiquement liées pour un défilement simultané.
	Lignes de référence	Cet outil est activé par défaut et indique, par le biais des lignes, la position de l'image sélectionnée par rapport à une autre série. Cet outil fonctionne uniquement avec les images CT et RM.
	Transformations d'image	Pour plus d'informations, voir Transformations d'image (Page 238)


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

On peut aussi zoomer sur l'image en utilisant le raccourci : SHIFT (clavier) + défilement (souris)

Pour visualiser l'image à 100 % (1 pixel sur l'image = 1 pixel sur l'écran), appuyez sur '='

Lorsque vous effectuez un zoom, un point indicateur orange s'affiche en bas à gauche jusqu'à ce que l'image soit complètement chargée.

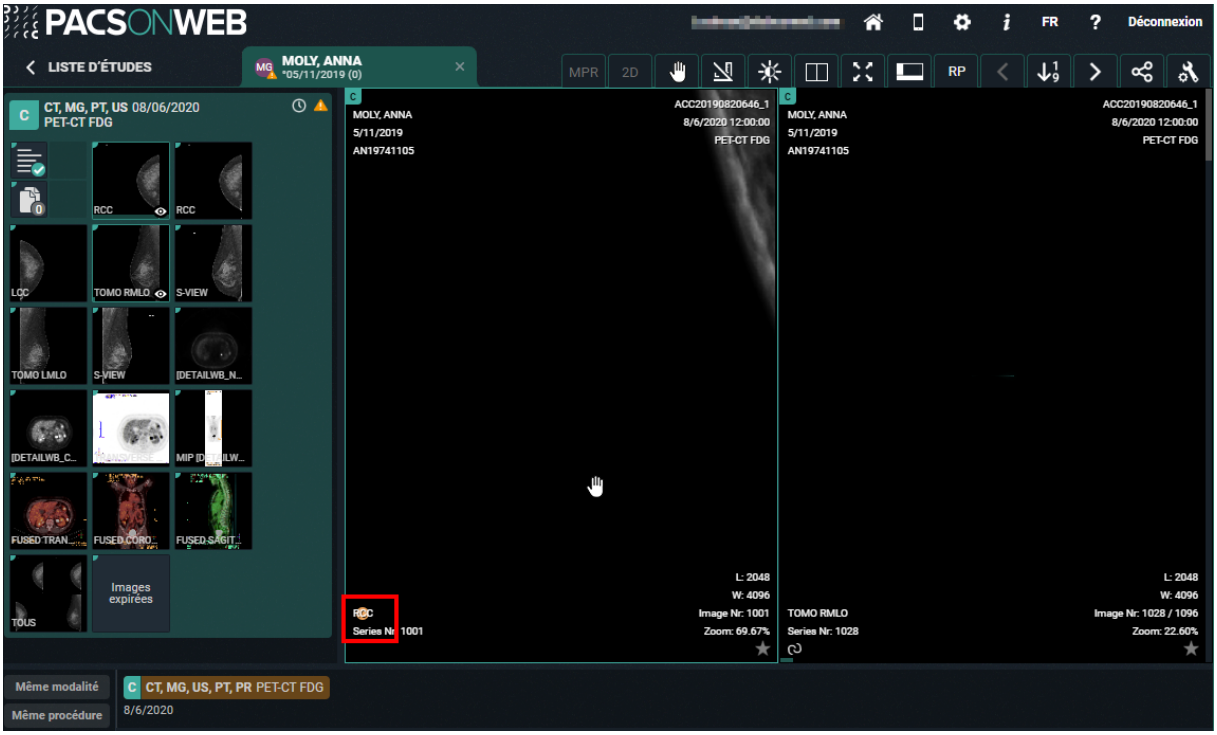

Remarque :

Événements tactiles sur des appareils mobiles

Indépendamment de l'outil de contrôle ou d'édition d'image sélectionné, il est possible de faire glisser l'image ou d'effectuer un zoom avant ou arrière sur celle-ci :

- Zoom : pincer vers l'extérieur ou vers l'intérieur une image pour effectuer un zoom avant ou arrière
- Panoramique : Placez deux doigts sur l'image et déplacez-les simultanément pour faire glisser l'image

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Tous les outils de contrôle et d'édition d'image peuvent être utilisés lorsqu'ils sont activés en touchant l'écran avec un doigt.

P. ex. : Utilisez l'outil de défilement en faisant glisser un doigt de haut en bas de l'image

Restriction :

Attention:les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées si votre appareil fonctionne sousIOS12 :

- Zoom sur la région
- Stepless zoom
- Dézoomer

Vous pouvez utiliser le pincement (zoom avant/arrière) à la place, comme décrit ci-dessus.

- Panoramique
- Mesure de la densité
- Localisateur spatiale
- Contraste/brillance


Vous pouvez utiliser des paramètre prédéfinis.

- Ajout et modification d'annotations

6.3.1.1 Transformations d'image

Vous pouvez modifier le positionnement d'une image. Dans la barre d'outils, cliquez sur**Contrôle d'image** et sélectionnez **Transformations d'image** dans la liste déroulante.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

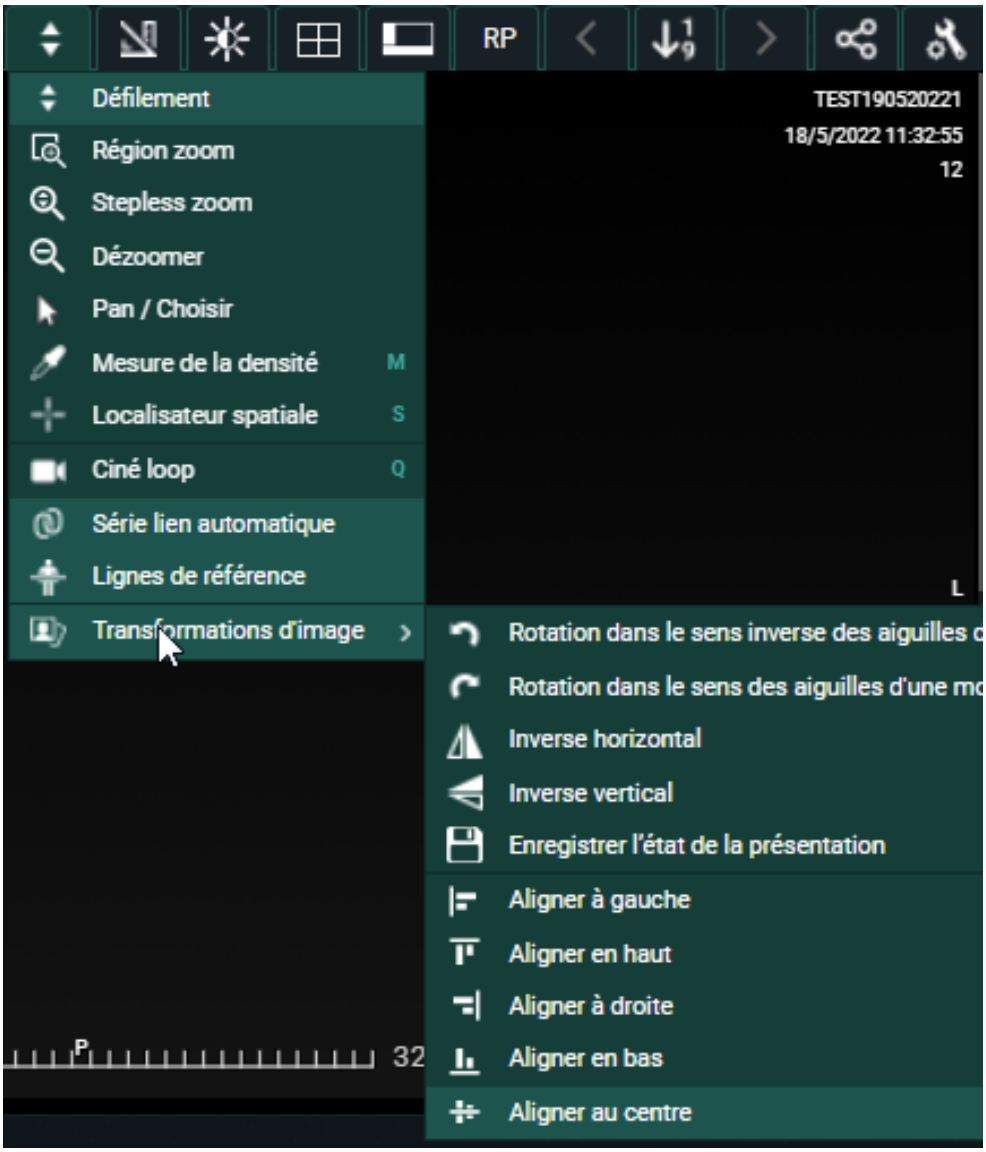

Vous pouvez effectuer les transformations suivantes :

- Pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre
- Retourner horizontalement
- Retourner verticalement
- Aligner à gauche
- Aligner en haut
- Aligner à droite
- Aligner en bas
- Aligner au centre

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Conseil :

On peut aussi faire pivoter l'image en utilisant le raccourci : CTRL + SHIFT (clavier) + défilement (souris)

Enregistrer l'état de présentation :

Un état de présentation est une instance DICOM SOP indépendante qui contient des informations sur la façon dont une image particulière doit être affichée. Cette fonction est utilisée lorsqu'une correction doit être effectuée pour une image ou plusieurs images. Par exemple : Retournement ou rotation d'une image.

Lorsque la correction est effectuée, cliquez sur **Enregistrer l'état de présentation**.


Le dernier état de présentation enregistré s'affiche.

Remarque :


Seuls les administrateurs de la source ou les utilisateurs disposant de l'autorisation SavePresentationState peuvent enregistrer un état de présentation.

6.3.2 Annotations

En cliquant sur **Annotations**, un menu secondaire s'affiche, dans lequel vous pouvez effectuer diverses mesures.

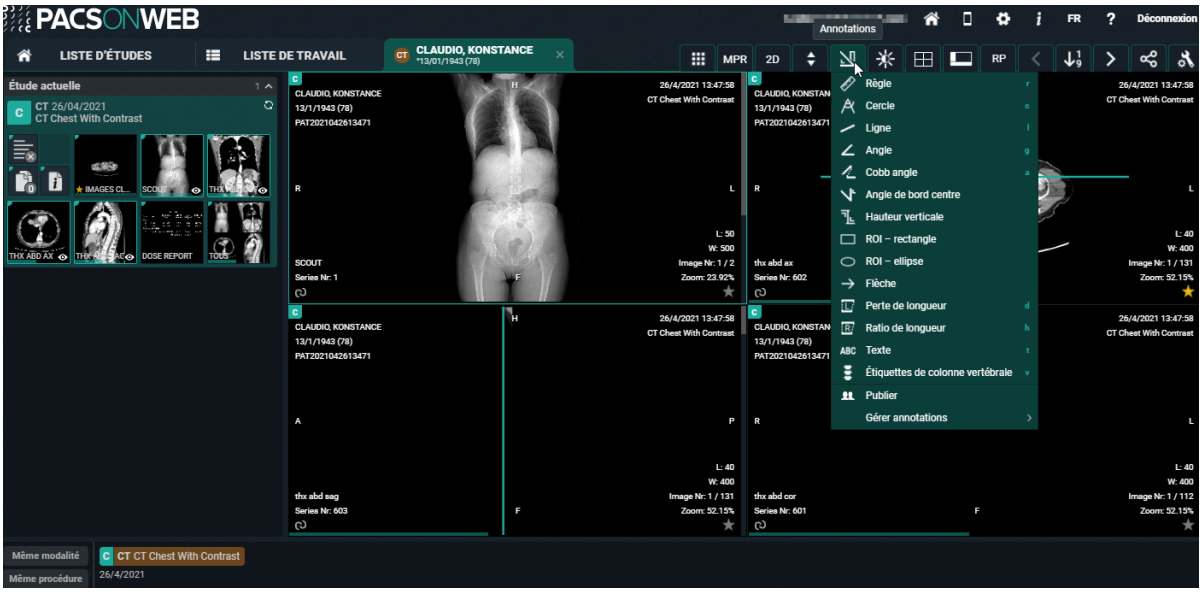

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

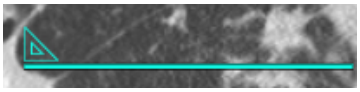Icône	Mesure	Description
	**Règle**	Mesure de longueur : mesure entre deux points. **Conseil :** Lorsque vous tracez une règle presque horizontale, vous pouvez la faire ajuster automatiquement afin qu'elle soit parfaitement horizontale par rapport à l'image en maintenant le bouton MAJ enfoncé. Vous pouvez reconnaître cela via le symbole suivant :  Il en va de même pour une règle presque verticale.
	**Cercle**	Cercle avec indication du point central et mesure du rayon.
	**Ligne**	La ligne entre deux points.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Mesure	Description
		Important ! Lorsque vous tracez une ligne proche de l'horizontale, elle sera automatiquement ajustée à une ligne parfaitement horizontale par rapport à l'image. Il en va de même pour une ligne verticale. Vous pouvez reconnaître cela via le symbole suivant :  Si ce comportement n'est pas souhaité, appuyez sur la touche MAJ tout en traçant la ligne.
	**Angle**	Mesure d'angle à trois points: l'angle défini en sélectionnant trois points.
	**Angle de Cobb**	l'angle, défini en traçant deux lignes.
	**Angle de bord centre**	Perpendiculaire par rapport à la mesure de l'angle : Perpendiculaire qui forme un angle avec la tangente de la figure sur laquelle elle descend.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Mesure	Description
	**Hauteur verticale**	Mesure de hauteur: La perpendiculaire entre 2 points.
	**ROI – rectangle**	Mesure de densité pour une zone rectangulaire. Les valeurs affichées sont : A : surface totale; Dens : valeur moyenne de la zone; Min : valeur minimale de la zone; Max : valeur maximale de la zone; σ : écart type.
	**ROI – ellipse**	Mesure de densité pour une zone ovale. Les valeurs affichées sont : A : surface totale; Dens : valeur moyenne de la zone; Min : valeur minimale de la zone; Max : valeur maximale de la zone; σ : écart type.
	**ROI – polygone**	Mesure de la densité d'une annotation à main levée. Les valeurs affichées sont : A : surface totale; Dens : valeur moyenne de la zone; Min : valeur minimale de la zone; Max : valeur maximale de la zone; σ : écart type.
	**Flèche**	Flèche avec zone de texte pour ajouter du texte.
	**Perte de longueur**	Mesurer la différence de longueur entre 2 lignes.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Mesure	Description
	**Ratio de longueur**	Mesurer le ratio de longueur de 2 lignes.
ABC	**Texte**	Texte pouvant être ajouté comme annotation aux images.
	**Étiquettes de colonne vertébrale**	Mise en place des étiquettes de cotes sur les vertèbres. **Remarque :** • Les annotations de l'étiquette de colonne vertébrale seront placées sur l'image elle-même + 3 coupes avant et 3 coupes après • Les étiquettes de colonne vertébrale sur l'image elle-même seront en vert plus clair par rapport aux autres images • L'outil d'étiquetage de la colonne vertébrale détecte automatiquement si l'utilisateur veut étiqueter de haut en bas ou de bas en haut (crânial - caudal)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Mesure	Description
	**Publier**	Rendez vos annotations visibles pour les autres utilisateurs ayant accès à l'examen.
	**Gérer annotations**	Gérer les annotations affichées sur l'image.
	**Mes annotations**	Choisissez si vos annotations personnelles, marquées en vert, sont affichées ou non.
	**Annotations radiologue**	Choisissez si les annotations effectuées et publiées par le créateur de l'examen ou reçues par DICOM, marquées en blanc, sont affichées ou non.
	**Autres annotations**	Choisissez si les annotations effectuées ou publiées par les autres utilisateurs, marquées en jaune, sont affichées ou non.
	**Montrer tout**	Afficher toutes les annotations ci-dessus.
	**Cacher tout**	Cacher toutes les annotations ci-dessus.
	**Supprimer**	Supprimer les annotations que vous avez sélectionnées. (uniquement pour vos propres annotations)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icône	Mesure	Description
✕	**Supprimer tous**	Supprimer toutes vos propres annotations.

Remarque :

Administrateurs

Les administrateurs d'un service de radiologie peuvent supprimer des annotations en sélectionnant l'annotation et en cliquant sur le bouton **Supprimer**.

Raccourcis

Conseil :

Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants :

Mesure de longueur	R + bouton gauche de la souris enfoncé
Cercle	C(clavier) + Touche gauche de la souris enfoncée
Ligne	L (clavier) + Touche gauche de la souris enfoncée
Mesure de l'angle	G + bouton gauche de la souris enfoncé
Mesure de l'angle de Cobb	A + bouton gauche de la souris enfoncé
Texte	T + bouton gauche de la souris enfoncé
Étiquettes de colonne vertébrale	V(clavier) + Touche gauche de la souris enfoncée
ROI - ellipse	E(clavier) + Touche gauche de la souris enfoncée
Perte de longueur	D + bouton gauche de la souris enfoncé

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Rapport longueur	H + bouton gauche de la souris enfoncé
Afficher toutes les annotations	CTRL + A(clavier)
Masquer toutes les annotations	CTRL + A(clavier)
Supprimer l'annotation	Sélectionner l'annotation + bouton « Supprimer »

Événements tactiles sur des appareils mobiles

Indépendamment de l'outil de contrôle ou d'édition d'image sélectionné, il est possible de faire glisser l'image ou d'effectuer un zoom avant/arrière sur celle-ci :

- Zoom : pincer vers l'extérieur ou vers l'intérieur une image pour effectuer un zoom avant ou arrière
- Panoramique : Placez deux doigts sur l'image et déplacez-les simultanément pour faire glisser l'image

Tous les outils de contrôle et d'édition d'image peuvent être utilisés lorsqu'ils sont activés en touchant l'écran avec un doigt. P. ex. : Utilisez l'outil de défilement en faisant glisser un doigt de haut en bas de l'image

Restriction :

À noter : les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées sur les appareils fonctionnant sous iOS12 :

- Zoom sur la région
- Stepless zoom
- Dézoomer

Vous pouvez utiliser le pincement (zoom avant/arrière) à la place, comme décrit ci-dessus.

- Panoramique
- Mesure de la densité
- Localisateur spatiale
- Contraste/brillance

Vous pouvez utiliser des paramètre prédéfinis.

- Ajout et modification d'annotations

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Précision de la mesure


ATTENTION :

Les fonctions de mesure DeepUnity PACSonWEB incluent les mesures de longueurs, d'angles et de densité, sur la base des informations fournies par la modalité originale.

- Les mesures de longueur sont exprimées en millimètres (mm).
- Les mesures d'angle sont exprimées en degrés (°).
- Les mesures de densité sont exprimées dans l'unité prévue par la modalité : Hounsfield Unit (HU), Optical Density (OD) ou UnSpecified (US).
- Pour la précision des mesures au sein de l'environnement DeepUnity PACSonWEB, DeepUnity PACSonWEB se fie à la précision des informations fournies par cette modalité.

Si une mesure affiche « N/A » en tant que résultat, cela signifie que les images DICOM originales ne contiennent pas les informations nécessaires pour réaliser une mesure quantitative.

La précision de la modalité est définie par le paramètre PixelSpacing qui se trouve en cliquant à droite sur une image et en sélectionnant **Afficher les tags DICOM**.

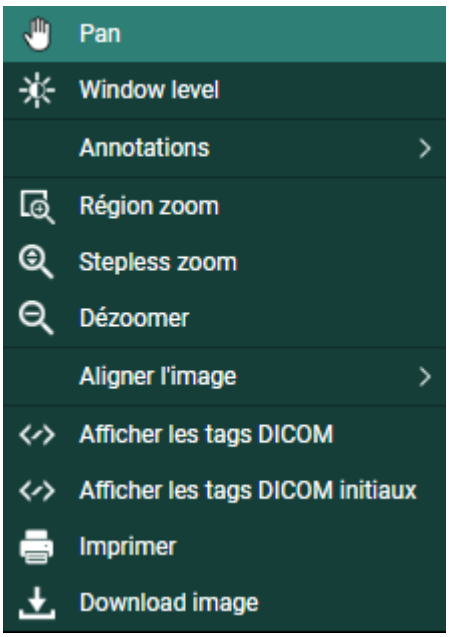

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Espacement des pixels

La résolution (x,y) se trouve dans le DICOM Tag **PixelSpacing** (0028,0030) et est exprimée en mm.

0028,0004	PhotometricInterpretation	MONOCHROME1
0028,0008	NumberOfFrames	1
0028,0010	Rows	4740
0028,0011	Columns	3540
0028,0030	PixelSpacing	0.05 0.05
0028,0100	BitsAllocated	16
0028,0101	BitsStored	12
0028,0102	HighBit	11

La valeur résultante d'une mesure dans DeepUnity PACSonWEB sera toujours affichée avec deux décimales c des calculs effectués sur les données fournies par la modalité.

Une déviation maximale sur une mesure effectuée de

$$\sqrt{(x^2 + y^2)}$$

doit cependant être prise en compte.

La précision des différentes mesures a été validée à 0,01 mm près pour les mesures des longueurs et à 1° près pour les mesures d'angles.

Si une mesure est effectuée dans une autre visionneuse DICOM homologué CE classe IIa pour comparaison, il faut tenir compte du fait que la précision de la mesure est affectée par les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée de la ligne. DeepUnity PACSonWEB ne permet de définir des points de mesure que sur les croisements de pixel. Si la visionneuse DICOM, utilisée pour la comparaison, permet de sélectionner n'importe quel point pour effectuer une mesure, là encore, une déviation maximale de

$$\sqrt{(x^2 + y^2)}$$

peut se produire.

Outre la précision de la mesure, un facteur d'arrondissement de 0,05 mm doit être porté en compte en cas de mesure comparative, étant donné qu'on ne peut pas garantir que lors de la mesure, on sélectionne exactement les mêmes pixels dans l'image sur les deux visionneurs.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si une mesure est effectuée en premier lieu dans un système PACS externe, puis si elle est importée dans DeepUnity PACSonWEB, le résultat de la mesure importée peut diverger légèrement lorsqu'elle est affichée dans DeepUnity PACSonWEB. Étant donné que les coordonnées des points de mesure peuvent différer des points dans DeepUnity PACSonWEB, la valeur résultante sera également différente.

6.3.3 Autres outils d'édition d'image

Dans la barre des tâches, vous disposez des outils de traitement de l'image suivants :

Barre d'outils d'édition d'images

Icônes	Description
	Window level (niveau de la fenêtre) : Utilisez cette fonction pour modifier la luminosité et le contraste de l'image sélectionnée.
	Disposition : Utilisez cette fonction pour modifier la disposition de l'écran.
	Plein écran : Plein écran : afficher la série en plein écran.
	Éléments visibles : Cette fonction permet d'appliquer le mode plein écran, d'afficher/masquer la barre de titre, le sélecteur de séries (Page 215), l'historique (Page 211) et les superpositions et de configurer le facteur d'échelle des moniteurs de diagnostic. ● Options de facteur d'échelle : ○  100 % ○  150 %

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icônes	Description
	○  200 % ○  250 % ● L'application d'un facteur d'échelle prédéfini à un écran mégapixel spécifique appliquera ce facteur d'échelle à tout moniteur de diagnostic ayant la même résolution mégapixel ou une résolution supérieure. ● Vous pouvez toujours appliquer un facteur d'échelle plus important aux écrans à mégapixels élevés et ce facteur d'échelle sera également appliqué à tout écran de diagnostic ayant cette résolution ou une résolution supérieure. **Remarque :** L'application d'une grande échelle sur votre écran peut entraîner le chevauchement des boutons. N'utilisez les échelles plus grandes que sur les moniteurs à haut nombre de mégapixels.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Icônes	Description
	Les protocoles de lecture disponibles pour l'examen actuellement ouvert.
	Étape précédente dans le reading protocole
	Les étapes du protocole de lecture (automatiquement) sélectionné
	Étape suivante dans le reading protocole

Remarque :

Les protocoles de lecture disponibles peuvent varier en fonction du nombre d'affichages, du type d'examen, des séries disponibles...

Window Level and invert (Niveau de la fenêtre et retourner)

Window level vous permet de modifier la netteté et le contraste de l'image sélectionnée.

Pour appliquer le nivellement des fenêtres à une image, cliquez sur l'icône **Window level** (niveau de la fenêtre).

- En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris vers la gauche ou la droite, vous pouvez diminuer ou augmenter la valeur de **Fenêtre**.
- En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris vers le bas/le haut, vous pouvez diminuer ou augmenter la valeur de **Niveau**.
- Si toutes les images d'une série ont la même valeur initiale pour Fenêtre et Niveau, le nivellement de la fenêtre sera appliqué à toutes les images.
- Si les images d'une série ont des valeurs différentes pour Fenêtre et Niveau, le nivellement de la fenêtre ne sera appliqué qu'à l'image sélectionnée.

Pour prendre en charge le niveau de la fenêtre sur les images avec des valeurs binaires plus grandes, le changement de valeur par défaut pour Fenêtre ou Niveau est doublé par bit supplémentaire.

- Cela signifie que le nivellement des fenêtres réagit plus rapidement sur les images avec des valeurs binaires plus grandes.
- Pour utiliser le comportement normal, cliquez sur la touche MAJ + faites glisser.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si vous cliquez sur **Inverser**, tout ce qui était sombre dans la série devient lumineux et inversement.

Saisir manuellement la valeur du niveau Fenêtre :

Cliquez sur l'étiquette de **Fenêtre** ou de **Niveau** et remplissez la valeur souhaitée.

Si vous cliquez maintenant sur **Niveau de la fenêtre** dans le menu, le mode **Personnalisé** est sélectionné par défaut. Pour revenir à l'image sous sa forme initiale, cliquez sur **original**.

Conseil :

Selon le type d'examen, le menu **Niveau de la fenêtre** contient plusieurs réglages prédéfinis (préréglages) de fenêtre/niveau.

Si vous souhaitez examiner de plus près les poumons, par exemple, cliquez sur **Poumon**.

Vous pouvez utiliser les raccourcis suivants :

Inverser	CTRL + I
Image sous sa forme initiale	0
Prédéfini Abdomen	1
Prédéfini Bone	2
Prédéfini Head	3
Prédéfini Lung	4

Important !

Ces préréglages ne sont pas disponibles pour tous les clients. Selon l'endroit auquel l'examen est réalisé, vous pouvez trouver des préréglages dans le menu **Niveau fenêtre**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Événements tactiles sur des appareils mobiles

Indépendamment de l'outil de contrôle ou d'édition d'image sélectionné, il est possible de faire glisser l'image ou d'effectuer un zoom avant ou arrière sur celle-ci :

- Zoom : pincer vers l'extérieur ou vers l'intérieur une image pour effectuer un zoom avant ou arrière
- Panoramique : Placez deux doigts sur l'image et déplacez-les simultanément pour faire glisser l'image

Tous les outils de contrôle et d'édition d'image peuvent être utilisés lorsqu'ils sont activés en touchant l'écran avec un doigt.

P. ex. : Utilisez l'outil de défilement en faisant glisser un doigt de haut en bas de l'image

Restriction :

Attention : les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles sur les appareils fonctionnant sous iOS12 :

- Zoom sur la région
- Stepless zoom
- Dézoomer

Vous pouvez utiliser le pincement (zoom avant/arrière) à la place, comme décrit ci-dessus.

- Panoramique
- Mesure de la densité
- Localisateur spatiale
- Contraste/brillance


Vous pouvez utiliser des paramètre prédéfinis.

- Ajout et modification d'annotations

6.3.4 Partager

Le bouton **Partager** permet d'accéder à certaines des fonctionnalités de la liste d'examens directement à partir de la page d'examen.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

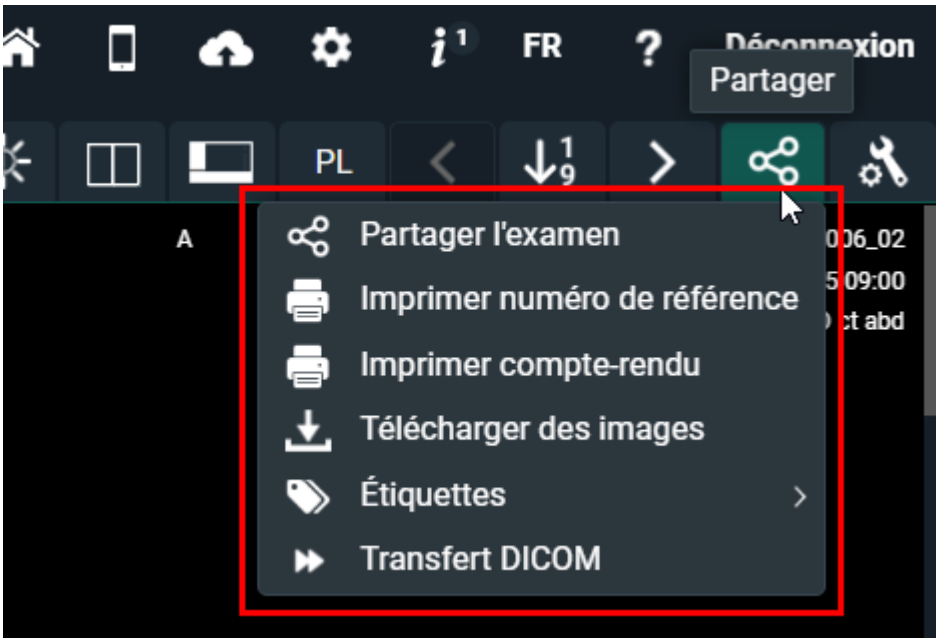

Cliquez sur **Partager** pour ouvrir un menu déroulant avec les options suivantes :

Fonctionnalité	Action
Partager l'examen	Partager l'examen avec un utilisateur, un groupe, un service de radiologie ou un destinataire défini. Voir Partage d'examens à partir de la liste d'examens (Page 140). Cette fonctionnalité n'est activée que pour les utilisateurs enregistrés de DeepUnity PACSonWEB.
Imprimer numéro de référence	Générer un numéro de référence pour accéder à l'examen en ligne. Voir Imprimer un numéro de référence de la liste d'examens (Page 174). Cette fonctionnalité n'est activée que pour les utilisateurs enregistrés de DeepUnity PACSonWEB.
Imprimer compte-rendu	Imprimer le compte-rendu de l'examen. Il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre pour être imprimé directement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

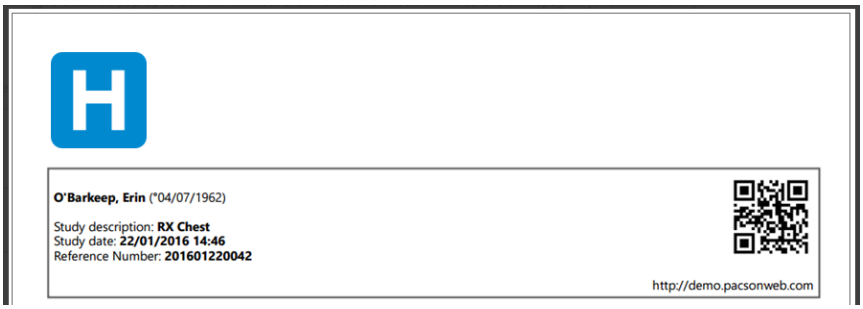Fonctionnalité	Action
	Conseil : L'en-tête du compte-rendu contient les informations nécessaires pour accéder à l'examen en ligne. Si vous scannez le QR-code, vous accédez directement à la page de connexion DeepUnity PACSonWEB. Indiquez le numéro de référence et la date de naissance du patient pour consulter l'examen. 
Télécharger des images	Téléchargez les images au format PNG, DICOM ou DICOM décompressé, chargez-les dans votre OsiriX ou envoyez-les à votre propre système PACS. Voir Téléchargement des examens à partir de la liste d'examens (Page 192). **Important !** Si vous souhaitez importer les images dans votre propre PACS, un outil d'importation doit d'abord avoir été installé par DH Healthcare GmbH.
Étiquettes	Ajouter/supprimer des étiquettes à l'examen. Voir Ajouter des étiquettes à des examens (Page 208).
Transfert DICOM	Importer l'examen dans votre propre système PACS. Consultez Importation d'examens dans le système PACS (Page 197)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Fonctionnalité	Action
	Important ! Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si votre partenaire local de service DeepUnity PACSonWEB a installé un Import Client sur votre serveur (option payante).


6.3.5 Administration

Accès à la page d'administration de l'examen

Important !

Cette fonction est disponible uniquement si vous êtes administrateur d'un service d'imagerie médicale.


Cliquez sur le bouton **Administration de l'examen** pour ouvrir la page d'administration.

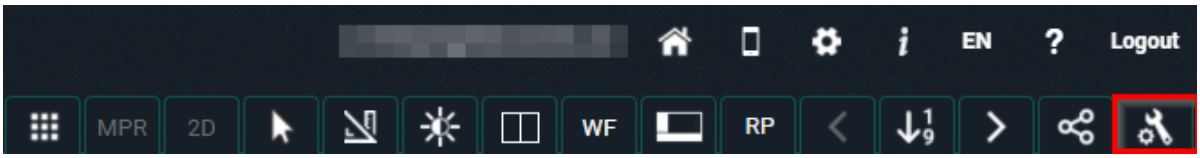

L' **administration de l'examen** vous permet d'accéder aux métadonnées du patient et de l'examen. Vous pouvez apporter ici des modifications à l'examen/au patient si nécessaire.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Aperçu de l'administration de l'examen :

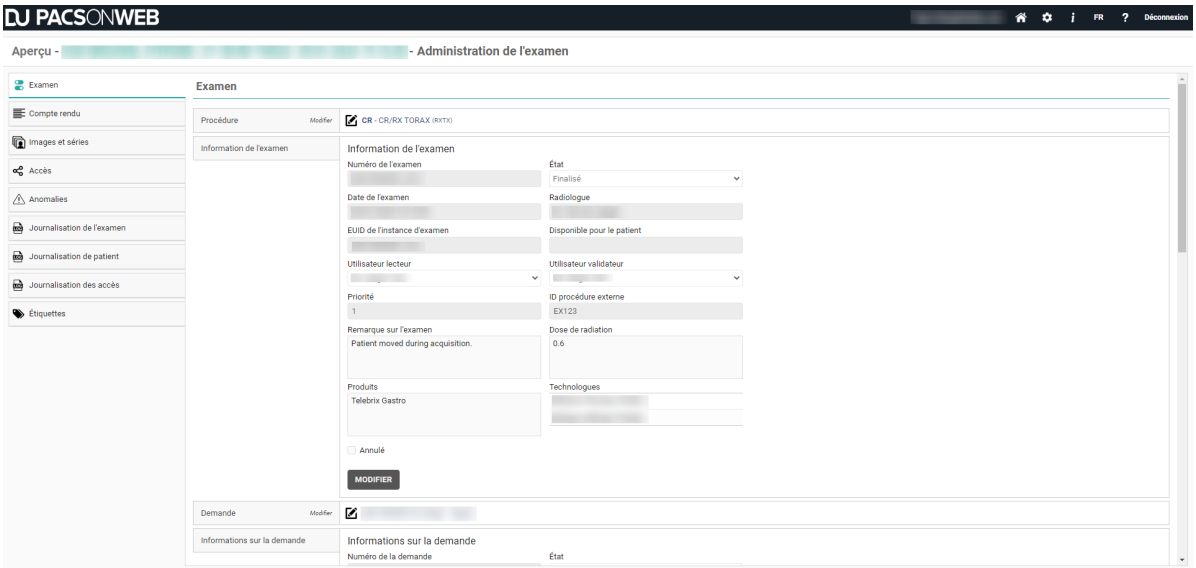

Onglets d'administration des examens

Onglets	Description
Examen	Consulter et adapter (partiellement) toutes les informations relatives à l'examen et au patient
Compte-rendu	Consultez les différentes versions du compte-rendu.
Images et séries	Supprimer des séries, déplacer des séries, marquer des séries comme privées.
Accès	Consulter et adapter (partiellement) tous les paramètres d'accès à l'examen.
Anomalies	Consulter un aperçu des anomalies qui ont été enregistrées pour l'examen et/ou le patient.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Onglets	Description
Journalisation de l'examen	Consulter les entrées de journal concernant les modifications enregistrées au niveau de l'examen.
Journalisation de patient	Consulter les entrées de journal concernant les modifications enregistrées au niveau du patient.
Journalisation des accès	Consulter les entrées de journal concernant l'accès de cet examen.
Étiquettes	Consulter/ajouter/retirer les étiquettes d'un examen.

6.3.5.1 Information de l'examen

AVERTISSEMENT :

Modifier les informations de l'examen sur DeepUnity PACSonWEB n'est souvent qu'une solution temporaire. Ces informations doivent être adaptées dans les systèmes PACS et RIS.


Sinon, l'information initiale risque d'être synchronisée et réinitialisée.

Pour consulter les informations sur l'examen, accédez aux pages d'administration et sélectionnez **Examen**.

Selon la section de la page, il est possible de consulter ou de consulter et de modifier les informations affichées.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Aperçu de l'administration de l'examen

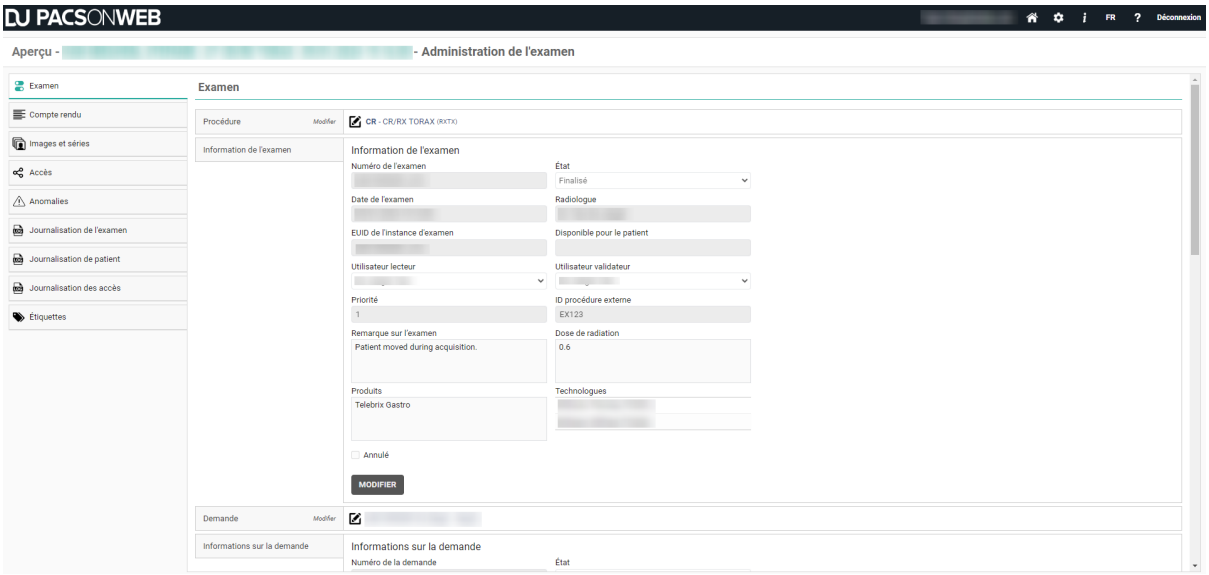


Procédure

Pour modifier la procédure, cliquez sur le bouton modifier

Dans le champ **Nouvelle procédure**, indiquez le nom de la nouvelle procédure, puis cliquez sur **Changer procédure**.

Cela mettra à jour la procédure dans DeepUnity PACSonWEB.

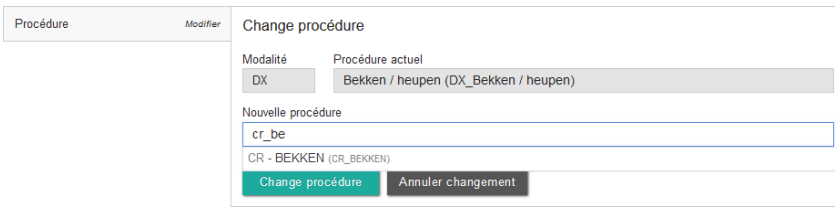

Information de l'examen

Pour modifier les informations relatives à l'examen, cliquez sur le bouton **Modifier** en bas du panneau **Informations sur l'examen**.

Les champs suivants s'affichent :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Champs d'information sur les examens

Champ	Description
Numéro d'accès	-
Statut	État de l'examen (état du flux de travail et état de la commande).
Examen DateHeure	-
Radiologue	Nom du créateur du compte-rendu.
EUID de l’instance d’examen	-
Disponible pour le patient	Le compte-rendu sera à la disposition du patient. Il s'agit d'un champ Date Heure.
Utilisateur lecteur	Liste déroulante de tous les utilisateurs autorisés à créer un compte-rendu.
Validation de l'utilisateur	Liste déroulante de tous les utilisateurs autorisés à valider un compte-rendu.
Priorité	Valeur comprise entre 1 et 100
ID de la procédure externe	-
Remarque sur l'examen	Les valeurs peuvent être saisies manuellement ou reçues via HL7.
Dose de radiation	Les valeurs peuvent être saisies manuellement ou reçues via HL7.
Produits	Les valeurs peuvent être saisies manuellement ou reçues via HL7.
Technologues	Les valeurs peuvent être saisies manuellement ou reçues via HL7. Les technologues ne peuvent être ajoutés

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Champ	Description
	que s'ils sont connus dans le système, sinon ils devront être envoyés via HL7.
État de l'IA	Contient l'état actuel du traitement de l'IA, s'il est envoyé au cube de l'IA. (Ne peut être modifié)
Résultats de l'IA	Contient les résultats de l'IA, renvoyés par le cube de l'IA. (Ne peut être modifié)
Délai de l'ANS	Les valeurs peuvent être saisies manuellement ou reçues via HL7. Lorsque vous saisissez manuellement une date limite spécifiée, vous recevez une indication d'avertissement. Cela sera consigné dans le **registre de l'examen.**
Décalage du délai de l'ANS	Cette valeur ne peut être définie que par HL7 et ne peut être modifiée manuellement.
Case à cocher Annulé	Cette opération annule l'examen (ce qui n'est pas la même chose que l'état du flux de travail = Annulé). Les examens annulés ne seront pas affichés comme des examens antérieurs pertinents si le filtre **N'est pas annulé** est activé.

Si les patients doivent payer pour accéder à leurs examens, ici, vous pouvez indiquer manuellement si le paiement a été reçu.

Si la case à cocher **Annulé** est cochée, l'examen ne sera accessible que pour les membres du groupe d'administrateurs de la source.

Pour enregistrer les modifications apportées à l'un des champs, vous devez confirmer que vous souhaitez mettre à jour les informations relatives à l'examen en cochant la case à cocher suivante **Oui, je suis sûr de vouloir mettre à jour les informations sur l'examen**.

Cela mettra à jour les informations sur l'examen dans DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Demande

Pour modifier la demande, cliquez sur **Modifier la demande** .

Cet écran permet de transformer la **demande en cours** en **nouvelle demande**.

Vous pouvez consulter la demande correcte dans le système en cliquant sur 

Cela ouvrira l'écran de recherche suivant, qui vous permettra de chercher les numéros de demande enregistrés sur DeepUnity PACSonWEB, en fonction du

- Numéro de demande
- Service concerné
- Prénom Patient
- Nom de famille Patient

Sélectionnez le Numéro de demande approprié dans les résultats de recherche et cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez l'option **Oui, je suis sûr de vouloir modifier la demande relative à cet examen** et cliquez sur **Modifier la demande** pour mettre à jour la demande dans DeepUnity PACSonWEB.

Informations sur la demande

Pour conserver la Demande ou modifier uniquement les informations de la demande, cliquez sur **Modifier**.

Cet écran permet de modifier les champs suivants :

- **Numéro de demande**
- **État** *(disponible, mais non modifiable)*
- **Département exécutif**
- **Date de la prescription** *(Il s'agit d'un champ date/heure)*
- **Question sur le diagnostic**
- **Infos cliniques**

Si vous avez modifié un ou plusieurs champs, cliquez sur la case à cocher pour confirmer les modifications.

La mise à jour d'informations de demande se traduira en changeant tous les 'x-amount' examens liés à cette demande. **Oui, je suis sûr de vouloir modifier la demande liée à cet examen** et cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications dans DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Informations sur la visite

Dans cette section, il est possible de modifier les champs suivants :

- Numéro de visite
- Lieu d'intervention
- Catégorie de patient
- Emplacement du patient

Confirmez les modifications apportées en cliquant sur la case à cocher : **Oui, je suis sûr de vouloir mettre à jour les informations liées à la visite** et cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications dans DeepUnity PACSonWEB.


Département exécutif

Dans cette section, il est possible de modifier le service exécutant lié et la salle d'examen.

Si vous avez modifié l'un de ces champs, cochez l'option **Oui, je suis sûr de vouloir modifier le service exécutant lié à l'examen** et cliquez sur **Modifier le service exécutant**

Patient

Si l'examen apparaît sur le mauvais patient, vous pouvez corriger cela via « Modifier ou fusionner le patient ». Cliquez sur pour ouvrir la fenêtre suivante :

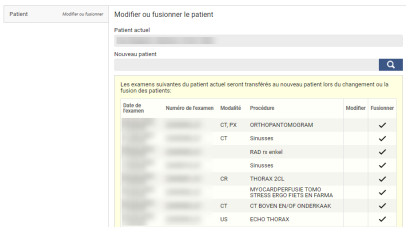

Vous pouvez utiliser pour rechercher un patient qui est déjà enregistré dans DeepUnity PACSonWEB par le biais d'un autre examen.


Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le critère de recherche et sélectionnez **Filtrer**. Les critères de recherche suivants peuvent être utilisés :

- ID du patient
- Nom de famille
- Prénom
- Date de naissance

Vous obtenez maintenant un aperçu des patients qui répondent à vos critères.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Mettez en évidence le patient concerné et cliquez sur **Sélectionner**.

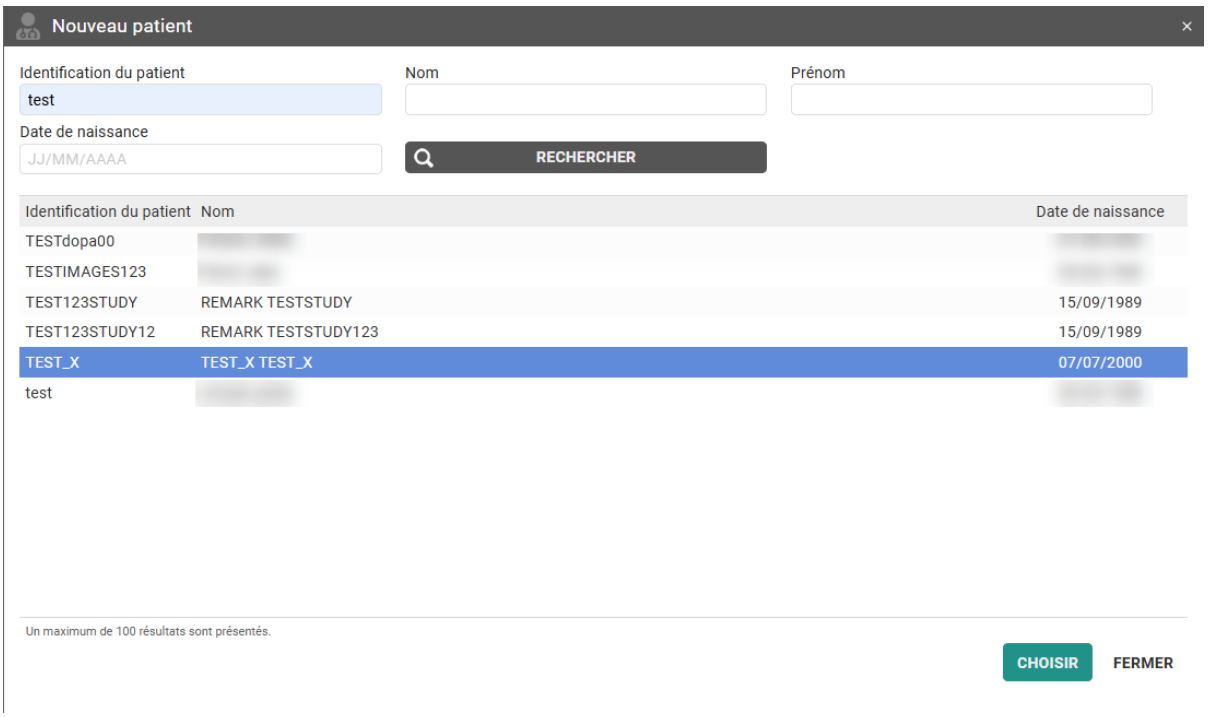


Remarque :

Si vous ne trouvez pas ce patient, vous devez modifier les informations du patient via « Informations du patient ».

Avant de pouvoir apporter des modifications au patient, vous devez cocher la case **Oui, je suis sûr que je veux mettre à jour l'information de l'examen.**

Vous pouvez à présent choisir de remplacer le patient existant par le nouveau patient ou de fusionner les patients.

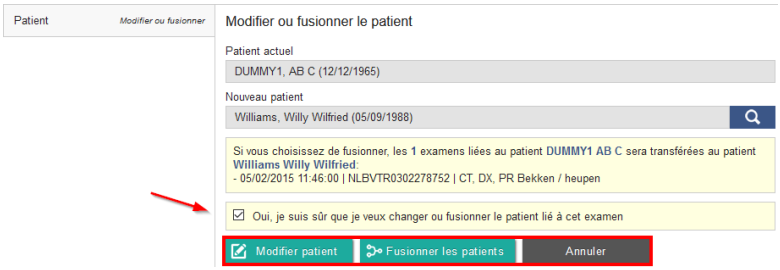

Quand vous cliquez sur **Modifier patient** ou **Fusionner les patients**, les informations de l'examen sont mises à jour.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Si vous choisissez l'option Modifier, seul cet examen sera lié au patient nouvellement sélectionné.

Par la suite, le patient initial et le patient sélectionné existeront toujours dans DeepUnity PACSonWEB.

Si vous choisissez l'option Fusionner, tous les examens relatifs au patient initial seront liés au patient nouvellement sélectionné.

Par la suite, le patient initial n'existera plus.

Information du patient

Si vous ne trouvez pas le patient, vous pouvez modifier manuellement les Informations du patient.

Sélectionnez **Modifier** pour modifier les informations sur le patient.

Champs d'information sur le patient

Champs	Description
Nom de famille	
Prénom	
Nom de naissance	Ces données peuvent être saisies manuellement ou envoyées via HL7. Ces champs peuvent être utilisés par exemple par Ségur.
Prénom de naissance	Ces données peuvent être saisies manuellement ou envoyées via HL7. Ces champs peuvent être utilisés par exemple par Ségur.
Date de naissance	
Lieu de naissance	Ces données peuvent être saisies manuellement ou envoyées via HL7. Ces champs peuvent être utilisés par exemple par Ségur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Champs	Description
Sexe	
Numéro de portable	
Adresse Mail	
Remarque du patient	Ces données peuvent être saisies manuellement ou envoyées via HL7.
ID du patient	Il s'agit d'un tableau de tous les différents identifiants connus du système. (Le numéro national est indiqué ici).

Si vous avez modifié l'un des champs, cliquez sur **Oui, je suis sûr que je veux mettre à jour l'information de l'examen**, puis sur **ENREGISTRER**.

Les informations du patient sont maintenant modifiées dans DeepUnity PACSonWEB.

Médecin prescripteur

Si vous souhaitez changer le médecin prescripteur de l'examen, cliquez sur

Dans cet écran, vous pouvez remplacer le **médecin actuel** par un **nouveau médecin**.


Lorsque vous commencez à taper dans le champ **Nouveau médecin**, les noms correspondants s'affichent.

Sélectionnez le nom correct et cliquez sur **Modifier le médecin prescripteur** pour mettre à jour le médecin prescripteur de cet examen.

Images expirées

Cette section donne un aperçu du temps d'expiration des images par modalité.

Il n'est pas possible d'effectuer des modifications dans cette section.

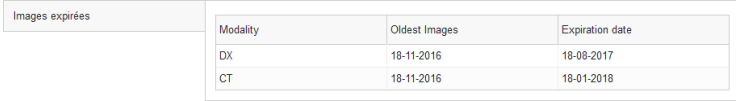

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Actions



Via **Actions**, vous pouvez :

Description des actions

Actions	Descriptions
Retirer images	Supprime les images de DeepUnity PACSonWEB.
Supprimer examen	Supprime l'examen entier de DeepUnity PACSonWEB.
Synchroniser l'examen	Synchronise l'examen sur DeepUnity PACSonWEB avec le système PACS local. • Ne peut être utilisé que lorsque les images sont envoyées à l'aide du mécanisme PACS Push. • **optionnel :** Disponible si le service de radiologie a activé la fonction fetch.
Télécharger toutes les images	Télécharge toutes les images à partir du PACS local si les images ne sont pas (plus) disponibles en raison de l'application du filtre ou en raison de l'expiration du temps de rétention • **Optionnel** : Disponible si le service de radiologie a activé la fonction de recherche.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Actions	Descriptions
Retirer le compte-rendu	Supprime le compte-rendu de DeepUnity PACSonWEB. **Remarque :** Si un addendum est disponible, nous retirerons à la fois l'addendum et le compte-rendu original. Il n'est pas possible de retirer uniquement l'addendum.
Modifier le statut du compte-rendu	Modifiez le statut du compte rendu en le faisant passer au statut de brouillon, préliminaire ou validé. • Cette option n'est disponible que si un compte-rendu est disponible. • Cette option sera désactivée dans le cas d'un compte-rendu PDF. **Remarque :** Cette option est désactivée à partir du moment où un compte-rendu contient un addendum.
Renvoyer le compte-rendu	Cette option renverra le compte-rendu, mais ce n'est possible que si un compte-rendu a été créé ou modifié dans DeepUnity PACSonWEB et si un lien a été établi avec le RIS local.
Renvoyer un message texte: images disponibles	Cette option renverra le sms, mais ce n'est possible que si la source envoie un message texte au patient lorsque les images sont disponibles.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Actions	Descriptions
Envoyer l'objet XDS KOS	Il s'agit d'une option, configurable par source.
Relier un examen DICOM	Possibilité de déplacer le contenu de cet examen vers un autre examen.
Réserver	Réservez l'examen à votre utilisateur dans la liste de travail (voir Fonctions de la page de la liste de travail (Page 357)).
Effacer les réservations	Retirer les éventuelles réserves émises sur cet examen (voir Fonctions de la page de la liste de travail (Page 357)).

Comment relier un examen DICOM


1. Cliquez sur le bouton **RELIER UN EXAMEN DICOM**.
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, remplissez les critères de recherche nécessaires dans le panneau **Sélectionner l'examen de destination**.
   - Pour rechercher l'examen correct, sélectionnez l'examen dans la liste et cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
   - Si vous souhaitez supprimer l'**Examen source**, cochez la case située à côté de **Supprimer l'examen source** et sélectionnez le statut du flux de travail de l'**Examen de destination** dans la liste déroulante.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

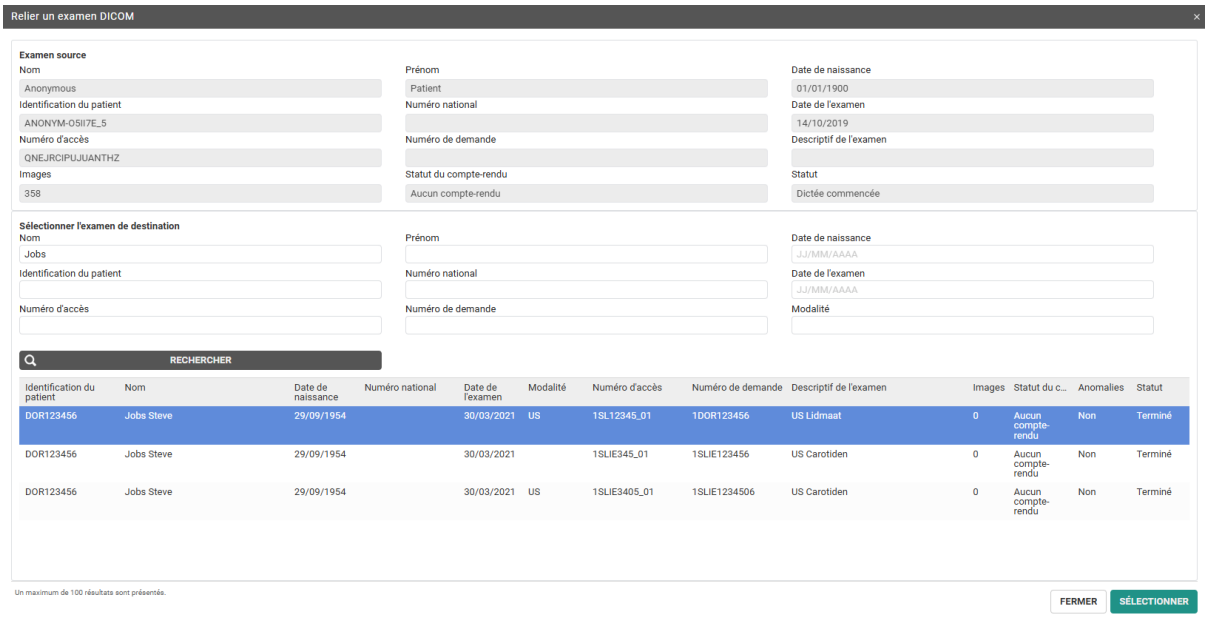

La liste déroulante du **statut du flux de travail de l'examen de destination** aura par défaut le même statut que l'examen de destination sélectionné, sauf si le statut de l'examen de destination est inférieur à celui de l'examen source, par exemple :

- Si le statut de l'**examen source** est **Envoyé**, le statut du flux de travail de l'examen de destination sera **Envoyé**.
- Si le statut de l'**examen source** est **Terminé**, le statut du flux de travail de l'examen de destination sera **Terminé**.

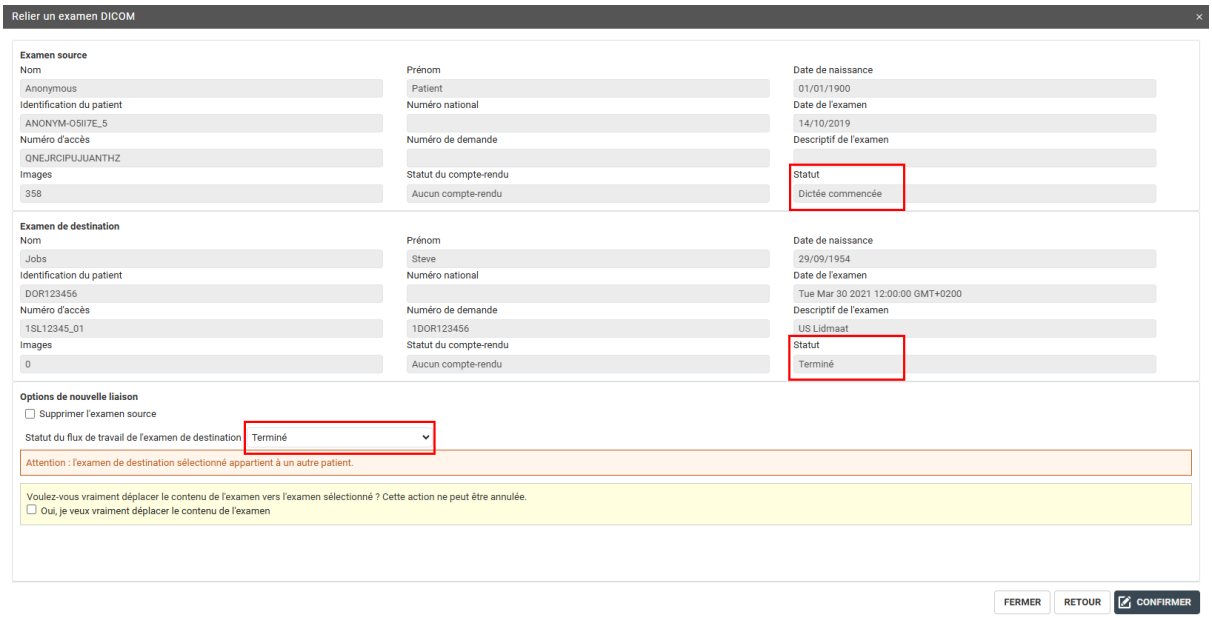

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si l'examen de destination comporte déjà des images DICOM liées, un avertissement ou une erreur s'affiche, en fonction des paramètres de la source :

- Si la source ne permet pas de fusionner deux examens DICOM via **RELIER UN EXAMEN DICOM**, un message d'erreur bloquant s'affiche et vous devez utiliser Images et séries (Page 274) pour déplacer le contenu d'un examen vers un autre.
- Si la source l'autorise, vous recevez un avertissement dans lequel vous devez confirmer avant de pouvoir poursuivre et fusionner les examens.

3. La dernière étape consiste à confirmer que vous souhaitez déplacer le contenu de l'examen.

   Après avoir cliqué sur **CONFIRMER**, une boîte de dialogue récapitulative s'affiche. Vous pouvez choisir d'ouvrir l'examen sélectionné ou, s'il n'a pas été supprimé, de recharger l'examen en cours.

6.3.5.2 Compte-rendu

L'onglet Compte-rendu contient toutes les informations concernant le compte-rendu.

Si plusieurs comptes-rendus sont enregistrés, les versions peuvent être comparées pour montrer les différences.


Dans les différentes colonnes, l'utilisateur peut voir qui sont l'Auteur, le Transcripteur et l'Approbateur du compte-rendu.

La date de création est indiquée dans la dernière colonne.




Cliquer sur la ligne permet d'afficher le compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

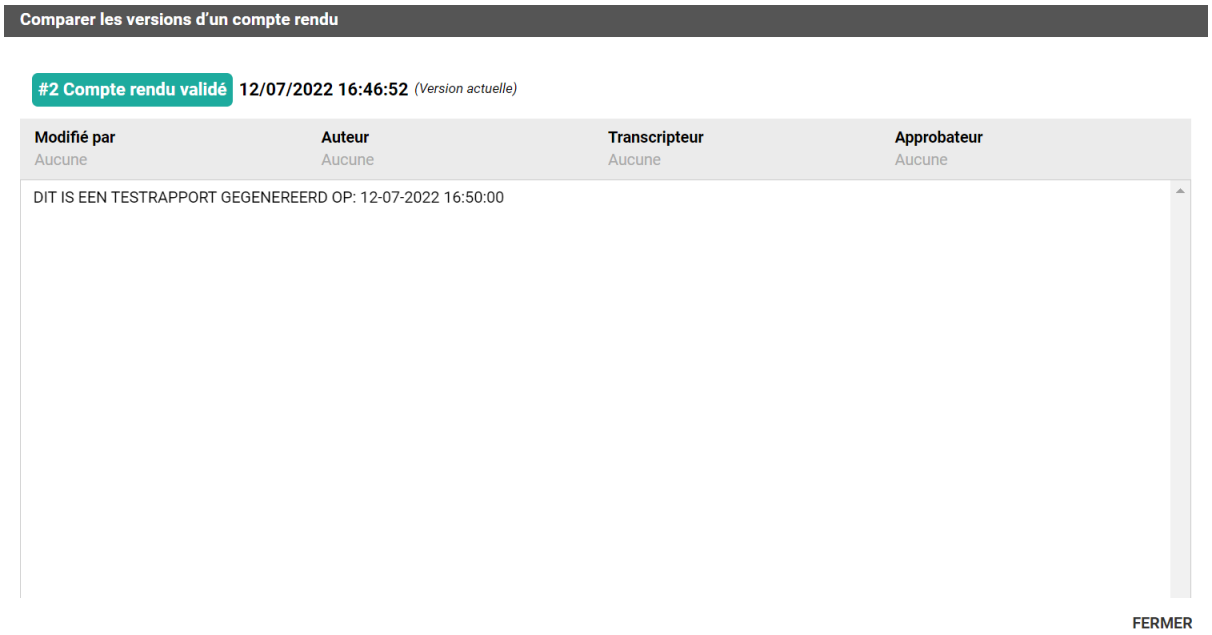


Comparer les versions d'un compte-rendu :

Pour comparer deux comptes-rendus, activez les cases à cocher et cliquez sur **Comparer**.

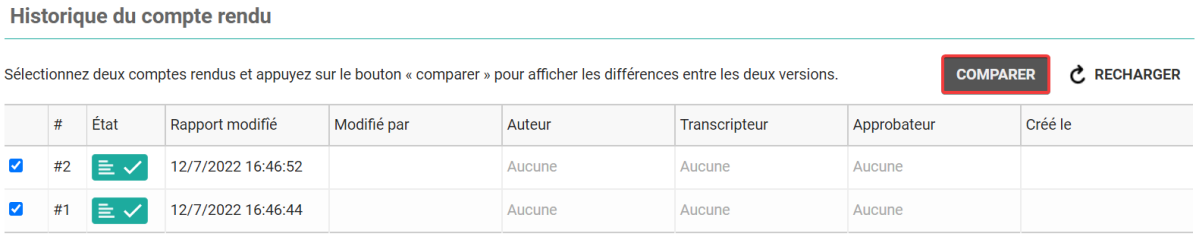

Les comptes-rendus sont affichés côte à côte et les différences sont indiquées en vert.

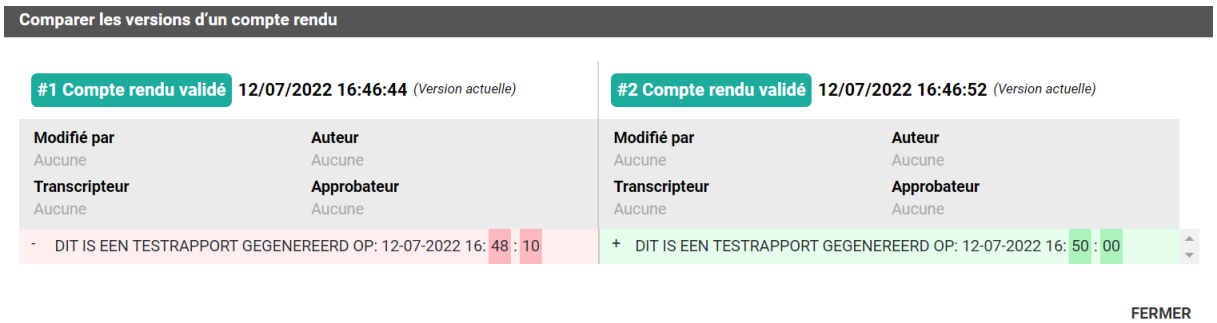


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

6.3.5.3 Images et séries

Remarque :

Si la source d'un examen l'autorise, en tant qu'administrateur de la source, vous pouvez supprimer des images ou des séries d'un examen, créer une nouvelle série ou déplacer des images vers un autre examen.

Pour modifier les images et les séries d'un examen, accédez à « Administration de l'examen » et sélectionnez « Images et séries ».

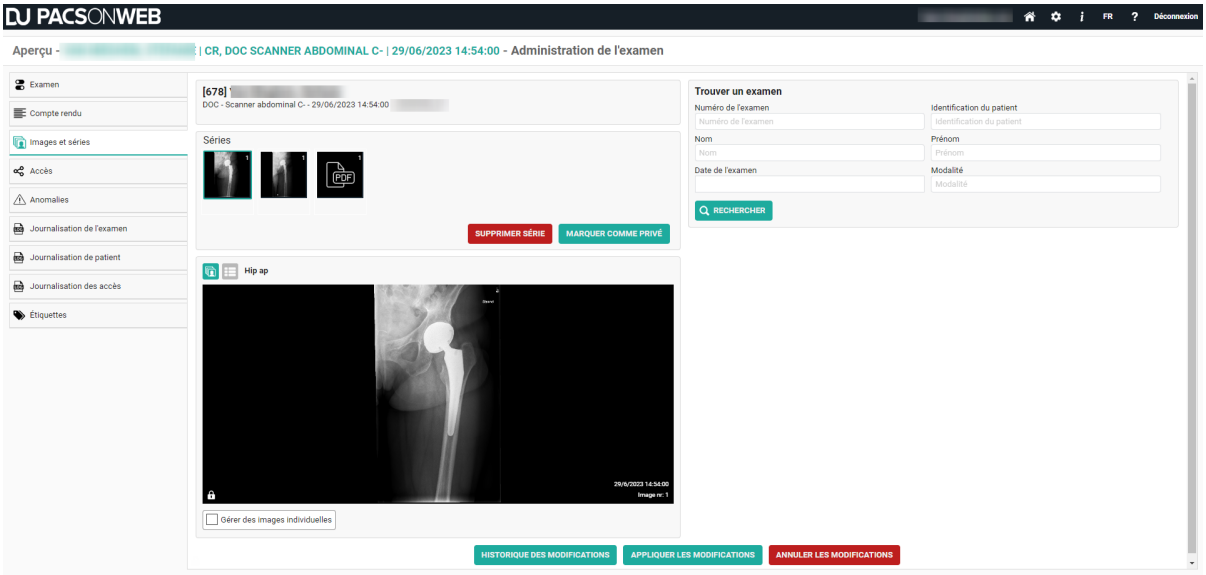

1. Sélectionnez une série et cliquez sur **SUPPRIMER SÉRIE** pour supprimer la série entière de l'examen.


   Les PDF encapsulés DICOM ne peuvent être supprimés que de cette manière, car il s'agit d'une instance DICOM.

   Les autres PDF peuvent être supprimés dans la visionneuse (cf. sélecteur de série (Page 215) - Section Compte-rendu, documents et Informations sur la demande)



©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


2. Sélectionnez une série et cochez **Gérer des images individuelles** pour supprimer ou ajouter une seule image à la série sélectionnée ou à une nouvelle série.

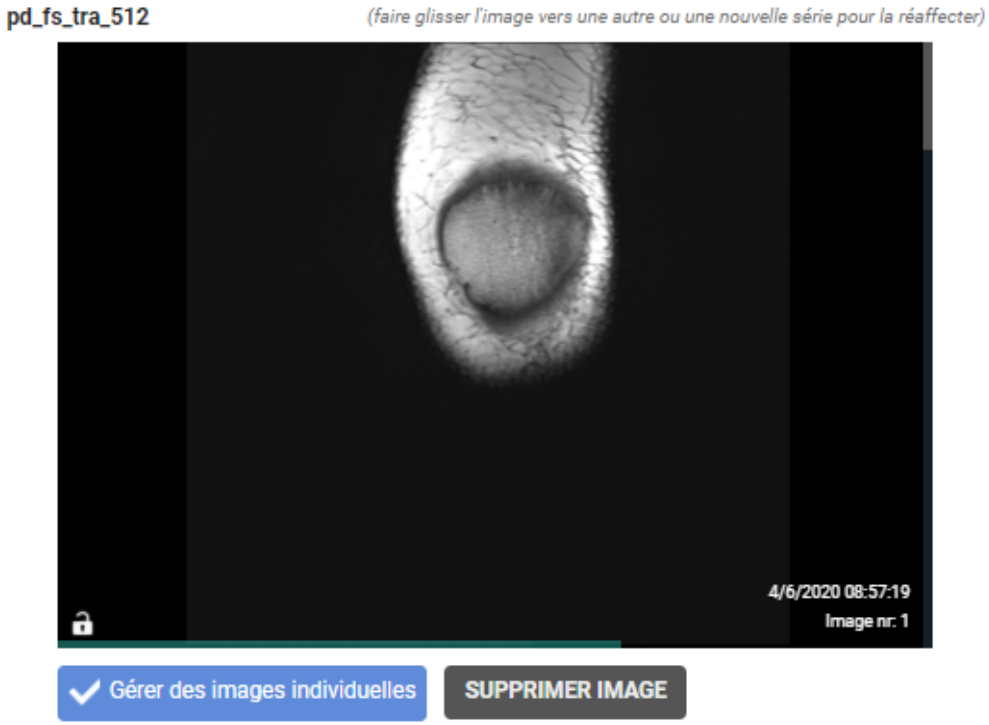

- Ajouter une image à une série :

Vous pouvez ajouter une image à une série sélectionnée ou à une nouvelle série en la faisant glisser sur la série souhaitée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

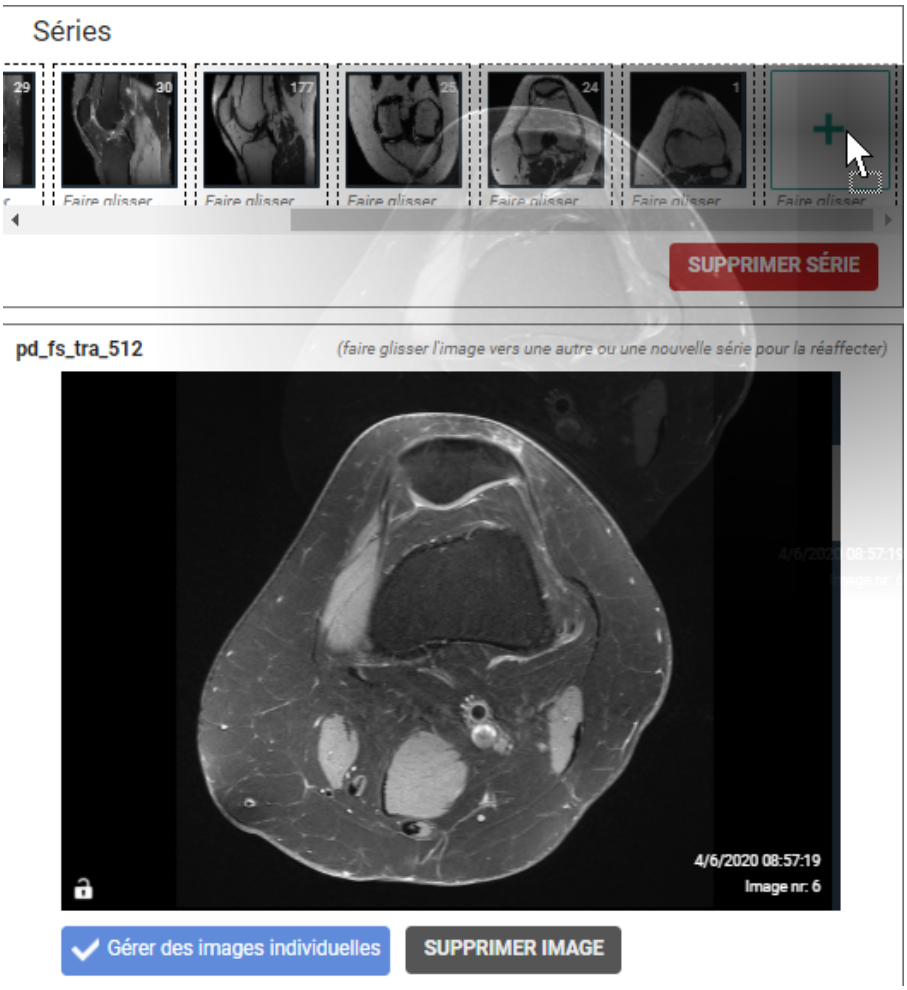

Si vous avez créé une nouvelle série, vous devez saisir manuellement la description de la série.



- Supprimer une image d'une série :

Vous pouvez supprimer une image d'une série en faisant défiler la série jusqu'à l'image qui vous intéresse et en cliquant sur **Supprimer image**.

3. Marquer les séries comme privées

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Il est possible de marquer les séries comme étant privées, ce qui les rend visibles uniquement aux administrateurs de la source ou aux utilisateurs disposant de l'autorisation associée.

Pour marquer une série comme privée, il suffit de sélectionner la série et de cliquer sur le bouton **MARQUER COMME PRIVÉ** .

Après avoir marqué une série comme privée, une icône de cadenas s'affiche sur la vignette.



Par la suite, cela est également visible dans le sélecteur de séries avec une icône de cadenas dans la vignette.

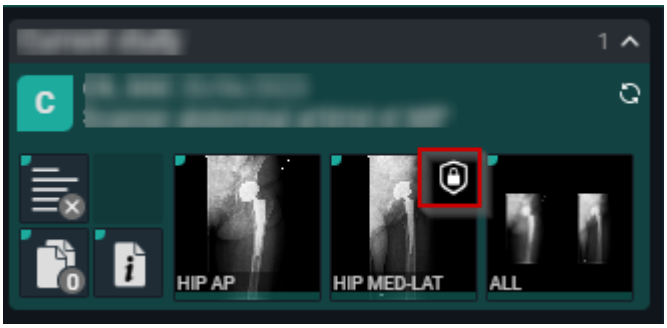


Vous pouvez annuler cette opération en sélectionnant la série privée et en cliquant sur **MARQUER COMME PUBLIC**.

Restriction :


Gardez à l'esprit qu'une série marquée comme privée peut être exclue dans certains protocoles de lecture, par exemple dans ceux qui utilisent des fonctions spécifiques pour trouver des séries par latéralité.

4. Vous pouvez déplacer des séries ou des images d'un examen à l'autre en les consultant, sur la base du:

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

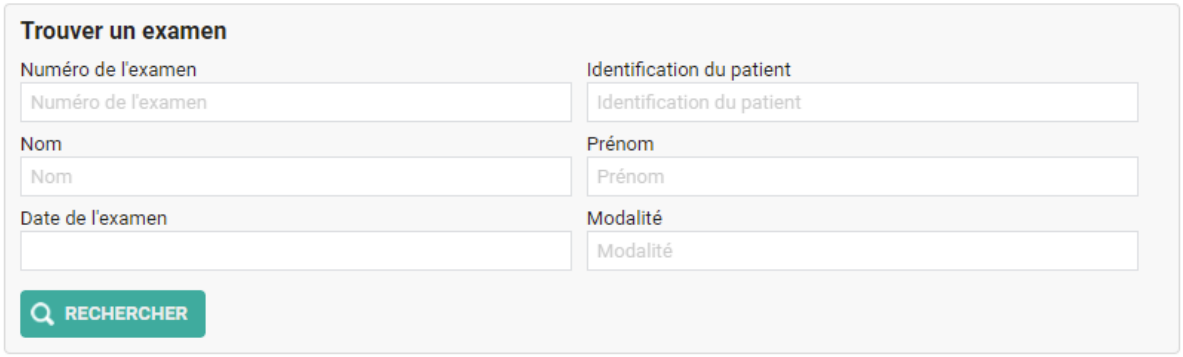

Sélectionnez l'examen approprié dans la liste qui en résulte.

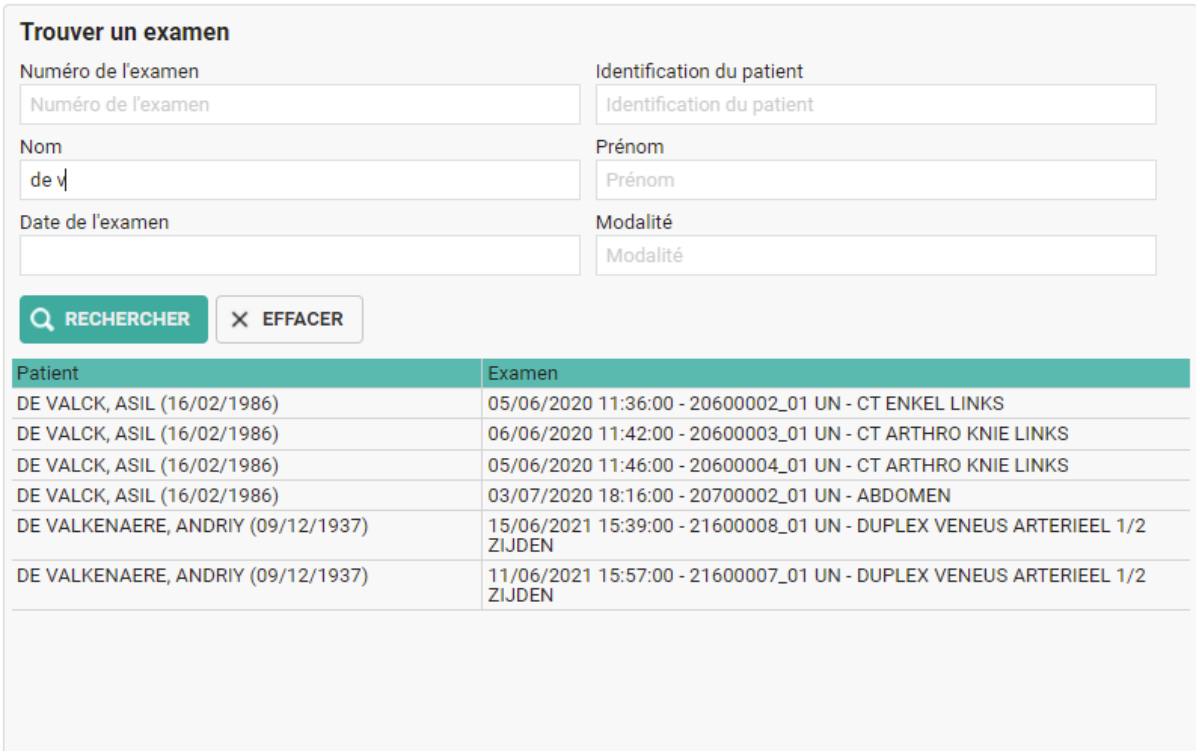

Sélectionnez une série du premier examen et cliquez sur **« Déplacer série »** pour la déplacer vers le deuxième examen.


Pour déplacer une seule image, sélectionnez une série et cochez **« Gérer des images individuelles »**, recherchez l'image et faites-la glisser sur une série existante ou nouvelle du deuxième examen.

Si vous voulez déplacer **plusieurs images**, vous pouvez passer à la liste des images.

Sélectionnez les images qui doivent être déplacées en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les lignes de l'image. Vous pouvez également sélectionner une plage en maintenant la touche MAJ enfoncée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Une fois les images sélectionnées, faites-les glisser vers l'examen et la série souhaités.

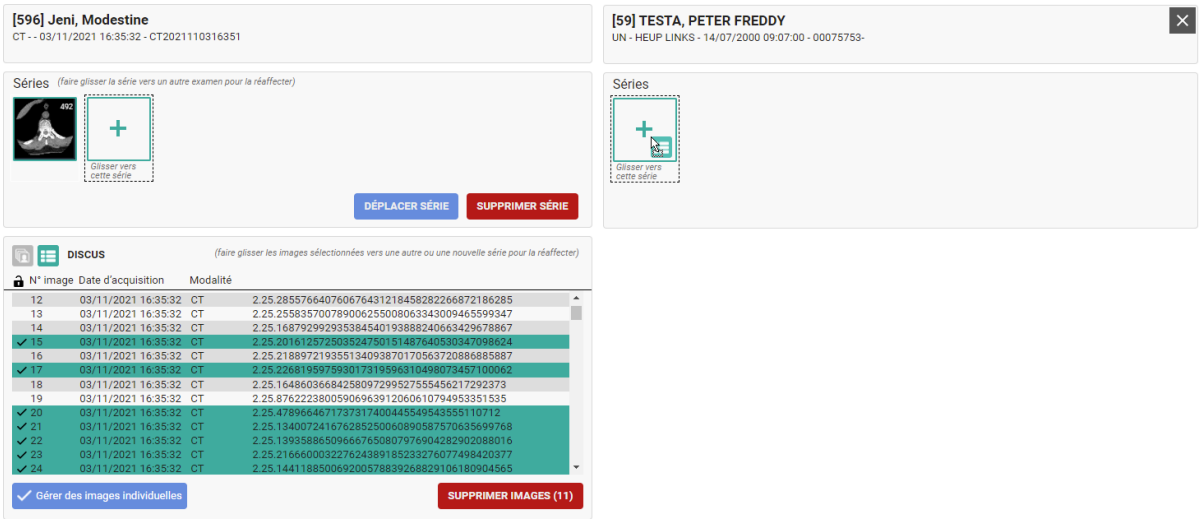


Si vous avez créé une nouvelle série, vous devez saisir manuellement la description de la série.



Après avoir effectué les modifications, vous pouvez choisir de les enregistrer ou de les annuler en cliquant sur **APPLIQUER LES MODIFICATIONS** ou sur **ANNULER LES MODIFICATIONS**.


Informations complémentaires sur les manipulations :

- Les images et les séries ne peuvent pas être déplacées lorsque de nouvelles images ou séries sont encore en cours de réception
- En cas d'échec d'une opération de déplacement ou de suppression, une anomalie est créée

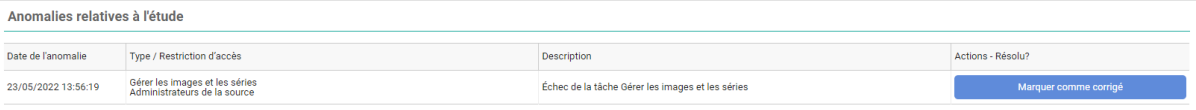

- En cliquant sur **HISTORIQUE DES MODIFICATIONS**, vous obtiendrez un aperçu détaillé de toutes les manipulations qui ont été effectuées avec l'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

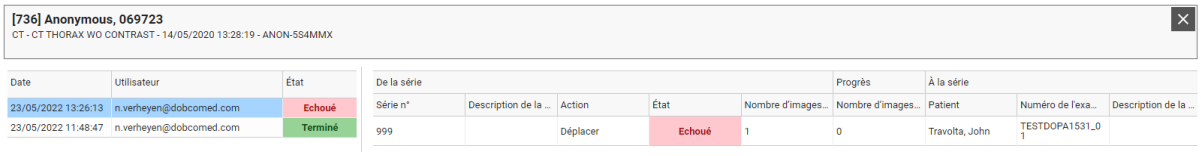

6.3.5.4 Accès à l'examen

Depuis l'onglet **Accès**, vous pouvez retrouver toutes les informations et les modifier en ce qui concerne :

- la personne qui a accès à l'examen,
- la manière par laquelle on peut accéder à l'examen,
- la date à laquelle l'accès à l'examen est autorisé.

Tous les enregistrements de l'accès réel à l'examen sont enregistrés dans Journalisation de l'examen (Page 292).


Utilisateurs

La section **Utilisateurs** indique pour quels utilisateurs et groupes d'utilisateurs l'examen est accessible à partir de la la liste d'examens.

En cliquant sur le nom d'un groupe, vous pouvez consulter les détails du groupe (membres, adresse, informations de contact, ...).

De plus, vous pourrez également voir le type d'accès à l'étude des différents utilisateurs, la date limite d'accès, ainsi que la date d'autorisation d'accès et la personne qui accorde l'accès.

Un accès spécifique peut être annulé en cliquant sur la petite croix qui se trouve à la fin de la ligne.

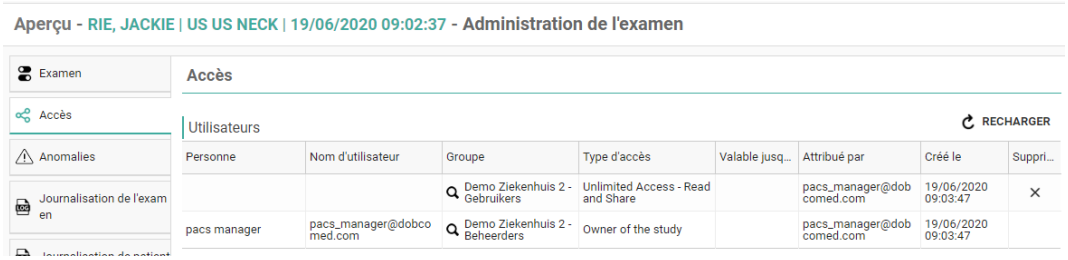


Débloqué (break-the-glass)

Cette liste contient tous les utilisateurs qui ont déblocqué l'examen pour un accès, quand et pour quelle reason.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

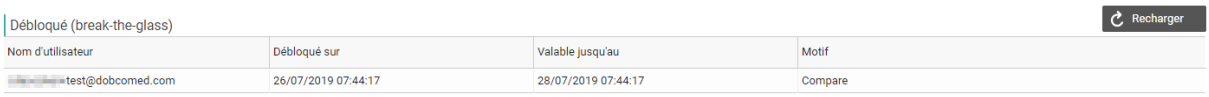


PACS (Envoyé)

Cette liste contient l'aperçu des actions menées pour envoyer l'étude ou la télécharger vers un système PACS.

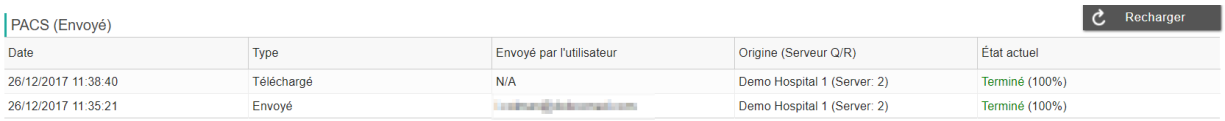

Partagés

L'aperçu contient tous les partages auquel appartient cette étude, ainsi que tous les détails correspondants.

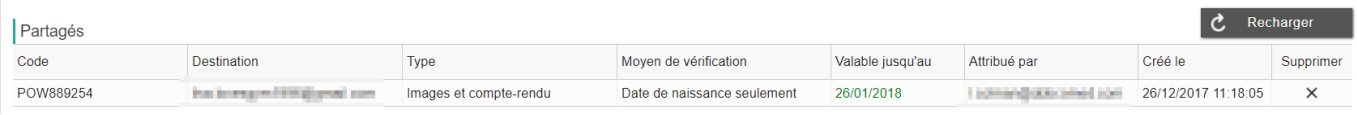

L’accès à un ensemble partagé peut être révoqué en cliquant sur l’icône de la croix à la fin de la ligne.

Lorsque l’accès à un ensemble partagé est retiré, vous avez la possibilité de retirer l’examen de l’ensemble partagé **RETIRER L’EXAMEN DE L’ENSEMBLE PARTAGÉ** ou de retirer l’ensemble partagé entier **RETIRER TOUT L’ENSEMBLE PARTAGÉ**

Numéro de référence

Cette liste contient tous les numéros de référence qui peuvent être utilisés pour obtenir l’accès à l’examen par le biais de la connexion du patient.

L’accès par un numéro de référence spécifique peut être retiré en cliquant sur l’icône de la croix à la fin de la ligne.

Depuis la liste, on peut voir la date de génération de chaque numéro de référence ainsi que la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle il peut être utilisé, comme le permet la source.

Dans le cas où la date **Valable de** et **Date d’expiration** ne sont pas enregistrées, il n’y a aucune restriction quant à l’utilisation du numéro de référence.

Si le service de radiologie demande au patient de payer pour avoir accès à l’examen, l’accès peut être sécurisé par un code PIN supplémentaire, fourni au patient lors du paiement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ce tableau indique le code PIN enregistré pour chaque numéro de référence et le nombre de tentatives infructueuses de saisie du code PIN.

Un service de radiologie peut imposer une complexité minimale à ses numéros de référence. Si un numéro de référence ne répond pas à cette exigence, il est identifié par une icône et ne peut pas être utilisé pour accéder à l'examen.



En cliquant sur **GÉNÉRER À NOUVEAU LES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE**, vous pouvez générer à nouveau automatiquement le code de sécurité selon les paramètres fixés par le service de radiologie émetteur.

Statut RSW

Il est possible d'envoyer à nouveau l'examen au RSW en cliquant sur le bouton « Envoyer » à la fin de la ligne :



Confirmez votre demande en cliquant sur **ENVOYER**.

6.3.5.5 Calendrier de l'examen

Le calendrier de l'examen affiche le temps écoulé entre l'acquisition des données et la présentation des données. Le temps de transfert total pour ces processus ne doit pas dépasser 15 minutes.

- L'acquisition des données correspond au moment où un examen est envoyé par la modalité.
- La présentation des données fait référence au moment où l'examen complet est disponible pour être affiché sur un poste de travail de diagnostic.

L'onglet « Calendrier de l'examen » comprend trois sections principales :


- Temps de chargement des examens
- Délais de traitement
- Examens envoyés en copie

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Il s'agit d'une fonctionnalité payante qui n'est pas activée par défaut. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour l'activer.

Vue d'ensemble de l'onglet calendrier de l'examen

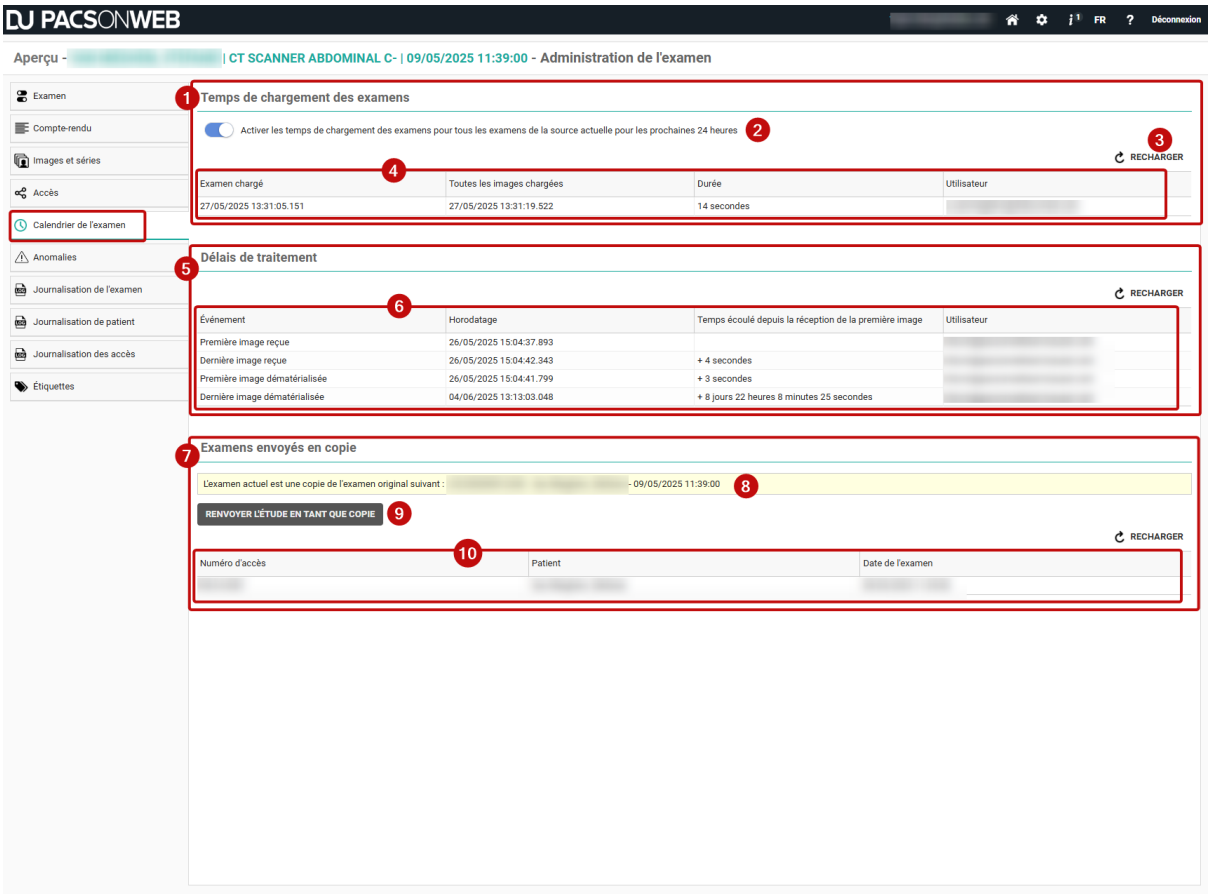

Numéro	Désignation	Description
1	Temps de chargement des examens	Une section de l'onglet **Calendrier de l'examen** qui affiche les horodatages et les durées de chargement de l'examen et de toutes les images associées.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
2	Commutateur de temps de chargement des examens	Un commutateur qui, lorsqu'il est activé, affiche les temps de chargement des examens pour tous les examens de la source actuelle pour les prochaines 24 heures. Vous pouvez désactiver manuellement le commutateur avant la période de 24 heures. Ce commutateur est désactivé par défaut.
3	Recharger	Un bouton permettant de rafraîchir les informations affichées dans le tableau. Les **temps de chargement des examens**, les **temps de traitement** et les **examens envoyés en copie** ont tous un bouton de rechargement respectif.
4	Tableau de chargement de l'examen	Un tableau qui affiche des informations pertinentes sur les temps de chargement de l'examen comprenant : ● La date et l'heure auxquelles l'examen a été chargé ● La date et l'heure auxquelles toutes les images ont été chargées ● Le temps de chargement de l'examen ● L'utilisateur qui a chargé l'examen
5	Délais de traitement	Section de l'onglet **Calendrier de l'examen** qui affiche des informations relatives au temps de traitement de l'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
6	Tableau des temps de traitement	Un tableau qui affiche des informations pertinentes sur les temps de traitement : ● Événement ● Horodatage ● Temps écoulé depuis la réception de la première image ● L'utilisateur de l'examen concerné
7	Examens envoyés en copie	Section de l'onglet **Calendrier des examens** qui affiche les examens qui ont été envoyés à nouveau, y compris l'examen d'origine s'il s'agit d'un examen qui a été envoyé à nouveau.
8	Examens envoyés en copie de message	Un message s'affiche si vous ouvrez un examen qui a été renvoyé en tant que copie. Les examens renvoyés sous forme de copies sont identifiés par un numéro d'accès commençant par RS-. En cliquant sur ce message, la page actuelle sera actualisée et l'examen original sera affiché.
9	Bouton de renvoi	Un bouton qui déclenche un nouveau flux de traitement des mesures pour le nouvel examen.
10	Tableau d'examens envoyés en copie	Un tableau qui affiche des informations pertinentes sur l'examen, y compris : ● Numéro d'accès ● Patient ● Date de l'examen

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pour activer la fonction de synchronisation de l'examen

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord activer les commutateurs suivants :

1. **Vous devez toujours télécharger des images complètes pour le niveau de fenêtre (Window Level)**
   - Rendez-vous sur : **Configuration de l'utilisateur** > **Préférences** > **Visionneuse** > **Paramètres de la visionneuse**
   - Activer : **Vous devez toujours télécharger des images complètes pour le niveau de fenêtre (Window Level)**
2. **Activer les temps de chargement des examens pour tous les examens de la source actuelle pour les prochaines 24 heures**
   - Rendez-vous sur : L'examen souhaité > cliquez sur l'icône d'**administration de l'examen** > naviguez jusqu'à **Calendrier de l'examen** > **Temps de chargement de l'examen**
   - Activer : **Activer les temps de chargement des examens pour tous les examens de la source actuelle pour les prochaines 24 heures**

Pour créer une mesure pour un examen particulier après l'activation de cette fonctionnalité :

1. Ouvrez l'examen souhaité dans la visionneuse.
2. Sélectionnez la série d'images **Toutes les séries** et faites-la glisser dans une fenêtre de visualisation.
3. Attendez que toutes les images soient chargées dans la visionneuse. Les images chargées avec succès sont indiquées par une barre de progression verte sous la vignette de l'image.
4. Naviguer vers **Administration de l'examen** > Onglet **Calendrier de l'examen**.

   Les informations sur les temps de chargement et de traitement de l'examen seront affichées ici.

Temps de chargement des examens

Cette section de l'onglet **Durée de l'examen** affiche des horodatages et des durées correspondant au temps nécessaire pour que l'examen et toutes les images associées se chargent et s'affichent dans la visionneuse.

- Les mesures ne prennent effet que lorsque des images de 16 bits sont chargées.
- Ces mesures sont déclenchées lorsque le commutateur **Activer les temps de chargement des examens pour tous les examens de la source actuelle pour les prochaines 24 heures** est activé.
- Vous pouvez désactiver manuellement cette fonction en basculant le bouton de l'interrupteur sur off.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Une fois désactivé, aucune nouvelle mesure pour le chargement de l'examen ne sera déclenchée. Le système n'enregistre pas les heures des nouveaux examens chargés dans la visionneuse.
- Les mesures antérieures qui ont été exécutées alors que la fonction était activée resteront dans le tableau.

Le tableau des temps de chargement de l'examen contient les informations suivantes :

- La date et l'heure auxquelles l'examen a été chargé dans la visionneuse.
- La date et l'heure auxquelles toutes les images de la série spécifique ont été entièrement chargées dans la visionneuse.
- La durée d'affichage de toutes les images.
- L'utilisateur qui a affiché l'examen.

Délais de traitement

Cette section de l'onglet **Calendrier de l'examen** affiche le temps nécessaire au traitement des examens depuis la première image reçue de la modalité jusqu'à la dernière image dématérialisée disponible.

- Le tableau des temps de traitement est vide par défaut.
- Un tableau vide affiche le message suivant : **Aucun délai de traitement n'est disponible pour cet examen.**
- Lorsque des informations sont disponibles, l'écran suivant s'affiche :
  - **Événement** : Valeurs prédéfinies indiquant quatre mesures, classées chronologiquement de l'événement le plus ancien au plus récent.
  - **Horodatage** : Date et heure de réception des images correspondant à l'événement.
  - **Temps écoulé depuis la réception de la première image** : Le temps écoulé entre la première image reçue et chaque étape suivante. Cela indique clairement le temps nécessaire au processeur DICOM pour traiter entièrement les images et les mettre à disposition sous forme dématérialisée.
  - **Utilisateur** : L'utilisateur qui a déclenché l'événement.

Les mesures sont déclenchées sur la base d'une balise DICOM spécifique, « EnableStudyTiming ». Cette balise (tag) est ajoutée aux examens qui sont renvoyés à l'aide du bouton **Renvoyer l'examen en tant que copie** dans la section **Examens envoyés en copie.**

Examens envoyés en copie

Cette section de l'onglet **Calendrier des examens** affiche les examens qui ont été envoyés à nouveau et vous permet de renvoyer un examen qui est déjà disponible,

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

ce qui déclenche les délais de traitement. Cette fonction vous permet de vérifier périodiquement le bon déroulement du processus.

- S'il n'y a pas d'examen d'origine, le panneau affiche ce message : **L'examen actuel n'est pas une copie, il n'y a donc pas d'examen original.**
- Le tableau des examens envoyés en copie est vide par défaut. **Aucun examen envoyé en tant que copie n'est disponible pour cet examen.**
- Tous les examens envoyés en tant que copies seront répertoriés dans le tableau, avec les informations suivantes :
  - **Numéro d'accès :** Commence toujours par « RS- »
  - **Patient** : Pseudonymisé *(nom = anonyme, prénom = 6 caractères)*
  - **Date de l'examen** : Date/heure à laquelle le renvoi a été déclenché

Si vous ouvrez un examen qui a été renvoyé en tant que copie, un message s'affiche indiquant que l'examen actuel est une copie de l'examen original avec les détails de l'examen. Ce message est un lien qui rafraîchit la page actuelle et affiche l'examen original.

Renvoyer l'étude en tant que copie

Ce bouton déclenche un nouveau flux de traitement des mesures pour le nouvel examen.

- Le bouton sera temporairement désactivé pendant que la tâche est en cours.
- Une fois le processus terminé, vous pouvez déclencher un nouvel envoi si nécessaire.

  Si le bouton reste désactivé, veuillez contacter votre administrateur global pour vous assurer qu'un serveur QR est configuré avec l'option « Utiliser pour renvoyer en tant que copie ». Si cette option n'est pas activée, le bouton restera grisé.

6.3.5.6 Anomalies

Si une irrégularité est détectée pour un examen sur DeepUnity PACSonWEB, une anomalie sera enregistrée. Dans ce cas, l'anomalie est clairement indiquée sur la page de l'examen (DeepUnity PACSonWEB page d'examens (Page 211)).

Lorsque vous ouvrez les pages d'administration d'un examen pour lequel une anomalie a été enregistrée, l'onglet des anomalies s'affiche automatiquement et l'étiquette est mise en évidence en orange.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Important !

Les données de l'anomalie indiquée s'appuient sur les données telles qu'elles étaient enregistrées au moment où l'anomalie a été enregistrée.

Si les données du patient ou de l'examen ont été adaptées après l'enregistrement de l'anomalie, ces adaptations NE SERONT PAS reprises dans l'anomalie.

Anomalies relatives à l'examen

Les anomalies suivantes sont enregistrées :

- numéro de sécurité sociale sur les images de DICOM différent de l'information de HL7
- date de naissance sur les images de DICOM différente de l'information de HL7
- date de naissance non reçu ou incorrecte
- nombre d'images dans DeepUnity PACSonWEB est différent de celui dans le PACS local (en tenant compte de l'application d'un filtre éventuel)
- numéro de sécurité sociale déjà reçu pour un(e) autre patient(e) via DICOM
- image ou message HL7 reçu avec le même Study Instance EUID ou numéro d'examen mais avec un autre numéro d'identification du patient
- l'examen avec un patient sans identification est changée en un patient avec l'identification par DICOM ou HL7
- incompatibilité avec CvKO. (plus de détails en bas de page).
- Les examens de différents patients ont été fusionnés
- Échec de l'opération de déplacement ou de suppression d'une image ou d'une série
- L'identité du patient a changé pour une procédure dans un compte-rendu

Pour chaque anomalie, toutes les informations pertinentes s'affichent dans l'aperçu.

À partir de l'aperçu, l'examen concerné peut être ouvert en cliquant sur le lien de l'examen.

Anomalies relatives au patient

Les anomalies suivantes sont enregistrées :


- plusieurs ID en interne enregistrés pour le(la) même patient(e)
- le numéro de sécurité sociale reçu a déjà été relié à un(e) autre patient(e)
- réception d'une autre date de naissance
- numéro de sécurité sociale déjà reçu pour un(e) autre patient(e) via HL7

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Patient sans ID de DICOM (plus de détails en bas de page)
- Patient sans nom de DICOM : un nom de patient est généré (« UNK_ »+ [abréviation de la source]+numéro unique) et utilisé (de plus amples explications en bas de page)

Pour chaque anomalie enregistrée, les informations suivantes sont affichées :


- la date et l'heure auxquelles l'anomalie a été enregistrée
- le type d'anomalie + le niveau d'accès requis d'un utilisateur pour pouvoir ouvrir l'examen
- une description de l'anomalie
- les mesures correctives possibles

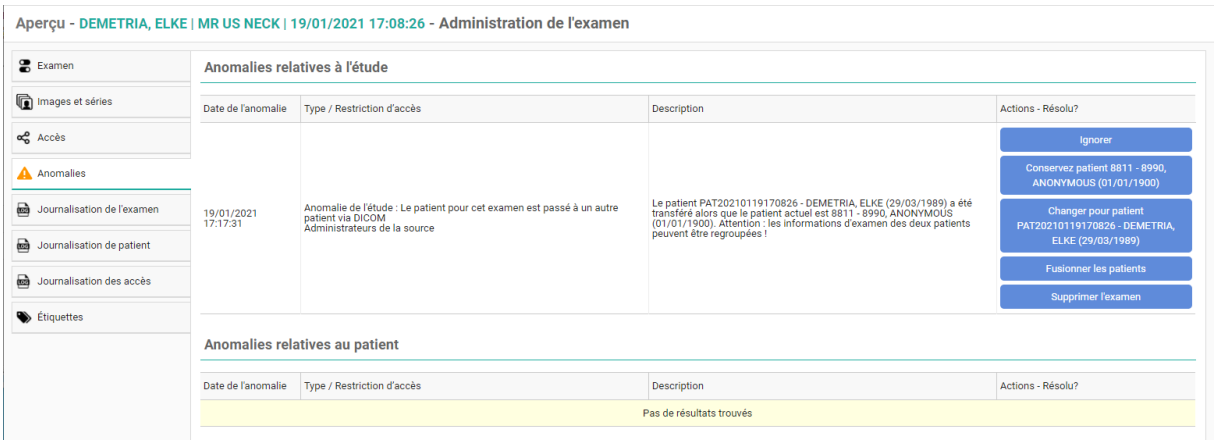

Si un même numéro de sécurité sociale a été enregistré pour deux patient(e)s différent(e)s, vous pourrez attribuer ce numéro à l'un(e) des deux patient(e)s ou fusionner les deux patient(e)s.

Cette dernière option permet l'affichage suivant pour suivre de manière contrôlée le déroulement de la fusion.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

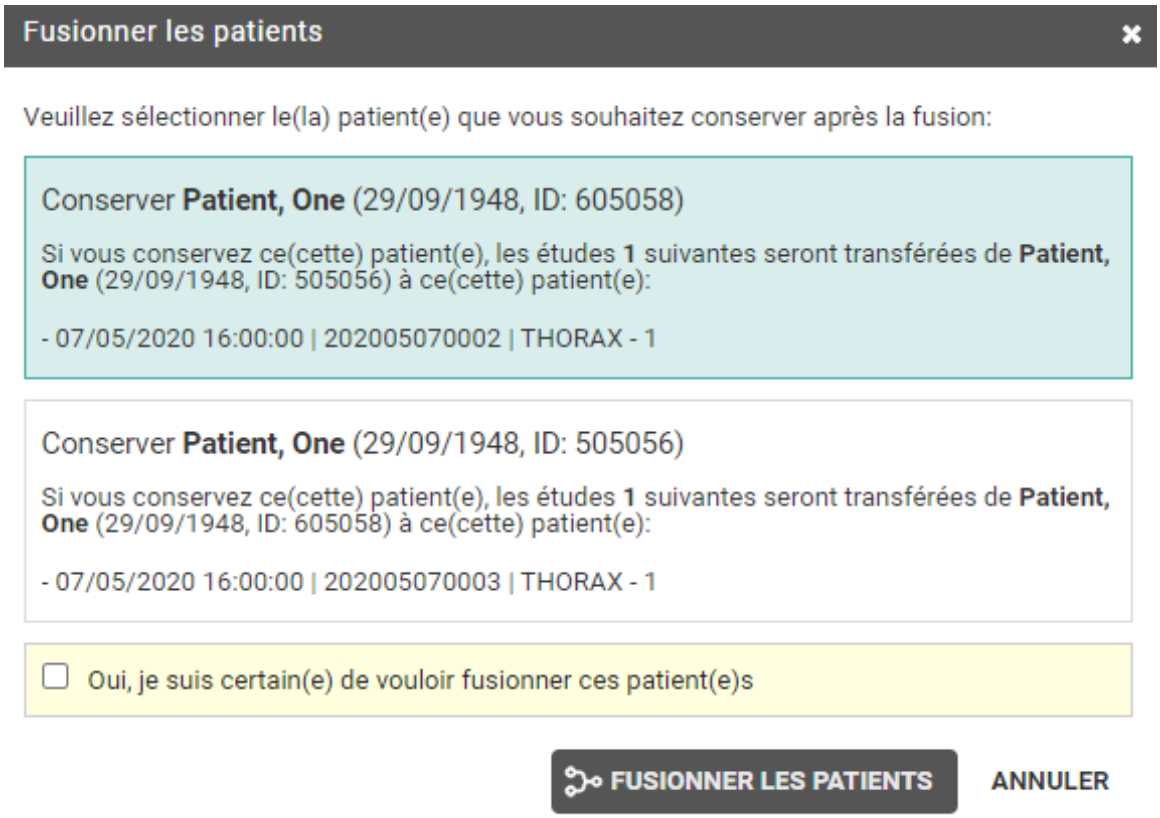

Une fois que vous avez sélectionné une solution, celle-ci est surlignée en vert. En plaçant votre curseur au-dessus du tableau, vous pourrez voir qui et quand la solution a été sélectionnée.

Si toutes les anomalies enregistrées ont été marquées comme résolues, la notification ne sera plus affichée sur la page de l'examen et l'étiquette « Anomalies » sur les pages d'administration de l'examen ne sera plus mise en évidence en orange.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

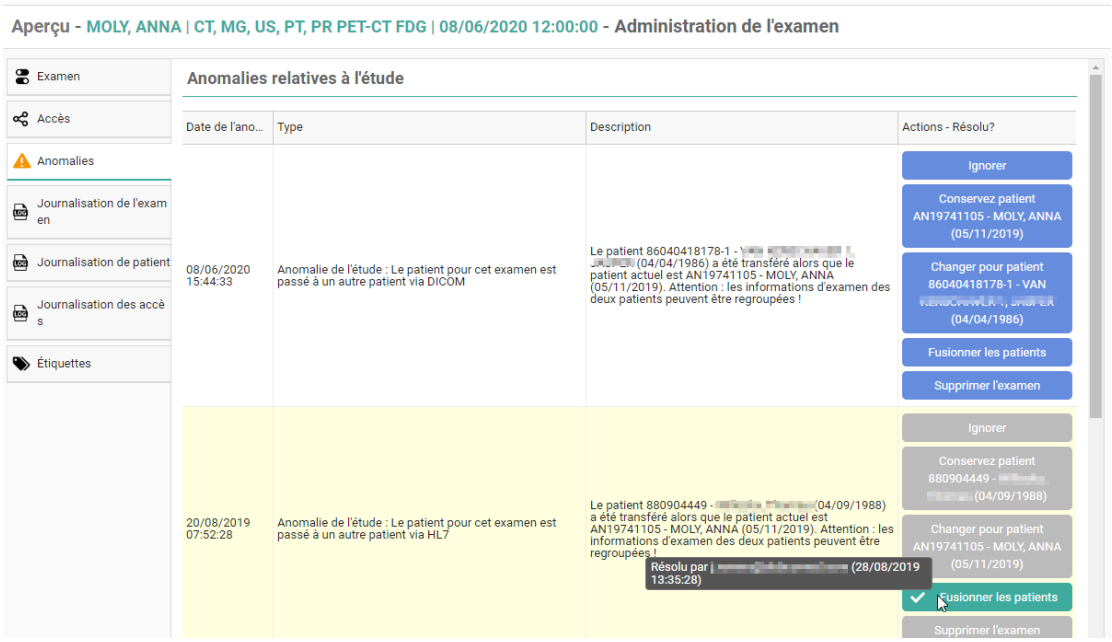

Anomalie dans l'examen en raison d'un patient sans ID ou nom de DICOM

Après avoir corrigé l'examen, cliquez sur « Ignore » dans la description de l'action.

Seuls les administrateurs source peuvent accéder aux études présentant ces anomalies.

Anomalie dans l'examen pour incompatibilité avec CvKo

Lorsque des fichiers DICOM sont reçus avec des balises DICOM qui ne répondent pas aux exigences, il existe 2 actions possibles pour corriger cette anomalie.

Actions possibles :

- Ignorer : rien ne se passera et l'anomalie sera corrigée.
- Marquer comme corrigé : une boîte de dialogue s'affiche et permet d'envoyer les images corrigées à DU POW et de partager l'examen manuellement avec CvKO.

Toutes les modifications concernant les anomalies au niveau de l'examen sont enregistrées dans « Journalisation de l'examen » (Journalisation de l'examen (Page 292)).

Toutes les modifications concernant les anomalies au niveau du patient sont enregistrées dans « Journalisation de patient » (Journalisation de patient (Page 293)).

6.3.5.7 Journalisation de l'examen


Via la journalisation de l'examen, vous pouvez voir qui a modifié quelles données de l'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895



6.3.5.8 Journalisation de patient

Via la journalisation du patient, vous pouvez voir qui a modifié quelles données du patient.

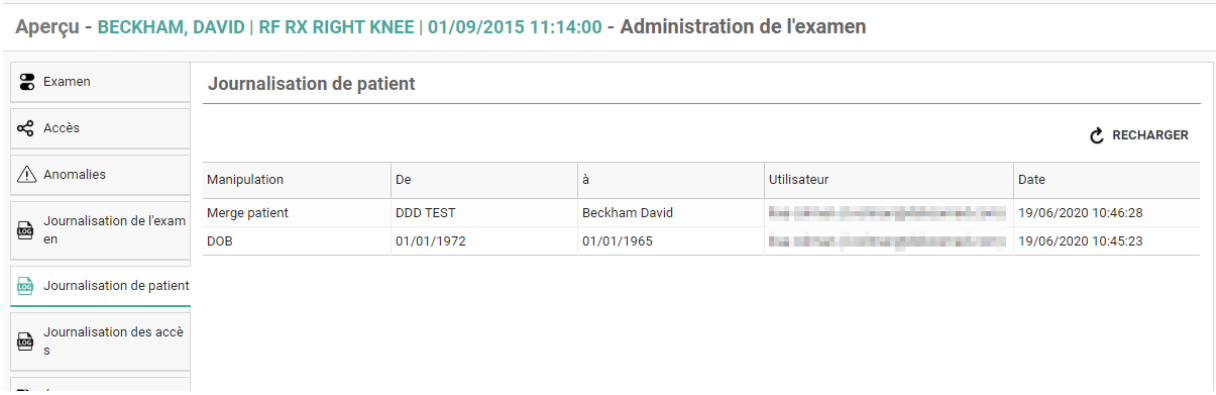


6.3.5.9 Journalisation des accès

Pour tous les types d'accès et si des clichés ont été téléchargés, il est enregistré

- comment l'utilisateur a accédé à l'examen
- quand l'utilisateur a accédé à l'examen/l'a téléchargé
- depuis quelle adresse IP l'utilisateur a accédé à l'examen/l'a téléchargé

Pour les téléchargements, il est aussi enregistré dans le format où l'examen a été téléchargé (PNG, DICOM,...)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

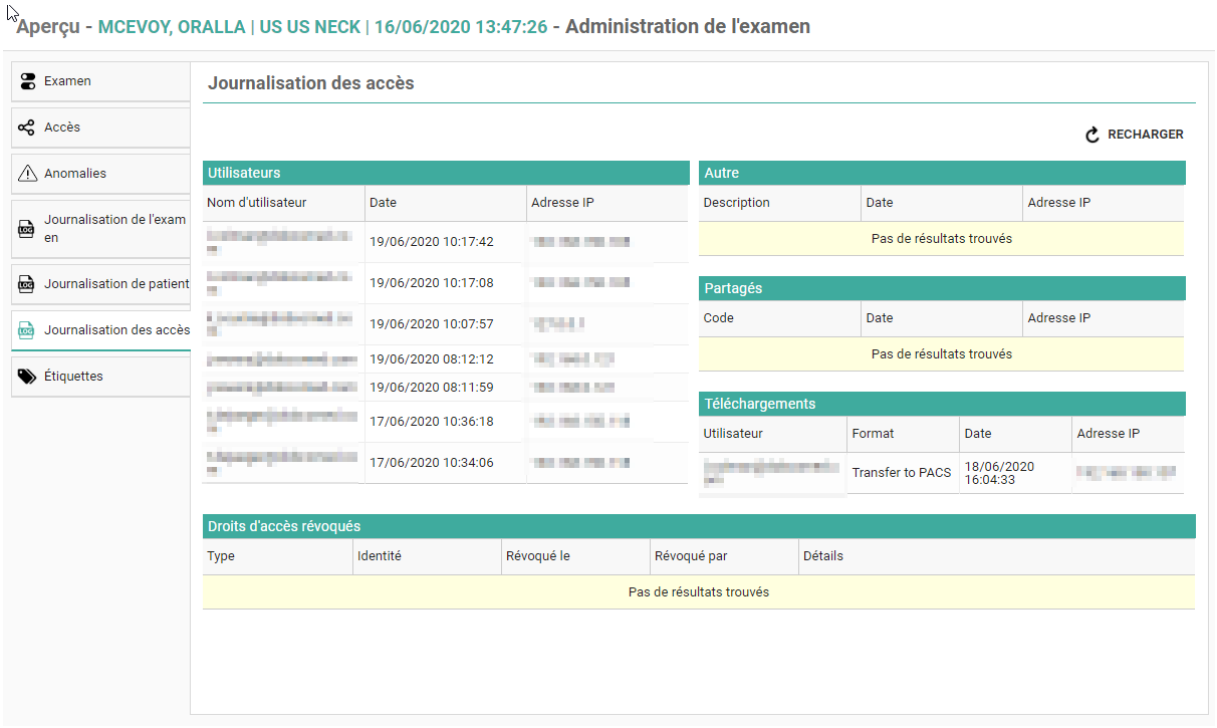

Remarque :

Les ensembles partagés signifient que l'examen a été partagé avec un utilisateur sans compte et que celui-ci peut ouvrir l'examen via un code DU POW.

Pour la Belgique, tout accès via le portail COZO est enregistré dans la partie Autre.




6.3.5.10 Étiquettes

Dans l'onglet « Étiquettes », vous trouverez les informations suivantes :

- Nom et description des étiquettes ajoutées
- Date/heure à laquelle l'étiquette a été ajoutée à l'examen
- Qui peut voir l'étiquette
- Qui a ajouté l'étiquette

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

À partir de cette page, il est également possible d'ajouter ou de supprimer l'examen
AJOUTER ÉTIQUETTE À EXAMEN

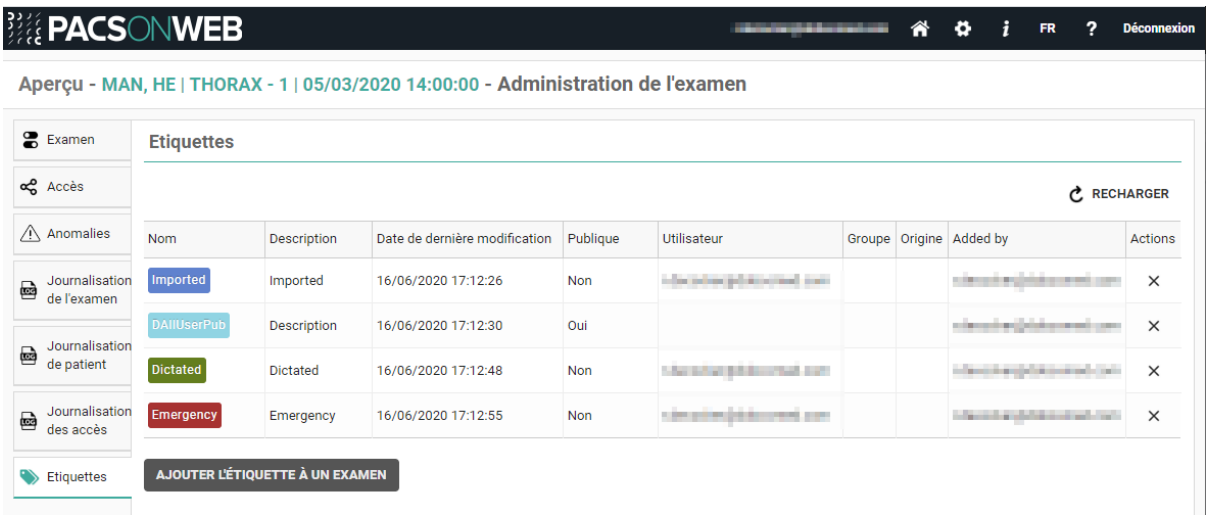

6.3.6 MPR et outils connexes

DeepUnity PACSonWEB contient les outils d'image avancés suivants pour des séries multi-coupe :

- Reconstruction multiplanaire
- Projection d'intensité maximale
- Projection d'intensité minimale
- Reconstruction volumique à projection multiple

AVERTISSEMENT :

MPR en supplément

Tout diagnostic et toute décision médicale basés sur des images générées par MPR (MPR, MIP, MinIP, MPVR) doivent toujours faire l'objet d'une double vérification avec la série originale.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

ATTENTION :

Précision et résolution MPR

La précision d'images générées par MPR dépend de la qualité de la série originale (espacement des pixels, épaisseur de coupe, etc.).

Les images sont calculées sur la base des données disponibles dans la série originale.

Les écarts de données pixels seront calculés pour afficher une image lisse.

Il sera encore de la responsabilité de l'utilisateur de garder à l'esprit l'épaisseur de la tranche et l'espacement des pixels de la série originale.

Si l'épaisseur de la tranche est supérieure à l'espacement des pixels, le chevauchement entre les tranches n'est pas pris en compte.

L'espacement des pixels utilisé est calculé sur la base de l'emplacement des images originales

L'utilisateur doit être conscient de la visualisation de données perdues pendant l'auscultation et la pose de diagnostic du patient.

L'utilisateur doit également être conscient que la série qui a perdu des données pixels lors de la compression ou qui présente une épaisseur de tranche inappropriée ne convient pas à une génération MPR appropriée.

ATTENTION :

Calculs MIP, MinIP et MPVR

À l'utilisation de calculs MIP, MinIP et MPVR, un seul pixel est affiché pour toute l'épaisseur de la tranche. L'utilisateur doit savoir que seules les données sélectives sont affichées sur la base de ces calculs et qu'il lui incombe de procéder à une double vérification des données avec la série originale.

Restriction :


Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge sur les appareils mobiles.

Les outils ne peuvent être activés que pour les images du type de modalité suivant :


- CT
- MR
- NM
- PT / PET
- ST / SPECT

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Si une fenêtre avec une telle série est sélectionnée, le bouton « MPR » est disponible depuis la barre d'outils. En cliquant sur le bouton, la liste complète des fonctionnalités MPR s'affiche.

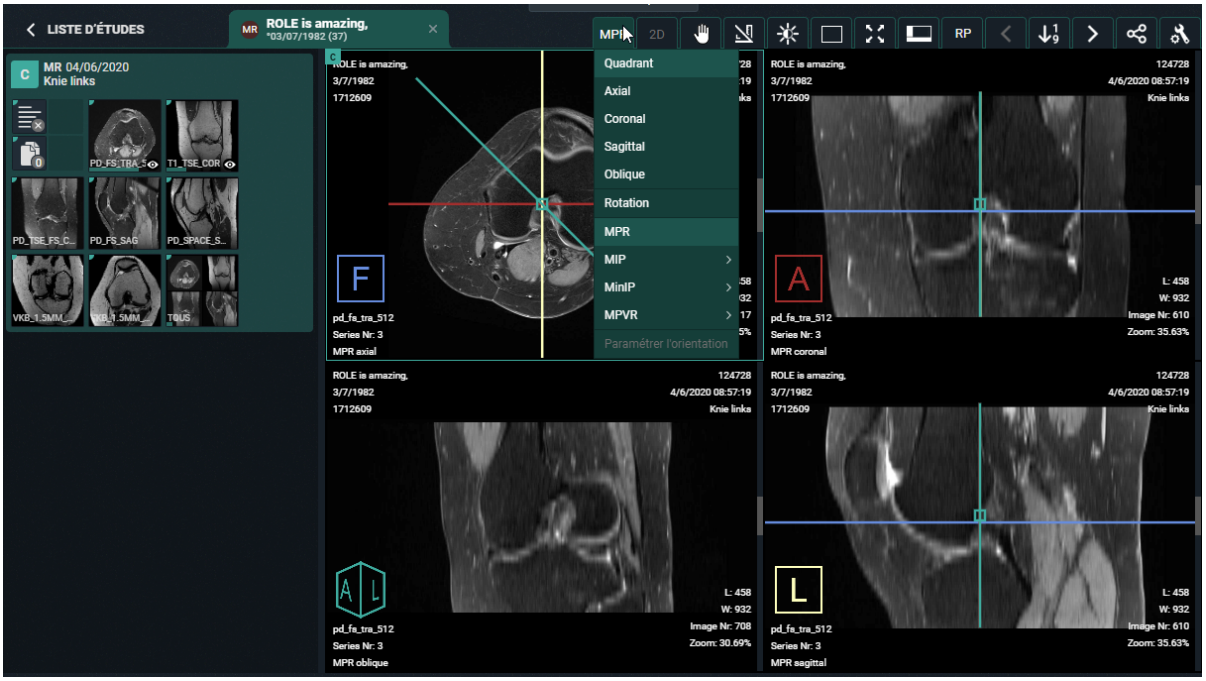

Le menu « MPR » est également disponible d'un clic droit de la souris sur l'image.

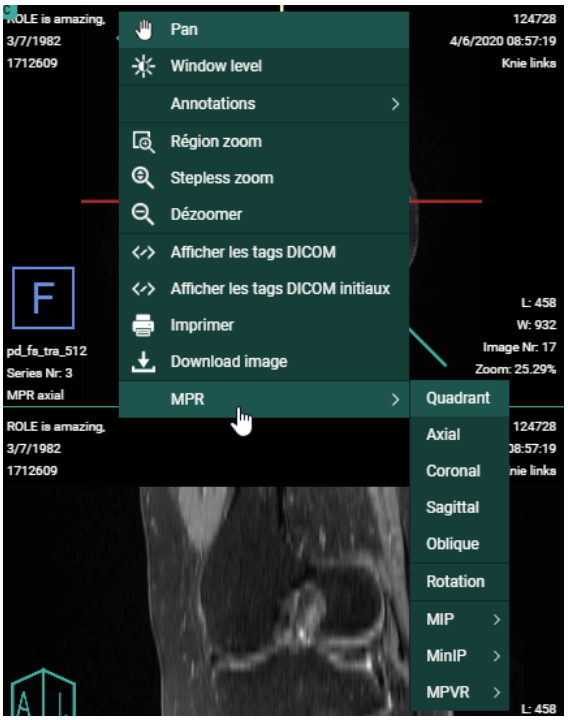


Pour faciliter l'utilisation, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Activer/désactiver la MPR	CTRL + M
Afficher/masquer les lignes de référence	CTRL + X
Si la MPR est activée: **Réinitialiser la MPR** aux orientations originales, réinitialiser le facteur de zoom et le niveau de la fenêtre	BARRE D'ESPACE
Déplacer l'affichage vers la gauche	Touche flèche gauche 

Si une série d'images est sélectionnée, qui ne prend pas en charge le MPR, le bouton est grisé dans la barre d'outils et l'option « MPR » n'est pas reprise dans le menu contextuel lorsque vous effectuez un clic droit de la souris sur l'image.

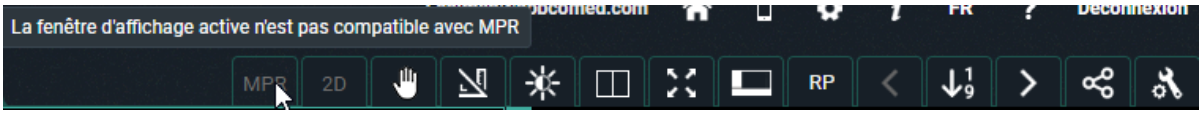

Si le MPR ne peut pas être créé en raison d'une mémoire insuffisante, la notification suivante s'affiche.

MPR

Ne peux pas créer de MPR

Le volume MPR ne peut pas être créé en raison d'une mémoire insuffisante. Veuillez réessayer plus tard. Si le problème persiste, veuillez contacter votre administrateur système ou le support DeepUnity PACSonWEB.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Afin de pouvoir générer des données MPR utilisables, les séries d'images concernées doivent respecter chacune des conditions suivantes :


- la distance entre chaque jeu de tranches consécutives est régulière ;
- la série compte au moins 10 tranches ;
- la série compte 10 000 tranches tout au plus ;
- l'espacement max. entre les tranches est de 10 mm ;
- toutes les images de la série ont exactement la même orientation ;
- les images sources sont monochromes.
- les séries doivent avoir des images de 16 bits

Si une condition n'est pas satisfaite, un message d'avertissement approprié s'affiche.

6.3.6.1 Vue disponibles

Les axes pour MPR sont considérés comme suit :

- Axe X = de droite à gauche (D vers G)
- Axe Y = antérieur à postérieur (A vers P)
- Axe Z = des pieds à la tête (P vers T)

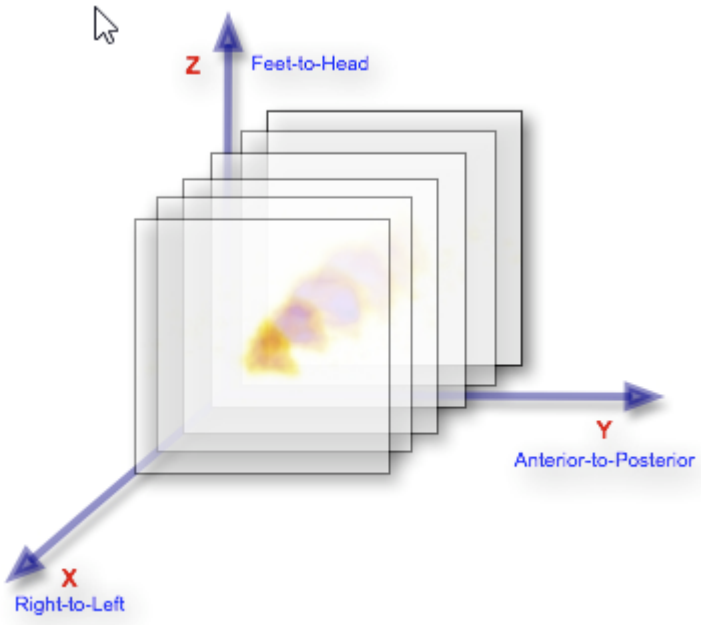

À l'activation MPR sur une série d'images, les affichages suivants sont disponibles :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


- Axial : tranches perpendiculaires à l'axe Z
- Sagittal : tranches perpendiculaires à l'axe X
- Coronal : tranches perpendiculaires à l'axe Y
- Triplan : aperçu de ces 3 vues

Si le MPR est activé et qu'aucun affichage spécifique (axial, sagittal, coronal) n'est sélectionné, c'est la vue Triplan qui est appliquée.

Il est possible de faire pivoter chacune des lignes de référence.

Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur une ligne de référence et de la faire glisser lorsque l'icône de rotation apparaît.

Le comportement par défaut est que les lignes de référence sont maintenues dans un angle de 90° les unes par rapport aux autres. En appuyant et en maintenant enfoncée la **touche Ctrl** les lignes de référence peuvent être pivotées indépendamment.

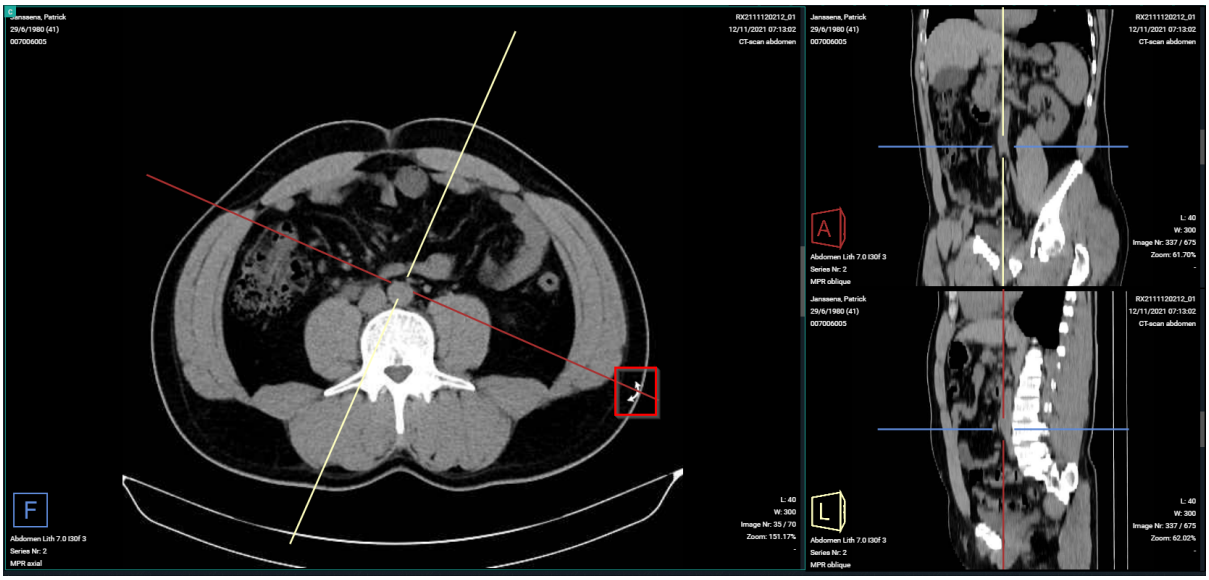

Chaque quadrant présente une indication dans le coin inférieur gauche précisant

- l'orientation du volume à l'aide d'indicateurs R, L, A, P, H, F (cf. description des axes)
- la série dont proviennent les images MPR
- le nom de l'affichage

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



Pour un seul affichage dans la fenêtre, sélectionnez l'affichage souhaité dans le menu MPR.



6.3.6.2 MIP - MINIP - MPVR

DeepUnity PACSonWEB propose également les modes suivants, liés au MPR :

- MIP : Projection d'intensité maximale

  Permet d'afficher les tranches du volume dans un mode de rendu de projection d'intensité maximale.

  Dans ce mode, chaque pixel à l'écran est la densité maximale trouvée le long d'une ligne perpendiculaire au plan sélectionné dans l'épaisseur du plan sélectionné.

- MINIP : Projection d'intensité minimale

  Permet d'afficher l'image dans un mode de rendu de projection d'intensité minimal.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Dans ce mode, chaque pixel à l'écran est la densité minimale trouvée le long d'une ligne perpendiculaire au plan sélectionné dans l'épaisseur du plan sélectionné.

- MPVR : Reconstruction volumique à projection multiple

  Permet d'afficher les tranches du volume dans un mode de rendu de projection d'intensité moyenne.


  Dans ce mode, chaque pixel à l'écran est la densité moyenne trouvée le long d'une ligne perpendiculaire au plan sélectionné dans l'épaisseur du plan sélectionné.

Les épaisseurs de plan suivantes sont disponibles pour les trois modes :

- 3 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 15 mm

Un tel mode peut être activé à partir du menu MPR et est automatiquement appliqué à l'ensemble de l'affichage sélectionné (triplan, axial, sagittal, coronal).

Si une autre vue est sélectionnée, le mode sélectionné est toujours appliqué. Le mode reste en surbrillance dans le menu MPR afin qu'il puisse être consulté en cas de besoin.

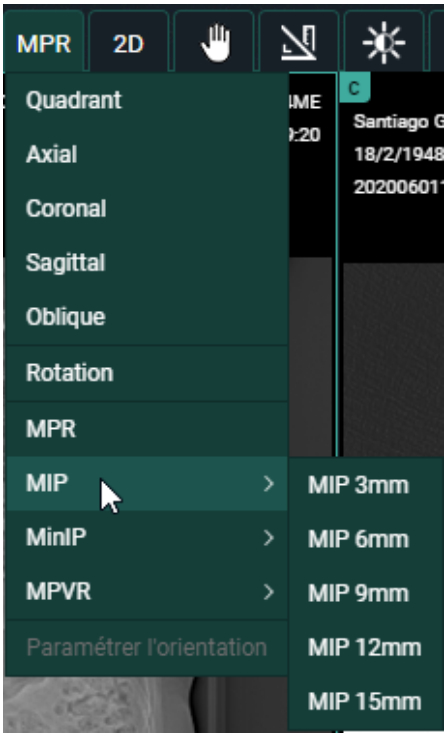

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si la fonctionnalité MIP, MinIP ou MPVR est active, elle peut être désactivée à partir du menu MPR de la barre d'outils en cliquant sur « Désactiver coupes épaisses ».



6.3.6.3 Interactions de l’utilisateur

Dans la vue Triplan, les lignes de référence sont affichées sur les vues axiale, sagittale et coronale. Lors de la rotation d'une ligne de référence, les autres vues sont ajustées en conséquence.

Les interactions suivantes de l’utilisateur sont possibles dans une série MPR générée (il en va de même pour MIP, MINIP, MPVR) :


1. Rotation oblique simple

En passant la souris sur une ligne de référence, le curseur se transforme en une icône de rotation.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la ligne de référence à l'endroit souhaité pour créer une vue oblique.

Par défaut, les lignes de référence resteront dans un angle de 90°.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

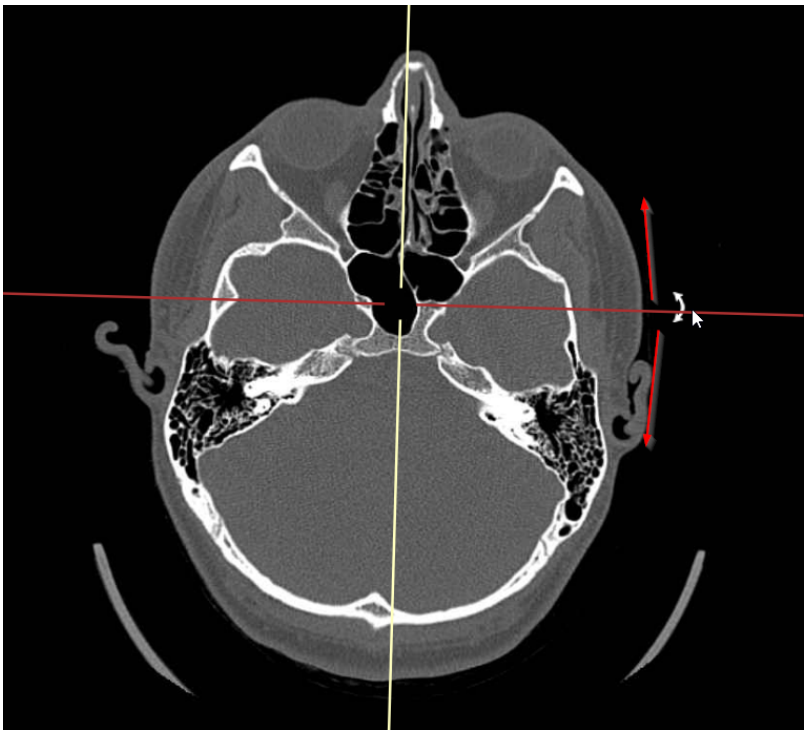


2. Rotations obliques doubles

Si, lors d'une rotation dans la vue oblique simple, la touche Ctrl est enfoncée, seule la ligne de référence sélectionnée sera déplacée.

Les lignes de référence ne seront donc plus perpendiculaires les unes aux autres, ce qui donne lieu à une double vue oblique.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

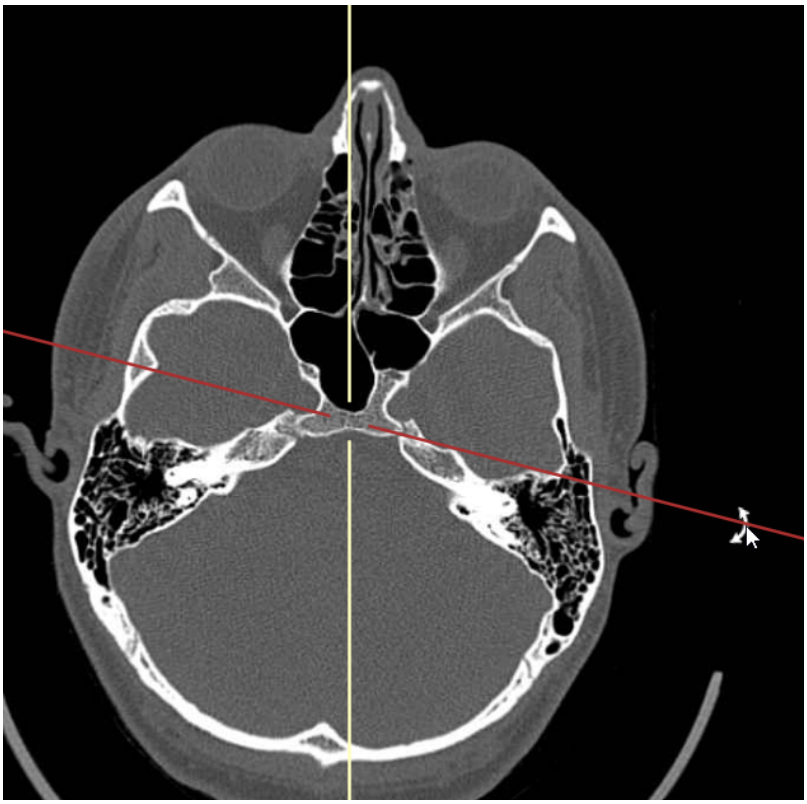

Important !


Pour des raisons pratiques, les rotations ne peuvent être réalisées qu'autour d'un seul axe à la fois.

Après avoir effectué par ex. une rotation autour de l'axe X, vous devez relâcher et maintenir appuyé le bouton gauche de la souris pour pouvoir effectuer une rotation sur l'axe Y.

À partir de la vue axiale, sagittale ou coronale, il est possible de changer la tranche affichée de la vue oblique en sélectionnant l'intersection sur les deux lignes de référence, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris.

Cela permet également de repositionner l'intersection afin de sélectionner un autre point central pour la rotation des lignes de référence.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

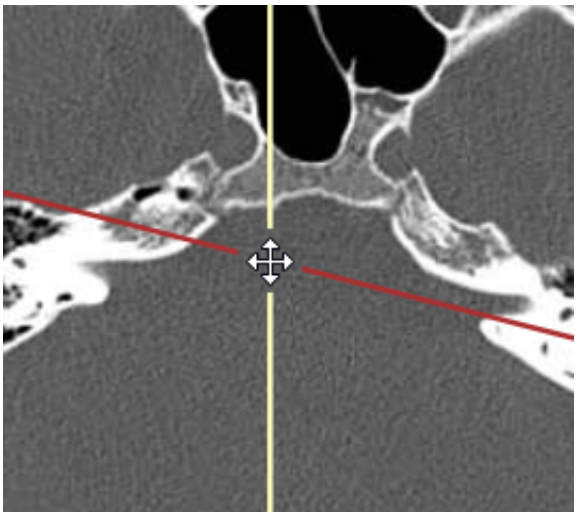

3. Paramétrer l'orientation

Vous pouvez définir l'orientation dans l'une des trois vues en utilisant l'option « Définir l'orientation » du menu MPR (accessible en appuyant sur le bouton droit de la souris).

Les options possibles sont les suivantes : Gauche, Droite, Antérieur, Postérieur, Tête ou Pieds.

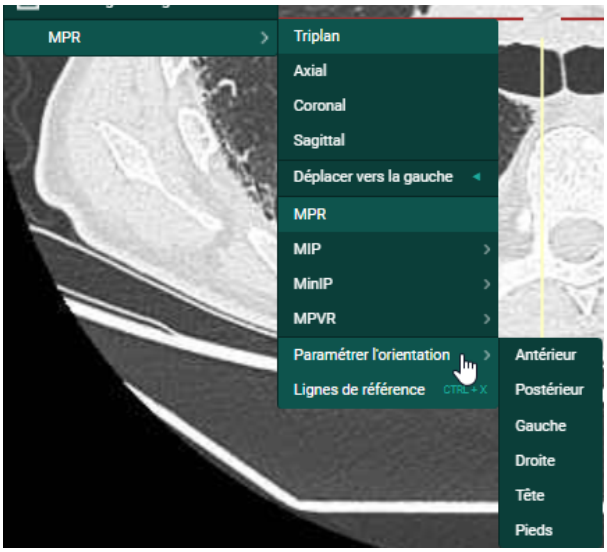

6.3.7 Ouvrir l'examen dans une application externe

Vous pouvez ouvrir un examen de DeepUnity PACSonWEB dans une autre application avec le contexte approprié en cliquant sur : **Ouvrir l'examen dans une application externe**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Pour faire usage de ces liens, veuillez contacter le centre d'assistance de DeepUnity PACSonWEB.

6.3.8 Rendu des volumes

À partir d'une série d'images du même volume, il est possible de visualiser le volume sous différentes formes en fonction du rendu des volumes.

- **MPR :** Reconstruction multiplanaire
- **3D :** rendu tridimensionnel

Pour activer ou désactiver cette fonction facultative, veuillez contacter le service d'assistance de Dedalus.

AVERTISSEMENT :

La précision des images de rendu de volume calculées dépend de la qualité, de l'espacement des pixels et de l'espacement des coupes (position relative de l'image pour chaque image de la série) des images originales. En fonction de la vue (zoom, épaisseur de la coupe choisie, mode de rendu, orientation, etc.), les espaces entre les pixels originaux peuvent être calculés en pixels nouvellement affichés, et/ou les pixels individuels peuvent être un recalcul de plusieurs pixels originaux. L'utilisateur doit toujours en être conscient et vérifier les données et les résultats des images de rendu de volume par rapport à la série originale avant de prendre des décisions ou de poser des diagnostics médicaux.

Remarque :

Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge sur les appareils mobiles.

Le rendu en volume et les autres reconstructions ou rendus ne sont disponibles que pour les séries d'images qui remplissent les conditions suivantes :

- **Types de modalités :** CT, MR
- **Nombre d'images :** 10 ou plus
- **Orientation de l'image :** Les images doivent avoir la même orientation
- **Type d'image :** Monochrome
- **Profondeur des bits :** Pas d'images 8 bits

Vues disponibles


Les fenêtres de visualisation qui prennent en charge le rendu des volumes disposent d'un bouton **3D** (rendu des volumes) dans la barre d'outils, qui peut être activé dans n'importe laquelle des fenêtres disponibles :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- **2x2 :** Affiche une vue axiale, coronale, sagittale et 3D dans 4 fenêtres de visualisation.
- **Triplan :** Affiche une vue MPR axiale, coronale et sagittale dans 3 fenêtres de visualisation.
- Coronal
- Axial
- Sagittal
- 3D

Vous pouvez passer d'une vue à l'autre en utilisant le bouton 3D dans la barre d'outils ou le menu contextuel (clic droit de la souris) sous **Vue**.

Dans chacune des vues, les superpositions sont affichées comme dans la série originale.

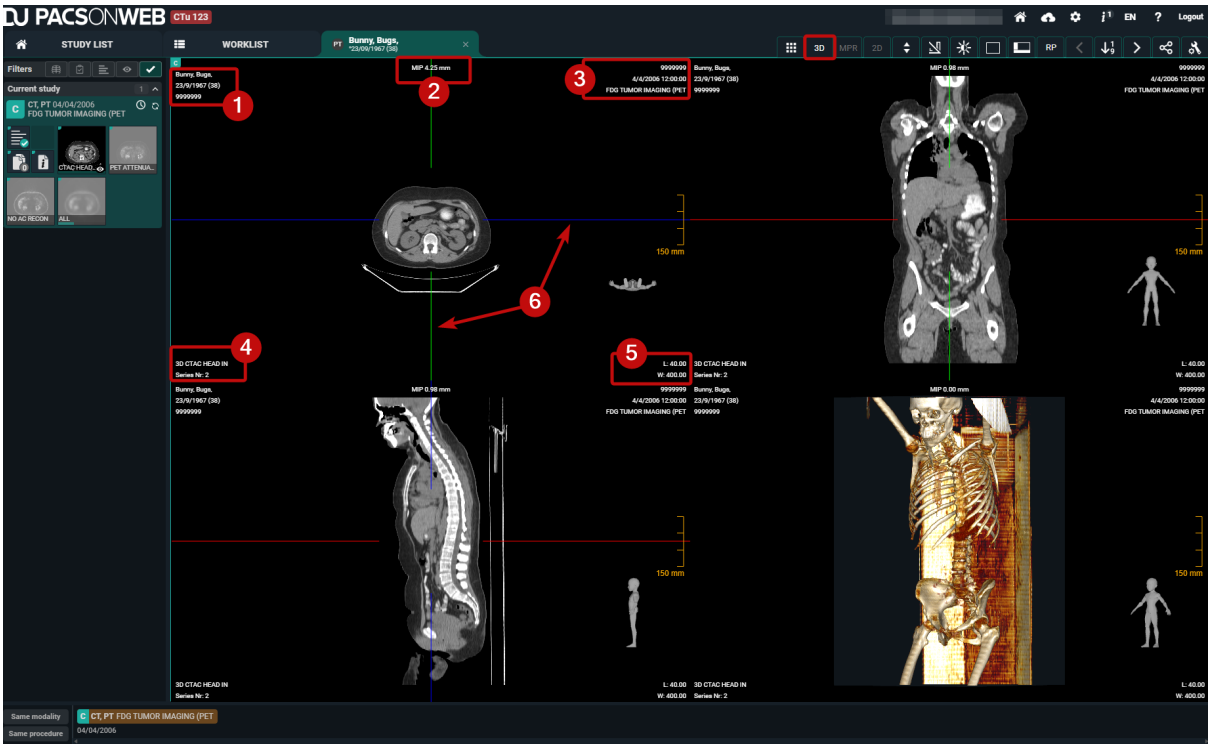

Numéro	Désignation	Description
1	Informations sur le patient	Informations sur le patient, telles que son nom, sa date de naissance et son IPP.
2	Mode de rendu MPR	Le mode de rendu MPR indique le mode de rendu et l'épaisseur de coupe qui s'appliquent à cette vue. Exemple : MIP 0,89 mm.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Désignation	Description
3	Information sur l'examen	Informations sur l'examen, telles que la procédure et la date de l'examen.
4	Informations sur la série	Informations sur la série, telles que le numéro de série. La vue initiale (sagittale, coronale, axiale ou 3D) est également affichée.
5	Informations sur l'image	Informations sur l'image, telles que la longueur et la largeur de l'image, le numéro de l'image dans la série et le niveau de zoom.
6	Lignes de référence	Dans chacun des plans, les intersections avec les autres plans MPR sont affichées sous forme de lignes de référence interactives colorées. Ces lignes de référence peuvent être utilisées pour faire pivoter les vues ou faire glisser le point central et, ce faisant, naviguer dans le volume.

Paramètres MPR

Pour les vues MPR, il est possible d'adapter l'épaisseur de coupe via **Paramètres MPR**. Vous pouvez trouver les paramètres MPR dans le menu **3D** ou en cliquant sur le mode de rendu MPR (voir le numéro 2 dans le tableau ci-dessus).

- Définir le mode de rendu :
  - **MIP** : Affiche la projection d'intensité maximale pour chaque pixel du volume dans la plage de l'épaisseur de coupe (pixels les plus clairs).
  - **MinIP** : Affiche la projection d'intensité minimale pour chaque pixel du volume dans la plage de l'épaisseur de coupe (pixels les plus sombres).
  - **Moyenne IP** : Affiche la projection d'intensité moyenne pour chaque pixel du volume dans la plage de l'épaisseur de coupe (moyenne des pixels).
- Adapter l'épaisseur de coupe :

  Lors de l'adaptation des vues, vous pouvez déplacer la glissière pour indiquer une **épaisseur de coupe cible**. Lors du glissement, les différentes vues MPR s'adaptent à une épaisseur de coupe la plus proche de l'épaisseur de coupe cible.

  Celles-ci peuvent varier selon l'épaisseur de coupe, de l'espacement des pixels et de l'espacement des coupes de la série originale, ainsi que de l'orientation de la vue spécifique.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Mode de rendu 3D

Vous pouvez adapter le mode 3D pour définir la manière dont le rendu tridimensionnel est effectué. Cette opération peut être effectuée via le menu **3D**.

- MIP
- Défaut CT
- Os
- Vaisseaux
- Crâne
- Poumon
- Doux

En outre, l'outil Niveau de la fenêtre peut aider à filtrer les pixels plus ou moins denses du volume dans le rendu.

Découpage 3D

Avec le découpage 3D, une boîte de référence peut être affichée dans les vues MPR où vous pouvez adapter l'étendue du volume qui doit être rendu. Les pixels situés en dehors des formes définies seront ignorés lors de la création du rendu 3D.

Outils et actions

Vous pouvez faire défiler, zoomer, faire un panoramique et adapter le niveau de la fenêtre sur les images de rendu de volume.

Pour les vues MPR (axiale, sagittale, coronale), le niveau de zoom sera toujours aligné et changera simultanément. La vue en 3D change séparément.

Actuellement, il n'est pas possible d'effectuer des mesures ou d'ajouter des annotations dans aucune des vues de rendu de volume. Il est conseillé d'effectuer ces opérations sur les images originales.

6.4 Écran d’affichage d’images

Les images (et le compte rendu) s'affichent ici.

Si une série compte plusieurs images, vous pouvez faire défiler les images à l’aide de la molette de défilement, des touches fléchées ou, après avoir sélectionné le défilement dans le menu, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris vers le haut et vers le bas.


Si vous avez activé le paramètre « Clic droit pour changer de fonction » dans Paramètres utilisateur (Page 107) > Mon compte (Page 109) , vous pouvez passer

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

d’une fonctionnalité à l’autre en cliquant brièvement avec le bouton droit de la souris :

- Niveau de la fenêtre
- Défilement
- Stepless zoom
- Panoramique

Si vous gardez enfoncé le bouton droit de la souris pendant 1 seconde ou plus, le menu contextuel détaillé va s'afficher.

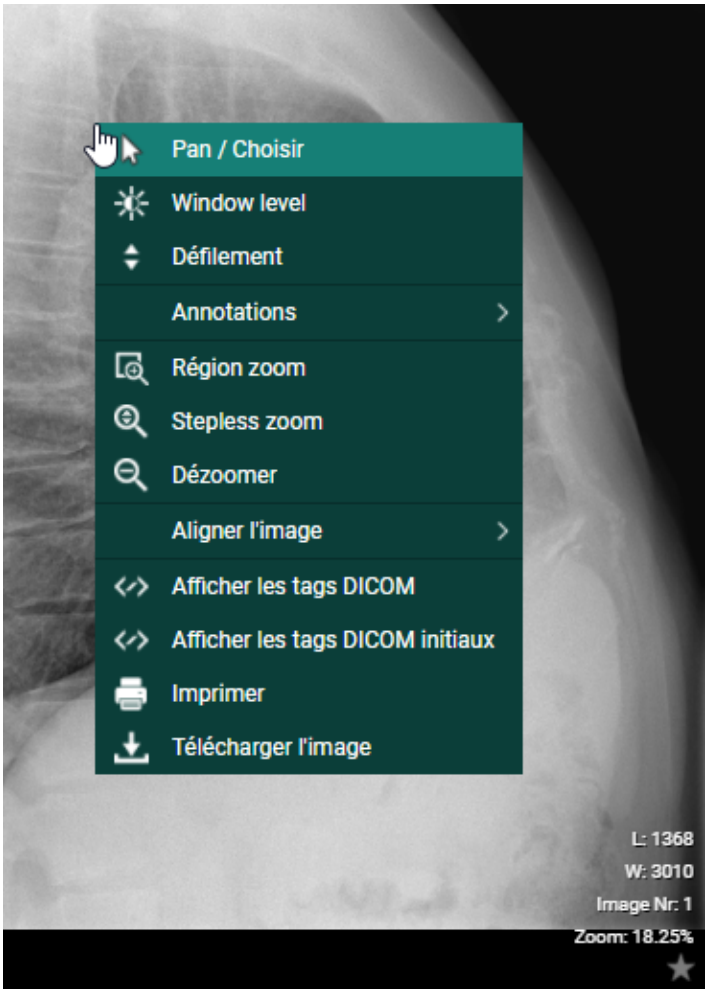

Indicateurs de référence d’orientation


Dans la barre d’outils supérieure, vous pouvez activer les Superpositions dans le menu Éléments visibles afin d’afficher des informations utiles sur le patient, l’examen, les images et les indicateurs de référence d’orientation sur les images.

Les lettres suivantes sont utilisées pour indiquer l’orientation référentielle :

- T : Tête

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- P : Pieds
- A : Antérieur
- P : Postérieur
- G : Gauche
- D : Droite

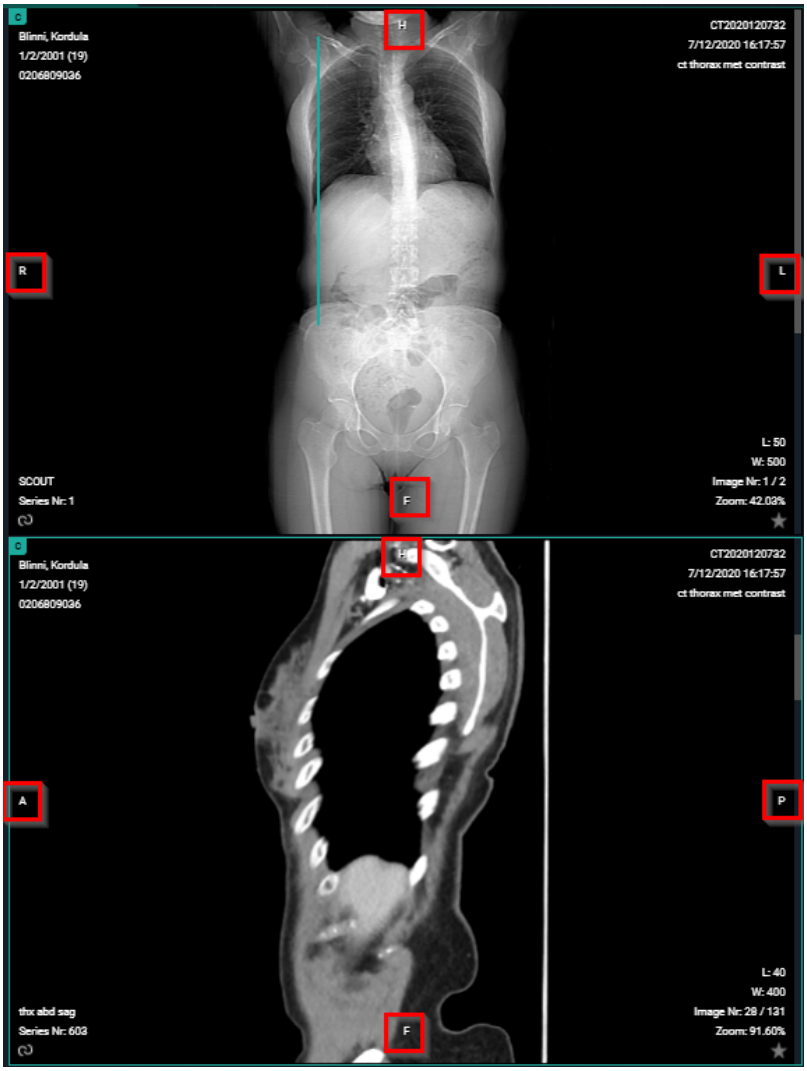

Règle d’échelle


La règle d’échelle est affichée en bas de chaque fenêtre de visualisation, pour indiquer l’échelle de la largeur de l’image.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Important !

Si l'espacement des pixels pour les lignes et les colonnes est différent, l'échelle ne s'applique qu'aux distances horizontales.

De même, lors de la rotation de l'image, l'échelle s'applique toujours aux distances horizontales de l'image originale.

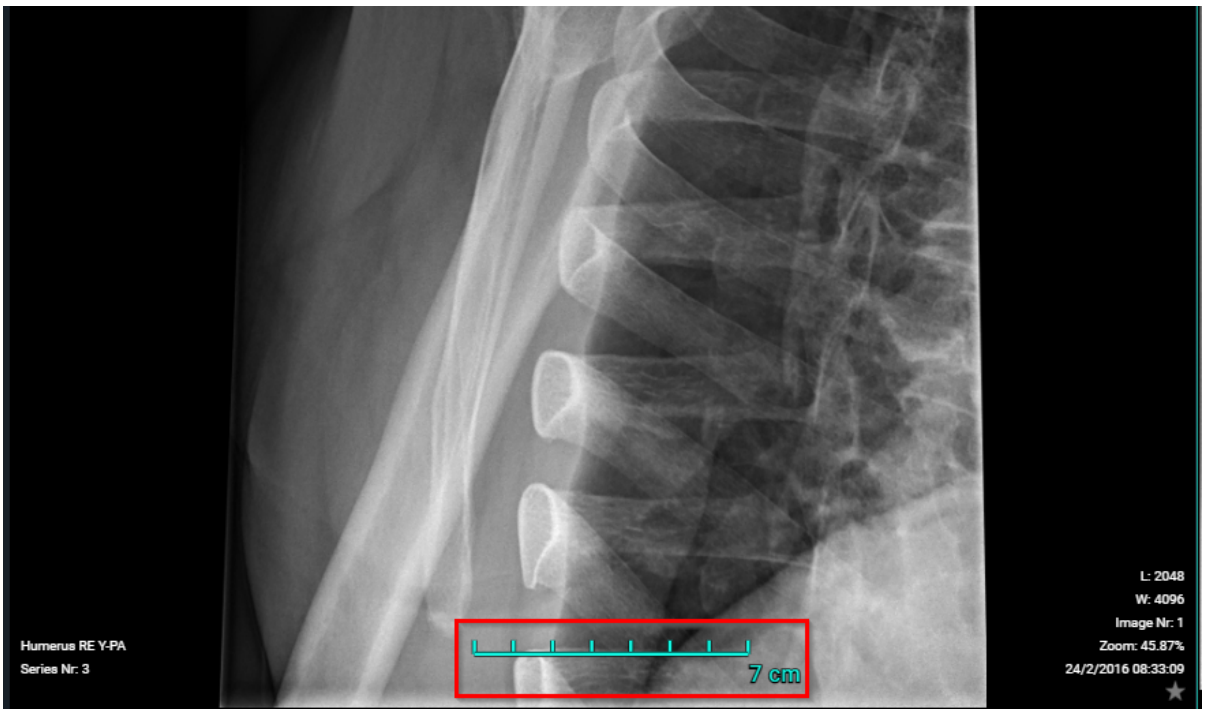

Actions par défaut de la souris :

Les actions par défaut de la souris sont énumérées ci-dessous et dépendent du type de modalité.

Pour les deux actions (bouton gauche et bouton central de la souris), cela signifie cliquer sur le bouton, le maintenir enfoncé et déplacer la souris.

Bouton de la souris	Modalités	Action
Bouton gauche	CT/MR/PT	Défilement
Bouton gauche	Autre	Panoramique
Bouton central de la souris	Autre	Défilement

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Remarque :

« Autre » signifie toute modalité qui n'est pas spécifiée comme une action.

Conseil :

Les actions de la souris peuvent être modifiées pour chaque type de modalité selon les préférences personnelles (voir Préférences (Page 112)).

Outils d'édition d'image :

À l'aide des outils d'édition d'image (voir Barre d'outils (Page 232)), vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière sur l'image, faire pivoter l'image, prendre des mesures, modifier le contraste, etc.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris pour obtenir un menu contenant les commandes les plus souvent utilisées :

- **Panoramique/Sélectionner** : Utilisez Panoramique pour faire glisser une image zoomée (Voir Contrôle d'image (Page 234))
- **Niveau de la fenêtre** : Utilisez Niveau de la fenêtre pour modifier la luminosité et le contraste de l'image sélectionnée (Voir Autres outils d'édition d'image (Page 250))
- **Défilement** : Permet de faire défiler les images
- **Annotations** : Outils permettant de faire des annotations sur l'image sélectionnée (Voir Annotations (Page 240))
  - **Règle**
  - **Ligne**
  - **Cercle**
  - **Ligne**
  - **Angle**
  - **Angle de Cobb**
  - **Angle de bord centre**
  - **Hauteur verticale**
  - **ROI – rectangle**
  - **ROI – ellipse**
  - **ROI – polygone**
  - **Flèche**
  - **Perte de longueur**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

  - **Ratio de longueur**
  - **Texte**
  - **Étiquettes de colonne vertébrale**
- **Région zoom**, **Stepless zoom**, **Zoom arrière** : Outils permettant d'effectuer un zoom avant sur l'image sélectionnée (Voir Contrôle d'image (Page 234))
- **Aligner l'image**
  - **Aligner à gauche**
  - **Aligner en haut**
  - **Aligner à droite**
  - **Aligner en bas**
  - **Aligner au centre**
- **Afficher les tags DICOM** : Afficher les tags DICOM de l'image sélectionnée
- **Afficher les tags DICOM initiaux** : Afficher les tags DICOM initiaux de l'image sélectionnée (disponible uniquement pour les administrateurs de l'examen)
- **Imprimer** : Imprimer l'image sélectionnée
- **Télécharger l'image** : Télécharger l'image sélectionnée au format PNG

Pour voir une image en plein écran, double-cliquez sur l'image. Double-cliquez une nouvelle fois pour revenir à l'affichage initial.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Conseil :

À l'écran d'affichage, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants :

CTRL + Bouton gauche de la souris enfoncée + faire glisser l'image vers un autre viewport : dupliquer l'image dans un deuxième viewport

SHIFT + Bouton gauche de la souris enfoncée + faire glisser l'image vers un autre viewport : échanger les images des deux viewports

SHIFT + scroll avant : zoomer

SHIFT + scroll arrière : dézoomer

CTRL + défilement : tiling dans le viewport sélectionné

Bouton gauche de la souris enfoncé + défilement : Sélection rapide entre les fonctionnalités suivantes :

- Niveau de la fenêtre
- Stepless zoom
- Panoramique

Touche ÉCHAP : rétablir l'action par défaut

UNIQUEMENT pour les séries contenant plusieurs images :

Maintenir la molette de la souris enfoncée + déplacer la souris de haut en bas : faire défiler les séries.

Important !

La vitesse de défilement est adaptative. En fonction de la vitesse utilisée pour déplacer la souris en avant et en arrière, le défilement sera plus ou moins rapide (non linéaire). La même remarque vaut pour le défilement au sein d'une série sur un appareil mobile (tablette ou smartphone).

Anomalies :

Si une anomalie a été enregistrée pour un examen par rapport à l'examen sur le système PACS local, une notification s'affiche en haut de la page.

Lorsque vous passez le curseur sur la notification, une étiquette contenant une explication plus détaillée sur l'anomalie s'affiche.

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur ayant des droits d'administration sur l'examen, il est possible de cliquer sur l'étiquette pour accéder directement à la section « Anomalies » de la page d'administration (Anomalies (Page 288)).

Rétention d'image :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Lorsque vous maintenez le curseur sur l'icône d'horloge, un pop-up s'affiche avec le temps de rétention des différents types d'images.

Association de séries :


Si deux fenêtres affichent des séries d'images avec la même position de table, les séries sont reliées automatiquement.

Si deux séries sont liées, on peut le remarquer aux icônes de chaîne des deux séries en bas à gauche et le défilement des deux séries se fait simultanément.

Vous pouvez dissocier les séries en cliquant sur les icônes de chaîne et ainsi défiler dans les séries séparément.

Important !

Il n'est pas possible de relier des séries automatiquement ou manuellement si l'une des séries est un MPR.

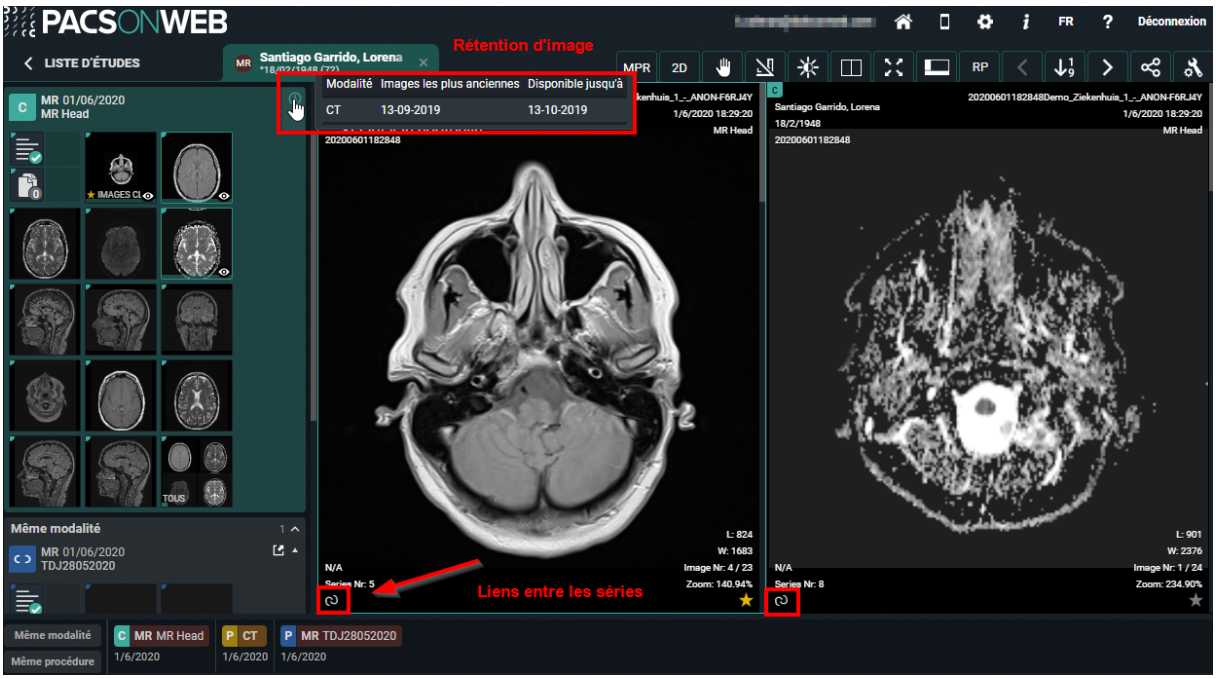

Lorsque la balise DICOM **(0020,0032) position de l'image (patient)** est manquante, vous ne pourrez pas lier cette série.

L'icône « lien » est désactivée et l'info-bulle suivante est fournie : « Aucune information sur la position de l'image n'est fournie, aucun lien n'est possible. »

Enregistrement du volume :

L'enregistrement du volume constitue le lien anatomique automatique entre **deux examens.**

Prérequis :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- L'enregistrement est possible uniquement entre deux examens
- Uniquement pour tomodensitométrie/résonance magnétique/tomographie par émission monophotonique/tomographie par émission de positons
- Les deux volumes doivent être disponibles dans le cloud
- Nombre minimum de 10 coupes
- Espacement max. de 10 mm entre les coupes
- Toutes les coupes doivent être dans le même sens

Flux de travail :

Cliquez sur l'icône enregistrement (l'icône de baguette affichée dans la capture d'écran) de la série A et la série B.

L'icône est visible uniquement si la série est une série volumétrique répondant aux exigences.



Une fois que vous aurez cliqué sur les deux icônes, DU POW débutera l'Enregistrement du volume. Le message Toast suivant s'affiche pour indiquer que DU POW exécute l'enregistrement : « Création de l'enregistrement du volume… »

Une fois l'enregistrement terminé : « L'enregistrement du volume est prêt. »

Une fois l'enregistrement terminé, toutes les séries concernées par l'enregistrement seront désormais accompagnées d'une icône grise en lettre R.



Le fait de cliquer sur l'icône R **supprimera** l'enregistrement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Réglage du lien

Si l'enregistrement n'est pas parfaitement correct, l'utilisateur peut facilement régler l'enregistrement sur base de la coupe correcte de la série.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche ALT pour faire défiler la série nécessitant un réglage. Faites défiler jusqu'à l'emplacement correct et relâchez la touche ALT.

Lorsque vous aurez relâché la touche ALT, la série défilera à nouveau en synchronisation.

AVERTISSEMENT :

L'enregistrement du volume ne sera pas parfaitement correct dans tous les scénarios. L'utilisateur reste responsable de vérifier le résultat de l'outil et d'apporter d'éventuelles corrections.

Image clé :

Les administrateurs d'un examen sur DeepUnity PACSonWEB ont la possibilité de créer une nouvelle série avec des « images clés ».

Vous pouvez ajouter une image à cette série en la rendant visible dans la visionneuse et en cliquant sur l'icône étoile dans le coin inférieur droit de l'image. Elle virera alors au jaune.

Lors du rechargement ou de la réouverture de l'examen, les séries nouvellement créées sur les images clés seront disponibles dans le sélecteur de série pour tous ceux qui ont accès à l'examen.

Vous pouvez supprimer les images qui ont été marquées comme images clés de la série en désélectionnant l'icône étoile. Les images sur lesquelles des annotations sont mises à la disposition du public sont automatiquement marquées comme images clés.

Vous pouvez ouvrir une image de la série d'images principale dans la série originale en cliquant sur le en bas de page.

Modification du nombre d'images dans l'examen :

Lorsqu'un examen a été ouvert et qu'une modification est intervenue en arrière-plan (ajout de nouvelles images/suppression d'images), l'utilisateur est informé par


- un message Toast, affiché en bas à droite de l'écran
- une indication dans le sélecteur de série

Tous deux offrent la possibilité de recharger l'examen pour afficher la situation actualisée.

Message Toast : « Les images ont été modifiées pour cet examen. Veuillez recharger l'examen. **RECHARGER L'EXAMEN** »

Indication dans le sélecteur de série :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

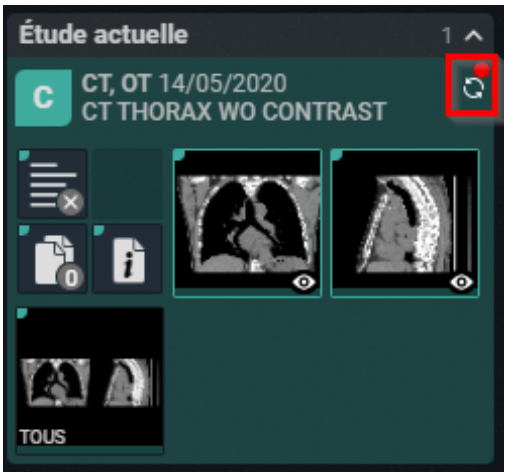

6.4.1 Marqueurs CAD

DeepUnity PACSonWEB permet d'afficher les annotations CAD de deux fabricants différents dans la visionneuse DeepUnity PACSonWEB : iCAD et ScreenPoint Medical.

Dans le cas où un examen contient un compte-rendu structuré CAD, il est possible d'afficher les marqueurs CAD dans l'écran d'affichage d'images.

Afin d'avoir accès aux marqueurs CAD, l'utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour modifier le compte-rendu.

L'examen s'ouvre par défaut avec les marqueurs cachés. Pour les rendre visibles, cliquez sur la description des marqueurs CAD, affichée en haut au centre de l'image.

Dans la superposition d'image, le nombre de résultats iCAD est affiché.



©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


Le score CAD Case, le nombre de densités et de calcifications sont affichés dans la superposition.



Outils de compte-rendu CAD

Lorsque les annotations iCAD sont affichées, les outils de compte-rendu sont également affichés.

Ces outils de compte-rendu vous permettent de basculer individuellement la visibilité des résultats de densité ou des résultats d'amas de calcifications.

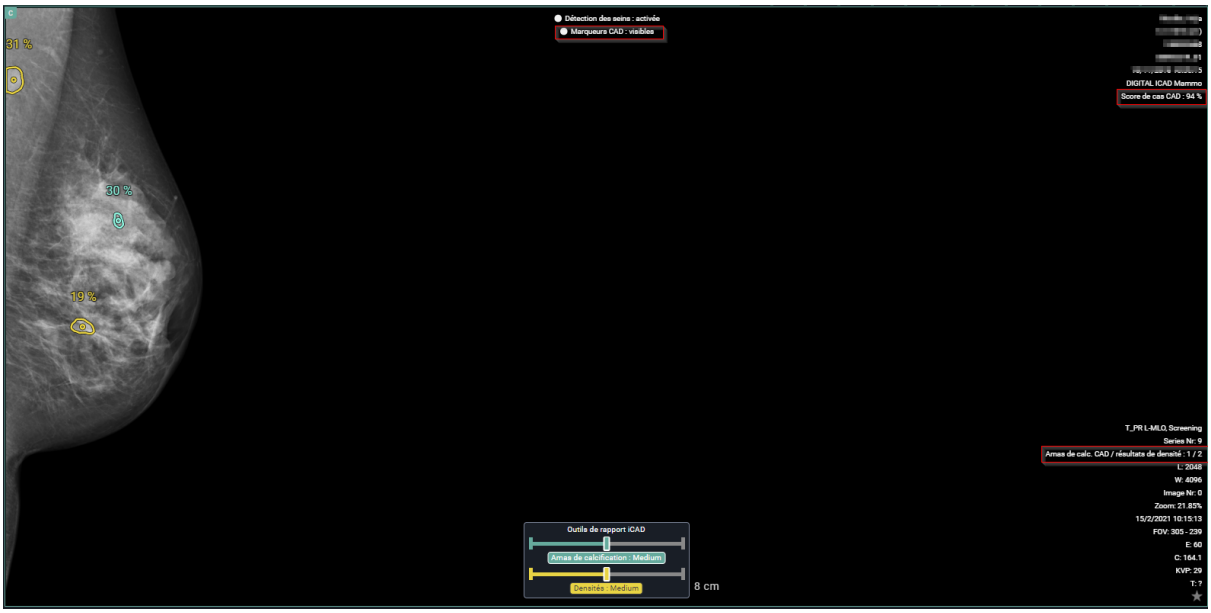

6.5 Affichage du compte-rendu

L'affichage du compte-rendu fait partie de la page de l'examen. En fonction de votre rôle et de vos autorisations, vous pouvez consulter, créer ou modifier des comptes-


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

rendus. Par défaut, le compte-rendu sera affiché dans le premier port de visualisation (si un compte-rendu est disponible pour l'examen).

Conseil :

En tant que patient(e) vous avez uniquement accès au compte-rendu si le service de radiologie émetteur l'autorise.

Aperçu

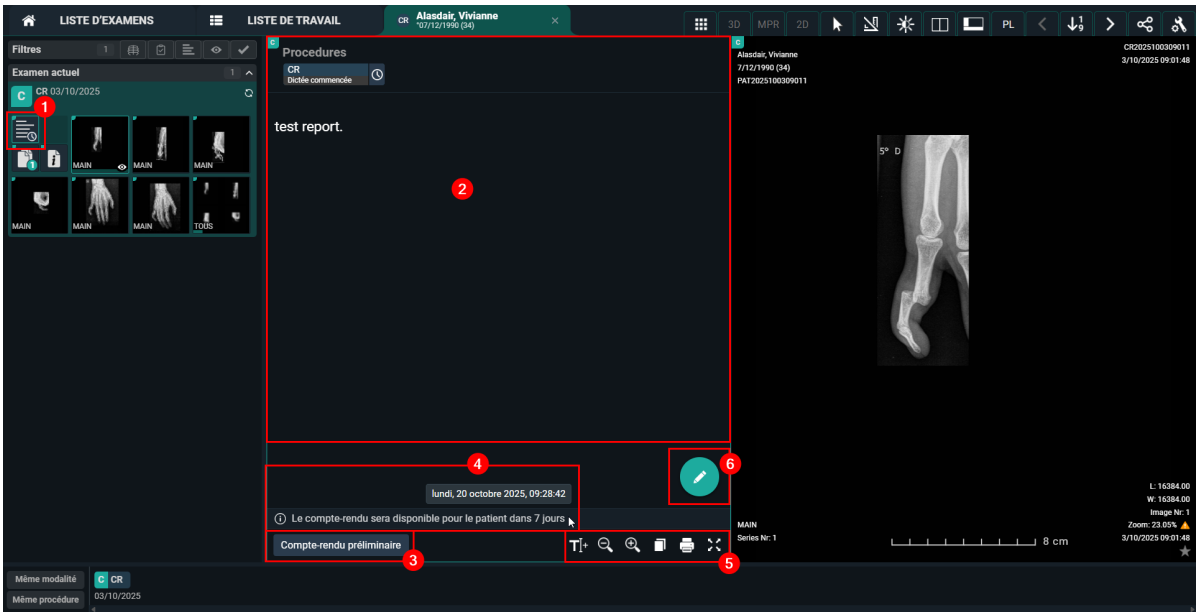

Numéro	Description
1	L'icône du compte-rendu. Cliquez dessus pour ouvrir l'affichage du compte-rendu.
2	La fenêtre du compte-rendu.
3	Le statut du compte-rendu Les statuts de compte-rendu possibles sont les suivants : **Aucun compte-rendu**, **Brouillon de compte-rendu**, **Compte-rendu préliminaire**, **Compte-rendu validé**, **Addendum validé**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Numéro	Description
4	**Important !** Un service de radiologie peut choisir d'appliquer un délai de x jours avant que le compte-rendu ne soit rendu accessible au patient. Aussi longtemps que ce délai n'a pas expiré, un message s'affiche pour signaler que le compte-rendu n'est pas disponible pour le patient. Si vous êtes connecté avec un compte de médecin, il est affiché en bas du compte-rendu quand le compte-rendu sera disponible pour le patient (approximativement). Survolez le message pour afficher l'heure et la date exactes auxquelles le compte-rendu sera mis à la disposition du patient.
5	Passer en plein écran, zoomer, copier dans le presse-papiers, imprimer le compte-rendu ou créer un nouveau bloc de texte.
6	Cliquez pour créer ou modifier le compte-rendu.


Remarque :

Si le compte-rendu a été envoyé au format PDF, vous ne pouvez pas le modifier, mais pouvez effectuer un zoom avant, l'imprimer, le télécharger... en utilisant les boutons de la barre d'outils du haut.

Création et/ou modification d'un compte-rendu

1. Pour créer ou modifier un compte-rendu, cliquez sur l'icône du crayon.


   Si le paramètre de rich reporting est activé pour vous, un éditeur de texte complet est disponible.

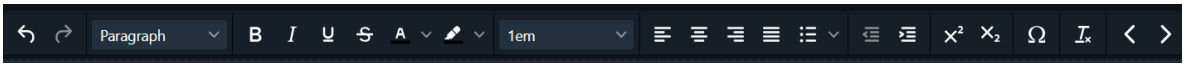

2. Si un compte-rendu est en mode édition, l'accès à celui-ci est bloqué aux autres utilisateurs afin d'éviter que deux utilisateurs travaillent simultanément sur le même compte-rendu. Un compte-rendu bloqué est indiqué par une icône de verrouillage dans le sélecteur de série et la fenêtre de compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Si vous cliquez sur l'icône de verrouillage, des informations supplémentaires sur la personne qui modifie le compte-rendu à ce moment-là s'affichent.

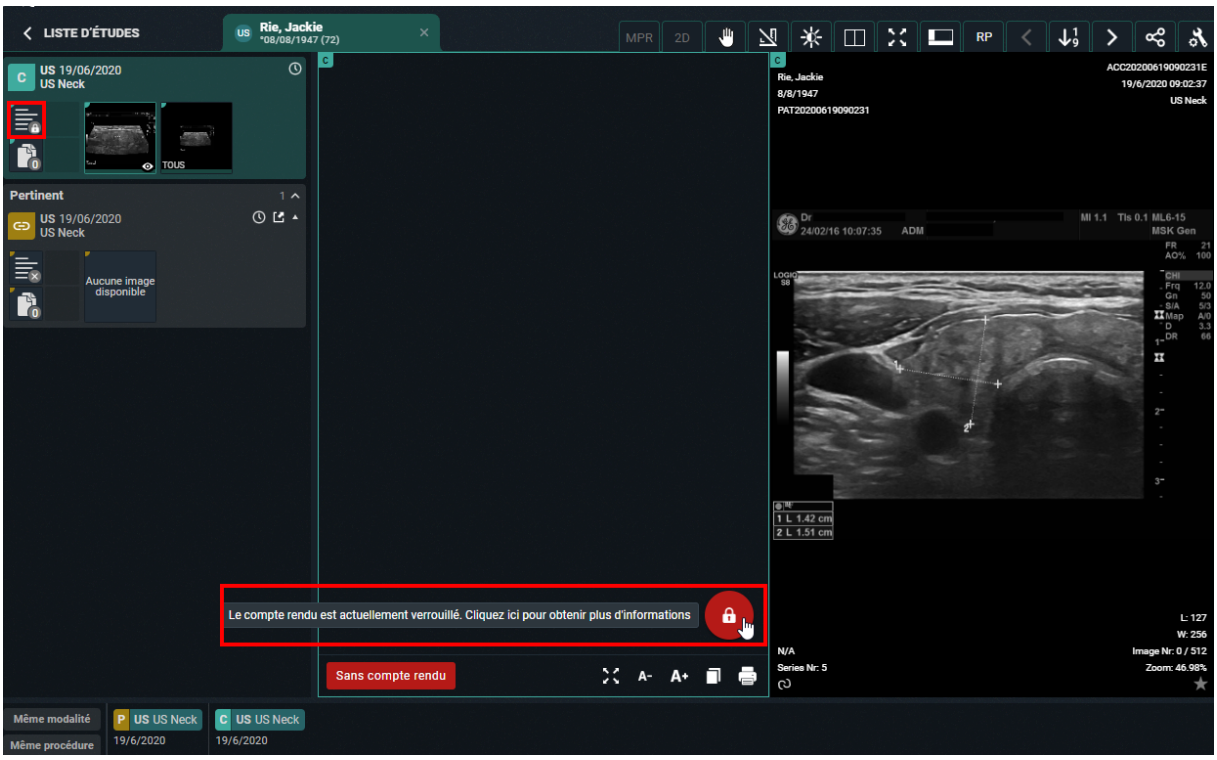

3. Une fois le compte-rendu terminé, il doit être vérifié et enregistré à partir de la fenêtre du navigateur. En fonction de votre rôle, de vos autorisations et de votre service de radiologie, vous avez différentes options pour enregistrer le compte-rendu ou l'envoyer pour correction. Pour toute autre question, veuillez contacter le responsable interne DeepUnity PACSonWEB ou DH Healthcare GmbH.

Option de sauvegarde	Action	Rôle
Enregistrer	Sauvegarde le compte-rendu sans en modifier l'état.	Transcripteur
Envoyer pour approbation	Envoie le compte-rendu au radiologue et met l'état de l'examen sur **À valider.**	Transcripteur
Enregistrer le brouillon	Crée une version de brouillon qui peut être modifiée ultérieurement. Si un brouillon de compte-rendu est modifié et effacé, il sera marqué comme **Aucun compte-rendu**.	Résident/ superviseur

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Option de sauvegarde	Action	Rôle
	Important ! Un brouillon de compte-rendu est uniquement visible par les utilisateurs qui sont autorisés à établir un compte-rendu contrairement aux utilisateurs qui ne disposent que d'un droit de lecture seule.	
Enregistrer provisoirement	Crée une version provisoire qui peut être modifiée ultérieurement. Si un compte-rendu a été enregistré en tant que Provisoire, il n'est pas possible de revenir au statut **Brouillon de compte-rendu** ou **Aucun compte-rendu**.	Résident/ superviseur
Envoyer pour révision	Affecte le compte-rendu à un superviseur pour examen et définit le statut de l'examen comme étant **En attente d'une deuxième validation**.	Résident/ superviseur
Envoyer pour correction	Définit le statut de l'examen comme étant **Correction du compte-rendu en attente** afin qu'un transcripteur puisse travailler dessus.	Résident/ superviseur
Retour à l'auteur	Renvoie le compte-rendu au résident et met l'état de l'examen sur **À valider**.	Superviseur
Enregistrer et valider	Valide le compte-rendu. Si un compte-rendu a été enregistré en tant que Validé, il n'est pas possible de revenir au statut **Brouillon de compte-rendu** ou **Aucun compte-rendu**. En fonction de la configuration avancée de votre service de radiologie, il se peut qu'il ne soit pas possible de modifier un compte-rendu qui a été marqué comme validé.	Résident/ superviseur


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Notifications dans DeepUnity PACSonWEB


7

Les notifications générales concernant DeepUnity PACSonWEB sont indiquées par l'icône d'information *i* en haut à droite de chaque page.

- L'icône d'information affiche en rouge le nombre de notifications non lues 
  - Après avoir consulté les notifications, l'icône d'information est toujours disponible, mais aucune notification n'est affichée.
- Pour afficher les notifications dans une liste déroulante, passez sur l'icône.

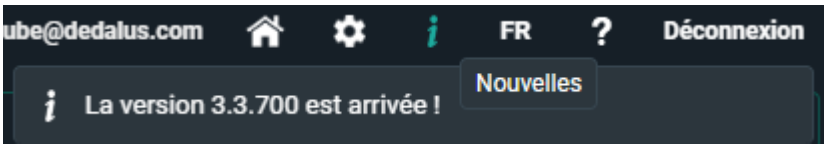

  - Cliquez sur une notification dans la liste déroulante pour afficher une page séparée avec toutes les notifications disponibles.

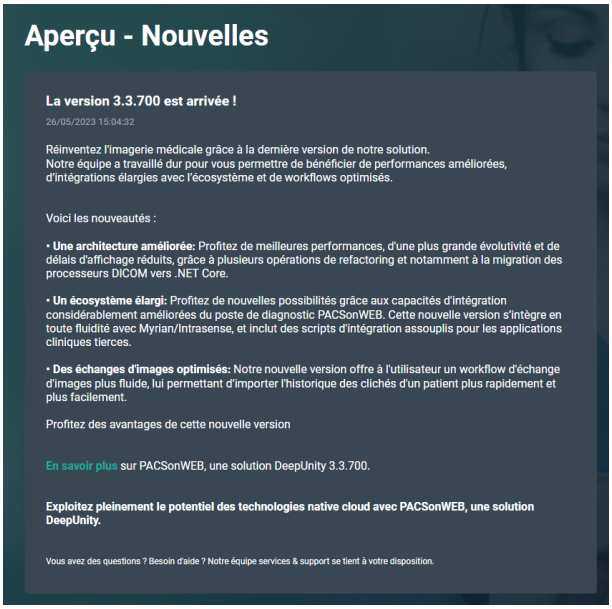

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Home Reading

8

Important !

L'application peut être utilisée pour dicter des comptes-rendus dans DeepUnity PACSonWEB mais n'est pas un dispositif médical en soi et ne porte donc pas de marquage CE.

Cette fonction est facultative dans DeepUnity PACSonWEB. Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour plus d'informations.

Remarque :

- L'application d'authentification a été fusionnée avec l'application Home Reading.
- L'application Home Reading est toujours disponible séparément.

Télécharger l'app Home Reading

Si votre appareil ne répond pas aux spécifications techniques, il ne sera pas possible d'installer l'application.

iOS

Available on the App Store

Dans l'Apple Store, cherchez « DeepUnity PACSonWEB » et cliquez sur « Installer ».

Exigence : iOS 10 ou supérieur

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Android

Dans Google Play Store, cherchez « DeepUnity PACSonWEB HomeReading » et cliquez sur « Installer ».

Spécifications : Android 4.4 - 8.0 (x86, x64, ARM, ARMv7-A, ARM64v8-A,)

DeepUnity PACSonWEB Home Reading offre au radiologue un moyen simple de produire un compte-rendu d'examen (provisoire) en dehors des murs d'un hôpital.

Le médecin peut relier un smartphone à une session DeepUnity PACSonWEB et dicter un compte-rendu via l'application Home Reading avec reconnaissance vocale intégrée, tout en examinant les images sur un ordinateur ou une tablette.


Le texte dicté sur l'application Home Reading est synchronisé en temps réel avec le compte-rendu sur la page de l'examen dans la session du navigateur.


Après vérification, le médecin peut enregistrer le compte-rendu en tant que Projet, Provisoire ou Validé à partir du navigateur.

Si le SIR de l'hôpital prend en charge l'ORU entrant, un message peut être envoyé depuis DeepUnity PACSonWEB pour mettre à jour les systèmes d'information internes.

Selon la configuration souhaitée, le message sera envoyé en fonction du statut associé : Projet, Provisoire, Validé.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

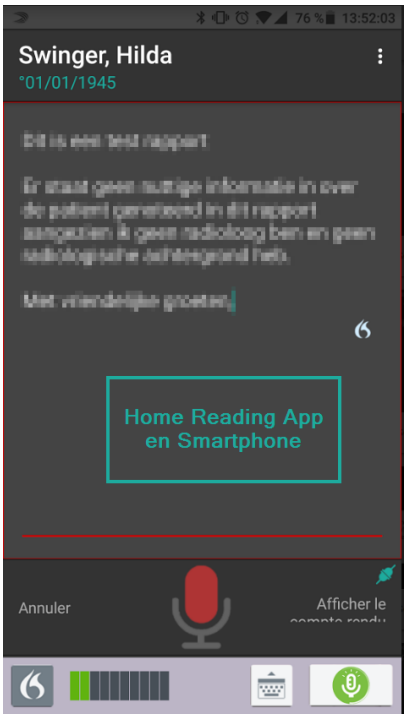

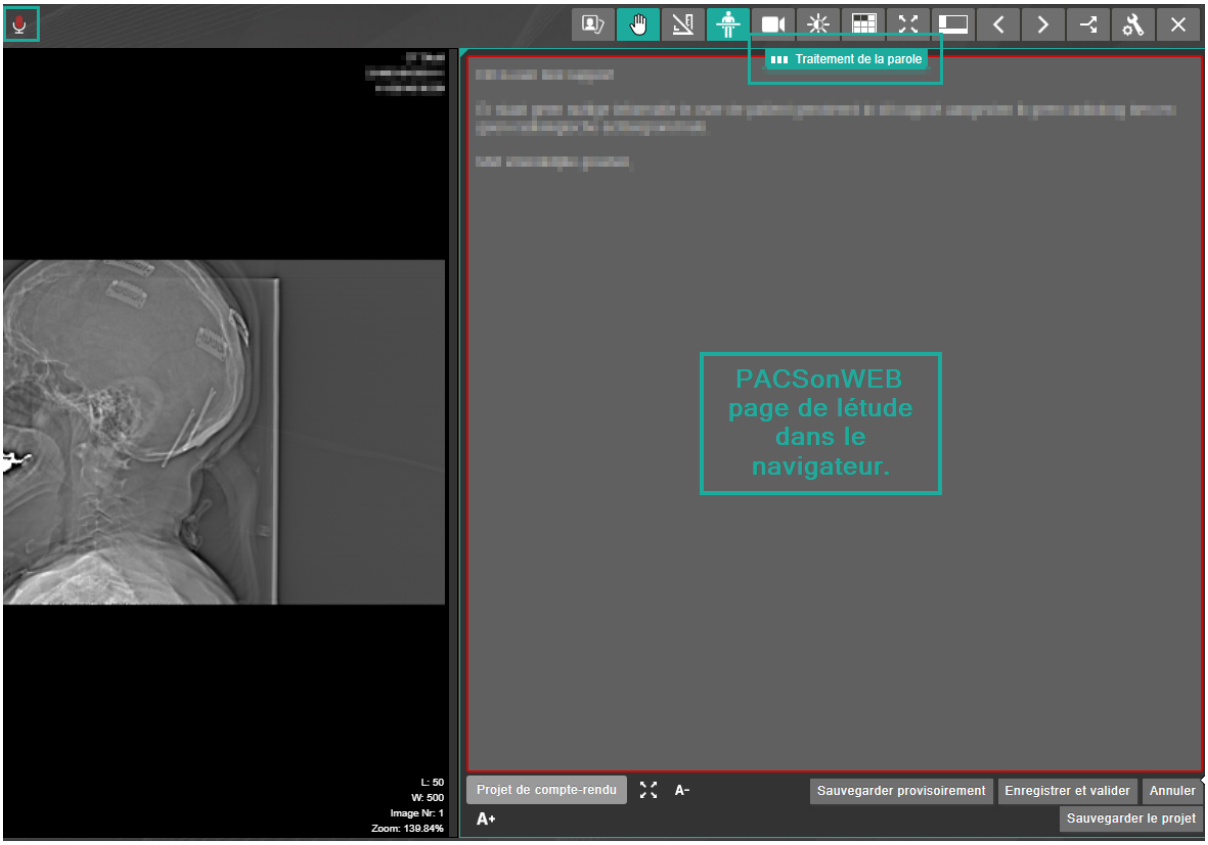

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

8.1 Appariement avec l’application Home Reading


Pour pouvoir établir un compte-rendu via Home Reading, il faut créer un lien entre la session du navigateur de DeepUnity PACSonWEB depuis le PC ou la tablette et l'application Home Reading sur le Smartphone de l'utilisateur.

Pour créer ce lien, vous devez d'abord vous connecter sur DeepUnity PACSonWEB depuis votre PC ou votre tablette avec votre compte.

Dans le cas où Home Reading a été activé pour votre compte DeepUnity PACSonWEB, l’icône Home Reading  sera disponible dans la barre d’outils supérieure.

En cliquant sur cette icône, un code QR s'affiche pour connecter le Smartphone.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

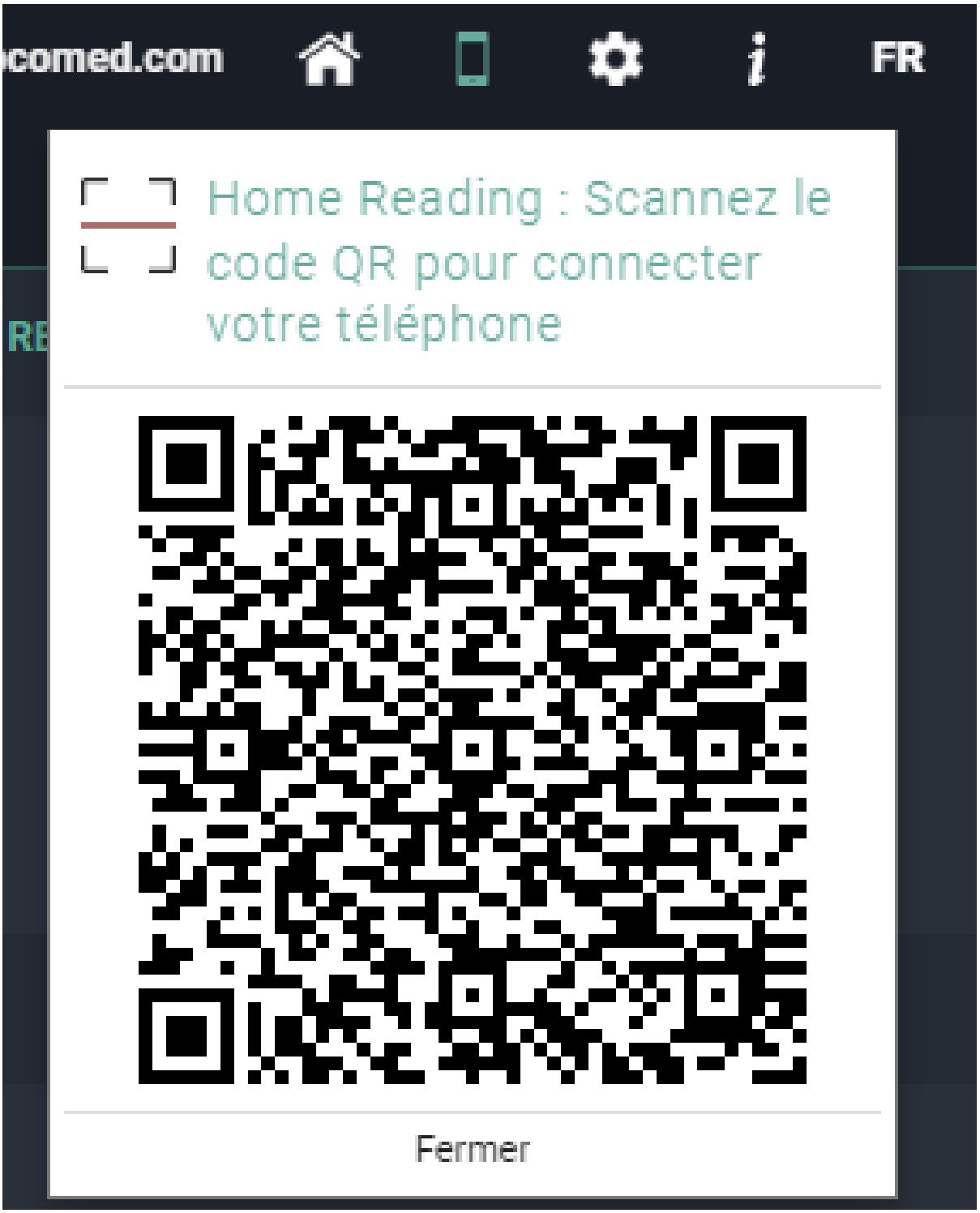

Démarrer l'application Home Reading sur le Smartphone et appuyer sur « Scanner le code QR ».

Lorsque vous scannez le code QR, l'application envoie une demande de connexion avec un code PIN temporaire vers le navigateur.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

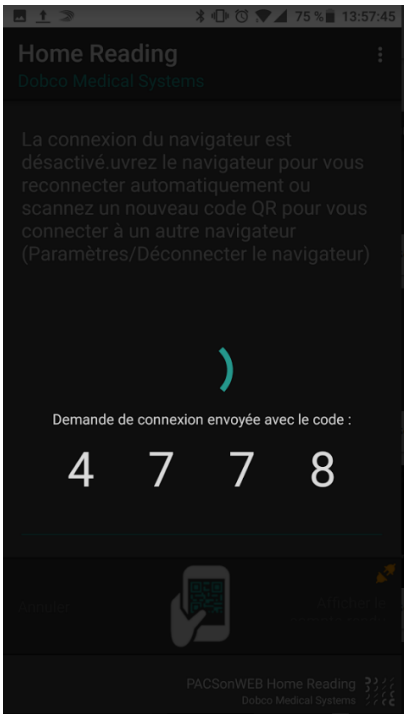

Dans la session du navigateur, vous verrez s'afficher un message concernant la demande de connexion dans laquelle l'appareil utilisé est précisé (type, OS et nom de l'appareil), ainsi que le code PIN.

Si le code PIN correspond au code, qui s'affiche sur le Smartphone, vous devez cliquer sur « Accepter » dans les 30 secondes pour terminer la connexion.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

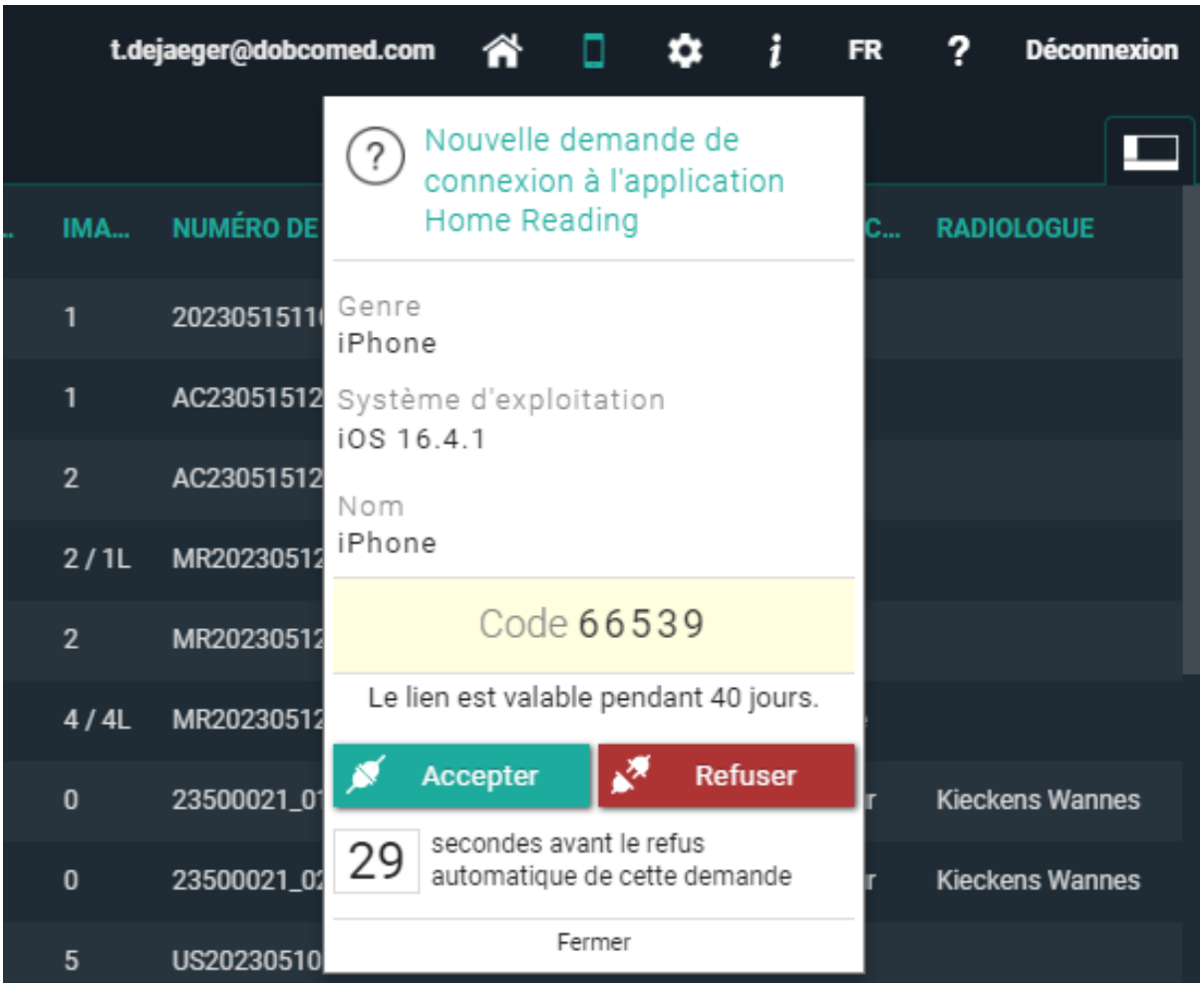

Si la connexion est refusée ou n'a pas été acceptée dans le délai imparti, vous verrez apparaître le message suivant sur le Smartphone:


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



Si la connexion a été terminée avec succès, vous verrez apparaître le message suivant dans l'application et le navigateur :



©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

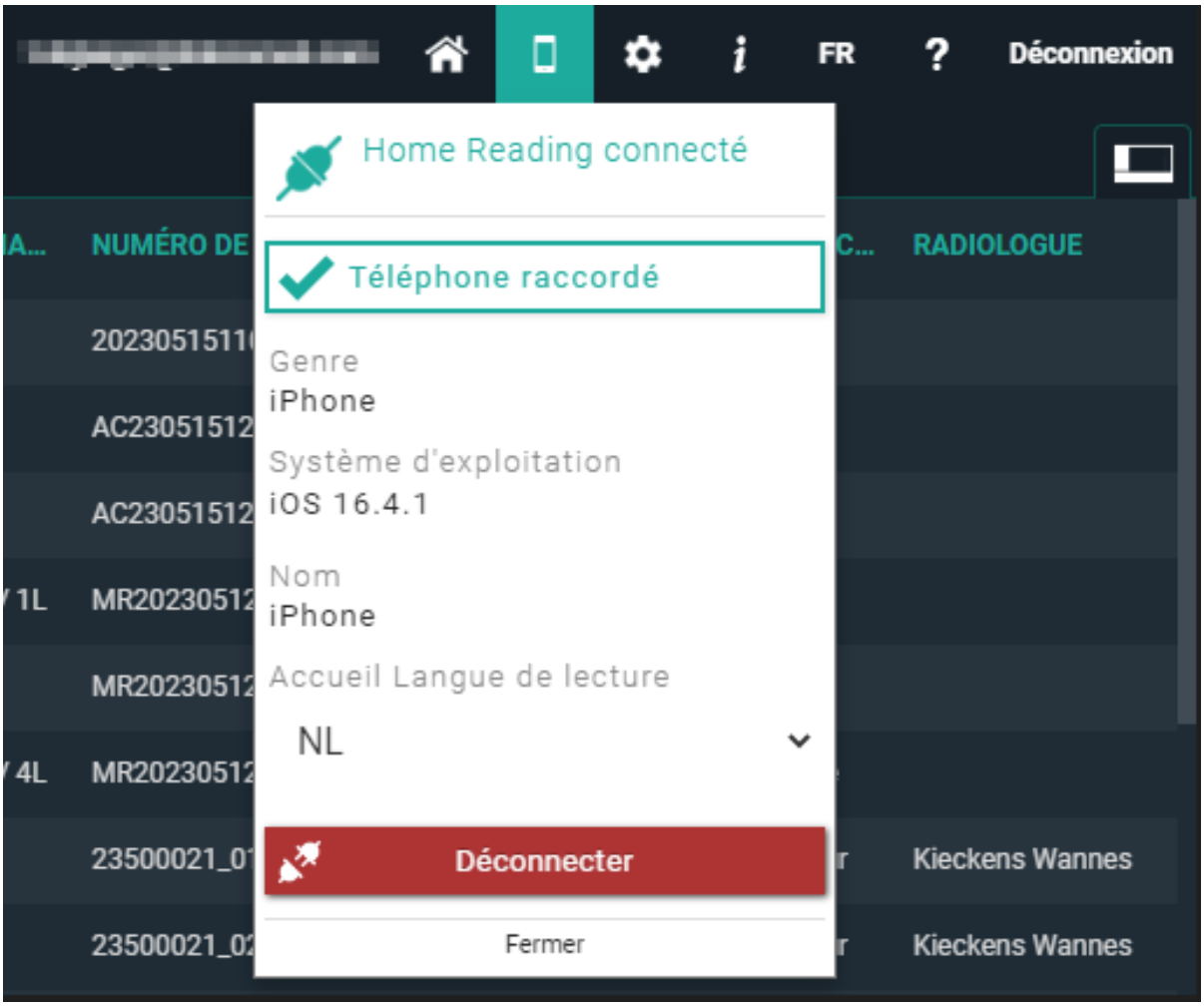

Le statut de la connexion est indiqué par la couleur de l'icône de Home Reading:

- Blanc/noir : le navigateur n'est pas connecté au Smartphone.
- Orange : le navigateur est connecté à un Smartphone, mais l'appareil ne répond pas.
- Vert : le navigateur est connecté à un Smartphone et peut être utilisé pour commencer à dicter.

Remarque :

L'appariement ('pairing') est valable, par défaut, pendant 40 jours. Après cette période, l'appariement peut à nouveau être exécuté.

8.2 Créer un compte-rendu via Home Reading

Si le Smartphone a été connecté avec succès au navigateur, l'application affichera le message suivant :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

« Ouvrez d'abord un patient dans DeepUnity PACSonWEB avant de commencer à dicter »




Naviguez dans la session du navigateur sur l'ordinateur ou la tablette jusqu'à l'examen qui vous intéresse.

À des fins de vérification, le nom et la date de naissance du patient s'affichent sur le smartphone.

Dans cet exemple, un examen de la patiente Swinger, Hilda, a été ouvert sur la session de navigation liée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

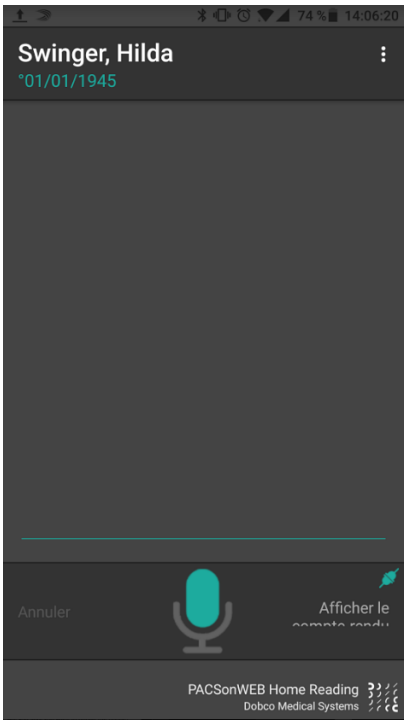


Appuyez sur l'icône micro dans l'application Home Reading ou dans le navigateur pour commencer à créer un compte-rendu grâce à la reconnaissance vocale.

Conseil :

Si le compte-rendu n'est pas encore affiché dans le navigateur, cliquez sur « Afficher le compte-rendu » dans l'application ou ouvrez le compte-rendu dans le navigateur depuis le sélecteur de séries.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

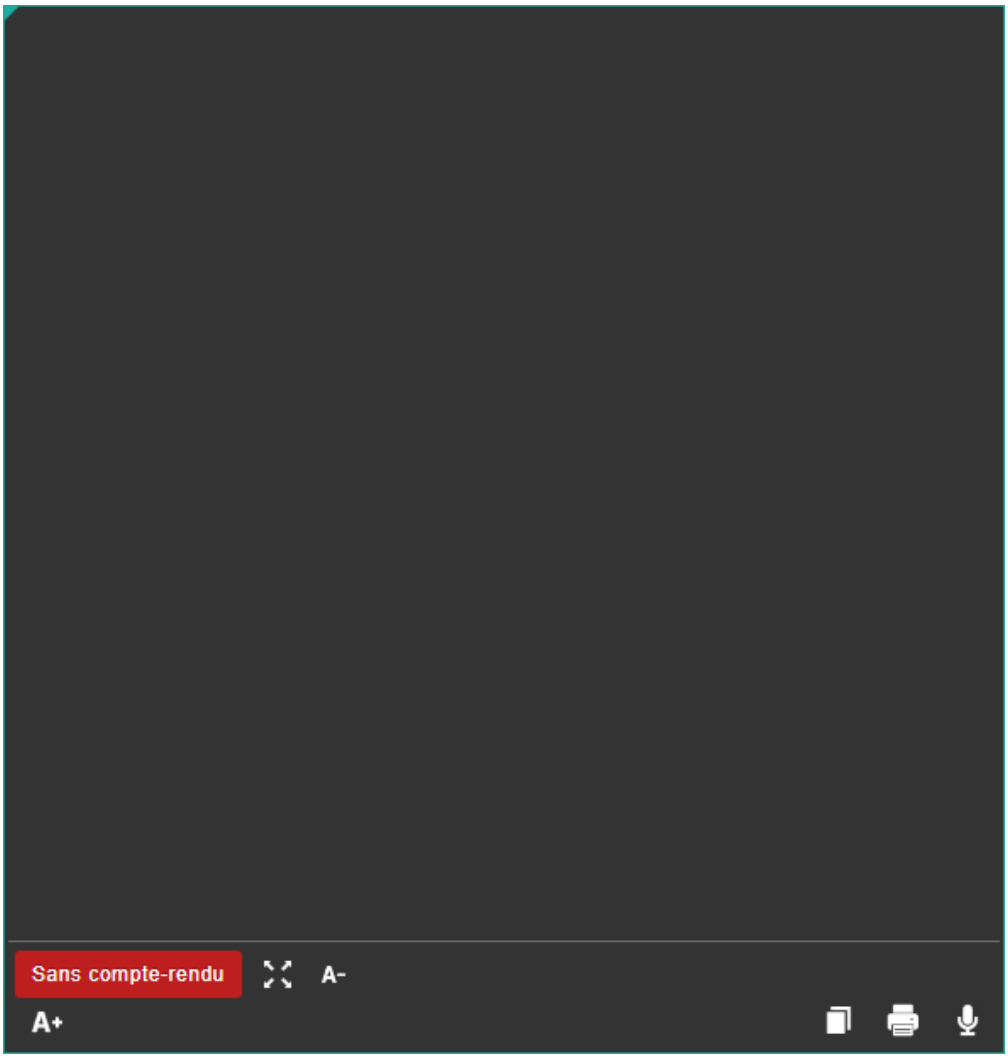

L'icône du microphone devient rouge lorsque la reconnaissance vocale est activée.

 ->

Le texte dicté s'affiche à la fois dans l'application Home Reading et dans la fenêtre du navigateur.

Important !

Si le microphone ne détecte aucune parole pendant 20 secondes, la reconnaissance vocale est désactivée.


Si cela se produit, l'utilisateur est averti par un son système.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

Si vous utilisez l'application combinant Home Reading et Authenticator, vous avez la possibilité de changer la langue durant la dictée.

Pour ce faire, appuyez sur la langue dans le coin supérieur droit de l'application :

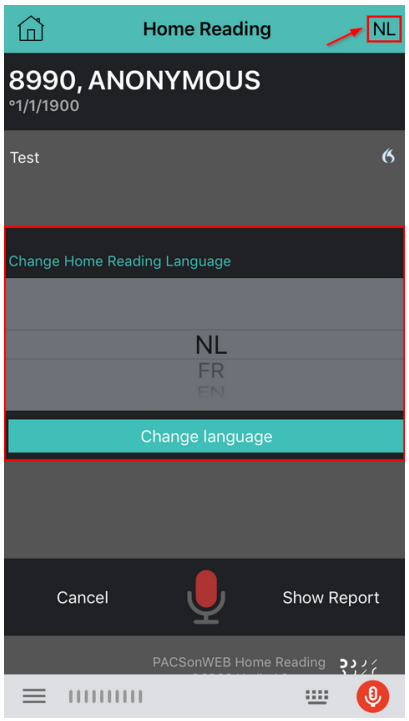

Une fois le compte-rendu terminé, il doit être vérifié et enregistré à partir de la fenêtre du navigateur.

Un compte-rendu peut être enregistré en tant que :

- Projet
- provisoire
- Validé

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



Important !

Si un projet de compte-rendu existe et si le compte-rendu est modifié et effacé, il sera marqué comme sans compte-rendu.

Si un compte-rendu a été enregistré en tant que Provisoire ou Validé, il n'est pas possible de revenir au statut Projet ou Sans compte-rendu.

En fonction des paramètres spécifiques pour votre service de radiologie, il se peut que :

- cela soit impossible de sauvegarder un compte-rendu sous le statut « Compte-rendu provisoire »
- cela soit impossible de sauvegarder un compte-rendu sous le statut « Compte-rendu validé »
- cela soit impossible de modifier des comptes-rendus validés

Pour toute autre question, veuillez contacter le responsable interne DeepUnity PACSonWEB ou DH Healthcare GmbH.

Un compte-rendu qui a le statut « projet » est uniquement visible par les utilisateurs qui sont autorisés à établir un compte-rendu contrairement aux utilisateurs qui ne disposent que d'un droit de lecture seule.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


ATTENTION :


Le texte reconnu n’est pas toujours 100 % correct.

Il est de la responsabilité du radiologue de vérifier l’exactitude du compte rendu avant de le valider.

Si un compte-rendu est en mode édition, l'accès à celui-ci est bloqué aux autres utilisateurs afin d'éviter que deux utilisateurs travaillent simultanément sur le même compte-rendu.

Un compte-rendu bloqué est indiqué par une icône symbolisant un cadenas dans « series picker » et la fenêtre de compte-rendu sur la page de l'étude.

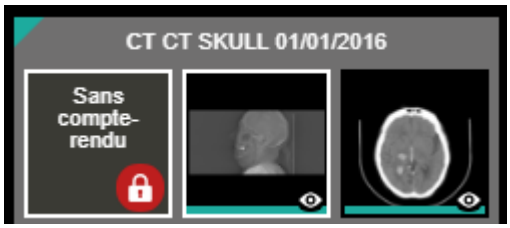


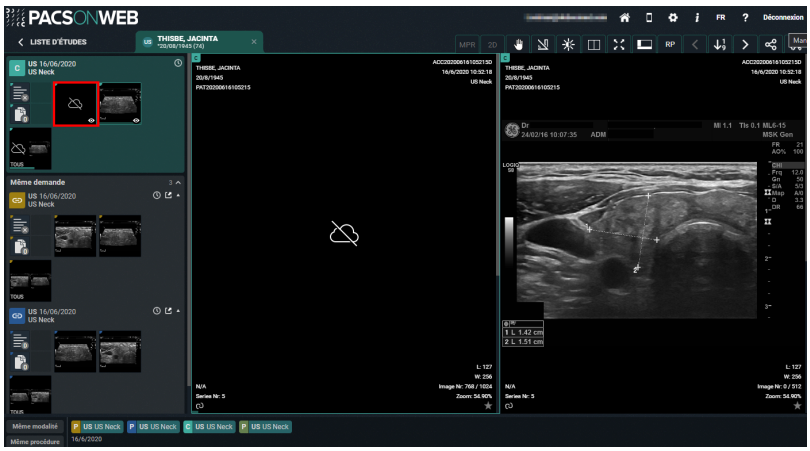

En cliquant sur le cadenas, vous pouvez voir s'afficher des informations supplémentaires concernant l'utilisateur qui édite actuellement le compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

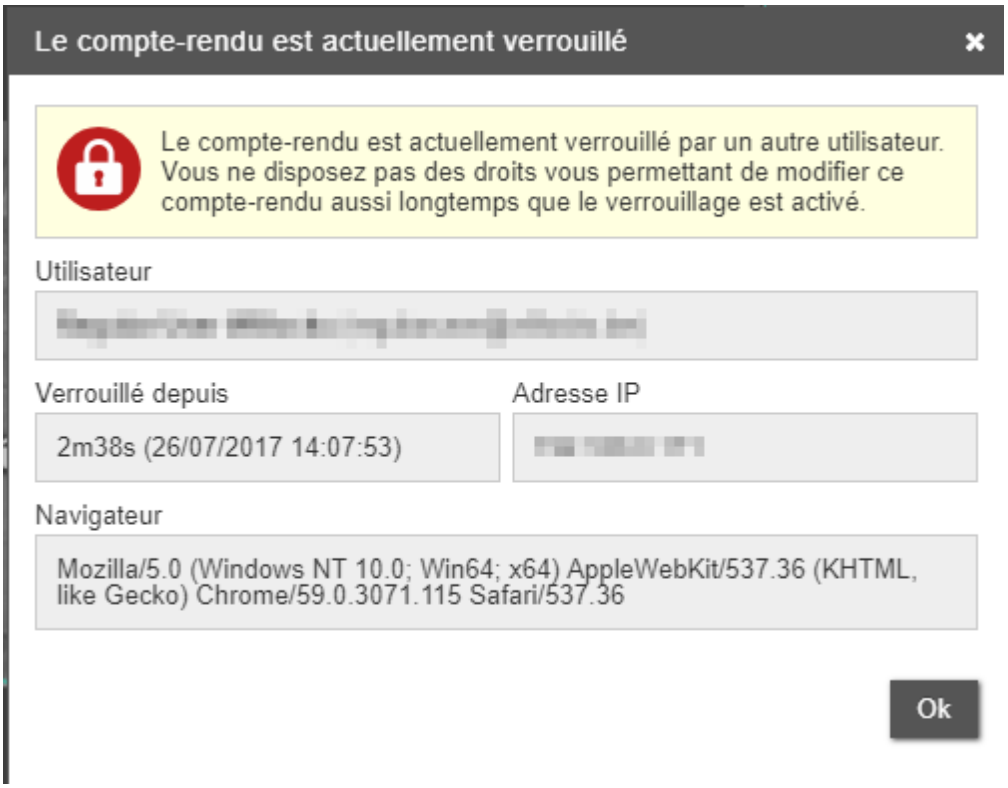

8.3 Désappariement de l'application Home Reading


Vous devez rompre la connexion entre la session du navigateur et votre Smartphone si:

- vous souhaitez arrêter d'enregistrer les études
- vous souhaitez connecter un autre Smartphone à votre navigateur actuel
- vous souhaitez connecter un autre navigateur à votre Smartphone


Pour ce faire, utilisez l'une des méthodes suivantes:

- depuis l'application Home Reading, appuyez sur les trois petits points en haut à droite et sur **Déconnecter le navigateur**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

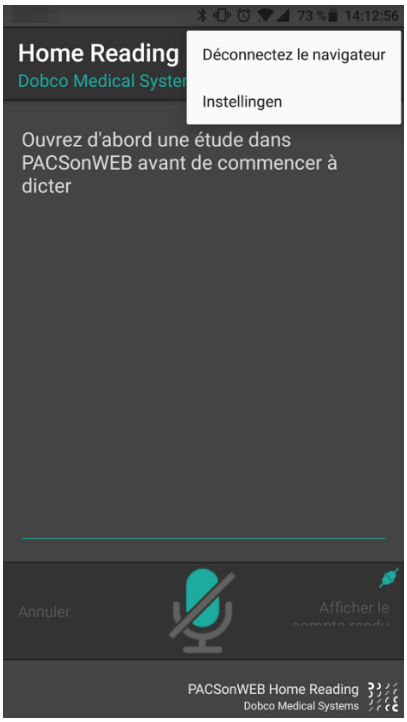


- depuis le navigateur, appuyez sur l'icône Home Reading et sur**Déconnecter**

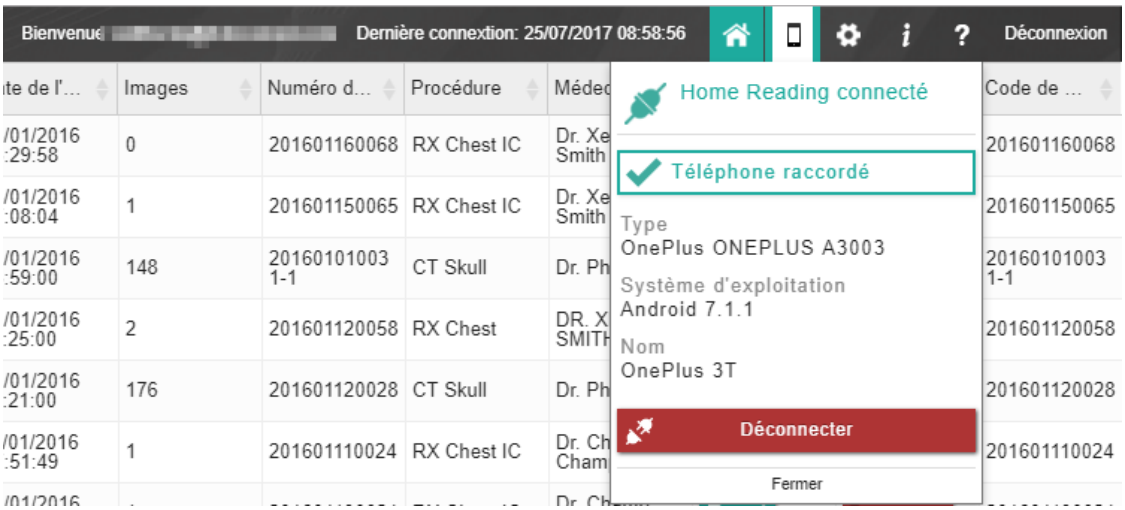

Sur l'application Home Reading, vous verrez s'afficher un message. Appuyez sur **OUI** pour confirmer l'interruption de la connexion.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

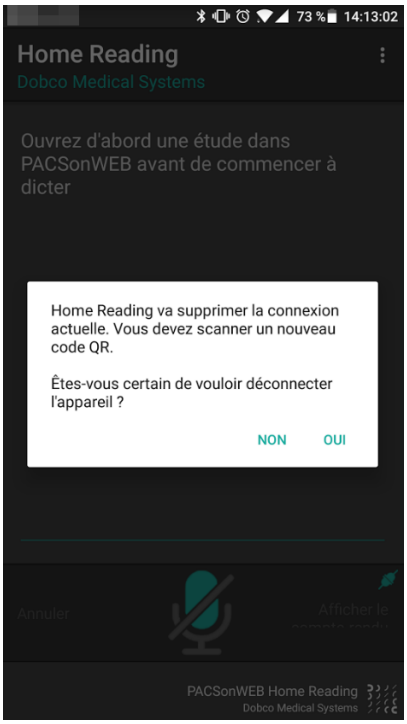

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DeepUnity PACSonWEB liste de travail

9

DeepUnity PACSonWEB offre la possibilité d'utiliser des listes de travail pour une prise en charge optimale du flux de travail lors de la dictée des comptes-rendus.

Les utilisateurs disposant des droits d'accès reliés peuvent accéder à l'écran de la liste de travail en cliquant sur l'onglet «Liste de travail» à côté de la liste d'examens.



9.1 Configuration de la liste de travail

Listes de travail prédéfinies


Pour chaque source ou groupe de sources (pour les listes de travail inter-sources), il existe 4 listes de travail prédéfinies :

- **Tous pour la source** : cette liste de travail contient tous les examens de la source (ou du groupe).
- **Tous mes commentaires** : cette liste de travail contient tous les examens dont le statut est **En attente de deuxième validation** et dont l'utilisateur validant est l'utilisateur actuellement connecté
- **Tous mes non lus** : cette liste de travail contient tous les examens non lus pour lesquels l'utilisateur connecté est marqué comme « Utilisateur lecteur »
- **Tous les non lus** : cette liste de travail contient tous les examens non lus pour cette source ou du groupe.

Les listes de travail prédéfinies ne peuvent être ni supprimées ni personnalisées. Si des modifications sont apportées à une liste de travail prédéfinie, une icône

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

triangulaire orange apparaît au bas de la page pour indiquer que des changements ont été apportés à la liste de travail par défaut.

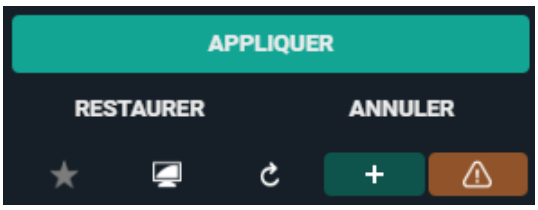

Enregistrer comme nouvelle liste de travail

Pour enregistrer les modifications apportées à une liste de travail prédéfinie dans le menu déroulant du panneau des filtres.

1. Sélectionnez l'une des listes de travail prédéfinies et ajoutez des filtres supplémentaires pour créer la liste de travail souhaitée.
2. Saisissez des critères dans le champ des filtres en fonction des modifications que vous souhaitez configurer dans la nouvelle liste de travail.
   a. Par exemple, définir une modalité spécifique.
3. Cliquez sur l'icône + pour **enregistrer une nouvelle liste de travail**.
4. Dans la boîte de dialogue **Créer une nouvelle liste de travail**, fournissez les informations suivantes :
   a. **Nom** : Le nom de votre liste de travail.
   b. **Description** : Description de la liste de travail.
   c. **Groupe** : Enregistre la liste de travail au niveau de l'utilisateur ou du groupe.
5. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

La nouvelle liste de travail est enregistrée dans la liste déroulante des listes de travail, avec les listes de travail prédéfinies.

Vous pouvez apporter des modifications à la liste de travail enregistrée en mettant à jour les champs de filtre en fonction des changements souhaités et en cliquant sur **Enregistrer la liste de travail**.

Important !

Pour enregistrer la liste de travail pour un groupe, l'utilisateur doit être administrateur de groupe.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Filtrer et trier les examens dans la liste de travail

Les filtres facilitent la recherche d'une commande dans votre liste de travail. Pour améliorer les résultats de votre recherche, saisissez les critères souhaités dans les champs de filtre.

- La date de l'examen peut être utilisée comme une date/période relative.
  - Cela signifie, par exemple, que si vous sélectionnez **7 derniers jours** , la mise à jour se fera automatiquement le jour suivant.
- Par défaut, les commandes de la liste de travail sont triées d'abord par priorité et ensuite par date de l'examen (de la plus ancienne à la plus récente).
  - Pour utiliser les filtres de tri, cliquez sur la description de la colonne.
  - Pour utiliser plusieurs critères de tri, maintenez la touche **MAJ** et sélectionnez la colonne souhaitée. Les chiffres affichent le classement du tri



Personnalisation des colonnes et des filtres

Les listes de travail prédéfinies ont un ensemble par défaut de colonnes et de filtres. Les paramètres de la colonne et du filtre peuvent être configurés en fonction des préférences personnelles.

Pour modifier les paramètres :

1. Cliquez sur l'icône configuration des colonnes ou configuration des filtres.
2. Sélectionnez ou désélectionnez les champs que vous souhaitez afficher ou masquer.

> **Remarque :**
>
> Les colonnes et les filtres sont affichés dans la liste de travail dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des paramètres. Pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste de travail, sélectionnez un champ et faites-le glisser vers une nouvelle position dans la liste des paramètres.

3. Cliquez sur **APPLIQUER**.

Les champs disponibles dans la configuration des filtres et des colonnes sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Champs de configuration des filtres	Champs de configuration des colonnes

• Numéro d'accès
• Anomalies
• Contient étiquette(s)
• Contient les procédures
• Contient le code de procédure
• Date de naissance
• Salle d'examen
• Exclure procédures
• Exclure le code de procédure
• Ne contient pas étiquette(s)
• ID de la procédure externe
• Prénom
• Prénom de naissance
• Date de dernière modification
• Nom de famille
• Nom de naissance
• Modalité
• Numéro national
• Nombre d'images supérieur à
• Numéro de demande
• ID du patient
• Département exécutif
• Lieu de naissance
• Priorité
• Utilisateur lecteur
• Compte-rendu édité
• Compte-rendu édité par
• Département prescripteur
• Médecin prescripteur
	• Numéro de la demande
	• Patient
	  ○ Date de naissance
	  ○ Prénom
	  ○ Prénom de naissance
	  ○ Nom de famille
	  ○ Nom de naissance
	  ○ Numéro national
	  ○ ID du patient
	  ○ Lieu de naissance
	• Département exécutif
	• Département prescripteur
	• Médecin prescripteur
	• Site
	• Sélectionnez
	• Studies
	  ○ Numéro d'accès
	  ○ Salle d'examen
	  ○ ID de la procédure externe
	  ○ Extra
	  ○ Images
	  ○ Étiquettes
	  ○ Date de dernière modification
	  ○ Priorité
	  ○ Procédures
	  ○ Utilisateur lecteur
	  ○ Compte-rendu
	  ○ Statut
	  ○ Date de l'examen

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Champs de configuration des filtres	Champs de configuration des colonnes
• Site • Statut • Date de l'examen • Validation de l'utilisateur • Statut IA • Résultats • Spécialité • Statut du compte-rendu	○ Validation de l'utilisateur ○ Statut IA ○ Résultats ○ Source ○ Spécialité ○ Délai de l'ANS

l'Icône, affichée dans la colonne **compte-rendu**, diffère selon le statut du compte-rendu :

-  Comptes-rendus enregistrés automatiquement
-  Brouillon de compte-rendu
-  Compte-rendu préliminaire
-  Compte-rendu validé
-  Compte-rendu d'addendum validé

La colonne **Extra** peut contenir des icônes associées aux statuts suivants :

-  Anomalies
-  Messages (lus)
-  Messages (non lus)
-  Examen filtré
-  Examen annulé
-  Verrouillé
-  Réservé

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Une liste de travail peut également être configurée sur la base du filtre **Anomalies**. Cependant, le filtre Anomalies n'est accessible qu'aux administrateurs de la source.

Suppression d'une liste de travail



Pour supprimer une liste de travail :

1. Cliquez sur l'icône ×
2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur **SUPPRIMER**.

Important !

La suppression d'une liste de travail ne peut être annulée.

Liste de travail par défaut



Pour définir une liste de travail comme votre liste de travail par défaut, cliquez sur l'icône en forme d'étoile ★.

Lors de l'ouverture de DU POW, la liste de travail que vous avez définie par défaut s'affiche.

Tableau de bord

Le tableau de bord contient des raccourcis de votre sélection personnelle de listes de travail. Le but de ces raccourcis est d'avoir une vue d'ensemble des nombres figurant dans la liste de travail sans avoir besoin d'ouvrir cette dernière.

Le nombre se rafraîchit automatiquement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ajout d’une liste de travail à votre tableau de bord



Pour ajouter une liste de travail à votre tableau de bord :

1. Sélectionnez la liste de travail que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord.
2. Cliquez sur l’icône du tableau de bord .
3. Dans la boîte de dialogue suivante :
   a. Entrez une abréviation au raccourci (limitée à 3 caractères).
   a. Saisissez le seuil moyen et le seuil élevé. Ces chiffres déterminent la couleur dans laquelle l’icône du raccourci sera affichée : gris, orange ou rouge.
   b. Cliquez sur **Ajouter une liste de travail au tableau de bord**.

L'icône du raccourci s'affichera dans le tableau de bord à côté du logo DeepUnity PACSonWEB.

Cliquez sur cette icône pour ouvrir la liste de travail.



Modifier/supprimer un raccourci du tableau de bord


Vous pouvez modifier ou supprimer une liste de travail de votre tableau de bord en ouvrant la liste de travail associée, soit en la sélectionnant dans votre liste de listes de travail, soit en cliquant sur l'icône associée dans le tableau de bord.

Pour ouvrir la fenêtre Configuration :

1. Cliquez sur l'icône du tableau de bord .
2. Dans cette fenêtre, trois options s’offrent à vous :
   - Cliquez sur **ANNULER** pour annuler et refermer la boîte de dialogue.
   - Modifiez et cliquez sur **ENREGISTRER**pour sauvegarder les changements dans vos paramètres.
   - Cliquez sur **SUPPRIMER** pour supprimer le raccourci du tableau de bord.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Aperçu des listes de travail

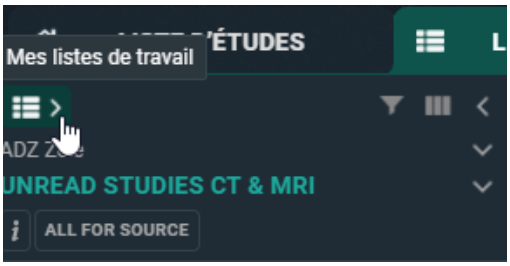

Vous pouvez voir une vue d'ensemble de toutes les listes de travail dont vous disposez en cliquant sur l'icône **Mes listes de travail** en haut à gauche du panneau de filtres.

- Les listes de travail prédéfinies sont indiquées par un « P ».
- Les listes de travail accompagnées d'un « G » sont disponibles pour un groupe auquel vous appartenez.
- La liste de travail par défaut est indiquée par une icône en forme d'étoile jaune.

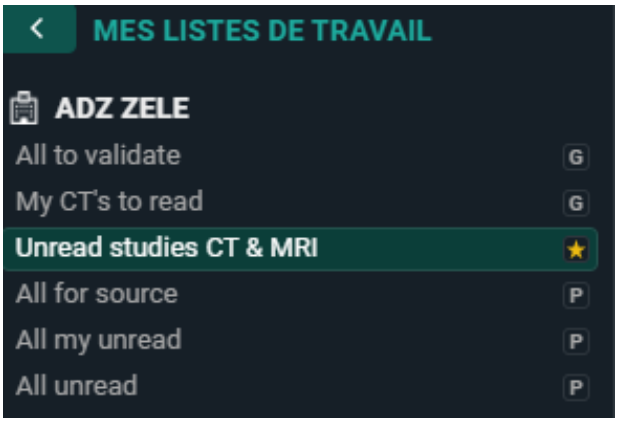

9.1.1 Spécialité

Une spécialité est un domaine d'expertise spécifique. Les prestataires de téléradiologie attribuent souvent les examens à leur équipe de radiologues en fonction de leur spécialité.

Filtrage par spécialité

Vous pouvez filtrer la liste de travail des examens par **spécialité**. Chaque spécialité a un code dans l'application. La liste ci-dessous indique les spécialités prédéfinies disponibles dans le filtre de la liste de travail.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Code de spécialité	Nom de la spécialité
ABDO	Radiologie abdominale
BQ	Biomarqueurs/imagerie quantitative
CORPS	Imagerie corporelle
POITRINE	Imagerie du sein
Thorax	Radiologie thoracique
CTH	Radiologie cardiothoracique
CVA	Radiologie cardio-vasculaire
RU	Radiologie d'urgence (traumatologie)
GI	Radiologie gastro-intestinale
GEN	Radiologie générale
UG	Radiologie uro-génitale
TC	Radiologie de la tête et du cou
MSK	Radiologie MSK (musculo-squelettique) (orthopédie)
NEURO	Neuroradiologie
NUC	Médecine nucléaire/Radiologie
OB	Radiologie obstétrique et gynécologique
AT	Autre
PEADS	Radiologie pédiatrique

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Code de spécialité	Nom de la spécialité
VAIR	Radiologie vasculaire et interventionnelle
ONCO	Oncologie (radiothérapie)

Lier une spécialité à un examen

Les spécialités ne peuvent être reliées que par l'intermédiaire de l'ORM entrant. Les utilisateurs ne peuvent pas relier manuellement une spécialité à un examen dans l'application.

- Vous pouvez associer plusieurs spécialités à un examen.
- Dans la colonne de **spécialité** de l'aperçu de la réserve de travail, seul le code de spécialité de l'examen lié (par exemple, GEN) est affiché, et non le nom de la spécialité (par exemple, Radiologie générale).

Voir aussi

Configuration de la liste de travail (Page 345)

9.1.2 Délai de l'ANS

Délai d'accord de niveau de service

Dans le domaine de l'imagerie médicale, un **délai de compte-rendu d'ANS (Accord de niveau de service)** fait référence au délai convenu dans lequel un compte-rendu de radiologie (par exemple, radiographie, CT, IRM) doit être complété et livré après la réalisation de l'examen d'imagerie.

En fixant des attentes claires quant au moment où les résultats d'imagerie doivent être mis à la disposition des cliniciens, les délais de communication de l'ANS garantissent un diagnostic et un traitement opportuns. Ces délais permettent de préserver la sécurité des patients, d'améliorer le flux de travail clinique et de maintenir des normes de qualité de service entre les services de radiologie et les prestataires de soins de santé.

Fixer des délais pour l'établissement des comptes-rendus

Comme pour les **spécialités**, les délais de compte-rendu peuvent être configurés via les messages ORM/ORU à l'aide d'une propriété spécifique. Une fois qu'un délai a été fixé par un déclencheur désigné, il ne sera modifié que si une mise à jour ORM/ORU est reçue avec une propriété **SLADeadlineOffset** vide. Si la valeur du décalage est modifiée après que le délai a déjà été fixé dans la demande, le délai ne sera pas mis à jour.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Déclencheurs de la fixation de délais

Les déclencheurs suivants peuvent être utilisés pour fixer des délais de déclaration :

- **Changement du statut de l'examen**
- **Label ajouté**

Les délais de l'ANS peuvent également être configurés manuellement pour l'examen via **Administration de l'examen** > **Informations sur l'examen**.

Intégration dans la liste de travail



Dans la liste de travail, vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire, **SLA Deadline**. Cette colonne indique clairement quels examens ont une date limite, combien de temps il reste ou si la date limite est dépassée.

Par défaut, cette colonne n'est pas affichée et aucun tri n'est effectué. Une fois ajoutée via les paramètres de la colonne, en cliquant sur l'en-tête de la colonne, vous pouvez trier la colonne par ordre d'urgence, du plus urgent au moins urgent, ou du moins urgent au plus urgent.



Codes couleur des délais de l'ANS

La colonne Délai de l'ANS utilise un système de code couleur pour indiquer le niveau d'urgence du délai, en fonction du temps restant avant l'échéance du délai de l'ANS.

Codes couleur

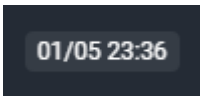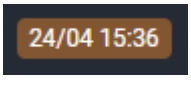Statut	Code couleur	Description
Pas encore échu	Fond gris 	Le délai de l'ANS n'est pas encore arrivé à son terme et le temps restant n'a pas le statut *Avertissement* (orange) ou *Urgent* (rouge).
Avertissement	Orange 	Le temps restant pour le délai de l'ANS est inférieur ou égal au temps (en minutes) configuré dans le paramètre **WarningSLADeadlineTime**.
Urgent	Rouge	Le temps restant pour le délai de l'ANS est inférieur

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

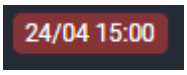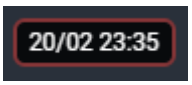Statut	Code couleur	Description
		ou égal au temps (en minutes) configuré par l'administrateur dans le paramètre **UrgentDeadlineTime**.
Dépassé	Fond noir avec bordure rouge 	Le délai de l'ANS est dépassé.

Remarque :

Le délai pour les statuts *Avertissement* et *Urgence* d'un délai de l'ANS est configuré par l'administrateur global (dans les paramètres détaillés de la source).

Dans la colonne Délai de l'ANS, le survol du délai affiche une info-bulle qui indique le temps restant jusqu'à la fin du délai ou, dans le cas d'un délai de l'ANS dépassé, le degré de retard, suivi de la date et de l'heure de la fin du délai. La durée restante/en retard peut être affichée en mois, minutes, jours ou heures.

- {x} mois (jj/mm/aaaa hh:mm)
- {x} jours (jj/mm/aaaa hh:mm)
- environ {x} heures (dd/mm/yyyy hh:mm)
- {x} minutes (dd/mm/yyyy hh:mm)

Voir aussi

Administration (Page 257)
Configuration de la liste de travail (Page 345)
Spécialité (Page 352)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


9.2 Fonctions de la page de la liste de travail

1. Réservation d'un examen

Lorsque plusieurs radiologues travaillent sur la même liste de travail, il est utile de réserver les examens avant d'en effectuer le reporting afin que tous les radiologues sachent clairement qui se charge de créer le compte-rendu pour quel examen.

Les réservations d'examens peuvent se faire en sélectionnant un ou plusieurs examens avec la zone de sélection et en cliquant sur le bouton « Réserver » dans le coin inférieur droit.


Par défaut, la période de réservation est fixée à 90 minutes, à moins qu'une autre valeur ait été enregistrée pour la source associée. À l'expiration de la période de réservation.

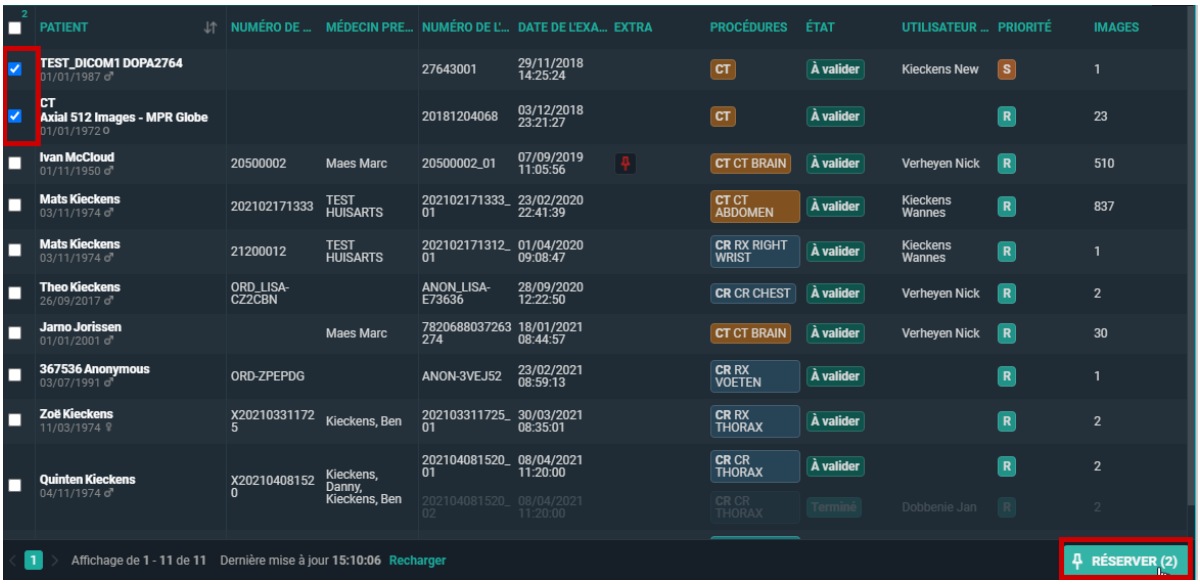


Si un examen a été réservé, cela est indiqué par une icône en forme d'épingle dans la colonne **extra**.

Lorsque le curseur passe au-dessus de l'icône en forme d'épingle, les détails de la réservation s'affichent.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

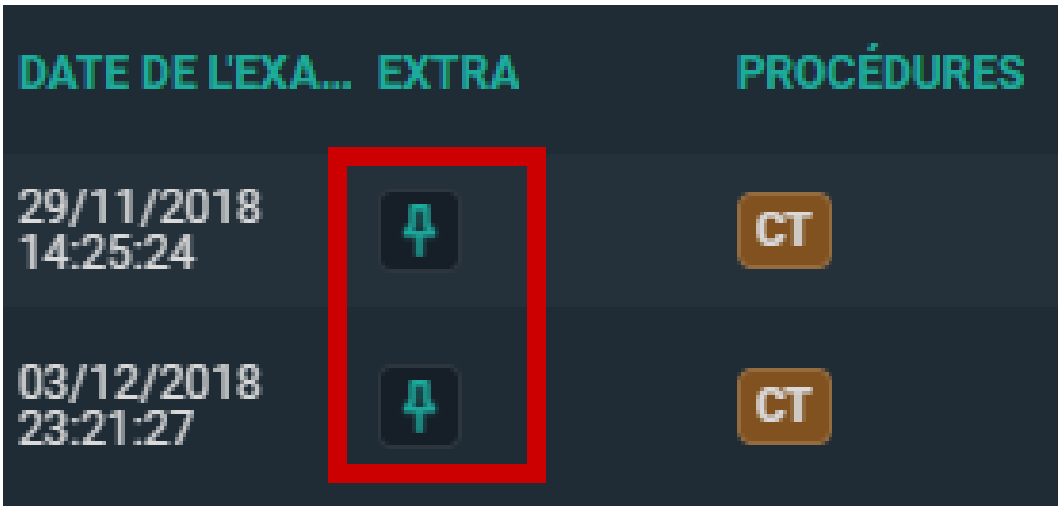

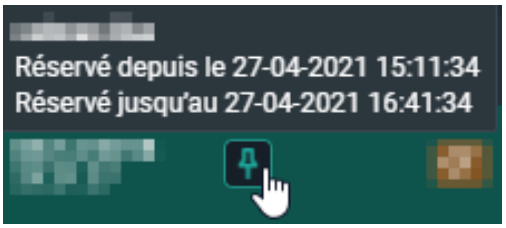

Un autre utilisateur qui travaille sur la même liste de travail verra la même icône en couleur rouge pour indiquer que l'examen est réservé.



Si un utilisateur veut réserver un examen qui est déjà réservé par un autre utilisateur, il reçoit l'avertissement suivant :

AttentionUn ou plusieurs examens sont réservés par un autre utilisateur, souhaitez-vous reprendre la réservation ?**OUI**,**FERMER**

2. Annuler la réservation d'un examen

Pour annuler un examen, procédez de la même manière. Sélectionnez les examens réservés dont vous souhaitez annuler la réservation en cochant la case correspondante.

Cliquez sur **effacer les réservations** dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Verrouillage d'un examen


Lorsqu'un radiologue commence à rédiger un compte-rendu, cela est indiqué pour les autres utilisateurs par une icône de verrou dans la colonne **extra**.

Lorsque le curseur passe au-dessus de l'icône de verrou de l'examen, la personne qui dicte le compte-rendu est indiquée. Le compte-rendu est verrouillé aussi longtemps


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

qu’il est en mode d’édition. La durée de verrouillage est mise à jour toutes les minutes.



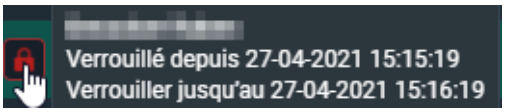

L’utilisateur peut ouvrir l’examen pour regarder les images, mais il ne peut pas mettre le compte-rendu en mode d’édition.

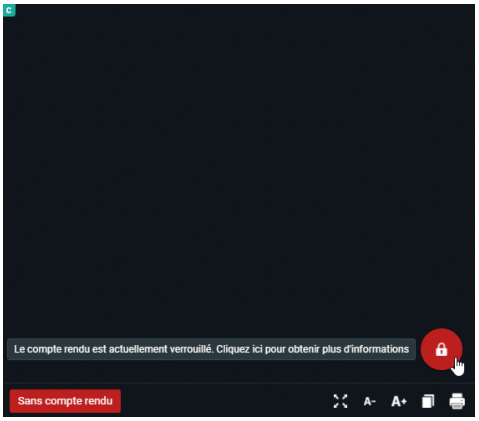

Une fois le compte-rendu enregistré ou annulé, les autres utilisateurs peuvent à nouveau le modifier.

4. Adapter la priorité de l’examen


La priorité de l’examen peut être modifiée dans l’aperçu de la liste de travail.

Sélectionnez l’examen en cochant la case. Un clic avec le bouton droit de la souris sur l’examen vous donne 3 options. Sélectionnez l'examen en cochant la case, cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'examen vous donne 3 options.L'un d'eux change la priorité en Stat ou en Routine.

Remarque :

Cette fonctionnalité nécessite une autorisation qui doit être active pour l'utilisateur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

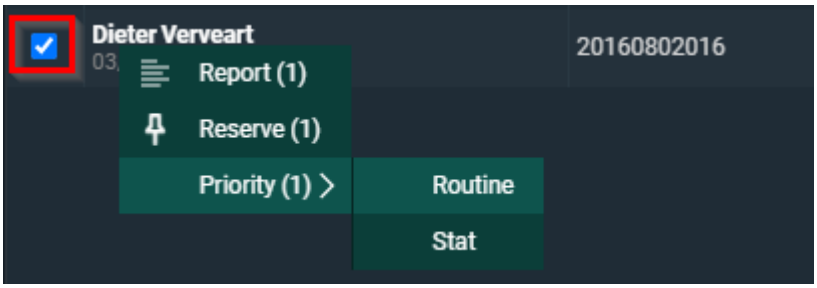


5. Étiquettes

À partir de la page liste de travail, vous avez la possibilité de lier des étiquettes aux examens de la même manière que vous pouvez le faire à partir de la liste d'examens.

Pour obtenir une explication complète de la façon de gérer les étiquettes : Ajouter des étiquettes à des examens (Page 208).

Les étiquettes liées s'affichent dans la colonne « Étiquettes » si cette colonne a été rendue visible pour votre aperçu.

Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit pour la rendre visible : Configuration de la liste de travail (Page 345).

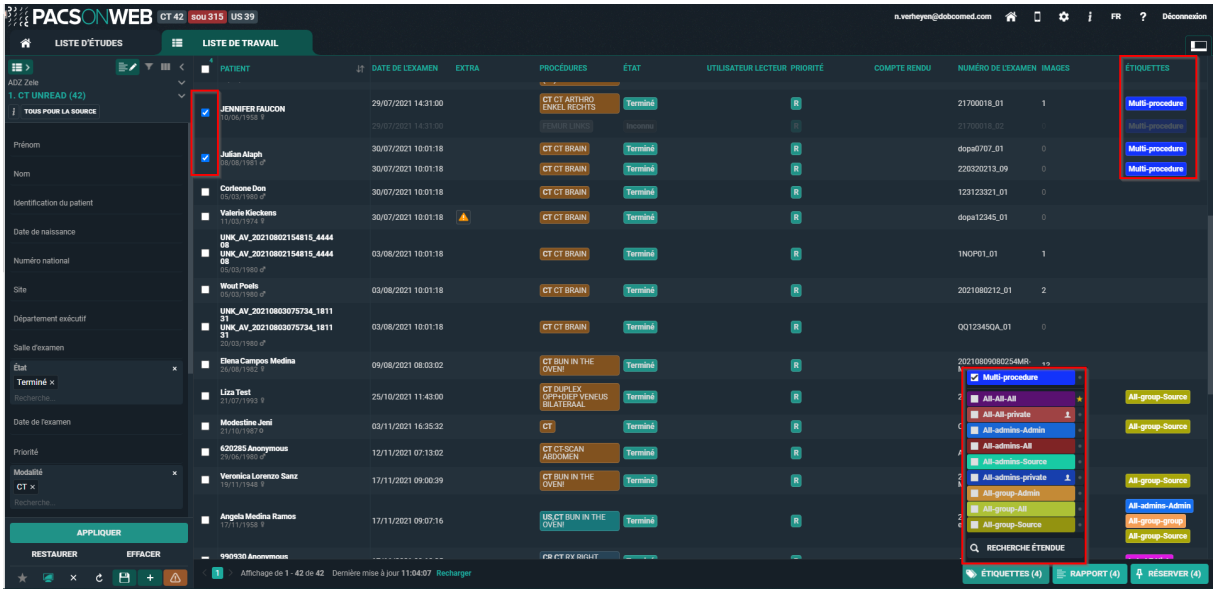

9.3 Flux de travail de lecture

Ouverture d'un examen à partir d'une liste de travail

Lorsqu'un examen est ouvert à partir d'une liste de travail, la source de l'examen est indiquée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Le nom de la liste de travail et le nombre d'examens dans cette liste sont affichés.

Si l'examen est réservé, cela est également indiqué par l'icône en forme d'épingle.



Ouvrir des examens à partir de la sélection

Les cases à cocher de sélection des examens peuvent être affichées au niveau de la demande ou de l'examen.

Remarque :

L'emplacement de la colonne de sélection est défini dans la page de gestion. Pour apporter des modifications, veuillez contacter le service desk.

- **Sélection du niveau de commande :** la colonne de sélection est affichée dans la colonne la plus à gauche.
- **Sélection du niveau d'examen :** la colonne de sélection est affichée à gauche de la colonne des procédures.

Vous pouvez sélectionner un examen spécifique en cliquant sur l'étiquette de la description de la procédure dans la colonne des **procédures.** Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez ouvrir un examen spécifique à partir d'une commande comportant plusieurs examens.

Établissement de comptes-rendus en vrac

Pour créer des comptes-rendus en masse, sélectionnez les examens souhaités en cochant les cases correspondantes.

Cliquez sur le bouton **COMPTE-RENDU** en bas à droite ou faites un clic droit pour commencer à établir un compte-rendu des examens sélectionnés.

Le nombre total d'examens sélectionnés est affiché dans le sélecteur de séries.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés




Lorsque le compte-rendu des derniers examens sélectionnés est établi, l'utilisateur est redirigé vers la page contenant la liste de travail.

Créer un compte-rendu et un statut d'examen

Lors de l'ouverture d'un examen, vous pouvez choisir d'ouvrir automatiquement le compte-rendu en mode édition ou d'activer le mode édition manuellement. Cette option ne s'applique pas aux comptes-rendus validés, qui doivent être édités manuellement.

Ouvrir automatiquement un compte-rendu en mode d'édition

Pour ouvrir automatiquement les comptes-rendus en mode édition, cliquez sur l'icône suivante . L'icône est mise en évidence lorsqu'elle est activée.

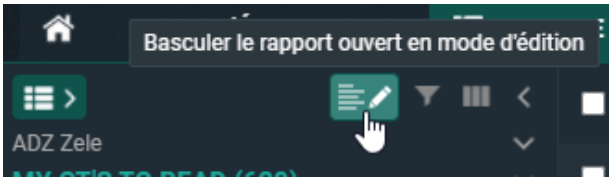


Important !

Pour que cette option reste activée, cliquez sur **enregistrer la liste de travail** ou sur **enregistrer comme nouvelle liste de travail** dans le panneau des filtres.

Ouvrir manuellement un compte-rendu en mode d'édition

Cliquez sur l'icône **Modifier le compte-rendu** (crayon) ou appuyez sur le raccourci F2 pour activer directement le SpeechMike en mode enregistrement.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

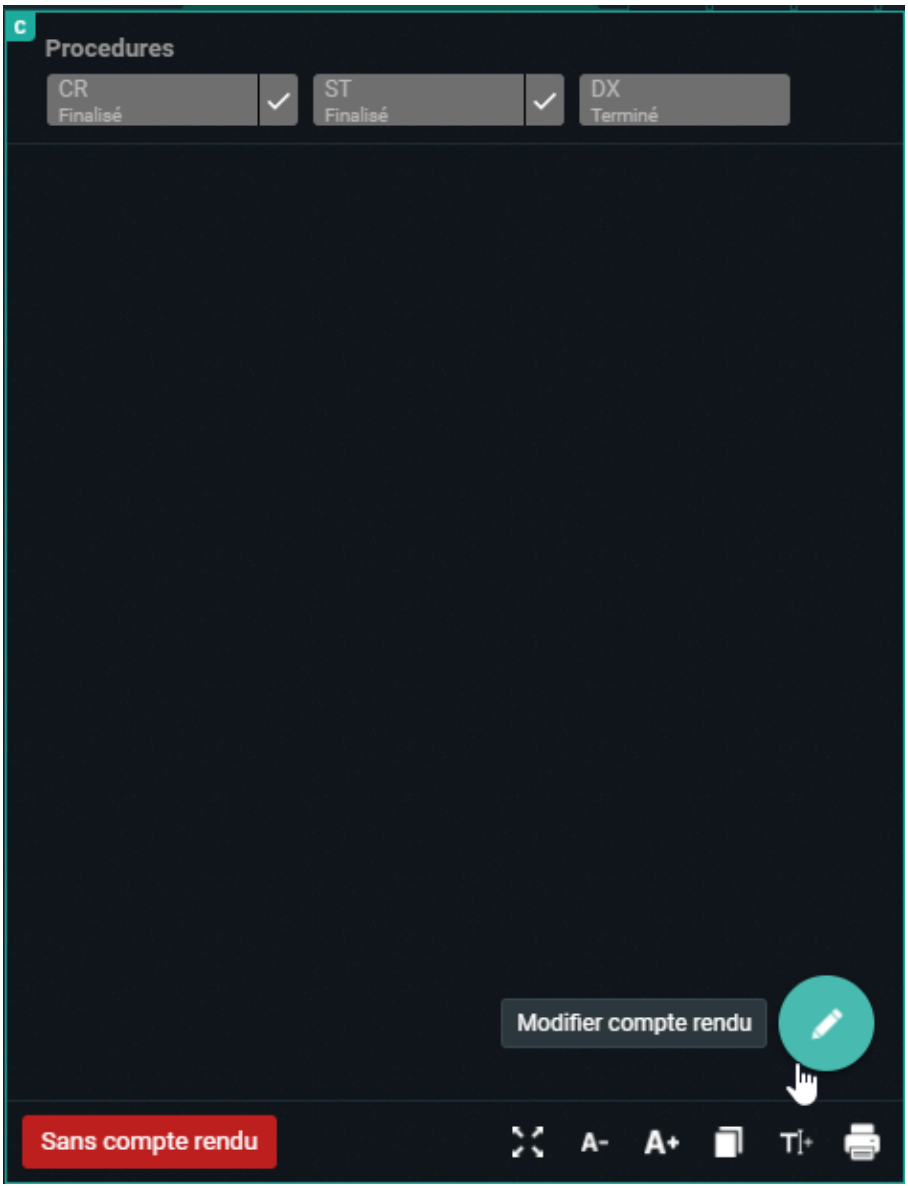

Vous pouvez maintenant commencer à faire votre compte-rendu.

Blocs de texte

Les blocs de texte peuvent contribuer à accélérer le flux de travail. Il s'agit de blocs de texte préconfigurés qui peuvent être insérés et modifiés ultérieurement.

Voir Blocs de texte (Page 129) pour plus d'information sur la manière de créer et insérer des blocs de texte.

Liens hypertexte dans les comptes-rendus

Vous pouvez créer des liens hypertexte à partir d'images et les ajouter au texte du compte-rendu.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Lorsque l'option Reporting détaillé est utilisée, le lien hypertexte est cliquable. Si vous utilisez du texte brut ou si le compte-rendu est envoyé via HL7 ou imprimé, le lien hypertexte sera converti en texte brut.

Ajouter un lien hypertexte à un compte-rendu

Après avoir sélectionné l'image dans la fenêtre de visualisation, l'ajout d'un lien hypertexte vers l'image dans le compte-rendu peut se faire de trois manières.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option **Ajouter une image au compte-rendu**
- CTRL + glisser-déposer l'image ou
- CTRL + C *(pour copier l'image)* et CTRL + V *(pour coller l'image)*.


Les trois méthodes ajoutent le lien hypertexte à l'image à la position du curseur.

Format d'affichage des liens hypertexte

Le format d'affichage des liens hypertexte n'est pas configurable et le format diffère selon qu'il s'agit de l'examen en cours ou de l'examen antérieur. Pour chaque format, *S = Série et I = Image*

Examen en cours :[S+SeriesNumber I+ImageNumber]

Examen antérieur :[Nom de la procédure (date de l'examen) – S+Numéro de série I +Numéro d'image]

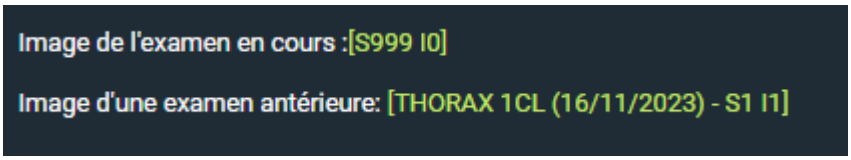

Naviguer vers une image liée

Pour naviguer vers l'image liée, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte dans un compte-rendu modifiable ou non modifiable lorsque vous travaillez dans DeepUnity PACSonWEB.

Si le lien hypertexte a été converti en texte brut, vous devrez naviguer manuellement jusqu'à l'image.

En cliquant sur le lien hypertexte, vous accéderez à l'image correcte dans l'une des fenêtres d'affichage disponibles.

Emplacement de l'image

- Si une fenêtre d'image était active auparavant, c'est la dernière fenêtre d'image active qui sera utilisée.
- Si aucune fenêtre d'image n'était active auparavant, la première fenêtre disponible sera utilisée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

- Si la fenêtre active précédente n'est plus visible, l'image sera affichée dans la première fenêtre disponible sans compte-rendu
- Si le compte-rendu est en plein écran, l'image sera ouverte dans la fenêtre du compte-rendu, car c'est la seule fenêtre disponible.

Le compte-rendu fait référence à une image non disponible


Si une image, une série ou un examen référencé dans un compte-rendu a été retirée depuis, une boîte de dialogue apparaît lorsque l'on clique sur le lien hypertexte, vous avertissant que l'image n'a pas pu être chargée.

Par exemple : Si la série n'est plus trouvée dans l'examen, le message suivant s'affiche : **« Cette image n'a pas pu être chargée, car la série n'a pas été trouvée. »**

Comptes-rendus enregistrés automatiquement

Le compte-rendu est automatiquement enregistré toutes les 30 secondes. Cela garantit qu'il y aura une version du compte-rendu enregistrée automatiquement en cas de perte de la connexion, pour quelque raison que ce soit.

- Les comptes-rendus enregistrés automatiquement pour un examen sont affichés dans la réserve de travail.
- L'icône est visible uniquement pour l'utilisateur qui a créé la version enregistrée automatiquement du compte-rendu. Les autres utilisateurs ne verront pas l'icône dans leur liste de travail.

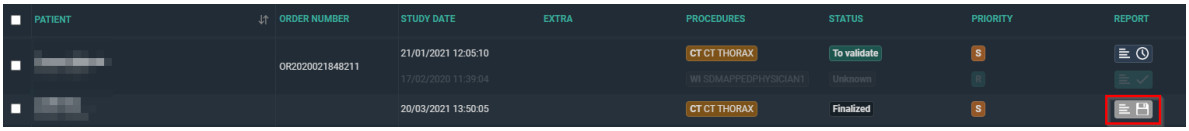

Ouverture d'un examen avec un compte-rendu créé par vous et enregistré automatiquement

Si vous ouvrez un compte-rendu enregistré automatiquement que vous avez créé, une boîte de dialogue indique qu'une version précédente du compte-rendu a été récupérée. Vous aurez la possibilité de :

- **Restaurer l'enregistrement automatique** : ouvre la dernière version enregistrée automatiquement.
- **Démarrer à partir de la version antérieure enregistrée** : s'il existe un compte-rendu enregistré (avant-projet/projet sommaire), c'est cette version qui sera utilisée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ouverture d'un examen avec un compte-rendu enregistré automatiquement et créé par un autre utilisateur

Si vous ouvrez un examen dans lequel se trouve un compte-rendu enregistré automatiquement par un autre utilisateur, un avertissement s'affiche, indiquant qu'une version antérieure existe. Vous aurez la possibilité de :

- **Annuler :** le compte-rendu est annulé.
- **Continuer et abandonner l'enregistrement automatique :** le compte-rendu enregistré automatiquement sera supprimé et un nouveau compte-rendu démarre.

Remarque :

L'avertissement affiche le nom de l'utilisateur qui a créé le compte-rendu.


Enregistrement du compte-rendu

Lorsque vous avez fini de créer le compte-rendu, plusieurs actions sont possibles.

Le statut de l'examen est mis à jour selon ce qui est choisi dans la liste ci-dessus.

Action	Touche de raccourci	État de l'examen
Enregistrer et valider	F8	Finalisé
Envoyer pour correction	F7	Correction du compte-rendu en cours
Enregistrer provisoirement	CTRL + F8	À valider
Enregistrer le brouillon	ALT + F8	Dicté
Annuler	s/o	aucun changement de statut

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

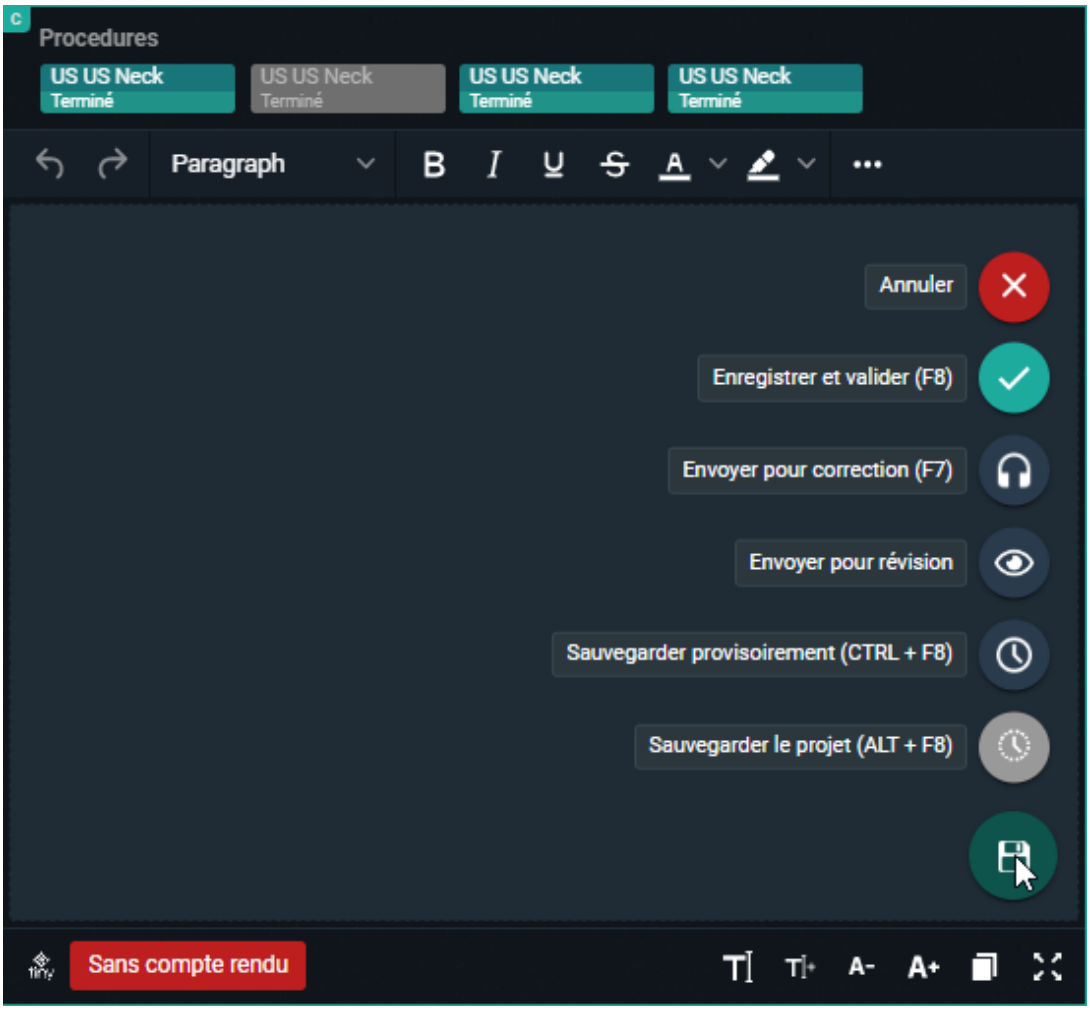

Le statut sera visible dans la colonne **Statut** de la liste de travail.



Selon vos préférences, l'une des actions suivantes se produira après l'enregistrement d'un compte-rendu :

- Retourner à la liste de travail
- Passer à l’examen suivant (les examens qui sont réservés ou verrouillés sont ignorés)
- Rester dans l’examen actuel

Vous pouvez mettre à jour votre Préférences (Page 112) dans les paramètres de l'utilisateur, sous l'onglet des préférences.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Ce réglage est uniquement visible lors de l'ouverture d'examens à partir de la liste de travail.

Icône du flux de travail

Le menu Flux de travail est accessible à partir de la barre d'outils supérieure de la visionneuse, via l'icône **WF** (Workflow).

Action	Description
Passer	Ignore l'examen (raccourci F9).
Modifier le statut	Modifie le statut de l'examen
Modifier statut et suivant	Modifie le statut de l'examen et passe à l'examen suivant
Modifier la priorité	Change la priorité de l'examen (permission requise).
Les options suivantes ne sont disponibles qu'en mode édition de compte-rendu	
Valider et suivant	Valide le compte-rendu et passe à l'examen suivant
Enregistrer préliminaire et suivant	Enregistre le compte-rendu comme préliminaire et passe à l'examen suivant
Valider et retourner à la liste	Valide le compte-rendu et retourne à la liste de travail
Enregistrer préliminaire et suivant	Enregistre le compte-rendu comme préliminaire et passe à l'examen suivant
Enregistrer préliminaire et retourner à la liste	Enregistre le compte-rendu comme préliminaire et retourne à la liste de travail

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

L'icône WF est uniquement visible lors de l'ouverture de l'examen à partir de la liste de travail.

Voir aussi

Configuration de la liste de travail (Page 345)

Préférences (Page 112)

9.3.1 RSDK

DeepUnity PACSonWEB prend en charge la **reconnaissance vocale RSDK** et **RSDK Atlas Engine**. Ces fonctions payantes ne peuvent être activées que par votre partenaire local DeepUnity PACSonWEB. Une fois activées, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles lors de l'édition d'un compte-rendu.

Important !

Pour activer RSDK Atlas engine, contactez votre partenaire local de service DeepUnity PACSonWEB pour obtenir de l'aide sur l'activation d'une option utilisateur supplémentaire et le réglage de Rsdkatlas = true.

Utilisation de RSDK

Indication de saisie vocale

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de reconnaissance vocale, le volume de votre entrée vocale doit se situer dans une certaine fourchette. Une barre colorée située sous l'icône du microphone indique le volume de votre voix :



Saisie vocale optimale

Indication de couleur	Volume
bleu	trop faible
jaune	acceptable

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés


SSN : DOC-4249895

Indication de couleur	Volume
vert	optimal
orange	élevé
rouge	trop élevé

Si l'entrée vocale atteint le niveau orange, un message vous invitera à baisser le volume pour une meilleure reconnaissance.

Comment utiliser les fonctionnalités

Le texte dicté peut être lu à l'aide des boutons spécifiques de l'éditeur de compte-rendu ou de leurs raccourcis correspondants.

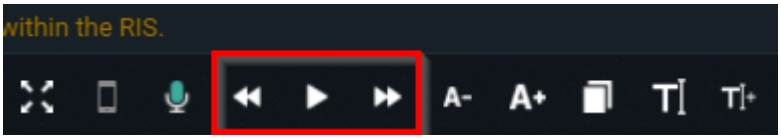

Bouton	Fonctionnalité	Action	Raccourci
▶	Lecture	Cliquez	ALT+F1
■	Arrêt	Cliquez	ALT+F1
◀◀	• Reculer de 1 mot • Rembobinage à une vitesse de 10 mots/ seconde	• Cliquez • Cliquer et maintenir enfoncé	ALT+F11
▶▶	• Passer 1 mot • Avance rapide à une vitesse de 10 mots/ seconde	• Cliquez • Cliquer et maintenir enfoncé	ALT+F12

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Conseil :

Si vous utilisez un clavier multimédia, vous pouvez également utiliser les touches de lecture correspondantes sur votre clavier.

Les fonctions de lecture peuvent également être contrôlées à l'aide d'une pédale, en configurant les combinaisons de touches suivantes :

Fonctionnalité	Raccourci
Lecture / Arrêt	ALT+F1
Démarrer/arrêter l'avance rapide	CTRL + ALT + F12
Démarrer/arrêter le rembobinage	CTRL + ALT + F11

Configuration des boutons SpeechMike

Les boutons SpeechMike peuvent être associés sur la page des raccourcis de DeepUnity PACSonWEB (voir la page suivante : Configuration des touches de raccourci personnelles (Page 120)). Par défaut, les boutons suivants sont associés :

- **Bouton Enregistrer** : Ce bouton est associé à la fonctionnalité d'enregistrement à bascule. Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau pour l'arrêter.
- **Bouton Lecture/arrêt** : Ce bouton est associé à la fonctionnalité de lecture alternée. Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer la lecture et appuyez à nouveau pour l'arrêter.
- **Bouton Avance** : Ce bouton est associé à la fonction d'avance rapide. Maintenez-le enfoncée pour avancer rapidement dans la lecture.
- **Bouton Rembobinage** : Ce bouton est associé à la fonction de rembobinage. Maintenez-le enfoncé pour revenir en arrière dans la lecture.

  N'importe quel bouton peut être relié à n'importe quel raccourci. Par exemple, le bouton F2 de SpeechMike peut être associé à la fonction d'édition de comptes-rendus.

Dispositifs pris en charge

Microphones de dictée	Commandes au pied
Philips SpeechMike Premium LFH3500	Philips ACC2310
Philips SpeechMike Premium LFH3510	Philips ACC2320

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Microphones de dictée	Commandes au pied
Philips SpeechMike Premium LFH3520	Philips ACC2330
Philips SpeechMike Premium LFH3600	
Philips SpeechMike Premium LFH3610	
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3700	
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3710	
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3720	
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3800	
Philips SpeechMike Premium Touch SMP3810	
Philips SpeechMike Premium Air SMP4000	
Philips SpeechMike Premium Air SMP4010	
Philips SpeechOne PSM6000	
Nuance PowerMic III	
Nuance PowerMic 4	

(source : https://github.com/GoogleChromeLabs/dictation_support)

Application Multi-Moniteur

Dans l'application multi-moniteur, toutes les rubriques ci-dessus fonctionnent sans aucune configuration.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Les boutons SpeechMike fonctionnent également lorsque l'application n'est pas focalisée. Par exemple, lorsque l'utilisateur travaille dans une autre application externe (Syngo.via), l'utilisateur peut toujours utiliser les boutons SpeechMike.

Configuration du navigateur

Les boutons SpeechMike ne fonctionneront pas dans le navigateur sans configuration.

Les boutons SpeechMike peuvent être utilisés dans Chrome, mais une configuration supplémentaire est nécessaire.

Contactez le service d'assistance de DH Healthcare GmbH pour configurer cette fonctionnalité.

Lecture synchrone

- **Sélectionnez un mot ou une phrase et appuyez sur lecture** : Le son du texte sélectionné est lu et s'arrête à la fin.
- **Placez le curseur à un endroit précis du texte et appuyez sur lecture** : L'audio sera lu à partir de la position du curseur jusqu'à la fin du texte.
- **Cliquez sur stop pendant la lecture** : L'audio s'arrête et le curseur se place à l'endroit correspondant dans le texte.

Enregistrement de l'audio du compte rendu

L'audio du compte rendu est enregistré en arrière-plan pour des raisons de performance.

L'audio du compte rendu est enregistré en arrière-plan pour des raisons de performance. Si l'enregistrement est toujours en cours lorsque vous fermez l'onglet du navigateur, un message d'avertissement apparaît. Si vous fermez l'onglet avant la fin de l'enregistrement, les fichiers audio seront perdus.


Conseil :

Pour une reconnaissance optimale, il est recommandé de régler le volume d'enregistrement du micro à un niveau assez bas dans les paramètres de son de Windows (p. ex. : SpeechMike : 15) pour minimiser le bruit de fond.

Configuration audio

Modifiez la configuration audio à partir de DeepUnity PACSonWEB en survolant l'icône du microphone.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

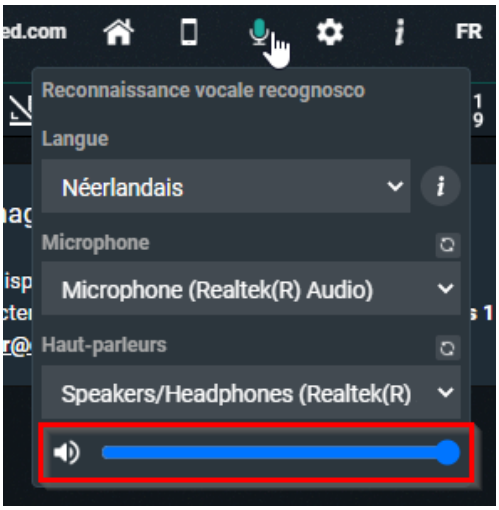

Pour configurer votre système audio :

1. Sélectionner la langue (si plusieurs langues sont disponibles)
2. Sélectionner le périphérique d'entrée.
3. Régler le volume d'entrée (premier curseur).

   Cette option est uniquement possible lors de l'utilisation de l'application Multi Monitor et d'appareils non-SpeechMike. Le paramètre est enregistré avec la combinaison « Utilisateur + périphérique d'entrée ».
4. Sélectionner le périphérique de sortie (pour la lecture).
5. Régler le volume audio (deuxième curseur).

   Ce paramètre est enregistré dans un cookie et est mémorisé pour cet ordinateur.


Commandes vocales

Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale Recognosco, les types de commandes vocales suivants peuvent être utilisés :

- Commandes de mise en forme (Gras, Italique, Souligné)
- Commandes de sélection
- Commandes de navigation
- Commandes de correction
- Commandes du microphone
- Commandes de liste à puces

Cliquez sur l'icône ***i*** à côté de la langue dans la configuration audio pour obtenir un aperçu de toutes les commandes vocales possibles.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

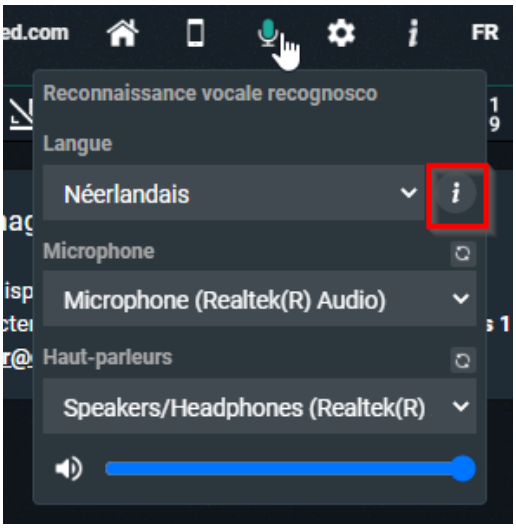

Commandes vocales disponibles :

- microphone désactivé
- (aller à) début de compte-rendu
- (aller à) début de document
- (aller à) fin de compte-rendu
- (aller à) fin de document
- (aller à) début de ligne
- (aller à) fin de ligne
- sélectionner la ligne
- sélectionner la phrase
- sélectionner le paragraphe
- sélectionner tout
- tout sélectionner
- couper le texte
- copier le texte
- coller le texte
- supprimer
- rayer
- mettre en gras
- souligner
- mettre en italique
- commencer une liste à puces

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- terminer la liste à puces
- verr. maj.
- titre
  - La commande vocale « titre » active la mise en forme de l'en-tête 1 tel que configuré dans la Préférences (Page 112) section Comptes-rendus.

ATTENTION :

Le texte reconnu n'est pas toujours 100 % correct. Il est de la responsabilité du radiologue de vérifier l'exactitude du compte rendu avant de le valider.

Pour obtenir de l'aide sur la dictée, consultez la section dans le mode d'emploi ou visitez la page d'aide de RSDK https://recognosco.com/help-support.

9.3.1.1 Aide à la dictée RSDK

Nombres cardinaux

Nombres

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
deux	deux
cinq	cinq
neuf	neuf
10	dix
15	quinze
150	cent cinquante
1500	mille cinq cents
2375	deux mille trois cent soixante-quinze
62 023	soixante-deux mille vingt-trois

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

555 123	cinq cent cinquante-cinq mille cent vingt-trois
5 millions	cinq millions
1 500 250 005	un milliard cinq cents millions deux cent cinquante mille cinq

Nombres ordinaux

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
premier	premier
première	première
troisième	troisième
neuvièmes	neuvièmes
11e	onzième
25e	vingt-cinquième

Nombres décimaux

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
3,75	trois virgule soixante-quinze
30,75	trente virgule soixante-quinze
33,775	trente-trois virgule sept cent soixante-quinze

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Fractions

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
1/2	un demi
1/3	un tiers
2/3	deux tiers
1/4	un quart
2/4	deux quarts
3/4	trois quarts
3 1/2	trois et demi
20 2/3	vingt deux tiers
140 3/4	cent quarante trois quarts

Nombres avec signe

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
-1 1/2	moins un et demi
+2	plus deux
= 2	signe égal deux
< 2	signe inférieur à deux
> 2	signe supérieur à deux
-2,5	moins deux virgule cinq

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

±2	plus moins deux
2+	deux plus
2,5-	deux virgule cinq moins
2±	deux plus moins
2 < 3	deux signe inférieur à trois
3 - 2 = 1	trois moins deux signe égal un

Chiffres romains

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
III	chiffre romain trois
III	trois chiffre romain
X	chiffre romain dix
X	dix chiffre romain

Dictée signe de multiplication "x"

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
3 x 4 cm	trois par/fois quatre centimètres
2-3 mm x 4 cm	deux à trois millimètres par/fois quatre centimètres
3,5 x 4 x 5	trois virgule cinq par/fois quatre par/fois cinq

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Domaine des valeurs

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
1-3	un à trois
de 1 à 3	de un à trois
1/2 à 2	un demi à deux
1500-2000	mille cinq cents à deux mille
entre 1500 et 2000	entre mille cinq cents et deux mille
3-5 %	trois à cinq pour cent
-3 à -5	moins trois à moins cinq

Mots toujours suivis d'un chiffre

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
annexe 2	annexe deux
bâtiment 2	bâtiment deux
bloc 2	bloc deux
Borg 2	Borg deux
chambre 2	chambre deux
chapitre 2	chapitre deux
classe 2	classe deux
clause 2	clause deux

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

CMC 2	CMC deux
colonne 2	colonne deux
CRP 2	CRP deux
demeurant 2	demeurant deux
demeure 2	demeure deux
domicilié 2	domicilié deux
grade 2	grade deux
escalier 2	escalier deux
image 2	image deux
immeuble 2	immeuble deux
IPD 2	IPD deux
IPP 2	IPP deux
MCP 2	MCP deux
Modic 2	Modic deux
niveau 2	niveau deux
partie 2	partie deux
résidence 2	résidence deux
scan 2	scan deux
segment 2	segment deux
série 2	série deux

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

sous-section 2	sous-section deux
stade 2	stade deux
tome 2	tome deux
type 2	type deux
volume 2	volume deux
zone 2	zone deux

Notez que l'entrée "grade" est reconnue avec des chiffres romains par défaut après la classification TNM.

Mots toujours précédés d'un nombre ordinal

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
1re année	première année
1er anévrisme	premier anévrisme
1er arrondissement	premier arrondissement
1re articulation	première articulation
1er avis	premier avis
1er bilan	premier bilan
1er bolus	premier bolus
1re catégorie	première catégorie
1er contrôle	premier contrôle
1re coupe	première coupe

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1re crise	première crise
1er cunéiforme	premier cunéiforme
1re cure	première cure
1re côte	première côte
1er degré	premier degré
1re diagonale	première diagonale
1er doigt	premier doigt
1er écho	premier écho
1re échographie	première échographie
1er enfant	premier enfant
1er épisode	premier épisode
1er espace	premier espace
1er étage	premier étage
1er examen	premier examen
1re fois	première fois
1re grossesse	première grossesse
1re génération	première génération
1re heure	première heure
1re hypothèse	première hypothèse
1re injection	première injection

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1re intervention	première intervention
1re IVT	première IVT
1er jour	premier jour
1re lecture	première lecture
1re ligne	première ligne
1re lésion	première lésion
1re minute	première minute
1er mois	premier mois
1er métacarpien	premier métacarpien
1er métatarsien	premier métatarsien
1er oeil	premier oeil
1er orteil	premier orteil
1re paire	première paire
1re partie	première partie
1re perfusion	première perfusion
1re phalange	première phalange
1re phase	première phase
1re pièce	première pièce
1re portion	première portion
1re poussée	première poussée

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

1re présentation	première présentation
1re rangée	première rangée
1er rayon	premier rayon
1re semaine	première semaine
1re séance	première séance
1er temps	premier temps
1er trimestre	premier trimestre
1er ventricule	premier ventricule
1re vertèbre	première vertèbre

Dictée de chiffres

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
0215680	zéro deux un cinq six huit zéro
0215680	zéro vingt-et-un cinquante-six quatre-vingts

Numération

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
1)	(nouvelle-ligne) premièrement
9)	(nouvelle-ligne) neuvièmement

Date & Horaires

Date

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
2005-12-24	deux mille cinq trait d'union douze trait d'union vingt-quatre
25/09/2000	vingt-cinq zéro neuf deux mille
25/09/00	vingt-cinq zéro neuf zéro zéro
11/2004	onze deux mille quatre
du 25/09/00 au 27/09/00	du vingt-cinq zéro neuf zéro zéro au vingt-sept zéro neuf zéro zéro
25/09/00 - 27/09/00	vingt-cinq zéro neuf zéro zéro trait d'union vingt-sept zéro neuf zéro zéro
du 06 au 10/11/09	du six au dix onze zéro neuf
le 25 mai 1999	le vingt-cinq mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
du 25 mai 1999 au 27 mai 1999	du vingt-cinq mai dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf au vingt-sept mai dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
du 6 au 10 novembre 1999	du six au dix novembre dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
du 06 au 10 novembre 1999	du zéro six au dix novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
le 1er janvier	le premier janvier

Horaires

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
6 h 00	six heures zéro zéro

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12 h 00	douze heures zéro zéro
00 h 00	zéro zéro heure zéro zéro
00 h 30	zéro zéro heure trente
6 h 10	six heures dix
12 h 5	douze heures cinq
04 h 00	zéro quatre heures zéro zéro
de 00 h 30 à 09 h 00	de zéro zéro heure trente à zéro neuf heures zéro zéro
de 12 h 45 à 20 h 45	de douze heures quarante-cinq à vingt heures quarante-cinq

Unités

Termes médicaux

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
3 mg	trois milligrammes
3 1/2 cm	trois centimètres et demi
3 1/2 cm	trois et demi centimètres
10 mEq	dix milliéquivalents
10 µmol/L	dix micromoles par litre
-5 °C	moins cinq degrés Celsius
5 %	cinq pour cent

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Analyse de sang

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
Hb 14,2	H B quatorze virgule
ALT 195	A L T cent quatre vingt quinze
albumine 35	albumine trente cinq
CRP 6	C R P six
SO2 94 %	S O deux quatre vingt quatorze pour cent
amylase = 164	amylase =\signe-égal-à cent soixante quatre

Numéro et lettre

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
A2	A deux
5b	cinq B
K44	K quarante-quatre
30d	trente D
densité A	densité A
densité A	densité majuscule A
densité A	densité type A

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pression artérielle

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
120/80	cent vingt sur quatre-vingts
130/70 mmHg	cent trente sur soixante-dix millimètre (de) mercure
13/7 cmHg	treize sur sept centimètre (de) mercure
100-120 sur 70-90 mmHg	cent à cent vingt sur soixante-dix à quatre-vingt-dix millimètre (de) mercure

Dosage

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
Fraxiparine 0,3 1x/jour	Fraxiparine zéro virgule trois une fois par jour
Isoptine 120 2/jour	Isoptine cent vingt deux par jour

French Scale

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
8 French	huit French
7F	sept F

Suture taille

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
Catgut 2/0	Catgut deux (barre oblique) zéro

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Dermalon 2/0	Dermalon deux (barre oblique) zéro
Dexon 2/0	Dexon deux (barre oblique) zéro
Ethibond 2/0	Ethibond deux (barre oblique) zéro
Ethilon 2/0	Ethilon deux (barre oblique) zéro
Flexidene 2/0	Flexidene deux (barre oblique) zéro
Monocryl 2/0	Monocryl deux (barre oblique) zéro
Nylon 2/0	Nylon deux (barre oblique) zéro
PDS 2/0	PDS deux (barre oblique) zéro
Prolène 2/0	Prolène deux (barre oblique) zéro
Vicryl 2/0	Vicryl deux (barre oblique) zéro

Gravida

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
G2P2A0	G deux P deux A zéro
G3P2	G trois P deux
G2	G deux

Apgar Scores

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
Apgar 9/9/10	Apgar neuf neuf dix
Apgar 9/9	Apgar neuf neuf

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Vertèbres

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
T12	T douze
Th12	T H douze
L3/L4	L trois quatre
L3/L4	L trois L quatre
C1-C5	C un à C cinq

V1-V9

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
V2	V deux
V1-V5	V un à (V) cinq
V1-V5	V un trait d'union (V) cinq
V1 et V5	V un et (V) cinq

BI-RADS

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
PI-RADS 5A	PI-RADS cinq A.
PI-RADS A	PI-RADS A.
BI-RADS 5	BI-RADS cinq
BI-RADS 0	BI-RADS zéro

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

TI-RADS B	TI-RADS B.
TI-RADS 5	TI-RADS cinq
LI-RADS 0	LI-RADS zéro
LI-RADS 5C	LI-RADS cinq C.
O-RADS IRM 5	O-RADS IRM cinq

Classification TNM

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
T1N0M0	T un N zéro M zéro
T4aN1M1	T quatre A N un M un
TXNX	T X N X
pT4a	P T quatre A
pT2cN1MX	P T deux C N un M X
T1N0 grade II	T un N zéro grade deux

CD

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
CD121	C D cent vingt-et-un
CD73a	C D soixante-treize A

Rapport E/A, E/Ea et E/E'

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

E/A 1,4	E (slash|par|sur) A un virgule quatre
E/A à 0,7	E (slash|par|sur) A à zéro virgule sept
E/Ea à 17	E (slash|par|sur) E A à dix-sept
E/Ea latéral 6,5	E (slash|par|sur) E A latéral six virgule cinq
E/E' à 4,7	E (slash|par|sur) E (barre|trait) à quatre virgule sept

Signes de ponctuation et caractères spéciaux

Espaces

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
Insérer une nouvelle ligne dans le document	nouvelle ligne; à la ligne; ligne suivante
Insérer un nouveau paragraphe dans le document	nouveau paragraphe; paragraphe; paragraphe suivant
Insérer une tabulation	tabulation

Signes de ponctuation

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
.	point; point final; dot
!	point d'exclamation
?	point d'interrogation; point interrogatif
,	virgule
:	deux points; double point

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

;	point virgule

Tiret

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
-	trait d'union; tiret
–	tiret moyen; tiret demi-cadratin
—	tiret long; tiret cadratin

Signes

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
'	apostrophe; signe apostrophe
_	tiret bas; sous-tiret; souligné; underscore
`	accent grave
&	et commercial; esperluette; esperluète; perluette; perluète
/	barre oblique; slash
\	barre oblique inversée; oblique inverse; backslash; antislash
//	deux barres
~	tilde; signe tilde
^	circonflexe; accent circonflexe
@	a commercial; arobas; arobase

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

…	signe points de suspension; points de suspension; signe trois points; point point point; trois petits points
#	croisillon; dièse
%	signe pour cent; signe pourcentage; signe du pourcentage
‰	signe pour mille; symbole pour mille
°	signe du degré; symbole degré

Guillemets

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter…**
‹	guillemet simple ouvrant; ouvrez guillemet simple; ouvrir guillemet simple
›	guillemet simple fermant; fermez guillemet simple; fermer guillemet simple
«	guillemets ouvrant; ouvrez guillemets; ouvrir guillemets; guillemets doubles ouvrant; ouvrez guillemets doubles; ouvrir guillemets doubles
»	guillemets fermant; fermez guillemets; fermer guillemets; guillemets doubles fermant; fermez guillemets doubles; fermer guillemets doubles
'	guillemet anglais simple ouvrant; ouvrez guillemet anglais simple; ouvrir guillemet anglais simple

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

'	guillemet anglais simple fermant; fermez guillemet anglais simple; fermer guillemet anglais simple
"	guillemets anglais ouvrant; ouvrez guillemets anglais; ouvrir guillemets anglais; guillemets anglais doubles ouvrant; ouvrez guillemets anglais doubles; ouvrir guillemets anglais doubles
"	guillemets anglais fermant; fermez guillemets anglais; fermer guillemets anglais; guillemets anglais doubles fermant; fermez guillemets anglais doubles; fermer guillemets anglais doubles

Parenthèses

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
(	parenthèse ouvrante; ouvrez la parenthèse; ouvrez les parenthèses; ouvrir la parenthèse; ouvrir les parenthèses
)	parenthèse fermante; fermez la parenthèse; fermez les parenthèses; fermer la parenthèse; fermer les parenthèses
[	crochet ouvrant; ouvrez le crochet; ouvrir le crochet; crochet gauche
]	crochet fermant; fermez le crochet; fermer le crochet; crochet droit
{	accolade ouvrante; ouvrez l'accolade; ouvrir l'accolade; accolade gauche

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

}	accolade fermant; fermez l'accolade; fermer l'accolade; accolade droit

Signes mathématiques

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
<	signe inférieur à
>	signe supérieur à
=	signe égal (à); symbole égal (à); signe d'égalité; symbole d'égalité
+	signe plus
-	signe moins
±	signe plus ou moins; symbole plus ou moins; signe plus moins; symbole plus moins
*	astérisque; étoile
×	signe multiplication; symbole multiplication; croix de multiplication
÷	signe division; symbole division
|	barre verticale; pipe
¬	signe négation; symbole non
f	signe de fonction; symbole de fonction
µ	signe micro; symbole micro
¼	signe un quart; symbole un quart

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

½	signe du demi; symbole du demi
¾	signe du trois quarts; symbole du trois quarts; signe trois quarts; symbole trois quarts
¹	signe exposant un; symbole exposant un; signe puissance un; symbole puissance un
²	signe exposant deux; symbole exposant deux; signe au carré; symbole au carré; signe puissance deux; symbole puissance deux
³	signe exposant trois; symbole exposant trois; signe cube; symbole cube; signe puissance trois; symbole puissance trois

Symboles monnaies

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
€	signe euro; symbole euro
£	signe livre sterling; symbole livre sterling; livre sterling; signe livre; symbole livre
$	signe du dollar; symbole dollar
¢	signe du centime; signe du cent; symbole centime; symbole cent
¥	signe du yen; symbole yen
¤	signe monnaie; symbole monnaie; signe monétaire; symbole monétaire

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Autres signes

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
©	signe du droit d'auteur; symbole copyright
®	signe marque; symbole marque; signe marque déposée; symbole marque déposée
™	signe anglais marque de commerce; symbole anglais marque de commerce
¶	pied de mouche
§	signe de paragraphe; symbole de paragraphe
·	puce; signe-de-puce; symbole puce
†	signe obèle; symbole obèle; obèle
‡	signe double obèle; symbole double obèle; double obèle
ª	indicateur ordinal féminin
º	indicateur ordinal masculin
¡	point d'exclamation inversé; point d'exclamation renversé; point d'exclamation à l'envers
¿	point d'interrogation inversé; point d'interrogation renversé; point d'interrogation à l'envers
´	accent aigu

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

·	point médian; point central; point en haut
¸	cédille; signe cédille
¨	tréma; signe tréma
¯	signe macron
¦	barre verticale discontinue; barre déjointe; barre à trou

Liste alphabétique des unités

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
%	pour cent
/h	par heure
/jour	par jour
/min	par minute
/mm³	par millimètre cube
°	degré; degrés
°C	degré Celsius; degrés Celsius; degré Centigrade; degrés Centigrade
°F	degré Fahrenheit; degrés Fahrenheit
µ³	microcube; microncube
µA	microampère; microampères
µCi	microcurie; microcuries

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

µg	microgramme; microgrammes
µGy.cm^2	microgray centimètre carré; micrograys centimètre carré
µL	microlitre; microlitres
µm	micromètre; micromètres
µmol	micromole; micromoles
µs	microseconde; microsecondes
µUI	micro-unité internationale; micro-unités internationales
µV	microvolt; microvolts
µW	microwatt; microwatts
A	ampère; ampères
aérosol	aérosol
aérosols	aérosols
aeg/L	AEG par litre; AEG par litres
ampoule	ampoule
ampoules	ampoules; ampoules
an	an
année	année
années	années
ans	ans

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

atm	atmosphère; atmosphères
bar	bar
bars	bar
batt/min	battement par minute; battements par minute
battement	battement
battements	battements
batts/min	battements par minute
boîte	boîte
boîtes	boîtes
bouffée	bouffée
bouffées	bouffées
bouteille	bouteille
bouteilles	bouteilles
bpm	BPM
Bq	becquerel; becquerels
C	coulomb; coulombs
cachet	cachet
cachets	cachets
cal	calorie; calories

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

capsule	capsule
capsules	capsules
cd	candela; candelas
cGy	centigray; centigrays
cigare	cigare
cigares	cigares
cigarette	cigarette
cigarettes	cigarettes
cL	centilitre
cm	centimètres
cm^2	centimètre carré; centimètres carrés
cm^3	centimètre cube; centimètres cube
cmHg	centimètre mercure; centimètres mercure
comprimé	comprimé
comprimés	comprimés
cuillère	cuillère
cuillère à café	cuillère à café
cuillère à thé	cuillère à thé
cuillerée	cuillerée

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

cuillerées	cuillerées
cuillères	cuillères
cuillères à café	cuillères à café
cuillères à thé	cuillères à thé
cycle	cycle
cycles	cycles
dB	décibel; décibels
dL	décilitre; décilitres
dm	décimètre; décimètres
dm^2	décimètre carré; décimètres carrés
dm^3	décimètre cube; décimètres cube
dose	dose
doses	doses
épisode	épisode
épisodes	épisodes
Eq	équivalent; équivalents
fL	femtolitre; femtolitres
flapule	flapule
flapules	flapules
fois	fois

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

g	gramme; grammes
g%	gramme pour cent; grammes pour cent
gauge	gauge
gauges	gauges
GBq	gigabecquerel; gigabecquerels
gélule	gélule
gélules	gélules
GHz	gigahertz
giga/L	giga par litre
gobelet	gobelet
gobelets	gobelets
goutte	goutte
gouttes	gouttes
Gy	gray; grays
Gy.cm^{-2}	gray centimètre carré; grays centimètre carré
heure	heure
heures	heures
Hz	hertz
inhalation	inhalation

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

inhalations	inhalations
injection	injection
injections	injections
J	jour; jours
jour	jour
jours	jours
K	kelvin; kelvins
kA	kiloampère; kiloampères
kBq	kilobecquerel; kilobecquerels
kcal	kilocalorie; kilocalories
kg	kilogramme; kilogrammes; kilo; kilos
kHz	kilohertz
kJ	kilojoule; kilojoules
km	kilomètre; kilomètres
km/h	kilomètre par heure; kilomètres par heure
kmol	kilomole; kilomoles
kOhm	kiloohm
kPa	kilopascal; kilopascals
kV	kilovolt; kilovolts

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

kW	kilowatt; kilowatts
kWh	kilowatt heure; kilowatts heure
L	litre; litres
lb	livre
lbs	livres
m	mètre; mètres
m^2	mètre carré; mètres carrés
m^3	mètre cube; mètres cube
mA	milliampère; milliampères
mbar	millibar; millibars
MBq	mégabecquerel; mégabecquerels
mC	microcoulomb; microcoulombs
mCi	millicurie; millicuries
mEq	milliéquivalent; milliéquivalents
MET	met
MeV	méga-électron-volt; méga-électron-volts
mg	milligramme; milligrammes
mg%	milligramme pour cent; milligrammes pour cent
mGy	milligray; milligrays

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

mGy.cm	milligray centimètre; milligrays centimètre
mGy.cm^2	milligray centimètre carré; milligrays centimètre carré
MHz	mégahertz; mégahertz
minute	minute
minutes	minutes
mJ	millijoule; millijoules
mL	millilitre; millilitres; M L
mL/min/1.73 m^2	millilitre par minute par un point soixante-treize mètre carré; millilitres par minute par un point soixante-treize mètre carré
mm	millimètre; millimètres
mm^2	millimètre carré; millimètres carrés
mm^3	millimètre cube; millimètres cube
mmHg	millimètre mercure; millimètres mercure
mmol	millimole; millimoles
MOhm	megaohm
mois	mois
mol	mole; moles
ms	milliseconde; millisecondes

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

mSv	millisievert; millisieverts
mU	milliunité; milliunités
mUI	milliunité internationale; milliunités internationales
mU/L	milliunité par litre; milliunité par litres
mV	millivolt; millivolts
MV	megavolt; megavolts
mW	milliwatt; milliwatts
MW	mégawatt; mégawatts
N	newton; newtons
ng	nanogramme; nanogrammes
nm	nanomètre; nanomètres
nmol	nanomole; nanomoles
ns	nanoseconde; nanosecondes
nuit	nuit
nuits	nuits
oz	once; onces
Pa	pascal; pascals
PA	paquet année; paquets année
paquet	paquet

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

paquets	paquets
pg	picogramme; picogrammes
pied	pied
pieds	pieds
pmol	picomole; picomoles
pouce	pouce
pouces	pouces
ppb	part per billion; partie par milliard
ppm	partie par million; parties par million
prise	prise
prises	prises
puff	puff
puffs	puffs
reprise	reprise
reprises	reprises
s	seconde; secondes
sachet	sachet
sachets	sachets
semaine	semaine
semaines	semaines

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sv	sievert; sieverts
tr/min	tour par minute; tours par minute
U	unité; unités
UH	unité Hounsfield; unités Hounsfield
UI	unité internationales; unités internationales
UPA	unité paquet année; unités paquet année
V	volt; volts
verre	verre
verres	verres
W	watt; watts

Références

Dictionnaires

Comme référence, nous utilisons les sources suivantes:

Le Petit Robert (www.lerobert.com)

Dictionnaire médical, Quevauvilliers (2009)

Dictionnaire de l'académie de Médecine (dictionnaire.academie-medecine.fr)

Normes orthographiques mises en place conformément aux recommandations de l'Académie française.

Commandes

Épeler

Limitation de l'utilisation de la fonction d'épellation: les mots épelés doivent contenir au moins 3 lettres. Les commandes initiales "épeler" ou "j'épelle" sont obligatoires si des lettres seules sont utilisées lors de l'épellation.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
Fatma	(épeler/j'épelle) François Anatole Thérèse Marie Anatole
Fatma	épeler/j'épelle F A T M A
Rose-Marie	(épeler/j'épelle) Robert Oscar Suzanne Eugène trait d'union Marcel André Roméo Isabelle Eugène
Rose Marie	(épeler/j'épelle) Robert Oscar Suzanne Eugène espace Marcel André Roméo Isabelle Eugène
CdR	épeler/j'épelle C D (en) majuscule/ capitale R

Supports alphabets d'épellation: lettres seules, alphabet téléphonique français, alphabet phonétique OTAN, variantes belges, suisses et canadiennes. Pour plus d'informations, voir http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:French_phonetic_alphabet et http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phonétique_de_l'OTAN

Commandes de formatage

Le tableau suivant explique comment utiliser les commandes durant la dictée. Les mots en *italique* indiquent l'emplacement des mots ou phrases à dicter lors de la commande.

Pour faire apparaître	Veuillez dicter...
Insérer un mot écrit entièrement (par exemple si vous souhaitez écrire le mot "virgule" au lieu d'obtenir le signe de ponctuation)	littéral *mot*
Insérer un nombre en chiffres	en chiffre *nombre*
Ne pas insérer d'espace avant le mot suivant	pas d'espacement

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ecrire la première lettre d'un mot en majuscule	majuscule *mot*
Ecrire toutes les lettres d'un mot en majuscules	tout en majuscules *mot*
Ecrire toutes les lettres d'un mot en minuscules	tout en minuscules/pas de majuscules *mot*
Des commandes pour démarrer des titres/des majuscules permanents	commence titre; commence titre en majuscule; commence phrase en majuscule; commence en majuscule; phrase en majuscule; titre en majuscule
Des commandes pour terminer des titres/des majuscules permanents	finis titre, finis titre en majuscule, finis phrase en majuscule, finis en majuscule, nouvelle-ligne, nouveau-paragraphe, :\deux-points, .\point

Balises de formatage

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
<D_NP/>	début nom propre
<F_NP/>	fin nom propre
<D_JUST/>	début justifié; début texte en justifié; début alignement
<F_JUST/>	fin justifié; fin texte en justifié; fin alignement
<D_C/>	début centré; début texte centré
<F_C/>	fin centré; fin texte centré
<D_TAB/>	début tableau

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

<F_TAB/>	fin tableau
<D_CDAT/>	début calcul date
<F_CDAT/>	fin calcul date
<D_G/>	début gras; début texte gras
<F_G/>	fin gras; fin texte gras
<D_ITAL/>	début italique; début texte italique
<F_ITAL/>	fin italique; fin texte italique
<D_SOUL/>	début souligne; début souligné; début texte souligne; début texte souligné
<F_SOUL/>	fin souligne; fin souligné; fin texte souligne; fin texte souligné
<D_RET/>	début retrait
<F_RET/>	fin retrait
<D_INS/>	début instruction
<F_INS/>	fin instruction
<D_CP/>	début côte de plaidoirie
<F_CP/>	fin côte de plaidoirie
<D_CS/>	début côte suivante
<F_CS/>	fin côte suivante
<D_INA/>	début insertion; insérer texte
<D_GAU/>	début aligner à gauche

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

<F_GAU/>	fin aligner à gauche
<D_DRO/>	début aligner à droite
<F_DRO/>	fin aligner à droite
<VBD/>	V B D
<SDEV/>	S D E V; S def
<SDIST/>	S D I S T; S dist
<MCC/>	M C C

TextBlock et commandes de navigation (seulement pour la reconnaissance vocale Front-End)

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
Aller à la section suivante	section suivante champ suivant suivant
Aller à la section précédente	section précédente champ précédent précédent
Atteindre directement une section	*nom de la section* *aller à nom de la section* *atteindre nom de la section* *passer à nom de la section*
Aller au début du rapport	(aller à) début du rapport (aller à) début du document
Atteindre la fin du rapport	(aller à) fin du rapport

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	(aller à) fin du document
Aller au début de la ligne	(aller à) début de ligne
Atteindre la fin de la ligne	(aller à) fin de ligne
Aller au début de la section	(aller à) début de la section (aller à) début de champ
Atteindre la fin de la section	(aller à) fin de la section (aller à) fin de champ
Insérer un TextBlock	insérer *nom du TextBlock* *inséré le bloc nom du TextBlock*

Correction commandes (seulement pour la reconnaissance vocale Front-End)

Pour faire apparaître	**Veuillez dicter...**
Selectionner le texte dicté	sélectionner *texte*
Résoudre les ambiguïtés apparentes de sélection de commande	*OK* ou *numéro* pour confirmer la sélection annuler pour annuler la sélection
Sélectionner la ligne courante, i.e. le texte entre les retours chariot avant et après le curseur de texte est sélectionné.	sélectionner la ligne
Sélectionner le paragraphe en cours, i.e. le texte entre les paragraphes avant et après le curseur de texte est sélectionné.	sélectionner le paragraphe
Sélectionner la phrase courante	sélectionner la phrase

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sélectionner le contenu du contrôle d'édition. En cas d'utilisation d'un contrôle d'édition multiple, seul le texte du contrôle d'édition actif est sélectionné.	sélectionner tout
Couper le texte de la sélection en cours et l'ajouter au presse-papiers	couper le texte
Copier le texte de la sélection en cours et l'ajouter au presse-papiers	copier le texte
Coller le texte à la position actuelle	coller le texte
Supprimer le texte sélectionné ou le dernier résultat de reconnaissance vocale Si déclenché sur une sélection de texte : le texte sélectionné sera supprimé Si déclenché sans sélection de texte : le dernier résultat de reconnaissance vocale sera supprimé (remarque : toute commande vocale ou édition manuelle invalidera la mémoire tampon du dernier résultat de reconnaissance vocale et la commande ne déclenchera aucune action.)	supprimer

9.3.2 Reconnaissance vocale Dragon

DeepUnity PACSonWEB prend en charge le **moteur vocal Dragon**. Cette fonction payante ne peut être activée que par votre partenaire local DeepUnity PACSonWEB. Une fois activée, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles lors de l'édition d'un compte-rendu.

Important !

Pour activer le moteur vocal Dragon, contactez votre partenaire de service local DeepUnity PACSonWEB qui vous aidera à configurer vos options utilisateur.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Utilisation de Dragon

Une fois activée, les boutons suivants deviennent accessibles lors de l'édition d'un compte-rendu :



Indication de saisie vocale

Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de reconnaissance vocale, le volume de votre entrée vocale doit se situer dans une certaine fourchette. Une barre colorée située sous l'icône du microphone indique le volume de votre voix :

Indication de couleur	Volume
bleu	trop faible
jaune	acceptable
vert	optimal
orange	élevé
rouge	trop élevé

Si l'entrée vocale atteint le niveau orange, un message vous invitera à baisser le volume pour une meilleure reconnaissance.

Configuration des boutons SpeechMike

Vous pouvez affecter les boutons de votre SpeechMike à la page des **Raccourcis** de DeepUnity PACSonWEB (voir Configuration des touches de raccourci personnelles (Page 120)).

Par défaut, seul le bouton **Enregistrement** est associé à la fonctionnalité **Activer/ désactiver enregistrement**. Appuyez sur le bouton d'enregistrement une fois pour démarrer l'enregistrement et une autre fois pour l'arrêter.

N'importe quel bouton peut être associé à n'importe quel raccourci. Par exemple, le bouton F2 du SpeechMike pourrait être associé à la fonctionnalité **Modifier le compte-rendu.**

Étant donné que l'implémentation actuelle de Dragon ne prend pas en charge les fonctions Avance rapide, Rembobinage et Lecture, ces boutons ne seront pas

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

affichés dans la visionneuse, et il n'est pas utile de les configurer dans les touches de raccourci, puisqu'ils ne sont pas pris en charge.

Application Multi-Moniteur

Les boutons du SpeechMike restent fonctionnels lorsque vous travaillez sur DeepUnity PACSonWEB et que vous utilisez l'application multi-moniteur. Par exemple, vous pouvez continuer à utiliser les boutons SpeechMike tout en travaillant dans une application externe, comme Syngo.via.

Navigateur

Les boutons SpeechMike nécessitent une configuration supplémentaire pour fonctionner lorsque vous utilisez DeepUnity PACSonWEB à partir de votre navigateur. Ils sont compatibles avec Chrome, mais nécessitent une configuration.

Contactez votre partenaire local pour configurer cette fonctionnalité.

Configuration audio

Pour configurer votre système audio :

1. Sélectionner la langue (si plusieurs langues sont disponibles)
2. Choisissez le périphérique d'entrée dans la liste (l'entrée par microphone doit être autorisée dans votre navigateur).

Commandes vocales

Lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale Dragon, les types de commandes vocales suivants peuvent être utilisés :

- Commandes de mise en forme (gras, italique, souligné)
- Commandes de sélection
- Commandes de navigation
- Commandes de correction
- Commandes du microphone
- Commandes de liste à puces

Cliquez sur l'icône ***i*** à côté de la langue dans la configuration audio pour obtenir un aperçu de toutes les commandes vocales possibles.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Commandes vocales disponibles

Anglais	Néerlandais	Français	Allemand	Espagnol
microphone off	microfoon uit	désactiver micro	Mikrofon aus	micrófono apagado
go to beginning of report	ga naar begin van het document	aller au début du document	gehe zum Beginn des Dokuments	ir al inicio del documento
go to beginning of document	ga naar begin van het dictaat	aller au début du compte-rendu	gehe zum Ende des Dokuments	ir al final del documento
go to end of report	ga naar einde van het document	aller à la fin du compte-rendu	gehe zum Zeilenanfang	ir al inicio del informe
go to end of document	ga naar einde van het dictaat	aller à la fin du document	gehe zum Zeilenende	ir al final del informe
go to beginning of line	ga naar begin van de lijn	aller au début de ligne	nächstes Feld	ir al inicio de la línea
go to end of line	ga naar begin van de regel	aller à la fin de ligne	voriges Feld	ir al final de la línea
next section	ga naar einde van de lijn	section suivante	nächster Abschnitt	sección siguiente
previous section	ga naar einde van de regel	section précédente	vorheriges Feld	sección anterior
next field	volgend veld	champ suivant	nächste Sprungmarke	campo siguiente
previous field	vorig veld	champ précédent	voriger Abschnitt	campo anterior

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Anglais	Néerlandais	Français	Allemand	Espagnol
next	volgende sectie	suivant	nächste Textmarke	siguiente
previous	vorige sectie	précédent	vorheriger Abschnitt	anterior
select line	next	sélectionner la ligne	vorige Sprungmarke	seleccionar frase
select sentence	rij selecteren	sélectionner la phrase	vorherige Sprungmarke	seleccionar línea
select paragraph	lijn selecteren	sélectionner le paragraphe	vorige Textmarke	seleccionar párrafo
select all	regel selecteren	sélectionner tout	vorherige Textmarke	seleccionar todo
select everything	zin selecteren	couper le texte	Zeile markieren	cortar selección
cut text	paragraaf selecteren	copier le texte	Satz markieren	cortar texto
copy text	alinea selecteren	coller le texte	Absatz markieren	copiar texto
paste text	alles selecteren	supprimer	alles markieren	copiar selección
delete that	selectie knippen	en gras	Text ausschneiden	pegar texto
make bold	tekst knippen	souligner	Text kopieren	pegar selección
underline	selectie kopiëren	en italique	Text einfügen	eliminar selección

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Anglais	Néerlandais	Français	Allemand	Espagnol
make italic	tekst kopiëren	commencer la liste à puces	bitte löschen	borrar texto
italicize	selectie plakken	arrêter la liste à puces	Text löschen	eliminar texto
start bullet list	tekst plakken	titre	fett machen	borrar selección
stop bullet list	verwijder dat	tout en majuscules	unterstreichen	poner en negrita
end bullet list	selectie verwijderen	Insérer [bloc de texte code]	kursiv schreiben	subrayar
title	tekst verwijderen		Aufzählungsliste starten	poner en cursiva
capitalize	maak vet		Aufzählungsliste stoppen	empezar a enumerar
Insert [Text block code]	onderlijn dat		Titel	dejar de enumerar
	maak schuin		in Großbuchstaben	empezar listado
	start opsomming		[Textblock code] einfügen	terminar listado
	stop opsomming			todo en mayúsculas
	titel			Insertar [bloque de texto code]
	grootschrift			

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Anglais	Néerlandais	Français	Allemand	Espagnol
	[Tekstblok code] invoegen			

ATTENTION :

Le texte reconnu n'est pas toujours 100 % correct. Il est de la responsabilité du radiologue de vérifier l'exactitude du compte rendu avant de le valider.

9.3.3 Flux de travail du transcripteur


DeepUnity PACSonWEB prend en charge un flux de travail de transcription, permettant à un transcripteur de vérifier et de corriger le compte-rendu enregistré, sur la base de l'enregistrement sonore du compte-rendu.

Pour écouter l'audio du compte-rendu dicté par le radiologue, le logiciel de reconnaissance vocale RSDK doit être activé pour le radiologue et le transcripteur.

Flux de travail:

Lorsqu'il enregistre un compte-rendu, le radiologue peut lancer le flux de transcription en utilisant l'option « Envoyer pour correction ».

Le statut de l'examen sera défini sur « En attente de correction du compte-rendu ».

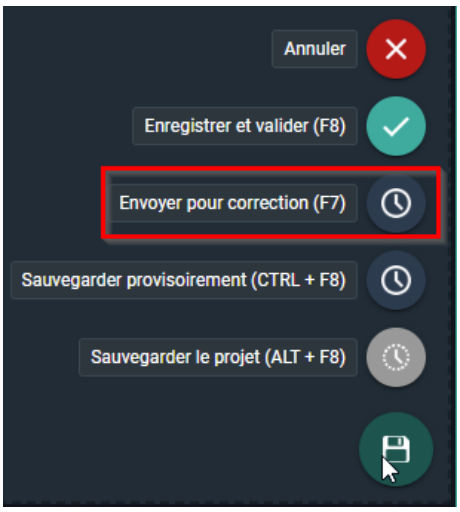


Un transcripteur peut maintenant ouvrir l'examen, écouter l'audio du compte-rendu et corriger toute erreur dans le compte-rendu.

Le transcripteur dispose des options suivantes pour enregistrer le compte-rendu :

- Enregistrer et valider
- Envoyer pour approbation

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Enregistrer

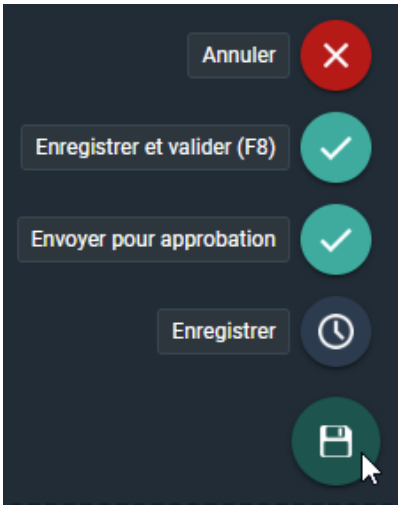

S'il clique sur « Enregistrer et valider », le compte-rendu est enregistré et validé au nom du radiologue. Le statut de l'examen est défini sur « Finalisé ».

Remarque :

cela nécessite une autorisation supplémentaire pour le transcripteur.

Si vous utilisez « Envoyer pour approbation », le compte-rendu est enregistré et renvoyé au radiologue pour validation. Le statut de l'examen est défini sur « À valider ».

Si l'option « Enregistrer » est utilisée, les modifications sont enregistrées et le transcripteur peut finaliser le compte-rendu plus tard. Le statut de l'examen reste « En attente de correction du compte-rendu »

9.3.4 Interne - Flux de travail Superviseur

DeepUnity PACSonWEB prend en charge un flux de travail Interne – Superviseur, permettant à un superviseur de valider le compte-rendu d'un Interne.


Dans DU POW, un Interne est défini comme un utilisateur qui peut modifier un compte-rendu, mais pas le valider.

Ce flux de travail peut également servir de flux de co-auteur entre des radiologues.

Flux de travail interne

L'interne créé un compte-rendu et l'envoie au superviseur pour relecture.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

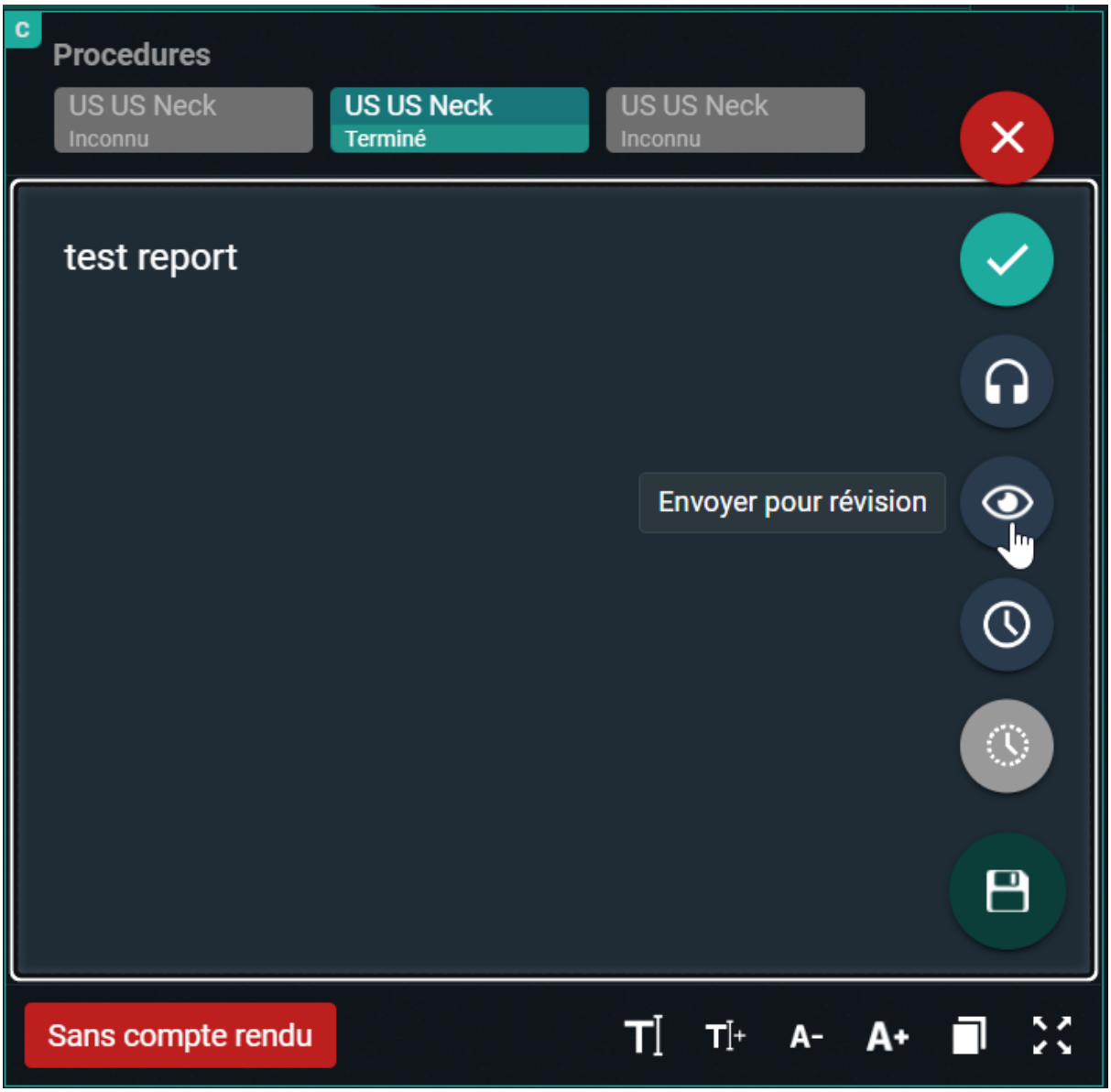

Après avoir cliqué sur « envoyer pour relecture », l'interne doit sélectionner le superviseur (cela requiert une cartographie utilisateur correcte).


Il est possible d'ajouter un message facultatif pour fournir des informations supplémentaires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

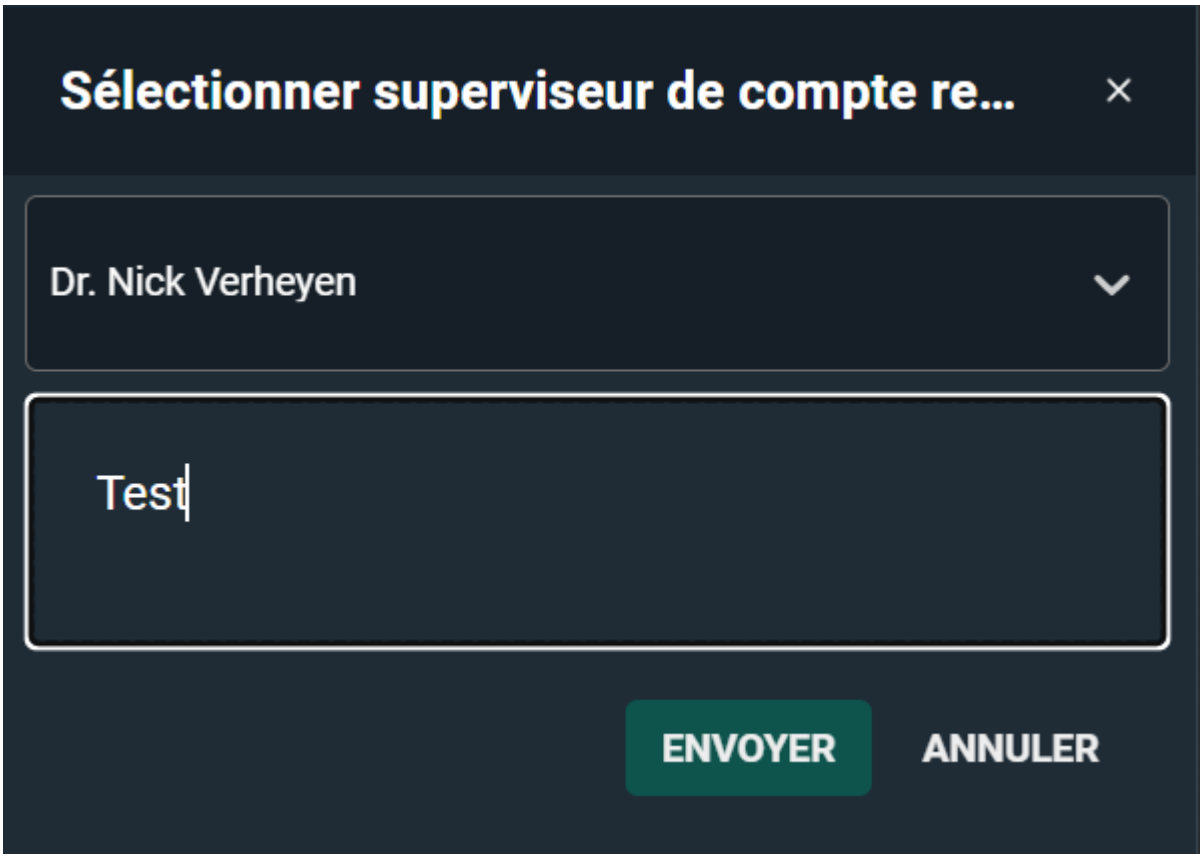

Le flux de travail peut s'achever ici pour l'interne si le superviseur valide le compte-rendu.


Toutefois, si le Superviseur décide de le renvoyer à son auteur (comme expliqué dans le flux de travail Superviseur), l'interne trouvera le document d'examen dans la liste de travail « Tous mes non lus ».

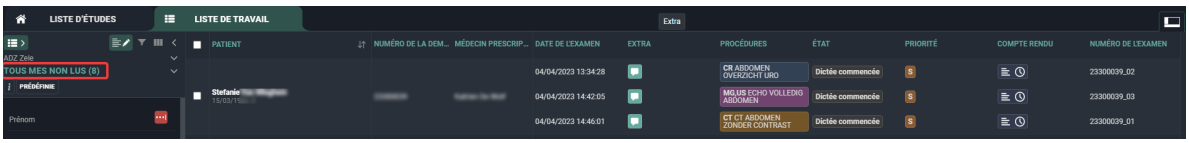

Ce flux de travail peut alors être suivi à nouveau jusqu'à validation du compte-rendu.

Flux de travail Superviseur:

L'examen est disponible dans la liste de travail « Mes relectures » du superviseur. Le statut de l'examen sera le suivant : En attente de deuxième validation.

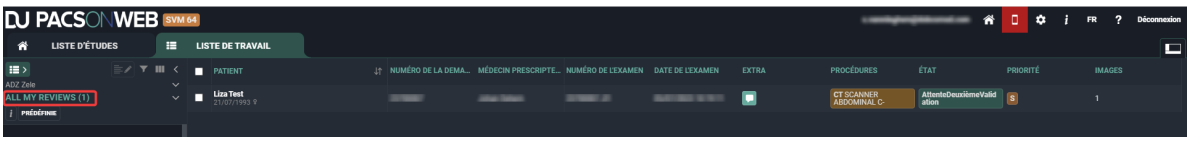


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Pour corriger le compte-rendu rédigé par l'interne, ouvrez l'examen et ouvrez le compte-rendu (s'il ne s'ouvre pas automatiquement).


Une fois les corrections effectuées, le superviseur dispose des options suivantes :

- Enregistrer et valider : Statut Finalisé
- Renvoyer à l'auteur (Interne) : Statut À valider
- Envoyer pour relecture (autre radiologue) : Statut En attente de deuxième validation
- Enregistrer provisoirement : Statut À valider

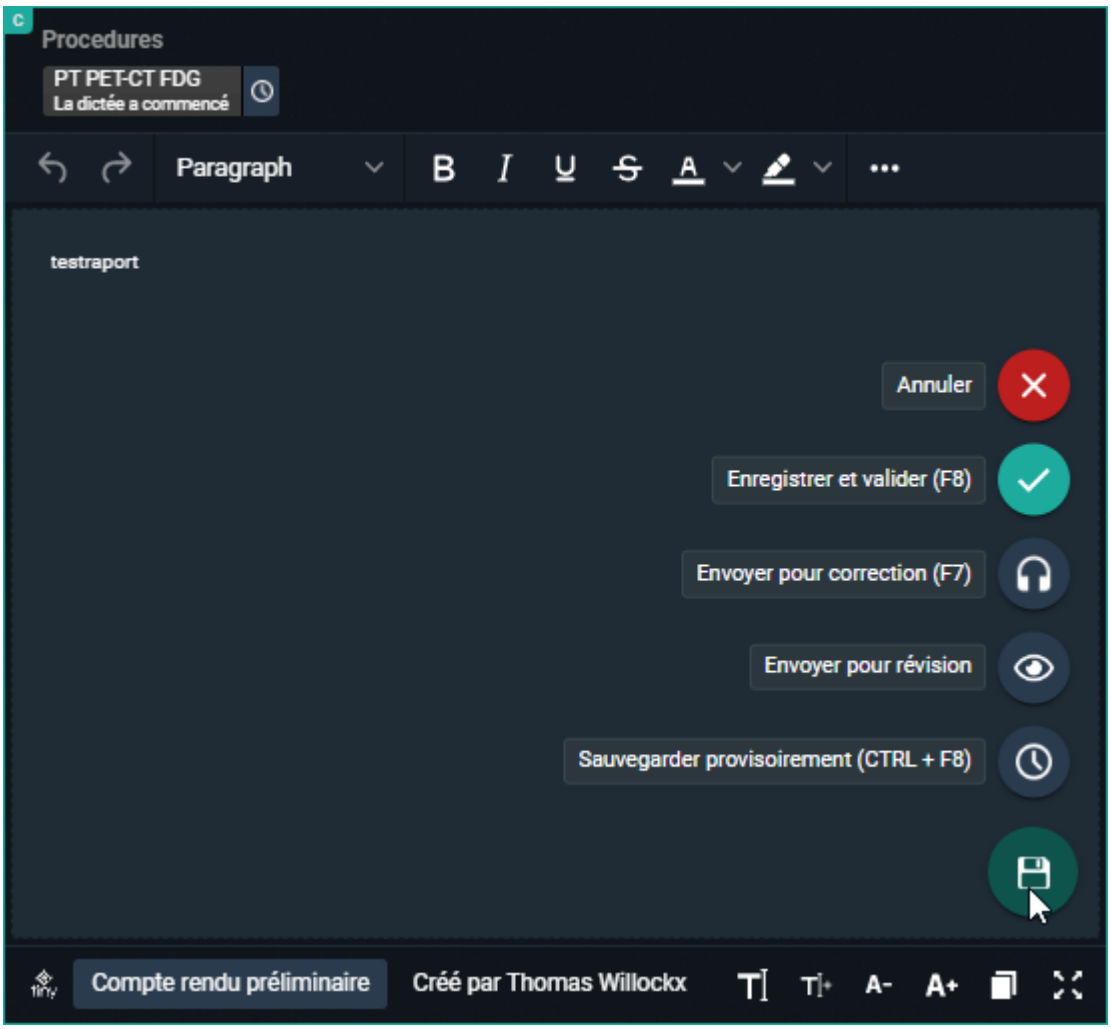

Si « renvoyer à l'auteur » est sélectionné, le superviseur a la possibilité d'indiquer les raisons du renvoi dans un message.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

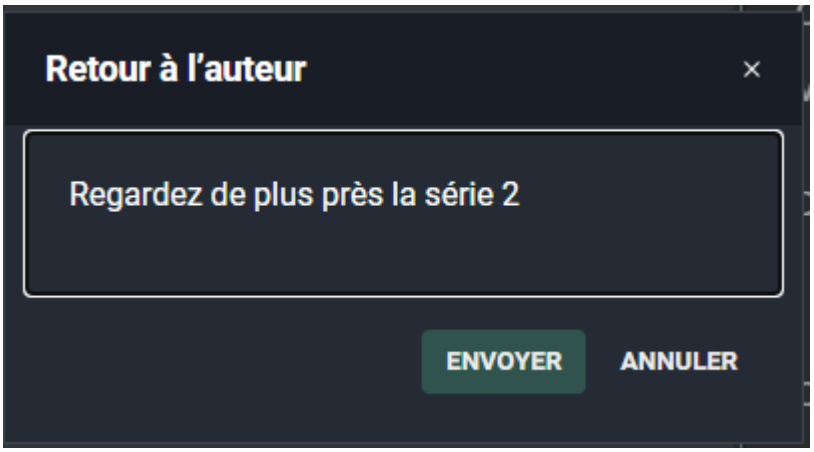

L'interne doit alors corriger le compte-rendu et suivre à nouveau le flux de travail Interne mentionné ci-dessus.

Ce cycle se répète jusqu'à la validation du compte-rendu par un Superviseur.

Une fois le compte-rendu validé, il devra comporter les deux signatures (si configuré à cet effet).

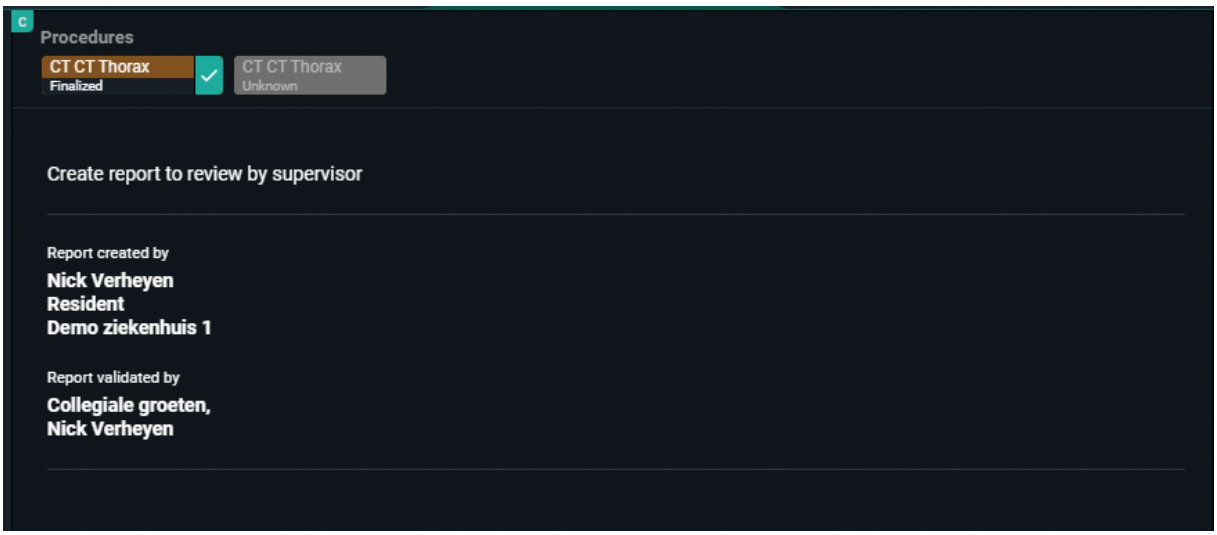

9.3.5 Flux de travail de l'addendum

Dans le contexte d'un compte-rendu, un addendum est utilisé pour mettre à jour ou corriger un compte-rendu finalisé. Les addenda permettent aux radiologues d'ajouter des détails manquants, de clarifier des résultats ou de corriger des erreurs tout en conservant le compte-rendu original.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Restriction :


Pour activer ce flux de travail, veuillez contacter votre administrateur système.

Vous pouvez créer un compte-rendu addendum si un compte-rendu validé a été créé. Lorsqu'un compte-rendu validé est ouvert, les options suivantes sont disponibles :

Bouton	Action	Résultat
	Ajouter un addendum	Crée une section addenda au-dessus du compte-rendu original.
	Modifier le compte-rendu	Permet d'éditer le compte-rendu validé. **Remarque :** Ce bouton peut être associé à une durée (réglage). Par exemple, si un délai de 10 minutes a été configuré, vous ne pouvez modifier le compte-rendu validé que pendant 10 minutes, après quoi le flux de travail Addendum est obligatoire. Une fois qu'un addendum est ajouté au compte-rendu, l'option de modification du compte-rendu validé n'est plus disponible, quelle que soit la durée restante de la période configurée.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ajout d'un addendum

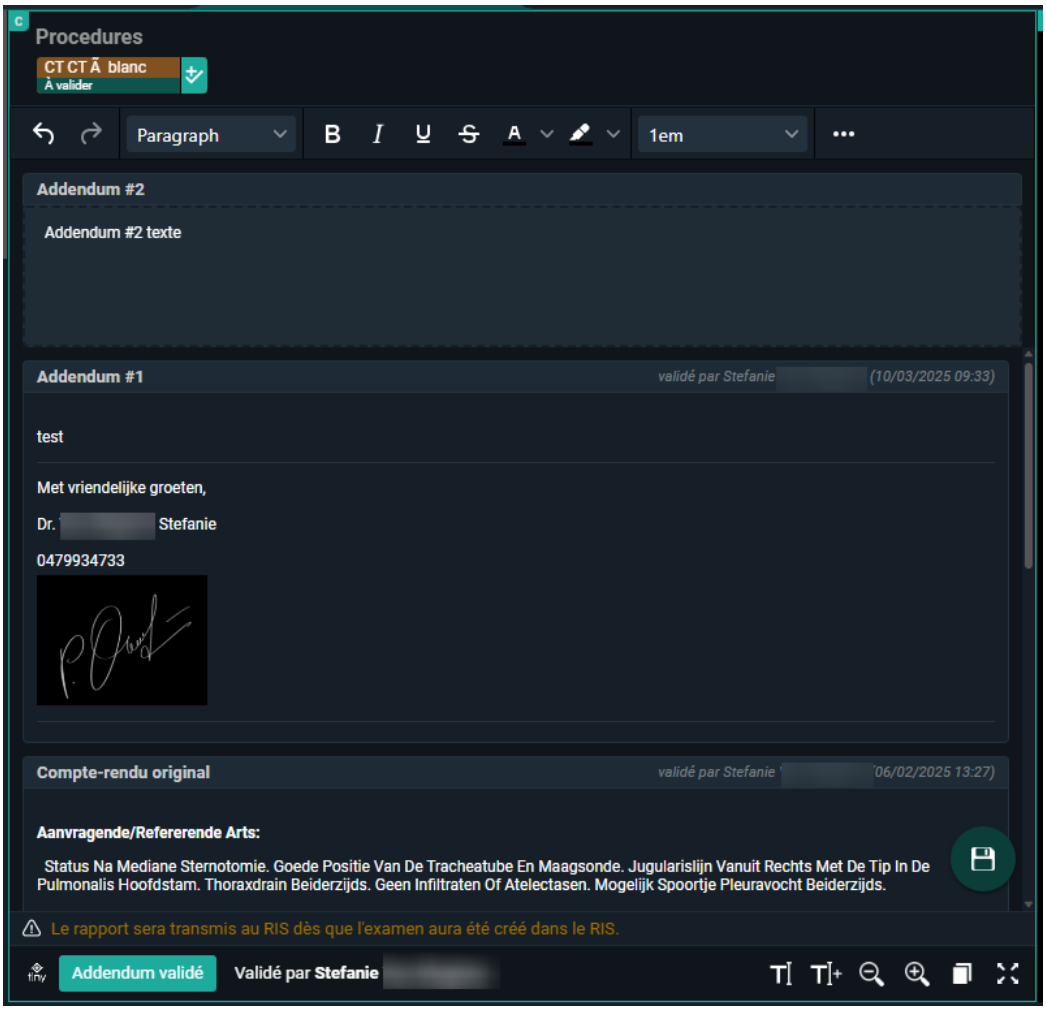

1. Sélectionnez le compte-rendu validé auquel vous souhaitez ajouter un addendum.
2. Ouvrez-le dans la visionneuse et cliquez sur le bouton **Ajouter un addendum**.

   L'addendum s'affiche au-dessus du compte-rendu original.
   - Le numéro de l'addendum (Addendum #1, Addendum #2, etc.) est indiqué dans l'entête de la section addendum.
   - Vous pouvez modifier l'addendum au cours du processus d'élaboration de l'addendum.
   - Le compte-rendu original est affiché, mais ne peut pas être modifié.
     - Vous pouvez voir qui a créé le compte-rendu original et la date/heure à laquelle il a été validé.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- S'il est configuré, le compte-rendu original contient la signature du validateur original. Elle ne sera pas mise à jour par le validateur de l'addendum.

Limites prévues

- Il n'est pas possible de lier ou de dissocier des procédures du compte-rendu pendant le processus d'ajout d'un addendum.
- Le flux de travail de l'addendum ne permet que d'**annuler** ou d'**enregistrer et de valider** l'addendum.

Addenda validés

- Les addenda validés sont affichés au-dessus du compte-rendu original et contiennent leurs propres signatures de compte-rendu et la validation de la date et de l'heure.
- Dans le cas d'un compte-rendu comportant plusieurs addenda, ceux-ci sont affichés par ordre chronologique, l'addenda le plus récent étant placé en tête de liste.
- Le statut dans la liste de travail restera **Finalisé**.

9.4 L'établissement de rapports multi-procédure


L'établissement de comptes-rendus multi-procédure consiste à créer 1 compte-rendu pour un ordre contenant plus de 1 procédure.

Seules les procédures dans le même ordre et qui n'ont pas de compte-rendu peuvent être ajoutées.

Il y a 3 façons possibles de travailler avec les rapports multi-procédures. Le comportement réel est défini par un paramètre, configuré pour la source.

1) Examen unique


Le compte-rendu ne sera lié qu'à la procédure sélectionnée. Il est possible de lier des procédures manuellement au compte-rendu en mettant en surbrillance la description de la procédure.

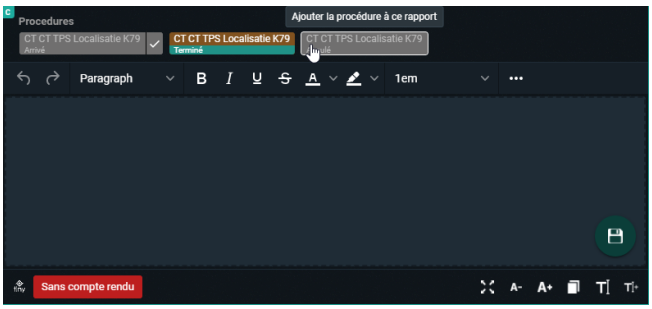

2) Toutes les études de l'ordre


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Le compte-rendu sera automatiquement lié à tous les examens de la demande. Il est possible de tous les retirer du compte-rendu en désélectionnant la description de la procédure.

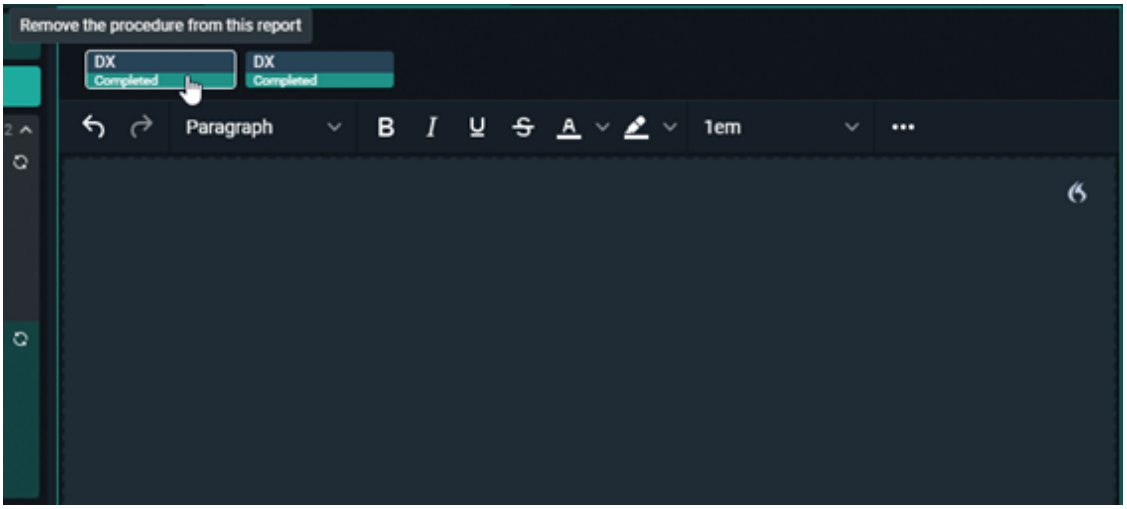

3) Fenêtre contextuelle

Une fenêtre contextuelle apparaît pour vous permettre de sélectionner les procédures que vous souhaitez inclure au compte-rendu.

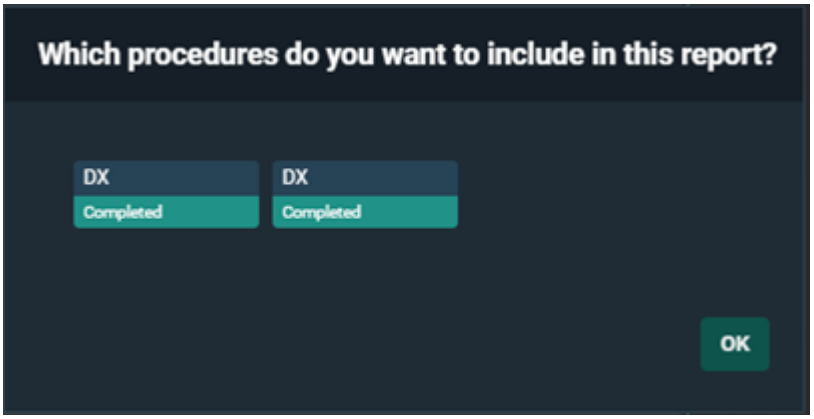

Important !

Les procédures peuvent être ajoutées et retirées lorsque le compte-rendu se trouve en mode édition.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Administrateur PACS

10

À propos des pages de gestion générale

Les **pages de gestion générale** :

- Permettent l'externalisation de certains aspects de la **gestion des sources** à des partenaires DH Healthcare GmbH dédiés ou à des administrateurs PACS d'un hôpital.
- Permettent le contrôle
  - Appareils DICOM (Page 434)
  - Sites, départements et salles d'examen (Page 444)

L'accès aux pages de gestion des **appareils DICOM** et des **sites, départements et salles d'examen** peut être accordé au moyen des autorisations appropriées et peut être personnalisé pour chaque utilisateur.

Les onglets et les sources disponibles dans l'en-tête de la gestion générale sont tous affichés dynamiquement en fonction de vos autorisations en tant qu'utilisateur.

Navigation vers les appareils DICOM ou les sites, départements et salles d'examen

Pour accéder aux pages **Appareils DICOM** ou **Sites, départements et salles d'examen** :

1. Aller à votre liste d'examens.
2. Sélectionnez **Outils**.

   Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous verrez apparaître dans la liste les **Appareils DICOM** et les **Sites, départements et salles d'examen.**
3. Sélectionnez la page souhaitée.

   En sélectionnant **Appareils DICOM** ou **Sites, départements et salles d'examen** dans la liste, vous accédez à la page de gestion générale où vous pouvez configurer les Appareils DICOM ou Sites, départements et salles d'examen.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

10.1 Appareils DICOM

Vue d’ensemble des appareils DICOM

L’écran Appareils DICOM permet d’ajouter, de modifier et de supprimer des appareils DICOM.

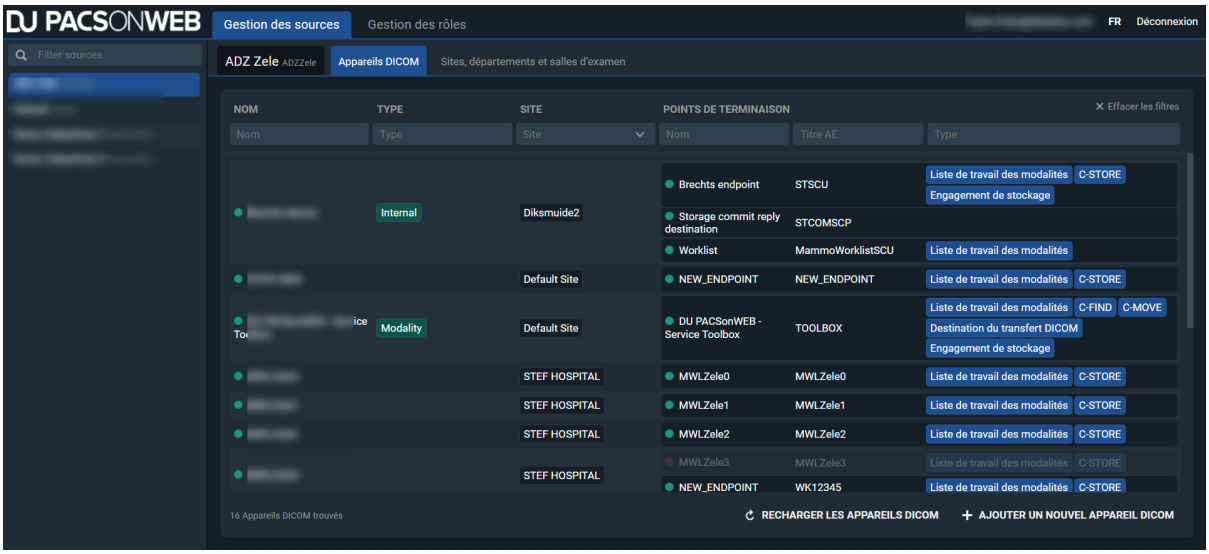

Filtre : Si vous avez accès à plusieurs sources, un panneau de filtre s’affiche. Vous pouvez filtrer les différentes sources auxquelles vous avez accès. Si vous n’avez accès qu’à une seule source, le panneau ne s’affichera pas.

Les sources sont classées par ordre alphabétique.

Appareils DICOM : La liste des appareils DICOM disponibles pour la source sélectionnée s’affiche. La source sélectionnée et la source qui sera configurée sont clairement affichées à gauche de l’onglet **Appareils DICOM**.

Critères de filtrage :

- **Nom** : Champ de texte libre qui vous permet de filtrer vos dispositifs DICOM par nom.
- **Type** : Liste multi-sélection prédéfinie qui, si elle est configurée, vous permet de filtrer par type. Le type est un champ facultatif.
- **Site** : Liste déroulante à sélection unique qui affiche tous les sites liés à la source sélectionnée.
- **Points de terminaison** :
  - **Nom du point de terminaison** Champ de texte libre permettant de filtrer par le nom du point de terminaison configuré

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Remarque :

Un appareil DICOM peut avoir plusieurs points de terminaison liés.

- **Titre de point de terminaison AE** : Champ de texte libre qui vous permet de filtrer par le titre de l'AE d'un point d'accès particulier.
- **Type de point de terminaison** : Liste déroulante prédéfinie et multisélectionnée qui vous permet de filtrer par type de point de terminaison configurable.

Le nombre d'appareils DICOM trouvés en fonction des paramètres de recherche s'affiche au bas de la liste.

Pour effacer un critère de filtrage que vous ne souhaitez plus, cliquez sur le **x** à droite de la valeur. Pour effacer tous les filtres appliqués et afficher tous les appareils DICOM disponibles, cliquez sur le bouton **Effacer les filtres**.

Si vous configurez plusieurs utilisateurs à la fois, il peut être utile de vérifier le dernier état de cette liste. Pour ce faire, cliquez sur **Recharger les appareils DICOM**.

Pour ajouter un nouvel appareil DICOM, cliquez sur **Ajouter un nouvel appareil DICOM**. Un nouvel écran s'ouvre pour créer un nouvel appareil DICOM.


Aperçu de la liste : Appareil DICOM actif ou inactif

- L'appareil DICOM actif et les points de terminaison DICOM sont marqués d'un cercle vert.
- Les appareils DICOM et les points de terminaison DICOM inactifs sont marqués d'un cercle rouge et grisés.

Ajouter un nouvel appareil DICOM

Les champs obligatoires sont marqués d'un point rouge. Les champs obligatoires peuvent varier en fonction des options activées.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

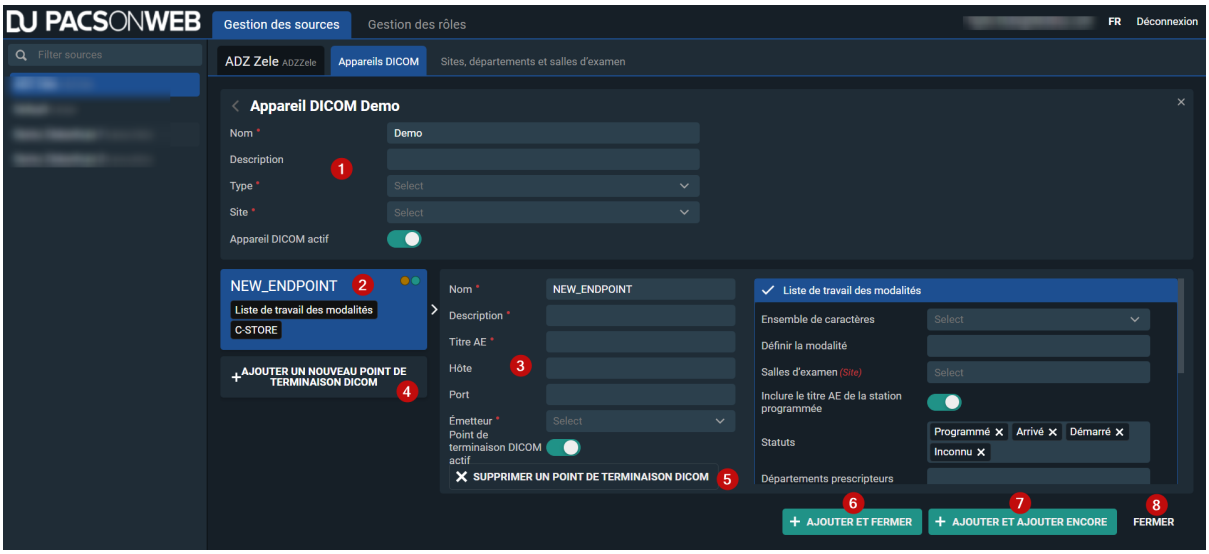

1. **Informations sur l'appareil DICOM :** Saisissez toutes les informations relatives à l'appareil DICOM *(modalité)* à configurer.
   - **Nom** : Champ obligatoire pour identifier votre appareil DICOM.
   - **Description** : Champ facultatif permettant d'ajouter des informations supplémentaires.

     Type : Champ facultatif permettant de lier l'appareil DICOM à un type spécifique de la liste prédéfinie. Les options sont les suivantes : Interne, poste de travail, création de média, post-traitement, PACS, VNA, système d'information et modalité.

     Site : Liste déroulante à sélection unique pour définir le site auquel votre appareil DICOM est lié. Tous les sites liés à votre source sont répertoriés ici.

     Remarque :

     Dès que vous sélectionnez un site, un lien vous permet d'ouvrir l'écran de gestion des sites *(si vous disposez des autorisations nécessaires)*.

   - **Appareil DICOM actif** : Cette fonction est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver si, par exemple, vous configurez une modalité qui n'est pas encore en service, mais que vous souhaitez qu'elle soit disponible.

     Remarque :

     Si vous essayez de enregistrer sans remplir les champs obligatoires, ceux-ci seront surlignés en rouge et un message d'erreur s'affichera. Ceci s'applique à tous les champs obligatoires de cet écran.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2. **Point de terminaison DICOM :** Il affiche le nom du point de terminaison et les différents types de points de terminaison.
   - Ce panneau est informatif et ne peut pas être édité.
   - Par défaut, un point de terminaison est ouvert pour être configuré avec le nom par défaut, NEW_ENDPOINT.
   - Les points de terminaison de la **liste de travail de la modalité et du C-Store** sont activés automatiquement.
   - Il existe 3 types d'indications possibles pour un point de terminaison DICOM
     - **Cercle orange :** Changements non enregistrés sur le point de terminaison.
     - **Cercle vert :** Indication d'un point de terminaison actif.
     - **Cercle rouge** Indication de point de terminaison inactif.

     Un point de terminaison peut avoir plusieurs indications.
3. **Informations sur le point de terminaison DICOM :** Ajouter les informations détaillées pour le point de terminaison DICOM sélectionné.
   - Les points de terminaison DICOM actifs (activés) ne sont pas réduits et sont marqués en bleu.
     - Si le type de point de terminaison n'est pas activé, il est réduit et grisé.
     - Cliquer sur un type de point de terminaison grisé permet d'activer le type de point de terminaison.
   - Tous les champs peuvent être modifiés.

     Remarque :

     Changez le nom en quelque chose qui fait sens pour que vous puissiez facilement trouver vos points de terminaison.

   - Les champs sont obligatoires sauf s'ils sont indiqués comme étant (facultatifs). Si les champs obligatoires sont laissés vides, l'enregistrement du dispositif DICOM entraînera des erreurs.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Types de points de terminaison

Remarque :

Certains champs ne sont pas obligatoires tant que vous n'avez pas sélectionné un type de terminaison spécifique. Par exemple, l'hôte et le port deviennent obligatoires si vous activez la destination de transfert DICOM pour ce point de terminaison.

- **Nom :** Champ obligatoire pour identifier votre point de terminaison. NEW_ENDPOINT est rempli automatiquement, mais modifiez le nom pour qu'il fasse sens et soit facile à retrouver.
- **Description :** Champ facultatif permettant d'ajouter des informations supplémentaires.
- **Titre AE :** Titre AE de la modalité/du dispositif DICOM.
  - Il sera utilisé pour relier les images reçues à ce appareil DICOM spécifique. Si les images sont reçues par un titre AE inconnu, l'association sera refusée.
  - Le titre de l'AE doit être unique au niveau de la source.
- **Hôte :** Il s'agit du nom d'hôte ou de l'adresse IP de votre modalité/appareil DICOM. Cette information est nécessaire dans le cadre des Routes que DU POW utilise pour distribuer les images. Nécessaire, par exemple, pour C-Move et Transfert DICOM.
- **Port** Le port que l'appareil/la modalité DICOM utilisera pour ouvrir la connexion entre DeepUnity PACSonWEB et lui/elle-même. Cette information est nécessaire dans le cadre des Routes que DeepUnity PACSonWEB utilise pour distribuer les images. Nécessaire, par exemple, pour C-Move et/ou Transfert DICOM.
- **Émetteur :** Contient une liste déroulante d'émetteurs configurés pour être utilisés pour les appareils DICOM.
  - L'émetteur fait partie des routes utilisées dans DeepUnity PACSonWEB pour distribuer les images.
  - Cette liste déroulante **ne contient que** les émetteurs enregistrés en tant que « Points de terminaison DICOM associés » *(cette opération a été effectuée par le personnel autorisé de DH Healthcare GmbH).*
  - La sélection d'un émetteur à l'aide du menu déroulant permet à l'émetteur de recevoir des images provenant de ce titre AE.
  - Vous pouvez sélectionner un des émetteurs disponibles en toute sécurité (s'il en existe plusieurs).*Si vous n'êtes pas sûr, veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour vous aider à sélectionner le bon émetteur.*

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

4. **Ajouter un nouveau point de terminaison DICOM** : Ajouter un nouveau point de terminaison DICOM pour cet appareil DICOM. *Par exemple, si une modalité ne peut pas utiliser le même titre AE pour des actions différentes comme DWML ou C-MOVE.*
5. **Supprimer le point de terminaison DICOM** Pour supprimer ce point de terminaison spécifique, cliquez sur **Supprimer le point de terminaison DICOM**.
6. **Ajouter et fermer** Pour ajouter l'appareil DICOM et les points de terminaison DICOM, fermer l'écran et revenir à la liste des appareils DICOM, cliquez sur **Ajouter et fermer**.
7. **Ajouter et ajouter un autre** Pour enregistrer cet appareil DICOM et ces points de terminaison DICOM et en créer immédiatement un autre sans quitter cet écran, cliquez sur **Ajouter et ajouter un autre**.
8. **Fermer** Pour fermer l'écran et revenir à la liste des appareils DICOM, cliquez sur **Fermer**. Vous serez averti si vous cliquez sur Fermer alors que des modifications n'ont pas été enregistrées.

Points de terminaison DICOM

- **Liste de travail des modalités**

  Vous pouvez configurer les options suivantes :

  - **Ensemble de caractères** : Liste déroulante à sélection unique avec valeurs prédéfinies
    - Lorsqu'une modalité adresse une demande à DeepUnity PACSonWEB, l'ensemble de caractères définit le codage qui sera utilisé dans la réponse. Si la demande de la modalité ne spécifie pas d'ensemble de caractères, l'ensemble de caractères fourni par la modalité est utilisé. Si aucun ensemble de caractères n'est spécifié pour la modalité stockée, la norme ISO 2022 IR6 sera utilisée par défaut.
  - **Définir la modalité** : Champ de texte libre
    - Cette option met à jour la modalité du tag DICOM avec la valeur définie.
      - Par exemple, si vous avez une requête MWL qui passe par différentes modalités, CT, MR, US, ... et que vous avez défini CR dans Définir la modalité, nous remplacerons le tag DICOM de la modalité par CR pour tous les examens.
  - **Salles d'examen** :
    - Cette liste sera complétée en fonction du site lié à votre appareil DICOM.
    - Possibilité de lier la modalité à certaines salles d'examen.
  - **Inclure le titre AE de la station programmée** : Bascule

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

        - Par défaut, cette fonction est activée. S'il est défini, le titre de l'AE du point de terminaison appelant sera inclus dans l'ensemble de données de la réponse MWL.
    - **Statuts** : Liste déroulante multisélection
        - Ce paramètre est important si DeepUnity PACSonWEB fournit la liste de travail des modalités DICOM (DMWL). La modalité peut stocker une liste de statuts d'examen sélectionnés. Lorsque la modalité adresse une demande DMWL à DeepUnity PACSonWEB, la réponse ne contient que les examens dont le statut figure dans la liste stockée par la modalité, qu'elles comportent ou non des images.
        - Lorsque le statut d'un examen passe à un statut stocké pour la modalité, l'examen sera présent dans la réponse DMWL lors d'une nouvelle demande.
        - Par défaut, les statuts **Programmé, Arrivé, Commencé et Inconnu** sont ajoutés à un nouveau point de terminaison.
            - Vous pouvez en ajouter si nécessaire. Il s'agit d'une liste prédéfinie de tous les statuts disponibles dans DeepUnity PACSonWEB : *(Inconnu, Annulé, Programmé, Arrivé, Commencé, En cours d'envoi, Envoyé, Achevé, Dictée commencée, Enregistré, Dicté, En attente de correction de rapport, A valider, En attente de seconde validation, Finalisé)*
    - **Département prescripteur** : Champ de remplissage libre
        - Ce champ vous permet de filtrer votre liste de travail des modalités par département demandeur.
    - **Date** : Liste déroulante à sélection unique
        - Ce champ vous permet de filtrer votre liste de travail des modalités sur la base de plages de dates prédéfinies.
- **C-Store**

  Vous pouvez configurer les options suivantes : *(Non rempli par défaut)*
    - **Syntaxes abstraites autorisées** : Une liste multi-sélection dans laquelle une ou plusieurs syntaxes abstraites autorisées peuvent être sélectionnées.
    - **Syntaxes de transfert autorisées** : Une liste multi-sélection dans laquelle une ou plusieurs syntaxes de transfert autorisées peuvent être sélectionnées.
- **C-Find**

  Vous pouvez configurer les options suivantes : *(Non activé par défaut)*
    - **Autoriser les domaines d'affinité** : C-Find renverra les résultats des sources incluses dans les domaines d'affinité liés.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Les domaines d'affinité doivent être configurés dans les pages de gestion des sources au niveau de l'émetteur. (Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour ce faire, si nécessaire)

- Domaines d'affinité contient une liste d'un ou plusieurs domaines d'affinité et définit le champ d'application de C-Find.
- **Autoriser le proxy** :

Remarque :

Le proxy doit être configuré dans les pages de gestion des sources. (Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour ce faire, si nécessaire)

  - La source qui sera interrogée pour les examens ne sera pas la source à laquelle le client est lié, mais la source qui correspond à l'AE appelant de la demande C-Find.
  - Les paramètres du proxy ne peuvent pas être combinés avec ceux de la requête fédérée.
  - Le proxy ne nécessite pas l'existence d'un patient dans la source du client *(le consentement du patient ne doit pas être défini au niveau de la source).*
- **Retourner les examens sans images**
  - C-Find retournera les examens sans images. Cela permet de retourner des examens vides avec C-Find.

- **C-Move**

  Vous pouvez configurer les options suivantes :

  - **Autoriser les domaines d'affinité** : Le déplacement des examens sera autorisé sur les domaines d'affinité. *(Non activé par défaut)*

Remarque :

Les domaines d'affinité doivent être configurés dans les pages de gestion des sources au niveau de l'émetteur. (Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour ce faire, si nécessaire)

- Les domaines d'affinité contiennent une liste d'un ou plusieurs domaines d'affinité et définissent la portée de C-Move.
- Les demandes à d'autres domaines d'affinité :

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- utiliseront le numéro national pour trouver les dossiers de patients correspondants dans d'autres sources.
- ne renverront des résultats que si le patient existe dans la source du client *(le consentement du patient doit être défini au niveau de la source). Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour ce faire, si nécessaire).*

- **Autoriser le proxy** : *(Non activé par défaut)*



Remarque :

Le proxy doit être configuré dans les pages de gestion des sources. (Veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour ce faire, si nécessaire)

  - La source qui sera interrogée pour les examens ne sera pas la source à laquelle le client est lié, mais la source correspondant à l'AE d'appel de la demande C-Move.
  - Les paramètres du proxy ne peuvent pas être combinés avec ceux de la requête fédérée.
  - Le proxy ne nécessite pas l'existence d'un patient dans la source du client ni le consentement du patient.
- **Est une destination** : *(Activé par défaut)*
  - Cela signifie que votre appareil DICOM peut être utilisé comme destination pour C-Move.
  - En cas de désactivation, les éléments suivants sont également désactivés : **Titre de l'AE appelant**, **syntaxe de transfert préférée** et **nombre maximal de fils d'envoi.**
- **Appeler le titre AE** :
  - L'espace réservé est défini par défaut sur DeepUnity PACSonWEB. Saisissez une valeur différente pour modifier l'espace réservé.
  - Il s'agit du titre AE que DeepUnity PACSonWEB utilisera pour C-STORE.
- **Syntaxe de transfert préférée** : Liste déroulante prédéfinie à sélection unique pour sélectionner une syntaxe de transfert.
- **Nombre maximal de fils d'envoi** : Prédéfini, liste déroulante.
  - Valeur numérique comprise entre 1 et 8.

- **Destination du transfert DICOM**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Pour l'instant, vous ne pourrez pas utiliser la requête de la liste de travail pour compléter les informations de l'examen dans la boîte de dialogue de transfert vers le PACS lorsque vous utilisez un point d'arrivée DICOM comme destination de transfert.

- **Appeler le titre AE**
  - L’espace réservé est défini par défaut sur DeepUnity PACSonWEB. Saisissez une valeur différente pour modifier l’espace réservé.
  - Il s’agit du titre AE que DeepUnity PACSonWEB utilisera pour C-STORE.

- **Engagement de stockage**
  - **Envoyer la réponse à**
    - Par défaut, nous sélectionnerons le point de terminaison actuel comme option de réponse. Toutefois, vous pouvez sélectionner n’importe quel autre point de terminaison comme réponse à l’engagement de stockage.
  - **Appeler le titre AE**
    - Par défaut, le paramètre « Espace réservé » est défini sur DeepUnity PACSonWEB. Si cela doit être modifié, indiquez une autre valeur, si c’est toujours le cas, vous pouvez le laisser tel quel.


Modifier un appareil DICOM existant

Si des appareils/points de terminaison DICOM sont déjà configurés, il suffit de cliquer sur une entrée existante de la liste pour ouvrir automatiquement l’écran de modification.

Le premier point de terminaison associé à ce dispositif DICOM est automatiquement ouvert. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez sélectionner un point de terminaison spécifique en cliquant dessus.

Tous les détails de l’appareil DICOM sélectionné et des points de terminaison sont affichés.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

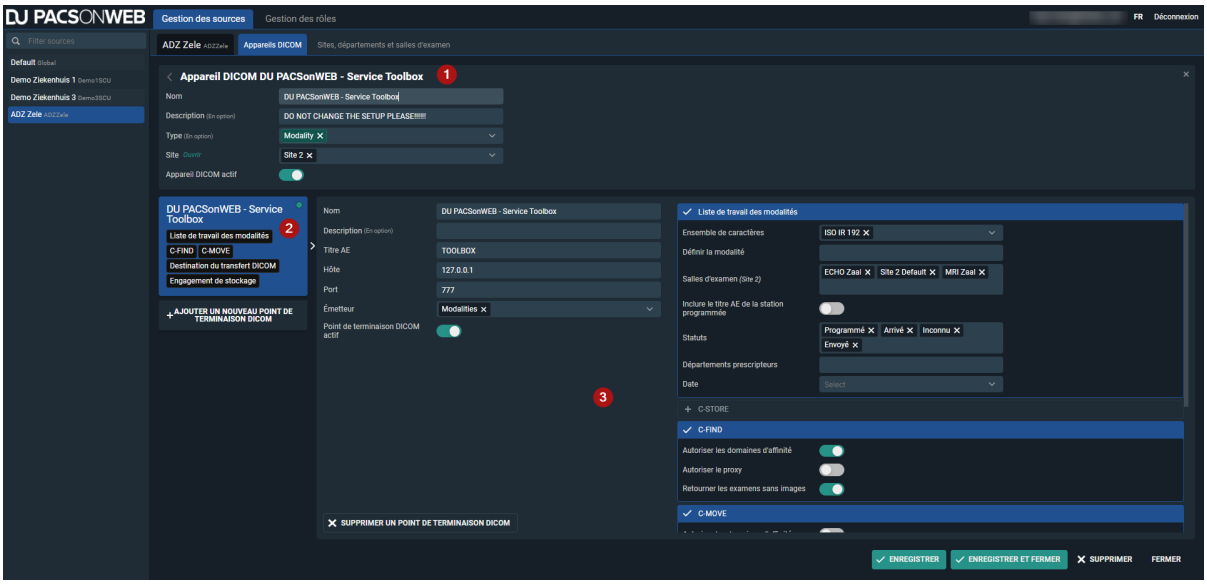

1. Informations sur l'appareil DICOM contenant toutes les informations pertinentes sur votre appareil DICOM. Tous les champs peuvent être mis à jour si nécessaire.

   Site est un champ à sélection unique, si vous sélectionnez un autre site dans la liste déroulante, il remplacera le site actuellement sélectionné.
2. Point de terminaison DICOM avec le nom et tous les différents types de points de terminaison. Il n'est pas possible de l'éditer.
3. Toutes les informations détaillées sur le point de terminaison DICOM sélectionné. Tous les champs peuvent être modifiés.

10.2 Sites, départements et salles d'examen

Vue d'ensemble des sites, départements et salles d'examen

La page de **gestion des sources** permet de gérer les **sites, les départements et les salles d'examen** d' une source.

L'accès à cet onglet est déterminé par vos autorisations. Si vous n'avez pas l'autorisation de gérer les départements d'une source, cet onglet ne sera pas visible pour vous. Si vous avez besoin d'un accès, veuillez contacter DH Healthcare GmbH pour obtenir les autorisations nécessaires.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895

Remarque :


Si vous n'avez accès qu'à une seule source, celle-ci sera automatiquement sélectionnée et l'étiquette du nom de la source sera affichée. Si vous avez accès à plusieurs sources, vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez configurer dans le panneau de gauche.

Au bas de chaque colonne figurent les éléments suivants :

- Le bouton **Recharger**.
- Le bouton **ajouter nouveau**.
- Le nombre de sites, de salles d'examen ou de départements trouvés. Si un filtre a été appliqué, il sera indiqué.

En cliquant sur un site, une salle d'examen ou un département dans la liste des colonnes **Sites**, **Salles d'examen** ou **Départements**, l'aperçu de la liste est remplacé par un écran d'information détaillé pour cette sélection.

- Seule la colonne dans laquelle vous avez effectué une sélection affichera l'écran d'informations détaillées.

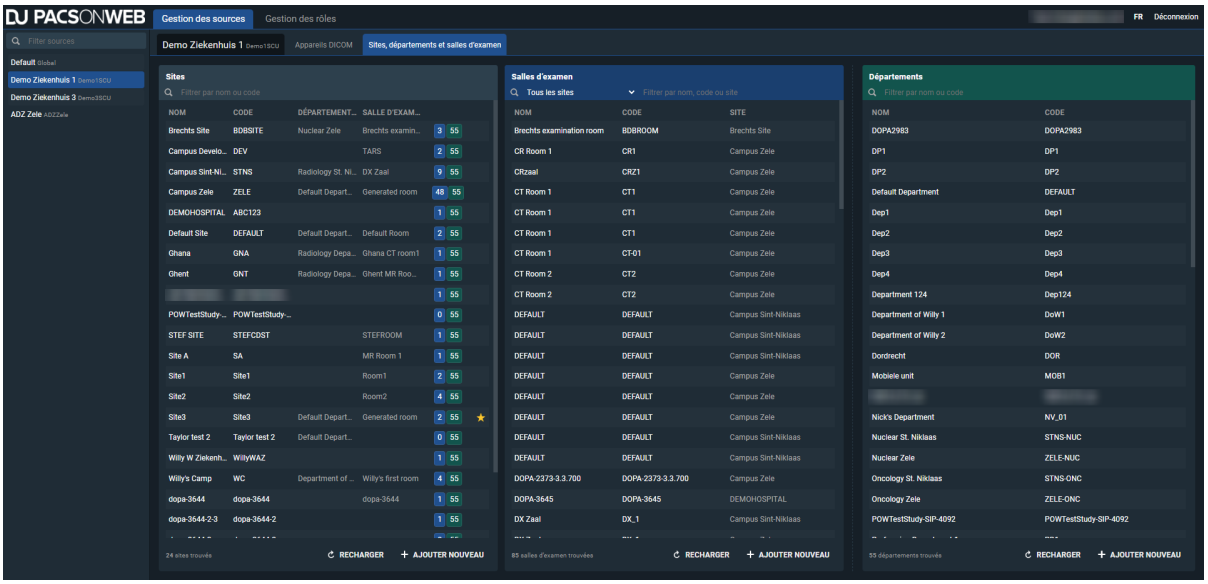

Les sites et les salles d'examen sont des lieux physiques et seront toujours reliés les uns aux autres.

Un département est le plus souvent un nom général qui sera utilisé sur différents sites. Par exemple, la radiologie, la cardiologie et la neurologie.

- Exemple : *Une source peut avoir plusieurs sites. Ces sites peuvent disposer de plusieurs salles d'examen. Les départements peuvent être partagés entre les différents sites.*

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

HC Party

Les examens sont publiés sur RSW/CoZo. Le département d'exécution envoyé par DU POW est par défaut la radiologie (deptRadiology). En utilisant la propriété département HcParty, il est possible de configurer un type de département différent afin de visualiser le bon département dans CoZo/RSW.

Pour une liste de toutes les valeurs HcParty possibles, les départements commencent par le préfixe « dept » : https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en/tables/healthcare-party-type

Sites

Vous pouvez filtrer les sites par nom ou par code.

Le **nom**, le **code**, le **département par défaut** et la **salle d'examen par défaut** liés au site s'affichent.

Le nombre de sites trouvés s'affiche en bas de la colonne.

La sélection d'un site filtrera automatiquement la colonne des salles d'examen pour ce site, et le nombre de salles d'examen trouvées pour ce site s'affichera en bas de la colonne des salles d'examen. La colonne du département reste inchangée.

Configuration d'un site

Vous pouvez définir un site comme site par défaut pour une source. Le site par défaut est indiqué par l'icône ★ dans la liste.

Chaque liste est triée par **nom.**

Ajouter un nouveau site

Pour ajouter un nouveau site :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau** dans la colonne du site.
2. Saisissez les informations pertinentes pour le site**(nom**, **code**, **département par défaut**).
3. Saisissez les informations pertinentes pour la salle d'examen**(nom** et **code**).
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Avant de pouvoir ajouter votre site et vos salles d'examen, tous les champs du site et de la salle d'examen doivent être remplis. Si un champ obligatoire n'est pas rempli, un message d'erreur s'affiche.

5. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

Si vous sélectionnez un site dans la liste, le statut par défaut est indiqué dans le panneau d'information.

- Le site par défaut est indiqué par l'étiquette **Site par défaut**.
- Tous les autres sites qui ne sont pas définis par défaut auront le bouton **définir comme site par défaut**.

Une source ne peut avoir qu'un seul site par défaut. En cliquant sur **Définir comme site par défaut**, vous remplacerez le site précédemment défini.

Modifier un site

Pour modifier un site :

1. sélectionnez un site.
2. Apportez vos modifications aux champs disponibles :
   - Nom (champ obligatoire)
   - Code (champ obligatoire)
     - Doit être unique au niveau de la source.
   - Département par défaut (champ obligatoire)
   - Salle d'examen par défaut (champ obligatoire)
     - Seules les salles liées à ce site seront affichées dans la liste déroulante.
   - **Site par défaut pour les clients WCF suivants** (champ optionnel)
   - **Site par défaut pour les serveurs QR suivants** (champ optionnel)
   - **DÉFINIR PAR DÉFAUT** (site, paramètre facultatif)

Remarque :

Comme pour l'aperçu de la liste, vous pouvez voir quels départements et quelles salles d'examen sont liés à ce site. Ces informations ne peuvent pas être modifiées dans le volet du site. Toutefois, en cliquant sur un département ou une salle d'examen lié(e), vous l'ouvrirez dans la colonne correspondante, où il/elle pourra être modifié(e) et enregistré(e).

3. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Supprimer un site

Pour supprimer un site :

1. Sélectionnez le site à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

Il existe des restrictions intégrées pour la suppression d'un site. Un site ne peut pas être supprimé si :

- Lien avec une ou plusieurs salles d'examen qui ont des examens liés.

> **Remarque :**
>
> La suppression d'un site comportant une ou plusieurs salles d'examen sans examen lié entraîne la suppression des salles d'examen liées.

- Il est défini comme valeur par défaut de la source actuelle.
- Il est défini comme site par défaut pour un ou plusieurs clients WCF.
- Il est défini comme site par défaut d'un ou de plusieurs serveurs QR.

Départements

Dans la colonne des départements, vous pouvez filtrer par **nom** ou par **code**.

La liste est triée par nom et affiche le nom et le code du département.

Ajouter un département

Pour ajouter un nouveau département :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau** dans la colonne département.
2. Saisissez les informations pertinentes pour le département :
   a. **Nom**
   b. **Code**

   > **Remarque :**
   >
   > Le code du département doit être unique au niveau de la source.

   c. **HcParty**
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau**.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Remarque :

Avant de pouvoir ajouter un département, tous les champs doivent être remplis. Si un champ obligatoire est laissé vide, un message d'erreur s'affiche.

4. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

Modification d'un département

Pour modifier un département :

1. Sélectionnez le département.
2. Apportez vos modifications aux champs disponibles :
   - Nom (champ obligatoire)
   - Code (champ obligatoire)
   - HcParty (*utilisé pour les autorisations Cozo)*
   - Département par défaut pour les clients WCF *(liste déroulante filtrée en fonction de la source)*
   - Département par défaut pour les serveurs QR *(liste déroulante filtrée en fonction de la source)*

Remarque :

Chaque champ peut être défini ou modifié.

3. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

Remarque :

Lors de l'édition d'un département, la logique vérifiera si le code est unique au niveau de la source.

Suppression d'un département

Pour supprimer un département :

1. Sélectionnez le département.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

La suppression d'un département comporte certaines restrictions. Un département ne peut pas être supprimé si :

- Il est déjà lié à une commande en tant que département exécutant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

- Il est défini comme le département par défaut pour un ou plusieurs sites.
- Il est défini comme le département par défaut pour un ou plusieurs clients WCF.
- Il est défini comme le département par défaut pour un ou plusieurs serveurs QR.

Salles d'examen

Dans la colonne des examens, vous pouvez filtrer par **nom**, **code** ou **site** à l'aide d'une liste déroulante ou d'un champ de texte libre.

La liste est triée par nom.

Ajout d'une salle d'examen

Remarque :

Auparavant, une salle d'examen était liée à un département. Une **salle d'examen est désormais liée à un site.**

Ajouter une nouvelle salle d'examen :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau** dans la colonne de la salle d'examen.
2. Saisissez les informations pertinentes pour la salle d'examen :
   a. **Nom**
   b. **Code**

      Remarque :

      Le code de la salle d'examen doit être unique au niveau de la source.

   c. **Site**
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter nouveau**.

   Remarque :

   Avant de pouvoir ajouter votre salle d'examen, tous les champs doivent être remplis. Si un champ obligatoire n'est pas rempli, un message d'erreur s'affiche.

4. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

Modifier une salle d'examen

Pour modifier une salle d'examen :

1. Sélectionnez une salle d'examen.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

2. Apportez vos modifications aux champs disponibles :
   - Nom (champ obligatoire)
   - Code (champ obligatoire)
   - HcParty (*utilisé pour les autorisations Cozo)*
   - Département par défaut pour les clients WCF *(liste déroulante filtrée en fonction de la source)*
   - Département par défaut pour les serveurs QR *(liste déroulante filtrée en fonction de la source)*

> **Remarque :**
>
> Chaque champ peut être défini ou modifié.

3. Cliquer sur **Enregistrer et fermer**.

Suppression d'une salle d'examen

Pour supprimer une salle d'examen :

1. Sélectionnez une salle d'examen.
2. Cliquez sur **Supprimer**.

La suppression d'une salle d'examen comporte certaines restrictions. Une salle d'examen ne peut pas être supprimée si :

- Elle est déjà liée à un examen.
- Elle est définie comme la salle d'examen par défaut d'un site

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

L'application Multi Monitor

11

L'application Multi Moniteur permet d'utiliser plusieurs écrans pour visualiser des images via DeepUnity PACSonWEB.

Elle prend également en charge des intégrations avec des applications et des visionneuses externes.


Cela vous permet de maintenir votre flux de travail DeepUnity PACSonWEB tout en utilisant les données de l'examen dans d'autres applications prises en charge.

Lorsque vous démarrez l'application pour la première fois, un assistant apparaît pour effectuer la configuration du moniteur.

Pour obtenir une explication complète de la façon d'effectuer la configuration : Configuration Multi Monitor (Page 452).

Si vous souhaitez modifier votre configuration ultérieurement, ouvrez les paramètres utilisateur en cliquant sur l'engrenage , puis cliquez sur :

Reconfigurer ma configuration moniteur

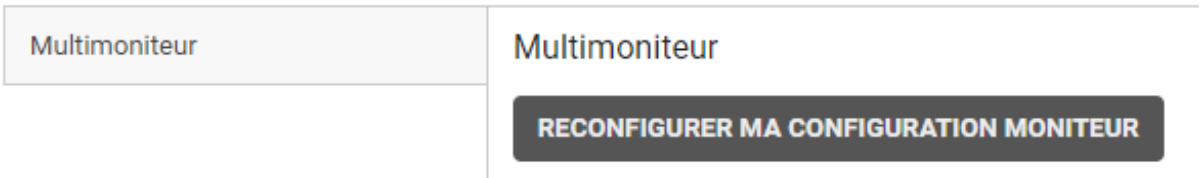


11.1 Configuration Multi Monitor

Pour effectuer la configuration de votre moniteur, procédez comme suit :

1. Sélectionner vos moniteurs de diagnostic

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

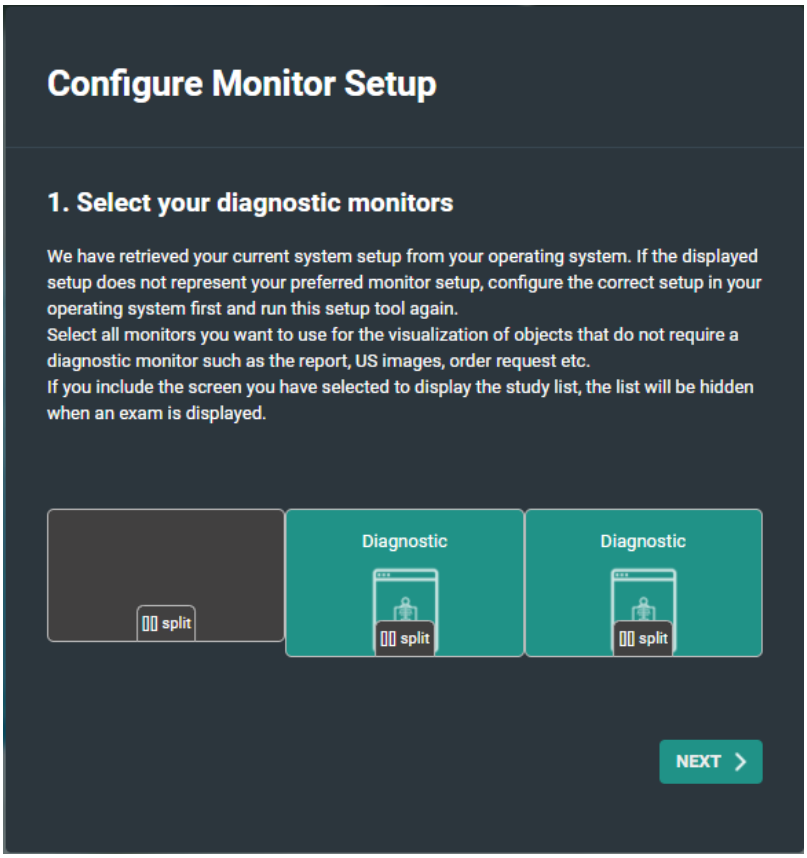


a. Cliquez sur un moniteur pour le sélectionner/désélectionner comme moniteur de diagnostic.
b. Cliquez sur **Fractionner** pour diviser un grand écran en deux moniteurs virtuels séparés.

   Cliquez sur **Fusionner** pour annuler cette opération.

2. Sélectionner l'emplacement de l'onglet Examen

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

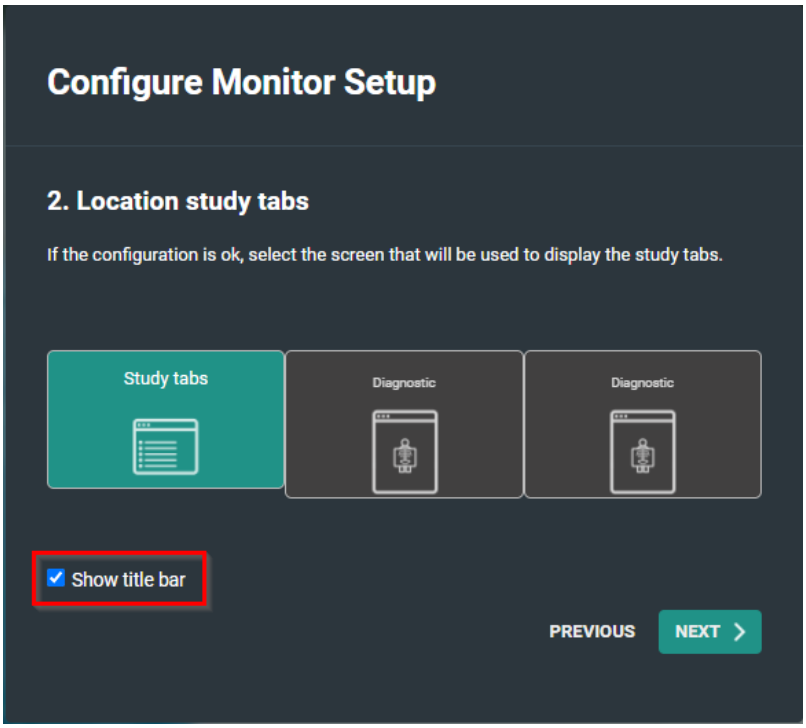

- L'option « Afficher la barre de titre » est sélectionnée par défaut.

  Si vous choisissez de la désélectionner, vous pouvez toujours l'activer manuellement en cliquant sur l'icône **Éléments visibles** et en sélectionnant **Barre de titre** dans la liste déroulante.

3. Sélectionner le moniteur de non-diagnostic

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



Au cours de cette étape, vous avez la possibilité de mettre en avant ou non le moniteur de non-diagnostic.


Par défaut, cette case est cochée, de sorte que le comportement par défaut ne change pas.

Remarque :

Si, à l'étape 1, vous avez sélectionné un seul moniteur comme moniteur de non-diagnostic, cette étape de configuration sera ignorée.

4. Sélectionner l'emplacement du (des) sélecteur(s) de série

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

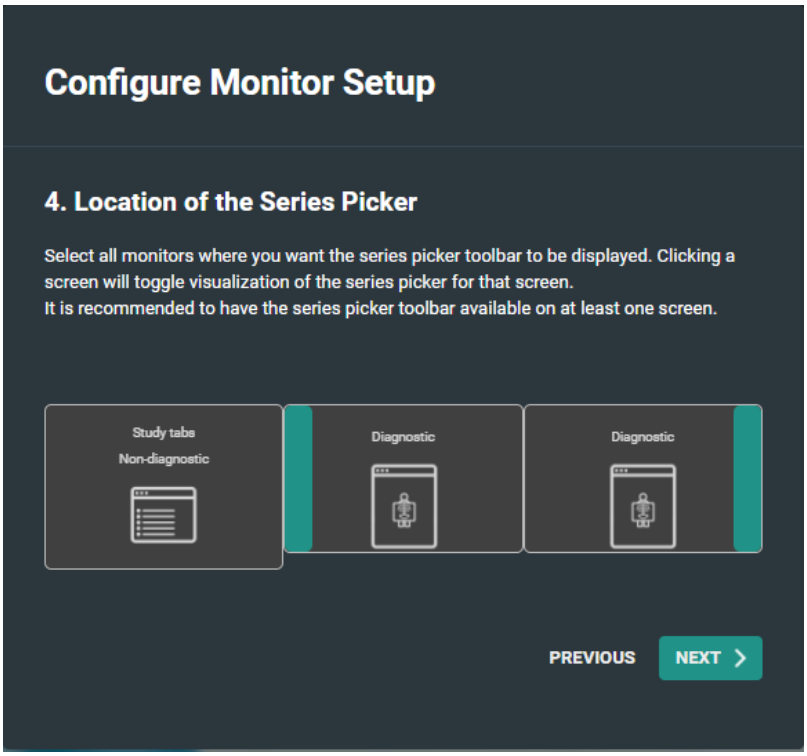


- Vous pouvez modifier l'emplacement du sélecteur de série en cliquant sur le moniteur.

  Le sélecteur de série s'affichera ensuite sur l'écran sélectionné, à gauche, à droite ou pas du tout.

5. Emplacement du volet d’historique de patient


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

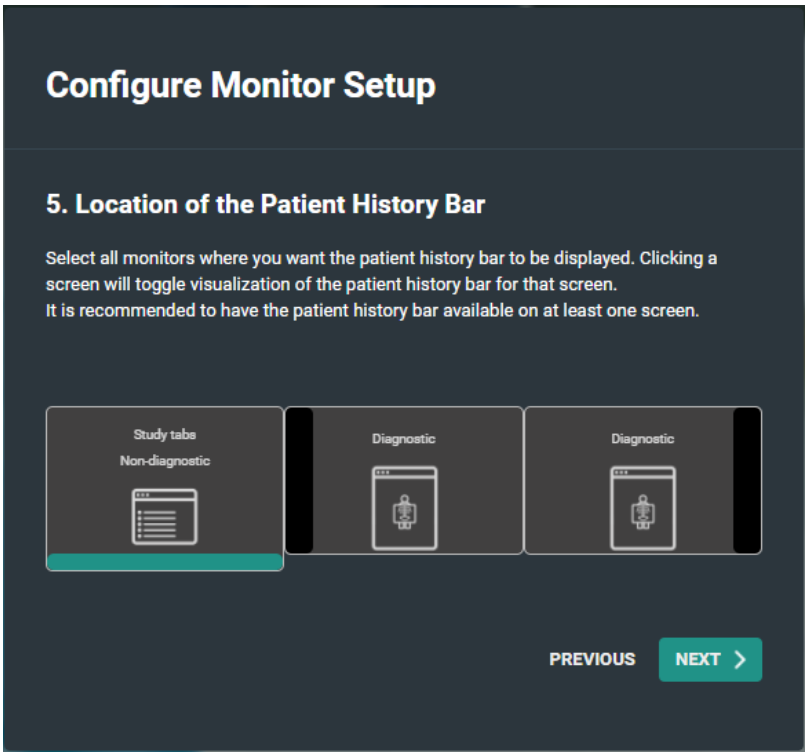

Vous pouvez afficher ou masquer le sélecteur de série au bas de l'écran en cliquant sur un moniteur.

6. Confirmer la configuration du moniteur

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

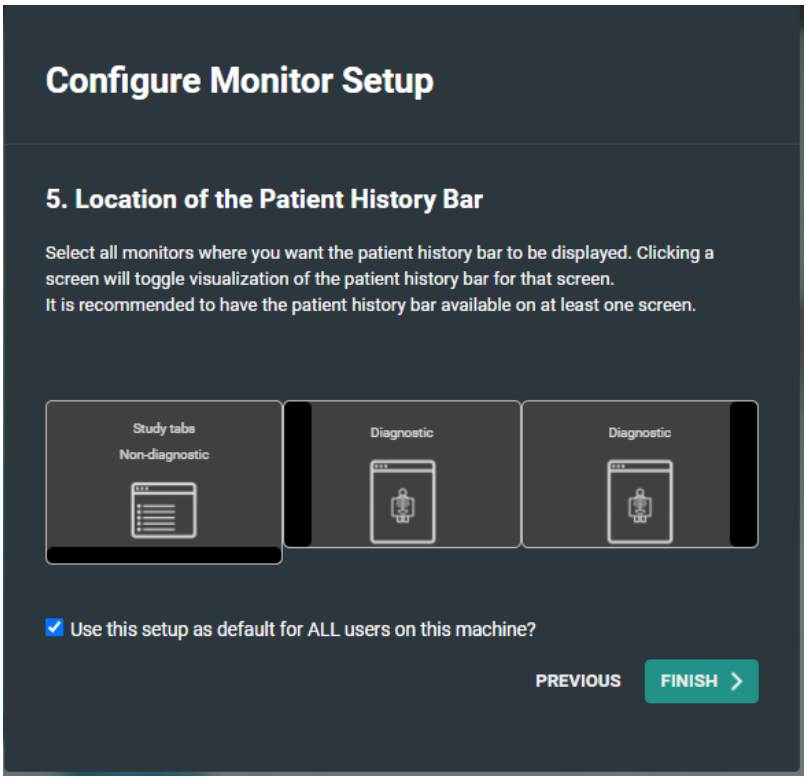

a. Cliquez sur **Terminer** pour confirmer la configuration de votre moniteur.

Par défaut, la case à cocher permettant d'utiliser cette configuration pour tous les utilisateurs est activée.

Si d'autres personnes utilisent le même poste de travail dans une configuration différente, vous devez désactiver cette option.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Version et aide à distance

12

L'étiquette de DeepUnity PACSonWEB peut être affichée en cliquant sur **À propos de DeepUnity PACSonWEB** dans le menu Aide ? en haut à droite de l'écran.

Cet écran reproduit les informations suivantes :

(1) Lien vers notre page de support reprenant les questions fréquentes et leurs réponses.

(2) Toutes les informations concernant le fabricant de DeepUnity PACSonWEB.

(3) Toutes les informations concernant la version actuelle et la date de sortie y afférente de DeepUnity PACSonWEB.


(4) Toutes les informations concernant le manuel de DeepUnity PACSonWEB et la date de la dernière révision.

Remarque :

Les sections (2), (3) et (4) permettent d'ajouter des informations supplémentaires. Si des informations spécifiques à un pays doivent être ajoutées à l'étiquette pour un pays utilisant DeepUnity PACSonWEB comme dispositif médical, veuillez contacter **Dedalus Healthcare**. Si des informations supplémentaires sont configurées pour plusieurs pays, un menu déroulant s'affichera en haut de **l'étiquette**, permettant à l'utilisateur de sélectionner le pays souhaité.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

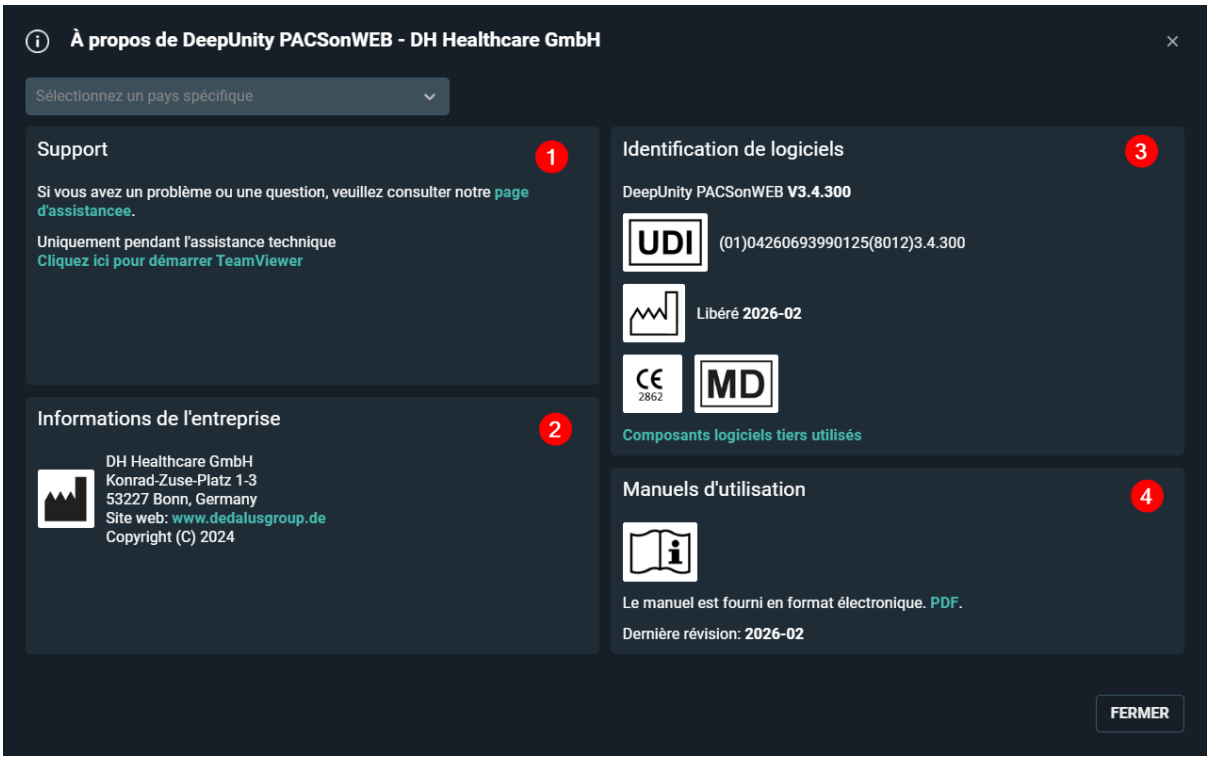

Remarque :

Sur cette capture d'écran, il s'agit de la version v3.4.300.

Dans le menu Aide, vous pouvez également :

- consulter le mode d'emploi en ligne,
- télécharger le mode d'emploi au format PDF,
- consulter la page d'assistance (voir ci-dessous),
- télécharger l'application DeepUnity PACSonWEB pour une prise en charge multi-écrans.

Si vous êtes confronté à un problème lors de l'utilisation de DeepUnity PACSonWEB, vous pouvez consulter notre « Page de support ».

Cette page répertorie les questions les plus fréquemment posées et leurs réponses.


©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés



Si la réponse à votre question n'est pas répertoriée, vous pouvez laisser l'un des agents de notre centre d'assistance prendre le contrôle de votre ordinateur à distance.

Sélectionnez « Click here to start teamviewer » (Cliquez ici pour lancer TeamViewer) en bas de la section « Other questions or issues ? » (Autres questions ou problèmes ?), au bas de la page de support, et communiquez votre identifiant TeamViewer à l'agent de support.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

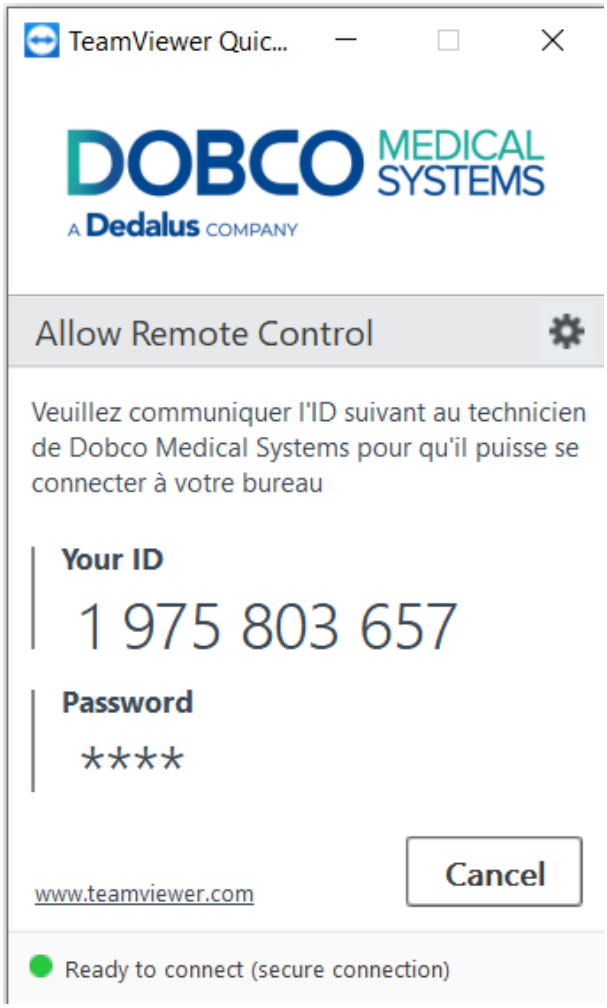

12.1 Release notes

Versions prior to 3.4.100 were labelled PACSonWEB and released under a different process and certification.

12.1.1 Release notes version 3.4.300 (February 2026)

New, changed, or removed functionalities	
SIP-2300	**Expired user account** When a user account has expired, the user will now be informed about his/her expired account when trying to log in.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SIP-4546	**DICOM Hub** The legacy central DICOM router (running within the DeepUnity PACSonWEB cloud / data centre) is replaced by the new DICOM Hub, to manage all handling of DICOM objects.
SIP-4613	**Filter on last X hours** In several worklist and study list filters (e.g. study date, report edited, last modified) it is now possible to filter on the last 4, 12 or 24 hours.
SIP-5360	**Security** Update external components to the latest available version.
SIP-5555	**About box** The product labelling (About box) can be customized - if needed - for every country where DeepUnity PACSonWEB is deployed as a medical device.
SIP-5585	**Microsoft Dragon Speech recognition** Microsoft Dragon Speech recognition is now available as a recognition engine for creating reports in DU PACSonWEB. If you want to use this new option, please contact your local sales or service representative for more details.
SIP-5816	**Volume Rendering Improvements** New projection modes are available in DeepUnity Volume Rendering: minimum (MINIP) and average (AVGIP) intensity projections. Window/level presets can now also be applied within the Volume Rendering component.
SIP-5819	**DICOM Link Exchange (DIN TS 19455)**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	DeepUnity PACSonWEB now supports the generation of DICOM Link Exchange (DLX) compliant URLs and QR codes for sharing one or more studies of a patient, including an OpenAPI implementation to allow external systems to download such studies securely.
SIP-5832	**Privacy policy** General conditions and privacy policies are now customized for various countries.
SIP-5848	**Relink DICOM study** The 'Move study' feature in the study administration panel has been renamed to 'Relink DICOM study'. Additional information has been added in the user interface, to make it more clear to the user what will be the result of using this feature.
SIP-5893	**Flagging key images for studies with a PDF report**When a study has a PDF report, a user is now able to flag (or unflag) key images for that study, assuming that user has the proper permissions.
SIP-5934	**Failed login attempts** The number of allowed failed login attempts (before the user account is locked) can now be configured.
SIP-6008	**Application user metadata**A security update has been done, to make sure that irrelevant or sensitive user information is no longer exposed in the HTTP traffic.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SIP-6037	**Inconsistent colour of 3D volume rendering** An issue was fixed where the 3D volume rendering changed color when rotating the volume.
SIP-6066	**Upload multiple studies for the same patient** When uploading multiple studies for the same patient (identical patient ID) through the upload portal, all uploaded studies will now share the same pseudonymized patient ID.
SIP-6099	**Delete or publish annotations** 'Delete all my annotations' now deletes all annotations within the displayed series, instead of only deleting the annotations on the displayed image. 'Publish' now publishes all new annotations across all series in the active study.
SIP-6273	**Window/level sensitivity** On image series with DICOM PixelPadding attributes, the window/level action was more sensitive than on other series. The system now handles DICOM PixelPadding values properly.
SIP-6278	**Studies** Adapt data type of internal ID of Image records to support 2+ billion images for a source.
Resolved defects	
SIP-6217	**Addendum workflow**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	When the system is configured to send out reports as plain text in the outgoing HL7 ORU message, any created addendum would still be exported as HTML. This has been resolved.
SIP-6123	**Report review** In the pop-up dialog to select a report reviewer, not all reviewers were shown.
SIP-6105	**DICOM files with an invalid time** DICOM files with an invalid time (non existing due to daylight saving switch) sent via a migration route failed to process.
SIP-6040	**Demographic overlay not shown in 3D/MPR**In the 3D/MPR component, when switching from a layout that does not contain the axial view to one that does, the demographic overlay is missing on the axial viewport. This issue has been fixed.
SIP-6045	**Density measurement on RGB images** A density measurement on an RGB image gives a meaningless value. The tool now shows N/A for such an image.
SIP-6187	**Download large study** Downloading a study with a size exceeding 2,1 GB failed. This issue has been resolved.
SIP-6255	**Examination room / site** For a particular study, 'Examination room' or 'Site' changed to the 'DEFAULT' value when a new ORM was sent without the ExaminationRoom or Site property. This issue has been fixed.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SIP-6169	**Fill-in fields** When inserting a text block with fill-in fields into the report, the cursor position was at the end of the text block, rather than in the first fill-in field. This issue has been fixed.
SIP-6170	**Fill-in fields** White spaces were added when a text block was inserted into a fill-in field. This issue has been fixed, by replacing the fill-in field with the inserted text block.
SIP-6276	**Relevant procedures** Linking relevant procedures and reading protocol can be broken because of set-up referencing deleted procedure codes. E.g. when clean-up of double procedures happened on DB level.
SIP-6221	**Gateway certificate** Certificate subject name that contains a trailing whitespace causes issue for PACSonWEB gateway as Windows can not handle folder names with trailing spaces.
SIP-6084	**Images with empty VOI LUT Sequence** An issue was fixed where images could not be rendered if they have the DICOM attribute 'VOI LUT Sequence' with an empty item.
SIP-6262	**Keyboard shortcut** The F8 keyboard shortcut to validate and save a report was not working. This issue has been resolved.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SIP-6188	**Linking non-linear MRI series** The series linking algorithm has been improved, so that it can also handle instances of non-linear tomographic (e.g. MRI) series.
SIP-6112	**MPR for series containing scout images** MPR generation failed on specific studies where the scout image has a frame number that also exists for another slide in the series. This issue has been resolved.
SIP-6231	**MPR/3D reconstruction** An issue was fixed where an image series could not be loaded into the MPR/3D component, if it contained a scout/localizer image which is not marked as such in the corresponding DICOM image type attribute.
SIP-6102	**MRI images not displayed correctly** In case the window width value (DICOM attribute) is lower than 1, the images are not rendered correctly within the viewer. This issue has been resolved.
SIP-3248	**Monitoring** DeepUnity PACSonWEB Monitoring now includes expiration date of the local image cache certificates.
SIP-6303	**ORM inbound** ORM performance improved for large studies when using whitelisting.
SIP-6267	**PACSonWEB Gateway**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	Crash when performing many large transfer to PACS operations.
SIP-6140	**PDF upload** An issue has been fixed where PDF files could not be uploaded as document attachments, when the file extension was uppercase.
SIP-6301	**Patient filter not applied with EMR Gateway** In case the EMR gateway integration is used with Windows authentication, it happened that the passed patient ID filter was not applied in case that patient had multiple studies. This has been resolved.
SIP-6121	**Region of interest error** When applying an ellipse ROI (region of interest) measurement on a very small region within an image, it will no longer produce an error.
SIP-6127	**Report cursor jumps to beginning of report** An issue was fixed where the cursor would jump to the beginning of the report, when scrolling through images while typing a report.
SIP-6202	**Revoked access** A requesting physician could lose access to a particular study, when the system tries to parse the requesting physician from the DICOM header, and deems it invalid.
SIP-6272	**Slow retrieval of study list**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	If there are only a small number of studies available that have images and/or reports, retrieving the study list for such a source was slow.
SIP-6277	**SpeechMike buttons stop responding**In the scenario where a report is being dictated, and the study is reloaded in the viewer, the SpeechMike buttons stopped responding.
SIP-6209	**Study list filter** An issue has been fixed where the 'Report status' filter was not saved properly, when saving a study list filter.
SIP-6163	**Default language**When PACSonWEB was opened for the first time on a device where the default browser language was set to (Brazilian) Portuguese, the user interface defaulted to English. It will now default to Brazilian Portuguese.
SIP-5830	**Image invert on iOS (Safari) not working**Image invert did not work on iOS/Safari, unless the full image data is loaded.
SIP-6108	**PDF report rendering**In rare cases, a PDF report could not be rendered completely within the embedded PDF viewer.
SIP-6165	**User manual language** An issue was fixed where the English version of the user manual was downloaded, even though another browser/UI language was selected.
SIP-6145	**Addendum workflow**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	When the source setting 'Worklist - ReportDictationStatusExport' is enabled, and an addendum is created for a validated report, the worklist status was changed to 'Dictation started'.
SIP-6023	**Patient change for multi-procedure report**Improved handling of multi-procedure reports where the patient changes for one of the studies in the report: the changed study will be unlinked from the report, and a new anomaly will be created for the study/ studies still linked to the report.

12.1.2 Release notes version 3.4.200 (July 2025)

New, changed, or removed functionalities	
SIP-3639	**Addendum workflow** Once a report is validated, it is now possible to create a separate addendum for that report. This way, the original validated report does not need to be changed.
SIP-4479	**Reference lines for matching planes** When scrolling through a tomographic (e.g. CT or MRI) series, reference lines are no longer shown in other series which roughly have the same plane orientation.
SIP-4693	**Upload portal extensions** Uploaded studies can now be transferred automatically to a linked QR/PACS server. Upload comments are transferred to the relevant DICOM Study Comments tag. Non-DICOM files (PDF,

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	PNG, TIFF, JPEG) can be uploaded together with a DICOM study.
SIP-4720	**Cursor position with auto-inserted text blocks** When a report is started which has a text block automatically filled in, the default cursor position is now at the end of the text block. In case fill-in fields are part of that text block, the cursor will be in the first fill-in field.
SIP-4730	**Support for DIN6868-159** To comply with DIN6868-159 in Germany ("Acceptance and constancy testing in teleradiology"), study timing logs are added available to measure the time between a new study coming in, and the full study being available for diagnostic review on the teleradiology workstation.
SIP-5352	**Series picker filters** The state of the filter buttons at the top of the extended series picker (same modality, same procedure, has report, ...) is now persistent across studies, patients, and user sessions.
SIP-5464	**SLA / report deadline** For teleradiology workflow, a reporting deadline can be communicated for every study that needs to be reported. This deadline is visible in the worklist.
SIP-5465	**Specialty** Introduction of the study-level Specialty attribute (e.g. neuro, abdominal, cardiothoracic, ...), to build smarter worklists.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SIP-5470	**Extended upload limit** The maximum amount of (image) data that can be uploaded through the upload portal can be extended to 10 GB.
SIP-5501	**Local Image Cache storage** A network shared drive can be used for Local Image Cache storage.
SIP-5536	**Maximum number of C-MOVE sending threads** In the DICOM device configuration, you can now define the maximum number of sending threads for each DICOM endpoint to which images are sent.
SIP-5587	**DeepUnity Volume Rendering** A new component for multi-planar reconstructions (MPR) and 3D volume rendering is available for thin-slice CT and MRI datasets.
SIP-5644	**Encryption at rest** A new option, encryption at rest, is available to encrypt all images and documents which are stored in the datacenter.
SIP-5723	**Increased security when uploading document attachments** When uploading documents as study attachments, additional security checks have been implemented to scan for malware, and to verify if the document content matches the filename extension.
SIP-5875	**New user setting for window level behavior**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	A new user setting determines if a changed window level setting is applied to the entire series.
Resolved defects	
SIP-5271	**Login with one-time password** When a user needed to log in with a one-time password, but the mobile phone number was unknown, the user was unable to add their number to their account information. This issue has been fixed.
SIP-5530	**Email address validation** The patient email address (in study administration) needed to contain at least one lowercase characters to be accepted. This has been fixed.
SIP-5638	**Access to printed draft report** A source user was able to print a draft report that should not yet be accessible to that user. This issue is fixed.
SIP-5663	**Progress bar on series or image move** There was a regression in a previous release, where the progress bar was not displayed when moving a series or image in the study administration. This issue has been fixed.
SIP-5672	**Add study with trailing spaces** Adding a study using a reference number failed in the last step when it contained additional white space characters. This has been resolved.
SIP-5722	**Search by patient national number in the worklist**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	Searching by patient national number sometimes returned an error in the worklist. This has been fixed.
SIP-5739	**Anonymization progress bar** The progress bar (in Progress overview) could show a negative percentage value while anonymizing a study. This has been fixed.
SIP-5748	**Highlight prior studies in MPR** Unlike in normal viewports, the study date and time was not inverted for prior studies in MPR viewports. This has been resolved.
SIP-5749	**Worklist filter dropdown** When many worklist filters were displayed, the suggestion box/list was not visible if it was at the bottom of the filter list. This issue has been fixed.
SIP-5767	**Speech recognition stops working** An issue has been fixed where the Recognosco (RSDK) speech recognition stopped working after a few seconds.
SIP-5790	**Source column in progress overview** The source column in the progress overview page was not always populated. This has been fixed.
SIP-5801	**Popups on mobile devices** Maintenance popups were not fully readable on small mobile devices (e.g. mobile phones), and could not be closed. These issues have been fixed.
SIP-5806	**DICOM transfer progress**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	The progress bar on DICOM transfer tasks did not update until the task was finished. This has been fixed.
SIP-5815	**DICOM devices configuration** Several improvements to the UI and usability of the DICOM devices configuration.
SIP-5823	**Fill-in fields and Recognosco Atlas** A number of issues were reported when the report fill-in fields were used in combination with Recognosco Atlas speech engine. These issues have been resolved.
SIP-5859	**EMR token issue** When a patient ID is passed via the EMR token to DeepUnity PACSonWEB with an already logged in user, this patient ID was not filled in as a filter in the study list. In other words, when opening DeepUnity PACSonWEB from an EMR, the active patient context was not maintained. This issue has been fixed.
SIP-5883	**Downloading studies with special characters** Inconsistent special character handling in filenames between single and multi-study downloads has been fixed.
SIP-5891	**Error on volumetric registration** An error was shown when performing volumetric registration on two volumes, where one of them is a multi-frame series. This has been resolved.
SIP-5899	**Automatic selection of relevant prior**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	Sometimes the most recent prior study (with the same procedure description) was not selected for auto-comparison. This was due to the fact that there can be multiple procedures, which all have the same description, but different underlying procedure codes. This issue has been addressed, by making sure that procedure codes which have been linked by the user with high priority are now treated the same way of procedures which have the same code as the current.
SIP-5905	**Drag and drop DICOM files on upload portal** In the upload page, DICOM files added via drag and drop (after initial file selection) were not uploaded. This issue has been resolved.
SIP-5912	**DeepUnity PACSonWEB multi-monitor application upgrade error** In the Brazil environment, a warning ("Unable to check for newer versions...") was shown in the DeepUnity PACSonWEB multi-monitor Application. This has been resolved.
SIP-5914	**MPR functionality not working in Safari browser** Some MPR functionality was not working properly in recent versions of the Safari browser. This has been resolved, and MPR functionality is restored for Safari browser version 13 and higher.
SIP-5922	**Multiframe MPR** For a study which is available on the local image cache, creating an MPR of a

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	multiframe object resulted in an error. This has been fixed.
SIP-5925	**Report editor** The report panel scrollbar will no longer jump to an unwanted to location when editing a long report.
SIP-5946	**Report export warning** In case the report export is not configured, a warning was still shown to the user that the report will only be exported to the RIS once the exam is created in the RIS. This has been fixed.
SIP-5999	**Login error for Active Directory user** If an Active Directory (AD) user is part of multiple AD user groups, which map to the same PACSonWEB user group, this will no longer result in an error during login.
SIP-6031	**Empty VOI LUT** Images with an empty VOI LUT function tag could not be displayed in the viewer.

12.1.3 Release notes version 3.4.106 (July 2025)

	Resolved defects
Reporting	Fix: When quickly switching on and off atlas speech recognition it can happen that the reporting pane hangs.

12.1.4 Release notes version 3.4.105 (May 2025)

	Resolved defects

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Upload Portal	Upload permissions: In the previous release, a user was able to upload studies to sources for which s/he is not part of a source group or source administrator group. This issue has been fixed.

12.1.5 Release notes version 3.4.104 (April 2025)

	Resolved defects
WCF	Fix: When two pdf report are sent for a source configured to link reports on order level. Only the first one send is available in PACSonWEB report history.

12.1.6 Release notes version 3.4.103 (March 2025)

	Resolved defects
WCF	Fix: Performance issues with CMove of Tomo stored in Local image cache
Multi-Monitor	Fix: login fail in multi-monitor app and app needs to be killed via tray icon to resolve it.
WCF	FIX: CMove of merged studies only returns one of the studies.
Viewer	FIX: Image are not loaded in certain web browsers, and the 'no cloud' icons are shown instead.
Multi-Monitor	Fix: JavaScript error on start-up of the multi-monitor app.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

MPR	Fix: Window/leveling on MPR is responding very slowly (especially on high latency networks)
Login	Fix: Popup banner on mobile phone cannot be closed.
Reports	Fix: The warning "The report will be exported to the RIS as soon as the exam has been created within the RIS" is also shown when the report is on a status that does not trigger export.
Viewer	Fix: DU PACSonWEB cannot show pdf's in older version of Safari.
Reports	Fix: Issues with Recognosco Atlas speech recognition: every word is capitalized (if not at end of report); 'remove selection' voice command not working; voice commands for text blocks not working because 'pronounced as' contains special characters
Viewer	Fix: Window leveling in Chrome browser on iPhone shows a warning messages that window leveling is not supported on IE 11.
Management	FIX: In rare cases, some image files may not be backed up.

12.1.7 Release notes version 3.4.102 (February 2025)

	Resolved defects
Reports	FIX: PACSonWEB multi-monitor application - Report viewport not working correctly when opened on a

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	monitor different from the main monitor
Image Viewing and Manipulation	FIX: Scrolling / cine through a breast tomography series is not smooth.
Image Mover	FIX: Avoid loss of files when moving them to long term storage for corner cases when DIOCM file with invalid pixel data is resend with valid pixel data.
Studies	FIX: Study logging (in study administration) is not displayed for studies that have a report that is sent out via HL7 ORU outbound.
AI-Cube	FIX: Sending back results via AI Cube does not work as it's using an incorrect storage location.
Global	FIX: Performance improvement in the work list.
Studies	FIX: Search to re-link a study to a different order is broken.
Global	Updated the privacy policy to be compliant with the updated HDS 2.0 standard (France).

12.1.8 Release notes version 3.4.101 (January 2025)

	Resolved defects
Viewer	FIX: If volumetric registration is used in a view also containing series with other orientation, irrelevant warnings keep popping up.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.9 Release notes version 3.4.100 (January 2025)

Component	Release Note
Login	FIX: The DeepUnity PACSonWEB authenticator app not working properly, requiring to manually enter the one-time password when logging in.
Login	FIX: Active directory user cannot login if the user login domain has different letter case than active directory configuration.
Download	FIX: DICOM transfer task progress is set to 100% when WCF client is offline.
WCF	FIX: WCF Client does not send any response to the application that sent a C-Move request if the C-Move destination can't be reached.
WCF	FIX: The DICOM Router always returns C-Move 'success' status to the application sending the C-Move request, independent from the result of the sub-operations.
DICOM Processor	FIX: Sending images to DeepUnity PACSonWEB fails if a very large order number is sent, and order-number-based security codes are configured.
Login	FIX: Token with query criteria cannot be used in combination with Microsoft Entra ID.
Studies	FIX: Target study time defaults to 00:00:00 when searching for studies (for moving images/series) in the study administration.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	FIX: Buttons to finalize report not visible when reporting on a mobile phone.
WCF	FIX: If setting 'ReportDictationStatusExport=true' is used in combination with bulk reporting, status update ORU messages can be sent without report content.
Download	FIX: DICOM transfer task is set to 'Completed' even when the DICOM destination is not listening or the DICOM association is rejected.
Global	Introducing DeepUnity PACSonWEB Core as the non-medical device variant for countries where DeepUnity PACSonWEB is not (yet) registered as a medical device.
DICOM Processor	FIX: Documents (shown in the documents tab) originating from DICOM encapsulated PDFs are labeled 'Unknown'.
Upload portal	Add a comment when uploading a study through the DeepUnity PACSonWEB upload portal. This comment will be visible in the study info panel.
Reports	FIX: Report availability time (when report is not yet available for a login via reference number) is shown in UTC time rather than local/browser time.
Reports	FIX: Print report fails for multi-procedure report, if one of the linked studies has been deleted.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Upload portal	FIX: Upload portal cannot be launched from the multi-monitor app.
WCF	In outbound ORU messages, the name and physician number of the requesting physician are sent. Other physician identifiers are not yet included.
Image Viewing and Manipulation	FIX: Dragging the density measurement tool on the image, while full image data is still loading, can result in an error ('Cannot find central directory').
Image Viewing and Manipulation	FIX: When scrolling through a series very quickly after saving an annotation, it can happen that saving the annotation fails.
Global	General conditions of use, including the GDPR notification, are now translated into all supported languages.
DICOM Processor	FIX: US multiframe (TomTec) images do not get processed.
Download	FIX: The character set conversion is only done for DICOM fields which are stored in the database (e.g. patient name). The other DICOM fields are not updated (e.g. institution address). In case these other fields contain special characters, they are not properly visualized.
Global	Improved communication of planned maintenance to end users.
Studies	FIX: Incorrect study logging when adding an order number to a study without an order number.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	FIX: When copy pasting text from a PDF report, the white spaces are omitted.
Upload portal	In the upload portal, the upload code is now valid for 96 hours (4 days) instead of 48 hours.
AI-Cube	Introducing the DeepUnity AI Cube: a cloud AI marketplace fully integrated with DeepUnity PACSonWEB, for fully automated AI orchestration, processing and results handling. The AI processing status and resulting findings can be visualized in the worklist, and worklist priority can be increased based on specific findings. AI results can be hidden for certain users.
Management	FIX: Patient changes in study administration page cannot be saved when gender is NULL.
Upload portal	FIX: System default labels (e.g. Uploaded, Imported) are not translated to the user interface language.
Share	FIX: User first name in Italian user activation mail is incorrect.
Worklist	FIX: If report creation/editing is canceled, study status stays on 'Dictation started' (if this status is used).
Manage Templates	FIX: Inconsistent date/time formatting in the print report template.
Download	An offline DICOM viewer can be included when downloading images in DICOM format. This feature is only available in Germany, Austria, Switzerland, France and Brazil.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	New branding and logos for the multi-monitor app and mobile app.
Login	FIX: Custom login page logo added via URL, not showing in FAQ page.
Worklist	FIX: Wrong display of study date when cycling through months in the study date filter.
Manage Templates	New data fields for the PrintReport template: site name, accession number, requesting and performing department, place of birth, birth first and last name.
Multi-Monitor	FIX: Multi-monitor app crashes when opening user settings while a study is open.
Image Viewing and Manipulation	FIX: Incomplete display of iCAD mammo findings when CAD reports for both 2D and 3D/DBT images are available.
Viewer	FIX: If the inclination of two series differs too much, volumetric linking (registration) will not be done, but no user feedback is provided.
MPR	FIX: 'Show DICOM tags' on an MPR viewport does not work.
Reports	FIX: In the multi-monitor app, the Ñ character can't be used for voice commands in text blocks.
MPR	Multi-planar reconstructions (MPRs) can now also be created for multiframes.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Viewer	New keyboard shortcuts are available to (i) load next or previous series within the active viewport, (ii) flip the image horizontal or vertical, (iii) toggle the display of the series picker, and (iv) rotate the image.
Studies	For frontend integrations with DeepUnity PACSonWEB, URL calls can now include the accession number to open a study directly in the browser.
Login	Too many failed login attempts from a single user will no longer result in the lockout of the entire customer (for trusted IPs).
Token Based Interfaces	A user can stay logged into DeepUnity PACSonWEB when accessing patients/ studies through the EMR Gateway.
WCF	Documents (e.g. scanned request forms) can be deleted through ORM inbound messages.
Reports	IARA integration (Latin America only): Spanish language is added for speech recognition.
Reports	Report macros (text blocks) can now contain fill-in fields, for more structured reports. Voice commands, keyboard shortcuts or speechmike buttons can be used to navigate between these fields.
DICOM Processor	Update of the DeepUnity PACSonWEB DICOM conformance statement with detailed description on the use of private DICOM tags.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: No user-friendly error when the study fetch mechanism times out.
Explore	In the task progress overview page, it is now possible to filter on source, and see the source for each relevant task.
Login	FIX: Unable to load images with error 'Missing IDP Token' after user email address is updated.
Management,Studies	Departments will no longer be duplicated when they are related to multiple sites.
Studies	FIX: In the Study Administration, newlines in certain text fields are displayed as .
Reports	When the toggle "open report in edit mode" is enabled in the worklist, it will no longer put already validated reports back in edit mode.
Viewer	In order not to obscure the image thumbnails in the series picker, the text of the series descriptions is now truncated to a single line, with a tooltip displaying the full series description.
Explore	Next to the usual patient name, the birth first and last name of the patient is now available in both the study list and worklist. Place of birth is added as well.
DICOM Processor	If images are resent to DeepUnity PACSonWEB with a changed series description, the new series description will be adopted.
Management	Private study labels (owned by one user) are no longer shown to other users in

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	the study list and worklist filters. Also, other users are no longer able to remove such private labels.
Reports	Support for Atlas, the new and improved speech recognition engine from Recognosco.
Management	A new user interface to configure and manage the DICOM communication with all DICOM endpoints (modalities, workstations, archives, ...).
Viewer	To improve the readability of the user interface on high resolution displays, it is now possible to define a scaling factor for the diagnostic monitors.
DICOM Processor	Key images identified in a local PACS, and communicated to DeepUnity PACSonWEB as DICOM KOS Documents, are processed and will display as key images within the viewer as well.
Worklist	Ability to define cross-source worklists, primarily to support teleradiology workflows. These worklists concatenate all relevant studies or orders from a group of sources/customers.
Patients	When changing or merging patients in the study administration, search on patient ID is now possible, and multiple date of birth formats are now supported.
Local Image Cache	The Local Image Cache (LIC) service can now only be used by an authenticated DeepUnity PACSonWEB user.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Global	No more support for outdated internet browsers such as Microsoft Internet Explorer 11 and others

12.1.10 Release notes version 3.3.900 (April 2024)

Component	**Release Note**
Login	Microsoft Entra ID (formerly known as Azure AD) is now supported for cloud-based identity management.
DICOM Processor	Labels can be auto-created based on specific DICOM tag values, for example to label studies with particular AI results.
WCF	Report deletion can be communicated to PACSonWEB via HL7 ORU. Reports deleted within PACSonWEB can trigger an outbound HL7 ORU communication as well.
WCF	Character set encoding can now be configured for each modality, to be used in the DICOM modality worklist (DMWL) query.
Login	User passwords are now encrypted with the SHA-512 hashing algorithm (replacing SHA-1).
WCF	The PACSonWEB DICOM Modality Worklist (DMWL) can now be filtered based on study status.
Viewer	New keyboard shortcuts for creating key images, toggling demographic overlays, and switching MPR planes in full-screen mode.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Worklist	External procedure ID is now available in the worklist, as an additional column and filter.
Reports	FIX: error message when starting bulk dictation.
Download, Share	The patient national number will be updated in the DICOM header when exporting/sharing/downloading the DICOM data.
Viewer	XC series are no longer automatically split into individual images.
Reports	FIX: Report version are not correctly numbered in the study administration page.
Global	Proper handling of time zone differences, and consistent storage of all date/time in UTC format.
Reports	New properties (patient ID, national number, ...) are available in the PrintReport template.
Reports	New reports without content will no longer be auto-saved.
Global	Ségur compliance: support for birth names, place of birth, and INS national number (NIR/NIA).
Image Viewing and Manipulation	If series cannot be linked, the link button will now be disabled, and users are informed why linking is not available.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	Support for Brazilian Portuguese speech recognition (based on IARA Health technology) for reporting.
Worklist	FIX: 'current user' worklist filter is not filled dynamically based on logged-in user.
Viewer	FIX: bold and underline formatting not always applied in the report editor.
DICOM Processor	Study with only 1 image will always be retrieved from cloud even if available in local image cache.
Studies	FIX: no detailed information in study logging (study administration) when moving images or series.
Viewer	FIX: images deleted through IOCM show up as expired images.
Token Based Interfaces	FIX: in rare cases, CoZo fetches the patient national number from the field 'LOCAL', and the patient local ID from the field 'ID-Patient' in KMEHR message.
Reports	FIX: reports created in PACSonWEB are not sent out if the study has no accession number, without informing the user. Reason for failure is not mentioned in failed export task.
Token Based Interfaces	EMR users can open a patient or study in PACSonWEB through a new token integration.
User Settings	FIX: it is not possible to remove default shortcut keys for actions that have multiple shortcut keys.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Global	Significant improvement in performance to go from a reported study to the next study in the cycle list (bulk reporting workflow).
DICOM Processor	FIX: study info (e.g. study description) received from HL7 ORM is overwritten by DICOM metadata.
Explore	FIX: when configuring source rules, typing in the search box to find a DICOM tag was not working anymore.
Reports	Image hyperlinks can be added into the report.
Reports	New technologist field: can be populated through HL7 ORM/ORU, visible in study information panel, editable in study administration, and available in the printReport template.
Multi-Monitor	FIX: error on logout in multi-monitor app.
Viewer	FIX: missing and incorrect Spanish translations of some UI elements.
WCF	FIX: DICOM modality worklist (DMWL) Patient ID wildcard search does not return the correct patient ID.
Image Viewing and Manipulation	FIX: window/level issue when VOI LUT function is in sharedFunctionalGroupSequence.
Reports	FIX: previous filter value still shown when searching for a text block.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

User Settings	FIX: incorrect display of certain characters in graphic signature confirmation dialog.
WCF	FIX: unnecessary logging of revoked access when requesting physician on inbound ORM stays the same.
Reports	FIX: signature text and image not correctly populated in the PrintReport template when the report author equals the report approver.
Login	FIX: user receives OTP code even if none is required.
Multi-Monitor	FIX: study available on local image cache cannot be viewed before an image is processed.
Multi-Monitor	Improvements to the multi-monitor app desktop integrations: more capabilities to determine windows behavior (minimize, maximize), ability to auto-start the reporting, and auto-close the study tab after reporting.
Image Viewing and Manipulation	FIX: pixel intensity (density) measurements may fail if image height is much larger than image width.
DICOM Processor	FIX: old files are still available on local image cache, when files from deleted study are resent to PACSonWEB.
DICOM Processor	FIX: the study list still shows the modality types for images that have been moved to another study.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Processor	Improved performance of the incoming image (DICOM) processors on the cloud platform.
	Added German, Spanish, Italian and Portuguese translations to the PACSonWEB mobile app.
	Smith & Nephew broker: DICOM files can now be sorted chronologically based on instance number.

12.1.11 Release notes version 3.3.800 (Decemeber 2023)

Project Plan	**Release Note**
EMR Gateway	FIX: EMR gateway link with patient national number doesn't work
Sources	New filter capabilities in the management pages, for client config settings, user settings and source detail settings.
Viewer	FIX: an issue was fixed where reference lines and series linking did not work properly for multi-frame datasets.
Image Viewing and Manipulation	FIX: an issue was fixed where inverting a full-screen mammography image could result in a black screen.
DICOM Processor	FIX: an issue was fixed where IOCM messages containing allot of referenced SOP instances could not be processed.
Reports	FIX: If using the pop-up for selecting the procedures for a multi-procedure report this results if one of the studies is locked.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	FIX: an issue was fixed where a Spanish voice command could not be used to insert a text block into the report.
Reports	FIX: an issue was fixed where the report could not be edited after visiting the study administration page.
Home Reading App	The PACSonWEB app is now available on the most recent Android releases.
Viewer	FIX: an issue was fixed where attachments/documents could not be uploaded if the filename extension was in uppercase.
Multi-Monitor	Ctrl+Shift+M in Multi-monitor app now triggers a clean restart of the app.
Reports	FIX: Optional pop-up when starting a report for an order with multi-procedure was shown twice.
MPR	FIX: an issue was fixed where different slices within an MPR volume had different window/level settings applied, resulting in large brightness/contrast variations throughout the volume.
Home Reading App	FIX: Home reading crashes when pairing while report is already in edit mode
Viewer	FIX: Give decent message to user when document does not open in viewer because a new version was send since opening the study.
WCF	FIX: an issue was fixed where inbound HL7 text fragments could be truncated

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	in case they contained special characters.
Viewer	FIX: an issue has been fixed where certain images could not be displayed if the window width and center had "NaN" values in the DICOM tags.
Reports	FIX: an issue was fixed where an error would occur when switching between speech recognition languages.
Access	Additional logging is now available on study access revocation.
Reports	Improved workflow when cycling multiple studies to report.
Worklist	Sorting the worklist based on the Status column now uses the underlying priority for each status, rather than sorting alphabetically.
Studies	When moving a source study to a destination study, the actual workflow status of both studies are now displayed. Before initiating the move, the user can choose what should be the resulting workflow status for the destination study.
Multi-Monitor	FIX: an issue was fixed where an error was displayed after logging out of the multi-monitor app.
Reports	FIX: an issue was fixed where users received error notifications in case their login session had expired.
Studies	FIX: an issue was fixed where patient anomalies (for patients without studies)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	where not visible by default in the anomalies overview.
Reports	Series panel state is maintained when reloading a study while editing a multi-procedure report.
Reports	FIX: an issue has been fixed where reports would not be exported if the client is temporarily offline.
Local Image Cache	FIX: Custom DICOM tags in study overlay could have different values when loaded from local image cache.
Studies	FIX: an issue has been fixed where trying to move images/series to an empty study (in the study administration page) fails
Token Based Interfaces	Belgium: additional CoZo user profiles (midwife, pharmacist in hospital, pharmacist clinical biologist, physiotherapist) now have access to imaging results in PACSonWEB.
Multi-Monitor	FIX: an issue was fixed where the settings in the multi-monitor app configuration wizard were not maintained when running this wizard again.
WCF	The study remark field, communicated through HL7 ORM/ORU, may now contain up to 2048 characters (previously limited to 256 characters).
Reports	FIX: an issue was fixed where speech recognition did not initialize when there are multiple text blocks with the same code.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	Clearer messages to inform patients if the report is not yet available.
Studies	FIX: an issue was fixed where a PDF report would be deleted after changing the report status in the study administration page.
WCF	FIX: the study remark will no longer be deleted when a new HL7 ORU/ORM is sent in without a study remark.
Global	The global data protection policy, privacy policy and cookie policy were updated, to bring them in line with Dedalus global policies.
Image Viewing and Manipulation	FIX: an issue was fixed where scrolling through breast tomosynthesis series was very slow when breast shape detection was enabled.
Local Image Cache	FIX: an issue was fixed where scrolling through multi-frame tomosynthesis series had low performance due to unnecessary loading of pixel data.
Image Viewing and Manipulation	FIX: an issue was fixed where mammography images, when retrieved from the local image cache, could be displayed with an incorrect default window/level setting .
Reports	The user notification (popup message) and behavior have been improved when reloading a study during reporting.
Reports	New user settings are introduced to finetune the behavior when finishing a report.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Management	FIX: an issue has been fixed where opening the user settings was very slow.
Login	FIX: an issue has been solved where the customer-specific support page was not accessible anymore from the customer-specific PACSonWEB landing page.
Viewer	FIX: an issue has been fixed where (active directory) users without a last name got error messages when logging into the viewer. Last name is now mandatory for all (AD) users, and clear error messages are presented to the user.
Reports	FIX: Transcriptionist got error when finalizing a report because author was cleared by backend integration.
Reports	New multi-line text fields to register radiation dose and administered products are available. These fields can be populated through incoming HL7 ORM/ORU, or filled in / edited manually in the study administration pages. They can also be added to the report print template.
Viewer	FIX: an issue has been resolved where an incorrect patient date of birth could be displayed, when the client was in a different time zone than the web server.
Explore	FIX: an issue has been fixed where the user interface goes blank if a PACS overlay search result contains patients without a name

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

WCF	PACSonWEB DICOM Modality Worklist (DMWL) will now also return OtherPatientID, when it's queried as part of an MWL request.
Reports	FIX: an issue was fixed where a warning was displayed (Mapping not found) when a transcriptionist validates a report for the default radiologist.
Reports	SpeechMike buttons can now be configured to trigger keyboard shortcut actions. When using the PACSonWEB multi-monitor app, the SpeechMike buttons will continue to work even when the app does not have focus (e.g. while reviewing images in a 3rd party tool).
WCF	When receiving HL7 messages for existing studies without department, site and/or examination room information, this data will no longer be reverted to default values if this data was already known from prior messages.
DICOM Processor	If PACSonWEB receives HL7 ORM messages with unknown procedure code/description and/or modality, these values will now be copied from the associated DICOM files.
Reports	A signature image can be uploaded for each user, and included in the report.
Download	FIX: an issue has been fixed where querying the worklist based on patient last name (during Transfer to PACS) did not return the correct results.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	Certain image series within a study can be marked as private (either manually or automatically), and access to such series can be restricted through user/ role permissions.
Viewer	FIX: an issue has been fixed where annotations created in Syngo.via did not display correctly in PACSonWEB.
Management	Portal URLs will no longer be prefixed with "http://", also in the templates when sharing a study or printing a report.
AI-Cube	AI Cube is a new PACSonWEB component, which connects with cloud-based AI providers. This allows to have studies, which are sent to PACSonWEB, automatically processed by certain AI algorithms, and results are made available back in PACSonWEB.
Global	It is now possible to review and modify cookie settings.
DICOM Processor	DICOM libraries were updated to the latest Fellow Oak DICOM version 5.0
Login	FIX: an issue has been fixed where one-time passwords (OTPs) were being sent unnecessarily to active-directory (AD) users.
Studies	A new upload portal, which allows to upload medical imaging studies (DICOM) to PACSonWEB using the web browser.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Processor	Support for the LINEAR_EXACT VOI LUT function, for correct rendering of certain MRI series.
Viewer	New filter buttons in the series picker make it easier to find relevant prior studies in the patient history.
Token Based Interfaces	Exams which are filtered (not published to PACSonWEB) will no longer show up in CoZo.

12.1.12 Release notes version 3.3.700 (23/05/2023)

Viewer	FIX: an issue was fixed where images would not be displayed in Safari after upgrading to iOS 16.4
MPR	MPR image quality has been improved, and MPR rendering speed has been increased.
Explore	FIX: an issue was fixed where loading the study list / explore page was very slow (or even timed out) when no filters are applied
DICOM Processor	FIX: an issue was fixed where certain images encoded as a private SOP class UID were not visible in the viewer.
MPR	FIX: an issue has been fixed where cloud icons would be shown for certain images. This happened when MPR was initiated while some images were still loading.
Client Configs	A character set can now be defined, which is used in all queries from PACSonWEB to the local PACS. When the query includes special characters,

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	these will no longer be replaced with wildcards, hence the query results will be more accurate.
Viewer	FIX: Flashing images when scrolling through RX images
Login	The PACSonWEB default login page has been restyled according to the Deep Unity style guide, including an update to the logo.
Explore	FIX: an issue has been fixed where the anomalies department filter did not work for source administrators.
Viewer	FIX: an issue has been fixed where window/levelling high-resolution images on diagnostic displays was unresponsive.
Reports	FIX: an issue has been fixed where RSDK (speech recognition) would not work anymore after reloading a study.
Reports	FIX: Report reviewer dropdown selection not shown correctly in the multi-monitor app.
Viewer	The user will now be notified (and asked to close some study tabs) when exceeding the memory usage of the multi-monitor app.
DICOM Processor	FIX: an issue was fixed where an IOCM rejection note would not be processed for all frames within a multi-frame image.
WCF	C-FIND queries for unsupported SOP classes will now be rejected, instead of not returning any data.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: an issue has been fixed where the wrong DICOM tag was used to determine the laterality of multi-frame DBT series.
Login	FIX: an issue has been fixed where the new user account activation with strong authentication (one-time password) via email was not working.
Reports	FIX: An issue has been fixed where text blocks could no longer be inserted automatically in new reports.
Global	User manuals (online and PDF versions) are now available on the PACSonWEB portal itself, instead of a public Confluence page.
Viewer	Scrolling through Digital Breast Tomosynthesis (DBT) image stacks is now smoother, as the breast detection algorithm no longer runs by default on each image.
Reports	It is now possible to configure the audio recording input level for non-SpeechMike dictation devices in the multi-monitor app.
Multi-Monitor	For desktop integrations using the multi-monitor app, it is possible to use only patient-level context (patient ID or national number) when calling the app API. The study list will then display a filtered list of all studies for the called patient.
Multi-Monitor	The on-top behavior of the multi-monitor application can now be configured. The new setting will

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	determine whether the non-diagnostic monitor comes on top of other windows
Worklist	FIX: an issue has been fixed where procedures codes would no longer be displayed in the worklist filter settings, after saving the worklist
Viewer	Images (such as mammography images) can now be automatically flipped horizontally or vertically through the reading protocol.
Viewer	ScreenPoint Transpara mammography CAD markers (calcifications, soft tissue lesions, and overall exam score) are now supported for display in the viewer, both for 2D/FFDM and 3D/DBT exams.
Viewer	A new keyboard shortcut was added to publish annotations.
Download	The 'Transfer to PACS' workflow has been significantly improved: it's easier to access the functionality, the user interface has been redesigned and optimized, studies can be transferred in bulk, and default settings can be configured.
Viewer	The default projection mode, when activating the thick slice (2D) function, is now maximum intensity projection (MIP) instead of average intensity projection (MPVR).
Viewer	FIX: an issue has been fixed where a relevant prior study was not automatically shown in an auto-compare reading protocol, in case of multi-procedure reporting.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	A native desktop integration with Myrian (Intrasense) is available in the PACSonWEB multi-monitor app.
Viewer	The metric 'time to first image display' has been improved, especially for larger studies with lots of images. Also pre-loading is introduced to further improve this metric.
WCF	When a new patient national number is sent to PACSonWEB through an ADT update, this will no longer trigger an anomaly (as long as that number is unique).
Patients	The displayed message, to inform the patient when their report is not (yet) available, is now more clearly defined to avoid confusion.
MPR	Users will now be notified if there is insufficient memory available to create an MPR volume. Also, the memory required for MPR will be released as soon as the study is closed, to avoid insufficient memory as much as possible.
Multi-Monitor	It is now possible to pass image- or series-level context in an integration script. This allows to share a specific image or series with a 3rd party application integrated in the PACSonWEB multi-monitor app.
PACS Push	FIX: An issue has been fixed where PACSonWEB would continue to try and sync a study (via C-MOVE) when the local PACS stops responding, even when the study is fully synchronized.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Viewer	Multi-value DICOM tags can now be used in the definition of reading protocols. So if a DICOM tags contains multiple values (e.g. ImageType), any of those values can trigger a specific reading protocol.
Manage Templates	FIX: incorrect link to manual in password expiration mails.
Reports	Report signature(s) is/are now automatically added to the exported report (for ORU outbound interface).
Login	FIX: An issue was fixed where the user manual on the French login page was not available as PDF.
Explore	A permission is now available to define which user groups have access to the PACS overlay (query local PACS) feature.
Access	FIX: an issue was fixed where unreported studies were already available to patients when logging in through CoZo

12.1.13 Release notes version 3.3.606 (22/02/2023)

Report	FIX: RSDK speech recognition not working for Spanish (ES_ES)
WCF	FIX: Access not correctly changed when changing requesting physician for multi-procedure order.
WCF	FIX: ORU not correctly processed for DICOM based study with order nr. that also exist for none default department.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.14 Release notes version 3.3.605 (13/02/2023)

DICOM Processor	When images of a merged study were resend with a different accession nr. but that accession nr. doe snot match an HL7 based study. The split of study was not correctly updated with the DICOM meta data.

12.1.15 Release notes version 3.3.604 (15/12/2022)

Hotfix is to solve issues in PACSonWEB backend, hence no end user release note is created.

12.1.16 Release notes version 3.3.603 (14/12/2022)

DICOM Processor	FIX: When two studies are merged on same accession number a study is not split off again if one of the studies is resend same study instance UID and different accession nr.

12.1.17 Release notes version 3.3.602 (23/11/2022)

Viewer	FIX: Radiologist need to restart multi-monitor app after out-off memory error
DICOM Router	FIX: Client Router queue clean-up can be slow for heavy load customers

12.1.18 Release notes version 3.3.601 (04/11/2022)

Reports	FIX: 'copy to clipboard'-button report panel is not working anymore.
Viewer	FIX: Image can not be viewed when using Safari 14 or Firefox 92. (Works fine as of Safari 15 and Firefox 93)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	FIX: PACSonWEB multi-monitor app crashes when a StreamDeck is connected
Multi-Monitor	FIX: PACSonWEB viewer turns black in multi-monitor app if 5GB memory usage is exceeded.
Reports	FIX: Transcriptionist gets (non-blocking) access restriction error when editing report.
Reports	FIX: Warning that speech volume for RSDK speech recognition is to high is shown to often.
Viewer	FIX: When using 150% zooming in windows display settings, Window leveling is not always immediately applied on high resolution images.
Viewer	Performance improvement: faster meta-data retrieval, so that we can start loading images sooner after opening a study.

12.1.19 Release notes version 3.3.600 (18/10/2022)

Viewer	Tomographic (CT/MRI) series from two different studies can automatically be synchronized, based on a registration algorithm. Correcting the offset between linked series can be done much faster.
Reports	Reports are now saved automatically, and can be recovered after losing the server connection or accidentally interrupting the reporting workflow.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Processor	DICOM files larger than 2 GB are now supported.
Explore	More advanced search / filter capabilities are now available in the task progress overview screen.
Studies	FIX: An issue has been fixed where the fetch button was sometimes unavailable for expired studies.
Management	Additional logging on system operator (global admin) activities, to comply with HDS (France) regulations.
Manage Templates	Patient first name and last name can now both be added (as two individual fields) to print templates.
WCF	If the source allows multiple internal patient IDs, 'old' patient IDs will now be remembered after merging to a 'new' patient ID. If, after such merge, incoming data (HL7/DICOM) still uses an 'old' patient ID, this will no longer trigger an anomaly.
Reports	The reporting workflow within PACSonWEB now supports multiple report contributors. A radiology resident may send a report to a supervisor, or a senior radiologist sends a report to a colleague for review. Also, different report versions and the version history can now be displayed in the study administration page.
Download	FIX: An issue has been fixed where transfer tasks would sometimes remain in progress without completing.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Worklist	Specific procedures or procedure codes can be excluded from a worklist.
Image Viewing and Manipulation	The image rendering performance has been improved, and interference with simultaneous speech recognition is no longer an issue. IMPORTANT: PACSonWEB 3.3.600 is not backwards compatible with multi-monitor app for 3.3.500! Upgrading to the latest version of the multi-monitor app is required.
Token Based Interfaces	Specific performing departments can now be included/excluded for publication to CoZo/RWS. Publishing of studies to CoZo/RSW can also be delayed for 1 to 7 days.
Management	FIX: An issue has been fixed where multiple duplicate rooms or departments are be displayed in the worklist filters.
Viewer	The readability of the series descriptions in the series picker has been improved.
Login	In Norway, Target365 is now supported as SMS gateway provider.
Explore	The "Performing department" field can now be used as a filter and displayed as a column in the study list tab.
User Settings	Keyboard shortcuts are now available for all annotations.
Reports	There is a new user setting to define if a beep should be played when starting or stopping speech recognition. Also, the report panel will now automatically

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	scroll down when dictating a large amount of text.
Reports	In the study list, the 'Radiologist' field now shows the name of the doctor who last changed or validated the report in PACSonWEB. Also, the 'Reading user' and 'Validating user' fields will be populated for reports sent to PACSonWEB.
Download	Studies - which are added manually to the study list - can automatically be listed and selected. Any reference number or DU POW number can be used to filter the study list.
WCF	An external procedure ID on study level is now supported, so that exported reports combining multiple procedures can be associated with different unique study level IDs.
Access	FIX: An issue has been fixed where original requesting physicians may still has access to a study when requesting physician for that study is changed.
Studies	FIX: An issue has been fixed where anomalies could not be resolved because of different date/time formatting.
Reports	When dictating a report, the recording volume level is now visualized with colors in the report panel. If the recording level is too high, the user will be alerted and advised to change their audio settings.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	Reports exported as DICOM structured reports (DICOM SR) now contain all the required metadata to allow import in other PACS systems.
Share	A label can now be automatically attached to one or more studies, when sharing them, or printing a reference number for them.
Studies	FIX: An issue has been fixed where there are redundant entries in the patient logging for unchanged values.
Reports	To avoid losing unsaved report text, a popup confirmation will now be presented to the user when closing the browser (tab) or navigating to a different web page (user settings, study administration) while editing a report.
Reports	When using speech recognition, additional guidelines are provided on how to dictate numbers, dates and times, medical terms, and more.
Studies	FIX: An issue has been fixed where moving images from one study to another would sometimes fail.
Studies	FIX: Error in study administration tab 'images and series' if moving images to a new series in exiting study and moving that newly created series to another study in one go.
Reports	Block undesired translation of report text by the browser plug-ins.
WCF	When report creation (and dictation) is started in PACSonWEB, a study status update ('Dictation started') can be sent

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	out via HL7 ORU. This allows to inform external (RIS/reporting) systems that reporting has started, and avoid double reporting in another system.
Login	When printing a reference number, a QR code can be included. Scan the QR code to go directly to the correct URL, with the reference number already filled in.
Global	The TeamViewer application that can be downloaded from the support page has been upgraded.
Login	FIX: An issue has been fixed where active directory users that login via itsme are sometimes asked to reset their password.
Image Viewing and Manipulation	FIX: An issue with irregular scrolling through CT image series has been fixed.
Reports	FIX: An issue has been fixed where 'null' was displayed as radiologist name when exporting a report.
Image Viewing and Manipulation	The default scrolling method for 2D reformats (e.g. MIP) is now 'Not Grouped'.
Explore	FIX: An issue has been fixed where the number of images in the Local Image Cache was displayed incorrectly in the study list after sorting the list by clicking the headers.
Worklist	The worklist refresh rate can now be configured (default = every 5 minutes).
Worklist	The performance of worklist queries has been improved.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: An issue has been fixed where false 'study changed' notifications was shown for unchanged studies.
User Settings	FIX: An issue has been fixed where opening the user settings could take allot of time.
MPR	FIX: An issue has been fixed where the MPR screen layout changed unnecessarily.
Download	Exported annotations (angle, arrow) now also provide fall back representation for external PACS system that do not support Compound Graphic Sequence.
WCF	FIX: An issue has been fixed where ISO_IR 100 character set was used instead of requested encoding in Modality Worklist response.
MPR	FIX: An issue has been fixed where coronal and sagittal MPR views could be displayed upside-down when image number do not match orientation.
WCF	The performance of processing large (> 1 GB) files has been improved.
Global	Support for the Brazilian Portuguese language.
Global	When PACSonWEB is not to be used for diagnostic use in a certain country because of pending regulatory requirement, several notifications about this restriction are added in the user interface.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

WCF	FIX: An issue has been fixed where availability of incoming images were available in PACSonWEB can be delayed by parallel C-Move requests.
Reports	FIX: An issue has been fixed where SpeechMike buttons stop responding.
Image Viewing and Manipulation	FIX: An issue has been fixed where XA/RF images containing a redundant VOI LUT table were display incorrectly.
PACS Push	FIX: An issue has been fixed where whitelisted studies would not get retrieved from PACS.

12.1.20 Release notes version 3.3.503 (13/07/2022)

Viewer	FIX: Improve performance for rendering multi-frame with embedded overlay.
DICOM Router	FIX: Avoid degrading performance in uploading DICOM images by reducing memory usage to and .NET garbage collection.
WCF	FIX: Annotations on multi-frame are not correctly send out.
Viewer	FIX: Performance improvement in image retrieval by reducing number intermediate images rendered during zooming.
Viewer	Exclude canceled studies from auto compare.
Reports	FIX: Use ORU configuration of author/ approver when transcriptionist approves on behalf of

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Global	Add swiss representative in about box for swiss environments
Download	FIX: Downloads of multi-frame results in invalid ZIP file

12.1.21 Release notes version 3.3.502 (14/06/2022)

Share	Users linked to an admin group cannot use the share functionality anymore
Studies - study administration	Not possible for a source admin to edit the patient data in study administration
Token based interfaces - Cozo	It is impossible to open images using Cozo with Internet Explorer 11. Using login physician or patient has no issues.

12.1.22 Release Notes Version 3.3.501 (13/06/2022)

Only fix in backend processing => no public release note required

12.1.23 Release notes version 3.3.500 (14/06/2022)

Global	In case of opt-in, we'll collect anonymous usage information to further improve the application based on real life information
DICOM Processor	IOCM inbound support:* 1113037 (Patient Safety) and 1113038 (Incorrect Entry) -> persistent delete* 1113039 (Date Retention) -> purge until resend
Studies	Filter on performing department in anomalies overview
Viewer	Notify if new images arrived on open study (if activated for source)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Image Viewing and Manipulation	New annotation: Polygon ROI density tool
User Settings	FIX: Auto compare menu in user settings is now correctly displayed
DICOM Router	FIX: respect requested character set in CFind Response
Explore	Improve usability of labels* define favorites* Label/un-label studies in a list
Users	User can define his own window level presets in addition to the source defaults
WCF	Use files in local image cache for C-Move response
Reports	Receive notification as requesting/CC physician when report is available and/or when images are available
MPR	MPR can be reset using a keyboard shortcut
MPR	Usability improvements for MPR:* tri-plane view* rotate cross hair or individual axis* cycle views* easy reset
Viewer	ESC restores the default left mouse button operation
User Settings	Users can customize their keyboard shortcuts
Viewer	Images available in Local Image Cache are also visualised in order information viewport

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Worklist	Filter on minimal number of images in the worklist
Image Viewing and Manipulation	Standard Deviation added as value for ROI annotation
Reports	Report consisting of only empty lines and/or whitespaces is handled as an empty report
Image Viewing and Manipulation	FIX: Endpoints behave correctly while drawing ROI ellipse
Reports	FIX: Rich text editor can be used on Safari browser
WCF	WCF client accepts DICOM Files without StudyTime, setting it to 00:00:00
Multi-Monitor	Notification in multi monitor app if the update link is not accessible.
Global	FIX: correction in German mail templates
User Settings	Apply increased report font in text block editor
Reports	RSDK improvement:* Switch Language* Modify playback volume* Performance logging
Viewer	Possibility to delete DICOM encapsulated PDF document in the study administration
Image Viewing and Manipulation	Save presentation state for rotated or flipped images

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	Maintain scroll position and image manipulation when series is shown in multiple steps in the reading protocol
Multi-Monitor	Option to hide/show title bar on study tabs monitor to have same image proportions in case of a RIS driven workflow
Viewer	Allow copying of values from study info viewport fields
Viewer	For users with setting "multiple tabs" configured, open study in series picker will open an new study tab.
Reports	Setting to give user reporting permission for a department without being a source administrator
Viewer	Shortcut for ROI – ellipse (E)
Reports	Additional report formatting:* Bullet list* Header styles (configurable per user)* Voice commands for formatting
Login	OTP via mail can be resent via mail or sms
Download	Export the following annotations as GSPS:Ruler , Line, Angle, ROI- rectangle, RIO –elpise, Arrow, Text
Explore	FIX: Study information no longer hidden after the user gains access using Break-The-Glass
WCF	Patient level CFind queries to PACSonWEB now supports wildcards (* and ?) for all supported fields

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

WCF	Multiple instances, series, studies can now be moved in a single C-Move request
Worklist	FIX: Worklist can now be sorted on report
Reports	FIX: Selecting a word by double click now also works in IE11
Reports	FIX: user can now create and validate report with home reading in case RSDK is also configured
Reports	FIX: Microphone access no longer requested for transcriptionist
Viewer	FIX: Series linking for curved planner reconstructions (CPR vs. MPR) is now done correctly
Reports	Possibility to allow a transcriptionist to validate a report on behalf of the radiologist
Share	FIX: Custom template is now used when printing reference number from PACS overlay
Worklist	FIX: Column images in worklist now displays the number of images available in the Local Image Cache
Viewer	FIX: Correction for scrolling behaviour when switching viewports in multi-monitor app
Login	Block login with DU POW code only having canceled studies instead of showing empty list

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Studies	FIX: Give correct error message when adding an invalid national number in the study administration
Explore	FIX: Use search string of 4 characters, including Include special characters in PACS overlay
Image Viewing and Manipulation	Length ratio: inverse ratio now additionaly shown between brackets
Viewer	FIX: Rapid switching between tabs while study is loading causes series picker to load incompletely
Viewer	FIX: Scroll performance remains optimal when viewer is kept open for a long time
Token Based Interfaces	FIX: solved issue for access by patient using RSW
Worklist	Possibility to filter on unresolved anomalies in the worklist
Viewer	Tolerance on differences in orientation for automatic linking increased to 15°
Reports	Optimization for latency warning when using RSDK
Reports	Reduce space between report body and signature
Studies	FIX: Source rules now also applied to tags that occur in a DICOM sequence
Reports	FIX: RSDK – Speech session for long reports remain open until audio is saved

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	FIX: Text blocks are no longer added with wrong language identifier that made them usable with RSDK
Viewer	Disable switching procedures via tabs in series picker if there is an unsaved report to avoid losing report content
Viewer	Allow to disable pointer lock for a (VDI) user

12.1.24 Release notes version 3.3.405 (18/03/2022)

Reports	FIX: When using RSDK, saving audio "never finishes" for large reports.
WCF	FIX: WCF clients go to 100% CPU when trying to recover from lost connections.

12.1.25 Release notes version 3.3.404 (04/03/2022)

Reports	Allow using shortcut to save report also if report viewport doe snot have focus. Avoid loosing report when turning on shortcuts for external reporting in set-up for which it's not intended.
Reports	FIX: space inserted in front of '.' when suing RSDK speech recognition
Reports	FIX: Can't save report created with Home reading is RSDK speech recognition is also configured for user.
Reports	FIX: Shortcut to save a report (F8, Ctrl-F8) only work when report has focus

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Study administration	Add anomaly for studies were moving large studies fails after user already left the study administration.
Local Image Cache	Make user Local image cache clean-up continues if some files it's attempting to clean-up are removed already.
WCF	MWL - return a value for Code Meaning (0008,0104)
Worklist	FIX: AD user with group mappings fails to access worklist.

12.1.26 Release notes version 3.3.403 (04/02/2022)

Reports	RSDK speech recognition: performance improvements
Reports	RSDK speech recognition - FIX: Edit report keeps loading when study is opened from open study button in series picker
Reports	RSDK speech recognition - FIX: Words are added in the wrong order with RSDK speech
Reports	RSDK speech recognition - FIX: Speech recognition stops recording
Reports	RSDK speech recognition - FIX: After insert text block with voice command cursor is on start of report
Reports	FIX: Transcription user in admin group does not have the send for approval option.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	RSDK speech recognition - FIX: Text segments with audio, but no text in the beginning of the report are not played backed
Reports	RSDK speech recognition - FIX: Database fields in text blocks are not replaced when inserted with RSDK voice command
Reports	RSDK speech recognition - FIX:RSDK speech recognition - FIX: Transcription workflow: Speech audio is played but without sound
Reports	RSDK speech recognition - FIX: deleted text reappears when saving a report
Viewer	FIX: Consolidated Patient history - reports from other sources not accessible
DICOM Processor	FIX: ImageExchange - Daily studies for which the images were not downloaded, status completed, progress 0%
Worklist	Improved performance when searching on PatientId in the worklist
Viewer	FIX: Disappearing mouse pointer in multi-monitor app
WCF	MWL: Ignore empty study date in MWL query to fallback to scheduled procedures step date
WCF	MWL: Add Schedules AE, Protocol code and Type of patient ID to MWL response

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Access	Don't allow none-administrator to access studies canceled in the RIS
Study administration	Allow to modify canceled flag (set via RIS integration) in the study administration.

12.1.27 Release notes version 3.3.402 (05/01/2022)

WCF	FIX: Pixel data for some images in large series lost when processing of the image is interrupted by a timeout.
WCF	FIX: Performance of incoming images negatively impacted by DICOM source rules

12.1.28 Release notes version 3.3.401 (14/12/2021)

Viewer	FIX: Images with negative pixel spacing not visible because of error in scale ruler calculation
Reporting	Performance improvement in loading Recognosco speech recognition
ADT	FIX: Correction in handling ADT messages for sources where multiple internal patient ID's are allowed for same national number.
Management	FIX: Password expiration mail also send to AD user

12.1.29 Release notes version 3.3.400 (30/11/2021)

Login	Improved password expiration mail

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Image Viewing and Manipulation	Improve auto selection when placing spine labels
Studies	Select multiple instances to move to another study
Multi-Monitor	Client side desktop integration with multi-monitor app
Reports	Correction workflow with audio playback, based on Recognosco speech recognition
DICOM Processor	Don't send mails or SMS for migrated studies
Viewer	FIX: Mouse cursor no longer disappears when doing image manipulations
Image Viewing and Manipulation	Scale ruler added to viewer
MPR	FIX: MPR creation from Local image cache
Local Image Cache	FIX: Local image cache accepts studies with empty accession number
Reports	Automatically add text as template in report
Viewer	Allow to define keyboard shortcuts for external reporting flow
Reports	Integration Recognosco speech recognition (finalization)
Home Reading App	Text blocks can be used in combination with Home reading (phone based speech recognition)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	Support pdf report in the order details tab of the patient history
Viewer	Clear indication for prior studies that are more recent than current study
Download	FIX: Study instance EUID adapted correctly when downloading DICOM
Viewer	FIX: cut-off of the bottom pixels of the viewer in iOS Safari solved
Reports	FIX: text block pop-up now showing on Safari and older Edge versions
Image Viewing and Manipulation	FIX: Window level support for IE11
WCF	FIX: Modality Worklist - Characters before '_' no longer removed from Procedure Code
Management	More intuitive UI for labels in viewer
Reports	Improved robustness of ORU outbound communication
WCF	FIX: C-FIND PATIENT level query needs to be on PATIENT root instead of STUDY root
DICOM Processor	FIX: Viewing and downloading of encapsulated PDF document with empty file name tag
Reports	FIX: Copy of report signature when using copy to clipboard function
Studies	FIX: Resend SMS in Study Administration when source setting "Send SMS on first image" is disabled (Norway)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Worklist	Worklist dashboard moved to worklist tab header when in full screen mode
Image Viewing and Manipulation	Improved usability for Window Level on images with 15 or 16 bit grayscale
Viewer	Loop the RP steps when navigating with shortcut keys * Page-Down on last step --> first step * Page-up on first step --> last step
Image Viewing and Manipulation	Add delta with 180° to angle measurement
Image Viewing and Manipulation	FIX: Use middle mouse button to Window Level on MPR
Multi-Monitor	Add links to open report or order from PACSonWEB in RISonWEB (configuration by DH Healthcare GmbH)
WCF	FIX: C-MOVE requests no longer fails if the destination cannot process JPEG Lossless
WCF	FIX: Set access when sending known physician without physician number if received through HL7

12.1.30 Release notes version 3.3.303 (14/10/2021)

Viewer	FIX: Check on patient consent in eHealth for consolidated patient history always fails.
Login	Extra check to block login in case duplicated reference numbers were send by third party system.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: List of reading protocols is not always refreshed when logging in with other user. (cached list from previous user is used)
Download	FIX: Auto transfer not working in German environment

12.1.31 Release notes version 3.3.302 (09/09/2021)

Studies	FIX: Study Administration - Impossible to update order information
Viewer	FIX: Performance impact of backfilling extracting an storing extra DICOM tags in the DB on the fly.
Reports	FIX: ORU Out - User with the default mapping always gets the warning 'Mapping not found' (report correctly exported)
Reports	FIX: Speech recognition does not work if a report is in edit mode in other tab
WCF	FIX: Q/R interface C-MOVE intermediate status updates are not send resulting in some clients aborting association
Reports	FIX: Study Administration - Resend report throws error for user that does not have home reading configured
Login	FIX: EMR gateway with anonymous login does not show report

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.32 Release notes version 3.3.301 (31/08/2021)

Studies	FIX: Study anomaly: A different date of birth create for images without DOB processed by DICOM Processor directly (not via WCF)
Login	FIX: Some irrelevant field are shown on the support page if Login screen \disableRequestUsername=true
DICOM Processor	FIX: Merge study fails in Stored Procedure
WCF	FIX: PACSonWEB always uses SpecificCharacterSet ISO_IR 192 in MWL response, which is not supported by all modalities

12.1.33 Release notes version 3.3.300 (27/08/2021)

Project Plan	Release note
Reports	Multi-procedure reporting
Reports	Insert saved text blocks in a report
Studies	Support accession number with multiple study instance UID's in download/transfer
WCF	C-MOVE from PACSonWEB to PACS moves all images in one association
WCF	Canceled studies ("study_state": "CA") are not returned in the MWL response
WCF	Procedures received via HL7 are no longer overwritten by DICOM study description

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Explore	No anomalies are created for studies that are filtered, based on DICOM tags
Viewer	DICOM encapsulated pdf's (SOP class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1) are shown in the document viewport
Worklist	Worklist dashboard: count of key worklist items in view at all times
Viewer	"Show original DICOM tags" available to source administrator users
Studies	Additional warnings for archive / PACS customers when deleting a study / images
DICOM Processor	Images without patient name and/or patient ID are accepted but create an anomaly
Study list	Performance improvement for filtering on unread messages in study list
Viewer	FIX: Studies with same frame of reference are now auto linked if orientation slightly deviates (0,1° tolerance added)
Viewer	Improve styling for narrow series picker
MPR	FIX: In MPR cached images are now re-rendered when window level is changed
Worklist	Additional bulk reporting workflow options * Report a selection of studies * Skip * Open report in edit mode * First open other unreported form same order

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Studies	Improve performance of access logging tab in study administration
Manage Templates	Possibility to switch order of first name and last name in mail templates
Viewer	Use of arrow keys to scroll through multi-slice series
Worklist	Possibility to filter a worklist on procedure code or description
User Settings	New user setting to automatically publish annotations
Viewer	Extended order details panel * Performing department * Requesting department * Prescription date * Visit information * Patient & * Study remark
Viewer	Show acquisition date and time in image overlay
Studies	FIX: Study administration - Patient information can now be modified when first name is empty
Management	HDS requirement: extended logging on all admin actions by DH Healthcare GmbH personnel
Reports	FIX: download button for pdf reports now available for all resolutions
DICOM Router	FIX: DICOM Router now respects "PreferredTransferSyntax" when sending images to a destination via C-MOVE requests
Worklist	Default reservation time made customizable per source

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: Series picker tooltips stay visible on image viewport
Access	Consolidated patient history for hospital users
Explorer	Clicking a filter label in study list and worklist filter allows to enter/change the filter value
Studies	Refresh anomaly list after solving an anomaly with an action that changes data
Viewer	FIX: User can now remove self-created private labels
Login	Mobile number no longer mandatory for AD users in account completion form
Viewer	Patient history tab added to the order details panel for fast navigation through prior reports
Share	FIX: Auto transfer of study's now also works for CC2 physician if no CC1 is present
Share	FIX: flag now changes automatically when changing the country code from the phone number when sharing a study
Reports	Date & time for report availability changed to "dd/MM/yyyy HH:mm" format to avoid translation issue with months and weekdays.
Viewer	FIX:DU POW no longer freezes when FPS in cine loop is set to 0

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	Option to show relevant priors in the series picker in a separate block or chronologically in "Others"
Explore	FIX: PACS overlay now parses StudyTime that contain fractions correctly
Viewer	FIX: Comparing from patient history bar now also works when series picker is hidden
Worklist	FIX: Multi-select worklist filter value no longer disappears when deleting/ saving/modifying worklist
WCF	Support patient level C-FIND
Reports	Beta version of Recognosco speech recognition integration. (for early feedback only!)
DICOM Router	* Source administrators can define DICOM based rules to automatically send images to CvKO (Belgium) * Anomaly creation if routed studies do not meet CvKO requirements
Login	* Fix for OTP method selection page in Multi-monitor for AD users * Fix ‘Remember OTP 30 days’ when asking OTP for AD users outside trusted IP range
Reports	FIX: text from browser speech recognition now always inserted at correct position after image manipulation
Worklist	FIX: order with a canceled procedure can now be opened from the worklist

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	Selected font size in report window is remembered
Local Image Cache	FIX: Local Image Cache now re-renders when a DICOM file with the already existing SOPInstanceUID is received
Worklist	Possibility to give permission to modify priority to non-source admins
Explore	FIX: Saved "Today" filter now updates as expected
Worklist	Additional worklist filters: "report author" & "report edit date"
Reports	FIX: corrected use of "Page Up" when editing a report
WCF	FIX: Duplicate national number anomaly now also created when national number is sent via DICOM
Local Image Cache	FIX: Corrected pre-rendering of images in Local image cache
WCF	FIX: DICOM Compliance Modality Worklist result - SpecificCharacterSet DICOM tag now on the root level
Viewer	FIX: Image no longer blurry after image rotation
Worklist	FIX: Labels from other sources are visible in worklist
Reports	FIX: PACSonWEB page no longer jumps after editing preliminary report with browser recognition

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

WCF	Modality Worklist - Procedure code in response * (0032,1064) SQ Requested Procedure Code Sequence\(0008,0100) CodeValue * (0040,0100) SQ Scheduled Procedure Step Sequence\(0040,0008) SQ Scheduled Protocol Code Sequence \(0008,0100) CodeValue
Worklist	Improvements in worklist performance, especially for empty worklists
Local Image Cache	Performance improvement in Local image cache clean-up

12.1.34 Release notes version 3.3.200 (30/04/2021)

Module	**Release note**
Reports	Basic formatting and Speech recognition with local microphone
Viewer	Study/order details panel
Explore	Filter on custom date range in study list
WCF	Use default 19000101 as default date when no date of birth is passed
Viewer	Save report and got to next in worklist
WCF	Don’t fail CMove if there are no images for a study, succeed with 0 images moved
Studies	FIX: Time stamps in study logging are now consistently formatted in 24H notation
DICOM Processor	Log timing of image processing in study log

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Router	unknown AE title association errors are now logged as an error
WCF	Federated query: CMove respects order of sources in affinity domain
Viewer	FIX: 'Show my reference number' is available in portrait mode on mobile
WCF	WCF client only logs fatal errors are to windows event log
Viewer	Consolidate patient history - for hospital users only
Viewer	Reading protocols - choose favorite for procedure
Viewer	Default operation on left/middle mouse button configurable per modality
Local Image Cache	Local image cache improvement: * MPR on local images * FIFO clean-up based on disk space threshold
Image Viewing and Manipulation	Show Left/right indication in CT and MR view ports
Viewer	iCAD integration
DICOM Router	Clean-up temporary files from conversions (in case of process interruption)
RSW	RSW - Allow to configure a different responsible radiologist for each department
Local image cache	Series splitting consistent for local and online studies

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Worklist	Reporting worklists: Filter on status, assigned radiologist, performing department, room, ...
Explore	FIX: Adding bucket fails because of Customer Ref Code validator
Download	FIX: ConceptNameCodeSequence is now under the ContentSequence in SR for PACSonWEB report
Share	FIX: Print reference number: copy this information button doesn't work
WCF	FIX: C-FIND Endpoint - Patient Name is separated by '^' (=^+ space) instead of '^'
Access	FIX: can’t grant (via share) read&write access to a user already having read access
DICOM Router	FIX: Use # as field separator in file names instead co '-' to avoid issue with '-' in AE titles
Viewer	Simplification of extended series picker. * Less different blocks * prior study stays in chorological order when compared * two levels of relevance
Image Viewing and Manipulation	Spine labeling panel
Viewer	Shortcuts to open other systems via URL in PACSonWEB
Viewer	keyboard shortcuts for cine, Density measurement, spatial locator
Viewer	Performance of loading first image from series file on object storage

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

WCF	Improved logging of patient creation and updates
Image Viewing and Manipulation	Text annotation
Viewer	FIX: Size of series picker is not remembered when switching exam
Multi-Monitor	Setting to leave Syngo.via in control of it's monitor layout.
Multi-Monitor	Support PACSonWEB app for user profiles on network drive
Login	FIX: external authentication app as second factor needs to be set twice before it's active in user settings
Viewer	Age at acquisition is available (between brackets behind the date of birth) in the demographic overlay
Viewer	Old viewer was removed from PACSonWEB
Studies	move images and series: extra search criteria
Studies	move images and series: improved progress indication
Studies	FIX: SIP-3311 Study administration: manage series and images broken after reverting changes
Studies	FIX: Select button not visible in study administration (study move)
Studies	FIX: Study administration: Negative image count when move images to series that has deleted images

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Login	Allow UPOW codes for canceled procedures in multi-procedure order
Image Viewing and Manipulation	Some improvements in interacting with annotations were done * Cobb angle: Always measure inner angle * Angle: Set Leg-corner-leg instead of corner, leg 1, leg2 * Don't select annotation while drawing a new one, to allow measuring * distance between other annotations * Always return to none-annotation function after drawing annotation (instead of returning to other annotation) * Avoid overlap between labels * Pan icon was replaced by arrow, to ease selection
Viewer	FIX: Tooltip outside page with right side series picker
Viewer	FIX: One-up only works if pan tool is active
Image Viewing and Manipulation	Indicate if ruler annotation is vertical
Multi-Monitor	Make it possible to disable local image cache for a multimonitor setup
Share	Configurable mail subject for image availability mails
WCF	FIX: When changing Requesting Physician to an Unmapped Physician, old access record is not removed
Viewer	FIX: Printing an image on one page independent of aspect ratio
Login	Improved implementation of "remember this browser for 30 days"

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	FIX: Master window in multi-monitor sometimes flickers when getting/losing focus
MWL	FIX: Use ',' instead '^' as name part separator
Share	FIX: Share study without accession nr. from PACS overlay
Multi-Monitor	FIX: QUOTA_EXCEEDED error for in multi-monitor app with German translation
DICOM Processor	Trigger anomaly for merged studies of different patients

12.1.35 Release notes version 3.3.111 (01/03/2021)

Module	**Release note**
MPR	FIX: If slices have negative coordinates on an axis (e.g. x axis for sagittal) the slices are sorted in incorrect order to construct the volume with the result that the volume and the slices generated from it are flipped.

12.1.36 Release notes version 3.3.110 (29/01/2021)

Module	**Release note**
Token Based Interfaces	Show RSW status and resend in study administration
Multi-Monitor	Allow to split wide monitor in two 'virtual' monitors
Annotations	Length loss and length ratio annotation

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Access	Show to patient when report becomes available
Viewer	Activate scroll function via context menu
Viewer	Allow to restrict auto-compare option to certain modality types
Share	Allow to show list of procedures in custom print reference number template
Viewer	Button to reload study
Viewer	Allow to scroll 1 series using multiple monitors
Viewer	Allow to activate scroll function using StreamDeck
WCF	Don't overwrite procedure, received via HL7, by DICOM study description
WCF	Don't return studies without images in CFind result
Login	Update cookie policy
Viewer	Avoid double fetch operation by disabling button after click
Viewer	Improved CT loading performance
Viewer	Allow auto-compare with studies from the same order
Studies	Provide an indication in the anomalies overview if an anomaly is blocking access or is just informational

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Token Based Interfaces	RSW - Support different HCParty department types
Viewer	Monitoring of study loading time
Viewer	When tiling 'all series', apply window leveling only to images of the same series
Login	Add "Imprint" information to the login page
Image Viewing and Manipulation	Improvements breast border detection
Viewer	Add documents to a study by "Drag and drop" in the documents viewport Allowed file types: pdf, png, tif, rtf, jpeg, jpg and txt
WCF	FIX: Anomaly - "Different national number from HL7" not mentioning previous national number
WCF	FIX: C-FIND Endpoint - 'Modalities In Study' tag does not correctly return multiple values
WCF	FIX: C-FIND Endpoint - 'Modalities in Study' parameter doesn't work
Viewer	FIX: When printing an image, the overlay data is not shown
Viewer	FIX: Real Time PNG generation in the UI project always creates grayscale images
Download	FIX: Report visible, independent of source settings, when downloading study

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: breast border does not update with multiple images in 1 viewport
Explore	FIX: sorting on column 'study status' doesn't work anymore

12.1.37 Release notes version 3.3.100 (07/11/2020)

Module	**Release note**
Explore	Allow to open explore page via URL integration
Viewer	Allow to send an image or pdf documents as part of ORM
Viewer	Shortcut keys for the viewer can be customized (by DH Healthcare GmbH)
Studies	Move study content to other study (fix-up)
Local Image Cache	Local image cache in case PACSonWEB is set up as a PACS
Client Configs	Allow WCF client tot handle HL7 messages for multiple sources
Viewer	Improved CT scrolling performance
Groups	Clear message that you can not remove yourself form a group while being primary contact
Token Based Interfaces	RSW - Publish studies based on LastModificationDateTime instead of StudyDateTime
MPR	Improved MPR scrolling performance

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Login	Password reset mail on second user request for registered physician ID
WCF	Support open date and time ranges in C-Find
Login	Extend default session timeout in PACSonWEB
Studies	Automatically clear anomalies when patient merge is done/received
Login	Allow to return to log-in page from OTP page
Share	Notification that two factor does not apply in case a study is shared with a medical department
Viewer	Allow to fetch images for HL7 filtered studies
Viewer	Show all linked labels for study in study administration
Login	Adapt user manual URLs in mails to https to avoid triggering SPAM filters
Reports	Link to new viewer if PDF report is shown in the old viewer
Login	Added option to resend pin code
Studies	Added info on how to deactivate "Mail on new study" in mail template
DICOM Processor	Update of StudyInstanceUID for studies processed by migration flow (not via WCF client)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	Download multi-monitor installer from portal with automated upgrade mechanism
Client Configs	Support multiple Transfer destinations on WCF client
Login	OTP setting "Remember this device for 30 days" not reset when IP changes
Explore	Expired studies without a report remain visible in explore page to allow fetch
Viewer	Delete single images or series from a study or move to another study (split/ merge)
Multi-Monitor	Support Stream Deck keypad in multi-monitor app
Login	Add Responsible Disclosure policy to the login page
Global	Text next to TeamViewer button "Only start when in technical support"
WCF	Extra tags can be included in CFind for PACS synchronization
Viewer	Additional user preferences for the viewer
Viewer	Fetch based on accession number (in case Study Instance UID is unknown)
WCF	HL7 - Update Performing Department and requesting department via ORM
DICOM Processor	Link images to source Modality when sent directly to PACSonWEB

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Token Based Interfaces	Use TLS 2.0 for COZO communication
Viewer	More prominent fetch images button
Viewer	Improvement in key images functionality (e.g. Option "show in original series")
WCF	Update national number on an ADT merge message
Explore	Explore list available in multi monitor application and in separate tab in viewer.
PACS Push	Add support for StudyQueue based synchronization in WCF3
Explore	PACSonWEB UI optimized for mobile phone
Login	Add "Resend OTP"-option in activation screen
Login	Unlock user account when logging in with eID
Reports	FIX: QR Codes in templates are not printed in IE Explorer and Edge
Token Based Interfaces	FIX: EMR gateway cannot open study by accession number for user linked to multiple repositories
PACS Push	FIX: Sync - Study is moved again if study description contains special characters
Viewer	Clear warning on unsupported or suboptimal browsers

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: CT presets don't work CT series in case of drag & drop
Viewer	FIX: New viewer doesn't work in IE11 if DOM Local Storage is disabled
WCF	FIX: Series level C-FIND returns Study Procedure instead of SeriesDescription
Reports	FIX: Report text cannot be selected in the new viewer
PACS Push	FIX: Sync - Automatic synchronization fails for studies with an empty accession number
Download	FIX: When retention of PNG images has expired the option to download as PNG no longer functions
Viewer	FIX: Compare does not work when series picker is not shown
Viewer	FIX: Difference in fps and demanded framerate
Share	FIX: Print reference number - language not passed to confirmation dialog
Viewer	FIX: Some MR series open with highest image number
DICOM Router	FIX: Dicom Router doesn't accept associations from Osirix 11.0.4
Reports	FIX: Slovenian special characters not displayed correctly in report
WCF	FIX: Maximum retry count for Storage commit

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Processor	FIX: Studies without accession number and study date are not processed
Reports	FIX: Report signature isn't copied when clicking "Copy Report" in the new viewer
Download	FIX: Anonymization fails when client is not connected to server
Login	FIX: 'Check password' symbol (eye) not visible when password is filled-in by chrome
Explore	FIX: Viewer preferences not applied for users that are logged in via EMR gateway
WCF	FIX: CFind on PatientID too slow
WCF	FIX: CFind to DU POW Gateway returns '?' instead of special characters
Login	FIX: URL for Local import page is invalid when the patient name contains a point (.)

12.1.38 Release notes version 3.3.0 (19/06/2020)

Module	**Release note**	**New viewer only**
Access	Delayed report availability can be based on report date passed via ORU	
DICOM Processor	Allow to send patient SMS from study administration even if automatic SMS are turned off (Norway workflow)	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Processor	FIX: Don't send SMS to patient when a study is marked as 'BlockPatientAccess'	
DICOM Processor	Add support for MS Azure blob storage	
DICOM Router	**MWL provided by PACSonWEB, based on orders sent by ORM**	
DICOM Router	**Support DICOM tag sequence in transformer and filter scripts in DICOM router**	
DICOM Router	**Check patient consent in eHealth for federated query (Belgium)**	
DICOM Router	Support 0002 tags in file name and scripts in DICOM Router	
DICOM Router	Allow WCF client to do C-Find, C-Move to other sources	
Download	Fix: Also send none-image instances to PACS when using autotransfer	
Download	Added field to DICOM SR for reports created in PACSonWEB to make it DICOM standard compliant	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Download	Add status fields to DICOM SR for reports created in PACSonWEB	
Explore	Show national number in PACS overlay (if PACS supports 0010:1000 Other Patient ID's)	
Explore	**Add labels to study in study administration.**	
Explore	**Redesign of PACSonWEB explore page**	
Global	Switch between PACSonWEB environments after log-in.	
Global	Add German environment to environment list	
Home Reading App	Improve behavior of Home reading PACSonWEB app in case of network interruption	
Annotations	FIX: annotations on multi-frame linked to correct frame	
Annotations	FIX: Density measurement doesn't use the DICOM Tag 'Modality sequence LUT'	
Annotations	FIX: No density calculation for ROI drawn at the border of the image.	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Annotations	Arrow annotation	
MG	**Invert or window level breast area only**	****
MG	Mammography reading protocols	*
Login	Open PACS overly via EMR gateway	
Login	FIX: notifications PACSonWEB app on androïd no longer work	
Login	FIX: error when DA user creation when default properties are configured	
Login	FIX: restrict uniqueness check for reference number to own source when using source portal	
Login	Add link to resend One-Time Password in OTP page	
Login	Redesign of PACSonWEB login page	
Login	Show partial phone number or email address in OTP page	
Login	FIX: Authenticator App - The OTP field for adding a new device skips characters if the users types too fast	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Multi-Monitor	**New PACSonWEB viewer with reading protocols and compare (not active by default)**	*****
Multi-Monitor	Integration between multi-monitor PACSonWEB and local Syngo.via for 3D	*
Multi-Monitor	Reading protocols	*
Multi-Monitor	RISonWEB desktop integration with multi-monitor PACSonWEB	*
Archive	**Handle storage commit request for archive customers**	
Reports	Log report creation and modifications in study logging in study administration	
Share	Allow to share when logged in with AD user via EMR gateway	
Share	Address details for medical departments in share dialog	
Share	FIX: source logo not used for confirmation mail when study was opened form share email	
Share	FIX: no warning in case of correctly formatted but	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

	none-existing dates. E.g. 29/02/2021.	
COZO/RSW	**Don't show user agreement or tutorial pop-up when opening PACSonWEB form COZO or RSW.**	
RSW	FIX: RSW - GetTransactionDetails denied when order of hcparty of the author is not correct	
COZO	FIX: CoZo - TransactionList response not fully compliant with CoZo Cookbook	
COZO	Monitoring on performance and failures of COZO requests	
RSW	FIX: Adjust method for sending requesting physician to RSW	
COZO	FIX: CoZo - Also send the Requesting Physician information to CoZo for physicians that don't have a PACSonWEB account	
COZO	Show report in patient history for CoZo users that are not physicians but have access to images is allowed.	
Viewer	Select window level presets using numpad	*

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	**Add documents to a study (.txt, .pdf, .png)**	*
Viewer	FIX: improve loading performance for large series (e.g. 10000 images)	
Viewer	FIX: show update values in Show DICOM tags for study description and study instance UID	
Viewer	**Relevant priors in series picker, based on procedure linking**	*
Viewer	**Create series with Key images**	*
Viewer	FIX: "Expired Images" message doesn't disappear after fetching the images for these studies	
Viewer	Thick slice scrolling	*
Viewer	Show series picker in a viewport	*
WCF	FIX: Inefficient Query execution when IMAGE level C-FIND query is executed against WCF Client	
WCF	Allow to tune polling interval for autotransfer workflow	

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	Allow to send a txt file with order info as part of ORM	*
WCF	Allow multiple Patient ID's for a national number for a sources (turned-on on request)	
WCF	FIX: Patient DOB not updated by HL7 ORU/ ORM.	
WCF	Allow to disable emails to requesting physician for older studies (priors/ migration)	
WCF	FIX: C-Find uses ',' instead of '^' as separator for name parts	

12.1.39 Release notes version 3.2.1000 (14/12/2019)

Project Plan	Release Note
COZO	Support for opening studies without accession number via COZO
WCF	Fix: Clean-up temporary files written in the crypto folder
DICOM router	Include number of images moved in final C-MOVE response
WCF	FIX: ADT - exception when merging patient with deleted studies
WCF	FIX: WCF3 Work list query does not add RRN to DICOM headers

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	FIX: "Expired Images" thumb nail does not disappear after fetching a study with SR
DICOM router	FIX: endless retry if a file already exists in error folder
Image Viewing and Manipulation	**Density measurements on Region Of Interest (ROI)**
Viewer	FIX: Avoid report scrolls to second line on opening
COZO	**Allow to configure access to studies via COZO for Healthcare providers based on roles, E.g. physicians, dentists ...**
Viewer	FIX: Scrolling through images of a series moves the entire viewport on Safari and Chrome on iOS13
Home Reading App	Allow to pair with new browser if app is still paired wit previous browser
Home Reading App	FIX: Android app stuck in loop when denying camera permission on opening home reading
Viewer	FIX: Not all studies from order are loaded in series picker
Login	FIX: avoid losing pairing with Lastpass or Google authenticator app for 2nd factor authentication
WCF	Add setting to define delay when sending report available SMS

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM Router	FIX: Endless loop router when trying to delete file that has already been deleted or moved
Login	Reset password unlocks locked account
PACS Sync	**Possibility to send images directly from modalities without studies being removed by PACS synchronization afterwards**
Access	FIX: If a delay is configured for availability of report, images are not available via patient login either
Login	Allow to disable Tutorial and cookie warning in URL integrations
Studies	Show accession number in Overview - Anomalies list
Share	FIX: Share study anonymized and sending reference number via SMS does not work
WCF	ORM parser - remove unnecessary warnings in Windows Application log
Management	User activation mail available in Slovenian
Reports	Header tags are stripped from DICOM SR with HTML report text
Access	Log on removal of access rights by administrators
PACS Sync	Ability to perform multiple C-Moves in parallel

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Login	Allow use of PACSonWEB app when logging in with a user created through AD integration
COZO	Show user agreement only once when opening multiple studies via COZO
WCF	FIX: Report Status not correct if DICOM object and ORU are processed at exact the same time
WCF	HL7 ADT Merge - Don't fail messages trying to merge the same patient
Access	Add username who transferred the study to the PACS in study administration
DICOM Router	Router - Visual Notification that a Route is disabled
DICOM router	[Standalone Router - UI] retry failed queue without having to stop the service
DICOM router	[Standalone router - UI] - change font in filter and transformer script windows to a console font for better readability
Login	Sort list of delegates

12.1.40 Release notes version 3.2.900 (23/09/2019)

Project Plan	Release Note
Global	Integrate Digital Ordering in PACSonWEB
Global	Upgrade .NET framework dependency to 4.8

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Global	**Slovenian as UI language for PACSonWEB**
Groups	Group confirmation dialog: include all users for admins (also those that choose not to expose their contact details)
Login	**Display clear message if results are not yet available for a security code.**
Login	Repeat source contact number at the bottom of the support page
Login	Bug Fix: 'Send backup SMS' does not work in OTP page when using the authentication app
Login	Bug Fix: OTP still send via mail when switching form SMS to mail
Users	Reactivate account when logging with Belgian EID
Access	Allow to hide studies for none strong authenticated users for your source
Anomalies	In the anomalies page: Clear message when trying to merge patient that has already been merged (e.g. via ADT)
Download	Reduce impact of viewing studies with a large number of images (> 20.000) on PACSonWEB backend
Download	Bug fix: Download single image does not work in IE or Edge
Download	Additional access logging in case studies are downloaded from PACSonWEB

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	**Add support for reference lines and linked scrolling in CT multi-frame studies**
Viewer	Bug Fix: Reference lines are off by 1 image
Viewer	Toolbar not drawn while loading study
Viewer	Bug Fix: Fetch for patients or when opening via COZO is no longer possible
Share	Show full patient name in email when allowed when authentication is required for security code
Reports	**Merge home reading and PACSonWEB Authenticator app for Android & support switch language**
Home Reading/Authentication App	PACSonWEB App for iOS: Improve usability
Dicom Processor	Support OtherPatientIDsSequence for sending social security numbers
Monitoring	Refined monitoring detect a delay in uploading images to PACSonWEB
Monitoring	Add monitoring checks to WCF3 router embedded in the client
PACS Push	Bug fix: using StudyInstanceUID as accession number resulted in unconstraint query in PACS synchronization
Router	Bug Fix: images with space as accession number are stuck in the router queue

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

WCF	Bug fix: PACSonWEB gateway processing DICOM files (0kb) before they are fully saved by the DICOM Router, causing them to fail
WCF	Bug Fix: Incoming Images processing did not always recover form lost connections

12.1.41 Release notes version 3.2.801 (09/08/2019)

Project Plan	Release Note
DICOM Processor	Bug fix: for files that image upload to PACSonWEB (DICOM Processor failed) • If there is no accession nr. in the DICOM file • If Images were not registered by the WCF3 server • Images send to a client for one WCF client of one source but need to be linked to other source
WCF	Bug fix: Procedure of existing study updated to 'UNKNOWN' if no procedure is passed in ORM/ORU

12.1.42 Release notes version 3.2.800 (26/07/2019)

Access	Show/Hide "Add Study", based on user setting
Access	Show Bank-ID logins in access logging
Dicom Processor	Fix: correction in default window level in case the Study contains a VOILUT sequence

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Download	Update referring physician (0008:0090) when downloading or transferring a study
Explore	**Allow user to change order of filters in the explore page**
Explore	Fix: Patient search based on National Number search for Norway and new countries
Explore	Add order level information in the study administration
Explore	**"Select all" checkbox for selecting all studies in (filtered) PACSonWEB explore page**
Explore	Improved performance for searching on Patient ID
Global	**Internet Explorer 9 and Internet Explorer 10 no longer supported**
Login	No OTP required to add study, requiring second factor authentication, in case the user is already strong authenticated
Login	**Use of PACSonWEB authentication app for two-factor authentication**
Reports	Fix: ReferenceNumber in PrintReport template generated a new security code instead of printing an existing one
Reports	**Allow to switch language during speech recognition (iOs only, Android app to be released with PACSonWEB 3.2.900)**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Router	Fix: improve performance of federated queries
Router	Improved throughput of DICOM Router in case of many faulty DICOM files
Share	Ignore the leading "0" when entering a mobile number when sharing a study
Share	Fix: Anonymization/Pseudonymization creates a study instance UID that is more than 64 charachters
Share	By default set two-factor authentication when sharing with a self defined recipient
Access	**Sources can impose "Break-the-Glass" requirement for group members of the requesting physician to motivate access**
RSW	Fix: Limit retries for unregistered patients in RSW
COZO	Fix: GetTransactionList for patient with studies in multiple private practices
Viewer	Reload of a prior study after fetching does not change open study
Viewer	Improved interaction with circle annotation
Viewer	**Make / Share / Hide annotations in PACSonWEB**
Viewer	Fix: take in account origin tags for positioning of imported annotations

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Viewer	Download single image as png, e.g. to use in a presentation.
WCF	Improved handling of images with accession number in a non-default tag
WCF	Fix: "File in use by another process" exceptions while processing incoming images
WCF	Invalid security codes in ORM or ORU no longer blocking for processing remainder of the message
WCF	Improve performance of C-Move requests to PACSonWEB

12.1.43 Release notes version 3.2.701 (15/05/2019)

Share	Bug fix: Default anonymization gets stuck on 'loading files...'
DICOM Processor	Bug Fix: Incorrect default window level issue for multi frames with SharedFunctionalGroupSequence
DICOM Processor	Bug FIx: Incorrect default window level on images that have VOILUT and a Window width and center tags populated
Global	T+left click listed for 3-point angle, while implemented shortcut is G+left click
Share	Bug Fix: Only one line is shown in forward status
Login	Bug fix: Can't login with delegate user

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.44 Release notes version 3.2.700 (10/05/2019)

Login	**Customized Support FAQ page: hints in case of user issues for patients and requesting physicians**
DICOM router	**Federated query: C-Find, C-Move for studies of other sources for a patient in order to make studies from PACSonWEB available in the local PACS system**
Login	**Improved EMR/PACSonWEB URL integration : access logging on correct user & personal annotations**
Login	**Usability improvement for 2 factor authentication: OTP via mail or SMS, mail token to allow adding mobile number**
Localisation	Spanish and Italian as GUI language
RSW	**eHealth: RSW cloud-to-cloud integration: delete transaction + retry failed posts**
Viewer	**New tools: line and 3 point angel annotations**
Explore	**Search on Patient ID in PACSonWEB overview page**
Share/download	**Anonymization/Pseudonymiza tion schemes (paying feature): allows to apply a specific anonymization scheme e.g. for studies used in a research project**
Share	Change label to 'medical department' in sharing

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

Access	RADION - for new requesting physician, get RIZIV numbers from name suffix in DICOM header to map to a PACSonWEB user
PACS Push	Removing study based on StudyInstanceUID sometimes not correct when study has multiple studyInstanceUIDs
Dicom Processor	Bug fix: source setting 'getReportFromSR=false' is not respected
Reports	Print report uses PACSonWEB user language instead of browser language
Users	Improvements in mails to users: Mr./Ms. based on gender
Viewer	Extend URL integration to allow passing an order number
Login	Trust this computer for 30 days. Don't ask OTP again.
Login	Don't show Cookies warning in an EMR integration
Studies	Bug fix: DICOM Tags not shown in 'Dicom Tags'-popup
Groups	Admin users should be able to see all group members, even those that don't show contact details
Share	Bug fix: Avoid two bucket codes generated when sharing studies from the PACS Overlay

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Router	Bug fix: add support in DICOM router for accession numbers that contain system reserved characters
Download	Bug fix: Error when transferring study a second time when the 'imported' label was added
Share	Bug fix: Email validation fails when email address domain contains an uppercase value
Explore	Improve usability of Add study
Login	Bug fix: Password box is shown after invalid login with AD/FS
Global	Add warning that 3.2.700 is the last version that supports IE9 and IE10
Studies	Automatically reload study when the fetch is finished
Access	Send text messages when images are available only after receiving HL7
Login	Bug fix: Reset passwords sends multiple mails, only last one works
Favorites	Show favorite medical department in user settings
Studies	Bug fix: Cannot merge studies (e.g. when accession number changes) after a transfer action
Router	Allow to enforce transfer syntax
Access	Source setting to allow or block automated sharing of exams with group members

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.45 Release notes version 3.2.603 (12/02/2019)

WCF	Bug fix: When a series moves between studies, images are still linked to original study => broken image icon
Viewer	Don't show studies with empty order number as being from same order
Viewer	Don't show tutorial when opening PACSonWEB from EMR
Login	Configurable timing for logout on inactivity for PACSonWEB in EMR integrations
Viewer	Bug fix: Script error when selecting window level preset before series is fully loaded in embedded browser

12.1.46 Release notes version 3.2.602 (28/01/2019)

Share	Remember previous share settings
Share	Allow sending of Reference number and OTP code to the same destination type (mail / mobile) based on source setting

12.1.47 Release notes version 3.2.601 (24/01/2019)

Login	Bug fix: Not possible to login with username and password if no mobile number is registered
Login	Bug fix: SendOTPToMail not working if no mobile number is registered

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

DICOM router	Resolved performance issue for image processing
Explore	Resolved performance issue for queries on security code
COZO	Bug fix: Open study through COZO link
Login	Enhanced layout of customer logo on login page
Share	Quick sharing with non-PACSonWEB users
WCF	Improved performance by load balancing on ORM processing
DICOM Processor	Support additional SOP classes to get report from DICOM SR reports: • 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 Enhanced SR • 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Comprehensive SR
DICOM Processor	Bug fix: Densitometry secondary captures not correctly processed

12.1.48 Release notes version 3.2.600 (11/01/2019)

Login	Required Opt-in terms and conditions on login page
Login	Enhanced AD / ADFS login
Login	Login page restyled
Login	Patient login through Bank ID (Norway only)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Login	Minimum requirements for security codes
Sharing	**Reworked sharing for better usability**
Sharing	Bug fix for Retrying a share task creates the bucket/DU POW code
Sharing	Improved patient privacy in sharing mails
Sharing	Validity period for shared studies configurable on source level
Study Page	Faster way for loading 16-bit images
Study Page	Bug fix: Diacritics not shown properly in "Show DICOM tags"
Study Page	Automatically link series with same table position
Study Page	Stepless zoom - freeze and change cursor on the spot you want to zoom on
Study Page	Fetch images for created studies, based on ORU only
DICOM processor	SR support for nested sequences
Management	DICOM tag filter management
Report	Correct handling of SR report status (partial, preliminary, unverified, validated)
DICOM Router	UI for standalone router
Monitoring	Management tool for Checks

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.49 Release notes versie 3.2.503 (31/10/2018)

Login	Improvement: AD integration login also accounts for trusted subdomains
Share	Bug Fix: transfer fails due to incorrect use of the 'Created' TimeStamp

12.1.50 Release notes versie 3.2.502 (14/09/2018)

Access	Bug Fix: security patch for restriction of access for source admins on shared repo

12.1.51 Release notes versie 3.2.501 (13/09/2018)

Viewer	Bug fix: series grouping of XA images, based on SOPInstanceUID
Share	Bug fix: Sharing of a study with a blocking anomaly is not possible and a clear warning on the issue is shown
Explore	Unfiltered list is displayed immediately after clicking "Reset filters" in explore page
DICOM Processor	Improved load balancing in DICOM processor

12.1.52 Release notes version 3.2.500 (29/08/2018)

General	Use of language picker for faster switching of interface language
General	**New Feature: PACS archiving in PACSonWEB**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Sharing	Bug fix: Uploading studies from PACS overlay for non PACSonWEB users
Sharing	Sharing with a group: possibility to send notification mail to entire group
Sharing	Adjustment on access rights when sharing study multiple times with the same user
Study Page	Grouping of XA modality on SOPInstanceUID in sead of SeriesInstanceUID
Study Page	Default use of (0008,2144) RecommendedDisplayFrameRate in Cine loop
Explore Page	Increased stability for preforming large worklist queries
Explore Page	Correction in case of anomalies for small screens
Explore Page	Disable filter fields when query is running
Reports	Bug fix: reports not visible on small devices when no images
Users	Support for multiple physician numbers per registered user
Login	**New Feature: payment module for patients**
Monitoring	Advanced monitoring on local installations
Active Directory	**New Feature: support for Active Directory Federated Services (ADFS)**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Access	Increased security on automated mappings
Interfaces	**New Feature: Direct link from EMR to PACSonWEB**
Interfaces	**New Feature: RSW and Abrumed integration**
WCF	Allow ADT patient merges in case of study anomaly
DICOM Router	Enhanced DICOM router: support JPEG 2000 transfer syntax, remote configuration, PACS archiving
Reports	Improved parsing of HTML reports

12.1.53 Release notes version 3.2.402 (05/07/2018)

Studies	Bug fix: In case a DICOM file or HL7 message is received for a known Study instance EUID or accession number but a different patient an anomaly is registered

12.1.54 Release notes version 3.2.401 (07/05/2018)

Viewer	Bug Fix: patients no longer get an error message when fetching expired images with a providing source
Image viewing and manipulation	Bug Fix: location of density measurement now aligned with tip of droplet picker

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.55 Release notes version 3.2.400 (13/04/2018)

General	Support links to PACSonWEB from MS Word, Excel, Powerpoint, ...
General	Advanced detection and blocking of unsafe HTML tags
Share Study	Modify expiration date for shared studies
Share Study	Enhancement: Clearing patient information from private DICOM tags when sharing a study anonymously
Study Page	**New Feature: Indication on how long images will be available**
Study page	Small enhancements on patient anomalies overview page
Study Page	Improved scrolling sensitivity in CT and MR series
Study Page	Clear message if report is not, not yet or will never be available for patient and requesting physician
Study Page	Improved usability for changing measurements
Study Page	Bug fix: window level for multiframe tomo
Explore Page	Clear indication which filters are set
Explore Page	Filter fields are blocked when performing a search

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reports	**New feature: Make report available to patients after x days**
Users	Supporting identification numbers from other countries for physicians (RIZIV, HIN, INSEE, ...)
Management	Implementation of SQL and task manager
Login Page	Privacy policy is available from the login page (GDPR compliance)
PACS Push	HL7 based filtering for DICOM forward scenario
Groups	Improved usability for group management confirmation
Administration	Automatic sending of mails for new accounts and password reset
Home Reading	Warning in case no postback to RIS is possible due to missing information
Active Directory	Enhancement for better AD account handling

12.1.56 Release notes version 3.2.300 (27/12/2017)

3.2.300	General	Fine-tune banner information
3.2.300	Home Reading	Version check on app upon startup
3.2.300	Home Reading	Disable automatic time-out on microphone in case of no speech

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

3.2.300	Sharing	**New feature: Email on new study, checkbox per mapping**
3.2.300	Sharing	Preferences on sharing settings are retained
3.2.300	Explore Page	**New Feature: Display multiple modalities**
3.2.300	WCF	Improved HL7 handling (multiple report types, cancel messages, ADT)
3.2.300	DICOM Processor	Bug Fix: handling of XA images
3.2.300	Study Page	**New feature: Fetch functionality for expired images**
3.2.300	Study Page	Display all exams in series picker in case of multiple studies for same order
3.2.300	Study Page	**Extended feature: Anomalies on patient level**
3.2.300	Study Page	Show original DICOM tags for source admins
3.2.300	Management	Advanced user and group management functionality
3.2.300	Management	COZO encryption support tool

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

3.2.300	Administration	**New Feature: Possibility to regenerate security codes**
3.2.300	Administration	Timestamp on access registration
3.2.300	Transfer	Failover in case WCF crashes during transfer
3.2.300	Transfer	Accession numbers are displayed with progress bar
3.2.300	Active directory	Active directory integration enhancements
3.2.300	PACS Push	Improved handling on reopened exams

12.1.57 Release notes version 3.2.200 (26/07/2017)

3.2.200	Home Reading	**New Feature: Possibility to create a report using speech recognition through app on smartphone (iPhone + Android)**
3.2.200	Sharing	Possibility to revoke access, granted through DU POW bucket code
3.2.200	Explore Page	Message to clear filter from explore page in case of no results

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

3.2.200	Explore Page	Performance improvement on loading explore list
3.2.200	DICOM Processor	Processing of ColorSoftcopyPresentationStateStorage (CSPS) files
3.2.200	Study Page	Bug fix: printing single issue from Chrome
3.2.200	Study Page	Locking mechanism when editing report

12.1.58 Release notes version 3.2.102 (23/06/2017)

Viewer	Bug fix: opening exam takes too long due to query to look for removed images

12.1.59 Release notes version 3.2.101 (15/06/2017)

Login	Bug fix: issue with password reset in case password has expired
COZO	Bug fix: issue with access through COZO

12.1.60 Release notes version 3.2.100 (13/06/2017)

General	Adaptation of 'About box and terms and conditions' as PACSonWEB is now certified as a CE class IIa medical device
Login	Mail on password reset procedure
Explore Page	Add studies for a group instead of a single user (only for group admin)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Explore Page	Clear filters from within explore pane when no results match the given criteria
Study Page	Possibility to add the report as SR when downloading
Study Page	Notification when images are removed due to expiration of retention
Study Transfer	Retry on progress page in case transfer fails
Study Page	**New Feature: Fast select + shortcuts for stepless zoom / pan / window level**
AD integration	Allow trusted IPs when logging in using AD authentication
Administration	Extended logging on admin access
COZO	Extended logging on study access through COZO

12.1.61 Release notes version 3.2.0 (20 March 2017)

General	**New Feature: Information banner for notifications**
General	New functionality: link to localized manual (WEB + PDF)
General	Enhanced About box
Login	Enhanced login page
Login	Security enhancements (generic messages)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Explore Page	New functionality: Message labels for sharing with user
Explore Page	New functionality: Filtering on national number
Explore Page	Bug Fix: sharing +20 exams at once
Study Page	New functionality: Notification on clinical use
Study Page	New functionality: copying of report
Study Page	Bug Fix: caching issue in case an exam is opened before the images are available
Study Page	**New Feature: Display of registered Anomalies**
Management	**New Feature: New management pages with enhanced functionality + look and feel**
Administration	**New Feature: Administration of registered Anomalies**
PACS Push	Enhancements PACS Push
PACS Push	Back-end for manual synchronization of studies
PACS Push	Enhanced synchronization PACS - PACSonWEB
COZO	Enhanced audit trail COZO

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.62 Release notes version 3.1.201 (19 January 2017)

Sharing	DOB is incorrectly displayed in sharing Wizard
COZO	Fix for audit trail end-point
Export to PACS	Osirix import fix

12.1.63 Release notes version 3.1.200 (18 November 2016)

Explore Page	New feature: Option to print sharing information in different language is available in the "Forward Status page"
Explore Page	Fix: Time out on downloading very large studies
Sharing	Fix: Date restriction for sharing a study
Sharing	New Feature: Share with user unlimited in time
General	New feature: Manual can be downloaded as PDF from the help function
Export to PACS	Fix: Issue with progress bar
Study page	New feature: Default 1-up representation on mobile devices
Study Page	Fix: Translation for tool labels
Login Page	**New Feature: Login via Active Directory on e-mail address instead of Windows user name**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

12.1.64 Release notes version 3.1.100 (24 October 2016)

Login Page	New Feature: Login history available from the user settings page
Study Page	New Feature: Density measurement tool available for CT in study page
Export to PACS	**New Feature: DICOM IMPORT tool available for controlled import of studies from PACSonWEB into the local PACS (optional)**
Study Page	Fix: Report cannot be copied when not in edit mode

12.1.65 Release notes version 3.1.1 (14 October 2016)

Login Page	Fix: SMS code for activation when logging in with eID for new accounts
Login Page	Fix: eID session is closed when logging out
Login Page	**New Feature: Redirect to new study page is activated for anonymous login**
Study Page	Fix: bug for a specific version of IE11

12.1.66 Release notes version 3.1.0 (14 October 2016)

General	Fix: Group validation not shown for users not in group
General	Change request: Doctors national number format has been adapted (RIZIV in Dutch)

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Login Page	**New feature: eID allow users to automatically logon - Only for physicians**
Login Page	New feature: Accounts can have expiration date, necessary for temporary employees
Sharing	New feature: Remove favorites in address book from sharing wizard
Sharing	Fix: Scroll bar added to sharing wizard when selecting multiple exams from the explore page
Sharing	Fix: Subject read notification is localized
Sharing	New feature: Custom formatting/Layout of e-mails
Sharing	New feature: Read/Write rights can be delegated if allowed by source
Explore Page	**New feature: Download multiple exams simultaneously**
Explore Page	New feature: Search DU POW code in progress overview
Explore Page	New feature: Sorting remains after auto refresh (account setting)
Explore Page	New feature: Filtering on access numbers with algoritm applied
Study Page	**New feature: NEW viewer (phased activation)**
Study Page	New feature: Automatic signature when modifying report

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Study Page	New feature: Better indication when modifying report (red border)
Study Page	**New feature: New administration page for administrative manipulations and access consultation**
Image Clean-up	Change: Improvements to information Life Cycle Management
Workflow	Fix: Fix for downloading PNG images for very large studies
User Settings	Fix: Layout fixes for Safari
DICOM Router	Known bug: Study Instance UID might not be updated in particular cases when HL7 arrives before images

12.2 Known bugs

Critical defects (safety related)

Reference	Title and Description
SIP-6309	**Large study comments** Studies with study comment exceeding 2024 characters will not be processed. Workaround is available by removing or truncating the study comment from the DICOM files in the integration.

Non-critical defects

The issues listed below have not yet been resolved in the current version of this product. Please communicate this to all users.

Reference	Title and Description
SIP-6197	**PACSonWEB Gateway**

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reference	Title and Description
	A newly installed WCF client does not automatically create the log folder. Awaiting a fix, you'll need to create it manually to have logs.
SIP-6235	**Recognosco Atlas** speech recognitionSpeech recognition can not be initialized due to special characters originating from copy paste from a rich text editor. Workaround: avoid special characters in text block by using paste as text or typing the voice command.
SIP-6358	**Reports** Links to images in report are broken when images are resent. Workaround: One can still find the image in PACSonWEB based on the textual information.
SIP-6263	**MPR/3D** MPR and 3D do not work on a series that also contains non-visible instances. A workaround is to send non-visible object in a separate series.
SIP-6348	**Print PDF report** Printing a PDF report is not yet supported when using DU PACSonWEB on a phone or tablet.
SIP-6214	**PACS Sync** PACS sync consumes a lot of memory when using image level queries for very large studies. Workaround is to disable image level queries for the sync job for sources that frequently send very large (30k+) studies.
SIP-3931	**Annotating an MPR image**In MPR mode, adding an annotation can be interrupted when crossing the orthogonal axis lines.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Reference	Title and Description
SIP-4569	**Cut and paste text**When using speech recognition in the DeepUnity PACSonWEB multi-monitor app, cutting and pasting text sometimes pastes the text at the end of the report instead of at the cursor position.
SIP-3878	**Double login request**The login request for DeepUnity PACSonWEB authenticator is sent twice. This does not have any functional impact.
SIP-5945	**Drag thumbnail to secondary window**Dragging a thumbnail from the series picker into a viewport on a secondary window doesn't always work. If the user redoes the drag action, it works.
SIP-5633	**Wrong display of US cine loops**Wrong display of ultrasound cine loops with photometric interpretation YBR_FULL_422, if the preferred DICOM transfer syntax is set to 'Explicit VR Little Endian'.

12.3 Version PDF du mode d’emploi

Les versions antérieures des manuels d'utilisation et des notes de mise à jour de DeepUnity PACSonWEB peuvent être téléchargées à partir de https://download.dedalusportal.com/s/PSdoCBbjcPj6np5. Veuillez contacter votre interlocuteur de service régional pour obtenir un mot de passe d'accès valide.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Informations juridiques et réglementaires

© Copyright 2026 Groupe Dedalus. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de DH Healthcare GmbH.

DH Healthcare GmbH se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

Une copie imprimée peut être obtenue sur demande.

Ce produit est une marque déposée de Dedalus S.p.A ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont citées à des fins rédactionnelles uniquement.

DH Healthcare GmbH, Konrad-Zuse-Platz 1-3, 53227 Bonn, Allemagne

Dans ce produit, les paramètres et les fonctionnalités utilisateur sont déterminés par des options de configuration et des paramètres de sécurité.

Ce produit peut être modifié pour s'adapter aux flux de travail et aux méthodes utilisés dans votre hôpital.

Par conséquent, il se peut que les fonctionnalités et les paramètres d'affichage décrits dans le présent document diffèrent de la pratique. Les paramètres peuvent également varier d'une UF à l'autre en fonction de leurs responsabilités.

Formulation sans distinction de genre

Le présent document utilise le genre masculin afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Les termes correspondants s'appliquent donc à tous les genres.

Historique du document

Dernière mise à jour de ce document : 26/02/2026

https://my.dedalusportal.com/

CE 2862

MD

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

SSN : DOC-4249895

CH REP

DH Healthcare Switzerland AG,
Bahnhofplatz 1a, 8304 Wallisellen, Suisse

UDI

04260693990125

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés

Ressources d’aide

Les informations relatives à l’installation, à la configuration et à l’utilisation de ce produit sont fournies de la manière suivante :

Type	Contenu
Manuel d’utilisation	**Fournit des instructions à l’utilisateur final sur la manière de faire fonctionner le système de manière sûre et efficace pour une utilisation quotidienne et fournit des conseils sur son fonctionnement.**
Notes de mise à jour	Donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités, des améliorations apportées aux fonctionnalités existantes ainsi que des corrections de problèmes incluses dans une mise à jour du produit.
Manuel de l'administrateur	Fournit des instructions et des informations sur les produits concernant les tâches à effectuer par les utilisateurs clés et le personnel informatique sur le site du client. Cela peut notamment inclure les paramètres de configuration, les options d'intégration et la maintenance du système.
Manuel d'entretien	Destiné au personnel d'entretien et d'assistance de Dedalus, ce manuel comprend notamment des instructions détaillées et des informations sur le produit pour des tâches telles que l'installation, l'étalonnage et le contrôle des performances du système.

Si ces documents ne contiennent pas les informations que vous recherchez, veuillez contacter votre représentant Service et Support.

Version

Si le numéro de version contient un « x », la documentation relative à une version spécifique s'applique généralement aux mises à jour de service ou aux correctifs associés, sauf indication contraire. Alors que les hotfixes corrigent généralement des défauts sans introduire de nouvelles fonctionnalités, les mises à jour de service peuvent inclure à la fois des corrections et de nouvelles fonctionnalités. Une documentation mise à jour peut encore être publiée pour des mises à jour de service spécifiques, le cas échéant.

©2026 Dedalus Group - Tous droits réservés
SSN : DOC-4249895